

CAMP[®]

Humerux

humerusortos med maximal kontroll genom det unika dragsystemet.

traction
system[®]



Humerux

humerusortos med maximal kontroll genom det unika dragsystemet.

Ortosen är avsedd vid behandling av Diaphysala humerusfrakturer, postoperativ frakturbehandling och för kontroll av instabilitet genom läkningsprocessen.


▲ Y-dragsystem använder en draganordning för att öka och justera spänningen, vilket hjälper till att maximera kontrollen över inriktning, fixering och immobilisering av humerus.



Ytraction system®

▲ Textil som andas och ger en skön vaddering mot huden!

100% LATEX FREE ✓

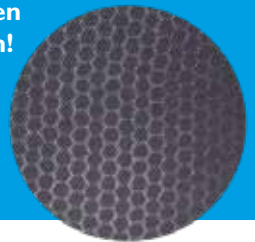

▲ Plattorna och banden stabiliserar humerus genom individuell anpassning och den cirkulära kompressionen runt mjukdelarna.

Den erkända Sarmiento-principen ger optimal kompression runt mjukdelarna. Plattorna kan formas anatomiskt vid behov genom uppvärmning*.




▲ Lättjusterat bröstband hindrar ortosen från att glida ner. Polstrat i armhålan för bästa komfort.

▲ Fixering genom 3 band som löper genom dubbelspännen och med lågprofil kardborre ger en smidig, enkel, bekväm och säker justering.

*Tag ur termoplastplattorna ur ortosen, värm försiktigt med värmepistol till ca 150°C på ca 15 cm avstånd.

Art.nr.	Storlek	Längd	Omkrets
62105 0011	Small	37 cm	18 - 26 cm
62105 0012	Medium	38 cm	26 - 34 cm
62105 0013	Large	41 cm	34 - 42 cm
62105 0014	X-Large	42 cm	42 - 50 cm

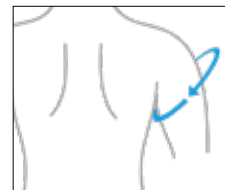

CAMP®
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE
Tel 042-25 27 00
E-post info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no