


Carbon Footplate & Carbon Footplate Rigid



Carbon Footplate för stöd och stabilitet

Utvecklad med närmare tre decenniers erfarenhet av ankel- och fotortoser i kolfiberkomposit.

Vår kolfibersula är autoklaverad, lätt och formad efter skons silhuett för en bekvämare passform. Kolfibersulan bidrar till minimerad smärta smärta för patienter med olika stressfrakturer, skador eller artrit i fram- eller mellanfotsregionen. Sulan finns i två olika versioner, normal och rigid, för att möta individuella behov.

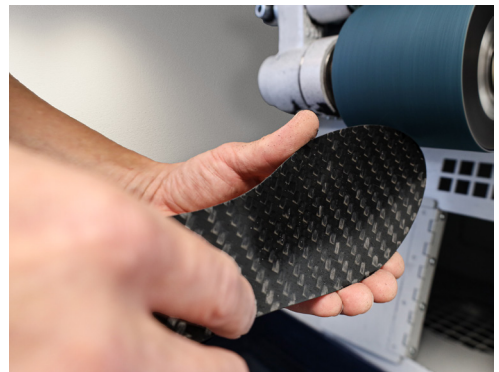

Använd en bandslip eller Dremel för att slipa och anpassa Carbon Footplate. Följ alltid bruksanvisningen som medföljer produkten när du anpassar Carbon Footplate.

Artikelöversikt

Art..nr.	Modell	Storlek	V/H	Längd	Bredd	Tjocklek
280351011	Carbon Footplate	Small	Vänster	235 mm	77 mm	1,8 mm
280351012	Carbon Footplate	Medium	Vänster	255 mm	80 mm	1,8 mm
280351013	Carbon Footplate	Large	Vänster	275 mm	90 mm	1,8 mm
280351014	Carbon Footplate	X-Large	Vänster	305 mm	99 mm	1,8 mm
280352011	Carbon Footplate	Small	Höger	235 mm	77 mm	1,8 mm
280352012	Carbon Footplate	Medium	Höger	255 mm	80 mm	1,8 mm
280352013	Carbon Footplate	Large	Höger	275 mm	90 mm	1,8 mm
280352014	Carbon Footplate	X-Large	Höger	305 mm	99 mm	1,8 mm
280361011	Carbon Footplate Rigid	Small	Vänster	235 mm	77 mm	2,0 mm
280361012	Carbon Footplate Rigid	Medium	Vänster	255 mm	80 mm	2,0 mm
280361013	Carbon Footplate Rigid	Large	Vänster	275 mm	90 mm	2,0 mm
280361014	Carbon Footplate Rigid	X-Large	Vänster	305 mm	99 mm	2,0 mm
280362011	Carbon Footplate Rigid	Small	Höger	235 mm	77 mm	2,0 mm
280362012	Carbon Footplate Rigid	Medium	Höger	255 mm	80 mm	2,0 mm
280362013	Carbon Footplate Rigid	Large	Höger	275 mm	90 mm	2,0 mm
280362014	Carbon Footplate Rigid	X-Large	Höger	305 mm	99 mm	2,0 mm

Bekväm passform

Minskad smärta

Kolfibersulan är utformad för att skydda MTP-lederna och framfoten genom att begränsa rörelseomfånget (ROM), fördela trycket och underlätta en naturlig avveckling av steget. Den kan även användas efter immobiliserande behandling med en postoperativ sko eller walker för att gradvis öka rörligheten. Vid amputation av tå IV och/eller V kan den även förbättra balansen.

Carbon Footplate Rigid ger extra stöd och stabilitet där rörelseomfånget i tålederna behöver begränsas ytterligare. För patienter med tåamputation bidrar sulan till bättre balans och ett mer effektivt frånskjut i slutet av ståfasen.

För bästa komfort och funktion bör kolfibersulan täckas med en inläggssula.

Begränsar rörelseomfånget för att minska smärta.

Formad efter skon för en bekvämare passform.

Anpassad för skor med 5-10 mm klackhöjd.



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no