

CAMP®

ComfortPAD™

En alternativ
polstring för

YPSILON® *flow*



Ytterligare en lösning för
att möta varje brukares
individuella behov!

ComfortPAD™

ComfortPAD™ fungerar som en friktionsavlastning mellan ortosen och anläggningspunkten på benet. Den rör sig när benet rör sig vilket gör den extra funktionell i samband med olika sporter som t.ex. löpning och cykling. Den kan också vara en lösning för brukare som har en känslig hud eller mer uttalade prominenser på benets framsida.

- Kan enkelt tas på och av med en hand och du kan välja åt vilket håll du vill försluta bandet.
- Det breda bandet minskar risken för tryckpunkter på benet.
- Gör att ortosen följer med benet fint och ger en bra känsla av både stöd och komfort.
- Reducerad friktion mellan benet och ortosen vid aktiviteter som gång, löpning och cykling.

Art.nr	Beskrivning	Storlek
28886 0000	Ypsilon®FLOW ComfortPAD	One size



Sen jag började använda Ypsilon Flow har denna blivit min favoritskena i mitt dagliga liv. Nu när jag fått den nya polstringen så har jag även börjat använda Ypsilon Flow för promenader, golf och löpning! Jag fullständigt ÄLSKAR den här lösningen för den ger mig möjlighet till en hög aktivitetsnivå samtidigt som den är bekväm och hållbar!

Beth Deloria, GetBackUpToday TeamUP Co-Captain




"Dubbelsock" principen

Vid långa vandringar används med fördel dubbla strumpor. Då sker rörelsen mellan strumporna istället för mot huden.



"ComfortPAD" principen

Två lager av material skapar ett rörelsemellanrum som förebygger tryck mot hud och underben.

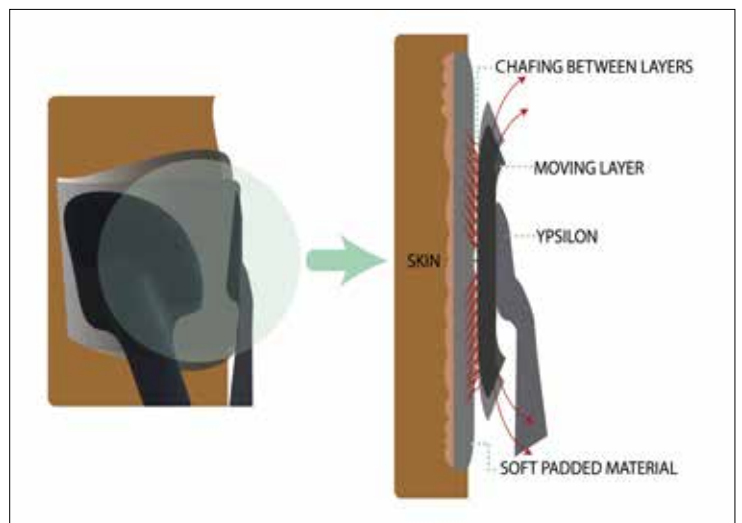

Ett externt laboratorietest uppmätte en friktionskoefficient på 0,35 mellan de två glidande textilmaterialen vilket innebär att friktionen mot huden reduceras med ca 25%.