

# ComfortPAD™

## En innovativ polstring för YPSILON<sup>®</sup>flow

ComfortPAD™ fungerar som en friktionsavlastning mellan ortosen och anläggningspunkten på benet. Den rör sig när benet rör sig vilket gör den extra funktionell i samband med olika sporter som t.ex. löpning och cykling. Den kan också vara en lösning för brukare som har en känslig hud eller mer uttalade prominenser på benets framsida.


- Kan enkelt tas på och av med en hand och du kan välja åt vilket håll du vill försluta bandet.
- Det breda bandet minskar risken för tryckpunkter på benet.
- Gör att ortosen följer med benet fint och ger en bra känsla av både stöd och komfort.
- Reducerad friktion mellan benet och ortosen vid aktiviteter som gång, löpning och cykling.



**"Dubbelsock"-principen**  
Vid långa vandringar används med fördel dubbla strumpor. Då sker rörelsen mellan strumporna istället för mot huden.



**ComfortPAD™ principen**  
Två lager av material skapar ett rörelsemellanrum som ferbygger tryck mot hud och underben.

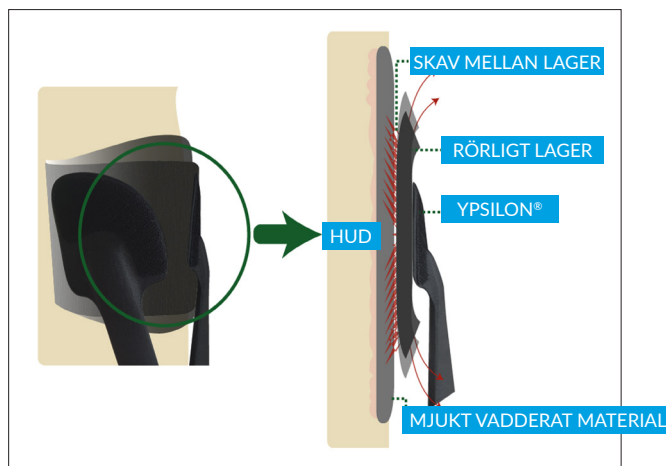

Ett extert laborietest uppmätte en friktionskoefficient på 0,35 mellan de två glidande textilmaterialen vilket innebär att friktionen mot huden reduceras med ca 25%.

Art. No.	Beskrivning	Storlek
28886 0000	ComfortPAD™ för Ypsilon®FLOW ½	One Size