

CAMP®

YPSILON® *flow*



Go with the flow!

- För den aktiva patienten med droppfot.
- När mindre stöd i ståfasen behövs.
- Ger ett större rörelseomfång.
- Dynamisk respons utan begränsningar!
- Ytterligare utveckling inom ankel-fot-ortoser genom Camps kolfiberkompositteknik som är känd i hela världen.

PS. den har också lägre klackhöjd, bara 7mm!



Fördelar med Ypsilon® FLOW

- *Optimalt rörelseomfång i sagittalplanet*

Anpassar sig väl till ojämn och backig terräng och även till personer med lång steglängd vilket ofta är ett funktionellt gångmönster för mer aktiva personer.

- *Fotbladets nya design*

Ger ett dynamiskt fotlyft utan att begränsa normal aktivitet.

- *Lägre klackhöjd*

Mer kontakt med underlaget i ståfasen vilket hjälper till att öka frånskjutet med mindre kraft. Underlättar för personer med svaghet i sagittalplanet att lättare "ladda" skenan.

- *Jämn och smidig undersida*

Passar väl mot insidan av skor.

- *Lätt lyft i framfoten*

Lägre kurvatur i framdelen av fotbladet ger mer plats i tåboxen.

Anatomiskt formad mot tibia

Trycket mot benet fördelas på båda sidor om tibiakammen utan att ge tryck mot prominenser. Smidig och tunn formpressad kudde som ger en låg profil. Det glansiga bandet hjälper kläder att glida över ytan. Kan anpassas för öppning från vänster eller höger sida.



För den som behöver mer flexibilitet!




Ypsilon Flow är droppfotsortosen för den aktiva patienten som har droppfot och behöver mindre stöd i ståfasen.

Den har utvecklats för att tillåta optimalt rörelseomfång och ge en dynamisk "ToeOFF®" funktion samtidigt som det är möjligt för muskler att arbeta mer aktivt.

Fotbladet följer fotens form och med hjälp av golvreaktionskraften kan användaren utnyttja "ToeOFF®" effekten med mindre styrka.

Den Y-formade fästpunkten ligger på var sida om tibia-kammen och minskar risken för tryck mot prominenser och mot tibiakammen. Därför är detta en ortos för den mer aktiva brukaren som ställer höga krav på funktion och rörlighet.

ToeOFF® - Familjens funktionstrappa

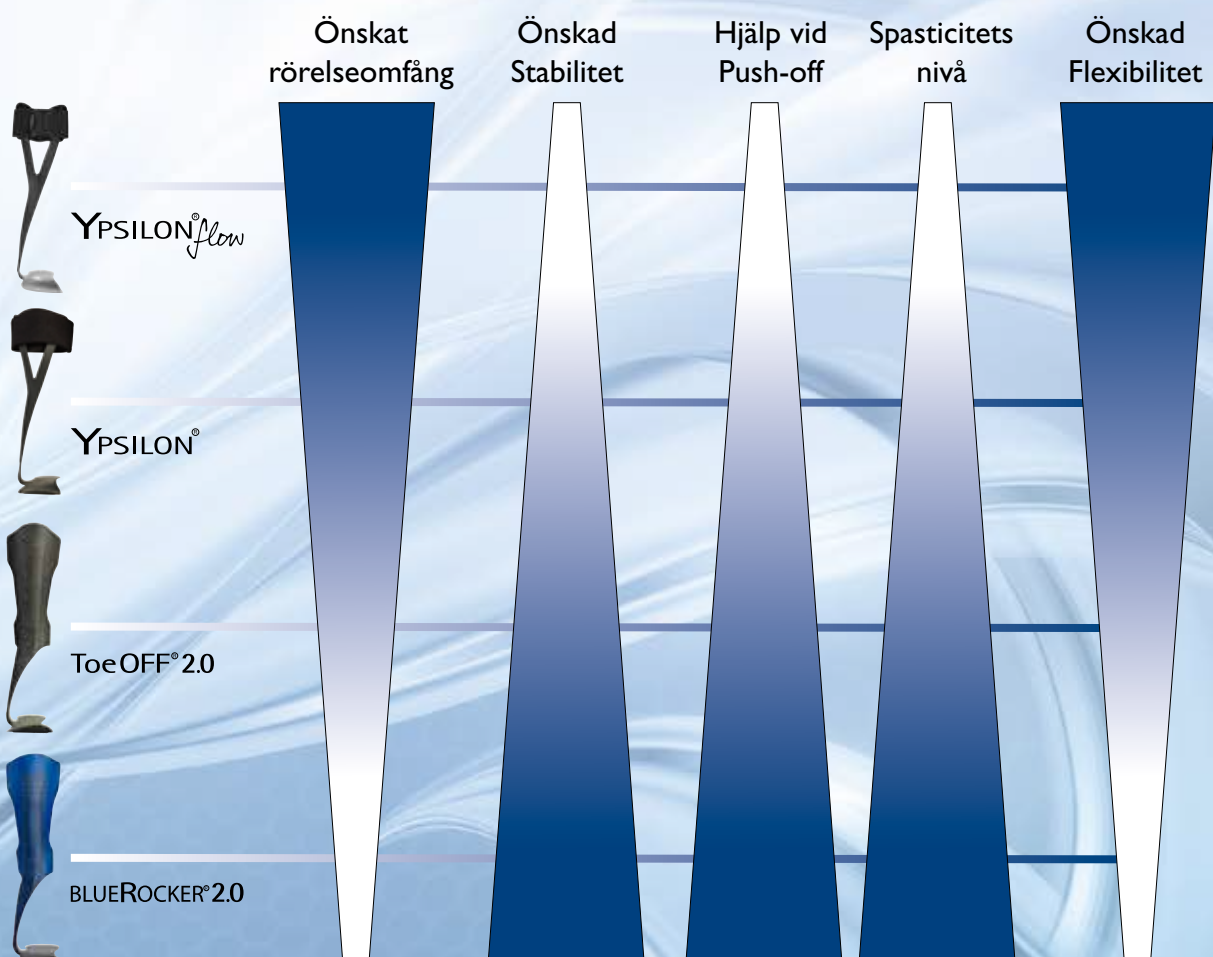

Support for Better Life!



Ypsilon®Flow, komplett produkt med polstring och band

Art.nr. Vänster	Art.nr. Höger	Storlek	Fotbladets längd	Total höjd	Hälhöjd
28880 1011	28880 2011	Small	230 mm	355 mm	7 mm
28880 1012	28880 2012	Medium	245 mm	365 mm	7 mm
28880 1013	28880 2013	Large	270 mm	375 mm	7 mm
28880 1014	28880 2014	X-Large	285 mm	385 mm	7 mm

Ypsilon®Flow, Utprovningsortos och utprovningssset

Art.nr. Vänster	Art.nr. Höger	Storlek	Fotbladets längd	Total höjd	Hälhöjd
28881 1011	28881 2011	Small	230 mm	355 mm	7 mm
28881 1012	28881 2012	Medium	245 mm	365 mm	7 mm
28881 1013	28881 2013	Large	270 mm	375 mm	7 mm
28881 1014	28881 2014	X-Large	285 mm	385 mm	7 mm
28882 0000	Komplett utprovningssset, Small - Large, vänster och höger.				

Ypsilon®Flow, Band och tibiapad

Art.nr.	Beskrivning	Storlek
28884 0012	Tibiapad, bilateral passar 3 storlekar	Small/medium/large
28884 0014	Tibiapad, bilateral	X-Large
28885 0000	Band, bilateral passar alla storlekar	En storlek

