

# S.W.A.S.H.<sup>®</sup>

## STEADY & GO STORLEKSGUIDE

| MIDJEDEL                                                                                                                                                                                                                           | Storlek | Modeller |    | Omkrets           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    |         | STEADY   | GO | Storleksintervall |
| <p>Mått:</p> <p>SWASH<sup>®</sup> STEADY- I nivå med midjan för god bålstabilitet.</p> <p>SWASH<sup>®</sup> GO- I nivå med ASIS. Bäst är att sätta ortosen på mellersta delen av bäckengördeln, för att få god höftstabilitet.</p> | 1       | ✓        | ✓  | 400-465mm         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 2       | ✓        | ✓  | 460-550mm         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 3       | ✓        | ✓  | 540-630mm         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | ✓        | ✓  | 620-720mm         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 5       | N/A      | ✓  | 710-810mm         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 6       | N/A      | ✓  | 800-900mm         |

| LÅRDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Storlek | Modeller |    | Omkrets           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | STEADY   | GO | Storleksintervall |
| <p>Tag cirkulärt mått distalt på lårbenet. Placera lårdelarna så distalt så möjligt utan att skapa tryck eller att påverka knäveckan.</p> <p>Däremot om det uppstår tryck på bålen, överdriven flexion av ryggen eller obehag av korta hamstringar, kan lårdelarna flyttas 2-8 cm proximalt.</p> | 1       | ✓        | ✓  | 210-250mm         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2       | ✓        | ✓  | 250-290mm         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3       | ✓        | ✓  | 290-330mm         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | ✓        | ✓  | 330-380mm         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5       | ✓        | ✓  | 380-440mm         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6       | ✓        | ✓  | 440-500mm         |


| BENSTAG                                                                                                                                                                                                        | Storlek | Diameter Benstag |     | Midja till Mid-patella |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |         | STEADY           | GO  |                        |
| <p>Mått tas från midja till mid-patella.</p> <p>Efter slutförd utprovning skall benstagen kortas av i nivå med lårdelarna och förses med gummiplugg.</p> <p>115° = smal sittyta</p> <p>123° = bred sittyta</p> | 1       | 6mm              | 8mm | 310mm                  |
|                                                                                                                                                                                                                | 2       | 8mm              | 8mm | 375mm                  |
|                                                                                                                                                                                                                | 3       | 8mm              | 8mm | 440mm                  |
|                                                                                                                                                                                                                | 4       | 8mm              | 8mm | 480mm                  |
|                                                                                                                                                                                                                | 5       | 8mm              | 8mm | 540mm                  |
|                                                                                                                                                                                                                | 6       | 8mm              | 8mm | 600mm                  |

| Storlek |             | MIDJEDEL STEADY | MIDJEDEL GO | LÅRDEL    | BENSTAG 115° | BENSTAG 123° |
|---------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 1       | STEADY      | 288520001       |             | 288540601 | 288550601    | 288560601    |
| 1       | GO          |                 | 288530001   | 288540801 | 288550801    | 288560801    |
| 2       | STEADY & GO | 288520002       | 288530002   | 288540802 | 288550802    | 288560802    |
| 3       | STEADY & GO | 288520003       | 288530003   | 288540803 | 288550803    | 288560803    |
| 4       | STEADY & GO | 288520004       | 288530004   | 288540804 | 288550804    | 288560804    |
| 5       | STEADY & GO | N/A             | 288530005   | 288540805 | 288550805    | 288560805    |
| 6       | STEADY & GO | N/A             | 288530006   | 288540806 | 288550806    | 288560806    |

Färgkodningen indikerar vilka delar som kan kombineras.

# S.W.A.S.H.<sup>®</sup>

## STEADY & GO komponenter

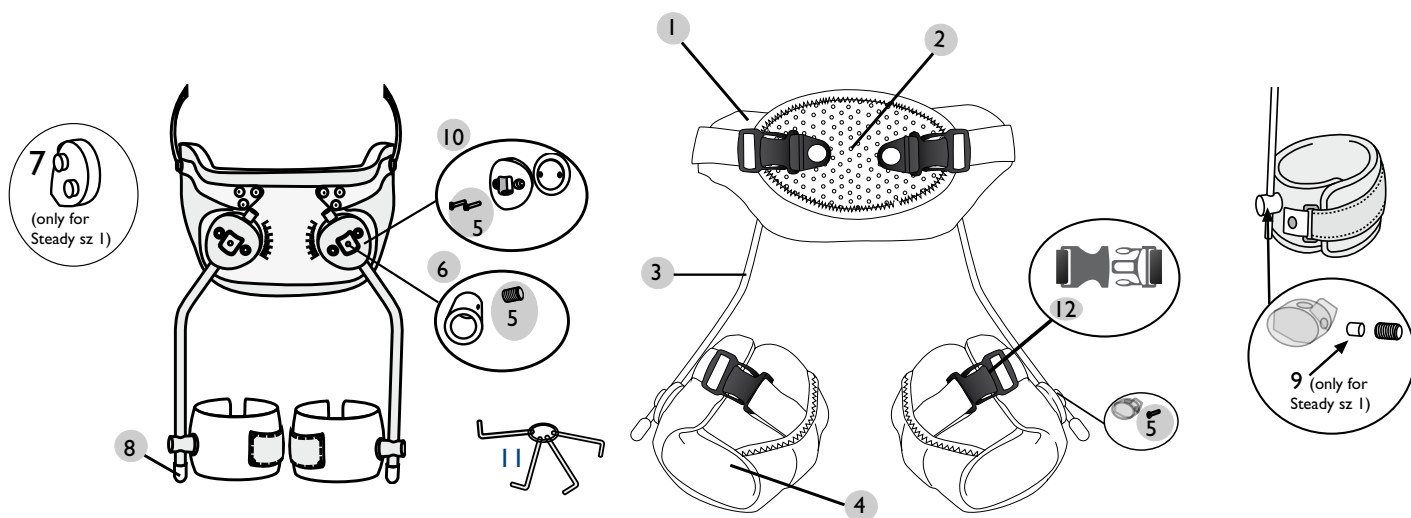

| Nr. | Beskrivning                           | Enhet | STEADY   | GO       |
|-----|---------------------------------------|-------|----------|----------|
| 1   | Textil midjedel inkl. magplatta       | 1 set | 28857    | 28858    |
| 2   | Magplatta                             | 1 st  | 28860    | 28860    |
| 3   | Benstag 6 mm   15°, storlek 1         | Par   | 28855-06 |          |
| 3   | Benstag 8 mm   15°                    | Par   | 28855-08 | 28855-08 |
| 3   | Benstag 6 mm   23°, storlek 1         | Par   | 28856-06 |          |
| 3   | Benstag 8 mm   23°                    | Par   | 28856-08 | 28856-08 |
| 4   | Textil för lårdel                     | Par   | 28859    | 28859    |
| 5   | Skruvset, storlek 1                   |       | 28861-06 |          |
| 5   | Skruvset, storlek 2 - 6               |       | 28861-08 | 28861-08 |
| 6   | Låsring, storlek 1                    | 2 st  | 28862-06 |          |
| 6   | Låsring, storlek 2 - 6                | 2 st  | 28862-08 | 28862-08 |
| 7   | Plasthölje för led, storlek 1         | 2 st  | 28863-06 |          |
| 8   | Gummiplugg för benstag, storlek 1     | 2 st  | 28864-06 |          |
| 8   | Gummiplugg för benstag, storlek 2 - 6 | 10 st | 28864-08 | 28864-08 |
| 9   | Mässingsbussning, storlek 1           | 10 st | 28865    |          |
| 10  | Höftledsset, storlek 1                | 2 st  | 28866-06 |          |
| 10  | Höftledsset, storlek 2 - 6            | 2 st  | 28866-08 | 28867-08 |
| 11  | Insexnyckelset                        | 1 set | 28868    | 28868    |
| 12  | Plastspänne 25 mm, storlek 1 - 3      | 2 st  | 28869-25 | 28869-25 |
| 12  | Plastspänne 38 mm, storlek 4 - 6      | 2 st  | 28869-38 | 28869-38 |