

VISSION[™] produktsortiment



Upptäck VISSION™ sortimentet



Nyhet!

VISSION™ Wrist Orthosis Dorsal

En bekväm textil handledsortos utvecklad för kliniskt bruk, idealisk när en volar skena inte tolereras eller orsakar obehag under användning. Ortosen har två flexibla plastskenor på dorsalsidan, som begränsar handledsextension samtidigt som full greppfunktion bibehålls. Ett elastiskt handledsband ger ytterligare stabilisering och stödnivån kan justeras genom att använda en eller båda skenor. Justerbart tumband.

Användningsområden:
För behandling av tendinit, karpaltunnelsyndrom, lateral epikondylit, hypermobilitet, reumatiska tillstånd och ospecifik smärta.



VISSION™ Wrist Orthosis

En handledsortos i standardmodell tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Modellen är helt öppen och enkel att ta på och av. Ortosen har en god anatomisk passform inne i handen, över handryggen och runt tummens muskulatur. Den ger ett stabilt stöd och har en formbar plastskena volart. Öppet justerbart tumgrepp.

Användningsområden:
Inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.



VISSION™ Wrist Orthosis Short

En något kortare handledsortos, tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Modellen är helt öppen och enkel att ta på och av. Ortosen har en god anatomisk passform inne i handen, över handryggen och runt tummens muskulatur. Denna modell är utan skena volart. Öppet justerbart tumgrepp.

Användningsområden:
Stödjer och avlastar handleden efter skada, operation, avgipsning, överrörlighet, reumatiska problem, vid kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.



VISSION™ Wrist Orthosis with thumb part

Smidig, elastisk handledsortos med tumdel tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Ortosen är avsedd att begränsa rörelse i CMC och MCP 1 lederna och för att positionera tummen i en funktionell position samt begränsa flexion i handleden. Ortosen har en formad plastskena på volarsidan. Tumdelen har ett extra band som ytterligare kan justerbart tumgreppet.

Användningsområden:
Lätt till moderat instabilitet i CMC och MCP1, ligamentskador, inflammationer, degenerativa sjukdomar, trauma.



VISSION™ Neo Thumb

Mjuk och flexibel tumortos i latexfri neopren som ger både värme och stöd till CMC- och MCP-lederna. I vila håller den tummen i en neutral position.

Finns i två längder, där den längre modellen även ger stöd för handleden. Kan klippas till önskad form.

Användningsområden:
Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tumme och handled.

Lång modell



Kort modell



VISSION™ Thumb Orthosis with Stay

Mjuk, elastisk tumortos i lång och kort modell, tillverkad av slitstarkt och bekvämt material. Designad för att begränsa rörelse i CMC- och MCP I-lederna och placera tummen funktionellt. Den långa modellen ger även lätt stöd för handleden. Båda modellerna har en plastskena på tum-sidan med vadderad dyna samt ett öppet, justerbart band; den långa modellens skena är avtagbar för ökad flexibilitet.

Användningsområden:
Lång modell: Artros och/eller instabilitet i CMC- och MCP I-leder, triggerfinger och De Quervains sjukdom. Kort modell: Instabilitet i CMC- eller MCP-led, inflammation, degenerativa tillstånd, överbelastningsskador och reumatism.

Lång modell



Kort modell





VISION™ CTS Night Splint

Vission CTS är en nattskena framtagna för att lindra och/eller förhindra nattliga domningar i händerna, som uppstår till följd av karpaltunnelsyndrom.

Användningsområden:
Karpaltunnelsyndrom.



Nyhet!

VISION™ Finger Splint Splint POSI

En textilortos utvecklad för klinisk användning vid immobilisering av hand och fingrar (II-V). Ortosen har en justerbar volar aluminiumskena som möjliggör exakt positionering i "Position of Safe Immobilization" (POSI) – en funktion som skyddar lederna, minskar risken för kontrakturer och främjar optimal läkning. Den justerbara distala remmen kan placeras och anpassas för att säkerställa optimal passform. Den breda remmen bidrar till att minska ödem i fingrarna.

Användningsområden:
Trauma, postoperativt, frakturer i metakarpalben och fingrar. Dupuytren's kontraktur.



VISION™ Finger Splint Multi

Denna ortos är avsedd för immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Kan även användas vid konservativ fingerterapi samt vid behandling av, Dupuytren syndrom. Tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna.

Ortosen kan även användas i samband med behandling av frakturer i metakarpalbenen III-V och dess tillhörande falanger.


Användningsområden:
Immobilisering, Dupuytren syndrom, vid frakturer.



VISION™ Finger Splint

Fingerskena för immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Kan även användas vid konservativ fingerterapi samt vid Dupuytren syndrom och tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna.

Användningsområden:
Immobilisering av fingrar efter skada eller operation, konservativ fingerterapi, Dupuytren's syndrom och tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna.

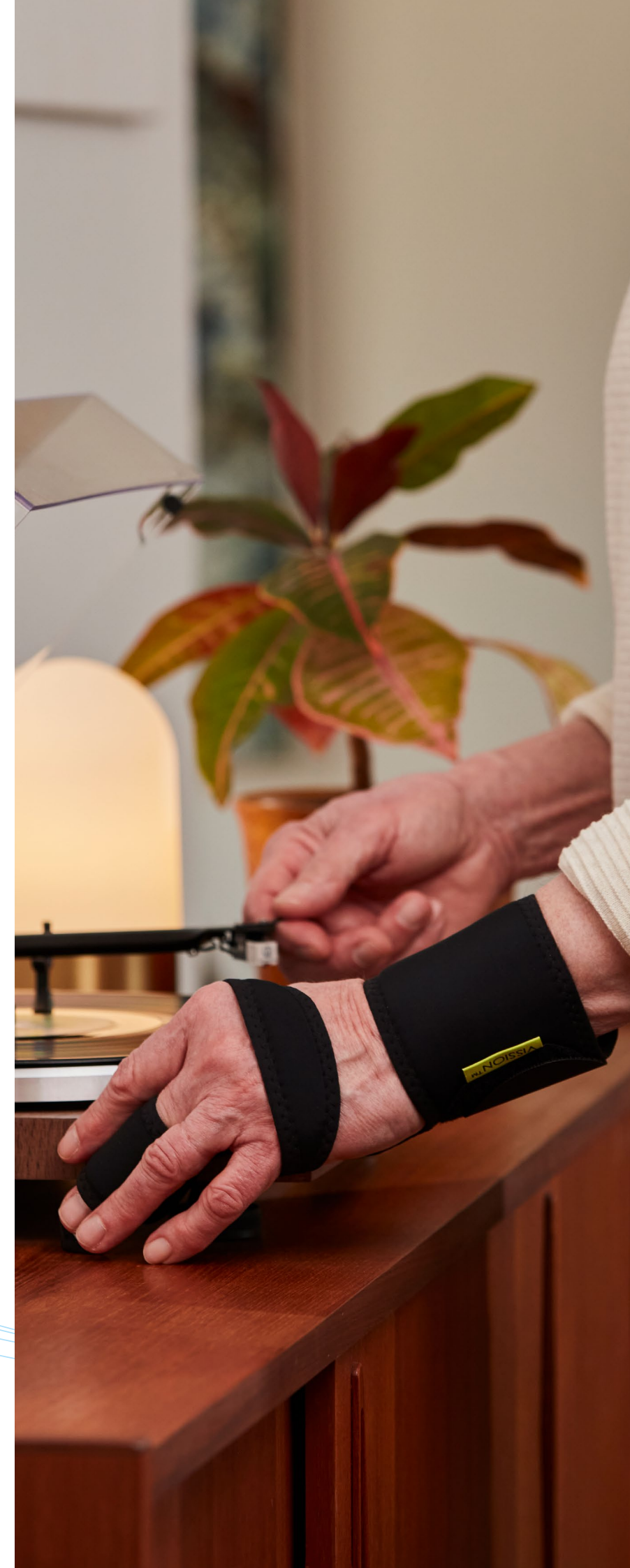

VISSION™ Lycra Neck Collar

Halskrage i mjuk och sval Lycra material som ger ett modernt utseende och en behaglig känsla mot huden. Halskragen som är anatomiskt formad ger avlastning och stöd för nackens strukturer. Den följer hakans och bröstets konturer för en bekväm passform. Vission halskrage finns i fyra höjder. Materialet är helt fritt från Latex.

Användningsområden:

Tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.



VISSION™ Shoulder Orthosis IMMO

Vission Skulderortos är avsedd att immobilisera- och hålla överarm, armbåge och underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen är speciellt lämpad för skulder- och bröstgördelskador. Produkten är vändbar och kan användas både på vänster och höger skuldra.

Användningsområden:

Skulder-, arm-, armbågsskador och skador i skuldergördeln (fraktur, dislokation och stukning). Efter skulder- och bröstgördel-kirurgi. Plexus brachialis-pares.

