




STRAVA VATTENBAD



State-of-art vattenbad med
inbyggt reningssystem för
att förebygga infektioner.

STRAVA

State-of-art vattenbad med inbyggt reningssystem för att förebygga infektioner.

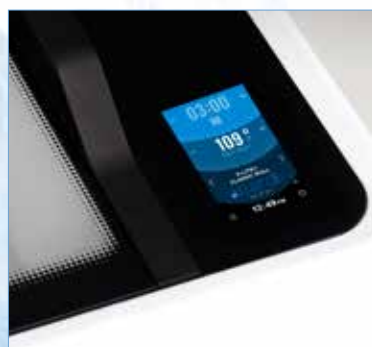

Strava vattenbad är de första på marknaden som introducerar UV sterilisering och "Sanitation mode" med en hög vattentemperatur. På grund av en ökad oro från sjukhus och kliniska miljöer angående avdelnings-hygien och kors-kontaminering mellan patienter, cirkulerar STRAVA vattnet över UV ljus med 2 minuters intervaller. Utöver detta värmer "Sanitation mode" upp vattnet till maximal temperatur. På så sett garanterar det dubbla reningssystemet att vattnet är 99,99% fritt från bakterier. *

Istället för traditionella metallbad är Strava tillverkad av ett Termoset Kompositmaterial, som är känt för sina hållbara, isolerande- och framskyddande egenskaper samt estetiska intryck. Det har ett lättillgängligt transparent gångjärns lock som förhindrar att vattnet droppar utanför badet. Vatten-tömning blir enkel och snabb med ett pumpsystem som tömmer badet på några få minuter. En enhetlig värme-fördelning håller den inställda temperaturen i ett fönster på +/- 1 ° C och värmer upp vattnet snabbt till den inställda temperaturen, för att spara användaren tid. Pekskärmen i full-färg tillåter användaren att bläddra och välja förprogrammerade termoplastiska inställningar eller att skapa sina egna favoritinställningar för snabb och exakt uppvärmning av material. En fullständig meny med ytterligare funktioner ger möjlighet till klinisk anpassning.

*Testat av det oberoende Microchem Laboratory, Austin Texas som är specialiserat på att testa desinfektionsmedel, saneringsmedel, antimikrobiell utrustning, medicintekniska produkter och produkter för personlig vård.

- Finns i två storlekar - perfekt för både X-LITE®-ark och rullar eller andra lågtermoplastmaterial
- Inbyggt rengöringssystem som garanterar att vattnet är 99,99% fritt från bakterier.
- Auto on / off-inställningar
- Värmer vattnet på mindre än 20 minuter
- Tömmer vattnet via en pump som tömmer badet på några minuter
- Exakt temperaturavläsning med konvektiv värmeöverföring (+/- 1 ° C)
- Pekskärm i fullfärg med förinställda termoplast-inställningar från de bästa tillverkarna
- Praktisk förvaring för sax
- Transparent gångjärnslock

Återanvändningsbart "Non-stick"skydd som förhindrar att materialet fäster i botten på vattenbadet.

Art.nr.	Modell	Bredd	Längd	Höjd
645070022	Vattenbad, Standard storlek	Ytermått: 51,6 cm Tub: 31,6 cm	Ytermått: 59 cm Tub: 48,6 cm	Ytermått: 22,6 cm Tub: 14,7 cm
512840013	Non-stick ark	38 cm	61 cm	

