

CAMP[®]

Miljögips och tillbehör 2022

www.camp.se



Support for Better Life!

Innehållsförteckning

● Material

X-LITE® Teknologi	4-6
X-LITE® PLUS	7
X-LITE® CLASSIC	8
X-LITE® PREMIUM	9
3D-LITE™	10

● Prefabricerade korsetter

3D-LITE™ Cut-4-Custom LSO/LSO	11-12
Navy™Xtra	13

● Tillbehör

X-LITE® Stockinette dispenserbox / X-LITE® Stockinette/ X-LITE® Polster Stockinette	14
X-LITE® Foam-bind / X-LITE® Thermoplastiskt kantband / X-LITE® Plus Kantband	15
3D-Safe / X-LITE® Thermoplastiskt kardborrband	16
Fleecy Web / T-Stick / Polycushion Polstring	17
Microfix, självhäftande/ Mjukt AFO Band / Kardborrband Mjukt Elastiskt	18
Kardborrband Hårt Självhäftande / Kardborrband Mjukt, Standard / Elastiskt Kardborrband, Standard	19
X-LITE® Elastisk linda / X-LITE® Plåt	20
Bandagesax / Supersax / Böjd Mayo Sax / Smith Sax / Gipssax Rostfri	21
Strava State of Art Vattenbad	22

X-LITE® & 3D-LITE™

X-LITE® är ett luftigt och lätt material, framtaget för att möta dina krav vid framställning av gipsskenor, cirkulärgips och ortoser. Materialet är tillverkat av 100 % bomullsväv som är impregnerad med en icke toxisk termoplast-resin. Alla reaktiva substanser i termoplasten är härdade vid tillverkningen, vilket innebär att de inte avger några farliga ångor vid gipsningen eller när gipset tas bort med såg eller sax. X-LITE® är ett giftfritt material och det kan användas utan handskar och särskilt ut-sug i gipsrummet. Det är säkert för personalen som arbetar med X-LITE®, inklusive gravida, astmatiker och personer som lider av allergi.

3D-LITE™ är ett material med samma egenskaper som X-LITE®, men basen är en 3-dimensionell polyester. 3D-LITE™ är ett överlägset material för tillverkning av skenor och ortoser. 3D-LITE™ materialet finns även som LSO-och TLSO korsett i färdiga moduler för tillverkning av individuellt anpassade korsetter.

X-LITE® egenskaper och fördelar

UTMÄRKT VENTILATION

Den öppna strukturen i materialet ger bra ventilation och komfort. Huden kan andas och det skapas en bättre miljö för bl.a sårhäkning.

LÄTTVIKT

X-LITE® produkterna är ultralätta för patientens komfort och acceptans av gipset.

GÅR ATT ÅTERANVÄNDA OCH OMFORMA

Spara pengar och tid! Återanvänd det som blir över på rullen eller blir över i form av spillbitar. Gör små justeringar på ett färdigt gips eller skena istället för att göra en helt ny gips som kostar mer pengar, mer tid och obehag för patienten.

VARIERA STABILITETEN

Lägg till fler lager av gips för ökad stabilitet. Lägg till remsor av gips när endast specifika områden behöver förstärkas.

UTMÄRKT FORMBARHET

Formar sig utmärkt efter kroppens anatomi - behöver inte sträckas eller dras.

SJÄLVHÄFTANDE

Självhäftande vid uppvärmning. Velcro och polster häftar lätt och permanent på X-LITE®.

TORKAR SNABBT

Efter bara 30 minuter är gipset stabilt och vikt bärande.

RÖNTGEN-GENOMSLÄPPLIGT

Alla X-LITE® material är helt röntgen-genomsläppliga upp till tre lager gips

STABILT

X-LITE® är ett extremt stabilt material. Det krävs färre lager av material för likvärdig stabilitet jämfört med andra gipsmaterial på marknaden.




X-LITE® TEKNOLOGI

X-LITE® är marknadens enda gipsmaterial som tillverkas av bomull som impregnerats med en giftfri och säker polymer. Polymeren som används är en Polycaprolactone och den tillhör gruppen polyester PCLs som är välkända inom marknaden för implanterbara bio-material.

Vi förstår och stödjer vikten av att skydda vår ömtåliga miljö vilket också är en av anledningarna till att X-LITE® materialet är biologiskt nedbrytbart. Som en ärlig beskyddare av naturen kan du kompostera materialet efter att alla tillbehör plockats bort som kardborreband, polstring och band.

En nyligen genomförd test för att validera graden av biologisk nedbrytbarhet gjordes i enlighet med ISO-standard 14855-1. Denna visade att 25% av materialet komposterades efter 90 dagar*.

*SGS Test Report SLI 205026326750ITX, Date: October 15, 2020

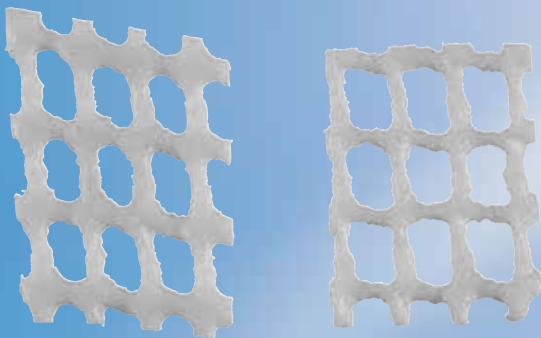


Efter 90 dagar kan man tydligt se att stora delar av materialet har försvunnit. På vänster sida är en bit original X-LITE® material och på höger sida samma storlek av material men efter 90 dagars kompostering.



Vår miljö - vår framtid - ditt val!

X-LITE® Produktsortiment


X-LITE® finns i tre olika varianter: Classic, Premium och Plus. Vilket material som passar bäst väljs beroende av indikation och personlig preferens.

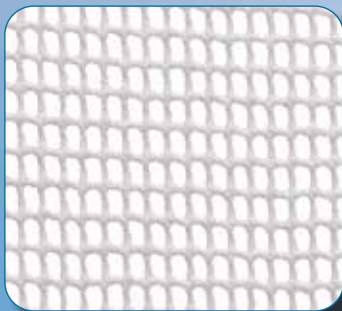

CLASSIC

är original materialet. De större öppningarna i nätet ger en god ventilation. Eftersom det är det starkaste X-LITE® materialet kan det användas till alla typer av gips och skenor.

- Originalt
- Har störst hål i strukturen
- Mest ventilerande
- Mest styrka vid hög belastning
- Vit, royal blå och antrasitgrå

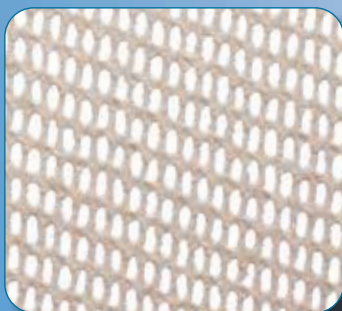

PREMIUM

är tillverkat i samma material som CLASSIC, men i en tunnare kvalitet med mindre öppningar. Det gör PREMIUM mer elastiskt och det passar därför till mindre applikationer på övre extremiteter och till barn.

- Tunnare och finare struktur
- Till mindre ortoser, övre extremiteter och barn
- Hög stretch och formbarhet
- Mjuka kanter
- Beige och vit



PLUS

är den senast lanserade X-LITE® produkten. Materialet finns i fem färger och det har en mjuk polyester yta.


- Mjuk textil ovansida
- Mjuka kanter och mjuk yta
- Styrka i likhet med Classic
- Fem olika färger; vit, svart, blå, röd och hot pink
- Finns även tillhörande kantband i dispenser

Instruktioner

- X-LITE® skall värmas i vattenbad i ca 68-70°C. Kan även värmas i en skål med varmt vatten.
- 3D-LITE™ värms i ugn vid 80°C eller i infraröd ugn vid 60°C i ca 1,5 minut. Mindre bitar av 3D-LITE™ kan värmas med värmepistol.
- X-LITE® ark värms i vatten ca 1 minut och rullar i ca 3 minuter. Var noga med att rullarna genomdränks med vatten. Säkerställ att materialet är väl uppvärmt innan du börjar arbeta med det.
- Använd tång för att ta upp materialet ur vattenbadet för att undvika direkt kontakt med vattnet. Låt överflödigt vatten rinna av materialet före applicering. Materialet i sig själv blir inte varmt.
- Skydda sår och ärr med rätt förband. Vid fraktur-gipsning, använd stockinette och foampolstring för att skydda huden under gipsmaterialet.
- Punktvärm områden för permanent fixering av av tillbehör som t.ex. band och kardborre.
- Materialet kan omformas så många gånger som behövs för samma patient. Återanvänd restbitar och rullar.
- Mindre justeringar kan göras genom punktvärmning på ett färdigt gips med en hårtork. Håll alltid din egen hand nära området som värms upp för att undvika att bränna patienten.
- Använd kylpåse eller kylspray för att snabbare kyla ner ortosen.

X-LITE® PLUS

X-LITE® PLUS finns i fem färger och har en mjuk polyesteryta på ovansidan. Rullarna, som inte har någon skyddsfolie mellan lagren, rullas enkelt och snabbt på patienten vid applicering. PLUS har nästan samma rigiditet som Classic och kan användas till alla typer av cirkulärgips och skenor. Materialet finns i både rullar och dispenserbox. PLUS är även populärt bland Arbetsterapeuter.

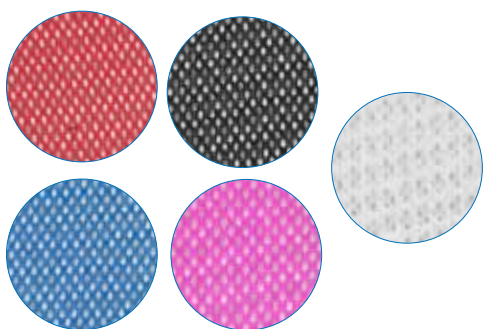

X-LITE® PLUS RULLAR & DISPENSER

Du kan välja mellan rullar i fem färger och sju olika bredder. Ark och dispenser finns i utvalda färger.

Art.nr.	Färg	Bredd	Längd	Förpackning
64701 0000	Vit	25 mm	1,8 m	5 rullar
64702 0000	Vit	50 mm	1,8 m	20 rullar
64703 0000	Vit	75 mm	1,8 m	20 rullar
64704 0000	Vit	100 mm	1,8 m	10 rullar
64706 0000	Vit	125 mm	1,8 m	10 rullar
64707 0000	Vit	150 mm	1,8 m	10 rullar
64708 0000	Vit	150 mm	1,8 m	2 rullar
64711 0000	Röd	25 mm	1,8 m	5 rullar
64712 0000	Röd	50 mm	1,8 m	20 rullar
64713 0000	Röd	75 mm	1,8 m	20 rullar
64714 0000	Röd	100 mm	1,8 m	10 rullar
64716 0000	Röd	125 mm	1,8 m	10 rullar
64717 0000	Röd	150 mm	1,8 m	10 rullar
64718 0000	Röd	150 mm	1,8 m	2 rullar
64721 0000	Blå	25 mm	1,8 m	5 rullar
64722 0000	Blå	50 mm	1,8 m	20 rullar
64723 0000	Blå	75 mm	1,8 m	20 rullar
64724 0000	Blå	100 mm	1,8 m	10 rullar
64726 0000	Blå	125 mm	1,8 m	10 rullar
64727 0000	Blå	150 mm	1,8 m	10 rullar
64728 0000	Blå	150 mm	1,8 m	2 rullar
64731 0000	Svart	25 mm	1,8 m	5 rullar
64732 0000	Svart	50 mm	1,8 m	20 rullar
64733 0000	Svart	75 mm	1,8 m	20 rullar
64734 0000	Svart	100 mm	1,8 m	10 rullar
64736 0000	Svart	125 mm	1,8 m	10 rullar
64737 0000	Svart	150 mm	1,8 m	10 rullar
64738 0000	Svart	150 mm	1,8 m	2 rullar
64741 0000	Hot Pink	25 mm	1,8 m	5 rullar
64742 0000	Hot Pink	50 mm	1,8 m	20 rullar
64743 0000	Hot Pink	75 mm	1,8 m	20 rullar
64744 0000	Hot Pink	100 mm	1,8 m	10 rullar
64746 0000	Hot Pink	125 mm	1,8 m	10 rullar
64747 0000	Hot Pink	150 mm	1,8 m	10 rullar
64748 0000	Hot Pink	150 mm	1,8 m	2 rullar
64791 0000	Blå	150 mm	10 m	1 dispenser
64753 0000	Blå	200 mm	375 mm	8 ark
64792 0000	Svart	150 mm	10 m	1 dispenser
64754 0000	Svart	200 mm	375 mm	8 ark
64793 0000	Hot Pink	150 mm	10 m	1 dispenser
64790 0000	Röd	150 mm	10 m	1 dispenser

X-LITE® CLASSIC

X-LITE® CLASSIC är originalmaterialet. Det är nu tillgängligt i två nya färger - Antracit och Royal Blue. De stora öppningarna i nätet ger god ventilation och CLASSIC är därför det mest luftiga i X-LITE®-serien. Det är också det starkaste materialet i vårt sortiment och passar därför till alla typer av gips och skenor. CLASSIC formar sig fint över benutskott och konturer för en perfekt passform. Skyddsfolien mellan rullens lager avlägsnas efterhand som materialet rullas på patienten.

X-LITE® CLASSIC

Vårt originalmaterial i tre färger. Välj mellan rullar, ark i förutbestämda storlekar eller 10 meter i en praktisk dispenserbox.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förpackning
64103 0002	Vit	50 mm	1,8 m	20 rullar
64133 0003	Vit	75 mm	1,8 m	20 rullar
64143 0004	Vit	100 mm	1,8 m	10 rullar
64153 0005	Vit	125 mm	1,8 m	10 rullar
64162 0000	Vit	150 mm	1,8 m	5 rullar
64163 0006	Vit	150 mm	1,8 m	10 rullar
64136 0000	Antracit	75 mm	1,8 m	5 rullar
64146 0000	Antracit	100 mm	1,8 m	5 rullar
64168 0000	Antracit	150 mm	1,8 m	2 rullar
64137 0000	Royal Blå	75 mm	1,8 m	5 rullar
64147 0000	Royal Blå	100 mm	1,8 m	5 rullar
64169 0000	Royal Blå	150 mm	1,8 m	2 rullar
64278 0000	Vit	25 mm	500 mm	50 ark
64293 0003	Vit	75 mm	375 mm	15 ark
64294 0004	Vit	100 mm	375 mm	15 ark
64295 0005	Vit	125 mm	375 mm	15 ark
64296 0006	Vit	150 mm	375 mm	15 ark
64297 0006	Vit	150 mm	900 mm	15 ark
64290 0008	Vit	200 mm	375 mm	15 ark
64291 0008	Vit	200 mm	1,2 m	15 ark
64292 0008	Vit	200 mm	900 mm	15 ark
64298 0018	Vit	450 mm	500 mm	10 ark
64299 0020	Vit	500 mm	500 mm	10 ark
64302 0000	Antracit	200 mm	375 mm	8 ark
64303 0000	Antracit	450 mm	500 mm	4 ark
64304 0000	Royal Blue	200 mm	375 mm	8 ark
64305 0000	Royal Blue	450 mm	500 mm	4 ark
64250 0000	Vit	75 mm	10 m	1 dispenser
64251 0000	Vit	100 mm	10 m	1 dispenser
64254 0000	Vit	125 mm	10 m	1 dispenser
64252 0000	Vit	150 mm	10 m	1 dispenser
64253 0000	Vit	200 mm	10 m	1 dispenser
64254 0000	Vit	125 mm	10 m	1 dispenser
64255 0000	Antracit	150 mm	10 m	1 dispenser
64256 0000	Royal Blue	150 mm	10 m	1 dispenser



X-LITE® PREMIUM

X-LITE® PREMIUM är framställt av ett bomullsnät i en tunnare kvalitet med mindre öppningar. Detta gör PREMIUM mer formbart och det passar till mindre applikationer på övre extremiteter och barn. Önskas ett stabilare gips kan ett extra lager användas. Skyddsfolien mellan rullens lager avlägsnas efterhand som materialet rullas på patienten.



X-LITE® PREMIUM RULLAR, ARK & DISPENSER

Vårt mest elastiska materialet för gipsning. Välj mellan skenor och ark i olika bredd eller 10 meter i praktisk dispenserbox.

Art.nr.	Färg	Bredd	Längd	Förpackning
64205 0002	Vit	50 mm	1,8 m	5 rullar
64207 0003	Vit	75 mm	1,8 m	5 rullar
64209 0004	Vit	100 mm	1,8 m	5 rullar
64210 0005	Vit	125 mm	1,8 m	5 rullar
64211 0006	Vit	150 mm	1,8 m	5 rullar
64215 0003	Beige	75 mm	375 mm	10 ark
64217 0004	Beige	100 mm	375 mm	10 ark
64219 0006	Beige	150 mm	375 mm	10 ark
64220 0008	Beige	200 mm	375 mm	10 ark
64225 0000	Beige	75 mm	10 m	1 dispenser
64226 0000	Beige	100 mm	10 m	1 dispenser
64227 0000	Beige	150 mm	10 m	1 dispenser
64228 0000	Beige	200 mm	10 m	1 dispenser

3D-LITE™

3D-LITE™ är framställd av en tredimensionell polyesterväv som har impregnerats med en lågtemperaturplast. Materialet är stabilt, lätt och luftigt. Det formar sig fint över benutskott och är inte mottagligt för fingeravtryck. 3D-LITE™ kan sträckas enbart i en riktning. Materialet kan användas till skenor och passar också till större ortoser.

3D-LITE™ ARK

3D-LITE™ finns i tre olika tjocklek, var och en anpassad för olika applikationer:

3 mm

Små leder och liten anatomi. Perfekt till patienter med Reumatoid artrit.

5 mm

När mer stabilitet önskas t.ex. till ortoser för humerus, tibia och armbåge samt TLSO till barn.

7 mm

Ett extremt stabilt material. Perfekt till TLSO för vuxna och andra applikationer då maximal rigiditet önskas.



Art.nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förpackning
64896 0000	Beige	600 mm	600 mm	3 mm	1 ark
64897 0000	Beige	600 mm	900 mm	3 mm	1 ark
64898 0000	Beige	600 mm	600 mm	5 mm	1 ark
64899 0000	Beige	600 mm	900 mm	5 mm	1 ark
64900 0000	Beige	600 mm	600 mm	7 mm	1 ark
64901 0000	Beige	600 mm	900 mm	7 mm	1 ark
64905 0000	Beige	650 mm	1200 mm	5 mm	1 ark



CUT-4-CUSTOM LSO & TLSO

Cut-4-Custom är en korsett i 3D-LITE™ material som består av en fram- och en baksektion (pre-cut) med förmonterade band. De formas enkelt direkt på patienten för att få en individuellt anpassad stabil korsett.

Korsetterna finns i LSO och TLSO för att möta ordinationer och olika patient-anatomier. Hitta rätt storlek genom att ta mått på patienten och jämför med storleksschemat. Välj en framsektion och en baksektion.

- C4C är tillverkade av 3D-LITE™ Lågtemperatur termoplastiskt material.
- Band och spännen är förmonterade på rygg- respektive magdel. Rygg- och magdel är klara för uppvärmning för att sedan formas direkt på patienten
- 2 olika höjder för att passa olika diagnoser och behandlingar.
- Magdel respektive ryggdel säljs var för sig och olika storlekar kan där igenom kombineras.

Indikationer

- Post-operativt, kompressionsfrakturer och immobilisering av ryggraden.



Ett patientbesök

- Materialet är mjukt och klart att formas på patient inom mindre än 10 minuter
- Individuellt tillverkad korsett för LSO och TLSO på mindre än 20 minuters tillverkningstid.
- Kan värmas igen och omformas!
- De förmonterade banden kan enkelt flyttas till annan position för individuell anpassning.

Optimal formbarhet och modellering

- Materialet har stretch i bara en riktning
- Materialet har stabilitet i alla riktningar


Ökad patientkomfort och acceptans

- Ventilerande
- Mycket låg vikt
- Giftfritt - ingen hudirritation
- Kan användas i duschen

3D-LITE™ Cut-4-Custom LSO & TLSO

Instruktionsfilmer finns tillgängliga på www.camp.se



Modell	Framstycke	Bakstycke
LSO	64919	64921
TLSO	64922	64923

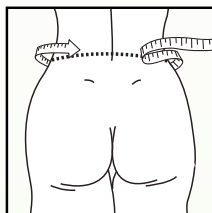

Storlek

Storleken bestäms av midjemått. Tag måttet något åtdraget. Mät även avsedd höjd fram och bak enligt anvisningarna. Välj storlek från tabellen.

	Modell	Midjemått i cm		Höjd fram i cm	Höjd bak i cm
		min	max		
LSO	LSO, XS/S	60	75	19,5	30
	LSO, S/M	70	90	19,5	31,5
	LSO, M/L	85	105	21,5	33,5
	LSO, L/XL	95	120	24,5	35
	LSO, XL/XXL	115	140	27	36,5
TLSO	TLSO, S/M	70	90	42	42
	TLSO, M/L	85	110	48	48
	TLSO, L/XL	105	135	48	48
	TLSO, XL/XXL	105	135	54	54

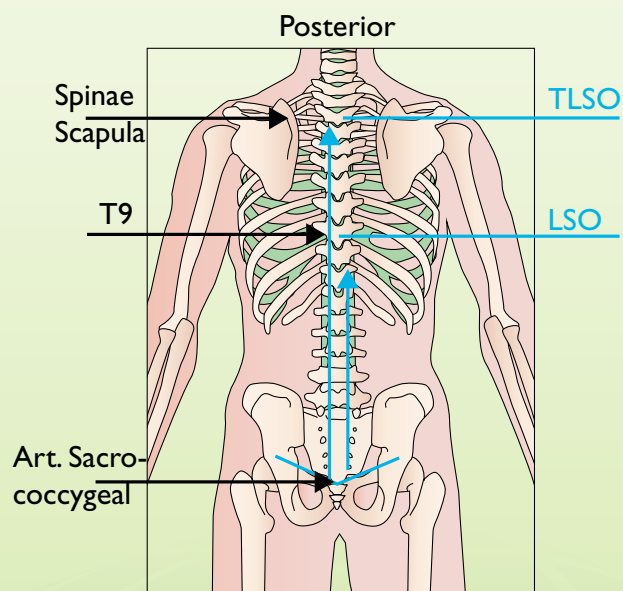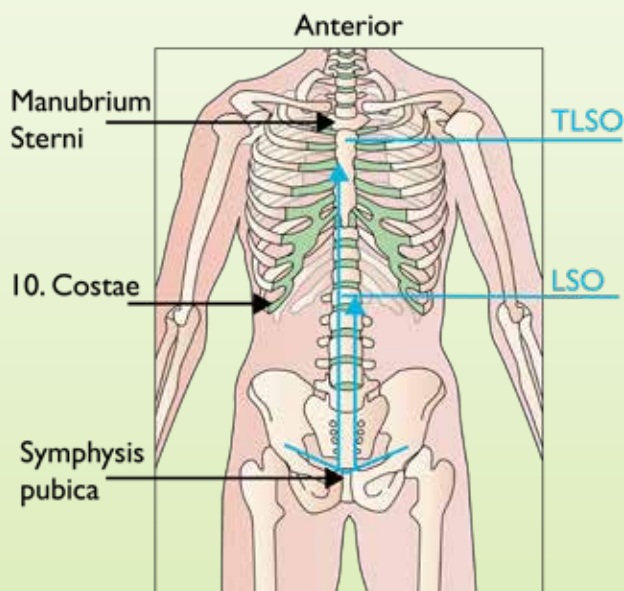

Illustrationerna visar ungefärlig höjd för de olika modellerna LSO eller TLSO.

NAVY™ Xtra

Navy™Xtra ryggortos är avsedd att genom den individuellt formade ryggplattan och korsettens förstärkta främre del stabiliserar ryggen och bidra till smärtlindring. Ryggplattan är tillverkad av 3D-LITE™ material. Denna lågtemperaturplast andas, har låg vikt och är enkel att bearbeta även till de mest krävande patienter. Förstärkningarna på ortosens framsida kan enkelt tas ut. Den svarta textilen är av samma stabila och ventilerande material som används i vår serie med ryggortoser under varumärket NavyX™.

Indikationer

Frakturer, Post-OP-Stabilisering, Post-OP disk-kirurgi, Degenerativa tillstånd i ryggraden, Diskbräck, Bukande disk, Spondylolistes, Spondylolys, Facettsyndrom, Spinal stenos.

Kontraindikationer

Instabil ryggrad.

Anpassning

Denna produkt skall enbart anpassas av en medicinskt utbildad person. Ryggdelen av 3D-LITE™ material kan värmas i ugn eller med värmepistol vid ca 80°C.

Navy™Xtra består av tre delar:

- Den formbara ryggplattan av 3D-LITE™ material.
- Ett överdrag för ryggplattan.
- En elastisk gördel med extra stabiliserande band och förstärkningsplattor på framsidan.



Art.nr.	Storlek	Höftmått	Höjd Fram	Höjd Bak
23563 0010	X-Small	75 - 85 cm	16 cm	28 cm
23563 0011	Small	85 - 95 cm	16 cm	28 cm
23563 0012	Medium	95 - 105 cm	16 cm	31 cm
23563 0013	Large	105 - 115 cm	16 cm	31 cm
23563 0014	X-Large	115 - 125 cm	16 cm	31 cm
23563 0015	XX-Large	125 - 135 cm	16 cm	31 cm

X-LITE® OCH 3D-LITE™ ACCESSOARER

För att kunna ge patienten den bästa och mest bekväma lösningen har vi ett brett utbud av tillbehör som hjälper dig att slutföra din gipsning eller tillverkning av skenor.



X-LITE® STOCKINETTE DISPENSERBOX

En rundstickad polyester stockinette som är mjuk och tillverkad i hållbar kvalitet. Stockinetten är ribbstickad vilket ger en god passform utan veck mot huden. Rullen ligger i en praktisk dispenserbox.

Artikelnr	Färg	Bredd	Längd	Förpackning
64394 0000	Vit	30 mm	25 m	1 dispenser
64395 0000	Vit	50 mm	25 m	1 dispenser
64396 0000	Vit	70 mm	25 m	1 dispenser
64397 0000	Vit	100 mm	25 m	1 dispenser
64398 0000	Vit	150 mm	25 m	1 dispenser



X-LITE® STOCKINETTE

Rundstickad stockinette i 100 % oblekt polypropylen. Mjuk och bekväm med en utmärkt förmåga att transportera fukt bort från huden. Stockinetten är ribbstickad vilket ger en god passform och inga veck mot huden.

Artikelnr	Färg	Bredd	Längd	Förpackning
64400 0000	Vit	20 mm	23 m	1 rulle
64401 0000	Vit	30 mm	10 m	1 rulle
64411 0000	Vit	50 mm	10 m	1 rulle
64421 0000	Vit	70 mm	10 m	1 rulle
64431 0000	Vit	100 mm	10 m	1 rulle
64441 0000	Vit	150 mm	10 m	1 rulle
64442 0000	Vit	200 mm	10 m	1 rulle

* Konsultera alltid med behandlande läkare för ev. tillåtelse att bada med gipset och kontrollera alltid löpande hudens kvalitet.

X-LITE® FOAM

Ett polster av foam framtaget för X-LITE® produkterna. Det är något vattenavvisande och ventilerande. Det ger en bra stötdämpning som inte avtar över tid.

Artikelnr	Färg	Bredd	Längd	Förpackning
64480 0003	Vit	75 mm	2,75 m	20 rullar
64485 0000	Vit	100 mm	2,75 m	20 rullar
64490 0005	Vit	125 mm	2,75 m	20 rullar



X-LITE® TERMOPLASTISKT KANTBAND

X-LITE® termoplastiskt kantband är framställt av samma material som X-LITE®. Bandet värms i vattenbad och fäster direkt på X-LITE® och våra övriga lågtemperaturplaster. Ger skenorna en mjuk och fin kant.


Artikelnr	Färg	Bredd	Längd	Förpackning
64185 0000	Vit	18 mm	7,5 m	1 dispenser
64180 0000	Vit	25 mm	7,5 m	1 dispenser
64190 0000	Vit	50 mm	7,5 m	1 dispenser
64183 0000	Vit	18 mm	500 mm	50 ark
64187 0000	Vit	25 mm	500 mm	50 ark
64189 0000	Vit	50 mm	500 mm	50 ark



X-LITE® PLUS Kantband

X-LITE®PLUS Kantband är utformat för att ge en mjuk kant och en fin avslutning på gipsskenan. Kantbandet är framställt av X-LITE®PLUS sken-material och tillför extra stabilitet till skenan. Det fungerar fint med alla våra material inklusive 3D-LITE™. Värms upp i 70° varmt vatten.

Artikelnr.	Färg	Bredd	Längd	Förpackning
64235 0000	Vit	25 mm	4 m	Dispenser box
64236 0000	Röd	25 mm	4 m	Dispenser box
64237 0000	Blå	25 mm	4 m	Dispenser box
64238 0000	Svart	25 mm	4 m	Dispenser box
64239 0000	Hot Pink	25 mm	4 m	Dispenser box

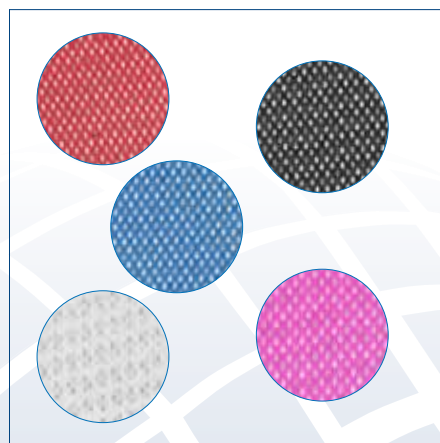



3D-SAFE

3D-SAFE är ett kantband av polyeteneskumplast. Bandet är självhäftande och elastiskt. För ökad stretch och häftförmåga bör man värma kantbandet och materialet med värmepistol innan montering.

Artikelnr	Färg	Bredd	Längd	Förpackning	Package
64200 0000	Vit	40 mm	3 mm	10 m	I rulle



X-LITE® TERMOPLASTISKT KARBORRBAND

X-LITE Velcro® har en baksida av termoplastiskt material, som vid uppvärmning kan fästas på X-LITE® och 3D-LITE™. Baksidan värms upp med värmepistol. Det mjuka karborrbandet ingår ej. Monteras i efterhand.

Artikelnr	Färg	Bredd	Längd	Förpackning
64195 0000	Vit	50 mm	50 cm	5 ark
64196 0000	Vit	50 mm	5 m	I dispenser
64197 0000	Svart	50 mm	50 cm	5 ark
64198 0000	Svart	50 mm	5 m	I dispenser



FLEECY WEB

Extremt mjukt självhäftande material i 100 % bomull med mollskinnskänsla. Används som polstring till skenor och ortoser. Mycket elastiskt och därför lätt att applicera i en färdig skena. Kan också användas som kantpolster.


Artikelnr	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förpackning
51110 0000	Rosa	225 mm	400 mm	2 mm	4 ark
51104 0000	Rosa	50 mm	3 m	2 mm	1 rulle



T-STICK

Tryckavlastande material i polyuretan som andas. Materialet formar sig efter kroppen och har minne så det återgår till ursprungsformen. Används till avlastning av tryckpunkter och som polstring i ortoser och proteser. Självhäftande baksida. Finns i två hårdhetsgrader.

Artikelnr.	Färg	Hårdhetsgrad	Bredd	Längd	Tjocklek	Förpackning
51100 0000	Blå	Medium	410 mm	610 mm	9,5 mm	2 ark
51101 0000	Blå	Medium	410 mm	610 mm	25 mm	1 ark
51102 0000	Rosa	Mjuk	410 mm	610 mm	9,5 mm	2 ark

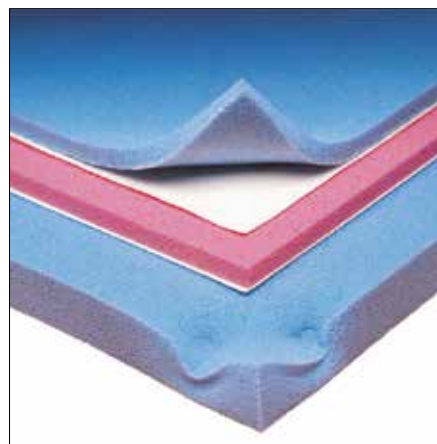

POLYCUSHION POLSTRING

Skumpolstring med lätt tryckavlastande effekt. Används som polstring av ortoser. Polstringen har stängda celler, är lätt att rengöra och kan fästas på ortosen innan uppvärmning i vattenbad. Materialet är självhäftande. Den lägre vidhäftningsförmågan underlättar vid byte av polstring. Lätt att klippa till önskad form.

Artikelnr.	Färg	Vidhäftningsförmåga	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
51120	Beige	Hög	450 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark
51115	Beige	Låg	450 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark





MIKROFIX SJÄLVHÄFTANDE

Självhäftande hårt och mjukt kardborrband (hook och loop). Båda ultra-tunna, starka och med hög kvalitet. Det hårda kardborrbandet har mycket korta "krokar" som inte sliter onödigt och ger patienten bättre komfort.

Artikelnr	Modell	Färg	Längd	Förpackning
25040 0000	Mikrofix, hook	Transparent	50 mm	25 m
25041 0000	Mikrofix, hook	Svart	50 mm	25 m
25042 0000	Mikrofix, loop	Vit	50 mm	25 m
25043 0000	Mikrofix, loop	Svart	50 mm	25 m



MJUKT AFO BAND

Ett dubbelvävt mjukt band med lätt elasticitet för ökad smidighet. Avsett för olika ortosapplikationer. Fäster mot hårt kardborreband.

Artikelnr.	Färg	Bredd	Längd
25060 0000	Svart	40 mm	10 m
25061 0000	Svart	50 mm	10 m



KARDBORRBAND, MJUKT ELASTISKT

Den mjuka delen av ett elastiskt kardborreband. God hållfasthet i både dragriktning och öppningsriktning. Kan användas i vattentemperaturer mellan -30° till +140°C.

Artikelnr.	Färg	Bredd	Längd
25030 0019	Vit	19 mm	4,5 m
25030 0025	Vit	25 mm	4,5 m
25030 0050	Vit	50 mm	4,5 m

KARDBORRBAND, HÅRT SJÄLVHÄFTANDE

Starkt hållbart kardborreband med självhäftande baksida. Fungerar väl tillsammans av alla kvaliteter av mjuka kardborreband. Tillgängligt i vit, beige och svart i olika bredder.

Övrigt: ÖKO-TEX klass 2

Artikelnr.	Modell	Färg	Bredd	Längd
24024 1020	Hårt, självhäftande	Vit	20 mm	25 m
25024 1025	Hårt, självhäftande	Vit	25 mm	25 m
24024 1050	Hårt, självhäftande	Vit	50 mm	25 m
25025 1025	Hårt, självhäftande	Beige	25 mm	25 m
25028 1050	Hårt, självhäftande	Svart	25 mm	25 m



KARDBORRBAND, MJUKT STANDARD

Den mjuka delen av standard-kardborreband är tillverkad av vävt band med sydda kanter. God hållfasthet i både dragriktning och öppningsriktning. Tillgängligt i vit, beige och svart i olika bredder.

Övrigt: ÖKO-TEX klass 2

Artikelnr.	Modell	Färg	Bredd	Längd
25020 2025	Mjukt kardborreband	Vit	25 mm	25 m
25020 2050	Mjukt kardborreband	Vit	50 mm	25 m
25021 2025	Mjukt kardborreband	Beige	25 mm	25 m
25021 2050	Mjukt kardborreband	Beige	50 mm	25 m
25027 2025	Mjukt kardborreband	Svart	25 mm	25 m
25027 2050	Mjukt kardborreband	Svart	50 mm	25 m



KARDBORRBAND, ELASTISKT STANDARD

Den mjuka delen av elastiskt kardborreband. Fungerar med alla hårda kardborre-produkter. Tillgängligt i vit och beige i olika bredder.

Övrigt: ÖKO-TEX klass 2

Artikelnr.	Modell	Färg	Bredd	Längd
25022 2030	Mjukt, elastiskt	Vit	30 mm	10 m
25022 2050	Mjukt, elastiskt	Vit	50 mm	10 m
25023 2030	Mjukt, elastiskt	Beige	30 mm	10 m
25023 2050	Mjukt, elastiskt	Beige	50 mm	10 m





X-LITE® COLOR ELASTISK LINDA

Elastisk linda som andas och har en mjuk ovansida samt vävda kanter, som känns behaglig mot huden. Den anpassade elasticiteten gör att den formar sig bra till både stora och små applikationer. Den har en anti-glid effekt som hindrar att lagerna delar sig från varandra och den ger därmed ett hållbart resultat. Den elastiska lindan kan tvättas på 60 grader och den kan steriliseras.

Artikelnr.	Färg	Bredd	Längd	Förpackning
64106 0000	Svart	6 cm	5 m	10
64107 0000	Röd	6 cm	5 m	10
64108 0000	Royal Blue	6 cm	5 m	10
64109 0000	Grön	6 cm	5 m	10
64110 0000	Gul	6 cm	5 m	10
64112 0000	Svart	10 cm	5 m	10
64113 0000	Royal Blue	10 cm	5 m	10



X-LITE® PLÅT MED SILIKONBELÄGGNING

Används som arbetsyta vid gipsning med X-LITE®. Silikonbeläggningen förhindrar att X-LITE® fastnar i underlaget. Den perforerade ytan på plåten gör att överflödigt vatten ifrån X-LITE® rullarna lätt kan rinna ner under plåten och sugas upp av underliggande handduk.

Artikelnr.	Bredd	Längd
64811 0000	325 mm	530 mm



BANDAGESAX MED PLASTHANDTAG

Praktisk sax med stort plastgrepp, avsedd för olika plastmaterial. Saxen är tillverkad av rostfritt stål och är autoklaverbar. Ett prisvärt alternativ.

Art. nr.	Färg	Material	Längd
51211	Svart	AISI 420	18 cm
51212	Grön	AISI 420	18 cm
51213	Gul	AISI 420	18 cm



SUPERSAX

En extremt vass sax med stort handtag. Passar utmärkt till att klippa i plastmaterial, även när plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Är autoklaverbar.

Art. nr.	Material	Längd
51217	AISI 420	20 cm



BÖJD MAYO SAX

Böjd sax med små handtag. Lämplig att trimma kanter på ortoser där plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras. Kan användas till höger och vänster hand.

Art. nr.	Material	Längd
51214	AISI 420	14 cm



SMITH SAX

En mycket vass sax med stort handtag. Något kortare modell. Är lätt att hantera och att klippa i mjuka plastmaterial. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Är autoklaverbar.

Art. nr.	Material	Längd
51216	AISI 420	18 cm



GIPSSAX ROSTFRI

En kvalitets sax som klipper lätt i alla material. Nedre blad med fin sågtandning och skarpt vinklat övre blad. Saxen är tillverkad av rostfritt stål och är autoklaverbar.

Art. nr.	Modell	Längd
51207	Gipssax rostfri	18 cm
51208	Gipssax rostfri	14 cm

STRAVA STATE OF ART VATTENBAD

Strava vattenbad är de första på marknaden som introducerar UV sterilisering och "Sanitation mode" med en hög vattentemperatur. På grund av en ökad oro från sjukhus och kliniska miljöer angående avdelnings-hygien och kors-kontaminering mellan patienter, cirkulerar STRAVA vattnet över UV ljus med 2 minuters intervaller. Utöver detta värmer "Sanitation mode" upp vattnet till maximal temperatur. På så sett garanterar det dubbla reningssystemet att vattnet är 99,99% fritt från bakterier.*

Istället för traditionella metallbad är Strava tillverkad av ett Termo-set Kompositmaterial, som är känt för sina hållbara, isolerande- och framskyddande egenskaper samt estetiska intryck. Det har ett lättillgängligt transparent gångjärns lock som förhindrar att vattnet droppar utanför badet. Vatten-tömning blir enkel och snabb med ett pumpsystem som tömmer badet på några få minuter. En enhetlig värmefördelning håller den inställda temperaturen i ett fönster på +/- 1 ° C och värmer upp vattnet snabbt till den inställda temperaturen, för att spara användaren tid.

Pekskärmen i full-färg tillåter användaren att bläddra och välja förprogrammerade termoplastiska inställningar eller att skapa sina egna favoritinställningar för snabb och exakt uppvärmning av material. En fullständig meny med ytterligare funktioner ger möjlighet till klinisk anpassning.

- Perfekt för både X-LITE®-ark och rullar eller andra lågtermoplastmaterial
- Inbyggt rengöringssystem som garanterar att vattnet är 99,99% fritt från bakterier.
- Auto on / off-inställningar
- Tömmer vattnet via en pump som tömmer badet på några minuter
- Exakt temperaturavläsning med värmeväxling (+/- 1 ° C)
- Pekskärm i fullfärg med förinställda termoplast-inställningar från de bästa tillverkarna
- Praktisk förvaring för sax
- Transparent gångjärnslock

Art.nr.	Modell	Bredd	Längd	Höjd
64507 0022	Vattenbad, Standard storlek	Yttermått: 51,6 cm Tub: 31,6 cm	Yttermått: 59 cm Tub: 48,6 cm	Yttermått: 22,6 cm Tub: 14,7 cm
645080000	Dräneringsslang			
645090000	Värmeelement			
645100000	EU elkabel			
645120000	UV lampa			



**Tested by independent Microchem Laboratory, Austin Texas specialized in the testing of disinfectants, sanitizers, antimicrobial devices, medical devices and personal care products.*



Support for Better Life!



CAMP[®]
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE
Tel 042-25 27 00
E-post info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no