

Arbetsterapi 2026



INNEHÅLL

Hand- och handledsortoser	5 - 55
Plaster och material	56 - 94
Verktyg och tillbehör	95 - 101
Test, träning och behandling	102 - 114



Hand- och handledsortoser

VISSION™ Finger Splint POSI

VISSION™ Finger Splint POSI är en textil ortos utvecklad för klinisk användning vid immobilisering av hand och fingrar (II-V). Ortosen har en justerbar volar aluminiumskena som möjliggör exakt positionering i POSI – Position of Safe Immobilization. Detta hjälper till att skydda leder, minska risken för kontrakturer och främja optimal läkning.

Den justerbara distala bandet kan placeras och anpassas för att ge en optimal passform. Den breda remmen bidrar till att minska svullnad/ödem i fingrarna och på handryggen.

- Egenskaper
- Stabiliserar handled, handflata och samtliga fingrar
 - Justerbar aluminiumskena för anpassad passform
 - Lätt, mjukt och slitstarkt textilmaterial för hög komfort
 - Lämplig vid postoperativ vård, frakturer och rehabilitering

Användningsområde: Trauma, postoperativ behandling, frakturer i metakarpalben och fingrar. Dupuytren's kontraktur.



Mått
Handledsomkrets

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått
46019	Vission Finger Splint POSI	Vä/Hö	Small	< 16 cm
46019	Vission Finger Splint POSI	Vä/Hö	Medium	16-19 cm
46019	Vission Finger Splint POSI	Va/Hö	Large	19-22 cm
46019	Vission Finger Splint POSI	Vä/Hö	X-Large	>22 cm

VISSION™ Finger Splint Multi

VISSION™ Finger Splint Multi är en fingerortos avsedd för immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Fingerskenan kan även användas vid konservativ fingerterapi samt vid behandling av Dupuytren syndrom och andra tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna. Ortosen kan även användas i samband med behandling av frakturer i metakarpalbenen III-V och dess tillhörande falanger.

Användningsområde: Immobilisering, Dupuytren syndrom, vid frakturer.

Kontraindikation: Inga kända.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 30 cm.



Mått
Omkrets handled.

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
46021	Vission Multifinger	Vä/Hö	Small	< 16 cm	Svart
46021	Vission Multifinger	Vä/Hö	Medium	16 - 19 cm	Svart
46021	Vission Multifinger	Vä/Hö	Large	> 19 cm	Svart

VISSION™ Finger Splint

VISSION™ Finger Splint är en fingerskena för immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Ortosen kan även användas vid konservativ fingerterapi samt vid Dupuytren syndrom och tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna.

Användningsområde: Immobilisering av fingrar efter skada eller operation, konservativ fingerterapi, Dupuytren syndrom och tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 27 cm.



Mått
Mått tages runt handleden.

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått
46020	Vission Fingerskena	Bilat.	Small	< 16 cm
46020	Vission Fingerskena	Bilat.	Medium	16 - 19 cm
46020	Vission Fingerskena	Bilat.	Large	> 19 cm

SELECTION® Fingerloop

En tvillingortos som effektivt håller ihop två eller flera fingrar, så att det starkare fingret kan hjälpa det svagare som stöd, skydd och/eller för att öka rörelseomfånget. Kan även användas som en statisk progressiv skena för ökat rörelseomfång i DIP-leden.

Ortosen är tillverkat i 100 % slitstark och snabbtorkande nylon. Svetsad utan sömmar och därför lätt att skära till för en personlig passform. En eller flera bitar kan användas samtidigt.

Det halvpreparerade Fingerloop-arket som är 10 cm brett kan enkelt klippas till enskilda band i önskad bredd med en sax.

Användningsområde: Stöd för fingrarna efter till exempel skada, operation, stabila frakturer, metacarpalfrakturer, kroniska smärttillstånd, stukningar, ledförslitning och kontrakturer.



Art.nr.	Modell	Storlek	Längd	Bredd	Antal/Förp
35219	SELECTION® Fingerloop	One Size	15,5 cm	2 cm	5
35220	SELECTION® Fingerloop Ark	One Size	15,5 cm	10 cm	1

Mallet fingerhylsa

Immobiliserar DIP-leden i extension och tillåter samtidigt full rörlighet i PIP-leden. Används normalt utan polstring och fixeras mot mellersta falangen med självhäftande band (medföljer inte).



Mått
Omkrets PIP-led

Art.nr.	Storlek	Färg	Förp.	Omkrets
51422	1 - Small	Beige	10 stycken	4,5 - 5,0 cm
51422	2 - Small/Medium	Beige	10 stycken	5,0 - 5,5 cm
51422	3 - Medium	Beige	10 stycken	6,0 - 6,5 cm
51422	4 - Medium/Large	Beige	10 stycken	6,5 - 7,0 cm
51422	5 - Large	Beige	10 stycken	7,0 - 7,5 cm
51422	5.5 - Large+	Beige	10 stycken	7,5 - 8,0 cm
51422	6 - Large/X-Large	Beige	10 stycken	8,0 - 8,5 cm
51422	7 - X-Large	Beige	10 stycken	8,5 - 9,0 cm

SOF-Stretch dynamisk fingerortos

Skena som ger ett dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket. Bilateralal vajrar kan böjas för att anpassa motståndet och göra plats för eventuellt ödem.

Användningsområde: Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden.



Mått
Volart mellan distala
palmarvecket och DIP-leden

Art.nr.	Storlek	Mått	Färg
51400	X-Small	5,1 cm	Vit
51400	Small	6,4 cm	Vit
51400	Medium	7,6 cm	Vit
51400	Large	8,9 cm	Vit
51400	X-Large	10,2 cm	Vit
51401	X-Small	5,1 cm	Svart
51401	Small	6,4 cm	Svart
51401	Medium	7,6 cm	Svart
51401	Large	8,9 cm	Svart
51401	X-Large	10,2 cm	Svart

SOF-Stretch dynamisk fingerortos kort

Skena som ger ett dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket. Bilateral vajrar kan böjas för att anpassa motståndet och göra plats för eventuellt ödem. Den korta designen tillåter full rörlighet i MCP-lederna.

Användningsområde: Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden.



Mått

Volart mellan MCP-leden och DIP-leden

Art.nr.	Storlek	Mått	Färg
51405	X-Small	3,8 cm	Vit
51405	Small	4,4 cm	Vit
51405	Medium	5,1 cm	Vit
51405	Large	5,7 cm	Vit
51405	X-Large	7 cm	Vit

SOF-Stretch dynamisk spiralortos

Extensionsskena (Capener) som ger dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Spiralfjädrarna är placerade på bägge sidor om PIP-leden för att ge samma motstånd i alla positioner. De kan lossas eller spännas till önskat motstånd. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket.

Användningsområde: Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden. Lämplig till kontrakturer upp till 45°. Ej för rigida kontrakturer.



Mått

Volart mellan distala palmarvecket och DIP-leden

Art.nr.	Storlek	Mått	Färg
51410	Small	6,4 cm	Vit
51410	Medium	7 cm	Vit
51410	Large	7,6 cm	Vit
51410	X-Large	8,3 cm	Vit

Oval-8® fingerortos

Oval-8® är fingerortoser utformade för att stödja, stabilisera eller immobilisera de små lederna i patientens finger. Den mångsidiga 3-punktstryckdesignen gör att varje Oval-8® kan behandla 6 eller fler tillstånd med en enkel vridning av skenan. Oval-8® är tillverkade i gjuten plast och har rundade kanter för ökad komfort. Oval-8® är vattentäta och kan bäras i våta förhållanden. Finns i 14 storlekar.

Oval-8 kitet innehåller en återanvändbar förvaringslåda och 44 fingerortoser i olika storlekar.

Användningsområde: Oval-8® är utformade för att tillämpa tre kontrollpunkter runt ett finger för att hålla en knoge rak, förhindra eller begränsa rörelsen för att skydda och möjliggöra läkning. Produkten kan användas för att hantera flera fingersjukdomar beroende på var och hur den bärs på fingret.

Övrigt: Oval-8 kitet (514290000) innehåller följande antal fingerortoser i olika storlekar: Storlek 2 och 15: 1 av varje. Storlek 3, 4, 13, 14: 2 av varje. Storlek 11, 12: 3 av varje. Storlek 5, 10: 4 av varje. Storlek 6, 7, 8, 9: 5 av varje. Ficklampa ingår ej.



Mått
Omkrets fingerled

Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Färg	Antal/Förp
51423	Oval-8® fingerortos	2	4,30 cm	Beige	5
51423	Oval-8® fingerortos	3	4,50 cm	Beige	5
51423	Oval-8® fingerortos	4	4,95 cm	Beige	5
51423	Oval-8® fingerortos	5	5,27 cm	Beige	5
51423	Oval-8® fingerortos	6	5,70 cm	Beige	5
51423	Oval-8® fingerortos	7	5,86 cm	Beige	5
51423	Oval-8® fingerortos	8	6,14 cm	Beige	5
51423	Oval-8® fingerortos	9	6,35 cm	Beige	5
51423	Oval-8® fingerortos	10	6,82 cm	Beige	5
51423	Oval-8® fingerortos	11	7,09 cm	Beige	5
51423	Oval-8® fingerortos	12	7,40 cm	Beige	5
51423	Oval-8® fingerortos	13	7,65 cm	Beige	5
51423	Oval-8® fingerortos	14	8,09 cm	Beige	5
51423	Oval-8® fingerortos	15	8,20 cm	Beige	5
51428	Oval-8® storleksset	2-15	-	-	1 st per storlek
51429	Oval-8® kit	2-15	-	-	44 st

Ödemhandske

Handsken är tillverkad av mjuk, silkeslen nylonlycra och har alla sömmar på utsidan. Handsken finns med hela fingrar eller i ¾ längd. Ger kompression för att lindra ödem i mjuka vävnader och smärta vid artrit. Handsken har en öppen slits i manschetten för enkel påtagning och mjuk passform. Ger 15–25 mmHg skonsam och jämn kompression av ödematös vävnad. Längden proximalt från handleden är 76 mm.

Övrigt: Kompressionsklass 1.



Mått
Omkrets MCP-Led.

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Förp.
53535	Hela fingrar	Vä/Hö	XXS	10-11 cm	1 styck
53535	Hela fingrar	Vä/Hö	XS	11-14 cm	1 styck
53535	Hela fingrar	Vä/Hö	Small	14-17 cm	1 styck
53535	Hela fingrar	Vä/Hö	Medium	17-19 cm	1 styck
53535	Hela fingrar	Vä/Hö	Large	19-22 cm	1 styck
53536	Öppna fingrar	Vä/Hö	XXS	10-11 cm	1 styck
53536	Öppna fingrar	Vä/Hö	XS	11-14 cm	1 styck
53536	Öppna fingrar	Vä/Hö	Small	14-17 cm	1 styck
53536	Öppna fingrar	Vä/Hö	Medium	17-19 cm	1 styck
53536	Öppna fingrar	Vä/Hö	Large	19-22 cm	1 styck
53536	Öppna fingrar	Vä/Hö	XXS	10-11 cm	1 styck

Thermoskin® värmehandskar

Värmehandskar som är formad för komfort. Ger värme och jämn kompression för att tillfälligt lindra artritisk smärta. Den är utformade för daglig användning, och texturen i handflatorna och fingertoppsutskärningarna ger extra bra grepp och en bättre känsla för patienterna.

Det patenterade Trioxon®-materialet stimulerar huden, som då producerar värme. Materialet transporterar bort eventuell fukt från huden och låter den andas. Det har kliniskt bevisats att handsken ökar temperaturen på hudytan och i underhuden med cirka 2 °C, vilket förbättrar elasticiteten i muskler, senor och ligament.

Användningsområde: Smärta, stelhet eller inflammation i fingerlederna, svaghet i lederna, synliga deformiteter i fingrarna.

Kontraindikation: Använd den inte under de första 72 timmarna efter en akut skada.



Mått
Handens omkrets runt MCP-leden

Art.nr.	Storlek	Mått	Färg	Förp.
53242	XS	15-17 cm	Svart	1 par
53242	S	18-20 cm	Svart	1 par
53242	M	21-23 cm	Svart	1 par
53242	L	24-26 cm	Svart	1 par
53242	XL	27-29 cm	Svart	1 par
53242	XXL	30 cm >	Svart	1 par

Isotoner® handskar

Isotoner® terapeutiska handskar lindrar smärta och svullnad i samband med artrit eller smärta och svullnad efter handskador.

Finns i alternativ med öppet finger eller helt finger. Det mjuka stretchmaterialet i nylon och spandex ger en mild, jämn kompression för att lindra smärta och förebygga ödem. Alla sömmar finns på handskens utsida och området runt tummen är helt fritt från sömmar. Ger måttlig kompression vid cirka 23 till 32 mm Hg tryck. Handskarna har unisexstorlek för både män och kvinnor.



Övrigt: Kompressionsklass 2 Säljs styckvis eller i par.

Mått
Omkrets vid MP-led.

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Förp.
53543	Helfinger	Vä/Hö	X-Small	11 cm - 14 cm	1 st
53543	Helfinger	Vä/Hö	Small	14 cm - 17 cm	1 st
53543	Helfinger	Vä/Hö	Medium	17 cm - 19 cm	1 st
53543	Helfinger	Vä/Hö	Large	19 cm - 22 cm	1 st
53543	Helfinger	Höger	X-Small	11 cm - 14 cm	1 st
53543	Helfinger	Höger	Small	14 cm - 17 cm	1 st
53543	Helfinger	Höger	Medium	17 cm - 19 cm	1 st
53543	Helfinger	Höger	Large	19 cm - 22 cm	1 st
53542	3/4-finger	Vä/Hö	X-Small	11 cm - 14 cm	1 st
53542	3/4-finger	Vä/Hö	Small	14 cm - 17 cm	1 st
53542	3/4-finger	Vä/Hö	Medium	17 cm - 19 cm	1 st
53542	3/4-finger	Vä/Hö	Large	19 cm - 22 cm	1 st
53542	3/4-finger	Höger	X-Small	11 cm - 14 cm	1 st
53542	3/4-finger	Höger	Small	14 cm - 17 cm	1 st
53542	3/4-finger	Höger	Medium	17 cm - 19 cm	1 st
53542	3/4-finger	Höger	Large	19 cm - 22 cm	1 st
53538	3/4-finger	-	X-Small	11 cm - 14 cm	Par
53538	3/4-finger	-	Small	14 cm - 17 cm	Par
53538	3/4-finger	-	Medium	17 cm - 19 cm	Par
53539	Helfinger	-	X-Small	11 cm - 14 cm	Par
53538	3/4-finger	-	Large	19 cm - 22 cm	Par
53539	Helfinger	-	Small	14 cm - 17 cm	Par
53539	Helfinger	-	Medium	17 cm - 19 cm	Par
53539	Helfinger	-	Large	19 cm - 22 cm	Par

OrthoThermic™ Handskar

OrthoThermic ortopediska handskar ger värme och kompression för att tillfälligt minska eller lindra smärta, stelhet och inflammation. Handskarna har en låg och mjuk profil som bidrar till en bekväm känsla för användaren.

Handskarna har ett antimikrobiellt innerfoder som använder infraröda fibrer för att skapa en termisk effekt som genererar värme och transporterar bort fukt. Den öppna fingerdesignen gör det möjligt att använda fingrarna fullt ut i dagliga aktiviteter.

Användningsområde: Sportskador, skador på grund av repetitiva rörelser, artrit, tendinit, neuropati, dålig cirkulation och andra smärre tillstånd i handen/lederna.

Kontraindikation: Hudirritation, allergi mot nylon eller neopren, nedsatt blodcirkulation.

Övrigt: Ej tillverkad av naturgummilatex.



Mått
MCP Omkrets

Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Färg	Förp.
53243	OrthoThermic™ Handskar	X-Small	15-17 cm	Svart	1 par
53243	OrthoThermic™ Handskar	Medium	21-23 cm	Svart	1 par
53243	OrthoThermic™ Handskar	Large	24-26 cm	Svart	1 par
53243	OrthoThermic™ Handskar	X-Large	27-29 cm	Svart	1 par
53243	OrthoThermic™ Handskar	XX-Large	30 cm >	Svart	1 par
53243	OrthoThermic™ Handskar	Small	18-20 cm	Svart	1 par

VISSION™ Neo Thumb Short

VISSION™ Neo Thumb Short är en tumortos i bekväm neoprene som skyddar och avlastar tummen samt ger värme. Tummen hålls i neutralläge vid vila utan att belasta muskler och senfästen. Ortosen kan klippas till önskad form. VISSION™ Neo Thumb finns även i en längre modell för ökat stöd för handleden.

Användningsområde: Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tumme och handled.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm (storlek M).



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
46025	Kort	Vä/Hö	Small	13 - 16 cm	Svart
46025	Kort	Vä/Hö	Medium	15 - 18 cm	Svart
46025	Kort	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm	Svart

VISSION™ Neo Thumb Long

VISSION™ Neo Thumb Long är en mjuk, elastisk tumortos i neoprene som ger värme, skyddar och avlastar tummen. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. VISSION™ Neo Thumb finns i två längder. Denna längre modell ger ett lätt stöd för handleden. Kan klippas till önskad form.

Användningsområde: Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tumme och handled.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 12,5 cm. Bandaget är tillverkat av Nylon och SBR (Latexfri neoprene).



Mått
Omkrets handled.

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Färg
46026	Lång	Vä/Hö	En storlek	Svart

SELECTION® tumortos Soft

Smidig och elastisk tumortos som avlastar tummens leder och ger ett lätt stöd. SELECTION® tumortos Soft är tillverkad av ett smidigt, modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Användningsområde: Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig CMC-1 artros.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm (storlek M).



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
35200	Soft	Vä/Hö	X-Small	< 13 cm	Svart
35200	Soft	Vä/Hö	Small	13-15 cm	Svart
35200	Soft	Vä/Hö	Medium	15-17 cm	Svart
35200	Soft	Vä/Hö	Large	17-20 cm	Svart
35200	Soft	Vä/Hö	X-Large	>20 cm	Svart
35201	Soft	Vä/Hö	X-Small	< 13 cm	Beige
35201	Soft	Vä/Hö	Small	13-15 cm	Beige
35201	Soft	Vä/Hö	Medium	15-17 cm	Beige
35201	Soft	Vä/Hö	Large	17-20 cm	Beige
35201	Soft	Vä/Hö	X-Large	>20 cm	Beige

SELECTION® tumortos Barn

Mjuk och skön tumortos avsedd för barn. SELECTION® materialet är tunt, smidigt och låter huden andas. Ortosen är avsedd att guida hand och handled till en funktionell position, för att lindra smärta vid inflammationer och reumatiska tillstånd. Ortosen kan också användas för att reducera spasticitet vid neurologiska tillstånd i hand och handled. Tumgreppet är justerbart och kanterna kan trimmas vid behov.

Användningsområde: Positionering av handen efter Brakialplexus neuropatier (BPN), Spastisk hand vid Cerebral Pares. Arthrogryposis. Reumatiska sjukdomar.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 9 cm (storlek M).



Mått
Mått 1: Omkrets handled
Mått 2: Handflatsmått

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Färg	Mått 1	Mått 2
35300	Vä/Hö	XX-Small	Svart	8,5 - 11,5 cm	5 - 6 cm
35300	Vä/Hö	X-Small	Svart	10 - 12,5 cm	6 - 7 cm
35300	Vä/Hö	Small	Svart	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm
35300	Vä/Hö	Medium	Svart	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm
35300	Vä/Hö	Large	Svart	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm

SELECTION® tumortos Rigid

Smidig och elastisk tumortos med extra stabilitet runt tummens strukturer. Ger avlastning för tummens leder och ett stabilt stöd. Ger även stöd och skydd för tummens MCP-led. SELECTION® tumortos Rigid är tillverkad av ett smidigt, modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Användningsområde: Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig till moderat CMC-1 artos.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm (storlek M).



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
35202	Rigid	Vä/Hö	X-Small	< 13 cm	Svart
35202	Rigid	Vä/Hö	Small	13-15 cm	Svart
35202	Rigid	Vä/Hö	Medium	15-17 cm	Svart
35202	Rigid	Vä/Hö	Large	17-20 cm	Svart
35202	Rigid	Vä/Hö	X-Large	>20 cm	Svart
35203	Rigid	Vä/Hö	X-Small	< 13 cm	Beige
35203	Rigid	Vä/Hö	Small	13-15 cm	Beige
35203	Rigid	Vä/Hö	Medium	15-17 cm	Beige
35203	Rigid	Vä/Hö	Large	17-20 cm	Beige
35203	Rigid	Vä/Hö	X-Large	>20 cm	Beige

VISSION™ Thumb Orthosis Short with Stay

VISSION™ Thumb Orthosis Short with Stay är en tumortos med plastskena som ger stöd för tummen och kringliggande strukturer. Tumortosen är avsedd att stabilisera CMC- och MCP 1-lederna. Uppbyggnaden av det underliggande materialet gör att skenan inte trycker mot leder eller muskulatur. Materialet är ett stadigt och slitstarkt resårmaterial som ha en mjuk och bekväm insida. Öppet justerbart tumgrepp.

Användningsområde: Instabilitet i tummens leder (CMC -eller MCP-leden), inflammationer, förslitningsskador, belastningsrelaterade problem samt vid reumatiska förändringar.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 13 cm (storlek M).



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
46028	Med skena	Vä/Hö	XX-Small	11 - 12 cm	Svart
46028	Med skena	Vä/Hö	X-Small	12 - 13 cm	Svart
46028	Med skena	Vä/Hö	Small	13 - 14 cm	Svart
46028	Med skena	Vä/Hö	Medium	14 - 16 cm	Svart
46028	Med skena	Vä/Hö	Large	16 - 19 cm	Svart
46028	Med skena	Vä/Hö	X-Large	19 - 22 cm	Svart

VISSION™ Thumb Orthosis Long with Stay

VISSION™ Thumb Orthosis Long with Stay är en smidig, elastisk tumortos i lång modell. Ortosen har en uttagbar metallskena som ger stöd för tummen och kringliggande strukturer samt ett lätt stöd för handleden. Tumortosen är avsedd att begränsa rörelse i CMC- och MCP 1-lederna och positionera tummen i en funktionell position. Den är tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Öppet justerbart tumgrepp och den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand.

Användningsområde: Osteoartros och/eller instabilitet i CMC och MCP 1, Triggerfinger, Morbus de Quervain.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 16 cm (storlek M).



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
46023	Lång med skena	Vä/Hö	XX-Small	11 - 12 cm	Svart
46023	Lång med skena	Vä/Hö	X-Small	12 - 13 cm	Svart
46023	Lång med skena	Vä/Hö	Small	13 - 14 cm	Svart
46023	Lång med skena	Vä/Hö	Medium	14 - 16 cm	Svart
46023	Lång med skena	Vä/Hö	Large	16 - 19 cm	Svart
46023	Lång med skena	Vä/Hö	X-Large	19 - 22 cm	Svart

Basic tumortos kort

Ortos med plastskenor som ger stöd för tummen och kringliggande strukturer. Materialet är klippt på skrådden för bästa passform och elasticitet. Öppet justerbart tumgrepp. Den långa modellen är 2 cm längre och ger stöd även för handleden. Kan kombineras med handledsband 27448 för extra stabilitet.

Användningsområde: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Övrigt: Basic tumortos kort - ortosens längd på radialsidan är 12,5 cm. Basic tumortos lång - ortosens längd på radialsidan är 15 cm.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
27443	Kort	Vä/Hö	X-Small	< 12 cm	Blå
27443	Kort	Vä/Hö	Small	11-14 cm	Blå
27443	Kort	Vä/Hö	Medium	14-17 cm	Blå
27443	Kort	Vä/Hö	Large	17-20 cm	Blå
27443	Kort	Vä/Hö	X-Large	20-23 cm	Blå

S.O.T tumortos

S.O.T tumortos är en anatomiskt formad vilootos för tumme och handflata. Ortosen positionerar tummen i ett optimalt viloläge. Den är utformad för att begränsa rörelserna i tummens CMC- och MCP-led, ge stöd för handens valv samt positionera tummens leder och muskler i ett bekvämt viloläge. Ortosen har en justerbar aluminiumkärna som enkelt kan anpassas och omformas till en individuell passform. Ortosen kan justeras efterhand som kontrakturen förändras. Den smidiga designen gör den till ett utmärkt alternativ till specialtillverkade vilootoser. Läs mer om anpassning och omformning i broschyren Tips & Tricks.

När extra stöd för handleden behövs kan S.O.T Tumortos användas tillsammans med en handledsortos. Vission 46029 och Selection 35207 är utmärkta ortoser för att kombinera med S.O.T Tumortos.

Användningsområde: SOT Tumortos är avsedd att användas vid artros, reumatoid artrit, adduktionskontrakturer i tummen och vid överbelastningsskador.

Övrigt: SOT Tumortos går att tvätta i 40 grader.



Mått
Mått 1: 2-5 MCP
Mått 2: Handens längd från handled till fingertoppar

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått 1	Mått 2
28720	SOT Tumortos	Vä/Hö	Small	≤7,5 cm	≤ 18,5 cm
28720	SOT Tumortos	Vä/Hö	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
28720	SOT Tumortos	Vä/Hö	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm
28721	Extra överdrag	Vä/Hö	Small	-	-
28721	Extra överdrag	Vä/Hö	Medium	-	-
28721	Extra överdrag	Vä/Hö	Large	-	-
28726	SOT extra tyg	Bilat.	35 x 35 cm	-	-

Tee Pee™ tumortos

Tumortos med tre formbara aluminiumskenor; centralt, dorsalt och palmart. Ortosen ger ett stabilt stöd för tummen. Tillverkad av perforerad luftig mockaimitation samt foder som andas.

Användningsområde: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet.



Mått
Längd från handled till tummens IP-led

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
28560	Bilat.	X-Small	<9 cm	Svart
28560	Bilat.	Small	9-10 cm	Svart
28560	Bilat.	Medium	10-11,5 cm	Svart
28560	Bilat.	Large	11,5-13 cm	Svart
28560	Bilat.	X-Large	>13 cm	Svart

CMC-X Lacer tumortos

CMC-X Lacer™ tumortos ger smärtlindring vid osteoartrit i tummens CMC-led samtidigt som den tillåter rörelse. Låsningssystemet med snörning kan enkelt justeras och placera tumbasen i önskad abduktionsgrad för att hjälpa till att stabilisera CMC leden och samtidigt tillåta tummen en funktionell rörlighet . Den justerbara polstrade aluminiumskenan arbetar tillsammans med snörningssystemet och ger ett lätt tryck med ytterligare stabilisering av CMC leden. CMC-X Lacer tumortos är tillverkad av hypoallergen CoolFlex™ -material för komfort och kompression. CMC-X Lacer innehåller inte latex eller neoprene.



Mått
Omkrets handled.

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
28562	Bilat.	X-Small	<14 cm	Svart
28562	Bilat.	Small	14-16 cm	Svart
28562	Bilat.	Medium	16-18 cm	Svart
28562	Bilat.	Large	18-19,5 cm	Svart
28562	Bilat.	X-Large	>19,5 cm	Svart

CMC tumortos

Denna tumbasortos är avsedd att stödja CMC-leden vid instabilitet och förslitningsskador. Den polstrade inre skenan i kombination med ett yttre elastiskt förslutningsband ger kompression av tumbasen och hjälper därmed till att stabilisera CMC-leden.

Användningsområde: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
28561	Vä/Hö	X-Small	<14 cm	Svart
28561	Vä/Hö	Small	14-15,5 cm	Svart
28561	Vä/Hö	Medium	15,5-17,5 cm	Svart
28561	Vä/Hö	Large	17,5-19,5 cm	Svart
28561	Vä/Hö	X-Large	>19,5 cm	Svart

CMCcare tumortos

Tumortos som stödjer tummens CMC-led och håller metakarpalleden i en funktionell position med bibehållen greppfunktion. Ortosen har en integrerad formbar aluminium-skena och en justerbar kardborrlåsning. Den anatomiska designen, med sina avfasade kanter ger en god passform och bästa komfort. Handleden och övriga delar av handen kan röra sig fritt utan att hindras av ortosen.

Användningsområde: Osteoartrit i tummens leder, instabilitet i tummen, postoperativt efter artroplastik av CMC-1 leden.



Mått
Omkrets runt MCP-lederna

Art.nr.	Modell	Storlek	Färg	Vä/Hö	Mått
28554	Ersättningsband	Universell	Grå	-	-
28555	Ersättningsband med alligatorlås	-	Svart	-	-
28552	CMCcare	Small	Grå	Vä/Hö	16 - 19,5 cm
28552	CMCcare	Medium	Grå	Vä/Hö	19,5 - 22,5 cm
28552	CMCcare	Large	Grå	Vä/Hö	22,5 - 26 cm

Tumortos Rigid Airmed

Tumbasortos avsedd för posttraumatisk immobilisering av tummens MCP-led. Ortosen ger stöd och avlastar trapezio-metakarpalleden. Hjälper patienten att begränsa rörelser som kan orsaka skada eller smärta. Ortosen har insydda metallskenor som går att forma efter behov. Ortosen är mjuk och behaglig att bära. Är försedd med ventilationshål.

Användningsområde: Posttraumatisk immobilisering av tummens MCP-led, karpaltunnelsyndrom och tendenit.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm i storlek S och 13 cm i storlek L.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
28550	Bilat.	Small	14 - 18 cm	Beige
28550	Bilat.	Large	18 - 22 cm	Beige
28551	Bilat.	Small	14 - 18 cm	Grå
28551	Bilat.	Large	18 - 22 cm	Grå

Tripod™ Wrist Lacer II

Tripod Wrist Lacer II – Stabil handledsortos med enkel applicering

Tripod Wrist Lacer II är ett handledsstöd som kombinerar effektiv immobilisering med smidig applicering. Ulnara, palmara och dorsala skenor i aluminium begränsar handledens flexion och extension, och bidrar samtidigt till att minska radial-ulnar avvikelse.

Tumremmen har ett extra kardborrefäste som ger ökad säkerhet. Palmara och ulnara skenor kan tas bort vid behov för att möjliggöra en progressiv behandlingsstrategi.

En patenterad snörningsdesign fördelar trycket jämnt över alla snören och ger en jämn kompression för utmärkt stöd. Spänningen kan enkelt justeras för patienter med olika mått på handled och underarm.

Tillverkad i slitstark polymerfilt och perforerad mocka som låter fukt avdunsta från huden – för ökad komfort och följsamhet.

Användningsområde: Post-frakturvård, postoperativ vård, karpaltunnelsyndrom, handledsfrakturer eller handledsöveransträngning.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 20 cm.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
28581	Vä/Hö	X-Small	12-14 cm	Svart
28581	Vä/Hö	Small	14-16 cm	Svart
28581	Vä/Hö	Medium	16-18 cm	Svart
28581	Vä/Hö	Large	18-20 cm	Svart
28581	Vä/Hö	X-Large	20-22 cm	Svart

SELECTION® Ulnar Deviation

SELECTION® Ulnar deviationsortos är avsedd att förbättra fingerpositioneringen och därmed optimera handfunktionen och greppet. Ortosen är exklusivt designad och tillverkad med vårt unika trelagers Selection-material. Tack vare sin lågprofildesign följer den handens konturer utan att begränsa funktionen. Materialet kan klippas utan att fransa sig, vilket möjliggör ytterligare anpassning vid behov.

Den smidiga fästyten gör det möjligt att placera kardborrebanden var som helst på ortosen för att optimera den önskade dragriktningen. Ulnardeviationsortosen ger stöd åt handens valv samtidigt som den bidrar till ompositionering och stabilisering, samt kan hjälpa till att hantera smärta.

En liten urskärning i materialet vid det femte fingret förbättrar ortosens anpassningsförmåga till handens ulnarsida, vilket säkerställer en exakt passform och motverkar klämning. Vid behov av ytterligare stabilisering av handleden kan ortosen kombineras med en SELECTION® handledsortos. Den kan även användas för ompositionering och stabilisering hos patienter med ledrörlighet och muskelsvaghet.

Användningsområde: För patienter med artros. Ulnardeviation kan förekomma vid inflammatoriska och degenerativa sjukdomar såsom RA. Selection Ulnardeviation kan även användas vid överrörliga leder och vid svag muskulatur med syfte att erbjuda mer stadga. Skall inte användas i samband med fixerade kontrakturer.



Mått
Omkrets MCP 2-5

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
35218	Vä/Hö	X-Small	13-16 cm	Svart
35218	Vä/Hö	Small	16-19 cm	Svart
35218	Vä/Hö	Medium	19-22 cm	Svart
35218	Vä/Hö	Large	22-25 cm	Svart

SELECTION® handled kort

Smidig, elastisk handledsortos utan skena, tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Ortosen som är kortare än Selection Handledsortos Soft och Rigid ger ett stöd för handleden som inte hindrar rörligheten men ger en lätt kompression. Låsningssystem med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Separat extra band finns att beställa.

Användningsområde: Stöder och avlastar handleden efter skada, operation, vid kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Efter ganglionoperationer, vid behov av kompression. Överrörliga leder vid Ehlers-Danlos Syndrom. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 13 cm.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
35222	Kort utan skena	Vä/Hö	X-Small	< 11 cm	Svart
35222	Kort utan skena	Vä/Hö	Small	11 - 14 cm	Svart
35222	Kort utan skena	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm	Svart
35222	Kort utan skena	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm	Svart
35222	Kort utan skena	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm	Svart

SELECTION® handled kort beige

Smidig, elastisk handledsortos utan skena, tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Ortosen som är kortare än Selection Handledsortos Soft och Rigid ger ett stöd för handleden som inte hindrar rörligheten men ger en lätt kompression. Låsningssystem med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Separat extra band finns att beställa.

Användningsområde: Stödjer och avlastar handleden efter skada, operation, vid kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Efter ganglionoperationer, vid behov av kompression. Överrörliga leder vid Ehlers-Danlos Syndrom. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 13 cm.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
35223	Kort utan skena	Vä/Hö	X-Small	< 11 cm	Beige
35223	Kort utan skena	Vä/Hö	Small	11 - 14 cm	Beige
35223	Kort utan skena	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm	Beige
35223	Kort utan skena	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm	Beige
35223	Kort utan skena	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm	Beige

SELECTION® Open Wrist

En stabil och enkel handledsortos i det sköna SELECTION® materialet. Ortosen har en formad plastskena på volarsidan och en smal plastskena dorsalt. Ortosen har ett stabiliserande band runt handleden och tas enkelt på med en hand. SELECTION® Open Wrist är avsedd att användas då handleden behöver avlastning.

Användningsområde: Inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18 cm. Extra volarskena kan beställas med 10 st i en förpackning.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
35207	Vä/Hö	X-Small	< 11 cm	Svart
35207	Vä/Hö	Small	11 - 14 cm	Svart
35207	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm	Svart
35207	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm	Svart
35207	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm	Svart

SELECTION® handledsortos Rigid

Smidig, elastisk handledsortos med tumdel tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Tumdelen ger genom sitt stabilare material ett bra stöd och håller tummen i neutralläge. SELECTION® Rigid har en formad plastskena på volarsidan och en mjukare rak plastskena på dorsalsidan. Skenorna är uttagbara. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax, för optimal passform.

Användningsområde: Då handleden och tummen behöver avlastning t ex vid inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18 cm. Extra volarskena kan beställas med 10 st i en förpackning.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
35206	Rigid	Vä/Hö	X-Small	< 11 cm	Svart
35206	Rigid	Vä/Hö	Small	11 - 14 cm	Svart
35206	Rigid	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm	Svart
35206	Rigid	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm	Svart
35206	Rigid	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm	Svart
35206	Rigid	Vä/Hö	XX-Large	23 - 26 cm	Svart

SELECTION® handledsortos Soft

Smidig, elastisk handledsortos tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. SELECTION® Soft har en formad plastskena på volarsidan och en mjukare rak plastskena på dorsalsidan. Skenorna är uttagbara. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax, för optimal passform.

Användningsområde: Då handleden behöver avlastning t ex vid inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Övrigt: Denna modell är 18 cm lång på volarsidan. Plusstorlekar har extra vidd i underarmsområdet och bör väljas om mått 2 matchar de storlekar som anges i tabellen. Extra volarskena kan beställas i paket om 10 stycken.



Mått
Mått 1 = Handledens omkrets
Mått 2 = Mellanarm. Omkrets 8 cm ovanför handleden

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Färg	Mått 1	Mått 2
35204	Soft	Vä/Hö	X-Small	Svart	< 11 cm	-
35210	Extra volarskena	Bilat.	En storlek	Blå	22 - 168 mm	-
35204	Soft	Vä/Hö	Small	Svart	11 - 14 cm	-
35204	Soft	Vä/Hö	Small Plus	Svart	11 - 14 cm	18 - 21 cm
35204	Soft	Vä/Hö	Medium	Svart	14 - 17 cm	-
35204	Soft	Vä/Hö	Medium Plus	Svart	14 - 17 cm	21 - 24 cm
35204	Soft	Vä/Hö	Large	Svart	17 - 20 cm	-
35204	Soft	Vä/Hö	Large Plus	Svart	17 - 20 cm	24 - 27 cm
35204	Soft	Vä/Hö	X-Large	Svart	20 - 23 cm	-
35204	Soft	Vä/Hö	X-Large Plus	Svart	20 - 23 cm	27 - 30 cm
35204	Soft	Vä/Hö	XX-Large	Svart	23 - 26 cm	-
35204	Soft	Vä/Hö	XX-Large Plus	Svart	23 - 26 cm	30 - 33 cm
35205	Soft	Vä/Hö	X-Small	Beige	< 11 cm	-
35205	Soft	Vä/Hö	Small	Beige	11 - 14 cm	-
35205	Soft	Vä/Hö	Small Plus	Beige	11 - 14 cm	18 - 21 cm
35205	Soft	Vä/Hö	Medium	Beige	14 - 17 cm	-
35205	Soft	Vä/Hö	Medium Plus	Beige	14 - 17 cm	21 - 24 cm
35205	Soft	Vä/Hö	Large	Beige	17 - 20 cm	-
35205	Soft	Vä/Hö	Large Plus	Beige	17 - 20 cm	24 - 27 cm
35205	Soft	Vä/Hö	X-Large	Beige	20 - 23 cm	-
35205	Soft	Vä/Hö	X-Large Plus	Beige	20 - 23 cm	27 - 30 cm
35205	Soft	Vä/Hö	XX-Large	Beige	23 - 26 cm	-
35205	Soft	Vä/Hö	XX-Large Plus	Beige	23 - 26 cm	30 - 33 cm

SELECTION® Multiopen

SELECTION® Multiopen är en medium-stabil handledsortos med dubbel låsningsfunktion. Den kan öppnas upp helt och sen löst förslutas med kardborrlåsning och spänns åt med snörning. Användaren kan själv välja om den skall öppnas helt varje gång ortosen tas på/av eller om bara snörningsfunktionen skall användas. Den har en låg skärning i handen för att följa handens naturliga böjveck och urtagningen runt tummen låter thenarmuskulaturen arbeta fritt. Den tvådelade snörlåsningen i kombination med kardborrlåsningen möjliggör anpassning av vidden vid bredare underarm. Eftersom snörningen kommer från ulnarsidan minskar risken att tummen positioneras felaktigt. Reglerbart tumband som utgår volart. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Tillverkad i det luftiga och bekväma SELECTION®-materialet med alla de funktioner som detta medför. Ortosen är 22 cm lang, dvs 4 cm längre än en SELECTION® Soft 35204. Den har en formbar aluminiumskena på volarsiden som är uttagbar.

Användningsområde: Efter läkt radiusfraktur, mjukdelsskador, inflammationer, förslitningsskador, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Kontraindikation: Ska inte användas vid oläkta frakturer.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
35209	Multiopen	Vä/Hö	X-Small	< 11 cm	Svart
35209	Multiopen	Vä/Hö	Small	11 - 14 cm	Svart
35209	Multiopen	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm	Svart
35209	Multiopen	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm	Svart
35209	Multiopen	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm	Svart
35209	Multiopen	Vä/Hö	XX-Large	23 - 26 cm	Svart

SELECTION® Bromsa handled

Selection bromsa handled är avsedd att begränsa rörelsen i handleden för att avlasta handextensorerna, stödja handleden och minska smärta vid bl.a. tennisarmbåge. Ortosen har mjuka plastskenor på handryggen, justerbar band för tummen och SELECTION snörstängning. Stödet kan anpassas genom att välja att ha båda skenorna eller bara en i fickan. Snörstängningen gör att ortosen bättre sluter om handen och ger en bättre passform.

Användningsområde: Lateral epikondylit, överrörlighet, reumatiska problem, ospecifierad smärta.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 15 cm.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
35208	Selection Bromsa	Vä/Hö	X-Small	<11 cm	Svart
35208	Selection Bromsa	Vä/Hö	Small	11 - 14 cm	Svart
35208	Selection Bromsa	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm	Svart
35208	Selection Bromsa	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm	Svart
35208	Selection Bromsa	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm	Svart
35208	Selection Bromsa	Vä/Hö	X-Small	<11 cm	Svart

SELECTION® handled Barn

Mjuk och skön handledsortos avsedd för barn. Ortosen som är stabil har en aluminiumska på volarsidan och två dragband för en enkel och steglös låsning. Skenan är uttagbara. SELECTION® materialet är tunt, smidigt och låter huden andas. Tumbanden är justerbara och kanterna är mjuka. Färgdetaljerna är valda för att tilltala barnen.

Användningsområde: Reumatiska problem. Neurologiska skador där handleden behöver stöd och/eller korrigering. Efter avslutad gipsbehandling. Inflammationer.



Mått
Mått 1: Omkrets handled
Mått 2: Handflatsmått

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Färg	Längd	Mått 1	Mått 2
35305	Vä/Hö	XX-Small	Svart	11 cm	8,5 - 11 cm	5-6 cm
35305	Vä/Hö	X-Small	Svart	13,5 cm	10 - 12,5 cm	6-7 cm
35305	Vä/Hö	Small	Svart	14,5 cm	11,5 - 14 cm	7-8 cm
35305	Vä/Hö	Medium	Svart	17 cm	12 - 15,5 cm	8-9 cm
35305	Vä/Hö	Large	Svart	17,5 cm	14 - 16,5 cm	8-9 cm

SELECTION® Open Wrist Barn

En stabil och enkel handledsortos i det sköna SELECTION® materialet. Ortosen har en formad aluminiumska på volarsidan. Den har två tumband, ett som fästs runt tummen och ett som fästs på handryggen för att hålla tillbaka tummen så den inte faller in i handen. Selection Open Wrist Barn är avsedd att immobilisera CMC-led och handled i syfte att minska smärta, vägleda handleden till ett neutralt läge och vid behov stödja en handled efter trauma/operation.

Användningsområde: Reumatoid artrit, CP, efter trauma/operation.



Mått
Mått 1: Omkrets handled
Mått 2: Mått på handflatan
Mått 3: Ortosens längd på volarsidan

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Färg	Längd	Mått 1	Mått 2
35306	Barn	Vä/Hö	Small	Svart	14,5 cm	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm
35306	Barn	Vä/Hö	Medium	Svart	17 cm	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm
35306	Barn	Vä/Hö	Large	Svart	17,5 cm	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm

VISSION™ Wrist Orthosis Short

VISSION™ Wrist Orthosis Short är en något kortare handledsortos som stödjer och avlastar handleden. Ortosen är tillverkad i ett flexibelt resårmaterial som ger ett stabilt stöd, medan den mjuka insidan gör handledsstödet bekvämt att bära. Denna modell av handledsortos är utan volar skena. Ortosen har en god anatomisk passform inne i handen, över handryggen och runt tummens muskulatur. Modellen är helt öppen och enkel att ta på och av. Öppet justerbart tumgrepp.

Användningsområde: Stödjer och avlastar handleden efter skada, operation, avgipsning, överrörlighet, reumatiska problem, vid kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 13 cm.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
46030	Kort utan skena	Vä/Hö	XX-Small	11 - 12 cm	Svart
46030	Kort utan skena	Vä/Hö	X-Small	12 - 13 cm	Svart
46030	Kort utan skena	Vä/Hö	Small	13 - 14 cm	Svart
46030	Kort utan skena	Vä/Hö	Medium	14 - 16 cm	Svart
46030	Kort utan skena	Vä/Hö	Large	16 - 19 cm	Svart
46030	Kort utan skena	Vä/Hö	X-Large	19 - 22 cm	Svart

VISSION™ Wrist Orthosis with thumb part

VISSION™ Wrist Orthosis with thumb part är en smidig, elastisk handledsortos med tumdel tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Ortosen är avsedd att begränsa rörelse i CMC- och MCP 1-lederna och positionera tummen i en funktionell position. Stödet begränsar samtidigt flexion i handleden. Ortosen har en formad plastskena på volarsidan. Tumdelen har ett extra band för ytterligare justering av tumgreppet.

Användningsområde: Lätt till moderat instabilitet i CMC och MCP1, ligamentskador, inflammationer, degenerativa sjukdomar, trauma.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18,5 cm.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
46031	Med tumme	Vä/Hö	XX-Small	11 - 12 cm	Svart
46031	Med tumme	Vä/Hö	X-Small	12 - 13 cm	Svart
46031	Med tumme	Vä/Hö	Small	13 - 14 cm	Svart
46031	Med tumme	Vä/Hö	Medium	14 - 16 cm	Svart
46031	Med tumme	Vä/Hö	Large	16 - 19 cm	Svart
46031	Med tumme	Vä/Hö	X-Large	19 - 22 cm	Svart

VISSION™ CTS Night Splint

VISSION™ CTS Night Splint är en nattskena framtagen för att lindra och/eller förhindra nattliga domningar i händerna, som uppstår till följd av karpaltunnelsyndrom.

Användningsområde: Karpaltunnelsyndrom

Övrigt: Extra band kan köpas separat.



Mått
Mått 1: Omkrets handflata
Mått 2: Omkrets underarm

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått 1	Mått 2
46050	Vission CTS	Vä/Hö	Small	<20 cm	<23 cm
46050	Vission CTS	Vä/Hö	Large	>20 cm	>23 cm
46051	Extra bandset	-	-	-	-

CTS handledsortos

Nattortos av tunn, perforerad Kydexplast som immobiliserar handleden. Avsedd för patienter med karpaltunnelsyndrom med nattliga domningar och svullnader i händerna.

Användningsområde: Karpaltunnelsyndrom

Övrigt: Extra band kan köpas separat. Banden finns under kapitel Plaster och Material, art.nr. 25030.



Mått
Mått 1: Omkrets handflata
Mått 2: Omkrets underarm

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Färg	Mått 1	Mått 2
28542	Vä/Hö	Small	Ljusblå	<20 cm	<23 cm
28542	Vä/Hö	Large	Ljusblå	>20 cm	>23 cm

VISSION™ Wrist Orthosis

VISSION™ Wrist Orthosis är en handledsortos i standardmodell tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Ortosen har en god anatomisk passform inne i handen, över handryggen och runt tummens muskulatur. Den ger ett stabilt stöd för handleden med en formbar plastskena volart. Modellen är helt öppen och enkel att ta på och av med ett öppet, justerbart tumgrepp.

Användningsområde: Inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.



Mått
Omkrets handled.

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
46029	Med skena	Vä/Hö	XX-Small	11 - 12 cm	Svart
46029	Med skena	Vä/Hö	X-Small	12 - 13 cm	Svart
46029	Med skena	Vä/Hö	Small	13 - 14 cm	Svart
46029	Med skena	Vä/Hö	Medium	14 - 16 cm	Svart
46029	Med skena	Vä/Hö	Large	16 - 19 cm	Svart
46029	Med skena	Vä/Hö	X-Large	19 - 22 cm	Svart

Basic handledsortos kort

Enkel handledsortos i kort modell med kardborrlåsning som ger bra stöd och kompression. Öppna modeller som är lätta att ta på och av. Uttagbar och formbar aluminiumskena volart. Standardmodell med hook som fästpunkt och loop som förslutning ger flexibilitet vid storleksval.

Användningsområde: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Övrigt: Basic handledsortos kort - Ortosens längd på volarsidan är 18 cm.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
27441	Kort	Vä/Hö	X-Small	< 12 cm	Blå
27441	Kort	Vä/Hö	Large	17-20 cm	Blå
27441	Kort	Vä/Hö	Small	11-14 cm	Blå
27441	Kort	Vä/Hö	Medium	14-17 cm	Blå
27441	Kort	Vä/Hö	X-Large	20-23 cm	Blå

Basic handledsortos med tumme

Unikt designad handledsortos som stödjer tummen utan att bli otymplig.Tumdelen är delvis fristående för att följa thenarmuskulaturen och säkra en god passform. Tummen hålls i neutral-läge vid vila. Uttagbar och formbar aluminiumskena volart. Tummens skena i flexibel plast löper längs hela ortosen för extra stabilitet. Standardmodell med hook som fästpunkt och loop som förslutning ger flexibilitet vid storleksval.

Användningsområde: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18 cm.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
27442	Vä/Hö	X-Small	< 12 cm	Blå
27442	Vä/Hö	Small	11-14 cm	Blå
27442	Vä/Hö	Medium	14-17 cm	Blå
27442	Vä/Hö	Large	17-20 cm	Blå
27442	Vä/Hö	X-Large	20-23 cm	Blå

Wrist Lacer™ II handledsortos, kort

Mycket stabil handledsortos med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Skenorna kan tas ut och formas. En kudde på insidan av ortosens strumpa skyddar tumbasens senor vid den distala snörningen. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Låsningssystem med en unik design som ger en jämn kompression genom alla fyra banden. Kompressionen kan enkelt justeras av patienter med ovanlig form på underarm och handled. Snörningen är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp.

Användningsområde: Karpaltunnelsyndrom, posttraumatiskt och postoperativt.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 21 cm i storlek M.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
28578	Wrist Lacer II	Vä/Hö	XXS	<12 cm	Svart
28578	Wrist Lacer II	Vä/Hö	X-Small	12-14 cm	Svart
28578	Wrist Lacer II	Vä/Hö	Small	14-16 cm	Svart
28578	Wrist Lacer II	Vä/Hö	Medium	16-18 cm	Svart
28578	Wrist Lacer II	Vä/Hö	Large	18-20 cm	Svart
28578	Wrist Lacer II	Vä/Hö	X-Large	20-22 cm	Svart
28578	Wrist Lacer II	Vä/Hö	XX-Large	22-25 cm	Svart

Wrist Lacer™ II handledsortos, lång

Mycket stabil handledsortos i lång modell med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Skenorna kan tas ut och formas. En kudde på insidan av ortosens strumpa skyddar tumbasens senor vid den distala snörningen. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Låsningssystem med en unik design som ger en jämn kompression genom alla fyra banden. Kompressionen kan enkelt justeras av patienter med ovanlig form på underarm och handled. Snörningen är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp.

Användningsområde: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 26 cm i storlek M.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
28579	Wrist Lacer™II Lång	Vä/Hö	Small	14-16 cm	Svart
28579	Wrist Lacer™II Lång	Vä/Hö	Medium	16-18 cm	Svart
28579	Wrist Lacer™II Lång	Vä/Hö	Large	18-20 cm	Svart
28579	Wrist Lacer™II Lång	Vä/Hö	X-Large	20-22 cm	Svart
28579	Wrist Lacer™II Lång	Vä/Hö	X-Small	12-14 cm	Svart

Lacer Wrist Kort

Lacer Wrist är en mycket stabil handledsortos med formbara skenor dorsalt och volart samt med ett stabiliserande handledsband. Snörningsstängningen möjliggör en enkel applicering med en hand och kudden på den palmara sidan ger ytterligare stöd och komfort. Lacer Wrist används vid olika skador och tillstånd samt före och efter operationer. Produkten finns även i lång (art.nr. 51427) version samt i många storlekar för att passa olika behov.

Användningsområde: Artrit, stukningar, förslitningar och instabilitet. Skador och tillstånd i mjuka vävnader. Behandling efter frakturer.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Färg	Längd	Omkrets
51426	Lacer Wrist Kort	Vä/Hö	XX-Small	Svart	18 cm	10,5 - 12,5 cm
51426	Lacer Wrist Kort	Vä/Hö	X-Small	Svart	20 cm	12,5 - 14 cm
51426	Lacer Wrist Kort	Vä/Hö	Small	Svart	21 cm	14 - 16 cm
51426	Lacer Wrist Kort	Vä/Hö	Medium	Svart	21 cm	16 - 18 cm
51426	Lacer Wrist Kort	Vä/Hö	Large	Svart	21 cm	18 - 19,5 cm
51426	Lacer Wrist Kort	Vä/Hö	X-Large	Svart	21 cm	19,5 - 21,5 cm

Lacer Wrist Lång

Lacer Wrist är en mycket stabil handledsortos med formbara skenor dorsalt och volart samt med ett stabiliserande handledsband. Snörningsstängningen möjliggör en enkel applicering med en hand och kudden på den palmara sidan ger ytterligare stöd och komfort. Lacer Wrist används vid olika skador och tillstånd samt före och efter operationer. Produkten finns även i kort (art.nr 51426) version samt i många storlekar för att passa olika behov.

Användningsområde: Artrit, stukningar, förslitningar och instabilitet. Skador och tillstånd i mjuka vävnader. Behandling efter frakturer.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Färg	Längd	Omkrets
51427	Lacer Wrist Lång	Vä/Hö	Small	Svart	24 cm	14 - 16 cm
51427	Lacer Wrist Lång	Vä/Hö	Medium	Svart	24,5 cm	16 - 18 cm
51427	Lacer Wrist Lång	Vä/Hö	Large	Svart	25 cm	18 - 19,5 cm
51427	Lacer Wrist Lång	Vä/Hö	X-Large	Svart	25,5 cm	19,5 - 21,5 cm

Bromsa handledsortos

Handledsortos med två flexibla plastskenor dorsalt som tillsammans med det kraftiga resårbandet begränsar dorsalflexion av handleden. Motståndet justeras enkelt genom att använda en eller båda plastskenorna och att placera resårbandet mer proximalt eller distalt. Ingen skena volart som påverkar handens övriga funktioner.

Användningsområde: Avlastning av extensorsenorna i samband med lateral epikondylit.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 15 cm.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
28240	Vä/Hö	Small	11-14 cm	Blå
28240	Vä/Hö	Medium	14-17 cm	Blå
28240	Vä/Hö	Large	17-20 cm	Blå
28240	Vä/Hö	X-Large	20-23 cm	Blå

Gripa handledsortos

Ortosen ger effektivt stöd för handleden vid tunga eller monotona arbetsmoment. Ett kraftigt resårband stöder handleden. "Tuff Grip" inne i handflatan säkrar ett bra grepp om olika verktyg. Framtagen tillsammans med montörer inom verkstadsindustrin

Användningsområde: Avlastning för handflatan samt handleden, preventivt vid t.ex. monteringsarbeten

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18 cm.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
28210	Vä/Hö	Small	11-14 cm	Blå
28210	Vä/Hö	Medium	14-17 cm	Blå
28210	Vä/Hö	Large	17-20 cm	Blå
28210	Vä/Hö	X-Large	20-23 cm	Blå

Ryno Lacer® II handledsortos

Mycket stabil handleds- och tumortos med formbara aluminiumskenor dorsalt, volart och radiallyt. Den radiallya tumskenan löper i hela skenans längd och immobiliserar tummen effektivt. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Ryno Lacer II är en uppdaterad och förbättrad RynoLacer med bättre polstring i handflatan, mer polstring över tummen och uppdatering av velcron på ortosens undersida.

Användningsområde: Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 22 cm.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
28576	Vä/Hö	X-Small	<14 cm	Svart
28576	Vä/Hö	Small	14-16 cm	Svart
28576	Vä/Hö	Medium	16-18 cm	Svart
28576	Vä/Hö	Large	18-20 cm	Svart
28576	Vä/Hö	X-Large	20-22 cm	Svart

V-Strap™ handledsortos kort

Påminner om Wrist Lacer men skiljer sig i förslutningssystem och passform. Ortosen följer handens kontur och passar även till en bred hand. Det patenterade V-formade låsningssystemet håller banden på plats i D-ringarna vid på- och avtagning.

Användningsområde: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 20 cm.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
28574	Kort	Vä/Hö	XX-Small	< 12 cm	Svart
28574	Kort	Vä/Hö	X-Small	12-14 cm	Svart
28574	Kort	Vä/Hö	Small	14-16 cm	Svart
28574	Kort	Vä/Hö	Medium	16-18 cm	Svart
28574	Kort	Vä/Hö	Large	18-20 cm	Svart
28574	Kort	Vä/Hö	X-Large	20-22 cm	Svart
28574	Kort	Vä/Hö	XX-Large	22-25 cm	Svart

V-Strap™ handledsortos lång

Påminner om Wrist Lacer med skiljer sig i förslutningssystem och passform. Ortosen följer handens kontur och passar även till en bred hand. Det patenterade V-formade förslutningssystemet håller banden på plats i D-ringarna vid på- och avtagning.

Användningsområde: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 26 cm.



Mått
Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
28575	Lång	Vä/Hö	Small	14-16 cm	Svart
28575	Lång	Vä/Hö	Medium	16-18 cm	Svart
28575	Lång	Vä/Hö	Large	18-20 cm	Svart
28575	Lång	Vä/Hö	X-Large	20-22 cm	Svart

Airtex Wrist Support

Airtex handledsortos ger stöd och kompression vid återhämtning efter akut skada. Ortosen lämpar sig även väl för aktiva personer i behov av extra stöd runt handleden vid fysisk aktivitet.

Ortosen ger ett dynamiskt stöd till senor och muskler runt handleden utan att immobilisera eller reducera handledens funktionalitet, vilket bidrar till en förbättrad behandling.

Ortosen har dubbel justering med hjälp av två rigida band för ökad stabilitet och fästen som kan justeras individuellt för att reglera kompression.

Ortosen ingår i den nya AIRTEX-serien från PRIM som har utformats med en ny hudvänlig limningsteknik som gör det möjligt att sammanfoga de olika textildelarna utan sömmar. Avsaknaden av tråd och sömmar minskar skav på huden, vilket ökar komforten för användaren.

Airtex produkterna är lätta med 100% aktiv andningsförmåga. Tyget är utformat för att säkerställa tillräcklig ventilation genom att aktivt hjälpa till att avlägsna värme och svett så att huden känns frisk, fräsch och bekväm.

Användningsområde: Artros, artrit, tendinit, bursit, stukningar och mindre skador. Stöd och skydd för sport- och arbetsaktiviteter.



Mått
Omkrets handled.

Art.nr.	Storlek	Mått	Färg
28553	One Size	13-26 cm	Svart

Aqtivo Elastic Wrist Support

Aqtivo Elastic handledsortos är en enkel ortos med anpassningsbar kompressionsförstärkning. One Size.

Aqtivo elastiska ortoser är en serie sömlösa, textilbaserade ortoser som ger lätt stöd vid idrottsaktiviteter och under rehabiliteringsfasen efter skador. De stabiliserar lederna, erbjuder riktad kompression och förbättrar den proprioceptiva återkopplingen. Anatomiskt formade och helt sömlösa säkerställer ortoserna maximal komfort utan friktion.

Tillverkade i lätta, flexibla 3D-fibrer med optimal andningsförmåga, absorberar det innovativa AirQuick-tyget effektivt fukt och transporterar den utåt, vilket skapar ett kontinuerligt luftflöde som håller huden sval och torr. Alla modeller är bilaterala.

Användningsområde: Stabilisering och kompression efter lättare handledsskador. Mild artros i handleden, generell handledssmärta, tendinit, lindriga blåmärken.



Mått
Handledens omkrets

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
20301	Aqtivo Elastic Wrist Support	Bilat.	One Size	14-17 cm	Blå

Aqtivo Long Elastic Wrist Support

Aqtivo Long Elastic handledsstöd är en enkel ortos som erbjuder anpassningsbar kompressionsförstärkning. Denna långa modell täcker handens bas och sitter på plats under aktivitet.

Aqtivo elastiska ortoser är en serie sömlösa, textilbaserade ortoser som ger lätt stöd vid idrottsaktiviteter och under rehabiliteringsfasen efter skador. De stabiliserar lederna, erbjuder riktad kompression och förbättrar den proprioceptiva återkopplingen. Anatomiskt formade och helt sömlösa säkerställer ortoserna maximal komfort utan friktion.

Tillverkade i lätta, flexibla 3D-fibrer med optimal andningsförmåga, absorberar det innovativa AirQuick-tyget effektivt fukt och transporterar den utåt, vilket skapar ett kontinuerligt luftflöde som håller huden sval och torr. Alla modeller är bilaterala.

Användningsområde: Stabilisering och kompression efter lättare handledsskador. Mild artros i handleden, stukningar, kroniska posttraumatiska eller postoperativa inflammatoriska tillstånd, tenovaginit.



Mått
Handledsmått

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Färg	Storlek	Mått
20302	Aqtivo Long Elastic Wrist Support	Bilat.	Blå	Small	14-17 cm
20302	Aqtivo Long Elastic Wrist Support	Bilat.	Blå	Medium	17-20 cm
20302	Aqtivo Long Elastic Wrist Support	Bilat.	Blå	Large	17-20 cm

VISSION™ Wrist Orthosis Dorsal

VISSION™ Wrist Orthosis Dorsal är en bekväm textil handledsortos utvecklad för kliniskt bruk. Handledsstödet är idealisk när en volar skena inte tolereras eller orsakar obehag under användning. Ortosen har två flexibla plastskenor på dorsalsidan, som begränsar handledsextension samtidigt som full greppfunktion bibehålls. Ett elastiskt handledsband ger ytterligare stabilisering och stödnivån kan justeras genom att använda en eller båda skenorna. Justerbart tumband.

- Två dorsala plastskenor – använd en eller båda för att variera stödnivån
- Elastiskt handledsband för extra stabilisering
- Mjuk, andningsbar textil för optimal patientkomfort
- Bibehåller greppfunktion medan överdriven handledsrörelse begränsas
- Används med fördel tillsammans med armbågsortos för behandling av lateral epikondylit

Användningsområde: För behandling av tendinit, karpaltunnelsyndrom, lateral epikondylit, hypermobilitet, reumatiska tillstånd och ospecifik smärta.



Mått
Mått 1: Omkrets runt handleden
Mått 2: Bredd över handflatan

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Färg	Mått 1	Mått 2
46033	Vission Wrist Orthosis Dorsal	Vä/Hö	Small	Svart	11-14 cm	7,5-8,5
46033	Vission Wrist Orthosis Dorsal	Vä/Hö	Medium	Svart	14-17 cm	8,5-9,5 cm
46033	Vission Wrist Orthosis Dorsal	Vä/Hö	Large	Svart	17-20 cm	9,5-10,5 cm
46033	Vission Wrist Orthosis Dorsal	Vä/Hö	X-Large	Svart	20-23 cm	10,5-11,5 cm

S.O.T vilootos

S.O.T Vilootos är avsedd för händer som behöver stöd av en ortos vid vila eller för stretching, för att upprätthålla eller öka handens rörlighet. Den väl genomtänkta biomekaniska positioneringen av lederna stimulerar den spastiska handen till avslappning och kan även bidra till minskad smärta. Ortosen kan också användas för att positionera handleden i ett neutralt läge. Överdraget (eller täcket som det också kallas) fördelar trycket väl på volar- och dorsalsidan av handen och armen och kan på så sätt förhindra eller eliminera svullnad. Ortosen levereras i en grundposition för viloställning. Den kan enkelt omformas till POSI (Position of Safe Immobilization) för användning efter trauma och handkirurgi.

S.O.T är en smidig och lätt ortos med modernt utseende. Kärnan av aluminium gör att ortosen enkelt kan finjusteras till önskad position. Aluminiumkärnan är omsluten av polyetenskum som täckts med en skön textil. Överdragets glatta utsida och ortosens låga profil gör att den får plats under kläderna. Till ortosen finns en del extra tillbehör. Det oelastiska handledsbandet kan användas för att ge ett stadigare tryck över handleden, t.ex. vid spasticitet. Fingerdelare och kilar i flera olika storlekar.

Användningsområde: Stroke, cerebral pares, reumatoid artrit, plexus- och muskeldystrofi, radialis pares. I "POSI" (Position of Safe Immobilization) vid trauma frakturer, brännskador, ligamentskador och efter kirurgi.



Mått
Mått 1: 2-5 MCP
Mått 2: Handens längd från handled till fingertoppar

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Färg	Mått 1	Mått 2	Antal/Förp
28710	SOT Vilootos	Vä/Hö	XXX-Small	Svart	5,5 cm	≤ 12 cm	-
28726	SOT extra tyg	-	35 x 35 cm	Svart	-	-	-
28727	SOT kardborre hård	-	10 x 30 cm	Svart	-	-	2 st
28710	SOT Vilootos	Vä/Hö	XX-Small	Svart	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm	-
28710	SOT Vilootos	Vä/Hö	X-Small	Svart	≤ 7,5 cm	≤ 16 cm	-
28710	SOT Vilootos	Vä/Hö	Small	Svart	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	-
28710	SOT Vilootos	Vä/Hö	Medium	Svart	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	-
28710	SOT Vilootos	Vä/Hö	Large	Svart	≤ 9 cm	≤ 21 cm	-
28711	MCP KIL	Bilat.	XX-Small	Svart	Bredd 65 mm	Höjd 10 mm	-
28711	MCP KIL	Bilat.	Small	Svart	Bredd 75 mm	Höjd 15 mm	-
28711	MCP KIL	Bilat.	Large	Svart	Bredd 90 mm	Höjd 20mm	-
28712	Fingerdelare	Bilat.	Barn	Svart	-	-	-
28712	Fingerdelare	Bilat.	Medium	Svart	-	-	-
28712	Fingerdelare	Bilat.	Large	Svart	-	-	-
28713	Extra band	Bilat.	XXX-Small-X-Small	Svart	-	-	-
28713	Extra band	Bilat.	Small-Large	Svart	-	-	-
28714	Extra överdrag	Vä/Hö	XXX-Small	Svart	-	-	-
28714	Extra överdrag	Vä/Hö	XX-Small	Svart	-	-	-
28714	Extra överdrag	Vä/Hö	X-Small	Svart	-	-	-
28714	Extra överdrag	Vä/Hö	Small	Svart	-	-	-
28714	Extra överdrag	Vä/Hö	Medium	Svart	-	-	-
28714	Extra överdrag	Vä/Hö	Large	Svart	-	-	-

Handflatsskydd

Mjukt skydd som skyddar handflatan vid fingerkontrakturer. Önskas ytterligare extension kan en rulle enkelt sättas in mellan handflata och fingrar.

Användningsområde: Framskridna kontrakturer.



Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Färg
51600	Handflatsskydd 1 st	Vä/Hö	En storlek	Vit/Beige
51601	Handflatsskydd 3 st	Vä/Hö	En storlek	Vit/Beige

Handflatsskydd med fingerdelare

Mjukt skydd som skyddar handflatan vid fingerkontrakturer. Materialet mellan fingrarna ger en lätt abduktion. Kan öppnas helt för enkel påtagning.

Användningsområde: Framskridna kontrakturer.



Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Färg
51605	Vä/Hö	En storlek	Vit/Beige

Comfy handortos

En viloortos som hjälper till att bibehålla/förbättra extension i handled, MP-, PIPoch DIP-lederna. Den förebygger också ytterligare deformiteter, förbättrar ROM och underlättar för en god hygien av involverad extremitet. Ortosen kan justeras till önskad extension/flexion av handled och fingrar. Överdraget är en polyester/ bomullsblandning som tillåter luft att cirkulera för att minska risken för skador på huden.

Användningsområde: Positionera och stödja handen vid handleds- MP- PIPeller DIP böjningsmönster, ulnar deviation, dropphand, deformiteter relaterade till neuromuskulära försvagningar.

Kontraindikation: Cirkulationsproblem, tryckpunkter eller hudirritationer.



Mått
Mått 1: Från handled till toppen av långfingert.
Mått 2: Totala längden (mitten på underarmen till toppen av långfingret).

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Färg	Mått 1	Mått 2
51645	Comfy handortos	Bilat.	Small	Blå	15-18 cm	28 cm
51645	Comfy handortos	Bilat.	Medium	Blå	18-20 cm	32 cm

Jura handflatsskydd

Mjukt skydd som skyddar handflatan vid fingerkontrakturer. Önskas ytterligare extension kan en rulle enkelt sättas in mellan handflata och fingrar. Säljs i 3-pack.

Användningsområde: Framskridna kontrakturer.



Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Färg
51602	Handflatsskydd 3st	Vä/Hö	Onesize	Vit/Beige
51602	Handflatsskydd 3st	Vä/Hö	Onesize	Vit/Beige

Carve-It™ handpositioneringsortos

Ortos som hjälper till att hålla handen med mild till moderat fingerspasticitet i en funktionell position. Ortosen har avtagbar polstring. Inne i handen finns en anatomiskt formad skumdel som bevarar handflatans valv. En flat undersida gör den enkelt att positionera i sängen etc. Kan klippas till önskad form. Universal användning till både vänster och höger hand.

Användningsområde: Behandling och korrektion av kontrakturer och ändrad tonus.

Övrigt: Avtagbart överdrag som kan handtvättas och lufttorkas.



Mått
2-5 MCP

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
51650	Bilat.	Small/Medium	<7,6 cm	Vit
51650	Bilat.	Large/X-Large	>7,6 cm	Vit

Sof-Gel™ handflatsskydd med fingerdelare

Mjukt handflatsskydd med tryckavlastande gel som skyddar handflatan och huden mellan fingrarna. Den breda volara delen skyddar tummen.

Användningsområde: Framskridna kontrakturer.



Art.nr.	Storlek	Färg
51615	One Size	Beige
51615	One Size	Beige

Extra handledsband

Extra stabiliserande band för våra olika handledsortoser. Passar till olika versioner av handledsortoser.



Art.nr.	Modell	Färg
46032	Vission & Selection extra handledsband	Svart

SELECTION® Radialis Fingerdel

Avlastande textil fingerdel. Skall kombineras med SELECTION® Handledsortoser 35204, 35205 eller 35209. Läs instruktionen för huvudprodukten innan användning. Vid radialis pares (dropphand som orsakas av skada på radialisnerven) kan fingerdelen kombineras med SELECTION® Radialis Tumdel, 35216, för att möjliggöra en funktionell greppförmåga under tiden nerven återhämtar sig.

Användningsområde: Radialis pares.



Mått
Omkrets MCP 2-5

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
35217	Radialis Fingerdel	Vä/Hö	Small	17 - 20 cm	Svart
35217	Radialis Fingerdel	Vä/Hö	Medium	20 - 23 cm	Svart
35217	Radialis Fingerdel	Vä/Hö	Large	23 - 27 cm	Svart
35217	Radialis Fingerdel	Vä/Hö	Small	17 - 20 cm	Svart
35217	Radialis Fingerdel	Vä/Hö	Medium	20 - 23 cm	Svart
35217	Radialis Fingerdel	Vä/Hö	Large	23 - 27 cm	Svart

SELECTION® Radialis tumdel

Avlastande textil tumdel. Skall kombineras med SELECTION® Handledsortoser 35204, 35205, 35209, 35222, 35223 eller 35305. Läs instruktionen för huvudprodukten innan användning. Vid radialis pares (dropphand som orsakas av skada på radialisnerven) kan tumdelen kombineras med 35217 SELECTION® Radialis Fingerdel för att möjliggöra en funktionell greppförmåga under tiden nerven återhämtar sig.

Finns i mindre storlekar för barn
Tumdelen finns även i XS och XXS, vilket gör den kompatibel med våra handledsstöd för barn. Detta gör den särskilt väl lämpad för barn med till exempel cerebral pares, som ofta behöver mer individanpassade lösningar.

Användningsområde: För avlastning och positionering av tummen, Radialis pares.



Mått
Längd ledcentrum MCP1 –
ledcentrum IP1.

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg
35216	Radialis Tumdel	Vä/Hö	XX-Small Pediatrisk	1,5-2 cm	Svart
35216	Radialis Tumdel	Vä/Hö	X-Small Pediatrisk	2-3 cm	Svart
35216	Radialis Tumdel	Vä/Hö	Small	3 - 4 cm	Svart
35216	Radialis Tumdel	Vä/Hö	Large	5 - 6 cm	Svart

CS-skena

CS-skenan är en blå volar skena, tillverkad av Polypropylen. Skenan är anatomisk förformad i handens viloställning för att, enligt antropometisk data, passa en majoritet av vuxen befolkning. Kan omformas genom att hettas upp med en värmepistol. Skenan är uppbyggd av tunnare och kraftigare partier där det kraftigaste stödet ligger vid handleden för att sedan tunnas ut och avslutas i skenans lätt utböjda ändar för att inte ge tryck. Detta ger ett dynamiskt stöd med god stabilisering där det önskas.

En mjuk vit dorsal plastskena som är rak i formen. Skenan har en lätt stödjande funktion.



Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått	Färg	Förp.
35210	Volar skena	Bilat.	En storlek	22x168 mm	Blå	10
35211	Dorsal skena	Bilat.	En storlek	11x148 mm	Vit	10



Plaster och material

Kardborrband komfort mjukt, elastiskt

Den mjuka delen av ett elastiskt kardborreband. God hållfasthet i både dragriktning och öppningsriktning. Kan användas i vattentemperaturer mellan -30° till +140°C.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd
25030	Vit	4,5 m	1 rulle	19 mm
25030	Vit	4,5 m	1 rulle	25 mm
25030	Vit	4,5 m	1 rulle	50 mm

Kardborrband mjukt - elastiskt

Klardborreband elastiskt är av hög kvalitet och erbjuder mångsidighet som en standardelastik med krokfäste. Den är mjuk mot huden och har inga vassa kanter. Förlorar inte sin elasticitet med tiden.

Levereras i en praktisk dispenserbox för enkel hantering.

Användningsområde: Längd: 25 m rullar i dispenserbox Oeko-Tex standard 100



Art.nr.	Modell	Längd	Förp.	Färg	Bredd
25080	Kardborrband mjuk - elastiskt	25 m	1 rulle	Svart	25 mm
25080	Kardborrband mjuk - elastiskt	25 m	1 rulle	Svart	50 mm
25081	Kardborrband mjuk - elastiskt	25 m	1 rulle	Vit	25 mm
25081	Kardborrband mjuk - elastiskt	25 m	1 rulle	Vit	50 mm

Mjukt AFO band

Ett dubbelvävt mjukt band med lätt elasticitet för ökad smidighet. Avsett för olika ortosapplikationer. Fäster mot hårt kardborreband. Kan klippas till önskad längd utan att det fransar sig.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd
25060	Svart	10 m	1 rulle	40 mm
25061	Svart	10 m	1 rulle	50 mm

Fästband


Mjukt band med skumkärna. Kan klippas till önskad längd och har självslutande kant. Båda sidorna fäster mot hårda kardborrband.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd
51160	Beige	9 m	1 dispenser	25 mm
51161	Beige	9 m	1 dispenser	50 mm

Extra tunt band

Extra tunt, mjukt band för mindre ortoser. Fästyta på en sida mot hårda kardborrband. Förpackat i dispenser.

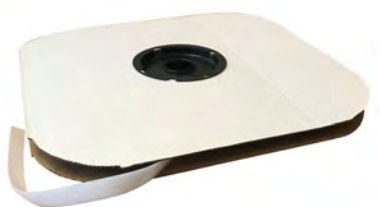

Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd
51155	Vit	9 m	1 dispenser	13 mm

Fästband robust

Extra slitstarkt, mjukt band med en tunn skumkärna. Klarar att stängas och öppnas mer än 1000 gånger. Oelastiskt. Båda sidorna fäster mot hårda kardborrband.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd
51165	Blå/Vit	9 m	1 rulle	25 mm
51166	Blå/Vit	9 m	1 rulle	50 mm
51167	Vit	9 m	1 rulle	25 mm
51168	Vit	9 m	1 rulle	50 mm
51169	Beige	9 m	1 rulle	25 mm
51170	Beige	9 m	1 rulle	50 mm

Mikrofix hårt, självhäftande


Självhäftande hårt kardborrband (hook). Ultra-tunn, stark och med hög kvalitet. Det hårda kardborrbandet har mycket korta ”krokar” som inte sliter onödigt och ger patienten bättre komfort.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd
25098	Transparent	25 m	1 rulle	50 mm
25099	Svart	25 m	1 rulle	50 mm

Mikrofix mjukt, självhäftande

Mjukt självhäftande kardborrband som fäster mot Mikrofix hård och andra vanliga hårda kardborrband. Extra tunt.

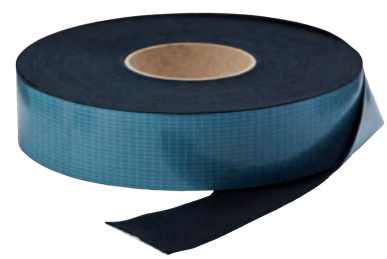

Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd
25100	Vit	25 m	1 rulle	50 mm
25101	Svart	25 m	1 rulle	50 mm

Kardborrband självhäftande hårt - extra starkt

Kardborrband självhäftande hårt - extra starkt är belagd med ett extremt akrylhäftämne som är lämpligt för höga och låga temperaturer, UV-ljus och utomhusapplikationer. Även lämplig för användning på de flesta PVC-material, detta lim har en hög initial bindning, som ökar i styrka under 48 timmar efter applicering, vilket ger en permanent och långsiktig bindning. Levereras i en praktisk dispenserbox för enkel hantering.

För färgerna svart och vitt väljer du - Kardborrband självhäftande.




Art.nr.	Modell	Längd	Förp.	Färg	Bredd
25095	Kardborrband - hårt, extra starkt	25 m	1 rulle	Kungsblå	25 mm
25095	Kardborrband - hårt, extra starkt	25 m	1 rulle	Kungsblå	50 mm
25096	Kardborrband - hårt, extra starkt	25 m	1 rulle	Röd	25 mm
25096	Kardborrband - hårt, extra starkt	25 m	1 rulle	Röd	50 mm
25097	Kardborrband - hårt, extra starkt	25 m	1 rulle	Grå	25 mm
25097	Kardborrband - hårt, extra starkt	25 m	1 rulle	Grå	50 mm
25078	Kardborrband - hårt, extra starkt	25 m	1 rulle	Beige	25 mm
25078	Kardborrband - hårt, extra starkt	25 m	1 rulle	Beige	50 mm
25078	Kardborrband - hårt, extra starkt	25 m	1 rulle	Beige	20 mm
25078	Kardborrband - hårt, extra starkt	25 m	1 rulle	Beige	30 mm

Kardborrband självhäftande mjukt

Kardborrband självhäftande mjukt är belagd med ett starkt och kraftigt smältlim av gummi, perfekt för användning på släta ytor och för de flesta användningsområdena.

Omedelbar vidhäftning med hög hållfasthet, hög temperaturbeständighet och är stark i både öppnings- och drag-riktning, dessa fästen består av förstklassigt garn och är lämpliga för upp till 5 000 öppnings-/stängningscykler. Levereras i en praktisk dispenserbox för enkel hantering.

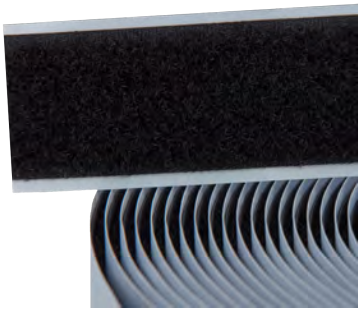

Art.nr.	Modell	Längd	Förp.	Färg	Bredd
25084	Premium Kardborrband Mjuk	25 m	1 rulle	Svart	25 mm
25084	Premium Kardborrband Mjuk	25 m	1 rulle	Svart	50 mm
25085	Premium Kardborrband Mjuk	25 m	1 rulle	Vit	20 mm
25085	Premium Kardborrband Mjuk	25 m	1 rulle	Vit	25 mm
25085	Premium Kardborrband Mjuk	25 m	1 rulle	Vit	50 mm
25084	Premium Kardborrband Mjuk	25 m	1 rulle	Svart	20 mm
25084	Premium Kardborrband Mjuk	25 m	1 rulle	Svart	30 mm
25085	Premium Kardborrband Mjuk	25 m	1 rulle	Vit	30 mm

Kardborreband självhäftande hårt


Kardborreband självhäftande hårt är belagd med ett starkt smältlim av gummi med hög vidhäftningsförmåga, perfekt för användning på släta ytor och för de flesta ändamål. Omedelbar bindning med hög temperaturbeständighet och enastående i både öppnings- och drag-riktning, dessa fästen använder garn av premiumkvalitet och är lämpliga för upp till 5 000 öppnings-/stängningscykler. Levereras i en praktisk dispenserbox för enkel hantering.



Art.nr.	Modell	Längd	Förp.	Färg	Bredd
25082	Kardborrband hårt - självhäftande	25 m	1 rulle	Svart	25 mm
25082	Kardborrband hårt - självhäftande	25 m	1 rulle	Svart	50 mm
25083	Kardborrband hårt - självhäftande	25 m	1 rulle	Vit	20 mm
25083	Kardborrband hårt - självhäftande	25 m	1 rulle	Vit	25 mm
25083	Kardborrband hårt - självhäftande	25 m	1 rulle	Vit	50 mm
25082	Kardborrband hårt - självhäftande	25 m	1 rulle	Svart	20 mm
25082	Kardborrband hårt - självhäftande	25 m	1 rulle	Svart	30 mm
25083	Kardborrband hårt - självhäftande	25 m	1 rulle	Vit	30 mm

Kardborrband mjuk

Kardborrband mjuk är ett högpresterande band som lämpar sig för en mängd olika applikationer. Produkten består av 100 % polyamid och är stark i både öppnings- och drag-riktning samt god beständighet mot UV-ljus. Den är certifierad enligt STANDARD 100 av OEKO-TEX®, REACH och RoHS och har öppnings-/stängningscykler på upp till 10 000 gånger. Levereras i en praktisk dispenserbox för enkel hantering.

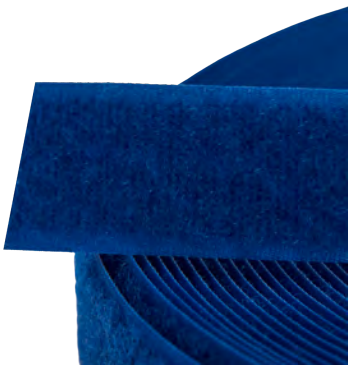

Art.nr.	Modell	Längd	Färg	Förp.	Bredd
25089	Kardborrband Mjuk	25 m	Svart	1 rulle	25 mm
25089	Kardborrband Mjuk	25 m	Svart	1 rulle	50 mm
25090	Kardborrband Mjuk	25 m	Vit	1 rulle	25 mm
25090	Kardborrband Mjuk	25 m	Vit	1 rulle	50 mm
25091	Kardborrband Mjuk	25 m	Beige	1 rulle	25 mm
25091	Kardborrband Mjuk	25 m	Beige	1 rulle	50 mm
25092	Kardborrband Mjuk	25 m	Kungsblå	1 rulle	50 mm
25093	Kardborrband Mjuk	25 m	Röd	1 rulle	25 mm
25093	Kardborrband Mjuk	25 m	Röd	1 rulle	50 mm
25094	Kardborrband Mjuk	25 m	Grå	1 rulle	25 mm
25094	Kardborrband Mjuk	25 m	Grå	1 rulle	50 mm
25092	Kardborrband Mjuk	25 m	Kungsblå	1 rulle	25 mm
25089	Kardborrband Mjuk	25 m	Svart	1 rulle	16 mm
25089	Kardborrband Mjuk	25 m	Svart	1 rulle	20 mm
25090	Kardborrband Mjuk	25 m	Vit	1 rulle	16 mm
25090	Kardborrband Mjuk	25 m	Vit	1 rulle	20 mm
25091	Kardborrband Mjuk	25 m	Beige	1 rulle	20 mm

Kardborrband hårt

Kardborrband hårt, är ett högpresterande band som passar för en mängd olika applikationer. Produkten består av 100 % polyamid och är stark i både öppnings- och drag-riktning samt god beständighet mot UV-ljus. Den är certifierad enligt STANDARD 100 av OEKO-TEX®, REACH och RoHS och har öppnings-/stängningscykler på upp till 10 000 gånger. Levereras i en praktisk dispenserbox för enkel hantering.



Art.nr.	Modell	Längd	Färg	Förp.	Bredd
25086	Kardborrband hårt	25 m	Svart	1 rulle	25 mm
25086	Kardborrband hårt	25 m	Svart	1 rulle	50 mm
25087	Kardborrband hårt	25 m	Vit	1 rulle	25 mm
25087	Kardborrband hårt	25 m	Vit	1 rulle	50 mm
25088	Kardborrband hårt	25 m	Beige	1 rulle	25 mm
25088	Kardborrband hårt	25 m	Beige	1 rulle	50 mm
25086	Kardborrband hårt	25 m	Svart	1 rulle	16 mm
25086	Kardborrband hårt	25 m	Svart	1 rulle	20 mm
25087	Kardborrband hårt	25 m	Vit	1 rulle	16 mm
25087	Kardborrband hårt	25 m	Vit	1 rulle	20 mm
25088	Kardborrband hårt	25 m	Beige	1 rulle	20 mm

Kardborrband mjukt - elastiskt

Kardborreband elastiskt är av hög kvalitet och erbjuder mångsidighet som en standardelastik med krokfäste. Den är mjuk mot huden och har inga vassa kanter. Förlorar inte sin elasticitet med tiden.

Levereras i en praktisk dispenserbox för enkel hantering.

Användningsområde: Längd: 25 m rullar i dispenserbox Oeko-Tex standard 100



Art.nr.	Modell	Längd	Förp.	Färg	Bredd
25080	Kardborrband mjuk - elastiskt	25 m	1 rulle	Svart	25 mm
25080	Kardborrband mjuk - elastiskt	25 m	1 rulle	Svart	50 mm
25081	Kardborrband mjuk - elastiskt	25 m	1 rulle	Vit	25 mm
25081	Kardborrband mjuk - elastiskt	25 m	1 rulle	Vit	50 mm

X-LITE® termoplastiskt kardborrband

X-LITE kardborrband har en baksida av X-LITE som vid uppvärmning fäster mot X-Lite, 3D-LITE och våra övriga lågtemperaturplaster. Det värms i vattenbad eller med varmluftspistol. Mjukt kardborrband eller fästband appliceras sedan som vanligt.

Övrigt: Ark om 5 st levereras i plastpåse.



Art.nr.	Färg	Längd	Bredd	Antal/Förp	Ark/Dispenser
64196	Vit	5 m	50 mm	1	Dispenser
64198	Svart	5 m	50 mm	1	Dispenser

Halco Omnitape Mixed

Halco Omnitape Mixed – Självhäftande och flexibel kardborreband
Halco Omnitape Mixed kombinerar både hakar (Hook) och öglor (Loops) på samma sida, vilket gör det till en praktisk och självhäftande lösning. Den är idealisk för alla tillämpningar där ett självgående fäste krävs och erbjuder en flexibel lösning med maximal mångsidighet.

Övrigt: 25 meter rulle i dispenserlåda, certifierad enligt Oeko-Tex Standard 100.



Art.nr.	Modell	Längd	Bredd
25103	Halco Omnitape Mixed	25 m	25 mm
25103	Halco Omnitape Mixed	25 m	50 mm

Aquaplast™ Original

Aquaplast™ har en bas av polycaprolakton som skapar en balans mellan materialets formbarhet och stretchmotstånd. Detta ger mer kontroll över hur mycket materialet sträcker sig under tillverkning av ortoser. Till skillnad från Aquaplast-T™ har Aquaplast™ ingen skyddande ytbeläggning och fäster omedelbart utan ytpreparering. Aquaplast™ är ett mångsidigt material för såväl detaljerade som medelstora till stora ortoser.

Med hjälp av 100 procent minne kan Aquaplast™ värmas upp och omformas upprepade gånger. Materialet blir genomskinligt när det är mjukt, vilket gör det enklare att identifiera punkter för positionering och tryckpunkter för maximal komfort. Aquaplast™ är gift-och latexfri. Produkten är röntgengenomsläpplig.

Användningsområde: Bas till dynamiska och statiska ortoser, tum-, finger- och handledsortoser, 3,2 mm även till arm- och benortoser.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
50121	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
50122	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50123	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Optiperf. 19%
50124	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Optiperf. 19%
50125	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%

Aquaplast-T™

Aquaplast-T™ är en variant av det ursprungliga Aquaplast™ och har en polycaprolaktonbas som hjälper till att balansera materialets anpassningsförmåga och motståndskraft mot sträckning. Detta ger mer kontroll över hur mycket materialet sträcker sig under tillverkning av ortoser. Till skillnad från Aquaplast har Aquaplast-T en vattenbaserad beläggning som förhindrar oavsiktlig vidhäftning. Med hjälp av 100 procent minne kan Aquaplast™ värmas upp och omformas upprepade gånger. Detta gör den till ett idealiskt val för statiska progressiva och seriella statiska ortoser, där ortosen måste omformas när patientens tillstånd förändras. Materialet blir transparent när det är mjukt, vilket gör det enklare att identifiera punkter för positionering och tryckpunkter för ökad komfort. Aquaplast-T™ är gift- och latexfri. Produkten är röntgengensläpplig.

Användningsområde: Bas till dynamiska och statiska ortoser för tum-, finger- och handledsortoser, 3,2 mm även till arm- och benortoser.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Typ
50126	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
50127	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
50128	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50129	Vit	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50134	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Superperf. 42%
50135	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Superperf. 42%
50136	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Optiperf. 19%
50137	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Optiperf. 19%
50138	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
50331	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraperf. 13%
50332	Vit	460 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraperf. 13%

Aquaplast™ ProDrape™-T

ProDrape™ är det mest formbara materialet i Aquaplast™-familjen. Det sträcker sig lätt med utmärkt följsamhet och anpassar sig väl till konturer. Materialet lämpar sig för patienter med smärta eller irritation i lederna, där skonsammare hantering och detaljer behövs. ProDrape™ har liksom Aquaplast-T™ en vattenbaserad ytbeläggning som förhindrar oavsiktlig vidhäftning. Med ett litet stretchmotstånd och ytterligare anpassningsförmåga är den idealisk för hand-, finger-, tum- och barnortoser. Med hjälp av 100 procent minne kan ProDrape™ värmas upp och omformas upprepade gånger. Materialet blir genomskeinligt när det är mjukt, vilket gör det enklare att identifiera punkter för positionering och tryckpunkter för att ge maximal komfort för patienten. ProDrape™ är gift-och latexfri. Produkten är röntgengensläpplig.

Användningsområde: Akut trauma, smärta och ledirritationer, tum-, finger-hand- och handledsortoser.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
50165	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
50166	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv

Aquaplast™ Watercolors™

Aquaplast™ Watercolors™ har samma egenskaper som Aquaplast-T™. Materialet finns i många olika färger, tjocklekar och perforeringar, och passar till ett stort urval av ortoser. Detta ger patient och terapeut stor valfrihet. Materialet har en bas av polycaprolakton vilket ger en bra balans mellan formbarhet och stretchmotstånd. Detta bidrar till bättre kontroll över hur mycket materialet sträcker sig under tillverkning av ortoser. Som övriga material i Aquaplast™ familjen har Watercolors 100% minne och de ljusare färgerna blir genomskinliga vid uppvärmning. Aquaplast™ Watercolors™ har en vattenbaserad ytbehandling som förhindrar oavsiktlig vidhäftning och har en lägre grad av klubbighet. Aquaplast är giftfri, latexfri och röntgenomsläppligt.

Användningsområde: Barnortoser, bas till dynamiska och statiska tum-, finger- och handledsortoser. 3,2 mm även till arm- och benortoser.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
50144	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50148	Röd	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50302	Marinblå	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50318	Marinblå	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
50319	Lavendel	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
5029	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
5029	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Optiperf. 19%
50145	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
50146	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
50147	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Optiperf. 19%
50334	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraparf. 13%
50140	Klarblå	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50143	Klarblå	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Optiperf. 19%
50141	Klarblå	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
50142	Klarblå	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
50333	Klarblå	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraparf. 13%
50329	Klarblå	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Optiperf. 19%
50321	Marinblå	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Optiperf. 19%
50308	Marinblå	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
50309	Lavendel	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
50322	Lavendel	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Optiperf. 19%
50343	Lavendel	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraparf. 13%
50154	Lila	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
50155	Lila	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Optiperf. 19%
50313	Lila	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
50336	Lila	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraparf. 13%
50152	Lila	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50153	Lila	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
50164	Limegrön	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50307	Limegrön	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
50317	Limegrön	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv

Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
50340	Limegrön	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraperf. 13%
50304	Rosa	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
50300	Rosa	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50314	Rosa	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
50337	Rosa	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraperf. 13%
50149	Röd	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
50150	Röd	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
50151	Röd	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Optiperf. 19%
50139	Röd	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
50335	Röd	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraperf. 13%
50156	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50157	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
50158	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
50159	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Optiperf. 19%
50160	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
50161	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Optiperf. 19%
50341	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraperf. 13%
50323	Blå Metallic	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50344	Blå Metallic	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
50359	Blå Metallic	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Ultraperf. 13%
50348	Blå Metallic	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraperf. 13%
50325	Silver	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50346	Silver	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
50349	Silver	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraperf. 13%
50312	Silver	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Ultraperf. 13%

Polyform™ och Polyform™ light

Polyform är mycket följsamt och har lågt stretchmotstånd, men erbjuder samtidigt exceptionell rigiditet och stadga. Som det starkaste och mest följsamma ortosmaterialet från Rolyan skapar det en naturlig drapering och är lätt att forma.

I uppvärmt tillstånd blir materialet naturlig följsamt vilket underlättar anpassning till konturer och ojämna ytor. Detta kan utföras med lätt applicerat tryck. Materialet är följsamt vilket är viktigt vid applicering på patienter med till exempel ledsmärta, där extra försiktighet och detaljer är nödvändigt.

Polyform har en vattenbaserad ytbeläggning som förhindrar oavsiktlig vidhäftning. Materialet kan värmas upp och omformas upprepade gånger men när materialet är sträckt kommer det inte att återgå till sin ursprungliga form. Polyform är gift- och latexfri. Materialet är röntgengenomsläppligt.

Användningsområde: Akut trauma, smärta och ledirritationer, tum-, finger- och handledsortoser.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
50100	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50101	Vit	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50102	Vit	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Massiv
50103	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Perf. 1%
50107	Vit	460 mm	4 ark	310 mm	1,6 mm	Massiv

Polyflex II™

Polyflex II™ är ett polycaprolacton baserad ortosmaterial som erbjuder en kombination av hög formbarhet och ett lågt stretchmotstånd. Polyflex II™ har hög följsamhet och är lätt att forma. Detta gör Polyflex II™ till ett utmärkt val vid tillverkning av ortoser som kräver exakt passform. Även om materialet har ett lågt stretchmotstånd blir slutprodukten stadig och flexibel efter nedkylning.

Polyflex II™ har en vattenbaserad ytbeläggning, som motverkar oavsiktlig vidhäftning. Materialet kan värmas upp och omformas upprepade gånger men när materialet töjs kommer det inte att återgå till sin ursprungliga form. Polyflex är gift- och latexfri.

Materialet är röntgengenomsläppligt.

Användningsområde: Akut trauma, smärta och ledirritationer, tum-, finger- hand- och handledsortoser, bas till dynamiska ortoser och ortoser till patienter med neurologiska sjukdomar.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
50109	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
50110	Vit	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50111	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50113	Vit	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Perf. 1%
50114	Vit	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm	Perf. 1%
50115	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Perf. 1%

TailorSplint™

TailorSplint™ har en perfekt balans mellan formbarhet och stretchmotstånd. Detta gör materialet till det mest mångsidiga och populära av Rolyans ortosmaterial. Det måttliga stretchmotståndet tillåter att plasten kan bearbetas lite hårdare samtidigt som god kontroll bibehålls. Dessa egenskaper gör TailorSplint™ till en allsidig plast som täcker ett brett behov och kan användas till många olika ortoser. När TailorSplint™ kyls ned blir slutprodukten en stark och rigid ortos som motstår bucklor, sprickor och rupturer. TailorSplint™ är ytbehandlat vilket förhindrar oavsiktlig vidhäftning. Ytan är puderaktig, vilket ger en fin finish. Materialet är giftfritt, latexfritt och röntgengenomsläppligt.

Användningsområde: Tum-, finger- och handledsortoser, 3,2 mm även till arm- och benortoser, bas till dynamiska ortoser och ortoser till patienter med neurologiska sjukdomar.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
50116	Beige	460 mm	4 ark	310 mm	1,6 mm	Massiv
50117	Beige	610 mm	4 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
50118	Beige	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv

Ezeform™ och Ezeform™ light

Ezeform™ agerar som isoprenegummi trots att Ezeform™ är ett polycaprolacton - baserat ortosmaterial. Med sitt stretchmotstånd och måttliga formbarhet behåller materialet sin form vid ortostillverkning, vilket ger klinikern mer kontroll. Eftersom Ezeform™ har ett högt stretchmotstånd töjs inte materialet ut när det avlägsnas från en hydrokolallator, eller vattenbad. Detta gör Ezeform™ till ett optimalt material vid tillverkning av större ortoser.

Materialet saknar skyddande ytbeläggning och har en lätt klabbig yta vilket gör att den inte glider vid modellering. Ezeform™ fäster permanent mot sig själv i uppvärmt tillstånd. Materialet kan även återuppvärmas och omformas upprepade gånger men när materialet är sträckt kommer det inte att återgå till sin ursprungliga form eftersom materialet saknar minne.

Användningsområde: Ortoser till patienter med neurologiska sjukdomar, vilo- och funktionella ortoser till både övre och nedre extremiteter, bas till större dynamiska ortoser, Ezeform light till barnortoser.




Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
50170	Vit	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50171	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50173	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50174	Beige	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Massiv
50175	Blå	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50176	Blå	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Massiv
50178	Vit	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Perf 1 %
50179	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Perf 1 %
50180	Beige	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Perf 1 %
50181	Blå	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Perf 1 %
50182	Blå	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Perf 1 %
50183	Vit	460 mm	4 ark	310 mm	1,6 mm	Massiv
50184	Beige	460 mm	4 ark	310 mm	1,6 mm	Massiv
50188	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Perf 1 %
50189	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv

Ezeform™ Antimicrobial

Ezeform™ Antimicrobial har en antimikrobial behandling som hämmar bakterietillväxt och dålig lukt. Ytbehandlingen kan inte "tvättas" bort. När en skena eller ortos skall brukas under lång tid eller användas i utsatta miljöer, lämpar sig detta material väl. Övriga egenskaper enligt Ezeform™.

Användningsområde: Ortoser till patienter med neurologiska sjukdomar, vilo- och funktionella ortoser till både övre och nedre extremiteter, bas till större dynamiska ortoser.

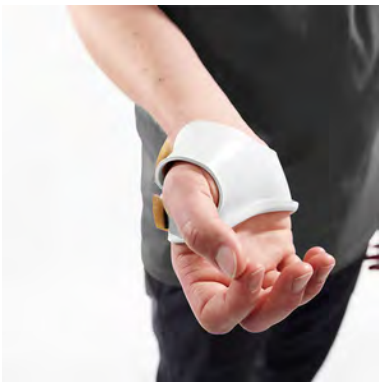

Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
50187	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv

Synergy™

Synergy™ är ett polycaprolactone baserat material med ett högs stretchmotstånd och låg formbarhet. Dessa egenskaper tillhandahåller hög kontroll vid ortostillverkning. Materialet kommer inte att sträckas ut ur sin form tills det appliceras på ytan det ska formas på. Därför är det enkelt att hantera större ark av materialet i uppvärmt tillstånd.

Den nedkylda ortosen är rigid och stark vilket gör Synergy idealt för medium till större ortoser. Kan användas där patienten inte har en förmåga till samarbete, där man inte kan använda dragningskraften till fördel samt till spasticitet. Synergy saknar en ytbeläggning och kommer att vidhäfta direkt till egna ytor.

Är giftfri- och latexfri samt är röntgengenomskinlig.

Användningsområde: Medelstora till stora skenor och ortoser. Korsetter och underbensstöd. Tillverkning av skenor för personer som inte kan samarbeta, patienter med spasticitet.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
50190	Blå	610 mm	1 Ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
50191	Blå	910 mm	1 Ark	610 mm	3,2 mm	Massiv
50192	Blå	910 mm	1 Ark	610 mm	3,2 mm	Perf. 1 %

Manosplint® Ohio-T

Med Ohio-T kan du skapa personliga och detaljrika ortoser. Materialet finns tillgängligt i sju heltäckande mönster. Variationen skapar möjlighet till innovation och kreativitet och bidrar till ökad patientnöjdhet. Produktens egenskaper gör att det passar för de flesta praktiska applikationer. Ohio-T har 100% minne och måttligt stretchmotstånd. Produkten finns i flera tjocklekar, upp till 3,2 mm, vilket gör det möjligt att skapa ortoser med maximal stadga och stabil avlastning. Det ytbehandlade materialet tillåter ”nyp- och öppnateknik” som underlättar vid applikationen och agerar som ett par extra händer. Den glansiga ytan motverkar fingeravtryck.



Ljusare val av mönster blir genomskinliga i uppvärmt tillstånd. Detta underlättar applicering på tänkta ytor som tex tryckkänsliga punkter. Notera att arken kommer i storlek på 30,5 x 46 cm.

Användningsområde: Statiska ortoser för avlastning av tumme, hand och handled vid diagnoser som senskador, frakturer, artros och neurologiska diagnoser. Lämpligt inom pediatrik. Dynamiska och cirkulära ortoser.

Övrigt: Vid beställning 1. Välj önskad produkt och tjocklek. 2. Ange produktens artikelnummer och önskad mönsterkod i din order.

Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
50387	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	1,6 mm	Massiv
50388	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	2,4 mm	Massiv
50389	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	3,2 mm	1% Perf.
50395	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	1,6 mm	11% Perf.
50397	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	3,2 mm	19% Perf.
50398	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	1,6 mm	11% Perf.
50396	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	2,4 mm	12% Perf.

Manosplint® Wisconsin

Wisconsin är en lågtemperaturplast med utmärkt prestanda. Materialet finns tillgängligt i sju heltäckande mönster. Variationen skapar möjlighet till innovation och kreativitet och bidrar till ökad patientnöjdhet. Den formade och skulpterade ytan ger mycket bra stöd och funktion. Wisconsin har ett måttligt minne, vilket möjliggör enkla ändringar och en perfekt kantfinish. Produkten är lätt att forma, och det måttliga stretchmotståndet gör att den kan hanteras med varsamma och mjuka rörelser. Den har måttlig styvhet och är flexibel för att underlätta på- och avtagning. Materialet är ytbehandlat och fäster inte vid sig självt om inte beläggningen avlägsnas. Notera att arken kommer i storlek på 30,5 x 46 cm.



Användningsområde: Statiska ortoser för avlastning av tumme, hand och handled. Dynamiska skenor och ortoser, bas för dynamiska och statiska progressiva konstruktioner.

Övrigt: Vid beställning: Ange produktens artikelnummer och önskad mönsterkod i din order.

Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
50390	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	2,4 mm	Massiv
50392	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	2,4 mm	1% Perf.
50393	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	3,2 mm	1% Perf.
50394	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	3,2 mm	Massiv

Manosplint® Carolina

Carolina ger ett stabilt stöd och håller sig på plats under applicering. Materialet lämpar sig väl för större ortoser. Det har maximal motståndskraft mot sträckning och kräver en fastare hantering med nästan ingen drapering. Produkten har måttligt minne, vilket möjliggör enkla ändringar och mjuka kantavslut. Carolina har en obelagd yta och är något klibbig, fungerar som ett extra par händer och fäster lätt på sig själv. Resistent mot fingeravtryck. Den färdiga ortosen har maximal styvhet, håller formen och tål patientens eller de dynamiska komponenternas dragning.



Användningsområde: Immobiliseringsortoser - brännskador, sen- och/eller nervskador, frakturer, artrit och neurologiska diagnoser. Ortoser - handled/hand, armbåge, nedre extremitet och rygg.

Övrigt: Den kan värmas i vatten eller i en ugn.

Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
50386	Vit	92 cm	1 ark	61 cm	3,2 mm	Perf: 1%

Manosplint® Montana

Montana är ett starkt material som ger maximal styvhet och samtidigt ger vackra kanter med måttlig drapering. Skenorna håller formen trots drag från starka komponenter och spasticitet. Det ger maximalt motstånd mot töjning och kan dras runt kurvor utan att tunnas ut eller förlora kontrollen. Obelagd med en något klibbig yta när den är varm. En permanent bindning kan enkelt erhållas genom att applicera torr värme och nypa ihop den. Ytan motstår fingeravtryck och kanterna förblir förseglade och släta när de skärs varma.

Användningsområde: Immobiliseringsortoser - handled, tumme och hand; många olika diagnoser inklusive pediatrik, senskador, frakturer, artrit och neurologiska diagnoser. Mobiliseringsortoser - seriell statisk metod eller bas för dynamisk och statisk progressiv design.

Övrigt: Uppvärmad i vattenbad eller ugn.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
50391	Vit	92 cm	1 ark	61 cm	3,2 mm	1% perf.

3D-LITE™

3D-LITE är en lågtemperaturplast tillverkad av en tredimensionell polyesterväv som impregnerats med termoplast. Materialet är stabilt, lätt, luftigt och enkelt att forma. Det har en smidig yta och det blir inte några fingeravtryck i materialet under bearbetningen. Materialet har stretch i en riktning. Värms i vattenbad vid 70°C eller ugn vid 80°C.



Användningsområde: Ortostillverkning. 3 mm rekommenderas till små ortoser och mindre kroppsdelar. 5 mm rekommenderas till halvstora ortoser som frakturortoser. 7 mm rekommenderas till större ortoser som exempelvis korsetter.

Art.nr.	Modell	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
64896	3D-LITE Beige	600 mm	1 ark	600 mm	3 mm
64897	3D-LITE Beige	900 mm	1 ark	600 mm	3 mm
64898	3D-LITE Beige	600 mm	1 ark	600 mm	5 mm
64899	3D-LITE Beige	900 mm	1 ark	600 mm	5 mm
64900	3D-LITE Beige	600 mm	1 ark	600 mm	7 mm
64901	3D-LITE Beige	900 mm	1 ark	600 mm	7 mm
64905	3D-LITE Beige	1200 mm	1 ark	650 mm	5 mm

Fast-Lite® Splints

Fast-Lite® gör det enkelt att anpassa skenor direkt vid applicering – snabbt och smidigt. Allt förarbete är redan klart, och skenan kan värmas upp och formas på patienten betydligt snabbare. Det sparar värdefull tid för både patient och vårdgivare.

Fast-Lite ger en stabil grund för ett bra slutresultat – ett stöd för vårdpersonal att uppnå bästa möjliga resultat.

Tillverkad av X-LITE® Classic – ett lätt, formbart och giftfritt material utan glasfiber eller isocyanater. Skenorna är förformade för armbåge och nedre extremitet och finns i storlek S till XL. Armbågsversionen finns för både höger och vänster sida.

Bomullsbasen har en ny, naturlig färg av oblekt bomull.

Fördelar:

- Förformad – ingen förberedelse krävs
- Snabb applicering direkt på patienten
- Lätt, stabil och formbar
- Finns i flera storlekar och varianter

Användningsområde: Fast-Lite® förformad skena är avsedd att immobilisera kroppsdelar efter skada eller före och efter kirurgi, under en begränsad tid.

Övrigt: Fast-Lite®-skenan ska endast appliceras av vårdpersonal som har utbildning i gipsning eller applicering av ortopediska skenor. Fast-Lite®-skenor ska alltid värmas upp och anpassas efter den individuella patienten. Titta på instruktionsvideorna för mer information om hur skenorna ska appliceras.



Mått

Underbenssskena:
Mått 1: Mät från botten av hälen till 3 cm nedanför fibulaknotan. (Den beniga utväxten på utsidan av knät)
Mått 2: Mät fotens längd från hälen till tårnas spets.

Armbågsskena:
Mått 1: Mät från den laterala epikondylen av armbågen till humerushuvudet.
Mått 2: Mät från den laterala epikondylen av armbågen till MCP-lederna.

För mer information, se "Välja rätt storlek på Fast-Lite®-skenor" under Dokument.

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått 1	Mått 2	Antal/Förp
64961	Fast-Lite underbenssskena	Universal	Small	36 cm	25 cm	1 st
64961	Fast-Lite underbenssskena	Universal	Medium	39.5 cm	26 cm	1 st
64961	Fast-Lite underbenssskena	Universal	Large	44.5 cm	29 cm	1 st
64961	Fast-Lite underbenssskena	Universal	X-Large	47 cm	32 cm	1 st
64961	Fast-Lite underbenssskena	Universal	Small	36 cm	25 cm	3 st
64961	Fast-Lite underbenssskena	Universal	X-Large	47 cm	32 cm	3 st
64961	Fast-Lite underbenssskena	Universal	Medium	39.5 cm	26 cm	5 st
64961	Fast-Lite underbenssskena	Universal	Large	44.5 cm	29 cm	5 st
64962	Fast-Lite armbågsskena	Vänster	Small	25 cm	31 cm	1 st
64962	Fast-Lite armbågsskena	Vänster	Medium	27.5 cm	35 cm	1 st
64962	Fast-Lite armbågsskena	Vänster	Large	31 cm	37 cm	1 st
64962	Fast-Lite armbågsskena	Vänster	X-Large	31.5 cm	40 cm	1 st
64962	Fast-Lite armbågsskena	Vänster	Small	25 cm	31 cm	3 st
64962	Fast-Lite armbågsskena	Vänster	Medium	27.5 cm	35 cm	3 st
64962	Fast-Lite armbågsskena	Vänster	Large	31 cm	37 cm	3 st
64962	Fast-Lite armbågsskena	Vänster	X-Large	31.5 cm	40 cm	3 st
64962	Fast-Lite armbågsskena	Höger	Small	25 cm	31 cm	1 st
64962	Fast-Lite armbågsskena	Höger	Medium	27.5 cm	35 cm	1 st

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Mått 1	Mått 2	Antal/Förp
64962	Fast-Lite armbågsskena	Höger	Large	31 cm	37 cm	1 st
64962	Fast-Lite armbågsskena	Höger	X-Large	31.5 cm	40 cm	1 st
64962	Fast-Lite armbågsskena	Höger	Small	25 cm	31 cm	3 st
64962	Fast-Lite armbågsskena	Höger	Medium	27.5 cm	35 cm	3 st
64962	Fast-Lite armbågsskena	Höger	Large	31 cm	37 cm	3 st
64962	Fast-Lite armbågsskena	Höger	X-Large	31.5 cm	40 cm	3 st

X-LITE® Classic rulle

X-LITE® Classic är det mest stabila materialet. Den öppna strukturen gör materialet luftigt och låter huden andas. X-LITE® Classic är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE® material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® Classic rullar har en skyddsfilm mellan lagren som avlägsnas under cirkuleringen.

Välj mellan tre färger; vit, antracit och Kungsblå.

Användningsområde: Cirkulärgips.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd
64136	Antracit	1,8 m	5 rullar	75 mm
64168	Antracit	1,8 m	2 rullar	150 mm
64169	Royal Blue	1,8 m	2 rullar	150 mm
64103	Vit	1,8 m	20 rullar	50 mm
64133	Vit	1,8 m	20 rullar	75 mm
64143	Vit	1,8 m	10 rullar	100 mm
64153	Vit	1,8 m	10 rullar	125 mm
64163	Vit	1,8 m	10 rullar	150 mm

X-LITE® Classic ark och dispenser

X-LITE® Classic är det mest stabila materialet. Den öppna strukturen gör materialet luftigt och låter huden andas. Classic är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE Classic finns att beställa som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till önskad längd. Materialet finns i tre olika färger – vit, antracit och blå.



Användningsområde: Gipsskenor, ortoser och avtagbara skenor

Art.nr.	Färg	Längd	Bredd	Antal/Förp	Ark/Dispenser
64250	Vit	10 m	75 mm	1	Dispenser
64307	Vit	900 mm	300 mm	10	Ark
64251	Vit	10 m	100 mm	1	Dispenser
64279	Vit	500 mm	50 mm	50	Ark
64252	Vit	10 m	150 mm	1	Dispenser
64293	Vit	375 mm	75 mm	15	Ark
64253	Vit	10 m	200 mm	1	Dispenser
64294	Vit	375 mm	100 mm	15	Ark
64254	Vit	10 m	125 mm	1	Dispenser
64295	Vit	375 mm	125 mm	15	Ark
64296	Vit	375 mm	150 mm	15	Ark
64297	Vit	900 mm	150 mm	15	Ark
64292	Vit	900 mm	200 mm	15	Ark
64255	Antracit	10 m	150 mm	1	Dispenser
64256	Royal Blue	10 m	150 mm	1	Dispenser

X-LITE® PLUS rulle

X-LITE® PLUS rullar har en mjuk ovansida som ger ett mjukt och bekvämt gips för patienten. X-LITE®PLUS är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® PLUS rullarna har ingen skyddsfilm mellan lagren, så materialet appliceras snabbt och enkelt på patienten.

Välj mellan fem färger; vit, röd, blå, svart och hot pink

Användningsområde: Cirkulär gips



Art.nr.	Färg	Längd	Bredd	Förp./Rulle
64701	Vit	1,8 m	25 mm	5
64702	Vit	1,8 m	50 mm	20
64703	Vit	1,8 m	75 mm	20
64704	Vit	1,8 m	100 mm	10
64706	Vit	1,8 m	125 mm	10
64707	Vit	1,8 m	150 mm	10
64711	Röd	1,8 m	25 mm	5
64712	Röd	1,8 m	50 mm	20
64713	Röd	1,8 m	75 mm	20
64714	Röd	1,8 m	100 mm	10
64716	Röd	1,8 m	125 mm	10
64717	Röd	1,8 m	150 mm	10
64721	Blå	1,8 m	25 mm	5
64722	Blå	1,8 m	50 mm	20
64723	Blå	1,8 m	75 mm	20
64724	Blå	1,8 m	100 mm	10
64726	Blå	1,8 m	125 mm	10
64727	Blå	1,8 m	150 mm	10
64731	Svart	1,8 m	25 mm	5
64732	Svart	1,8 m	50 mm	20
64733	Svart	1,8 m	75 mm	20
64734	Svart	1,8 m	100 mm	10
64736	Svart	1,8 m	125 mm	10
64737	Svart	1,8 m	150 mm	10
64741	Hot Pink	1,8 m	25 mm	5
64742	Hot Pink	1,8 m	50 mm	20
64743	Hot Pink	1,8 m	75 mm	20
64744	Hot Pink	1,8 m	100 mm	10
64746	Hot Pink	1,8 m	125 mm	10
64747	Hot Pink	1,8 m	150 mm	10

X-LITE® PLUS ark och dispenser

X-LITE® PLUS har en mjuk ovansida som ger ett mjukt och bekvämt gips för patienten. X-LITE®PLUS är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® PLUS finns att beställa som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till önskad längd.

Välj mellan fem färger; vit, röd, blå, svart och hot pink

Användningsområde: Alla skenor och ortoser.



Art.nr.	Färg	Längd	Bredd	Antal/Förp
64753	Blå	375 mm	200 mm	8 ark
64754	Svart	375 mm	200 mm	8 ark

X-LITE® Premium rulle

X-LITE® Premium är det mest flexibla materialet. Med sin tunna struktur är det inte lika stabilt som övriga X-LITE material. Däremot är det enklare att forma perfekt över mindre konturer och passar bra till bandage för övre extremiteter och barn. X-LITE® Premium är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® Premium rullar har en skyddsfilm mellan lagren som avlägsnas under cirkuleringen.

Användningsområde: Cirkulärgips. För ökad stabilitet kan ett extra lager appliceras.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd
64205	Vit	1,8 m	5 rullar	50 mm
64207	Vit	1,8 m	5 rullar	75 mm
64209	Vit	1,8 m	5 rullar	100 mm
64210	Vit	1,8 m	5 rullar	125 mm

X-LITE® Premium ark och dispenser

X-LITE® Premium är det mest flexibla materialet. Med sin tunna struktur är det inte lika stabilt som övriga X-LITE material. Däremot är det enklare att forma perfekt över mindre konturer och passar bra till bandage för övre extremiteter och barn. X-LITE® Premium är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. Materialet finns att beställa som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till önskad längd.



Användningsområde: Gipsskenor, ortoser och avtagbara skenor. För ökad stabilitet kan ett extra lager appliceras.

Art.nr.	Färg	Längd	Bredd	Antal/Förp	Ark/Dispenser
64226	Beige	10 m	100 mm	1	Dispenser
64227	Beige	10 m	150 mm	1	Dispenser
64228	Beige	10 m	200 mm	1	Dispenser
64217	Beige	375 mm	100 mm	10	Ark
64219	Beige	375 mm	150 mm	10	Ark

ComfortKIT™ material

ComfortKIT är ett material med en inre kärna av så kallat "memory foam" som gör att det naturligt anpassar sig efter kroppsformen. När materialet vilar återgår det till sin ursprungliga form.

Användningsområde: Materialet används i polstringen comfortKIT™, som är avsedd för ToeOFF® och BlueROCKER®. Materialet kan med fördel användas som polstring till olika ortoser.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
30422	Svart	400 mm	1 ark	300 mm	10 mm

Manosplint® skumpolster

Skumpolster med lätt tryckavlastande effekt. Används som polstring till ortoser. Polstringen har slutna celler och är lätt att rengöra. Materialet är självhäftande och sträckbart, vilket gör det lätt att applicera. Kan fästas direkt på ortosen eller användas för att lindra trycket på benutskott under gips. Den självhäftande baksidan får inte placeras direkt på huden därför ska den fästas t ex under gipsmaterialet på stockinetten. Finns i beige och svart samt i två tjocklekar.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
51128	Svart	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm
51129	Beige	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm
51131	Svart	610 mm	3 ark	460 mm	6,4 mm
51132	Beige	610 mm	3 ark	460 mm	6,4 mm

Fleecy Web

Extremt mjukt självhäftande material i 100 % bomull med mollskinnskänsla. Används som polstring till ortoser. Mycket töjbart och därför lätt att applicera i en färdig ortos.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
51110	Rosa	400 mm	4 ark	225 mm	2 mm
51104	Rosa	3 m	1 rulle	50 mm	2 mm

Fleecy Foam

Mjukt självhäftande material laminerat mot en skumkärna som ger lätt tryckavlastande effekt. Används som avlastning av tryckpunkter eller som polstring för hela ortosen.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
51105	Beige	460 mm	4 ark	230 mm	4,8 mm

Gel-polstring

Avlastande gel som inte kan komprimeras fullständigt. Lämplig för ortoser, handskar och skor. Fördelar trycket och minskar friktionen mot huden. Kan klippas till önskad storlek. Det rekommenderas att kanterna förseglas med t.ex. kirurgisk tejp efter tillklippning. Små variationer i färg kan förekomma.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
51140	Gul	340 mm	1 ark	250 mm	3,2 mm
51141	Gul	340 mm	1 ark	250 mm	4,8 mm
51142	Gul	340 mm	1 ark	250 mm	6,4 mm

Neoprene™

Latexfri neoprene med en nylonsida och en sida med mjuk velour mot vilken hårt kardborrband fäster lätt. Används till framställning av mjuka ortoser eller som ortosband. Är lätt elastiskt vilket ger god passform. Materialet bevarar värmen och bidrar till ökad genomblödning. Utmärkt för patienter med reumatologiska sjukdomar.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
51179	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	2,0 mm
51180	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	2,0 mm
51181	Beige	970 mm	1 ark	150 mm	3,2 mm
51184	Blå	610 mm	1 ark	460 mm	3,0 mm
51189	Grön	610 mm	1 ark	460 mm	1,0 mm

Manosplint® Moleskin självhäftande

Mjukt material med självhäftande baksida. Används till polstring av ortoser och som kantpolstring.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
51126	Svart	4,6 m	1 rulle	5 cm	1,6 mm
51127	Svart	4,6 m	1 rulle	30,5 cm	1,6 mm

X-LITE® Stockinette

Rundstickad stockinette i 100 % oblekt polypropylen (21 mm är tillverkad i bomull). Mjuk och bekväm med en utmärkt förmåga att transportera fukt bort från huden. Stockinetten är ribbstickad vilket ger en god passform och inga veck mot huden.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Material
64400	Beige	23 m	1 rulle	21 mm	Bomull
64401	Vit	10 m	1 rulle	30 mm	Polypropen
64411	Vit	10 m	1 rulle	50 mm	Polypropen
64421	Vit	10 m	1 rulle	70 mm	Polypropen
64431	Vit	10 m	1 rulle	100 mm	Polypropen
64441	Vit	10 m	1 rulle	150 mm	Polypropen
64442	Vit	10 m	1 rulle	200 mm	Polypropen

X-LITE® Stockinette dispenser

Stockinette dispenser är en rundstickad polyester stockinette som är mjuk och följsam. Stockinetten är ribbstickad vilket ger en bra passform och inga rynkor som kan ge skav mot huden. Rullarna kommer i en praktisk dispenser låda.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd
64394	Vit	25 m	1 dispenser	30 mm
64395	Vit	25 m	1 dispenser	50 mm
64396	Vit	25 m	1 dispenser	75 mm
64397	Vit	25 m	1 dispenser	100 mm
64398	Vit	25 m	1 dispenser	150 mm

ProWrap by Fabrifoam

ProWrap by Fabrifoam med låg till medium elasticitet. Sträcker primärt i en riktning.
Fabrifoam kan användas inom många olika områden som tillverkning av mjuka ortoser, ortosband, stabiliserande förband och kompressionsförband. Materialet utgör ett alternativ till neoprene. Fabrifoam finns i två olika grader av stretch. Materialet är hudvänligt, andas och transporterar fukt. Materialet som är tunt har en antihalksida som inte glider mot huden och en sida mot vilken hårt kadborrhband fäster lätt. Innehåller inte gummi.



Art.nr.	Storlek	Färg	Förp.
50502	150 mm x 4,5 m	Beige	1 rulle

Foam-binda

Foam-bindan är en skumgummipolstring som andas och inte drar åt sig så mycket vatten. Polstringen ger bra stötdämpning och är inte lika känslig för veck som traditionell gipsolstring.

Användningsområde: Som polstring under gips av X-LITE.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd
64480	Vit	2,75 m	20 rullar	75 mm
64485	Vit	2,75 m	16 rullar	100 mm
64490	Vit	2,75 m	10 rullar	125 mm

Kushionflex polstring

Ett stabilt material med tjocklek 3,2 mm som inte kan komprimeras fullständigt. Avsett för polstring av ortoser. Materialet har stängda celler, är lätt att rengöra och kan fästas på ortosen innan uppvärmning i vattenbad. Materialet är självhäftande.




Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
51150	Vit	610 mm	4 ark	450 mm	3,2 mm

Aliplast

En copolymerfoam som fäster mot sig själv. Materialet har en slät yta som är lätt att hålla ren. Lämpligt för applikationer som måste ligga direkt mot huden. Vacuumformbart. Värms i ugn 70-120°C. Blir klabbig om så önskas vid hög temperatur och vid lång tid i ugn. Finns i tre hårdhetsgrader.


Användningsområde: Polstringsmaterial för ortoser och för tillverkning av t.ex. pelotter.

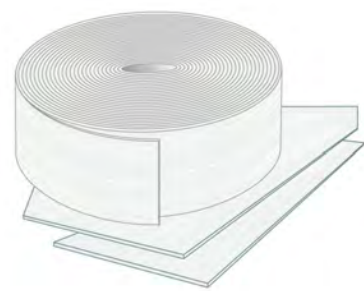

Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Hårdhet
30416	Vit	12 m	1 rulle	750 mm	3 mm	Hård 10
30400	Vit	900 mm	1 ark	750 mm	3 mm	Mjuk 4E
30401	Vit	900 mm	1 ark	750 mm	6 mm	Mjuk 4E
30405	Vit	35 m	1 rulle	750 mm	3 mm	Mjuk 4E
30406	Vit	24 m	1 rulle	750 mm	6 mm	Mjuk 4E
30410	Vit	600 mm	1 ark	750 mm	3 mm	Medium 6A
30411	Vit	600 mm	1 ark	750 mm	6 mm	Medium 6A
30415	Vit	600 mm	1 ark	750 mm	3 mm	Hård 10

Thermofoam LD


Polstringsmaterial i Polyetene med medium densitet. Har slutna celler. Går utmärkt att skära och klippa i men kan också stansas. Värms i ugn 155°C. Lätt att efterjustera.

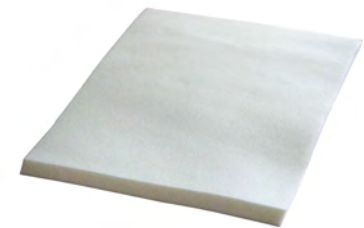

Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
30451	Vit	900 mm	1 ark	750 mm	12,5 mm

Durofoam HD

Polstringsmaterial i polyetene med hög densitet och öppna celler som behåller sin tjocklek under lång period. Går utmärkt att skära och klippa i men kan också stansas. Värms i ugn i 150-170°C. Lätt att efterjustera.

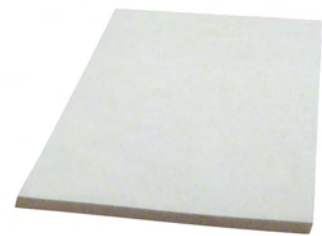

Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
30450	Vit	610 mm	1 ark	610 mm	12,5 mm

Polypropene

Copolymerplast som är styv och seg och har god stabilitet. Värms i ugn i 200-210°C eller vacuumformas. Materialet fäster mot sig själv. Mindre ändringar kan göras med hjälp av värmepistol.

Användningsområde: Ortostillverkning.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
38039	Vit	1200 mm	1 ark	600 mm	2 mm
38040	Vit	1050 mm	1 ark	675 mm	3 mm
38041	Vit	1050 mm	1 ark	675 mm	4 mm
38042	Vit	1050 mm	1 ark	675 mm	5 mm

Non Slip material

Ett anti-glid material som genom sin friktion är perfekt för ytor där man önskar förhindra nötning. Materialet är speciellt framtaget för att användas på KiddieGAITs fotblad, för att hindra att t.ex. en SureStep-ortos glider mot det blanka fotbladet.OBS! Detta material skall inte användas direkt mot huden.



Art.nr.	Färg	Längd	Bredd
28411	Svart	1m	14 cm

Strap Pads

Polstringskuddar som fördelar trycket från hårt åtsittande band. Minskar risken för skav på känslig hud. Ökar komforten vid långvarig användning och fungerar som praktiskt tillbehör till ortoser och andra produkter med band.



Art.nr.	Modell	Färg	Antal/Förp	Mått
25119	Strap Pads	Svart	10 st/förp.	115x40 mm
25120	Strap Pads	Svart	10 st/förp.	125x45mm
25121	Strap Pads	Svart	10 st/förp.	135x55mm

Wero Swiss® Fix

Ett elastiskt, anpassningsbart bandage som används för kompression vid svullna fingrar. Kan användas i kombination med gipsavgjutningar. Gasbindan är luftigt, hudvänligt och har mjuka, vävda kanter för extra komfort och skydd av den svullna huden.

Användningsområde: Gasbinda för svullna fingrar eller för fixering av sårförband.

Övrigt: Elasticitet cirka 120%.



Art.nr.	Modell	Mått	Färg	Längd	Bredd	Antal/Förp
64115	Wero Swiss® Fix	4cm x 4m	Vit	4 m	4 cm	20st/1 förp

Color elastisk linda

Som en perfekt avslutning på din X-LITE® gipsskena erbjuder vi elastiska lindor i hög kvalitet och i fina färger. Då komforten och kvalitén på lindan är mycket hög är den perfekt för patienter som ska bära gipsen under en längre tid. Color elastisk linda andas och tillsammans med X-LITE® gipset ger det ett mycket luftigt bandage. De har en mjuk yta och vävda kanter som känns behagligt mot huden. Den anpassade elasticiteten gör att den formar sig fint och kan därför användas både till större och mindre applikationer. Den har en "anti-slip" effekt, vilket betyder att lagren inte delar sig och man får ett hållbart resultat. Elastisk linda kan tvättas i 60°C och steriliseras.



Art.nr.	Modell	Färg	Längd	Förp.	Bredd
64106	Color elastisk linda	Svart	5 m	10	6 cm
64107	Color elastisk linda	Röd	5 m	10	6 cm
64108	Color elastisk linda	Royal Blue	5 m	10	6 cm
64109	Color elastisk linda	Grön	5 m	10	6 cm
64110	Color elastisk linda	Gul	5 m	10	6 cm
64112	Color elastisk linda	Svart	5 m	10	10 cm
64113	Color elastisk linda	Royal Blue	5 m	10	10 cm

D-ring plast

D-ringar i plast. Finns med eller utan fäste.




Art.nr.	Modell	Färg	Förp.	Bredd
25070	Utan fäste	Vit	25 styck	25 mm
25071	Med fäste	Vit	25 styck	25 mm

3D-Safe

3D-Safe är ett kantband av polyeteneskumplast. Bandet är självhäftande och något elastiskt. Enkelt och snabbt att applicera. För ökad stretch och vidhäftning bör man värma kantbandet med varmluftspistol före applicering.

Användningsområde: Som kantband eller polstring på ortoser.

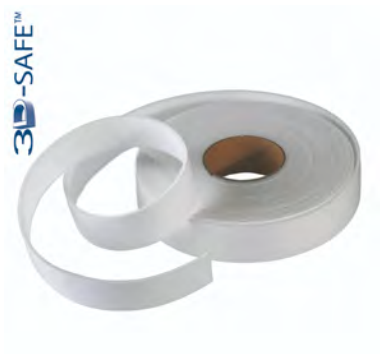

Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
64200	Vit	10 m	1 rulle	40 mm	3 mm

X-LITE® termoplastiskt kantband

X-LITE termoplastiskt kantband är tillverkat av samma material som X-LITE. Bandet värms i vattenbad och fäster direkt mot X-LITE och övriga lågtemperaturplaster. Ortoserna får en jämn och fin kant.

Övrigt: Ark om 50 st levereras i plastpåse.



Art.nr.	Färg	Längd	Bredd	Antal/Förp	Ark/Dispenser
64180	Vit	7,5 m	25 mm	1	Dispenser

Flexions-/extensionskit

Individuella utriggarkomponenter till dynamiska ortoser. Varje del kan anpassas individuellt för MCP-, PIP- eller DIP-lederna i flexion eller extension. De små förböjda utriggarna placeras över MCP-leden eller på fingret.

Användningsområde: Till dynamiska ortoser.

Övrigt: Komplet set. Varje set innehåller 5 st förböjda utriggare som kan användas enkeltvis (önskas 1 st bred utriggar till alla fingrar väljes art.nr. 51230), hållare, stänger, låsmuffar, fingerslinga med tråd, D-ring med fäste för gummiband/fjäder och en insexnyckel. Ortosmaterial och gummiband/fjäder köpes separat enligt önskemål.



Art.nr.	Förp.
51270	Komplett set

Justerbar utriggare för extension

Komponenter till dynamisk extensionsortos med låg profil. Anpassas till MCP-, PIP- eller DIP-led. Varje finger kan anpassas individuellt.

Användningsområde: Till dynamiska ortoser.

Övrigt: Komplet set. Varje set innehåller 1 st förböjd utriggar (önskas 5 st separata utriggare för enskilda fingrar väljes art.nr. 51270), hållare, stänger, låsmuffar, fingerslinga med tråd, D-ring med fäste för gummiband/fjäder och en insexnyckel. Ortosmaterial och gummiband/fjäder köpes separat enligt önskemål.



Art.nr.	Förp.
51300	Komplett set

Ersättningskit till justerbara utriggare

Tillbehör för utriggare.

Användningsområde: Till dynamiska ortoser.

Övrigt: Hållare, stänger och låsmuffar, 5 st av varje.



Art.nr.	Förp.
51301	Komplett set



Verktyg

Kraftig gipssax

Extra stor och stark sax av rostfritt stål, 23 cm lång. Den skyddade spetsen möjliggör klippning av alla typer av bandage och gips nära huden. Den nedre ringen för två fingrar avlastar trycket och förbättrar komforten vid användning av saxen. Det fintandade nedre bladet ger ett bättre grepp om materialet.

Användningsområde: Alla stockinetter och polstringar/bandage. Alla lågtermoplastiska material, syntetiska material och gipsavgjutningar.



Art.nr.	Modell	Längd	Material
51204	Kraftig gipssax	23 cm	Rostfritt stål

Gipssax rostfri

En sax i hög kvalitet som klipper lätt i alla material. Nedre blad med fin sågtandning och skarpt vinklat övre blad. Saxen är tillverkad av rostfritt stål och är autoklaverbar.

Användningsområde: Alla stockinetter och stoppningar/bandage. Alla syntetiska gips- och gipsavgjutningar. Alla lågtermoplastiska material.



Art.nr.	Modell	Längd
51207	Gipssax rostfri	18 cm
51208	Gipssax rostfri	14 cm
51218	Gipssax rostfri vänsterhänt	18 cm

Bruns gipssax

En klassisk kraftig gipssax i rak modell tillverkad av japanskt rostfritt stål. Mycket slitstark. Den skyddade spetsen möjliggör klippning av alla typer av bandage och gips nära huden. Den nedre ringen för två fingrar avlastar trycket och förbättrar komforten vid användning av saxen. Ej tandad.
Saxen kan autoklaveras.

Användningsområde: Alla stockinetter och stoppningar/bandage. Alla syntetiska gips- och kalkmaterial samt lågtemperaturplaster.



Mått
Längd 24 cm.

Art.nr.	Längd	Material
51203	24 cm	Rostfritt stål

Bandagesax med plasthandtag

Praktisk sax med stort plastgrepp, avsedd för olika plastmaterial. Saxen är tillverkad av rostfritt stål AISI 420 och är autoklaverbar. Ett prisvärt alternativ.



Art.nr.	Färg	Längd	Material
51211	Svart	18 cm	AISI 420
51212	Grön	18 cm	AISI 420
51213	Gul	18 cm	AISI 420

Ergo Super gipssax

En förstklassig sax tillverkad av japanskt rostfritt stål som är extremt hållbart. Saxen har förstärkta blad av volframkarbid. Det nedre bladet har fina tandningar och ett skarpt vinklat övre blad. Modellen har en innovativ ergonomisk toppring "vinklad utanför centrum" för att avlasta trycket på tummen för personer som använder saxen dagligen. Två fingrar i den nedre fingerringen avlastar också trycket och förbättrar komforten. Saxen kan autoklaveras.

Användningsområde: Alla stockinetter och stoppningar/bandage. Alla syntetiska gips- och gipsavgjutningar. Alla lågtermoplastiska material.



Art.nr.	Modell	Längd	Material
51219	Ergo Super Gipssax	18 cm	Rostfritt stål med förstärkta blad av volframkarbid
51227	Ergo Super Gipssax vänsterhänt	18 cm	Rostfritt stål med förstärkta blad av volframkarbid

Supersax Premium

En extremt vass sax med stort handtag. Passar utmärkt till att klippa i plastmaterial, även när plasten börjat bli hård. Tillverkad av nickel, pläterad med krom.



Art.nr.	Längd
51200	20 cm

Böjd MAYO sax

Böjd sax med små handtag. Lämplig att trimma kanter på ortoser där plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras. Kan användas till höger och vänster hand.



Art.nr.	Längd	Material
51214	14 cm	AISI 420

Smith sax

En mycket vass sax med stort handtag. Är lätt att hantera och att klippa i mjuka plastmaterial. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras.



Art.nr.	Längd	Material
51216	18 cm	AISI 420

Gipssax vinklad Nibbler

Liten precisionssax av högsta kvalitet som kan användas till att klippa i kalla och varma plastmaterial. Idealisk till små justeringar runt om ortosen och för att trimma kanter på en färdig ortos eller cirkulär gips. Den nedre skäreggen är tandad. Tillverkad av rostfritt stål och kan autoklaveras.

Användningsområde: Alla stockinetter och stoppningar/bandage. Alla syntetiska gips- och gipsavgjutningar. Alla lågtermoplastiska material.



Art.nr.	Modell	Längd
51209	Gipssax vinklad nibbler	12 cm
51226	Gipssax vinklad nibbler vänsterhänt	12 cm

VWR vattenbad

Rälstank av rostfritt stål täckt med yttre stålplatta. Levereras med ett praktiskt transparent plastlock och en universalbricka i botten för att skydda badkaret, som

enkel kan tas bort och rengöras. Vattenbadet har digitala temperaturinställningar och en avloppskran för bekväm tömning.

- Snabb uppvärmning (ca 30 minuter med kallt kranvatten)
- Digital temperaturindikator med tre förinställda temperaturer
- Temperaturområde +5 till 99 °C med en precision på ±0,2 °C.
- Lågvattennivåalarm och badkaret stängs av automatiskt



Övrigt: Observera: Vattenbadet är klassificerat i säkerhetsklass 1, vilket tillåter oövervakad drift när det används med icke brännbara vätskor. Skydda ditt vattenbad från rester från icke-belagda material genom att placera ett skyddsnät i botten. Manosplint Heat Pan Liner är ett återanvändbart, silikonbelagt skyddsnät. Det skyddar vattenbadet från rester från icke-belagda lågtermoplastiska material och när produkten lyfts ur vattenbadet förhindrar skyddsnätet att material fastnar i botten. Fungerar bra med alla typer av lågtermoplastiska material samt med X-LITE och håller ditt vattenbad snyggt och rent.

Art.nr.	Modell	Storlek	Längd	Bredd	Höjd	Material	Färg
64514	Vattenbad	12 L	Kärl: 30,6 cm	Kärl: 28,1 cm	Kärl: 12,5 cm	-	-
64515	Vattenbad	26 L	Kärl: 48,1 cm	Kärl: 27,8 cm	Kärl: 17,5 cm	-	-
64516	Manosplint Heat Pan Liner	One Size	61 cm	38 cm	n/a	-	-
64517	Rör för vattenbad	n/a	1 m	n/a	n/a	Silikon	-
64518	Dräneringskran för vattenbad	Passar till röret	n/a	n/a	n/a	Plast	Vit
64520	Bottenplatta i polykarbonat	26 L	47 cm	26 cm	n/a	Plast	Transparent
64521	Bottenplatta i rostfritt stål	26 L	47 cm	26 cm	n/a	Rostfritt stål	-
64522	Bottenplatta i polykarbonat	12 L	28 cm	26 cm	n/a	Plast	Transparent
64523	Bottenplatta i rostfritt stål	12 L	28 cm	26 cm	n/a	Rostfritt stål	-

X-LITE® plåt med silikonbeläggning

Används som arbetsyta vid gipsning med X- LITE. Silikonbeläggningen förhindrar att X-LITE fastnar i underlaget. Den perforerade ytan på plåten gör att överflödigt vatten ifrån X- LITE rullarna lätt kan rinna ner under plåten och sugas upp av underliggande handduk.



Art.nr.	Längd	Bredd
64811	530 mm	325 mm
64812	600 mm	400 mm

Tång för vattenbad

Tång i rostfritt stål som är lämplig att använda för att ta upp gips eller lågtemperaturplaster ur varma vattenbad.



Art.nr.	Längd	Material
64519	37,5 cm	Rostfritt stål

Manosplint® Safety Cutter

Den säkraste och enklaste skäraren på marknaden för kalla termoplaster. Med Manosplint® Safety Cutter minskar du belastningen på terapeuternas händer – skärhuvudets design tar bort den finger- och handbelastning som uppstår vid användning av handkniv eller sax. Minimal ansträngning krävs för att skära igenom alla material. Skär enkelt kalla plaster med en tjocklek på upp till 3,2 mm. Lätt att hantera och flytta runt. Den 66 cm långa skärlängden gör att den kan användas även för de största arken. Silikonremsor längs hela basen och undersidan av skärstången håller alla plaster på plats under skärning. Skärkanalen för bladet eliminerar behovet av en skärmatta.



Övrigt: Levereras med ett paket om 100 blad.

Art.nr.	Modell	Längd	Bredd	Antal/Förp
51224	Manosplint Safety Cutter	81 cm	33 cm	1 st
51225	Extra blad	5 cm	2 cm	100 st

Splint Pattern Markers

Perfekt för att enkelt överföra mönster på gips och termoplast. De tydliga gula markeringarna sitter kvar, även när materialet doppas i vatten – praktiskt och pålitligt vid varje användning.



Art.nr.	Modell	Färg	Antal/Förp
51220	Splint Pattern Markers	Gul	Förpackning med 12 st.



Test, träning och behandling

Orthelligent VISION


Orthelligent® VISION erbjuder en innovativ, AI-baserad gånganalys som möjliggör exakta mätningar utan markörer. Denna användarvänliga teknik gör det snabbt och enkelt att skapa individuella behandlingsplaner, utvärdera proteser och ortoser samt analysera rörelsemönster noggrant – visualisera och dokumentera dina patienters framsteg. Allt som behövs är en surfplatta och ett Orthelligent VISION-abonnemang!

Med Orthelligent® VISION kan du göra analyser från sidan och framifrån samt analysera gång i trappa. Appen gör det möjligt att noggrant bedöma rörelser, felställningar inom några minuter baserat på exakt data. Analysen baseras på beräknade ledpunkter och våra specialutvecklade algoritmer, vilket ger en detaljerad utvärdering. Den avskalade grafiken, kompletterad med informativa illustrationer, skapar en rapport som är lätt att förstå och användbar i praktiken.

- Enkel, mobil och flexibel lösning
- Snabb analys
- Enkel jämförelse av mätningar
- Frontal-, lateral- och trappanalyser
- Tidseffektiv och kostnadsbesparande

Användningsområde: • Utför analys före och efter rehabiliteringsperiod för att utvärdera förbättringar. • Analysera patienter med gamla och nya proteser. • Jämför resultat hos patienter utan och med ortos, till exempel AFO. • Analysera gångmönster för att fatta kliniska beslut om framtida rehabiliteringsplaner.

Övrigt: Börja idag och upplev hur enkelt och effektivt en rörelseanalys kan vara. Skapa ett kostnadsfritt konto och välj sedan det abonnemangsplan som passar dig. Besök <https://webshop.o-dhs.com/dashboard>

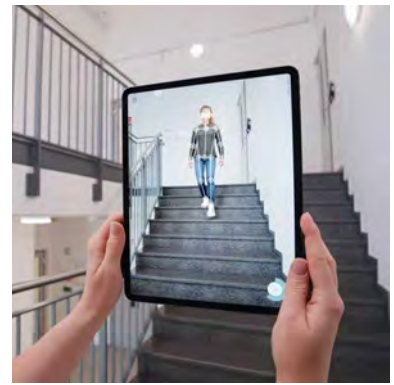

GripAble Pro

Rehabilitering via spel bidrar till patientens engagemang och motivation. Repetitiv träning för neuro-rehabilitering rekommenderas för bästa resultat. Gripable innehåller individuellt anpassade aktiviteter som bidrar till ökat rörelseomfång och greppstyrka.

- Flera aktivitetsnivåer för individuell bedömning – kan anpassas efter fysiska och kognitiva mål.
- Följ patientens framsteg på distans med feedback och rapporter i realtid.
- Fem inställningar för utvärdering av olika aspekter av patientens grepp.
- Lätt och portabel.
- Fungerar utmärkt tillsammans med Jamar ICC 0.90.

Alla tester kan utföras i isometriska och isotoniska lägen. De förberäknade resultaten inkluderar medelvärde och standardavvikelse, och sammanställs i rapporter. Följer ASHT:s bedömningsrekommendationer.

Övrigt: GRIPABLE PRO FÖR TERAPEUTER INNEHÅLLER: - GripAble-enhet med handledsband - Surfplatta och programvaruapplikation - Aktiviteter, data och rapporter - Programuppdateringar ingår - Inloggning för flera terapeuter - Obegränsat antal patientinloggnings För mer information besök www.gripable.CO, youtube.com/gripable eller kontakta din produktspecialist på Camp Scandinavia.



Art.nr.	Modell
40621	GripAble PRO

Jamar® Plus Handdynamometer

Jamar® PLUS handdynamometer är ett enkelt och säkert verktyg för att kontrollera och utvärdera greppstyrka och handfunktion. Den ger förbättrad noggrannhet vid mätning av styrkeförbättringar och har en lättläst digital display för enklare patientvård. Du kan justera grepphandtaget till en av fem olika positioner för att passa varje användares hand. Mäter och visar isometrisk greppkraft från 0 - 90 kg.



Det finns flera fördelar med att använda en digital dynamometer, bland annat mer exakta mätningar av greppstyrkan. Den digitala handdynamometern från Jamar har elektroniska lastceller som ökar noggrannheten vid mätning av greppstyrka. Den elektriska handdynamometern eliminerar också matematiska beräkningsfel genom att automatiskt beräkna statistik, som genomsnitt, standardavvikelse och variationskoefficient. Dessutom, utan hydraulik, behöver du inte oroa dig för läckage.

Övrigt: Levereras i en praktisk transportväska. Kalibrering rekommenderas en gång per år för att säkerställa hållbarhet och tillförlitlighet.

Art.nr.	Modell
52101	Kalibrering
52102	Jamar Plus Handdynamometer

Jamar® handdynamometer

Jamar Hydraulic Hand Dynamometer är ett enkelt och säkert verktyg för att kontrollera och utvärdera greppstyrka och handfunktion med praktiskt läckagesäker hydraulik och en isometrisk design för att säkerställa exakta, reproducerbara resultat, varje gång. Skala mellan 0 och 90 kg. Den är idealisk för rutinundersökning och ger terapeuten en enklare metod för att spåra och dokumentera patienternas framsteg. Jamar Hydraulic Hand Dynamometer levereras kalibrerad och har ett stötsäkert gummihölje som skyddar mätaren i rostfritt stål samt en handledsrem som förhindrar att man tappar den. Jamar kan användas för att mäta isometrisk kraft och toppstyrka med fem justerbara grepppositioner. Detta hjälper till att mäta styrka och rehabilitering över tid.



Övrigt: Levereras i en praktisk transportväska. Kalibrering rekommenderas en gång per år för att säkerställa hållbarhet och tillförlitlighet.

Art.nr.	Modell
52100	Jamar Handdynamometer
52101	Kalibrering

Jamar® Pinch Gauge

JAMAR Hydraulic Pinch Gauges är ett enkelt och säkert verktyg för att kontrollera och utvärdera fingerstyrka med mycket hög precision. Den är idealisk för rutinundersökning och ger terapeuten en enklare metod för att spåra och dokumentera patienternas framsteg. Till skillnad från konventionella pinch-mätare ger den unika designen patienten möjlighet att utföra ett äkta pinch-mönster eftersom terapeuten, inte patienten, stöder vikten på mätaren. Den röda indikatornålen stannar kvar på maximalt värde tills den återställs. Mäter klämkraft upp till 20 kg.

Övrigt: Innehåller instruktioner på svenska och engelska. Levereras i en praktisk transportväska. Kalibrering rekommenderas en gång per år för att säkerställa hållbarhet och tillförlitlighet.



Art.nr.	Modell
---------	--------

52110	Jamar Pinch Gauge
-------	-------------------

Handtränare ergonomisk

Denna handtränare ger ett bekvämt grepp som är format för att ge en spridning av motståndet inne i handflatan. Ramen är gjord i material av låg vikt och har clips som blockerar flexion och extension. Den går att ställa in för olika handstorlekar. Handtaget är ergonomiskt och polstrat. Förpackningen innehåller 4 par graderade, färgkodade gummiband.



Art.nr.	Modell
---------	--------

54139	Handtränare
-------	-------------

54141	Extra clips 4 par
-------	-------------------

Goniometer

Använd denna genomskinliga plastgoniometer för att enkelt och effektivt kunna mäta rörelseomfångets vinklar på stora leder. Mäter rörelseomfång 180° med 2° intervall.



Mått

Längd 15 cm

Art.nr.	Modell	Färg	Längd
52200	Större leder	Transparent	15 cm

Finger Goniometer Stainless Steel

Mäter rörelseomfång för fingerleder. Mäter ROM för MP- och IP-led, samt andra småleder inklusive tår. Design i rostfritt stål med en stor huvuddel och motsatta skalan 180° till 0° i 5°-intervall. Linjära mått i centimeter och tum. Mäter 14 cm i längd.



Mått

Längd: 14 cm.

Art.nr.	Modell	Längd
52197	Finger Goniometer Stainless Steel	Längd: 14 cm

Exacta Finger Goniometer

Fingergoniometer som är lätt att läsa av med 1°-intervall. Kan användas för att mäta både aktiv och passiv rörelse i MP-lederna i handen och de interfalangala lederna. Kan användas på den volara ytan av fingrarna för att mäta hyperextension eller lateralt längs lederna långaxel. Mäter från 0° till 180° i 1°-intervall.



Mått

Måtten är 10 x 5,4 cm när den är stängd.

Art.nr.	Modell	Längd	Material
52198	Exacta Finger Goniometer	10 x 5,4 cm stängd	Styv plast

Pegtest 9 håls

Ett enkelt test för bedömning av handfunktion. Lätthanterligt storleksformat. Alla bitar kan desinficeras. Stoppur är inkluderat.



Art.nr.	Modell	Förp.
52315	Pegtest	-
52316	Extra peggar	9 styck

Purdue Pegboard test

Mäter två olika aktiviteter: 1. Stora rörelser av fingrar, hand och arm. 2. Känsl i fingertopparna. Förpackningen inkluderar instruktionsmanual, normalvärde och 25 protokoll. Stoppur ej inkluderat.



Art.nr.	Modell
52320	Purdue Pegboard test

Grooved Pegboard

Ett stimulerande test för fingermotorik och visuell förmåga som mäter mer komplett motorik och koordination än de flesta Pegboard. Innehåller 25 hål med slumpvis placerade former vilka kräver rotation vid isättning.



Art.nr.	Modell	Förp.
52325	Grooved Pegboard	-
52326	Extra peggar	30 styck

Goniometer finger

Liten goniometer i genomskinlig plast för enkel och effektiv mätning av rörelsevinklar i små leder. Mäter 180° rörelseomfång med 5° intervall. Mjuk plast för enkel och smärtfri hantering.



Mått
Längd: 14 cm

Art.nr.	Modell	Mått	Färg
52199	Små leder	14 cm	Transparent

R-lite foam block

Handträningsblock av T-Foam. Materialet har långsam återgång till sitt ursprung, vilket hjälper patienten att ej överanstränga sig. Finns i fyra olika hårdhetsgrader. Tvättas i varmt vatten med mild tvållösning.



Art.nr.	Mått	Färg	Förp.	Hårdhet
54130	4,4x4,4x7,6 cm	Gul	32 styck	Extra mjuk
54130	4,4x4,4x7,6 cm	Rosa	32 styck	Mjuk
54130	4,4x4,4x7,6 cm	Blå	32 styck	Medium
54130	4,4x4,4x7,6 cm	Grön	32 styck	Hård
54131	4,4x4,4x7,6 cm	3 st av varje färg	12 styck	-

Rolyan therapy putty

Rolyan handträningsslera är ett utmärkt verktyg för att hjälpa till med återhämtning från hand-, finger- och tumsador. Det möjliggör olika handrörelser och stretchningar, inklusive nypningar, vridningar och grepp. Rolyan handträningsslera är en icke-fet formula som hjälper till att hålla huden ren utan att fastna. Den kommer inte att fläcka, brytas sönder eller separeras vid upprepad, långvarig användning. Välj bland ett brett utbud av storlekar och motstånd. Stora tuber är perfekta för att ge som prover till patienter så att de kan träna hemma, medan mindre mängder är perfekta för personligt bruk.



Övrigt: Latexfri och giftfri sammansättning är säker för alla med latexkänslighet eller allergier. Vissa paket tillverkas på beställning och det kan medföra längre leveranstider. Vänligen kontakta kundtjänst om du har några frågor.

Art.nr.	Modell	Färg	Vikt
54120	Extra mjuk	Brun	85 g
54120	Mjuk	Gul	85 g
54120	Medium mjuk	Röd	85 g
54120	Medium	Grön	85 g
54120	Fast	Blå	85 g
54120	Extra fast	Grå	85 g
54121	Extra mjuk	Brun	113 g
54121	Mjuk	Gul	113 g
54121	Medium mjuk	Röd	113 g
54121	Medium	Grön	113 g
54121	Fast	Blå	113 g
54121	Extra fast	Grå	113 g
54122	Extra mjuk	Brun	450 g
54122	Mjuk	Gul	450 g
54122	Medium mjuk	Röd	450 g
54122	Medium	Grön	450 g
54122	Fast	Blå	450 g
54122	Extra fast	Grå	450 g

Vacuumkuddar

Vacuumkudde fylld med små granulatkulor som formar sig när luften evakueras. Kan omformas genom att ventilen öppnas. Kudden har god vacuumstabilitet och låg vikt. Separata blå kuddvar kan beställas.

Användningsområde: Vid operationer och som stöd vid sittande. Kan också användas av tandläkare.



Art.nr.	Modell	Storlek	Färg
22393	Vaccumkudde	55x30 cm	Vit
22394	Vaccumkudde	55x65 cm	Vit
22395	Vaccumkudde	55x85 cm	Vit
22396	Vaccumkudde	40x50 cm	Vit
22275	Enhandspump	-	-
26334	Ventill till vacuumkudde	-	-

Urias splint

Urias splintar ger ett jämnt tryck på arm, ben, hand och fot. Splintarna är gjorda i dubbelt lager PVC och försluts med dragkedja. Det transparenta materialet ger kontroll över splintens position. OBS! Trycket får ej överstiga 40 mmHg.

Användningsområde: Vid ödembehandling och proprioceptiv stimulering vid neurologisk rehabilitering.



Art.nr.	Modell	Längd
53510	Lång arm	80 cm
53511	Kort arm	70 cm
53512	Halv arm	53 cm
53513	Armbåge	40 cm
53516	Fot	32 cm
53517	Ben stor	70 cm
53519	Hand	20 cm
53518	Ben liten	60 cm
53515	Munstycke	100 st
53514	Filter till munstycke	5 styck

Kinetec Spectra Essential™ knä

Kinetec Spectra Essential™ har en lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll. Endast på- och avstängningsknapparna kan användas när de individuella inställningarna för patienten är gjorda och låsta. Den är justerbar för patientlängd från 145 cm upp till 195 cm och ställbar i rörelseintervall -10° till 120° flexion. Finns bland annat med hygienisk plastpolstring som kan spritas av.

Kinetec Spectra Essential är den enklaste modellen av Spectra, denna kan man enkelt uppgradera till Spectra genom att byta handkontrollen och uppgradera till en Kompanion genom att byta både handkontroll samt ett uppgraderingskit med eller utan fotplatta.



Art.nr.	Modell	Material
40682	Spectra Essential	Plastpolstring

Kinetec™ Spectra knä

Kinetec Spectra har en lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll. Endast på- och avstängningsknapparna kan användas när de individuella inställningarna för patienten är gjorda och låsta. Den är justerbar för patientlängd från 145 cm upp till 195 cm och ställbar i rörelseintervall -10° till 120°flexion. Finns bland annat med hygienisk plastpolstring som kan spritas av.

Kinetec Spectra och Spectra XL är mellanmodellen, det som skiljer dessa två åt är att XL har en bredare och starkare maskin som även klarar större patienter (max 227 kg). Dessa båda har alla funktioner som Essential och även uppvärmningsprogram och timer. Denna kan även lätt uppgraderas till en Kompanion genom att köpa ett uppgraderingskit, med eller utan fotplatta.



Art.nr.	Modell	Material
40688	Spectra XL	Plastpolstring
40664	Spectra	Plastpolstring

Kinetec™ Spectra Kompanion knä

Kinetec™ Spectra Kompanion har en lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll. Endast på- och avstängningsknapparna kan användas när de individuella inställningarna för patienten är gjorda och låsta. Den är justerbar för patientlängd från 145 cm upp till 195 cm och ställbar i rörelseintervall -10° till 120°flexion. Finns bland annat med hygienisk plastpolstring som kan spritas av.

Denna är en uppgraderad Spectra med Touch Screen och med Bluetooth där patienten och fysioterapeut/sköterska och läkare kan få ut maximal information under och efter träning. Det går att ställa in uppvärmningsprogram, rörelseomfång, antal repetitioner. Samt få en utvärdering av framsteg. Det går även att välja mellan olika språk, träningsprogram som kan pusha patienten och motståndsövningar. Det går även att ha videosamtal mellan vårdpersonal och patient direkt i touchenheten, som hanteras som en surfplatta, vilket förenklar uppföljning av patienterna. Även utveckling och framsteg för patienten går att följa och ta ut i protokollform vilket tydliggör effekten av rehabiliteringen för alla inblandade. Samt en rad andra funktioner som förenklar och förbättrar möjligheterna för vårdpersonal och patienter. Funktionen "Kompanion" kan även köpas som en separat uppgradering till både Spectra (40660/40664) och Essential (40681/40682).



Art.nr.	Modell	Material
40686	Spectra Kompanion	Plastpolstring

Kinetec™ Performa knä

Kinetec Performa är justerbar för patientlängd från 112 cm upp till 206 cm. Även denna maskin har lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll där alla inställningar görs. Maskinen tillåter även aktiv rörelse i både flexion och extension. Finns bl. a. med hygienisk plastpolstring, timer, rörelseintervall -3° till 130° flexion, förprogrammerbar för upp till 16 patienter, tillåter aktiv rörelse, justerbar längd.



Art.nr.	Modell	Material
40624	Performa	Plastpolstring

Kinetec™ Centura 5 armbåge/axel

Centura 5 är en maskin med många funktioner och möjligheter som drivs av 2 motorer som enkelt monteras enligt färgkoder beroende på vilken rörelse man vill träna. Funktionerna täcker de viktigaste rörelserna i axel och armbåge vid rehabiliteringen. Centura 5 kan rörelseträna flexion-extension, abduktion-adduktion, rotation, även rotation samtidigt som flexion eller abduktion samt horisontell abduktion och adduktion. De olika funktionerna kan kombineras och ge flexibilitet i behandlingen. Rörelseaxeln centreras vid aktuell led. Justerbar i höjd och längd. Maskinen och stolen kan enkelt rullas vid förflyttningar. Ergonomisk handkontroll.



Art.nr.	Modell	Material
40630	Centura 5	Plastpolstring



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 01
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no