



# Arm- och axelortoser

[www.camp.se](http://www.camp.se)



**Mått:** Omkrets runt armbågsleden



**Mått:** Omkrets 5 cm nedanför armbågen



**Mått:** Omkrets 5 cm nedanför armbågen

## Armbågs/hälskydd Heelbo™

Elastisk strumpa med tryckavlastande uttagbar gelplatta som skyddar huden på armbågen och förebygger trycksår.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Förp.
53600	Gul	Small	15-20 cm	par
53600	Blå	Medium	20-25 cm	par
53600	Vit	Large	25-30 cm	par
53600	Grön	X-Large	>30 cm	par

## EpiGel epikondylit

Bekvämlig epikondylitortos med två flyttbara gelkuddar som avlastar genom kompression över extensor- och flexormusklerna utan att ge kompression runt underarmen. De mjuka gelkuddarna är stötdämpande. Ortosen har en låg profil. Ett enkelt förslutningssystem gör ortosen lätt att ta på och av.

**Användningsområden:** Lateral och/eller medial epikondylit (s.k. tennis- och golfarmbåge).

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28166	Svart	En storlek	20-35 cm	Bilat.

## EpiFoam epikondylit

Epikondylitortos med en foamkudde, som placeras antingen över extensormuskeln för att ge avlastning vid lateral epikondylit eller över flexormuskeln för avlastning vid medial epikondylit. Ett enkelt förslutningssystem gör ortosen lätt att ta på och av.

**Användningsområden:** Lateral och/eller medial epikondylit (s.k. tennis- och golfarmbåge).

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28165	Svart	En storlek	20-35 cm	Bilat.

## Armbågsortos Ulnaris

En universellt ortos som effektivt begränsar armbågens flexion för att lindra smärta i samband med cubitaltunnelsyndrom.

Ortosen är mjuk och vadderad med en justerbar aluminiumska som är lätt att anpassa. Produkten är tillverkat av ultralätt material som andas. En ficka på insidan genom vilken armen förs in gör det lätt att ta på ortosen.

**Användningsområden:** Cubitaltunnelsyndrom eller annan armbågssjukdom där begränsning/stöd av armbågen önskas.

Art. nr.	Färg	Storlek	Vä/Hö
42219	Svart	One size	Bilateral



## HemiSafe

Mjuk och bekväm skulderortos avsedd att användas vid hemiplegi efter stroke för att minska smärta i axelleden och reducera risken för sublaxation. Ortosen har en perfekt anatomisk passform. Den ger stöd för axelleden samtidigt som den tillåter rörlighet vid daglig aktivitet. HemiSafe är tillverkad i ett material som andas. Den har reglerbara band runt kroppen som är breda och mjuka för att undvika skav. När ökad abduktion önskas används den medföljande kudden som då placeras i armhålan. Ortosen kan tas på och av med endast en hand.

**Användningsområden:** Minska smärta i axelled efter stroke. Reducera risken för sublaxation i axelleden.

**Övrigt:** Latexfri

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått l	Vä/Hö
28157	Vit	Small	80-100 cm	Vä/Hö
28157	Vit	Medium	100-120 cm	Vä/Hö
28157	Vit	Large	120-140 cm	Vä/Hö



**Mått:** Runt bröstkorgen under armhålan.



**Mått:** Omkrets överarm proximalt.

## Humerus Humerusortos

Denna humerusortos bygger på de välkända principerna för en ” Sarmiento-ortos”, en jämn cirkulär mjukdelskompression. De tre cirkulära banden spänns åt oberoende av varandra. Ortosens förankring över axelpartiet gör att den sitter väl på plats utan att glida ner. Bandet som går under motsatt arm har en flyttbar polstring för ökad bekvämlighet. Detta ger en bekväm ortos som är enkel att applicera direkt och enkel för patienten att acceptera. Ortosens ventilerade material låter huden andas och minskar risken för irritationer. Ortosen har två termoplastplattor som vid behov kan justeras genom värmning och formen kan justeras med sax. Detta är i de flesta fall inte nödvändigt. Ortosen ger fri rörlighet för armbågsleden. Ortosen har en invändig ärm som skyddar den känsliga huden när den dras åt. De textila materialen är testade i enlighet med Öko-tex standard 100 och innehåller inte latex.

Finns i en vanlig och en lång version.

**Användningsområden:** Diafysära humerusfrakturer (skaftfrakturer).

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Längd	Omkrets
62106	Regular	Svart	Small	25 cm	18-26 cm
62106	Regular	Svart	Medium	27 cm	26-34 cm
62106	Regular	Svart	Large	29 cm	34-42 cm
62106	Regular	Svart	X-large	32 cm	42-50 cm
62107	Lång	Svart	Small	30 cm	18-26 cm
62107	Lång	Svart	Medium	32 cm	26-34 cm
62107	Lång	Svart	Large	34 cm	34-42 cm
62107	Lång	Svart	X-large	36 cm	42-50 cm

## ROM armbågsortos

Postoperativ armbågs-ortos designad att låsa eller kontrollera armbågens rörelse vid behandling av ligamentskador eller stabila frakturer. Tillåter kontroll från 0° till 90° i extension och från 0° till 120° i flexion. Rörelsen ändras enkelt i 10° intervall. Ortosens längd och omfång justeras från 36 cm till 45 cm. Ortosen inkluderar en armslinga.

**Användningsområden:** Frakturer; postoperativt, tillstånd där kontroll av flexion och extension krävs.

Art. nr.	Storlek	Vä/Hö
62150	En storlek	Vä/Hö
62149	Extra polstring	Bilat.



## ROM armbågsortos UniBor

Postoperativ armbågs-ortos med den senaste generationens teknologi. Rörelsen ändras enkelt i flexion-extension i 10° intervall med 120° ROM. Leden går att låsa i önskat läge. Ortosens längd och omfång kan justeras. Till ortosen kan beställas ett teleskopiskt handstöd, som kan justeras och kopplas på och av, för kontroll av pronation-supination. ROM Armbågsortos UniBor stabiliserar armen och erbjuder en bekväm och effektiv behandling.

**Användningsområden:** Kontroll av flexion-extension av armbågen och pronation-supination efter trauma.

**Övrigt:** Längden på den dagliga behandlingen och behandlingstiden skall ordinerars av en läkare.

Art. nr.	Modell	Vä/Hö
62151	Armbågsortos UniBor	Bilat.
62152	Extra band	Bilat.
62153	Handdel	Bilat.
62154	Extra polstring	Bilat.



## Armslinga på rulle

Denna enkla variant av armslinga (Collar'n Cuff), mitella, levereras på rulle om 12 meter. I en förpackning medföljer två rullar var av en ligger i en dispenserbox och 10 st Y-kardborrfästen för att skapa en fixering av armen. Materialet är mjukt och smidigt samtidigt som det håller formen även under belastning. Den mörkblå färgen gör att slingan håller sig fräsch länge.

**Användningsområden:** Rekommenderas vid trauma på handled, armbåge och skuldra. Kan även användas i kombination med gips.

Art. nr.	Modell	Färg	Bredd	Längd	Förp.
42212	Armslinga på rulle	Svart	5 cm	2 x 12 meter	Rulle





**Mått:** Armbåge till MCP.

## Armslinga BOMULL

Enkel armslinga av bomull som har steglöst axelband. Axelbandet har en flyttbar polstring för ökad komfort. Dubbla D-ringar möjliggör användning både med och utan underarmsgips eller ortos. Tumögla.

**Användningsområden:** Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
47101	Grå	Small	25-28 cm	Bilat.
47101	Grå	Medium	27-30 cm	Bilat.
47101	Grå	Large	29-32 cm	Bilat.
47101	Grå	X-Large	31-34 cm	Bilat.



**Mått:** Armbåge till handled

## Armslinga NÄT

Luftig armslinga med steglöst justerbart axelband. Axelbandet har en flyttbar polstring för ökad komfort. Dubbla D-ringar möjliggör användning både med och utan underarmsgips eller ortos. Tumögla.

**Användningsområden:** Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
47100	Grå	Small/Medium	27-30 cm	Bilat.
47100	Grå	Large/X-Large	31-34 cm	Bilat.



**Mått 1:** Slinga Höjd och Bredd

**Mått 2:** Omtag Höjd och Längd

## Armslinga WRAP

Traditionell armslinga i två delar som kan justeras oberoende av varandra. Axelbandet har en flyttbar polstring för ökad komfort. Armdelen har ett plastspänne på ryggen som håller ihop de två banden för att hindra att dessa glider ut över axlarna. Omtaget justeras steglöst med kardborrband.

**Användningsområden:** Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.


Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
47102	Grå	Small/Medium	23 cm, 32 cm	10 cm, 132 cm	Bilat.
47102	Grå	Large/X-Large	25 cm, 35 cm	13 cm, 155 cm	Bilat.

## Armslinga FOAM

Armslinga med extra band för fixering. Vadderat material. Justerbart axelband som fäster var som helst på ortosen.

**Användningsområden:** Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
20031	Grå	Small	28-36 cm	Bilat.
20031	Grå	Medium	35-42 cm	Bilat.
20031	Grå	Large	41-49 cm	Bilat.
20031	Grå	X-Large	48-56 cm	Bilat.

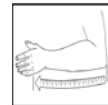

**Mått:** Armbåge till MCP.

## Axellås

En universell armslinga med lågprofil som är enkel att applicera. Den levereras komplett med ett midjeband runt kroppen där överarmen är fäst för att effektivt immobilisera axeln. Handledsfästet fäster vid midjebandet fram och detta fästs i sin tur vid axelremmen med hjälp av ett snabbspänne. Den har dessutom ett extra tumband för att hålla handen i rätt vinkel och undvika dropphand. Axelremmen är justerbar för att få en bekväm passform för patienten och även för att passa till både vänster och höger. Det finns en stor komfortdyna som fördelar trycket över axeln/nyckelbenet. Detta är ett axellås som är lätt att montera och är bekvämt och enkelt att använda. Midjebandets längd är 120 cm.

**Användningsområden:** Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek
42213	Axellås	Svart	En storlek



## Armslinga med abduktionskudde

Ett universellt axellås som effektivt immobiliserar axelleden. Det bekväma axellåset kommer med en 15° abduktionskudde som enkelt fästs på insidan av selen och som är löstagbar. Den inre delen av abduktionskudden är formad för att vila bekvämt mot patienten.

**Användningsområden:** Kan användas för olika besvär i axeln.

Rotatorcuffskirurgi, glenohumerala dislokationer/subluxation, posterior/främre kapselreparationer, mjukdelskirurgi, överbelastning.

Art. nr.	Färg	Storlek
42218	Blå	Onesize





**Mått:** Längd på underarm

## Jura axelstöd immobilisering

Jura axelstöd – Immobilisering kan användas som armslinga eller som axel immobiliserare och den är utformad för att användas på både vänster och höger arm. Den kraftiga bomullsslingan med fullt justerbara vadderade axel- och kroppsremmar håller armen nära kroppen. Extra vadderad och avtagbar rem runt halsen för optimal komfort. Remmarna fästs genom stora D-ringar vilket gör det enkelt att applicera lyftselen med bara en arm. Tumrem för extra stöd.

**Användningsområden:** Kan användas vid en rad olika skador och tillstånd där det är nödvändigt att begränsa axelns och/eller armbågens rörlighet, t.ex:

- Dislokation.
- Sträckningar och stukningar.
- Före och efter operation.
- Rehabiliteringsfaser.
- Plexus brachialis eller perifer nervskada

**Kontraindikationer:** Applicera inte produkten i direktkontakt med skadad hud.

Art. nr.	Färg	Storlek	Längd
42223	Svart	XS	<33 cm
42223	Svart	S	33cm-38cm
42223	Svart	M	37cm-43cm
42223	Svart	L	42cm-48cm
42223	Svart	XL	48cm>



**Mått 1:** Omkrets bröstorg

**Mått 2:** Längd överarm

## Vission skulderortos IMMO

Vission Skulderortos är avsedd att immobilisera- och hålla överarm, armbåge och underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen är speciellt lämpad för skulder- och bröstgördelskador. Produkten är vändbar och kan användas både på vänster och höger skuldra.

**Användningsområden:** Skulder-, arm-, armbågsskador och skador i skuldergördeln (fraktur, dislokation och stukning). Efter skulder- och bröstgördelkirurgi. Plexus brachialis-pares.

**Kontraindikationer:** Inga kända.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2
46022	VISSION Skulderortose IMMO	X-Small	68 - 78 cm	< 30 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Small	80 - 90 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Medium	90 - 100 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Large	100 - 113 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	X-Large	113 - 120 cm	> 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	XX-Large	120 - 140 cm	> 38 cm