



# PRODUKTKATALOG

# 2022

[camp.se](http://camp.se)



## Support for Better Life!

# INNEHÅLL

|                                                                                     |                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|    | Elements Body                     | 5 - 8     |
|    | Hand- och handledsortoser         | 9 - 50    |
|    | Arm- och axelortoser              | 51 - 60   |
|    | Funktionell Elektrisk Stimulering | 61 - 64   |
|    | Fot- och fotledsortoser           | 65 - 138  |
|    | Knäortoser                        | 139 - 166 |
|    | Höftortoser                       | 167 - 182 |
|    | Bröstproteser                     | 183 - 184 |
|   | Nackortoser                       | 185 - 188 |
|  | Ryggortoser                       | 189 - 224 |
|  | Stomiprodukter                    | 225 - 236 |
|  | Ortoskomponenter                  | 237 - 260 |
|  | Plaster och material              | 261 - 294 |
|  | Verktyg och tillbehör             | 295 - 298 |
|  | Test, träning och behandling      | 299 - 306 |
|  | Försäljningsvillkor               | 307       |
|  | Personal                          | 308       |






# Elements Body

[www.camp.se](http://www.camp.se)



# elements *body*

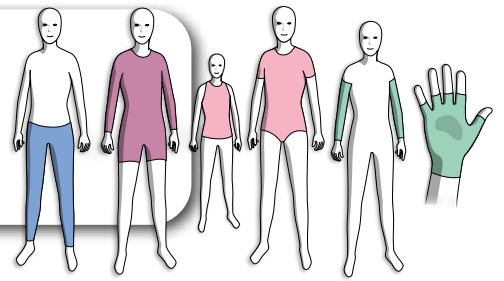

## Elements Body

Elements Body är en ortos tillverkad av lycraresår som är sammansatt i olika paneler. Den är sydd på ett sådant sätt att ortosen ger konstant proprioceptiv feedback i form av tryck och motstånd mot bål och extremiteter. Dräkternas funktion består i att den sitter åt mot kroppen och ger tryck mot bål och extremiteter och därigenom ökas hållning och stabilitet. Genom att öka djupsensibiliteten, även kallad proprioceptionen – (individens förmåga att avgöra de egna kroppsdelarnas position), kan även förmågan till finmotorik samt funktionella prestationer förbättras. Genom olika förstärkningar kan man kontrollera flexion, extension, pronation och supination.

**Användningsområden:** Cerebral pares, förvärvad hjärnskada, förvärvad ryggmärgsskada, Cerebellär Ataxi, Atetos, Spina Bifida, Stroke, MS, ihållande låg tonus, Ehlers Danlos Syndrom, överrörlighet, ledlaxitet.

**Övrigt:** Ortosen beställs och tillverkas efter individuella mått. Dräkten kan utformas som heldräkt, med korta eller långa armar och ben, armstrumpor med eller utan handskar. Förstärkningar och blixtlås kan sys på efter behov av stöd eller funktion. Utformningen bestäms av ortopedingenjör i samråd med läkare och sjukgymnast. Det är ortopedingenjören som utför måtttagningen efter genomgången utbildning. Bäst resultat uppnås om ortosen används under minst sex timmar om dagen. Dräkten skall initialt användas kortare stunder för att successivt uppnå målet sex timmar per dag. Den bör inte användas mer än 8 - 10 timmar per dag. OBS! Elements Body ortoser skall inte användas på natten. För att beställa måttblanketter, artiklar och kliniska studier kontakta Kundsupport på Camp Scandinavia.



Ni kan även beställa Elements Body digitalt via "Allard Configurator" på vår hemsida. Kontakta kundsupport om ni behöver licens.

| Art. nr. | Modell                          |
|----------|---------------------------------|
| 39300    | EB Väst utan ärm                |
| 39301    | EB Väst med kort ärm            |
| 39301    | EB Väst med lång ärm            |
| 39305    | EB Body utan ärm                |
| 39306    | EB Body med kort ärm            |
| 39306    | EB Body med lång ärm            |
| 39310    | EB Dräkt utan ärm/korta ben     |
| 39310    | EB Dräkt utan ärm/¾ ben         |
| 39310    | EB Dräkt utan ärm/långa ben     |
| 39311    | EB Dräkt med kort ärm/korta ben |
| 39311    | EB Dräkt med kort ärm/¾ ben     |
| 39311    | EB Dräkt med kort ärm/långa ben |
| 39312    | EB Dräkt med lång ärm/korta ben |
| 39312    | EB Dräkt med lång ärm/¾ ben     |
| 39312    | EB Dräkt med lång ärm/långa ben |
| 39320    | EB Byxa med korta ben           |
| 39320    | EB Byxa med ¾ ben               |
| 39320    | EB Byxa med långa ben           |
| 39325    | EB Strumpa                      |
| 39330    | EB Kort handske utan fingrar    |
| 39331    | EB Kort handske med fingrar     |
| 39335    | EB Lång handske utan fingrar    |
| 39336    | EB Lång handske med fingrar     |
| 39340    | EB separat ärm                  |

← NYHET!

← NYHET!

← NYHET!

← NYHET!



## Hymo

HYMO-ortosen är en textil ortos i form av en body och/eller byxa med korta eller långa ärmarna och ben. Ortosen är avsedd för patienter med Ehlers Danlos Syndrom. HYMO-ortosen sitter åt mot kroppen och kan förbättra hållningen och ge ökad ledstabilitet, t.ex. kan höften eller skuldran stabiliseras genom det stöd som ortosen ger. Plaggen är måttbeställda med fokus på att stabilisera och begränsa rörelseomfånget i lederna. Ortosen används gradvis tills den önskade användningstiden 8 – 10 timmar per dag uppnåtts. Materialen i HYMO-ortosen är noga utvalda och produceras och certifieras enligt Oeko-Tex standard 100, klass II.

### Användningsområden:

Ehlers Danlos Syndrom.

### Kontraindikationer:

Ödem, luxerade leder (ej reponerade).

**Övrigt:** Plaggen måttbeställs för varje enskild brukare. Beställningsformulär, instruktioner och måttformulär finns att ladda ner på Camp's hemsida.

| Art. nr. | Modell                     | Typ  | Färg  |
|----------|----------------------------|------|-------|
| 39400    | Body med korta ärmarna     | Dam  | Svart |
| 39401    | Body med korta ärmarna     | Herr | Svart |
| 39402    | Body med långa ärmarna     | Dam  | Svart |
| 39403    | Body med långa ärmarna     | Herr | Svart |
| 39408    | Body med 3/4 långa ärmarna | Dam  | Svart |
| 39409    | Body med 3/4 långa ärmarna | Herr | Svart |
| 39404    | Byxa med korta ben         | Dam  | Svart |
| 39405    | Byxa med korta ben         | Herr | Svart |
| 39406    | Byxa med långa ben         | Dam  | Svart |
| 39407    | Byxa med långa ben         | Herr | Svart |
| 39410    | Byxa med 3/4 långa ben     | Dam  | Svart |
| 39411    | Byxa med 3/4 långa ben     | Herr | Svart |



Ni kan även beställa Hymo digitalt via "Allard Configurator" på vår hemsida. Kontakta kundsupport om ni behöver licens.



# Hand- och handledsortoser

[www.camp.se](http://www.camp.se)





**Mått:** Mått tages runt handleden.

## Vission fingerskena

Fingerskena för immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Kan även användas vid konservativ fingerterapi samt vid Dupuytren syndrom och tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna.

**Användningsområden:** Immobilisering av fingrar efter skada eller operation, konservativ fingerterapi, Dupuytren syndrom och tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 27 cm.

| Art. nr. | Modell              | Storlek | Mått       | Vä/Hö  |
|----------|---------------------|---------|------------|--------|
| 46020    | Vission Fingerskena | Small   | < 16 cm    | Bilat. |
| 46020    | Vission Fingerskena | Medium  | 16 - 19 cm | Bilat. |
| 46020    | Vission Fingerskena | Large   | > 19 cm    | Bilat. |



**Mått:** Omkrets handled.

## Vission Multifinger ortos

Denna ortos är avsedd för immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Kan även användas vid konservativ fingerterapi samt vid behandling av Dupuytren syndrom. Tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna. Ortosen kan även användas i samband med behandling av frakturer i metacarpalbenen III-V och dess tillhörande falanger.

**Användningsområden:** Immobilisering, Dupuytren syndrom, vid frakturer.

**Kontraindikationer:** Inga kända.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 30 cm.

| Art. nr. | Modell              | Färg  | Storlek | Mått       | Vä/Hö |
|----------|---------------------|-------|---------|------------|-------|
| 46021    | Vission Multifinger | Svart | Small   | < 16 cm    | Vä/Hö |
| 46021    | Vission Multifinger | Svart | Medium  | 16 - 19 cm | Vä/Hö |
| 46021    | Vission Multifinger | Svart | Large   | > 19 cm    | Vä/Hö |

## SOF-Stretch dynamisk fingerortos kort

Skena som ger ett dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket. Bilateral vajer kan böjas för att anpassa motståndet och göra plats för eventuellt ödem. Den korta designen tillåter full rörlighet i MCP-lederna.

**Användningsområden:** Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått   |
|----------|------|---------|--------|
| 51405    | Vit  | X-Small | 3,8 cm |
| 51405    | Vit  | Small   | 4,4 cm |
| 51405    | Vit  | Medium  | 5,1 cm |
| 51405    | Vit  | Large   | 5,7 cm |
| 51405    | Vit  | X-Large | 7 cm   |



**Mått:** Volart mellan MCP-leden och DIP-leden

## SOF-Stretch dynamisk fingerortos

Skena som ger ett dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket. Bilateral vajer kan böjas för att anpassa motståndet och göra plats för eventuellt ödem.

**Användningsområden:** Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden.

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Mått    |
|----------|-------|---------|---------|
| 51400    | Vit   | X-Small | 5,1 cm  |
| 51400    | Vit   | Small   | 6,4 cm  |
| 51400    | Vit   | Medium  | 7,6 cm  |
| 51400    | Vit   | Large   | 8,9 cm  |
| 51400    | Vit   | X-Large | 10,2 cm |
| 51401    | Svart | X-Small | 5,1 cm  |
| 51401    | Svart | Small   | 6,4 cm  |
| 51401    | Svart | Medium  | 7,6 cm  |
| 51401    | Svart | Large   | 8,9 cm  |
| 51401    | Svart | X-Large | 10,2 cm |



**Mått:** Volart mellan distala palmarvecket och DIP-leden



**Mått:** Volart mellan distala palmarvecket och DIP-leden

## SOF-Stretch dynamisk spiralortos

Extensionsskena (Capener) som ger dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Spiralfjädrarna är placerade på bäge sidor om PIP-leden för att ge samma motstånd i alla positioner. De kan lossas eller spännas till önskat motstånd. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket.

**Användningsområden:** Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden. Lämplig till kontrakturer upp till 45°. Ej för rigida kontrakturer.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått   |
|----------|------|---------|--------|
| 51410    | Vit  | Small   | 6,4 cm |
| 51410    | Vit  | Medium  | 7 cm   |
| 51410    | Vit  | Large   | 7,6 cm |
| 51410    | Vit  | X-Large | 8,3 cm |



## Mallet fingerhylsa

Immobiliserar DIP-leden i extension och tillåter samtidigt full rörlighet i PIP-leden. Används normalt utan polstring och fixeras mot mellersta falangen med självhäftande band (medföljer inte).

| Art. nr. | Storlek | Färg  | Längd   | Diameter | Förp. |
|----------|---------|-------|---------|----------|-------|
| 51422    | 1       | Beige | 5,28 cm | 1,52 cm  | 10 st |
| 51422    | 2       | Beige | 5,18 cm | 1,67 cm  | 10 st |
| 51422    | 3       | Beige | 5,84 cm | 1,87 cm  | 10 st |
| 51422    | 4       | Beige | 6,28 cm | 1,91 cm  | 10 st |
| 51422    | 5       | Beige | 5,87 cm | 1,91 cm  | 10 st |
| 51422    | 5,5     | Beige | 6,09 cm | 2,29 cm  | 10 st |
| 51422    | 6       | Beige | 6,43 cm | 2,29 cm  | 10 st |
| 51422    | 7       | Beige | 6,27 cm | 2,54 cm  | 10 st |



## Buddy strap

Tvillingförband som stadigt håller 2 fingrar tillsammans. Kardborrbandet kan lätt klippas till önskad storlek.

| Art. nr. | Storlek    | Bredd  | Längd   | Förp.   |
|----------|------------|--------|---------|---------|
| 51430    | En storlek | 1,3 cm | 12,7 cm | 5 styck |

## ELEMENTS tumme

ELEMENTS tumme är avsedd för behandling av lindriga och tillfälliga besvär som t.ex. smärta, inflammation och förslitningsskador. Bandaget begränsar rörligheten i tummens grundled samt i viss mån också handleden. Håller tumleden varm.

**Användningsområden:** Lindriga och tillfälliga besvär som t.ex. smärta, inflammation och förslitningsskador.

**Kontraindikationer:** Kraftiga ödem, kraftig svullnad.

**Övrigt:** Ortosens längd på tummens radialsida är 12 cm (storlek S).

| Art. nr. | Färg        | Storlek | Mått    | Vä/Hö |
|----------|-------------|---------|---------|-------|
| 34105    | Beige/Svart | Small   | < 17 cm | Vä/Hö |
| 34105    | Beige/Svart | Large   | > 17 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled.

## Tee Pee™ tumortos

Tumortos med tre formbara aluminiumskenor; centralt, dorsalt och palmart. Ortosen ger ett stabilt stöd för tummen. Tillverkad av perforerad luftig mockaimitation samt foder som andas.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet.

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Mått       | Vä/Hö  |
|----------|-------|---------|------------|--------|
| 28560    | Svart | X-Small | <9 cm      | Bilat. |
| 28560    | Svart | Small   | 9-10 cm    | Bilat. |
| 28560    | Svart | Medium  | 10-11,5 cm | Bilat. |
| 28560    | Svart | Large   | 11,5-13 cm | Bilat. |
| 28560    | Svart | X-Large | >13 cm     | Bilat. |



**Mått:** Längd från handled till tummens IP-led

## CMC-X Lacer tumortos

CMC-X Lacer™ tumortos ger smärtlindring vid osteoartrit i tummens CMC-led samtidigt som den tillåter rörelse. Låsningssystemet med snörning kan enkelt justeras och placera tumbasen i önskad abduktionsgrad för att hjälpa till att stabilisera CMC leden och samtidigt tillåta tummen en funktionell rörlighet. Den justerbara polstrade aluminiumskenan arbetar tillsammans med snörningssystemet och ger ett lätt tryck med ytterligare stabilisering av CMC leden. CMC-X Lacer tumortos är tillverkad av hypoallergen CoolFlex™-material för komfort och kompression. CMC-X Lacer innehåller inte latex eller neoprene.

**Användningsområden:** Osteoartrit i tummens CMC led, medial subluxation av tummens CMC led.

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Mått       | Vä/Hö  |
|----------|-------|---------|------------|--------|
| 28562    | Svart | X-Small | <14 cm     | Bilat. |
| 28562    | Svart | Small   | 14-16 cm   | Bilat. |
| 28562    | Svart | Medium  | 16-18 cm   | Bilat. |
| 28562    | Svart | Large   | 18-19,5 cm | Bilat. |
| 28562    | Svart | X-Large | >19,5 cm   | Bilat. |



**Mått:** Omkrets handled.







**Mått:** Omkrets handled

## CMC tumortos

Denna tumbasortos är avsedd att stödja CMC-leden vid instabilitet och förslitningsskador. Den polstrade inre skenan i kombination med ett yttre elastiskt förslutningsband ger kompression av tumbasen och hjälper därmed till att stabilisera CMC-leden.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet.

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Mått         | Vä/Hö |
|----------|-------|---------|--------------|-------|
| 2856I    | Svart | X-Small | <14 cm       | Vä/Hö |
| 2856I    | Svart | Small   | 14-15,5 cm   | Vä/Hö |
| 2856I    | Svart | Medium  | 15,5-17,5 cm | Vä/Hö |
| 2856I    | Svart | Large   | 17,5-19,5 cm | Vä/Hö |
| 2856I    | Svart | X-Large | >19,5 cm     | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets runt MCP-lederna

## CMCcare tumortos

Tumortos som stödjer tummens CMC-led och håller metakarpalleden i en funktionell position med bibehållen greppfunktion. Ortosen har en integrerad formbar aluminium-skena och en justerbar kardborrlåsning. Den anatomiska designen, med sina avfasade kanter ger en god passform och bästa komfort. Handleden och övriga delar av handen kan röra sig fritt utan att hindras av ortosen.

**Användningsområden:** Osteoartrit i tummens leder, instabilitet i tummen, postoperativt efter artroplastik av CMC-I leden.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått           | Vä/Hö |
|----------|------|---------|----------------|-------|
| 28552    | Grå  | Small   | 16 - 19,5 cm   | Vä/Hö |
| 28552    | Grå  | Medium  | 19,5 - 22,5 cm | Vä/Hö |
| 28552    | Grå  | Large   | 22,5 - 26 cm   | Vä/Hö |

## Vission NEO tumortos kort

Mjuk, elastisk tumortos i neoprene som skyddar och avlastar tummen samt ger värme. Finns i två längder. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

**Användningsområden:** Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tumme och handled.

**Övrigt:** Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm (storlek M).

| Art. nr. | Modell | Färg  | Storlek | Mått       | Vä/Hö |
|----------|--------|-------|---------|------------|-------|
| 46025    | Kort   | Svart | Small   | 13 - 16 cm | Vä/Hö |
| 46025    | Kort   | Svart | Medium  | 15 - 18 cm | Vä/Hö |
| 46025    | Kort   | Svart | Large   | 17 - 20 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled

## Vission NEO tumortos lång

Mjuk, elastisk tumortos i neoprene som skyddar och avlastar tummen samt ger värme. Finns i två längder. Denna modell som är lång ger ett lätt stöd för handleden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

**Användningsområden:** Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tumme och handled.

**Övrigt:** Ortosens längd på tummens radialsida är 12,5 cm. Bandaget är tillverkat av Nylon och SBR (Latexfri neoprene).

| Art. nr. | Modell | Färg  | Storlek    |
|----------|--------|-------|------------|
| 46026    | Lång   | Svart | En storlek |



**Mått:** Omkrets handled.

## Tumortos kort

Mjuk, elastisk tumortos i neoprene som skyddar och avlastar tummen samt ger värme. Finns i två längder. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

**Användningsområden:** Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tumme och handled.

**Övrigt:** Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm (storlek S).

| Art. nr. | Modell | Färg  | Storlek | Mått   | Vä/Hö |
|----------|--------|-------|---------|--------|-------|
| 28548    | Kort   | Beige | Small   | <17 cm | Vä/Hö |
| 28548    | Kort   | Beige | Large   | >17cm  | Vä/Hö |
| 28558    | Kort   | Blå   | Small   | <17 cm | Vä/Hö |
| 28558    | Kort   | Blå   | Large   | >17 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled



**Mått:** Omkrets handled.



**Mått 1:** Omkrets handled

**Mått 2:** Handflatsmått

## Tumortos lång

Mjuk, elastisk tumortos i neoprene som skyddar och avlastar tummen samt ger värme. Finns i två längder. Denna modell som är lång ger ett lätt stöd för handleden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

**Användningsområden:** Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tumme och handled.

**Övrigt:** Ortosens längd på tummens radialsida är 12,5 cm.

| Art. nr. | Modell | Färg | Storlek    | Vä/Hö |
|----------|--------|------|------------|-------|
| 28559    | Lång   | Blå  | En storlek | Vä/Hö |

## SELECTION® tumortos Barn

Mjuk och skön tumortos avsedd för barn. SELECTION® materialet är tunt, smidigt och låter huden andas. Ortosen är avsedd att guida hand och handled till en funktionell position, för att lindra smärta vid inflammationer och reumatiska tillstånd. Ortosen kan också användas för att reducera spasticitet vid neurologiska tillstånd i hand och handled. Tumgreppet är justerbart och kanterna kan trimmas vid behov.

**Användningsområden:** Positionering av handen efter Brakialplexus neuropatier (BPN), Spastisk hand vid Cerebral Pares. Arthrogryposis. Reumatiska sjukdomar.

**Övrigt:** För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på tummens radialsida är 9 cm (storlek M).

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Mått 1        | Mått 2   | Vä/Hö |
|----------|-------|----------|---------------|----------|-------|
| 35300    | Svart | XX-Small | 8,5 - 11,5 cm | 5 - 6 cm | Vä/Hö |
| 35300    | Svart | X-Small  | 10 - 12,5 cm  | 6 - 7 cm | Vä/Hö |
| 35300    | Svart | Small    | 11,5 - 14 cm  | 7 - 8 cm | Vä/Hö |
| 35300    | Svart | Medium   | 12 - 15,5 cm  | 8 - 9 cm | Vä/Hö |
| 35300    | Svart | Large    | 14 - 16,5 cm  | 8 - 9 cm | Vä/Hö |

## SELECTION® tumortos Soft

Smidig och elastisk tumortos som avlastar tummens leder och ger ett lätt stöd. SELECTION® tumortos Soft är tillverkad av ett smidigt, modernt och följamt material som andas och känns behagligt mot huden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

**Användningsområden:** Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig CMC-I artros.

**Övrigt:** För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm (storlek M).

| Art. nr. | Modell | Färg  | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|--------|-------|---------|----------|-------|
| 35200    | Soft   | Svart | X-Small | < 13 cm  | Vä/Hö |
| 35200    | Soft   | Svart | Small   | 13-15 cm | Vä/Hö |
| 35200    | Soft   | Svart | Medium  | 15-17 cm | Vä/Hö |
| 35200    | Soft   | Svart | Large   | 17-20 cm | Vä/Hö |
| 35200    | Soft   | Svart | X-Large | >20 cm   | Vä/Hö |
| 35201    | Soft   | Beige | X-Small | < 13 cm  | Vä/Hö |
| 35201    | Soft   | Beige | Small   | 13-15 cm | Vä/Hö |
| 35201    | Soft   | Beige | Medium  | 15-17 cm | Vä/Hö |
| 35201    | Soft   | Beige | Large   | 17-20 cm | Vä/Hö |
| 35201    | Soft   | Beige | X-Large | >20 cm   | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled

## SELECTION® tumortos Rigid

Smidig och elastisk tumortos med extra stabilitet runt tummens strukturer. Ger avlastning för tummens leder och ett stabilt stöd. Ger även stöd och skydd för tummens MCP-led. SELECTION® tumortos Rigid är tillverkad av ett smidigt, modernt och följamt material som andas och känns behagligt mot huden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.


**Användningsområden:** Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig till moderat CMC-I artros.

**Övrigt:** För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm (storlek M).

| Art. nr. | Modell | Färg  | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|--------|-------|---------|----------|-------|
| 35202    | Rigid  | Svart | X-Small | < 13 cm  | Vä/Hö |
| 35202    | Rigid  | Svart | Small   | 13-15 cm | Vä/Hö |
| 35202    | Rigid  | Svart | Medium  | 15-17cm  | Vä/Hö |
| 35202    | Rigid  | Svart | Large   | 17-20 cm | Vä/Hö |
| 35202    | Rigid  | Svart | X-Large | >20 cm   | Vä/Hö |
| 35203    | Rigid  | Beige | X-Small | < 13 cm  | Vä/Hö |
| 35203    | Rigid  | Beige | Small   | 13-15 cm | Vä/Hö |
| 35203    | Rigid  | Beige | Medium  | 15-17 cm | Vä/Hö |
| 35203    | Rigid  | Beige | Large   | 17-20 cm | Vä/Hö |
| 35203    | Rigid  | Beige | X-Large | >20 cm   | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled

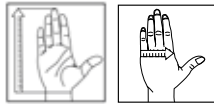

**Mått 1:** 2-5 MCP

**Mått 2:** Handens längd från handled till fingertoppar

## SOT Tumortor

SOT Tumortor är en anatomiskt formad vilootor för tumme och handflata. Ortosen positionerar tummen i ett optimalt viloläge. Den är utformad för att begränsa rörelserna i tummens CMC- och MCP-led, ge stöd för handens valv samt positionera tummens leder och muskler i ett bekvämt viloläge. Ortosen har en justerbar aluminiumkärna som enkelt kan anpassas och omformas till en individuell passform. Ortosen kan justeras efterhand som kontrakturen förändras. Den smidiga designen gör den till ett utmärkt alternativ till specialtillverkade vilootorser. Läs mer om anpassning och omformning i broschyren Tips & Tricks.

När extra stöd för handleden behövs kan SOT Tumortor användas tillsammans med en handledsortor. Vision 46029 och Selection 35207 är utmärkta ortoser för att kombinera med SOT Tumortor.

**Användningsområden:** SOT Tumortor är avsedd att användas vid artros, reumatoid artrit, adduktionskontrakturer i tummen och vid överbelastningsskador.

**Övrigt:** SOT Tumortor går att tvätta i 40 grader.

| Art. nr. | Modell         | Storlek | Mått 1   | Mått 2    | Vä/Hö |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|-------|
| 28720    | SOT Tumortor   | Small   | ≤ 7,5 cm | ≤ 18,5 cm | Vä/Hö |
| 28720    | SOT Tumortor   | Medium  | ≤ 8,5 cm | ≤ 20 cm   | Vä/Hö |
| 28720    | SOT Tumortor   | Large   | ≤ 9 cm   | ≤ 21 cm   | Vä/Hö |
| 28721    | Extra överdrag | Small   | Vä/Hö    |           |       |
| 28721    | Extra överdrag | Medium  | Vä/Hö    |           |       |
| 28721    | Extra överdrag | Large   | Vä/Hö    |           |       |



## Vission tumortos kort med skena

En tumortos med plastskena som ger stöd för tummen och kringliggande strukturer. Uppbyggnaden av det underliggande materialet gör att skenan inte trycker mot leder eller muskulatur. Materialet är ett stadigt och slitstarkt resårmaterial som har en mjuk och bekväm insida. Öppet justerbart tumgrepp.

**Användningsområden:** Instabilitet i tummens leder (CMC -eller MCP-leden), inflammationer, förslitningsskador, belastningsrelaterade problem samt vid reumatiska förändringar.

**Övrigt:** Ortosens längd på tummens radialsida är 13 cm (storlek M).

| Art. nr. | Modell    | Färg  | Storlek  | Mått       | Vä/Hö |
|----------|-----------|-------|----------|------------|-------|
| 46028    | Med skena | Svart | XX-Small | 11 - 12 cm | Vä/Hö |
| 46028    | Med skena | Svart | X-Small  | 12 - 13 cm | Vä/Hö |
| 46028    | Med skena | Svart | Small    | 13 - 14 cm | Vä/Hö |
| 46028    | Med skena | Svart | Medium   | 14 - 16 cm | Vä/Hö |
| 46028    | Med skena | Svart | Large    | 16 - 19 cm | Vä/Hö |
| 46028    | Med skena | Svart | X-Large  | 19 - 22 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled

## Vission tumortos lång med skena

En smidig, elastisk tumortos i lång modell. Ortosen har en uttagbar metallskena som ger stöd för tummen och kringliggande strukturer samt ett lätt stöd för handleden. Ortosen är avsedd att begränsa rörelse i CMC och MCP I lederna och för att positionera tummen i en funktionell position. Den är tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Öppet justerbart tumgrepp och den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand.

**Användningsområden:** Osteoartros och/eller instabilitet i CMC och MCP I, Triggerfinger, Morbus de Quervain.

**Övrigt:** Ortosens längd på tummens radialsida är 16 cm (storlek M).

| Art. nr. | Modell         | Färg  | Storlek  | Mått       | Vä/Hö |
|----------|----------------|-------|----------|------------|-------|
| 46023    | Lång med skena | Svart | XX-Small | 11 - 12 cm | Vä/Hö |
| 46023    | Lång med skena | Svart | X-Small  | 12 - 13 cm | Vä/Hö |
| 46023    | Lång med skena | Svart | Small    | 13 - 14 cm | Vä/Hö |
| 46023    | Lång med skena | Svart | Medium   | 14 - 16 cm | Vä/Hö |
| 46023    | Lång med skena | Svart | Large    | 16 - 19 cm | Vä/Hö |
| 46023    | Lång med skena | Svart | X-Large  | 19 - 22 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled



**Mått:** Omkrets handled

## Vission tumortos formbar

Tumortos avsedd att begränsa rörelse i CMC och MCPI lederna och för att positionera tummen i en funktionell position genom ett individuellt format tumstöd. Termoplastskenan, som är perforerad, är placerad i en ficka. Den värms upp och formas lättast genom att doppa hela ortosen i ett vattenbad med 70 – 72° vatten. Ortosen formas på patienten för en perfekt anatomisk passform.

**Användningsområden:** Lätt till moderat instabilitet i CMC och MCPI, ligamentskador, Morbus de Quervain, inflammationer, degenerativa sjukdomar och trauma.

| Art. nr. | Modell           | Färg  | Storlek | Mått       | Vä/Hö |
|----------|------------------|-------|---------|------------|-------|
| 46024    | Tumortos formbar | Svart | X-Small | 12 - 13 cm | Vä/Hö |
| 46024    | Tumortos formbar | Svart | Small   | 13 - 14 cm | Vä/Hö |
| 46024    | Tumortos formbar | Svart | Medium  | 14 - 16 cm | Vä/Hö |
| 46024    | Tumortos formbar | Svart | Large   | 16 - 19 cm | Vä/Hö |
| 46024    | Tumortos formbar | Svart | X-Large | 19 - 22 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled

## Basic tumortos kort och lång

Ortos med plastskenor som ger stöd för tummen och kringliggande strukturer. Materialet är klippt på skrädden för bästa passform och elasticitet. Öppet justerbart tumgrepp. Den långa modellen är 2 cm längre och ger stöd även för handleden. Kan kombineras med handledsband 27448 för extra stabilitet.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

**Övrigt:** Basic tumortos kort - ortosens längd på radialsidan är 12,5 cm. Basic tumortos lång - ortosens längd på radialsidan är 15 cm.

| Art. nr. | Modell | Färg | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|--------|------|---------|----------|-------|
| 27443    | Kort   | Blå  | X-Small | < 12 cm  | Vä/Hö |
| 27443    | Kort   | Blå  | Small   | 11-14 cm | Vä/Hö |
| 27443    | Kort   | Blå  | Medium  | 14-17 cm | Vä/Hö |
| 27443    | Kort   | Blå  | Large   | 17-20 cm | Vä/Hö |
| 27443    | Kort   | Blå  | X-Large | 20-23 cm | Vä/Hö |
| 27444    | Lång   | Blå  | X-Small | < 12 cm  | Vä/Hö |
| 27444    | Lång   | Blå  | Small   | 11-14 cm | Vä/Hö |
| 27444    | Lång   | Blå  | Medium  | 14-17 cm | Vä/Hö |
| 27444    | Lång   | Blå  | Large   | 17-20 cm | Vä/Hö |
| 27444    | Lång   | Blå  | X-Large | 20-23 cm | Vä/Hö |

## Tumortos Rigid Airmed

Tumbasortos avsedd för posttraumatisk immobilisering av tummens MCP-led. Ortosen ger stöd och avlastar trapezio-metakarpalleden. Hjälper patienten att begränsa rörelser som kan orsaka skada eller smärta. Ortosen har insydda metallskenor som går att forma efter behov. Ortosen är mjuk och behaglig att bära. Är försedd med ventilationshål.

**Användningsområden:** Posttraumatisk immobilisering av tummens MCP-led, karpaltunnelsyndrom och tendinit.

**Övrigt:** Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm (storlek S).

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Mått       | Vä/Hö  |
|----------|-------|---------|------------|--------|
| 28550    | Beige | Small   | 14 - 18 cm | Bilat. |
| 28550    | Beige | Large   | 18 - 22 cm | Bilat. |
| 28551    | Grå   | Small   | 14 - 18 cm | Bilat. |
| 28551    | Grå   | Large   | 18 - 22 cm | Bilat. |



**Mått:** Omkrets handled

## Sporlastic tumortos

Stabil tumortos framställd av plastmaterial för immobilisering av tummen i funktionställning. Påsytt kardborrband ger en flexibel förslutning. Stockinette i high-tech fiber som suger upp fukt och ger mjuk polstringseffekt medföljer.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt, postoperativt och vid instabilitet.

| Art. nr. | Färg         | Storlek | Mått     | Vä/Hö  |
|----------|--------------|---------|----------|--------|
| 28545    | Beige        | Small   | <17 cm   | Vä/Hö  |
| 28545    | Beige        | Medium  | 17-19 cm | Vä/Hö  |
| 28545    | Beige        | Large   | >19 cm   | Vä/Hö  |
| 28547    | Innerhandske | Small   |          | Bilat. |
| 28547    | Innerhandske | Medium  |          | Bilat. |
| 28547    | Innerhandske | Large   |          | Bilat. |



**Mått:** Omkrets handled

## Lätta handledsortos

Handledsstöd i neoprene som ger värme och stöd till handleden. Fästs över tummen för att hållas på plats. Kan klippas till önskad passform.

**Användningsområden:** Reumatologiska sjukdomar och avlastning.

| Art. nr. | Färg | Storlek    | Vä/Hö  |
|----------|------|------------|--------|
| 28230    | Blå  | En storlek | Bilat. |





**Mått:** Mått tas runt handleden

## ELEMENTS handled

ELEMENTS handled är avsedd för behandling av lindriga och tillfälliga besvär som t.ex. smärta, inflammation och förslitningsskador. Bandaget begränsar rörligheten i handleden genom den inbyggda skenan. Det håller också handleden varm.

**Användningsområden:** Lindriga och tillfälliga besvär som t.ex. smärta, inflammation och förslitningsskador.

**Kontraindikationer:** Kraftiga ödem, kraftig svullnad.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 17 cm.

| Art. nr. | Färg        | Storlek | Mått       | Vä/Hö |
|----------|-------------|---------|------------|-------|
| 34103    | Beige/Svart | Small   | 11 - 14 cm | Vä/Hö |
| 34103    | Beige/Svart | Medium  | 14 - 17 cm | Vä/Hö |
| 34103    | Beige/Svart | Large   | 17 - 20 cm | Vä/Hö |
| 34103    | Beige/Svart | X-Large | 20 - 23 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled.

## ELEMENTS Bromsa handled

ELEMENTS bromsa handled har till uppgift att hindra dorsalextension av handleden för att minska smärta vid bl.a. tennisarmbåge. Mjuka plastskenor på handryggen.

**Användningsområden:** Hindra dorsalextension av handleden för att minska smärta vid bl.a. tennisarmbåge.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 15 cm.

| Art. nr. | Färg        | Storlek | Mått       | Vä/Hö |
|----------|-------------|---------|------------|-------|
| 34107    | Beige/Svart | Small   | 11 - 14 cm | Vä/Hö |
| 34107    | Beige/Svart | Medium  | 14 - 17 cm | Vä/Hö |
| 34107    | Beige/Svart | Large   | 17 - 20 cm | Vä/Hö |
| 34107    | Beige/Svart | X-Large | 20 - 23 cm | Vä/Hö |

## Bromsa handledsortos

Handledsortos med två flexibla plasticskenor dorsalt som tillsammans med det kraftiga resårbandet begränsar dorsalflexion av handleden. Motståndet justeras enkelt genom att använda en eller båda plasticskenorna och att placera resårbandet mer proximalt eller distalt. Ingen skena volart som påverkar handens övriga funktioner.

**Användningsområden:** Avlastning av extensorsenorna i samband med lateral epikondylit.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 15 cm.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|------|---------|----------|-------|
| 28240    | Blå  | Small   | 11-14 cm | Vä/Hö |
| 28240    | Blå  | Medium  | 14-17 cm | Vä/Hö |
| 28240    | Blå  | Large   | 17-20 cm | Vä/Hö |
| 28240    | Blå  | X-Large | 20-23 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled

## SELECTION® Bromsa handled

Selection bromsa handled är avsedd att begränsa rörelsen i handleden för att avlasta handextensorerna, stödja handleden och minska smärta vid bl.a. tennisarmbåge. Ortosen har mjuka plasticskenor på handryggen, justerbar band för tummen och SELECTION snörstängning. Stödet kan anpassas genom att välja att ha båda skenorna eller bara en i fickan. Snörstängningen gör att ortosen bättre sluter om handen och ger en bättre passform.

**Användningsområden:** Lateral epikondylit, överrörlighet, reumatiska problem, ospecificerad smärta.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 15 cm.

| Art. nr. | Modell           | Färg  | Storlek | Mått       | Vä/Hö |
|----------|------------------|-------|---------|------------|-------|
| 35208    | Selection Bromsa | Svart | X-Small | <11 cm     | Vä/Hö |
| 35208    | Selection Bromsa | Svart | Small   | 11-14 cm   | Vä/Hö |
| 35208    | Selection Bromsa | Svart | Medium  | 14 - 17 cm | Vä/Hö |
| 35208    | Selection Bromsa | Svart | Large   | 17 - 20 cm | Vä/Hö |
| 35208    | Selection Bromsa | Svart | X-Large | 20 - 23 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled



**Mått:** Omkrets handled

## SELECTION® handled kort svart

Smidig, elastisk handledsortos utan skena, tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Ortosen som är kortare än Selection Handledsortos Soft och Rigid ger ett stöd för handleden som inte hindrar rörligheten men ger en lätt kompression. Låsningssystem med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Separat extra band finns att beställa.

**Användningsområden:** Stöder och avlastar handleden efter skada, operation, vid kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Efter ganglionoperationer; vid behov av kompression. Överrörliga leder vid Ehlers-Danlos Syndrom. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

**Övrigt:** För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på volarsidan är 13 cm.

| Art. nr. | Modell          | Färg  | Storlek | Mått       | Vä/Hö |
|----------|-----------------|-------|---------|------------|-------|
| 35222    | Kort utan skena | Svart | X-Small | < 11 cm    | Vä/Hö |
| 35222    | Kort utan skena | Svart | Small   | 11 - 14 cm | Vä/Hö |
| 35222    | Kort utan skena | Svart | Medium  | 14 - 17 cm | Vä/Hö |
| 35222    | Kort utan skena | Svart | Large   | 17 - 20 cm | Vä/Hö |
| 35222    | Kort utan skena | Svart | X-Large | 20 - 23 cm | Vä/Hö |



## SELECTION® handled kort beige

Smidig, elastisk handledsortos utan skena, tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Ortosen som är kortare än Selection Handledsortos Soft och Rigid ger ett stöd för handleden som inte hindrar rörligheten men ger en lätt kompression. Låsningssystem med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Separat extra band finns att beställa.

**Användningsområden:** Stödjer och avlastar handleden efter skada, operation, vid kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Efter ganglionoperationer, vid behov av kompression. Överrörliga leder vid Ehlers-Danlos Syndrom. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

**Övrigt:** För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på volarsidan är 13 cm.

| Art. nr. | Modell          | Färg  | Storlek | Mått       | Vä/Hö |
|----------|-----------------|-------|---------|------------|-------|
| 35223    | Kort utan skena | Beige | X-Small | < 11 cm    | Vä/Hö |
| 35223    | Kort utan skena | Beige | Small   | 11 - 14 cm | Vä/Hö |
| 35223    | Kort utan skena | Beige | Medium  | 14 - 17 cm | Vä/Hö |
| 35223    | Kort utan skena | Beige | Large   | 17 - 20 cm | Vä/Hö |
| 35223    | Kort utan skena | Beige | X-Large | 20 - 23 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled



**Mått:** Omkrets handled

## Vission handledsortos kort

En något kortare handledsortos, tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Modellen är helt öppen och enkel att ta på och av. Ortosen har en god anatomisk passform inne i handen, över handryggen och runt tummens muskulatur. Denna modell är utan skena volart. Öppet justerbart tumgrepp.

**Användningsområden:** Stödjer och avlastar handleden efter skada, operation, avgipsning, överrörlighet, reumatiska problem, vid kroniska smärttillstånd, ledförlitning eller överbelastningsbesvär. Kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 13 cm.

| Art. nr. | Modell          | Färg  | Storlek  | Mått       | Vä/Hö |
|----------|-----------------|-------|----------|------------|-------|
| 46030    | Kort utan skena | Svart | XX-Small | 11 - 12 cm | Vä/Hö |
| 46030    | Kort utan skena | Svart | X-Small  | 12 - 13 cm | Vä/Hö |
| 46030    | Kort utan skena | Svart | Small    | 13 - 14 cm | Vä/Hö |
| 46030    | Kort utan skena | Svart | Medium   | 14 - 16 cm | Vä/Hö |
| 46030    | Kort utan skena | Svart | Large    | 16 - 19 cm | Vä/Hö |
| 46030    | Kort utan skena | Svart | X-Large  | 19 - 22 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled

## Gripa handledsortos

Ortosen ger effektivt stöd för handleden vid tunga eller monotona arbetsmoment. Ett kraftigt resårband stöder handleden. "Tuff Grip" inne i handflatan säkrar ett bra grepp om olika verktyg. Framtagen tillsammans med montörer inom verkstadsindustrin

**Användningsområden:** Avlastning för handflatan samt handleden, preventivt vid t.ex. monteringsarbeten

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 18 cm.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|------|---------|----------|-------|
| 28210    | Blå  | Small   | 11-14 cm | Vä/Hö |
| 28210    | Blå  | Medium  | 14-17 cm | Vä/Hö |
| 28210    | Blå  | Large   | 17-20 cm | Vä/Hö |
| 28210    | Blå  | X-Large | 20-23 cm | Vä/Hö |

## SELECTION® handled Barn

Mjuk och skön handledsortos avsedd för barn. Ortosen som är stabil har en aluminiumskena på volarsidan och två dragband för en enkel och steglös låsning. Skenan är uttagbara. SELECTION® materialet är tunt, smidigt och låter huden andas. Tumbanden är justerbara och kanterna är mjuka. Färgdetaljerna är valda för att tilltala barnen.

**Användningsområden:** Reumatiska problem. Neurologiska skador där handleden behöver stöd och/eller korrigerande. Efter avslutad gipsbehandling. Inflammationer.

**Övrigt:** För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Mått 1       | Mått 2 | Mått 3  | Vä/Hö |
|----------|-------|----------|--------------|--------|---------|-------|
| 35305    | Svart | XX-Small | 8,5 - 11 cm  | 5-6 cm | 11 cm   | Vä/Hö |
| 35305    | Svart | X-Small  | 10 - 12,5 cm | 6-7 cm | 13,5 cm | Vä/Hö |
| 35305    | Svart | Small    | 11,5 - 14 cm | 7-8 cm | 14,5 cm | Vä/Hö |
| 35305    | Svart | Medium   | 12 - 15,5 cm | 8-9 cm | 17 cm   | Vä/Hö |
| 35305    | Svart | Large    | 14 - 16,5 cm | 8-9 cm | 17,5 cm | Vä/Hö |



**Mått 1:** Omkrets handled

**Mått 2:** Handflatsmått

**Mått 3:** Ortosens längd på volarsidan

## SELECTION® Open Wrist Barn

En stabil och enkel handledsortos i det sköna SELECTION® materialet. Ortosen har en formad aluminiumskena på volarsidan. Den har två tumband, ett som fästs runt tummen och ett som fästs på handryggen för att hålla tillbaka tummen så den inte faller in i handen. Selection Open Wrist Barn är avsedd att immobilisera CMC-led och handled i syfte att minska smärta, vägleda handleden till ett neutralt läge och vid behov stödja en handled efter trauma/operation.

**Användningsområden:** Reumatoid artrit, CP, efter trauma/operation.

| Art. nr. | Modell | Färg  | Storlek | Mått 1       | Mått 2   | Mått 3  | Vä/Hö |
|----------|--------|-------|---------|--------------|----------|---------|-------|
| 35306    | Barn   | Svart | Small   | 11,5 - 14 cm | 7 - 8 cm | 14,5 cm | Vä/Hö |
| 35306    | Barn   | Svart | Medium  | 12 - 15,5 cm | 8 - 9 cm | 17 cm   | Vä/Hö |
| 35306    | Barn   | Svart | Large   | 14 - 16,5 cm | 8 - 9 cm | 17,5 cm | Vä/Hö |



**Mått 1:** Omkrets handled

**Mått 2:** Handflatsmått

**Mått 3:** Ortosens längd på volarsidan



**Mått:** Omkrets handled

## SELECTION® Open Wrist

En stabil och enkel handledsortos i det sköna SELECTION® materialet. Ortosen har en formad plastskena på volarsidan och en smal plastskena dorsalt. Ortosen har ett stabiliserande dragrunt-band och tas enkelt på med en hand. SELECTION Open Wrist är avsedd att användas då handleden behöver avlastning.

**Användningsområden:** Inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

**Övrigt:** För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia.

Ortosens längd på volarsidan är 18 cm. Extra volarskena kan beställas med 10 st i en förpackning.

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Mått       | Vä/Hö |
|----------|-------|---------|------------|-------|
| 35207    | Svart | X-Small | < 11 cm    | Vä/Hö |
| 35207    | Svart | Small   | 11 - 14 cm | Vä/Hö |
| 35207    | Svart | Medium  | 14 - 17 cm | Vä/Hö |
| 35207    | Svart | Large   | 17 - 20 cm | Vä/Hö |
| 35207    | Svart | X-Large | 20 - 23 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets MCP 2-5

## SELECTION® Ulnardeviationsortos

SELECTION® Ulnardeviationsortos är avsedd att förbättra fingrarnas position för att ge en bättre handfunktion och därmed ett funktionellt grepp. Ortosen avlastar strukturerna samtidigt som den har en smärtlindrande effekt. Den ger stöd åt MCP- och PIP lederna, samtidigt som den förbättrar fingerextensorernas dragriktning. Ortosen är designad så att materialet går långt ut på ulnarsidan över 5te MCP-leden, för att ge bästa möjliga stöd, motverka dragriktningen och fördela trycket. Det går att fästa kardborrebanden var som helst i materialet vilket innebär att det inte finns några begränsningar var banden placeras för att uppnå den optimala dragriktningen.

Eftersom ortosen är så tunn och smidig kan den enkelt kombineras med en handledsortos när ytterligare stöd behövs. Specialdesignade förstärkningar av lågtemperaturplast (non-coated) kan fästas direkt mot ortosen.

**Användningsområden:** För patienter med artros. Ulnardeviation kan förekomma vid inflammatoriska och degenerativa sjukdomar såsom RA. Selection Ulnardeviation kan även användas vid överrörliga leder och vid svag muskulatur med syfte att erbjuda mer stadga. Skall inte användas i samband med fixerade kontrakturer.

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|-------|---------|----------|-------|
| 35218    | Svart | X-Small | 14-17 cm | Vä/Hö |
| 35218    | Svart | Small   | 17-20 cm | Vä/Hö |
| 35218    | Svart | Medium  | 20-23 cm | Vä/Hö |
| 35218    | Svart | Large   | 23-27 cm | Vä/Hö |

NYHET!

## SELECTION® Radialis Tumdel

Textil tumdel som kombineras med SELECTION® Handledsortoser 35204, 35205 och 35209. Tumdelen kan med fördel även kombineras med SELECTION® Radialis Fingerdel. Både SELECTION® Radialis Tumdel och Fingerdel är avsedda att användas vid Radialis pares (dropphand som orsakas av skada på radialisnerven) för att möjliggöra en funktionell greppförmåga under tiden nerven återhämtar sig.

**Användningsområden:** Radialis pares

| Art. nr. | Modell          | Färg  | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|-----------------|-------|---------|----------|-------|
| 35216    | Radialis Tumdel | Svart | Small   | 3 - 4 cm | Vä/Hö |
| 35216    | Radialis Tumdel | Svart | Large   | 5 - 6 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Längd ledcentrum MCP I – ledcentrum IPI.

## SELECTION® Radialis Fingerdel

Textil Fingerdel som kombineras med SELECTION® Handledsortoser 35204, 35205 och 35209. Fingerdel kan med fördel även kombineras med SELECTION® Radialis Tumdel. Både SELECTION® Radialis Tumdel och Fingerdel är avsedda att användas vid Radialis pares (dropphand som orsakas av skada på radialisnerven) för att möjliggöra en funktionell greppförmåga under tiden nerven återhämtar sig.

**Användningsområden:** Radialis pares.

| Art. nr. | Modell             | Färg  | Storlek | Mått       | Vä/Hö |
|----------|--------------------|-------|---------|------------|-------|
| 35217    | Radialis Fingerdel | Svart | Small   | 17 - 20 cm | Vä/Hö |
| 35217    | Radialis Fingerdel | Svart | Medium  | 20 - 23 cm | Vä/Hö |
| 35217    | Radialis Fingerdel | Svart | Large   | 23 - 27 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets MCP 2-5



**Mått 1:** Omkrets handled

**Mått 2:** Underarmsmått

## SELECTION® handledsortos Soft

Smidig, elastisk handledsortos tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. SELECTION® Soft har en formad plastskena på volarsidan och en mjukare rak plastskena på dorsalsidan. Skenorna är uttagbara. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax, för optimal passform.

**Användningsområden:** Då handleden behöver avlastning t ex vid inflammationer; arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

**Övrigt:** För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på volarsidan är 18 cm. Plus-storlekarna har extra vidd i underarmsdelen. Extra volarskena kan beställas med 10 st i en förpackning.

| Art. nr. | Modell | Färg  | Storlek       | Mått 1     | Mått 2     | Vä/Hö |
|----------|--------|-------|---------------|------------|------------|-------|
| 35204    | Soft   | Svart | X-Small       | < 11 cm    |            | Vä/Hö |
| 35204    | Soft   | Svart | Small         | 11 - 14 cm |            | Vä/Hö |
| 35204    | Soft   | Svart | Medium        | 14 - 17 cm |            | Vä/Hö |
| 35204    | Soft   | Svart | Large         | 17 - 20 cm |            | Vä/Hö |
| 35204    | Soft   | Svart | X-Large       | 20 - 23 cm |            | Vä/Hö |
| 35204    | Soft   | Svart | XX-Large      | 23 - 26 cm |            | Vä/Hö |
| 35204    | Soft   | Svart | Small Plus    | 11 - 14 cm | 18 - 21 cm | Vä/Hö |
| 35204    | Soft   | Svart | Medium Plus   | 14 - 17 cm | 21 - 24 cm | Vä/Hö |
| 35204    | Soft   | Svart | Large Plus    | 17 - 20 cm | 24 - 27 cm | Vä/Hö |
| 35204    | Soft   | Svart | X-Large Plus  | 20 - 23 cm | 27 - 30 cm | Vä/Hö |
| 35204    | Soft   | Svart | XX-Large Plus | 23 - 26 cm | 30 - 33 cm | Vä/Hö |
| 35205    | Soft   | Beige | X-Small       | < 11 cm    |            | Vä/Hö |
| 35205    | Soft   | Beige | Small         | 11 - 14 cm |            | Vä/Hö |
| 35205    | Soft   | Beige | Medium        | 14 - 17 cm |            | Vä/Hö |
| 35205    | Soft   | Beige | Large         | 17 - 20 cm |            | Vä/Hö |
| 35205    | Soft   | Beige | X-Large       | 20 - 23 cm |            | Vä/Hö |
| 35205    | Soft   | Beige | XX-Large      | 23 - 26 cm |            | Vä/Hö |
| 35205    | Soft   | Beige | Small Plus    | 11 - 14 cm | 18 - 21 cm | Vä/Hö |
| 35205    | Soft   | Beige | Medium Plus   | 14 - 17 cm | 21 - 24 cm | Vä/Hö |
| 35205    | Soft   | Beige | Large Plus    | 17 - 20 cm | 24 - 27 cm | Vä/Hö |
| 35205    | Soft   | Beige | X-Large Plus  | 20 - 23 cm | 27 - 30 cm | Vä/Hö |
| 35205    | Soft   | Beige | XX-Large Plus | 23 - 26 cm | 30 - 33 cm | Vä/Hö |



## SELECTION® Multiopen

SELECTION® Multiopen är en medium-stabil handledsortos med dubbel låsningsfunktion. Den kan öppnas upp helt och sen löst förslutas med kardborrlåsning och spännas åt med snörning. Användaren kan själv välja om den skall öppnas helt varje gång ortosen tas på/av eller om bara snörningsfunktionen skall användas. Den har en låg skärning i handen för att följa handens naturliga böjveck och urtagningen runt tummen låter thenarmuskulaturen arbeta fritt. Den tvådelade snörlåsningen i kombination med kardborrlåsningen möjliggör anpassning av vidden vid bredare underarm. Eftersom snörningen kommer från ulnarsidan minskar risken att tummen positioneras felaktigt. Reglerbart tumband som utgår volart. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Tillverkad i det luftiga och bekväma SELECTION®-materialet med alla de funktioner som detta medför. Ortosen är 22 cm lang, dvs 4 cm längre än en SELECTION® Soft 35204. Den har en formbar aluminiumskena på volarsiden som är uttagbar.

**Användningsområden:** Efter läkt radiusfraktur, mjukdelsskador, inflammationer, förslitningsskador, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

**Kontraindikationer:** Ska inte användas vid oläkta frakturer.



**Mått:** Omkrets handled

| Art. nr. | Modell    | Färg  | Storlek  | Mått       | Vä/Hö |
|----------|-----------|-------|----------|------------|-------|
| 35209    | Multiopen | Svart | X-Small  | <11 cm     | Vä/Hö |
| 35209    | Multiopen | Svart | Small    | 11 - 14 cm | Vä/Hö |
| 35209    | Multiopen | Svart | Medium   | 14 - 17 cm | Vä/Hö |
| 35209    | Multiopen | Svart | Large    | 17 - 20 cm | Vä/Hö |
| 35209    | Multiopen | Svart | X-Large  | 20 - 23 cm | Vä/Hö |
| 35209    | Multiopen | Svart | XX-Large | 23 - 26 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled

## Vission handledsortos med skena

En handledsortos i standardmodell tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Modellen är helt öppen och enkel att ta på och av. Ortosen har en god anatomisk passform inne i handen, över handryggen och runt tummens muskulatur. Den ger ett stabilt stöd och har en formbar plastskena volart. Öppet justerbart tumgrepp.

**Användningsområden:** Inflammationer; arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 18,5 cm.

| Art. nr. | Modell    | Färg  | Storlek  | Mått       | Vä/Hö |
|----------|-----------|-------|----------|------------|-------|
| 46029    | Med skena | Svart | XX-Small | 11 - 12 cm | Vä/Hö |
| 46029    | Med skena | Svart | X-Small  | 12 - 13 cm | Vä/Hö |
| 46029    | Med skena | Svart | Small    | 13 - 14 cm | Vä/Hö |
| 46029    | Med skena | Svart | Medium   | 14 - 16 cm | Vä/Hö |
| 46029    | Med skena | Svart | Large    | 16 - 19 cm | Vä/Hö |
| 46029    | Med skena | Svart | X-Large  | 19 - 22 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled

## Basic handledsortos kort och lång

Enkel handledsortos i kort och lång modell med kardborrlåsning som ger bra stöd och kompression. Öppna modeller som är lätta att ta på och av. Uttagbar och formbar aluminiumskena volart. Standardmodell med hook som fästpunkt och loop som förslutning ger flexibilitet vid storleksval. Kort modell kan kompletteras med extra band 27448 för extra stabilitet. Den långa modellen har ett monterat elastiskt band runt handleden.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

**Övrigt:** Basic handledsortos kort - Ortosens längd på volarsidan är 18cm. Basic handledsortos lång - Ortosens längd på volarsidan är 21 cm.

| Art. nr. | Modell | Färg | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|--------|------|---------|----------|-------|
| 27441    | Kort   | Blå  | X-Small | < 12 cm  | Vä/Hö |
| 27441    | Kort   | Blå  | Small   | 11-14 cm | Vä/Hö |
| 27441    | Kort   | Blå  | Medium  | 14-17 cm | Vä/Hö |
| 27441    | Kort   | Blå  | Large   | 17-20 cm | Vä/Hö |
| 27441    | Kort   | Blå  | X-Large | 20-23 cm | Vä/Hö |
| 27445    | Lång   | Blå  | X-Small | < 12 cm  | Vä/Hö |
| 27445    | Lång   | Blå  | Small   | 11-14 cm | Vä/Hö |
| 27445    | Lång   | Blå  | Medium  | 14-17 cm | Vä/Hö |
| 27445    | Lång   | Blå  | Large   | 17-20 cm | Vä/Hö |
| 27445    | Lång   | Blå  | X-Large | 20-23 cm | Vä/Hö |

## Basic handledsortos

Handledsortos med integrerat band som ger ett extra bra stöd för handleden. Det breda proximala bandet med stor förslutningsyta ger flexibilitet vid storleksval och underlättar vid på- och avtagning. Öppen modell som gör ortosen lätt att ta på och av. Uttagbar och formbar aluminiumska volart. Högt skuren vid lillfingersidan för ulnart stöd.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 18 cm.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|------|---------|----------|-------|
| 27446    | Blå  | X-Small | < 12 cm  | Vä/Hö |
| 27446    | Blå  | Small   | 11-14 cm | Vä/Hö |
| 27446    | Blå  | Medium  | 14-17 cm | Vä/Hö |
| 27446    | Blå  | Large   | 17-20 cm | Vä/Hö |
| 27446    | Blå  | X-Large | 20-23 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled

## Bisca® handledsortos

Modellen är speciellt lämplig för reumatiker. Ortosen är fodrad med bomullsmaterial som är behagligt mot huden. Det integrerade bandet i kombination med den uttagbara och formbara aluminiumskenan ger ett bra stöd.

**Användningsområden:** Reumatologiska sjukdomar och avlastning.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 19 cm.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|------|---------|----------|-------|
| 28042    | Blå  | Small   | 11-14 cm | Vä/Hö |
| 28042    | Blå  | Medium  | 14-17 cm | Vä/Hö |
| 28042    | Blå  | Large   | 17-20 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled

## Elcross® Carpus Flexi handledsortos

En av de mest populära ortoserna till reumatiker. Ortosen är fodrad med bomull som är behaglig mot huden. Snörsystemet underlättar vid förslutning och justering. Lämpar sig väl till patienter med svag handfunktion. Passformen är flexibel och passar både en bred och smal underarm. Uttagbar och formbar aluminiumska. Uttagbar och formbar aluminiumska.

**Användningsområden:** Reumatologiska sjukdomar och avlastning.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 18 cm.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|------|---------|----------|-------|
| 28149    | Blå  | Small   | 11-14 cm | Vä/Hö |
| 28149    | Blå  | Medium  | 14-17 cm | Vä/Hö |
| 28149    | Blå  | Large   | 17-20 cm | Vä/Hö |
| 28149    | Blå  | X-Large | 20-23 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled



**Mått:** Omkrets handled

## Wrist Lacer™ II handledsortos, kort

Mycket stabil handledsortos med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Skenorna kan tas ut och formas. En kudde på insidan av ortosens strumpa skyddar tumbasens senor vid den distala snörningen. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Låsningssystem med en unik design som ger en jämn kompression genom alla fyra banden. Kompressionen kan enkelt justeras av patienter med ovanlig form på underarm och handled. Snörningen är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp.

**Användningsområden:** Karpaltunnelsyndrom, posttraumatiskt och postoperativt.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 21 cm. Modellen finns i beige; Wrist Lacer kort art.nr. 28570. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia.

| Art. nr. | Modell         | Färg  | Storlek   | Mått     | Vä/Hö |
|----------|----------------|-------|-----------|----------|-------|
| 28578    | Wrist Lacer II | Svart | Pediatric | <12 cm   | Vä/Hö |
| 28578    | Wrist Lacer II | Svart | X-Small   | 12-14 cm | Vä/Hö |
| 28578    | Wrist Lacer II | Svart | Small     | 14-16 cm | Vä/Hö |
| 28578    | Wrist Lacer II | Svart | Medium    | 16-18 cm | Vä/Hö |
| 28578    | Wrist Lacer II | Svart | Large     | 18-20 cm | Vä/Hö |
| 28578    | Wrist Lacer II | Svart | X-Large   | 20-22 cm | Vä/Hö |
| 28578    | Wrist Lacer II | Svart | XX-Large  | 22-25 cm | Vä/Hö |

## Wrist Lacer™ handledsortos, kort

Mycket stabil handledsortos med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Ortosen ger även ett ulnart stöd. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Justerbart tumgrepp. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Volar polstring vid skenan för extra komfort.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 21 cm. Modellen finns i svart; Wrist Lacer II kort art.nr. 28578. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia.

| Art. nr. | Modell | Färg  | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|--------|-------|---------|----------|-------|
| 28570    | Kort   | Beige | X-Small | 12-14 cm | Vä/Hö |
| 28570    | Kort   | Beige | Small   | 14-16 cm | Vä/Hö |
| 28570    | Kort   | Beige | Medium  | 16-18 cm | Vä/Hö |
| 28570    | Kort   | Beige | Large   | 18-20 cm | Vä/Hö |
| 28570    | Kort   | Beige | X-Large | 20-22 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled

## Wrist Lacer™ II handledsortos, lång

Mycket stabil handledsortos i lång modell med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Skenorna kan tas ut och formas. En kudde på insidan av ortosens strumpa skyddar tumbasens sensor vid den distala snörningen. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Låsningssystem med en unik design som ger en jämn kompression genom alla fyra banden. Kompressionen kan enkelt justeras av patienter med ovanlig form på underarm och handled. Snörningen är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 26 cm. Modellen finns i beige; Wrist Lacer lång art.nr. 28572. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia.

| Art. nr. | Modell               | Färg  | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|----------------------|-------|---------|----------|-------|
| 28579    | Wrist Lacer™ II Lång | Svart | X-Small | 12-14 cm | Vä/Hö |
| 28579    | Wrist Lacer™ II Lång | Svart | Small   | 14-16 cm | Vä/Hö |
| 28579    | Wrist Lacer™ II Lång | Svart | Medium  | 16-18 cm | Vä/Hö |
| 28579    | Wrist Lacer™ II Lång | Svart | Large   | 18-20 cm | Vä/Hö |
| 28579    | Wrist Lacer™ II Lång | Svart | X-Large | 20-22 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled



**Mått:** Omkrets handled

## Wrist Lacer™ handledsortos, lång

Mycket stabil handledsortos med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Ortosen ger även ett ulnart stöd. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Justerbart tumgrepp. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Volar polstring vid skenan för extra komfort.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

**Övrigt:** Denna modell är 26 cm lång. Modellen finns i svart; Wrist Lacer II lång art.nr. 28579. svart. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på volarsidan är 26 cm.

| Art. nr. | Modell | Färg  | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|--------|-------|---------|----------|-------|
| 28572    | Lång   | Beige | Small   | 14-16 cm | Vä/Hö |
| 28572    | Lång   | Beige | Medium  | 16-18 cm | Vä/Hö |
| 28572    | Lång   | Beige | Large   | 18-20 cm | Vä/Hö |
| 28572    | Lång   | Beige | X-Large | 20-22 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled

## Tripod™ Wrist Lacer handledsortos, kort

En mycket stabil handledsortos med samma goda komfort och funktionella egenskaper som Wrist Lacer. Tripod har tre formbara aluminiumskenor placerade ulnart, palmart och dorsalt. Dessa skenor samverkar för att hindra radial-ulnar deviation och minimera flexion-extension av handleden. Den ulnara skenan tillsammans med det dubbla snörningssystemet motverkar radial-ulnar deviation. Precis som Wrist Lacer tillåter Tripod en fullt rörlig tumme. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt, postoperativt, radial/ulnardeviation, karpaltunnelsyndrom, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 20 cm.

| Art. nr. | Modell | Färg  | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|--------|-------|---------|----------|-------|
| 28577    | Kort   | Svart | X-Small | 12-14 cm | Vä/Hö |
| 28577    | Kort   | Svart | Small   | 14-16 cm | Vä/Hö |
| 28577    | Kort   | Svart | Medium  | 16-18 cm | Vä/Hö |
| 28577    | Kort   | Svart | Large   | 18-20 cm | Vä/Hö |
| 28577    | Kort   | Svart | X-Large | 20-22 cm | Vä/Hö |



## V-Strap™ handledsortos kort

Påminner om Wrist Lacer men skiljer sig i förslutningssystem och passform. Ortosen följer handens kontur och passar även till en bred hand. Det patenterade V-formade låsningssystemet håller banden på plats i D-ringarna vid på- och avtagning.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 20 cm.

| Art. nr. | Modell | Färg  | Storlek  | Mått     | Vä/Hö |
|----------|--------|-------|----------|----------|-------|
| 28574    | Kort   | Svart | XX-Small | < 12 cm  | Vä/Hö |
| 28574    | Kort   | Svart | X-Small  | 12-14 cm | Vä/Hö |
| 28574    | Kort   | Svart | Small    | 14-16 cm | Vä/Hö |
| 28574    | Kort   | Svart | Medium   | 16-18 cm | Vä/Hö |
| 28574    | Kort   | Svart | Large    | 18-20 cm | Vä/Hö |
| 28574    | Kort   | Svart | X-Large  | 20-22 cm | Vä/Hö |
| 28574    | Kort   | Svart | XX-Large | 22-25 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled

## V-Strap™ handledsortos lång

Påminner om Wrist Lacer med skiljer sig i förslutningssystem och passform. Ortosen följer handens kontur och passar även till en bred hand. Det patenterade V-formade förslutningssystemet håller banden på plats i D-ringarna vid på- och avtagning.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 26 cm.

| Art. nr. | Modell | Färg  | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|--------|-------|---------|----------|-------|
| 28575    | Lång   | Svart | Small   | 14-16 cm | Vä/Hö |
| 28575    | Lång   | Svart | Medium  | 16-18 cm | Vä/Hö |
| 28575    | Lång   | Svart | Large   | 18-20 cm | Vä/Hö |
| 28575    | Lång   | Svart | X-Large | 20-22 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled



**Mått 1:** Omkrets handflata

**Mått 2:** Omkrets underarm



**Mått 1:** Omkrets handflata

**Mått 2:** Omkrets underarm

## CTS Vission

Vission CTS är en nattskena framtagen för att lindra och/eller förhindra nattliga domningar i händerna, som uppstår till följd av karpaltunnelsyndrom.

**Användningsområden:** Karpaltunnelsyndrom

**Övrigt:** Extra band kan köpas separat.

| Art. nr. | Modell        | Storlek | Mått 1 | Mått 2 | Vä/Hö |
|----------|---------------|---------|--------|--------|-------|
| 46050    | Vission CTS   | Small   | <20 cm | <23 cm | Vä/Hö |
| 46050    | Vission CTS   | Large   | >20 cm | >23 cm | Vä/Hö |
| 46051    | Extra bandset |         |        |        |       |

## CTS handledsortos

Nattortos av tunn, perforerad Kydexplast som immobiliserar handleden. Avsedd för patienter med karpaltunnelsyndrom med nattliga domningar och svullnader i händerna.

**Användningsområden:** Karpaltunnelsyndrom

**Övrigt:** Extra band kan köpas separat. Banden finns under kapitel Plaster och Material, art.nr: 25030.

| Art. nr. | Färg    | Storlek | Mått 1 | Mått 2 | Vä/Hö |
|----------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 28542    | Ljusblå | Small   | <20 cm | <23 cm | Vä/Hö |
| 28542    | Ljusblå | Large   | >20 cm | >23 cm | Vä/Hö |

## SELECTION® handledsortos Rigid

Smidig, elastisk handledsortos med tumdel tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Tumdelen ger genom sitt stabilare material ett bra stöd och håller tummen i neutralläge. SELECTION® Rigid har en formad plastskena på volarsidan och en mjukare rak plastskena på dorsalsidan. Skenorna är uttagbara. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax, för optimal passform.

**Användningsområden:** Då handleden och tummen behöver avlastning t ex vid inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

**Övrigt:** För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på volarsidan är 18 cm. Extra volarskena kan beställas med 10 st i en förpackning.

| Art. nr. | Modell | Färg  | Storlek  | Mått       | Vä/Hö |
|----------|--------|-------|----------|------------|-------|
| 35206    | Rigid  | Svart | X-Small  | < 11 cm    | Vä/Hö |
| 35206    | Rigid  | Svart | Small    | 11 - 14 cm | Vä/Hö |
| 35206    | Rigid  | Svart | Medium   | 14 - 17 cm | Vä/Hö |
| 35206    | Rigid  | Svart | Large    | 17 - 20 cm | Vä/Hö |
| 35206    | Rigid  | Svart | X-Large  | 20 - 23 cm | Vä/Hö |
| 35206    | Rigid  | Svart | XX-Large | 23 - 26 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled



**Mått:** Omkrets handled

## Vission handledsortos med tumdel

Smidig, elastisk handledsortos med tumdel tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Ortosen är avsedd att begränsa rörelse i CMC och MCP I lederna och för att positionera tummen i en funktionell position samt begränsa flexion i handleden. Ortosen har en formad plastskena på volarsidan. Tumdelen har ett extra band som ytterligare kan justerbart tumgreppet.

**Användningsområden:** Lätt till moderat instabilitet i CMC och MCP I, ligamentskador, inflammationer, degenerativa sjukdomar, trauma.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 18,5 cm.

| Art. nr. | Modell    | Färg  | Storlek  | Mått       | Vä/Hö |
|----------|-----------|-------|----------|------------|-------|
| 4603 I   | Med tumme | Svart | XX-Small | 11 - 12 cm | Vä/Hö |
| 4603 I   | Med tumme | Svart | X-Small  | 12 - 13 cm | Vä/Hö |
| 4603 I   | Med tumme | Svart | Small    | 13 - 14 cm | Vä/Hö |
| 4603 I   | Med tumme | Svart | Medium   | 14 - 16 cm | Vä/Hö |
| 4603 I   | Med tumme | Svart | Large    | 16 - 19 cm | Vä/Hö |
| 4603 I   | Med tumme | Svart | X-Large  | 19 - 22 cm | Vä/Hö |



**Mått:** Omkrets handled

## Basic handledsortos med tumme

Unikt designad handledsortos som stödjer tummen utan att bli otymlig. Tumdelen är delvis fristående för att följa thenarmuskulaturen och säkra en god passform. Tummen hålls i neutral-läge vid vila. Uttagbar och formbar aluminiumskena volart. Tummens skena i flexibel plast löper längs hela ortosen för extra stabilitet. Standardmodell med hook som fästpunkt och loop som förslutning ger flexibilitet vid storleksval.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 18 cm.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|------|---------|----------|-------|
| 27442    | Blå  | X-Small | < 12 cm  | Vä/Hö |
| 27442    | Blå  | Small   | 11-14 cm | Vä/Hö |
| 27442    | Blå  | Medium  | 14-17 cm | Vä/Hö |
| 27442    | Blå  | Large   | 17-20 cm | Vä/Hö |
| 27442    | Blå  | X-Large | 20-23 cm | Vä/Hö |

## Ryno Lacer® II handledsortos

Mycket stabil handleds- och tumortos med formbara aluminiumskenor dorsalt, volart och radially. Den radiallya tumskenan löper i hela skenans längd och immobiliserar tummen effektivt. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Ryno Lacer II är en uppdaterad och förbättrad RynoLacer med bättre polstring i handflatan, mer polstring över tummen och uppdatering av velcron på ortosens undersida.

**Användningsområden:** Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

**Övrigt:** Ortosens längd på volarsidan är 22 cm.

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|-------|---------|----------|-------|
| 28576    | Svart | X-Small | <14 cm   | Vä/Hö |
| 28576    | Svart | Small   | 14-16 cm | Vä/Hö |
| 28576    | Svart | Medium  | 16-18 cm | Vä/Hö |
| 28576    | Svart | Large   | 18-20 cm | Vä/Hö |
| 28576    | Svart | X-Large | 20-22 cm | Vä/Hö |




**Mått:** Omkrets handled

## Thermoskin artroshandske

Handske som ger värme för smärtlindring. Ytermaterial av "nonslip" ger ett säkert grepp. Det patenterade Trioxon® materialet stimulerar huden att producera värme, transporterar fukt från huden och tillåter den att andas. Det är kliniskt påvisat att handsken ökar temperaturen på hudytan och subkutan med ca 2°, vilket förbättrar elasticiteten i muskler, senor och ligament.

**Användningsområden:** Reumatologiska sjukdomar.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Mått     | Förp. |
|----------|-------|----------|----------|-------|
| 53234    | Svart | X-Small  | 15-17 cm | 1 par |
| 53234    | Svart | Small    | 18-20 cm | 1 par |
| 53234    | Svart | Medium   | 21-23 cm | 1 par |
| 53234    | Svart | Large    | 24-26 cm | 1 par |
| 53234    | Svart | X-Large  | 27-29 cm | 1 par |
| 53234    | Svart | XX-Large | >30 cm   | 1 par |

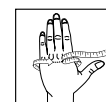

**Mått:** Omkrets runt MCP-lederna



## CS-skena

CS-skenan är en blå volar skena, tillverkad av Polypropylen. Skenan är anatomisk förformad i handens viloställning för att, enligt antropometisk data, passa en majoritet av vuxen befolkning. Kan omformas genom att hettas upp med en värmepistol. Skenan är uppbyggd av tunnare och kraftigare partier där det kraftigaste stödet ligger vid handleden för att sedan tunnas ut och avslutas i skenans lätt utböjda ändar för att inte ge tryck. Detta ger ett dynamiskt stöd med god stabilisering där det önskas.

En mjuk vit dorsal plastskena som är rak i formen. Skenan har en lätt stödjande funktion.

| Art. nr. | Modell       | Färg | Storlek    | Mått      | Förp. | Vä/Hö  |
|----------|--------------|------|------------|-----------|-------|--------|
| 35210    | Volar skena  | Blå  | En storlek | 22x168 mm | 10    | Bilat. |
| 35211    | Dorsal skena | Vit  | En storlek | 11x148 mm | 10    | Bilat. |



## Extra handledsband

Extra stabiliserande band för våra olika handledsortoser. Passar till olika versioner av handledsortoser.

| Art. nr. | Modell                                 | Färg  |
|----------|----------------------------------------|-------|
| 27448    | Basic extra handledsband               | Blå   |
| 35212    | Selection extra handledsband           | Svart |
| 35213    | Selection extra handledsband           | Beige |
| 46032    | Vission & Selection extra handledsband | Svart |



## Fingerkontrakturkudde

Mjuk, polyesterfylld fingerseparator som skyddar handflatan vid fingerkontrakturer. Klädd med frottématerial som suger upp fukt.

**Användningsområden:** Framskridna kontrakturer.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått          | Förp.   | Vä/Hö  |
|----------|------|---------|---------------|---------|--------|
| 51616    | Blå  | Medium  | 7,6 x 12,7 cm | 3 styck | Bilat. |
| 51616    | Blå  | Large   | 10 x 12,7 cm  | 3 styck | Bilat. |

## Handflatsskydd

Mjukt skydd som skyddar handflatan vid fingerkontrakturer. Önskas ytterligare extension kan en rulle enkelt sättas in mellan handflata och fingrar.

**Användningsområden:** Framskridna kontrakturer.

| Art. nr. | Modell              | Färg      | Storlek    | Vä/Hö |
|----------|---------------------|-----------|------------|-------|
| 51600    | Handflatsskydd 1 st | Vit/Beige | En storlek | Vä/Hö |
| 51601    | Handflatsskydd 3 st | Vit/Beige | En storlek | Vä/Hö |



## Handflatsskydd med fingerdelare

Mjukt skydd som skyddar handflatan vid fingerkontrakturer. Materialet mellan fingrarna ger en lätt abduktion. Kan öppnas helt för enkel påtagning.

**Användningsområden:** Framskridna kontrakturer.

| Art. nr. | Färg      | Storlek    | Vä/Hö |
|----------|-----------|------------|-------|
| 51605    | Vit/Beige | En storlek | Vä/Hö |




## Carve-It™ handpositioneringsortos

Ortos som hjälper till att hålla handen med mild till moderat fingerspasticitet i en funktionell position. Ortosen har avtagbar polstring. Inne i handen finns en anatomiskt formad skumdel som bevarar handflatans valv. En flat undersida gör den enkelt att positionera i sängen etc. Kan klippas till önskad form. Universal användning till både vänster och höger hand.

**Användningsområden:** Behandling och korrektion av kontrakturer och ändrad tonus.


**Övrigt:** Avtagbart överdrag som kan handtvättas och lufttorkas.

| Art. nr. | Färg | Storlek       | Mått    | Vä/Hö  |
|----------|------|---------------|---------|--------|
| 51650    | Vit  | Small/Medium  | <7,6 cm | Bilat. |
| 51650    | Vit  | Large/X-Large | >7,6 cm | Bilat. |

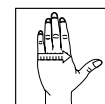

**Mått:** 2-5 MCP



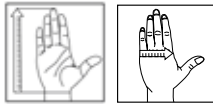

**Mått 1:** 2-5 MCP

**Mått 2:** Handens längd från handled till fingertoppar

## SOT Tumortos

SOT Tumortos är en anatomiskt formad vilootos för tumme och handflata. Ortosen positionerar tummen i ett optimalt viloläge. Den är utformad för att begränsa rörelserna i tummens CMC- och MCP-led, ge stöd för handens valv samt positionera tummens leder och muskler i ett bekvämt viloläge. Ortosen har en justerbar aluminiumkärna som enkelt kan anpassas och omformas till en individuell passform. Ortosen kan justeras efterhand som kontrakturen förändras. Den smidiga designen gör den till ett utmärkt alternativ till specialtillverkade vilootoser. Läs mer om anpassning och omformning i broschyren Tips & Tricks.

När extra stöd för handleden behövs kan SOT Tumortos användas tillsammans med en handledsortos. Vision 46029 och Selection 35207 är utmärkta ortoser för att kombinera med SOT Tumortos.

**Användningsområden:** SOT Tumortos är avsedd att användas vid artros, reumatoid artrit, adduktionskontrakturer i tummen och vid överbelastningsskador.

**Övrigt:** SOT Tumortos går att tvätta i 40 grader.

| Art. nr. | Modell         | Storlek | Mått 1   | Mått 2    | Vä/Hö |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|-------|
| 28720    | SOT Tumortos   | Small   | ≤ 7,5 cm | ≤ 18,5 cm | Vä/Hö |
| 28720    | SOT Tumortos   | Medium  | ≤ 8,5 cm | ≤ 20 cm   | Vä/Hö |
| 28720    | SOT Tumortos   | Large   | ≤ 9 cm   | ≤ 21 cm   | Vä/Hö |
| 28721    | Extra överdrag | Small   | Vä/Hö    |           |       |
| 28721    | Extra överdrag | Medium  | Vä/Hö    |           |       |
| 28721    | Extra överdrag | Large   | Vä/Hö    |           |       |

## SOT vilootos

SOT Vilootos är avsedd för händer som behöver stöd av en ortos vid vila eller för stretching, för att upprätthålla eller öka handens rörlighet. Den väl genomtänkta biomekaniska positioneringen av lederna stimulerar den spastiska handen till avslappning och kan även bidra till minskad smärta. Ortosen kan också användas för att positionera handleden i ett neutralt läge. Överdraget (eller täcket som det också kallas) fördelar trycket väl på volar- och dorsalsidan av handen och armen och kan på så sätt förhindra eller eliminera svullnad. Ortosen levereras i en grundposition för viloställning. Den kan enkelt omformas till POSI (Position of Safe Immobilization) för användning efter trauma och handkirurgi. SOT är en smidig och lätt ortos med modernt utseende. Kärnan av aluminium gör att ortosen enkelt kan finjusteras till önskad position. Aluminiumkärnan är omsluten av polyetenskum som täckts med en skön textil. Överdragets glatta utsida och ortosens låga profil gör att den får plats under kläderna. Till ortosen finns en del extra tillbehör. Det oelastiska handledsbandet kan användas för att ge ett stadigare tryck över handleden, t.ex. vid spasticitet. Fingerdelare och kilar i flera olika storlekar.


**Användningsområden:** Stroke, cerebral pares, reumatoid artrit, plexus- och muskeldystrofi, radialis pares. I "POSI" (Position of Safe Immobilization) vid trauma frakturer, brännskador, ligamentskador och efter kirurgi.

**Övrigt:** Förutom det extra handledsbandet, finns det två andra tillbehör; fingerdelare och kile i tre olika storlekar.



**Mått 1:** 2-5 MCP

**Mått 2:** Handens längd från handled till fingertoppar

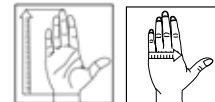

| Art. nr. | Modell         | Färg  | Storlek           | Mått 1      | Mått 2     | Vä/Hö  |
|----------|----------------|-------|-------------------|-------------|------------|--------|
| 28710    | SOT Vilootos   | Svart | XXX-Small         | 5,5 cm      | ≤ 12 cm    | Vä/Hö  |
| 28710    | SOT Vilootos   | Svart | XX-Small          | ≤ 6,5 cm    | ≤ 14 cm    | Vä/Hö  |
| 28710    | SOT Vilootos   | Svart | X-Small           | ≤ 7,5 cm    | ≤ 16 cm    | Vä/Hö  |
| 28710    | SOT Vilootos   | Svart | Small             | ≤ 7,5 cm    | ≤ 18,5 cm  | Vä/Hö  |
| 28710    | SOT Vilootos   | Svart | Medium            | ≤ 8,5 cm    | ≤ 20 cm    | Vä/Hö  |
| 28710    | SOT Vilootos   | Svart | Large             | ≤ 9 cm      | ≤ 21 cm    | Vä/Hö  |
| 28711    | MCP KIL        | Svart | XX-Small          | Bredd 65 mm | Höjd 10 mm | Bilat. |
| 28711    | MCP KIL        | Svart | Small             | Bredd 75 mm | Höjd 15 mm | Bilat. |
| 28711    | MCP KIL        | Svart | Large             | Bredd 90 mm | Höjd 20mm  | Bilat. |
| 28712    | Fingerdelare   | Svart | Barn              |             |            | Bilat. |
| 28712    | Fingerdelare   | Svart | Medium            |             |            | Bilat. |
| 28712    | Fingerdelare   | Svart | Large             |             |            | Bilat. |
| 28713    | Extra band     | Svart | XXX-Small-X-Small |             |            | Bilat. |
| 28713    | Extra band     | Svart | Small-Large       |             |            | Bilat. |
| 28714    | Extra överdrag | Svart | XXX-Small         |             |            | Vä/Hö  |
| 28714    | Extra överdrag | Svart | XX-Small          |             |            | Vä/Hö  |
| 28714    | Extra överdrag | Svart | X-Small           |             |            | Vä/Hö  |
| 28714    | Extra överdrag | Svart | Small             |             |            | Vä/Hö  |
| 28714    | Extra överdrag | Svart | Medium            |             |            | Vä/Hö  |
| 28714    | Extra överdrag | Svart | Large             |             |            | Vä/Hö  |



**Mått 1:** Från handled till toppen av långfingert.

**Mått 2:** Totala längden (mitten på underarmen till toppen av långfingret).



## Comfy handortos

En vilootos som hjälper till att bibehålla/förbättra extension i handled, MP-, PIPoch DIP-lederna. Den förebygger också ytterligare deformiteter, förbättrar ROM och underlättar för en god hygien av involverad extremitet. Ortosen kan justeras till önskad extension/flexion av handled och fingrar. Överdraget är en polyester/ bomullsblandning som tillåter luft att cirkulera för att minska risken för skador på huden.

**Användningsområden:** Positionera och stödja handen vid handleds- MP- PIPeller DIP böjningsmönster; ulnar deviation, dropphand, deformiteter relaterade till neuromuskulära försvagningar.

**Kontraindikationer:** Cirkulationsproblem, tryckpunkter eller hudirritationer.

| Art. nr. | Modell          | Färg | Storlek | Mått 1   | Mått 2 | Vä/Hö  |
|----------|-----------------|------|---------|----------|--------|--------|
| 51645    | Comfy handortos | Blå  | Small   | 15-18 cm | 28 cm  | Bilat. |
| 51645    | Comfy handortos | Blå  | Medium  | 18-20 cm | 32 cm  | Bilat. |



**Mått:** Omkrets handled

## Kwik-Form™ progressiv handledsortos

Ortos med fast skena och avtagbar polstring. Kan justeras utan verktyg. Stöder hand- och handled. Tre handrullar i olika storlekar ingår för progressiv behandling av flexionskontrakturer i handen.

**Användningsområden:** Behandling och korrektion av framskridna kontrakturer och ändrad tonus.

| Art. nr. | Färg    | Storlek      | Mått   | Vä/Hö  |
|----------|---------|--------------|--------|--------|
| 51630    | Klarblå | Small/Medium | <18 cm | Bilat. |
| 51630    | Klarblå | Medium/Large | >18 cm | Bilat. |

## Kwik-Form™ viloortos

Ortos som kan justeras till önskad position utan verktyg. Kardborrbanden fäster direkt mot ortosens mjuka klädsel. Stöder tumme, hand- och handled.

**Användningsområden:** Behandling och korrektion av kontrakturer och ändrad tonus, viloskena.

| Art. nr. | Färg    | Storlek      | Mått   | Vä/Hö |
|----------|---------|--------------|--------|-------|
| 51638    | Klarblå | Small/Medium | <18 cm | Vä/Hö |
| 51638    | Klarblå | Medium/Large | >18 cm | Vä/Hö |




**Mått:** Omkrets handled

## Förformad viloortos

Ortos som håller hand- och handled i viloställning. Skenan är tillverkad av lågtemperaturplast 3.2 mm Polyform™ som går utmärkt att omforma vid individuell utprovning. Självhäftande band medföljer som lämpligast monteras på skenan med värmepistol.

**Användningsområden:** Behandling och korrektion av kontrakturer och ändrad tonus, reumatiska sjukdomar, viloskena.

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Mått      | Vä/Hö |
|----------|-------|---------|-----------|-------|
| 53223    | Beige | Small   | <8,9 cm   | Vä/Hö |
| 53223    | Beige | Medium  | 9-10,2 cm | Vä/Hö |
| 53223    | Beige | Large   | >10,2 cm  | Vä/Hö |

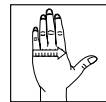

**Mått:** 2-5 MCP

# Hand- och handledsortoser

| Art.nr. | Benämning                       | Färg        | Storlek   | Vänster/<br>höger | Stabilitet* | Skena<br>Dorsalt |
|---------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------------|
| 28210   | Gripa Handled                   | Mörkblå     | S - XL    | ●                 | 0           |                  |
| 34103   | Elements Handled                | Beige/Svart | S - XL    | ●                 | I           |                  |
| 34107   | Elements Bromsa Handled         | Beige/Svart | S - XL    | ●                 | 2           | ●                |
| 28230   | Lätta Handled                   | Mörkblå     | One Size  | Bilat             | 0           |                  |
| 27441   | Basic Kort                      | Mörkblå     | XS - XL   | ●                 | I           |                  |
| 27442   | Basic Handled/Tumme             | Mörkblå     | XS - XL   | ●                 | I           |                  |
| 27445   | Basic Lång                      | Mörkblå     | XS - XL   | ●                 | I           |                  |
| 27446   | Basic Öppen                     | Mörkblå     | XS - XL   | ●                 | I           |                  |
| 28042   | Bisca Handled                   | Mörkblå     | S - L     | ●                 | 2           |                  |
| 28149   | Elcross Carpus Flexi            | Mörkblå     | S - XL    | ●                 | 2           |                  |
| 28240   | Bromsa Handled                  | Mörkblå     | S - XL    | ●                 | 2           | ●                |
| 43030   | Vission Handled kort            | Svart       | XXS - XXL | ●                 | I           |                  |
| 46029   | Vission Handled med skena       | Svart       | XXS - XL  | ●                 | 2           |                  |
| 46031   | Vission Handledsortos med tumme | Svart       | XXS - XL  | ●                 | 2           |                  |
| 35208   | Selection Bromsa Handled        | Svart       | XS - XL   | ●                 | 2           | ●                |
| 35204   | Selection Handled Soft          | Svart       | XS - XXL  | ●                 | 2           | ●                |
| 35205   | Selection Handled Soft          | Beige       | XS - XXL  | ●                 | 2           | ●                |
| 35206   | Selection Handled Rigid/Tumme   | Svart       | XS - XXL  | ●                 | 2           | ●                |
| 35209   | Selection Multiopen             | Svart       | XS - XXL  | ●                 | 2           |                  |
| 35207   | Selection Open Wrist            | Svart       | XS - XL   | ●                 | 2           | ●                |
| 35306   | Selection Open Wrist Barn       | Svart       | S - L     | ●                 | 2           | ●                |
| 35222   | Selection Handled Kort          | Svart       | XS - XL   | ●                 | I           |                  |
| 35223   | Selection Handled Kort          | Beige       | XS - XL   | ●                 | I           |                  |
| 35305   | Selection Handled Barn          | Svart       | XXS - L   | ●                 | 2           |                  |
| 46050   | Vission CTS                     | Grå         | S & L     | ●                 | 3           |                  |
| 28542   | CTS Handled                     | Ljusblå     | S & L     | ●                 | 3           |                  |
| 28578   | Wrist Lacer II                  | Svart       | XXS - XXL | ●                 | 3           | ●                |
| 28579   | Wrist Lacer II Lång             | Svart       | S - XL    | ●                 | 3           | ●                |
| 28570   | Wrist Lacer kort                | Beige       | XS - XL   | ●                 | 3           | ●                |
| 28572   | Wrist Lacer Lång                | Beige       | S - XL    | ●                 | 3           | ●                |
| 28574   | V-Strap Kort                    | Svart       | XXS - XXL | ●                 | 3           | ●                |
| 28575   | V-Strap Lång                    | Svart       | S - XL    | ●                 | 3           | ●                |
| 28576   | Ryno Lacer II / Tumme           | Svart       | XS - XL   | ●                 | 3           | ●                |
| 28577   | Tripod Wrist Lacer              | Svart       | XS - XL   | ●                 | 3           | ●                |

\*Stabilitet: 0 = Låg, I = Medium, 2 = Medium plus, 3 = Hög

| Skena Volart | Skena Radial/ Ulnart | Tumme | Justerbart tumgrepp | Snörning | Kard-borr-band | Motverkar dorsalextension | Total längd  |
|--------------|----------------------|-------|---------------------|----------|----------------|---------------------------|--------------|
|              |                      |       |                     |          | ●              | -                         | 18 cm        |
| ●            |                      |       |                     |          | ●              | Liten grad                | 17 cm        |
|              |                      |       |                     |          | ●              | Hög grad                  | 15 cm        |
|              |                      |       |                     |          | ●              | -                         | -            |
| ●            |                      |       | ●                   |          | ●              | Liten grad                | 18 cm        |
| ●            |                      | ●     | ●                   |          | ●              | Liten grad                | 18 cm        |
| ●            |                      |       | ●                   |          | ●              | Viss grad                 | 21 cm        |
| ●            |                      |       | ●                   |          | ●              | Liten grad                | 18 cm        |
| ●            |                      |       |                     |          | ●              | Viss grad                 | 19 cm        |
| ●            |                      |       | ●                   | ●        |                | Liten grad                | 18 cm        |
|              |                      |       |                     |          | ●              | Hög grad                  | 15 cm        |
|              |                      |       | ●                   |          | ●              | Liten grad                | 13,5 cm      |
| ●            |                      |       | ●                   |          | ●              | Viss grad                 | 18,5 cm      |
| ●            |                      | ●     | ●                   |          | ●              | Viss grad                 | 18,5 cm      |
|              |                      |       |                     |          | ●              | Hög grad                  | 15 cm        |
| ●            |                      |       | ●                   | ●        |                | Viss grad                 | 18 cm        |
| ●            |                      |       | ●                   | ●        |                | Viss grad                 | 18 cm        |
| ●            |                      | ●     | ●                   | ●        |                | Viss grad                 | 18 cm        |
| ●            |                      |       | ●                   | ●        | ●              | Hög grad                  | 22 cm        |
| ●            |                      |       |                     |          | ●              | Viss grad                 | 18 cm        |
| ●            |                      |       |                     |          | ●              | Viss grad                 | 16 cm        |
|              |                      |       | ●                   | ●        | ●              | Liten grad                | 13 cm        |
|              |                      |       | ●                   | ●        | ●              | Liten grad                | 13 cm        |
| ●            |                      |       | ●                   | ●        |                | Viss grad                 | 11 - 17,5 cm |
| ●            |                      |       |                     |          |                | Mycket hög grad           | 20 cm        |
| ●            |                      |       |                     |          | ●              | Mycket hög grad           | 21 cm        |
| ●            |                      |       | ●                   | ●        | ●              | Hög grad                  | 21 cm        |
| ●            |                      |       | ●                   | ●        | ●              | Hög grad                  | 21 cm        |
| ●            |                      |       | ●                   | ●        |                | Hög grad                  | 21 cm        |
| ●            |                      |       | ●                   | ●        |                | Hög grad                  | 26 cm        |
| ●            |                      |       | ●                   |          | ●              | Hög grad                  | 20 cm        |
| ●            |                      |       | ●                   |          | ●              | Hög grad                  | 26 cm        |
| ●            | ●                    | ●     | ●                   | ●        |                | Hög grad                  | 21 cm        |
| ●            | ●                    |       | ●                   |          | ●              | Hög grad                  | 20 cm        |

## Egna anteckningar

[illegible]





# Arm- och axelortoser

[www.camp.se](http://www.camp.se)



**Mått:** Runt armbågsleden



**Mått:** Runt armbågsleden i böjt läge.



**Mått:** Omkrets 5 cm nedan armbågen.

## Armbågs/hälskydd Heelbo™

Elastisk strumpa med tryckavlastande uttagbar gelplatta som skyddar huden på armbågen och förebygger trycksår.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått     | Förp. |
|----------|------|---------|----------|-------|
| 53600    | Gul  | Small   | 15-20 cm | par   |
| 53600    | Blå  | Medium  | 20-25 cm | par   |
| 53600    | Vit  | Large   | 25-30 cm | par   |
| 53600    | Grön | X-Large | >30 cm   | par   |

## ELEMENTS armbåge

ELEMENTS armbåge är avsedd för behandling av lindriga och tillfälliga besvär som t.ex. smärta och inflammation. Bandaget ger en lätt kompression och håller leden varm

**Användningsområden:** Lindriga och tillfälliga besvär som t.ex. smärta och inflammation.

**Kontraindikationer:** Ödem, kraftig svullnad.

| Art. nr. | Färg        | Storlek | Mått       | Vä/Hö  |
|----------|-------------|---------|------------|--------|
| 34101    | Beige/Svart | Small   | 23 - 25 cm | Bilat. |
| 34101    | Beige/Svart | Medium  | 25 - 27 cm | Bilat. |
| 34101    | Beige/Svart | Large   | 27 - 30 cm | Bilat. |
| 34101    | Beige/Svart | X-Large | 30 - 33 cm | Bilat. |

## ELEMENTS Epi

ELEMENTS Epi är avsedd för behandling av lindriga och tillfälliga besvär av s.k. tennis/golfarmbåge. Bandaget kan i vissa fall kombineras med ett handledsbandage. Bandaget avlastar senfästet genom ett lätt tryck på underarms-muskulaturen. Bäst funktion uppnås genom användning av de medföljande avtagbara pelotterna.

**Användningsområden:** Lindriga och tillfälliga besvär av s.k. tennis/golfarmbåge.

**Kontraindikationer:** Kraftiga ödem, kraftig svullnad

| Art. nr. | Färg  | Storlek       | Mått       | Vä/Hö  |
|----------|-------|---------------|------------|--------|
| 34104    | Svart | Small/Medium  | 20 - 28 cm | Bilat. |
| 34104    | Svart | Large/X-Large | 28 - 36 cm | Bilat. |

## EpiGel epikondylit

Bekväm epikondylitortos med två flyttbara gelkuddar som avlastar genom kompression över extensor- och flexormusklerna utan att ge kompression runt underarmen. De mjuka gelkuddarna är stötdämpande. Ortosen har en låg profil. Ett enkelt förslutningssystem gör ortosen lätt att ta på och av.

**Användningsområden:** Lateral och/eller medial epikondylit (s.k. tennis- och golfarmbåge).

| Art. nr. | Färg  | Storlek    | Mått     | Vä/Hö  |
|----------|-------|------------|----------|--------|
| 28166    | Svart | En storlek | 20-35 cm | Bilat. |



**Mått:** Omkrets 5 cm nedanför armbågen

## EpiFoam epikondylit

Epikondylitortos med en foamkudde, som placeras antingen över extensormuskeln för att ge avlastning vid lateral epikondylit eller över flexormuskeln för avlastning vid medial epikondylit. Ett enkelt förslutningssystem gör ortosen lätt att ta på och av.

**Användningsområden:** Lateral och/eller medial epikondylit (s.k. tennis- och golfarmbåge).

| Art. nr. | Färg  | Storlek    | Mått     | Vä/Hö  |
|----------|-------|------------|----------|--------|
| 28165    | Svart | En storlek | 20-35 cm | Bilat. |



**Mått:** Omkrets 5 cm nedanför armbågen

## Elcross epikondylit

Bandage som ger tryck över muskelbuen för avlastning av muskulatur, senor och senfästen för minskad smärta vid epikondylit. Mjuk pelott på insidan kombinerat med en plastbricka ökar trycket under spännbandet.

**Användningsområden:** Lateral eller medial epikondylit (tennis- eller golfarmbåge).

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått     |
|----------|------|---------|----------|
| 28162    | Blå  | Small   | 20-25 cm |
| 28162    | Blå  | Medium  | 25-30 cm |
| 28162    | Blå  | Large   | 30-35 cm |
| 28162    | Blå  | X-Large | 35-40 cm |



**Mått:** Omkrets 5 cm nedanför armbågen.



**Mått:** Runt bröstkorgen under armhålan.

## HemiSafe

Mjuk och bekväm skulderortos avsedd att användas vid hemiplegi efter stroke för att minska smärta i axelleden och reducera risken för sublaxation. Ortosen har en perfekt anatomisk passform. Den ger stöd för axelleden samtidigt som den tillåter rörlighet vid daglig aktivitet. HemiSafe är tillverkad i ett material som andas. Den har reglerbara band runt kroppen som är breda och mjuka för att undvika skav. När ökad abduktion önskas används den medföljande kudden som då placeras i armhålan. Ortosen kan tas på och av med endast en hand.

**Användningsområden:** Minska smärta i axelled efter stroke. Reducera risken för sublaxation i axelleden.

**Övrigt:** Latexfri

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått 1     | Vä/Hö |
|----------|------|---------|------------|-------|
| 28157    | Vit  | Small   | 80-100 cm  | Vä/Hö |
| 28157    | Vit  | Medium  | 100-120 cm | Vä/Hö |
| 28157    | Vit  | Large   | 120-140 cm | Vä/Hö |



**Mått 1:** Omkrets bröstkorg  
**Mått 2:** Längd överarm

## Vission skulderortos IMMO

Vission Skulderortos är avsedd att immobilisera- och hålla överarm, armbåge och underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen är speciellt lämpad för skulder- och bröstgördelskador. Produkten är vändbar och kan användas både på vänster och höger skuldra.

**Användningsområden:** Skulder-, arm-, armbågsskador och skador i skuldergördeln (fraktur, dislokation och stukning). Efter skulder- och bröstgördelkirurgi. Plexus brachialis-pares.

**Kontraindikationer:** Inga kända.

| Art. nr. | Modell                     | Storlek  | Mått 1       | Mått 2  |
|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|
| 46022    | VISSION Skulderortose IMMO | X-Small  | 68 - 78 cm   | < 30 cm |
| 46022    | VISSION Skulderortose IMMO | Small    | 80 - 90 cm   | < 38 cm |
| 46022    | VISSION Skulderortose IMMO | Medium   | 90 - 100 cm  | < 38 cm |
| 46022    | VISSION Skulderortose IMMO | Large    | 100 - 113 cm | < 38 cm |
| 46022    | VISSION Skulderortose IMMO | X-Large  | 113 - 120 cm | > 38 cm |
| 46022    | VISSION Skulderortose IMMO | XX-Large | 120 - 140 cm | > 38 cm |

## Armslinga på rulle

Denna enkla variant av armslinga (Collar'n Cuff), mitella, levereras på rulle om 12 meter. I en förpackning medföljer två rullar var av en ligger i en dispenserbox och 10 st Y-kardborrfästen för att skapa en fixering av armen. Materialet är mjukt och smidigt samtidigt som det håller formen även under belastning. Den mörkblå färgen gör att slingan håller sig fräsch länge.

**Användningsområden:** Rekommenderas vid trauma på handled, armbåge och skuldra. Kan även användas i kombination med gips.

| Art. nr. | Modell             | Färg  | Bredd | Längd        | Förp. |
|----------|--------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 42212    | Armslinga på rulle | Svart | 5 cm  | 2 x 12 meter | Rulle |




← NYHET!

## Armslinga FOAM

Armslinga med extra band för fixering. Vadderat material. Justerbart axelband som fäster var som helst på ortosen.

**Användningsområden:** Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått     | Vä/Hö  |
|----------|------|---------|----------|--------|
| 2003I    | Grå  | Small   | 28-36 cm | Bilat. |
| 2003I    | Grå  | Medium  | 35-42 cm | Bilat. |
| 2003I    | Grå  | Large   | 41-49 cm | Bilat. |
| 2003I    | Grå  | X-Large | 48-56 cm | Bilat. |

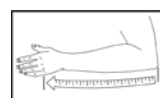


**Mått:** Armbåge till MCP.

## Armslinga BOMULL

Enkel armslinga av bomull som har steglöst axelband. Axelbandet har en flyttbar polstring för ökad komfort. Dubbla D-ringar möjliggör användning både med och utan underarmsgips eller ortos. Tumögla.


**Användningsområden:** Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått     | Vä/Hö  |
|----------|------|---------|----------|--------|
| 4710I    | Grå  | Small   | 25-28 cm | Bilat. |
| 4710I    | Grå  | Medium  | 27-30 cm | Bilat. |
| 4710I    | Grå  | Large   | 29-32 cm | Bilat. |
| 4710I    | Grå  | X-Large | 31-34 cm | Bilat. |

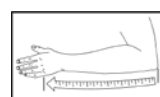

**Mått:** Armbåge till MCP.



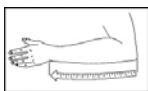

**Mått:** Armbåge till handled

## Armslinga NÄT

Luftig armslinga med steglöst justerbart axelband. Axelbandet har en flyttbar polstring för ökad komfort. Dubbla D-ringar möjliggör användning både med och utan underarmsgips eller ortos. Tumögla.

**Användningsområden:** Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

| Art. nr. | Färg | Storlek       | Mått     | Vä/Hö  |
|----------|------|---------------|----------|--------|
| 47100    | Grå  | Small/Medium  | 27-30 cm | Bilat. |
| 47100    | Grå  | Large/X-Large | 31-34 cm | Bilat. |



**Mått 1:** Slinga Höjd och Bredd

**Mått 2:** Omtag Höjd och Längd

## Armslinga WRAP

Traditionell armslinga i två delar som kan justeras oberoende av varandra. Axelbandet har en flyttbar polstring för ökad komfort. Armdelen har ett plastspänne på ryggen som håller ihop de två banden för att hindra att dessa glider ut över axlarna. Omtaget justeras steglöst med kardborrband.

**Användningsområden:** Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

| Art. nr. | Färg | Storlek       | Mått 1       | Mått 2        | Vä/Hö  |
|----------|------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 47102    | Grå  | Small/Medium  | 23 cm, 32 cm | 10 cm, 132 cm | Bilat. |
| 47102    | Grå  | Large/X-Large | 25 cm, 35 cm | 13 cm, 155 cm | Bilat. |



**Mått 1:** Slinga Höjd och Bredd

**Mått 2:** Omtag Höjd och Längd

## Armslinga tvådelad blå

Armslinga i foam med brett avtagbart band för fixering. Två bärande band som fördelar vikten över båda skuldrorna. Krysspänne på ryggen håller banden på plats. Justerbara band som fäster var som helst på ortosen.

**Användningsområden:** Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.


| Art. nr. | Färg | Storlek       | Mått 1       | Mått 2        | Vä/Hö  |
|----------|------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 20045    | Blå  | Small/Medium  | 24 cm, 32 cm | 10 cm, 100 cm | Bilat. |
| 20045    | Blå  | Large/X-Large | 25 cm, 35 cm | 13 cm, 135 cm | Bilat. |

## Armslinga “8”

Lätt och luftig armslinga för avlastning av skuldra, arm och hand. Två breda reglerbara band fördelar vikten över båda skuldrorna och samlas i en metallring på ryggen. Kan tas på och av med en hand. Lämplig vid neurologiska sjukdomar.

**Användningsområden:** Neurologiska sjukdomar, avlastning, posttraumatiskt och postoperativt.

| Art. nr. | Färg  | Storlek       | Mått       | Vä/Hö  |
|----------|-------|---------------|------------|--------|
| 53200    | Beige | Small/Medium  | 26 - 32 cm | Bilat. |
| 53200    | Beige | Large/X-Large | 30-38 cm   | Bilat. |

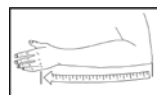

**Mått:** Längd underarm armbåge-MCP

## Axellås

En universell armslinga med lågprofil som är enkel att applicera. Den levereras komplett med ett midjeband runt kroppen där överarmen är fäst för att effektivt immobilisera axeln. Handledsfästet fäster vid midjebandet fram och detta fästs i sin tur vid axelremmen med hjälp av ett snabbspänne. Den har dessutom ett extra tumband för att hålla handen i rätt vinkel och undvika dropphand. Axelremmen är justerbar för att få en bekväm passform för patienten och även för att passa till både vänster och höger. Det finns en stor komfortdyna som fördelar trycket över axeln/nyckelbenet. Detta är ett axellås som är lätt att montera och är bekvämt och enkelt att använda. Midjebandets längd är 120 cm.

**Användningsområden:** Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.

| Art. nr. | Modell  | Färg  | Storlek    |
|----------|---------|-------|------------|
| 42213    | Axellås | Svart | En storlek |



**NYHET!**





**Mått:** Omkrets överarm proximalt.

## Humerus Humerusortos

Denna humerusortos bygger på de välkända principerna för en ”Sarmiento-ortos”, en jämn cirkulär mjukdelskompression. De tre cirkulära banden spänns åt oberoende av varandra. Ortosens förankring över axelpartiet gör att den sitter väl på plats utan att glida ner. Bandet som går under motsatt arm har en flyttbar polstring för ökad bekvämlighet. Detta ger en bekväm ortos som är enkel att applicera direkt och enkel för patienten att acceptera. Ortosens ventilerade material låter huden andas och minskar risken för irritationer. Ortosen har två termoplastplattor som vid behov kan justeras genom värmning och formen kan justeras med sax. Detta är i de flesta fall inte nödvändigt. Ortosen ger fri rörlighet för armbågsleden. De textila materialen är testade i enlighet med Öko-tex standard 100 och innehåller inte latex.

**Användningsområden:** Diafysära humerusfrakturer (skaftfrakturer).

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Längd | Omkrets    |
|----------|-------|---------|-------|------------|
| 62105    | Svart | Small   | 28 cm | 18 - 26 cm |
| 62105    | Svart | Medium  | 30 cm | 26 - 34 cm |
| 62105    | Svart | Large   | 32 cm | 34 - 42 cm |
| 62105    | Svart | X-Large | 34 cm | 42 - 50 cm |



## ROM armbågsortos

Postoperativ armbågs-ortos designad att låsa eller kontrollera armbågens rörelse vid behandling av ligamentskador eller stabila frakturer. Tillåter kontroll från 0° till 90° i extension och från 0° till 120° i flexion. Rörelsen ändras enkelt i 10° intervall. Ortosens längd och omfång justeras från 36 cm till 45 cm. Ortosen inkluderar en armslinga.

**Användningsområden:** Frakturer, postoperativt, tillstånd där kontroll av flexion och extension krävs.

| Art. nr. | Storlek         | Vä/Hö |
|----------|-----------------|-------|
| 62150    | En storlek      | Vä/Hö |
| 62149    | Extra polstring | Vä/Hö |

## ROM armbågsortos UniBor

Postoperativ armbågs-ortos med den senaste generationens teknologi. Rörelsen ändras enkelt i flexion-extension i 10° intervall med 120° ROM. Leden går att låsa i önskat läge. Ortosens längd och omfång kan justeras. Till ortosen kan beställas ett teleskopiskt handstöd, som kan justeras och kopplas på och av, för kontroll av pronation-supination. ROM Armbågsortos UniBor stabiliserar armen och erbjuder en bekväm och effektiv behandling.

**Användningsområden:** Kontroll av flexion-extension av armbågen och pronation-supination efter trauma.

**Övrigt:** Längden på den dagliga behandlingen och behandlingstiden skall ordinerars av en läkare.

| Art. nr. | Modell              | Vä/Hö  |
|----------|---------------------|--------|
| 62151    | Armbågsortos UniBor | Bilat. |
| 62152    | Extra band          | Bilat. |
| 62153    | Handdel             | Bilat. |
| 62154    | Extra polstring     | Bilat. |



## Egna anteckningar

[illegible]



# FES - Funktionell Elektrisk Stimulering

[www.camp.se](http://www.camp.se)

a

ALFESS™

Framtidens

FUNKTIONELLT  
ELEKTRISKT  
STIMULERINGS  
SYSTEM



## FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kan appliceras med en hand
- Låg vikt
- Diskret under kläder
- Enkel att programmera på enhet, handkontroll eller i mobilapp
- Integrerade elektroder (behöver inte beställa extra)
- En enhet - en storlek - enkelt att beställa
- Möjligt att gå barfota
- Vattenresistent (kort tid)
- Två aktivitetsinställningar: Gång & Träning
- Laddenhet för laddning av integrerat batteri



Inställningar görs på:  
Enheter, handkontroll  
eller i mobilappen

## ALFESS™ - Funktionell Elektrisk Stimulering

ALFESS™ är den nya innovativa lösningen vid droppfot. Den här typen av enheter kan även benämnas Digital droppfotsortos, FES eller Neurostimulator. Enheten hjälper till att lyfta foten för att ge ett bättre gångmönster. En algoritm sammanställer informationen från sensorer som känner av hastighet och benets vinklar och Alfess enheten sänder elektriska impulser till nerven så att foten lyfter.



**Användningsområden:** Centrala nervskador som; Multiple Skleros (MS), Stroke, Cerebral Pares (CP), inkompleta ryggmärgsskador, traumatiska hjärnskador.

**Kontraindikationer:** Används inte tillsammans med elektronisk monitoreringsutrustning, defibrillator och högfrekvent medicinsk utrustning. FES behandling ska inte användas på patienter med pacemaker. Använd inte om du har en historik med Autonom dysreflexi. Använd inte FES efter nyligen utförd kirurgi där muskelkontraktion kan störa läkningsprocessen. Mer information finns i Manualen som med följer produkten.

| Art. nr. | Modell                          | Storlek    |
|----------|---------------------------------|------------|
| 28270    | ALFESS™ Komplet                 | En storlek |
| 28271    | Förlängningsband                | En storlek |
| 28272    | Nätadapter                      | En storlek |
| 28273    | Nätadapter UK                   | En storlek |
| 28274    | Extra kabel fjärrkontroll       | En storlek |
| 28275    | Extra laddningskabel för ALFESS | En storlek |
| 28277    | Fjärrkontroll                   |            |
| 28279    | Extra D-ring med Magnet         | En storlek |
| 28283    | Connect Gel                     | 500 ml     |

## Egna anteckningar

[illegible]





# Fot- och fotledsortoser

[www.camp.se](http://www.camp.se)



**Mått:** Omkrets ankel.



**Mått:** Omkrets ankel.



**Mått:** Mått tas runt foten över fotryggens högsta punkt.

## Armbågs/hälskydd Heelbo™

Elastisk strumpa med tryckavlastande uttagbar gelplatta som skyddar huden och förebygger trycksår.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått     | Förp. |
|----------|------|---------|----------|-------|
| 53600    | Gul  | Small   | 15-20 cm | 1 par |
| 53600    | Blå  | Medium  | 20-25 cm | 1 par |
| 53600    | Vit  | Large   | 25-30 cm | 1 par |
| 53600    | Grön | X-Large | >30 cm   | 1 par |

## ELCROSS® ankel

Smidigt mjukt fotledsstöd i bomull och lycra, format som en strumpa, vilket ger en lätt kompression. Det integrerade elastiska bandet lyfter fotens lateralsida för att förhindra fotledsstukning. Lätt att applicera.

**Användningsområden:** Lindrig fotledsinstabilitet.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Mått     | Vä/Hö |
|----------|------|---------|----------|-------|
| 28181    | Blå  | Small   | 20-25 cm | Vä/Hö |
| 28181    | Blå  | Large   | 25-30 cm | Vä/Hö |

## ELEMENTS ankel

ELEMENTS ankel är avsedd för behandling av lindriga och tillfälliga besvär som t.ex. smärta, stukningar och vrickningar. Bandaget kan användas med eller utan de elastiska banden. Bandaget ger lätt kompression och håller fotleden varm. Rörelseomfånget begränsas av de elastiska dragbanden.

**Användningsområden:** Lindriga och tillfälliga besvär som t.ex. smärta, stukningar och vrickningar.

**Kontraindikationer:** Kraftiga ödem, kraftig svullnad, neuropati, fotproblem till följd av diabetes, bensår.

| Art. nr. | Färg        | Storlek | Mått       | Vä/Hö  |
|----------|-------------|---------|------------|--------|
| 34100    | Beige/Svart | Small   | 20 - 23 cm | Bilat. |
| 34100    | Beige/Svart | Medium  | 23 - 26 cm | Bilat. |
| 34100    | Beige/Svart | Large   | 26 - 29 cm | Bilat. |

## ASO® fotledsortos

Stabilt fotledsstöd med låg profil och stabiliserande snörning fram. De stumma nylonbandens placering efterliknar tejping och hindrar foten att supinera/pronera. Banden justeras beroende på skadans karaktär. För ytterligare komfort har ortosen fått en ny förstärkt CoolFlex polstring på insidan längst Akillessenan.

**Användningsområden:** Akut eller långvarig fotledsinstabilitet och preventivt vid idrottsutövning.

| Art. nr. | Modell      | Färg  | Storlek   | Mått       | Vä/Hö  |
|----------|-------------|-------|-----------|------------|--------|
| 28188    | Utan Skenor | Svart | XX-Small  | 22,5-25 cm | Bilat. |
| 28188    | Utan Skenor | Svart | X-Small   | 25-27,5 cm | Bilat. |
| 28188    | Utan Skenor | Svart | Small     | 27,5-30 cm | Bilat. |
| 28188    | Utan Skenor | Svart | Medium    | 30-32,5 cm | Bilat. |
| 28188    | Utan Skenor | Svart | Large     | 32,5-35 cm | Bilat. |
| 28188    | Utan Skenor | Svart | X-Large   | 35-37,5 cm | Bilat. |
| 28188    | Utan Skenor | Svart | XX-Large  | 37,5-40 cm | Bilat. |
| 28188    | Utan Skenor | Svart | XXX-Large | >40 cm     | Bilat. |




**Mått:** Pådragsmått

## ASO® fotledsortos med skenor

Stabilt fotledsstöd med låg profil och uttagbara plastskenor medialt och lateralt samt stabiliserande snörning fram. De stumma nylonbandens placering efterliknar tejping och hindrar foten att supinera/pronera. Banden justeras beroende på skadans karaktär. För ytterligare komfort har ortosen fått en ny förstärkt CoolFlex polstring på insidan längst Akillessenan.

**Användningsområden:** Akut eller långvarig fotledsinstabilitet och preventivt vid idrottsutövning.

| Art. nr. | Modell     | Färg  | Storlek  | Mått       | Vä/Hö  |
|----------|------------|-------|----------|------------|--------|
| 28186    | Med skenor | Svart | X-Small  | 25-27,5 cm | Bilat. |
| 28186    | Med skenor | Svart | Small    | 27,5-30 cm | Bilat. |
| 28186    | Med skenor | Svart | Medium   | 30-32,5 cm | Bilat. |
| 28186    | Med skenor | Svart | Large    | 32,5-35 cm | Bilat. |
| 28186    | Med skenor | Svart | X-Large  | 35-37,5 cm | Bilat. |
| 28186    | Med skenor | Svart | XX-Large | 37,5-40 cm | Bilat. |

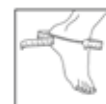

**Mått:** Pådragsmått



**Mått:** Pådragsmått

### ASO®EVO™

Stabilt fotledsstöd med låg profil och stabiliserande snörning fram. De stumma nylonbandens placering efterliknar tejping och hindrar foten att supinera/pronera. På ASO EVO ger nylonbanden runt calcaneus ett större motstånd mot inversion/eversion av calcaneus än standard ASO. Den övre delen är förstärkt med en plastmanschett och därmed förbättras skyddet mot höga fotledsstukningar. För ytterligare komfort har ortosen fått en ny förstärkt CoolFlex polstring på insidan längst Akillessenan.

**Användningsområden:** Akut eller långvarig fotledsinstabilitet, preventivt vid idrottsutövning, höga fotledsstukningar och subtalarleds-instabilitet.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Mått       | Vä/Hö  |
|----------|-------|----------|------------|--------|
| 28189    | Svart | X-Small  | 25-27,5 cm | Bilat. |
| 28189    | Svart | Small    | 27,5-30 cm | Bilat. |
| 28189    | Svart | Medium   | 30-32,5 cm | Bilat. |
| 28189    | Svart | Large    | 32,5-35 cm | Bilat. |
| 28189    | Svart | X-Large  | 35-37,5 cm | Bilat. |
| 28189    | Svart | XX-Large | 37,5-40 cm | Bilat. |



**Mått:** Pådragsmått

### ASO®EVO™ Quatro

Stabilt fotledsstöd med ännu lägre profil än ASO EVO. Materialet runt mellanfoten är reducerad för att inte begränsa plantarflexionen. De stumma nylonbandens placering efterliknar tejping och hindrar foten att supinera/pronera. På EVO Quatro ger nylonbanden runt calcaneus ett större motstånd mot inversion/eversion av calcaneus än standard ASO. Den övre delen är förstärkt med en plastmanschett och därmed förbättras skyddet mot höga fotledsstukningar. Manschetten är fodrad med CoolFlex polstring för en förbättrad komfort och Skinloc material för att förhindra glidning.

**Användningsområden:** Akut eller långvarig fotledsinstabilitet, preventivt vid idrottsutövning, höga fotledsstukningar och subtalarleds-instabilitet.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Mått       | Vä/Hö  |
|----------|-------|----------|------------|--------|
| 28192    | Svart | X-Small  | 25-27,5 cm | Bilat. |
| 28192    | Svart | Small    | 27,7-30 cm | Bilat. |
| 28192    | Svart | Medium   | 30-32,5 cm | Bilat. |
| 28192    | Svart | Large    | 32,5-35 cm | Bilat. |
| 28192    | Svart | X-Large  | 35-37,5 cm | Bilat. |
| 28192    | Svart | XX-Large | 37,5-40 cm | Bilat. |

## ELEMENTS Stretch Up

ELEMENTS stretch up är avsedd att användas på kvällen/natten vid behandling av Plantar Faschiitis. Strumpan används nattetid eller vid vila annan tid på dygnet. Denna produkt är endast avsedd för en persons användning. Storlekar : Small, Medium och Large. Passar både vänster och höger fot.

**Användningsområden:** Använda på kvällen/natten vid behandling av Plantar Faschiitis.

**Kontraindikationer:** Cirkulationsproblem, Öppna sår på ben eller fot, diabetes, ödem, hammartå, hudproblem, och/eller under graviditet. Strumpan ska inte användas av någon som nyligen genomgått operation i fot och/eller ben.

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Mått       | Vä/Hö  |
|----------|-------|---------|------------|--------|
| 34108    | Svart | Small   | < 20 cm    | Bilat. |
| 34108    | Svart | Medium  | 20 - 40 cm | Bilat. |
| 34108    | Svart | Large   | > 40 cm    | Bilat. |



**Mått:** Omkrets vad

## Gel Ankelortos

Ankelortos för immobilisering, kyla och kompression för att reducera svullnad efter akuta skador i fotleden. De anatomiskt formade plastdelarna har kuddar som är delade i två, en med luft och en med gel. Dessa kan tas av och användas för kylterapi. Bredden under foten justeras med kardborrband. Två cirkulära kardborrband låser ortosen mot benet.

**Användningsområden:** Akuta ankelskador, stukningar och långvarig fotledsinstabilitet.

| Art. nr. | Färg | Storlek    | Mått  | Vä/Hö  |
|----------|------|------------|-------|--------|
| 28179    | Vit  | En storlek | 25 cm | Bilat. |



## Ankelortos Stabil Soft

Ett stabilt fotledstöd med enkla cirkulära band. Sidostöden av polypropen är anatomiskt formade. Innermaterial av T-foam/skumplast som formar sig och följer underbenets kontur. Ortosen skall användas tillsammans med en stabil sko.

**Användningsområden:** Akut och långvarig fotledsinstabilitet.

| Art. nr. | Färg  | Storlek    | Vä/Hö  |
|----------|-------|------------|--------|
| 28184    | Svart | En storlek | Bilat. |





## PRAFO® Standard

PRAFO® Standard (Pressure Relief Ankle Foot Orthosis) är framtagen för att avlasta häl och hälsår från tryck vid sängläge och kortare förflyttning. Ortosen håller foten i neutralläge vid sängläge och bibehåller dorsal- och plantarflexion vid förflyttning. Justerbart stag motverkar inåt- och utåtrotation vid sängläge. Reglerbar fot-, tå- och vaddel.

**Användningsområden:** Lämplig vid t.ex. diabetessår och trycksår.

**Övrigt:** Lätt att ta av- och på polstringen för tvätt.

| Art. nr. | Modell          | Färg  | Storlek    | Vä/Hö  |
|----------|-----------------|-------|------------|--------|
| 71100    | PRAFO Standard  | Svart | En storlek | Bilat. |
| 71110    | Extra polstring | Svart | En storlek |        |

## Boston Soft AFO

Ankel- och fotortos i rigid plast, fodrad med en mjuk foam. Avsedd att förbättra positionering av fot och fotled samt reducera spasticitet. Ortosen har ett inbyggt hälskydd för att underlätta läkning av hälsår. Boston Soft AFO finns i två utförande, med eller utan antirotationsstag(stabilizer). Den är lätt att rengöra och kan lätt trimmas med en sax.

**Användningsområden:** Ryggmärgsbråck, muskeldystrofi, CP, trauma och hälsår

**Övrigt:** Stabiliseringsskena finns att beställa i samma storlekar som Boston Soft AFO.



| Art. nr. | Modell           | Storlek             | Vä/Hö  | Skostorlek |
|----------|------------------|---------------------|--------|------------|
| 71151    | Utan stabilizer  | Barn 1              | Bilat. | 19-20      |
| 71151    | Utan stabilizer  | Barn 2              | Bilat. | 21-22      |
| 71151    | Utan stabilizer  | Barn 3              | Bilat. | 23-24      |
| 71151    | Utan stabilizer  | Barn 4              | Bilat. | 25-26      |
| 71151    | Utan stabilizer  | Barn 5              | Bilat. | 27-29      |
| 71151    | Utan stabilizer  | Barn 6              | Bilat. | 30-31      |
| 71151    | Utan stabilizer  | Vuxen A             | Bilat. | 32-34      |
| 71151    | Utan stabilizer  | Vuxen B             | Bilat. | 35-36      |
| 71151    | Utan stabilizer  | Vuxen C             | Bilat. | 37-39      |
| 71151    | Utan stabilizer  | Vuxen D             | Bilat. | 40-41      |
| 71151    | Utan stabilizer  | Vuxen E             | Bilat. | 42-44      |
| 71151    | Utan stabilizer  | Vuxen F             | Bilat. | 45-46      |
| 71152    | Avsedd för 71151 | Stabiliseringsskena |        |            |





## Bebax framfotsortos

Bebax är en innovativ pediatrik fotortos designad för progressiv och dynamisk korrektion av kongenitala framfotsfelställningar. Ortosen är ett medicinskt accepterat alternativ till gips. Bebax eliminerar vanliga hudproblem som kan uppstå under gips. På undersidan mellan framfot och häl finns en led som gör det möjligt att justera vinkeln i alla plan. Den är tillverkad av ekologiskt konstläder som är testat enligt Oeko-Tex Standard 100, fritt från krom och latex. Den har låg vikt, en mjuk polstring och är lätt och ta på och av. Storlekar från 10 1/2 har vristband för att hålla hälen på plats. Ortosen är inte avsedd att gå på, vilket gäller alla storlekar.

**Användningsområden:** Kongenitala framfotsfelställningar

**Övrigt:** Storlek = innersulans längd

| Art. nr. | Färg | Storlek | Vä/Hö |
|----------|------|---------|-------|
| 28637    | Vit  | 7,5 cm  | Vä/Hö |
| 28637    | Vit  | 8 cm    | Vä/Hö |
| 28637    | Vit  | 8,5 cm  | Vä/Hö |
| 28637    | Vit  | 9,0 cm  | Vä/Hö |
| 28637    | Vit  | 9,5 cm  | Vä/Hö |
| 28637    | Vit  | 10 cm   | Vä/Hö |
| 28637    | Vit  | 10,5 cm | Vä/Hö |
| 28637    | Vit  | 11,5 cm | Vä/Hö |
| 28637    | Vit  | 12,5 cm | Vä/Hö |
| 28637    | Vit  | 13,5 cm | Vä/Hö |
| 28637    | Vit  | 14,5 cm | Vä/Hö |
| 28637    | Vit  | 15,5    | Vä/Hö |
| 28637    | Vit  | 16,5 cm | Vä/Hö |

# Surestep™ - Lösningar vid tågång

## Indy 2 Stage - Solid

### Indikationer:

- Strama/spastiska plantarflexorer
- Oförmåga att få upp foten till 90° med sträckt knä.
- Pronation eller hyperextension när hälen är i golvet.



## Indy 2 Stage - Ledad, PLS, Assisterad Dorsalflexion

### Indikationer:

- Strama/spastiska plantarflexorer
- Förmåga att få upp foten till 90° med knäet sträckt
- Barnet kan få ner foten utan överdriven pronation eller hyperextension



## Tågångs SMO

### Indikationer:

- Konsekvent tågång
- Förmåga att få upp foten till 90° med sträckt knä
- Tågång mer än 50 % av tiden (oförändrat med skor)
- Viktförskjutning framåt och brist på lateral tyngdförskjutning
- Sensoriska nedsättningar



## SMO

### Indikationer:

- Kortvarig tågång
- Förmåga att få upp foten till 90° med sträckt knä.
- Överdriven pronation
- Tågång mer än 50 % av tiden (förbättring med skor)
- Viktförskjutning framåt och brist på lateral tyngdförskjutning
- Sensoriska nedsättningar



## Viktiga överväganden

- Ålder
- Rörelseomfång
- Primära nedsättningar
- Grovmotorisk funktionsnivå
- %-del av tiden i tågång
- Använd anamneshistorik
- Primär nedsättning





## SureStep SMO

SureStep är en dynamisk fotortos avsedd för barn. Ortosen motverkar pronation i fot och fotled hos barn med låg muskeltonus. Koordination och balans förbättras. SureStep kan användas med en vanlig sko. Är framställd av en mycket lätt och tunn plast. Tillverkas efter individuellt mått.

**Användningsområden:** Moderat eller uttalad pronation av fotbladet (plano-valgus) tillsammans med en av följande: låg muskeltonus, slappa ligament, försenad gång, dålig balans, trötta fötter, om barnet undviker att gå.

**Kontraindikationer:** Kontrakturer - foten skall nå neutralläge (90°) vid passiv manipulation, förhöjd muskeltonus, spasticitet.

**Övrigt:** SureStep tillverkas i USA efter mått. Om ni har frågat om måtttagning kontakta din ortpedingenjör eller Kundsupport på Camp Scandinavia.

| Art. nr. | Modell                         | Typ          | Förp. | Vikt           |
|----------|--------------------------------|--------------|-------|----------------|
| 28633    | Surestep SMO, Standard         | Måttbeställd | Par   | upp till 36 kg |
| 28634    | Surestep SMO, Standard         | Måttbeställd | Styck | upp till 36 kg |
| 28732    | Open Heel Moulded Inner Boot   | Tillval      | Styck |                |
| 28733    | Toe Walking Extension          | Tillval      | Styck |                |
| 28734    | Club Foot Trim Lines           | Tillval      | Styck |                |
| 28735    | Metatarsus Adductus Trim Lines | Tillval      | Styck |                |
| 28635    | Måttväska                      |              |       |                |
| 93300    | Måttväska för utlåning         |              |       |                |

## SureStep BigShot SMO

Då många barn övergår från Surestep till en mindre ortos är en del barn i behov av ett fortsatt maximalt stöd för stabilitet. För dessa har vi tagit fram BigShot. Denna ortos har samma flexibilitet som SureStep systemet och kan användas av de barn som vuxit ur SureStep eller som närmar sig viktgränsen på 36 kg. Den mjuka silikonliknande innerhysan gör ortosen bekväm och den yttre flexibla ramen av plast ger ett flexibelt stöd.

**Användningsområden:** Moderat eller uttalad pronation av fotbladet (plano-valgus) tillsammans med en av följande: låg muskeltonus, slappa ligament, försenad gång, dålig balans, trötta fötter, om barnet undviker att gå, >36 kg.

**Kontraindikationer:** Kontrakturer- Foten skall nå neutralläge (90°) vid passiv manipulation, förhöjd muskeltonus, spasticitet.

**Övrigt:** SureStep BigShot tillverkas i USA efter mått. Om ni har frågat om måtttagning kontakta din ortpedingenjör eller Kundsupport på Camp Scandinavia. I undantagsfall kan en gipsavgjutning behövas. I förekommande fall kommer Camp att ta kontakt med er efter ordern.



| Art. nr. | Modell                         | Typ          | Förp. | Vikt       |
|----------|--------------------------------|--------------|-------|------------|
| 28636    | Surestep Big Shot              | Måttbeställd | Par   | Över 36 kg |
| 28636    | Surestep Big Shot              | Måttbeställd | Styck | Över 36 kg |
| 28736    | Surestep Big Shot Lite         | Måttbeställd | Par   | 22 - 40 kg |
| 28737    | Surestep Big Shot Lite         | Måttbeställd | Styck | 22 - 40 kg |
| 28732    | Open Heel Moulded Inner Boot   | Tillval      | Styck |            |
| 28733    | Toe Walking Extension          | Tillval      | Styck |            |
| 28734    | Club Foot Trim Lines           | Tillval      | Styck |            |
| 28735    | Metatarsus Adductus Trim Lines | Tillval      | Styck |            |



## SureStep Advance

SureStepAdvance är en SMO som går upp på benets baksida för att hjälpa till att reducera sagital instabilitet, motverka dorsiflexion/plantarflexion, underlätta självständigt stående och förbättrar proprioceptionen jämfört med en traditionell ortos. För övrigt har ortosen SureSteps alla fördelar. Detta unika ändringsbara system uppmuntrar barnet att övergå från assisterat stående till självständigt stående genom att stabilisera fötterna och fotlederna utan att immobilisera dem. När barnet börjar förflytta sig och behov uppstår av ökad rörlighet och lägre profil på ortos kan SureStep Advance lätt ändras till en SureStep SMO.

**Användningsområden:** Pronation, låg tonus, instabilitet i tre plan vid belastning, oförmåga att bibehålla ett självständigt stående, mild tågång.

**Kontraindikationer:** Förhöjd muskeltonus, spasticitet, uttalad tågång.

| Art. nr. | Modell      | Förp. |
|----------|-------------|-------|
| 28639    | Gips & Mått | Par   |
| 28639    | Gips & Mått | Styck |

## SureStep Indy 2 Stage

En ortos med unik design, utvecklad så att barn kan uppnå sin rörelseförmåga från flera olika nivåer. Ortosen finns i två utföranden; Solid, som är utan led, och Ledad. Denna unika tvåstegs-ortos (en ortos inuti en annan ortos) gör det möjligt att använda Surestep oberoende av AFO'n. Den tillåter barnet att förflytta sig på flera olika sätt utan att hämma den normala muskelfunktionen. När de båda ortoserna används samtidigt, låser sig SMO'n säkert inuti AFO'n och omvandlar därmed den dynamiska SMO'n till en AFO som ger stabilitet i tre plan utan att begränsa den normala användningen av fotens inre muskulatur. Indy 2 Stage är idealisk för barn som behöver proximalt stöd av en AFO, för att uppnå ett oberoende stående, men som fortfarande har glädje av en SMO för att kunna krypa och ta sig upp till stående aktiviteter på rätt sätt. Under tiden som dessa barn utvecklas och börjar ta självständiga steg med sin AFO kan du fortsätta att arbeta med att förbättra rörelsemönster och muskelstyrka med SMO'n för att uppnå en smidigare övergång till en minskad användning av ortoser. Barn med funktionshinder som leder till att de blir tröttare under dagen, kan börja att använda SMO på morgonen för att bibehålla sina funktionella muskelgrupper. Senare under dagen kan AFO-delen läggas till för att bibehålla ett stabilt och funktionellt gångmönster.

**Användningsområden:** Hyperton fot och ankel. Hypoton fot och ankel. Barn som behöver hjälp att förflytta sig. Svårighet att uppnå ett stabilt stående. Sagital och frontal instabilitet/svagheter. Låg proprioceptiv medvetenhet.

**Kontraindikationer:** Fotledskontrakturer som begränsar passiv dorsalflektion >90 grader. Svår spasticitet.



| Art. nr. | Modell             | Storlek  | Förp. |
|----------|--------------------|----------|-------|
| 28631    | Solid, Gips & Mått |          | Par   |
| 28631    | Solid, Gips & Mått |          | Styck |
| 28260    | Ledad, Gips & Mått | <18 kg   | Styck |
| 28260    | Ledad, Gips & Mått | 18-40 KG | Styck |

Besök  
ALLARDAFO.com  
och läs mer om:

- Historien och bakgrunden till hur ToeOFF® föddes och hur alla produkter kommit fram genom åren. Varje produkt har sin egen unika historia.
- **40 REASONS** varför Allard AFO är marknadsledande.
- Varje produkt presenteras med sina respektive egenskaper.
- Sidan finns på Svenska och Engelska.

allard|AFO  
Support for Better Life!





## ATX Foot Lifter droppfotsortos

ATX Foot Lifter är en textil droppfotsortos för brukare som enbart har en lindrigare droppfot och behöver en enkel ortoslösning som hjälper till att hålla foten uppe vid gång, ute och inne. Ortosen består av en textil ankeldel som fästs ovanför malleolerna. I textildelens bakkappa sitter en gelplatta för att minska trycket mot hälsenan. En platta med krok placeras under snörningen på skon (mellan snörningen och plösen). Det elastiskt funktionsbandet sätts i kroken och fästs sedan på vardera sida på den textila ankeldelen. Draget regleras av placeringen av kroken samt var kardborr-plattorna fästes mot textilen. Om ATX Foot Lifter skall användas utan sko finns en separat textil fotdel att köpa som tillbehör.

**Användningsområden:** Att ge dorsal flexion för en slapp fot och bidra till push-off vid gång. Avsedd att användas vid lättare fall av droppfot.

| Art. nr. | Modell             | Storlek    | Mått 1   | Mått 2   | Vä/Hö  |
|----------|--------------------|------------|----------|----------|--------|
| 28168    | ATX Foot Lifter    | X-Small    | 13-17 cm |          | Bilat. |
| 28168    | ATX Foot Lifter    | Small      | 17-21 cm |          | Bilat. |
| 28168    | ATX Foot Lifter    | Medium     | 21-25 cm |          | Bilat. |
| 28168    | ATX Foot Lifter    | Large      | 25-29 cm |          | Bilat. |
| 28169    | ATX Fot-del        | Small      |          | 17-21 cm | Vä/Hö  |
| 28169    | ATX Fot-del        | Medium     |          | 21-25 cm | Vä/Hö  |
| 28169    | ATX Fot-del        | Large      |          | 25-29 cm | Vä/Hö  |
| 28170    | ATX skostöd        | En storlek |          |          | Bilat. |
| 28171    | ATX elastiskt band | Small      |          |          | Bilat. |
| 28171    | ATX elastiskt band | Medium     |          |          | Bilat. |
| 28171    | ATX elastiskt band | Large      |          |          | Bilat. |
| 28172    | Extra krokar 2 st  | En storlek |          |          | Bilat. |



**Mått 1:** Omkrets fotleden, ovanför malleolen.

**Mått 2:** Omkrets runt foten, över fotryggens högsta punkt

**Mått:** Plastdelens längd

## NAVIGAIT™

NAVIGAIT™ är en ortos utvecklad för att hjälpa personer med mild droppfot till bättre dorsalflexion. Den polstrade ortos-plastdelen sitter bekvämt mot benets framsida och har en avtagbar tvättbar polstring. Graden av dorsalflexion justeras genom krokens placering i snörningen samt genom justering av den övre delen av bandet. Den smidiga designen gör den osynlig under långbyxor. NAVIGAIT finns i tre storlekar. Plastdelen kan vid behov trimmas något i över- och underkant. Som tillbehör finns 4-Foot, en produkt avsedd att användas tillsammans med NAVIGAIT vid de tillfällen då brukaren inte använder skor. Produkten kan också användas i sandaler där det inte finns något annat att fästa i. NAVIGAIT 4-Foot skall sitta på framfoten. Kombinationen av elastiska och rigida material med en silikonrand på insidan gör att den sitter säkert på plats.

**Användningsområden:** NAVIGAIT är avsedd att stödja foten när möjligheten till aktiv dorsalflexion är reducerad till följd av neurologiska tillstånd så som Stroke, MS eller Post- polio syndrom. Använd NAVIGAIT 4-Foot tillsammans med NAVIGAIT vid de tillfällen då brukaren inte använder skor.

**Kontraindikationer:** NAVIGAIT skall inte användas av personer som uppvisar spasticitet eller har kraftiga ödem.

**Övrigt:** NAVIGAIT adresserar inte fotfelställningar och deformiteter; dessa skall behandlas av skor och/eller inlägg vid behov. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia.

| Art. nr. | Modell                   | Storlek       | Mått     | Vä/Hö  |
|----------|--------------------------|---------------|----------|--------|
| 28410    | NAVIGAIT                 | X-Small       | 23 cm    | Bilat. |
| 28410    | NAVIGAIT                 | Small/Medium  | 26,5 cm  | Bilat. |
| 28410    | NAVIGAIT                 | Large/X-Large | 30 cm    | Bilat. |
| 28415    | 4-foot                   | Small         | 21-23 cm | Bilat. |
| 28415    | 4-foot                   | Medium        | 23-26 cm | Bilat. |
| 28415    | 4-foot                   | Large         | 26-29 cm | Bilat. |
| 28412    | Extra gummiband med krok | X-Small       |          | Bilat. |
| 28412    | Extra gummiband med krok | Small/Medium  |          | Bilat. |
| 28412    | Extra gummiband med krok | Large/X-Large |          | Bilat. |
| 28413    | Kraftigare gummiband     | X-Small       |          | Bilat. |
| 28413    | Kraftigare gummiband     | Small/Medium  |          | Bilat. |
| 28413    | Kraftigare gummiband     | Large/X-Large |          | Bilat. |
| 28414    | Extra bandset            | X-Small       |          | Bilat. |
| 28414    | Extra bandset            | Small/Medium  |          | Bilat. |
| 28414    | Extra bandset            | Large/X-Large |          | Bilat. |

# ALLARD AFO MUSKELFUNKTIONS GUIDE

Denna guide är baserad på utveckling, återkoppling från utprovare och feedback från patienter.

Muskelfunktion:

Ingen eller begränsad

Moderat

Normal funktion

## Mer **DISTAL** svaghet



YPSILON<sup>®</sup>flow<sup>1/2</sup>



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Rörelseomfång            | ●●●●○ |
| A/P                      | ●●○○○ |
| M/L                      | ●●○○○ |
| Assisterad Dorsalflexion | ●●○○○ |
| Spasticitetskontroll     | ●●○○○ |



ToeOFF<sup>®</sup>flow<sup>2 1/2</sup>



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Rörelseomfång            | ●●●○○ |
| A/P                      | ●●●○○ |
| M/L                      | ●●●○○ |
| Assisterad Dorsalflexion | ●●●○○ |
| Spasticitetskontroll     | ●●●○○ |

## Mer **PROXIMAL** svaghet



ToeOFF<sup>®</sup>2 1/2



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Rörelseomfång            | ●●○○○ |
| A/P                      | ●●○○○ |
| M/L                      | ●●○○○ |
| Assisterad Dorsalflexion | ●●○○○ |
| Spasticitetskontroll     | ●●○○○ |



BLUEROCKER<sup>®</sup>2 1/2



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Rörelseomfång            | ●○○○○ |
| A/P                      | ●●●●● |
| M/L                      | ●●●●● |
| Assisterad Dorsalflexion | ●●●●● |
| Spasticitetskontroll     | ●●●●● |

## ALLARD CUSTOM AFO

I de fall när individuella behov faller utanför ovanstående parametrar erbjuder Camp Scandinavia tillverkning efter individuella behov efter skanning, mått eller avgjutning. Kontakta kundsupport för mer information eller besök [camp.se](http://camp.se).



## Ypsilon® Flow<sup>1/2</sup>

Ypsilon® Flow<sup>1/2</sup> är droppfotsortosen för den aktiva patienten som har droppfot och/eller behöver mindre stöd i ståfasen. Ypsilon® Flow<sup>1/2</sup> har en lägre klackhöjd, endast 7 mm i alla storlekarna. Den har även en lägre kurvatur på fotbladet vilket ger mer plats i tåboxen och en smidigare avrullning. Den har utvecklats för att tillåta optimalt rörelse- omfång och ge en dynamisk "toe-off" funktion samtidigt som det är möjligt för muskler att arbeta mer aktivt. Fotbladet följer fotens form och med hjälp av golvreaktionskraften kan användaren utnyttja "toe-off" effekten med mindre styrka. Den Y-formade fästpunkten ligger på var sida om tibiakammen och minskar risken för tryck mot prominenser och mot tibiakammen. Därför är detta en ortos för den mer aktiva brukaren som ställer höga krav på funktion och rörlighet.

**Användningsområden:** Droppfot med stabil ankel i kombination med ingen till mild spasticitet, patienter som behöver mer flexibilitet och mindre stöd.

**Kontraindikationer:** Kraftiga ödem, diabetes med bensår; mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

**Övrigt:** Mer information om utprovning, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction. Ypsilon® Flow levereras med komplett bandset.

| Art. nr. | Modell                       | Storlek    | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö  | Skostorlek |
|----------|------------------------------|------------|------------------|---------|--------|------------|
| 28880    | Ypsilon® Flow <sup>1/2</sup> | Small      | 23 cm            | 35,5 cm | Vä/Hö  | 35-38      |
| 28880    | Ypsilon® Flow <sup>1/2</sup> | Medium     | 24,5 cm          | 36,5 cm | Vä/Hö  | 38-42      |
| 28880    | Ypsilon® Flow <sup>1/2</sup> | Large      | 27 cm            | 37,5 cm | Vä/Hö  | 42-45      |
| 28880    | Ypsilon® Flow <sup>1/2</sup> | X-Large    | 28,5 cm          | 38,5 cm | Vä/Hö  | >45        |
| 28884    | Polstring                    | S/M/L      |                  |         | Bilat. |            |
| 28884    | Polstring                    | X-Large    |                  |         | Bilat. |            |
| 28885    | Band                         | En storlek |                  |         | Bilat. |            |

## ToeOFF® Flow2½

Genom att kombinera vår långa erfarenhet och utveckling inom tillverkningsteknik med de önskemål som vi fått genom åren har vi nu utvecklat ytterligare en ny Allard AFO, ToeOFF® Flow. ToeOFF® har sedan introduktionen 1997 varit ledande med sin unika funktion och sina dynamiska egenskaper. ToeOFF® Flow2½ har ett nytt unikt recept, med nya egenskaper och fördelar; Lägre klackhöjd, ca 7mm i alla storlekar, mer ROM i A-P plan och slätare yta under fotbladet. Den har även en lägre kurvatur på fotbladet vilket ger mer plats i tåboxen och en smidigare avrullning.

ToeOFF® Flow2½ har alla Mikrofixdelarna monterade vid leverans för enklare montering av SoftKIT™, ComfortKIT™ eller CoverKIT™. Banden är de samma som för ToeOFF® 2.0. Med ToeOFF® Flow2½ blir det bättre passform i moderna skor med lägre klackhöjd och patienten får dessutom en skena med lägre profil i sulan som dessutom är mer dynamisk i A/P planet.



**Användningsområden:** Droppfot kombinerad med ingen till måttlig spasticitet, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll och tåamputationer. För ytterligare information om användningsområden och kontraindikationer se AFO Professional Instruction.

**Övrigt:** Mer information om utprovning, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction. Alla Allard AFO levereras med komplett bandset. Denna modell finns även i ett flertal andra varianter där SoftKIT/ ComfortKIT och band är monterade vid leverans – kontakta kundsupport för mer information om dessa modeller.

| Art. nr. | Modell                 | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö | Skostorlek |
|----------|------------------------|---------|------------------|---------|-------|------------|
| 28960    | ToeOFF® Flow2½         | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28960    | ToeOFF® Flow2½         | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28960    | ToeOFF® Flow2½         | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28960    | ToeOFF® Flow2½         | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28960    | ToeOFF® Flow2½         | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |
| 28962    | ToeOFF Flow2½ m D-ring | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28962    | ToeOFF Flow2½ m D-ring | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28962    | ToeOFF Flow2½ m D-ring | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28962    | ToeOFF Flow2½ m D-ring | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28962    | ToeOFF Flow2½ m D-ring | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |



## ToeOFF® 2 1/2

Droppfotsortosen ToeOFF® 2 1/2 har samma dynamiska funktion och stabilitet som en ToeOFF® 2.0 men med en klackhöjd på 7 mm, för att passa bättre i moderna skor med lägre klack. Den har även mindre tålyft vilket resulterar i mer utrymme i tåboxen i skon. Allt sedan starten 1997 har Allard AFO varit ledande med sina unika funktioner och dynamiska egenskaper.

ToeOFF® 2 1/2 har alla MikroFIX delarna monterade på insidan vid leverans för en snabb och enkel montering av polstringen. Bandlösningen är samma som på 2.0, tillverkad av ett slitstarkt material och kan levereras med eller utan D-ring. Banden kan monteras så de försluts antingen inåt eller utåt på ortosen. Det är alltid viktigt att anpassa alla Allard AFO till skons klackhöjd. Läs mer om detta i Allard AFO Professional Instructions.

**Användningsområden:** Droppfot kombinerad med ingen till måttlig spasticitet, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll. Kan användas vid tåamputationer.

**Kontraindikationer:** Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

**Övrigt:** Mer information om utprovning, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction. Alla Allard AFO levereras med komplett bandset. Denna modell finns även i ett flertal andra varianter där SoftKIT™/ ComfortKIT™ och band är monterade vid leverans – kontakta kundsupport för mer information om dessa modeller. Påsen som medföljer till produkten är tillverkad av återvunna PET-flaskor.

| Art. nr. | Modell                 | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö | Skostorlek |
|----------|------------------------|---------|------------------|---------|-------|------------|
| 28980    | ToeOFF® 2 1/2          | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28980    | ToeOFF® 2 1/2          | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28980    | ToeOFF® 2 1/2          | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28980    | ToeOFF® 2 1/2          | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 38-42      |
| 28980    | ToeOFF® 2 1/2          | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |
| 28982    | ToeOFF® 2 1/2 m D-ring | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28982    | ToeOFF® 2 1/2 m D-ring | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28982    | ToeOFF® 2 1/2 m D-ring | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28982    | ToeOFF® 2 1/2 m D-ring | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28982    | ToeOFF® 2 1/2 m D-ring | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |

## ToeOFF® 2½ Addition

ToeOFF® 2½ addition är i grunden samma produkt som ToeOFF® 2½ men har fått ett ytskikt av ett färgat material för att ge produkten ett annat utseende. Addition finns i tre färgställningar; Beige, Svart och kamoflage (Camo). Ytan på Addition gör att kläder lättare glider mot materialet samtidigt som hela produkten får en annan färg hela vägen ner till slutet av bygeln. Addition finns endast med D-ring band. Mikrofix delarna som banden fäster i sitter på ortosens insida tillsammans med Mikrofix delarna för montering av polstringen (SoftKIT eller ComfortKIT). ToeOFF® 2½ addition i beige och kamoflage har en mönstrad yta. Varje ortos får därför ett unikt mönster och det kan skilja något mellan olika ortoser.



**Användningsområden:** Droppfot kombinerad med ingen till måttlig spasticitet, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll och tåamputationer.

**Kontraindikationer:** Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

**Övrigt:** Mer information om utprovning, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction.

| Art. nr. | Modell         | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö | Skostorlek |
|----------|----------------|---------|------------------|---------|-------|------------|
| 28954    | Svart m D-ring | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28954    | Svart m D-ring | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28954    | Svart m D-ring | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28954    | Svart m D-ring | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28954    | Svart m D-ring | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |
| 28955    | Camo m D-ring  | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28955    | Camo m D-ring  | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28955    | Camo m D-ring  | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28955    | Camo m D-ring  | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28955    | Camo m D-ring  | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |
| 28956    | Beige m D-ring | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28956    | Beige m D-ring | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28956    | Beige m D-ring | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28956    | Beige m D-ring | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28956    | Beige m D-ring | X-Large | 28,5 cm          | 43 cm   | Vä/Hö | >45        |





## ToeOFF® 2.0

Genom att kombinera vår långa erfarenhet och utveckling inom tillverkningsteknik med de önskemål som vi fått genom åren har vi nu utvecklat ToeOFF® 2.0. ToeOFF® har sedan introduktionen 1997 varit ledande med sin unika funktion och sina dynamiska egenskaper. ToeOFF® 2.0 har samma egenskaper och funktioner som original ToeOFF®, och dessutom ytterligare utveckling av både form och funktion. Formen på 2.0 har ändrats för att ge en smidigare passform, bättre geometri och en slätare yta. Dessutom är alla Mikrofix delar monterade redan vid leverans för en snabbare och enklare montering av SoftKIT eller ComfortKIT. Banden har en ny lösning och är tillverkade av ett nytt slitstarkt material. Dessutom finns det band med eller utan D-ring. Banden kan monteras för vänster eller höger sida beroende av patientens funktionsbehov. Ytterligare en nyhet med 2.0 är att storlek X-Large är 2 cm högre och därmed passar bättre för ett längre underben. De dynamiska egenskaperna är inte ändrade utan den graderade dynamiska funktionen och stabiliteten mellan de olika storlekarna är den samma som tidigare. ToeOFF® 2.0 har en klackhöjd som är mellan 12 - 15 mm beroende av storlek.

**Användningsområden:** Droppfot kombinerad med ingen till måttlig spasticitet, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll och tåamputationer.

**Kontraindikationer:** Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

**Övrigt:** Mer information om utprovning, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction. Alla ToeOFF® levereras med komplett bandset. På ToeOFF® med Velcro har det hårda kadborrhbandet förlimrats på ortosen. Denna modell finns även i ett flertal andra varianter där SoftKIT/ ComfortKIT och band är monterade vid leverans – kontakta kundsupport för mer information om dessa modeller.

| Art. nr. | Modell              | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö | Skostorlek |
|----------|---------------------|---------|------------------|---------|-------|------------|
| 28920    | ToeOFF 2.0          | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28920    | ToeOFF 2.0          | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28920    | ToeOFF 2.0          | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28920    | ToeOFF 2.0          | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28920    | ToeOFF 2.0          | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |
| 28922    | ToeOFF 2.0 m D-ring | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28922    | ToeOFF 2.0 m D-ring | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28922    | ToeOFF 2.0 m D-ring | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28922    | ToeOFF 2.0 m D-ring | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28922    | ToeOFF 2.0 m D-ring | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |

## ToeOFF® Short

ToeOFF® Kort är en specialmodell som har kortare tibiadel, bredare fotblad över metatarsallederna, lägre tåsprängning och lägre klackhöjd än ToeOFF® originalortos. Ska användas tillsammans med polsring. ToeOFF® Kort har en klackhöjd som är 7 mm i alla storlekar.

**Användningsområden:** Droppfot kombinerad med ingen till måttlig spasticitet, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll och tåamputationer.

**Kontraindikationer:** Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

**Övrigt:** Mer information om utprovning, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction.

| Art. nr. | Modell             | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö | Skostorlek |
|----------|--------------------|---------|------------------|---------|-------|------------|
| 28990    | ToeOFF® Kort Svart | Small   | 21,5 cm          | 29,5 cm | Vä/Hö | 32-35      |
| 28990    | ToeOFF® Kort Svart | Medium  | 23,5 cm          | 32 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28990    | ToeOFF® Kort Svart | Large   | 25,5 cm          | 34 cm   | Vä/Hö | 38-42      |





## BlueROCKER® 2.0

BlueROCKER® är vår mest rigida och stabila droppfotsortos. Denna har nu fått ett uppdaterat utseende som BlueROCKER® 2.0. Ortosens form har förändrats till en bättre geometri och en slätare yta. Mikrofix delarna som banden fäster i sitter på ortosens insida tillsammans med Mikrofix delarna för montering av polstringen (SoftKIT eller ComfortKIT). Även banden har fått ny design och finns dessutom både med och utan D-ring. Banden kan enkelt monteras på önskad sida beroende av patientens funktionsbehov. Ytterligare en förändring för 2.0 är att storlek X-Large är ytterligare 2 cm högre än en Large d.v.s. 45 cm hög. BlueROCKER® 2.0 har en klackhöjd som är mellan 12 - 15 mm beroende av storlek.

**Användningsområden:** Droppfot i kombination med ingen till svår spasticitet, nedsatt knä- och höftkontroll, svaghet eller funktionsbortfall i benets muskelgrupper, nedsatt balans, bilateralt funktionsbortfall och delfotsamputation.

**Kontraindikationer:** Kraftiga ödem, diabetes med bensår och mycket nedsatt sensibilitet.

**Övrigt:** Mer information om utprovning, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction. BlueROCKER® levereras med komplett bandset. Denna modell finns även i ett flertal andra varianter där SoftKIT/ ComfortKIT och band är monterade vid leverans – kontakta kundsupport för mer information om dessa modeller”.

| Art. nr. | Modell                  | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö | Skostorlek |
|----------|-------------------------|---------|------------------|---------|-------|------------|
| 28940    | BlueROCKER 2.0          | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28940    | BlueROCKER 2.0          | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28940    | BlueROCKER 2.0          | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28940    | BlueROCKER 2.0          | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28940    | BlueROCKER 2.0          | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |
| 28942    | BlueROCKER 2.0 m D-ring | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28942    | BlueROCKER 2.0 m D-ring | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28942    | BlueROCKER 2.0 m D-ring | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28942    | BlueROCKER 2.0 m D-ring | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28942    | BlueROCKER 2.0 m D-ring | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |

## BlueROCKER® 2½

Droppfotsortosen BlueROCKER® 2 ½ har samma dynamiska funktion och stabilitet som en BlueROCKER® 2.0 men med en klackhöjd på 7 mm, för att passa bättre i moderna skor med lägre klack. Den har även mindre tålyft vilket resulterar i mer utrymme i tåboxen i skon. Allt sedan starten 1997 har Allard AFO varit ledande med sina unika funktioner och dynamiska egenskaper.

BlueROCKER® 2 ½ har alla MikroFIX delarna monterade på insidan vid leverans för en snabb och enkel montering av polstringen. Bandlösningen är samma som på 2.0, tillverkad av ett slitstarkt material och kan levereras med eller utan D-ring. Banden kan monteras så de försluts antingen inåt eller utåt på ortosen. Det är alltid viktigt att anpassa alla Allard AFO till skons klackhöjd. Läs mer om detta i Allard AFO Professional Instructions.



**Användningsområden:** Droppfot i kombination med ingen till svår spasticitet, nedsatt knä- och höftkontroll, svaghet eller funktionsbortfall i benets muskelgrupper, nedsatt balans, bilateralt funktionsbortfall och delfotsamputation.

**Kontraindikationer:** Kraftiga ödem, diabetes med bensår och mycket nedsatt sensibilitet.

**Övrigt:** Mer information om utprovning, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction. BlueROCKER® levereras med komplett bandset. "Denna modell finns även i ett flertal andra varianter där SoftKIT/ ComfortKIT och band är monterade vid leverans – kontakta kundsupport för mer information om dessa modeller". Påsen som medföljer till produkten är tillverkad av återvunna PET-flaskor.

| Art. nr. | Modell                  | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö | Skostorlek |
|----------|-------------------------|---------|------------------|---------|-------|------------|
| 28970    | BlueROCKER® 2½          | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28970    | BlueROCKER® 2½          | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28970    | BlueROCKER® 2½          | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28970    | BlueROCKER® 2½          | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28970    | BlueROCKER® 2½          | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |
| 28972    | BlueROCKER® 2½ m D-ring | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28972    | BlueROCKER® 2½ m D-ring | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28972    | BlueROCKER® 2½ m D-ring | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28972    | BlueROCKER® 2½ m D-ring | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28972    | BlueROCKER® 2½ m D-ring | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |



## BlueROCKER® Short

Short är specialmodeller som är utvecklade för att passa personer som har kortare tibia och bredare fot över metatarsal-lederna. Polstring ska alltid användas för god patientkomfort.

Short har en klackhöjd som är 7 mm i alla storlekar.

**Användningsområden:** Droppfot i kombination med svaga plantarfexorer, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll. Diagnoser som Stroke, MS, Postpolo, Muskeldystrofi och andra neurologiska sjukdomar. Kan även användas vid bilaterala problem och vid delfots-amputationer (mest proximala nivå är Chopart).

**Kontraindikationer:** Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

**Övrigt:** Mer information om utprovning, indikationer, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction.

| Art. nr. | Modell            | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö | Skostorlek |
|----------|-------------------|---------|------------------|---------|-------|------------|
| 28995    | BlueROCKER® Short | Small   | 21,5 cm          | 29,5 cm | Vä/Hö | 32-35      |
| 28995    | BlueROCKER® Short | Medium  | 23,5 cm          | 32 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28995    | BlueROCKER® Short | Large   | 25,5 cm          | 34 cm   | Vä/Hö | 38-42      |

## Custom ToeOFF®

## Custom BlueROCKER®

I de fall ToeOFF® och BlueROCKER® inte motsvarar din patients behov går det att specialbeställa en individuellt anpassad Custom ToeOFF® eller Custom BlueROCKER®. Detta blir då en icke CE-märkt produkt. Beställningen kan göras på några olika sätt, skanning, positiv gips, negativ gips (plastgips eller STS-sock) eller efter mått. Utifrån specifikationer tillverkas en ortos som följer gängse ToeOFF®/BlueROCKER® former och egenskaper. Vid beställning finns en rad olika val som kan göras beträffande klackhöjd, stabilitet, avlastning. En speciell blankett skall fyllas i vid beställning. Denna finns att ladda ner under dokument på produkten på hemsidan.

### Övrigt:

Kontakta kundsupport för mer information om blanketter och tillvägagångssätt för beställning av en individuellt tillverkad Custom ToeOFF®- eller BlueROCKER®.

| Art.nr. | Modell             |
|---------|--------------------|
| 28460   | Custom ToeOFF®     |
| 28480   | Custom BlueROCKER® |



Ni kan även beställa Custom digitalt via "Allard Configurator" från vår hemsida. Kontakta kundsupport om ni behöver licens.

Custom ToeOFF®

Custom BlueROCKER®

När du beställer en Custom ToeOFF® eller Custom BlueROCKER® så är det en del saker som du behöver ta ställning till. Här nedan har vi sammanställt de olika valen som du kan göra och hur detta påverkar totalpriset. Det finns ett speciellt beställningsformulär för dessa produkter. Formuläret finns att ladda ner på Camps hemsida bland produktinformation som ligger på respektive produkt och även i Download Center under Allard AFO.

| Custom ToeOFF® & Custom BlueROCKER® |                               |                                       |  |                          |           |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------|
| Custom ToeOFF®<br>Art.nr.           | Custom BlueROCKER®<br>Art.nr. | Beskrivning                           |  | Tilläggs<br>kostnad      |           |
| 28460 1190-1310                     | 28480 1190-1310               | Custom ToeOFF® & BlueROCKER®, vänster |  | Fotblad 190,195 - 310 mm | Grundpris |
| 28460 2190-2310                     | 28480 2190-2310               | Custom ToeOFF® & BlueROCKER®, höger   |  | Fotblad 190,195 - 310 mm | Grundpris |
| 28463 0001                          | 28483 0001                    | Fotbladsbredd                         |  | + 5 mm                   | Nej       |
| 28463 0002                          | 28483 0002                    | Fotbladsbredd                         |  | - 5 mm                   | Nej       |
| 28464 0005                          | 28484 0005                    | Klackhöjd                             |  | 5 mm                     | Nej       |
| 28464 0007                          | 28484 0007                    | Klackhöjd                             |  | 7 mm                     | Nej       |
| 28464 0010                          | 28484 0010                    | Klackhöjd                             |  | 10 mm                    | Nej       |
| 28464 0012                          | 28484 0012                    | Klackhöjd                             |  | 12,5 mm                  | Nej       |
| 28464 0015                          | 28484 0015                    | Klackhöjd                             |  | 15 mm                    | Nej       |
| 28464 0020                          | 28484 0020                    | Klackhöjd                             |  | 20 mm                    | Nej       |
| 28464 0025                          | 28484 0025                    | Klackhöjd                             |  | 25 mm                    | Nej       |
| 28464 0030                          | 28484 0030                    | Individuell klackhöjd                 |  | högre än 25 mm           | Ja        |
| 28465 0000                          | 28485 0000                    | Avlastning                            |  | Tibiakammen              | Nej       |
| 28465 0003                          | 28485 0003                    | Avlastning 3 mm                       |  | Tibiakammen              | Nej       |
| 28465 0005                          | 28485 0005                    | Avlastning 5 mm                       |  | Tibiakammen              | Nej       |
| 28466 0000                          | 28486 0000                    | Individuell avlastning                |  |                          | Ja        |
| 28468 0001                          | 28488 0001                    | Styvhet A/P                           |  | + 1 lager fiber          | Ja        |
| 28468 0002                          | 28488 0002                    | Styvhet A/P                           |  | + 2 lager fiber          | Ja        |
| 28468 0003                          | 28488 0003                    | Standard framfot/styvare häl          |  | + 1 lager fiber          | Ja        |
| 28468 0004                          | 28488 0004                    | Standard häl/styvare framfot          |  | + 1 lager fiber          | Ja        |
| 28469 0001                          | 28489 0001                    | Styvhet A/P                           |  | - 1 lager fiber          | Ja        |
| 28469 0002                          | 28489 0002                    | Styvhet A/P                           |  | - 2 lager fiber          | Ja        |
| 28469 0003                          | 28489 0003                    | Standard framfot/mindre styv häl      |  | - 1 lager fiber          | Ja        |
| 28469 0004                          | 28489 0004                    | Standard häl/mindre styv framfot      |  | - 1 lager fiber          | Ja        |
| 28470 0001                          | 28490 0001                    | Stabilitet M/L                        |  | + 1 lager fiber          | Ja        |
| 28470 0002                          | 28490 0002                    | Stabilitet M/L                        |  | + 2 lager fiber          | Ja        |
| 28471 0001                          | 28491 0001                    | Stabilitet M/L                        |  | - 1 lager fiber          | Ja        |
| 28471 0002                          | 28491 0002                    | Stabilitet M/L                        |  | - 2 lager fiber          | Ja        |
| 28473 0000                          | 28493 0000                    | Avlastning fotrygg                    |  | Högre insteg             | Nej       |



## Custom ToeOFF®

Det är möjligt att beställa en Custom ToeOFF® för patienter som kräver en annan form p.g.a. vadatrofi/hypertrofi, unik underbensform, annan styvhetsgrad m.m. Beställningen kan göras på olika sätt. Skanning, negativ gips (plastgips eller STS-sock), positivt gips eller efter mått. Vid beställning kan en rad olika tilläggsval göras beträffande klackhöjd, stabilitet, avlastning m.m. En speciell blankett skall fyllas i vid beställning. Blanketten finns att ladda ner under produkten.

**Övrigt:** Kontakta kundsupport för mer information om blanketten och tillvägagångssätt för beställning av en individuellt tillverkad Custom ToeOFF® AFO.

| Art. nr. | Modell         |
|----------|----------------|
| 28460    | Custom ToeOFF® |



## Custom BlueROCKER®

Det är möjligt att beställa en Custom BlueROCKER® för patienter som kräver en annan form p.g.a. vadatrofi/hypertrofi, unik underbensform, annan styvhetsgrad m.m. Beställningen kan göras på olika sätt. Skanning, negativ gips (plastgips eller STS-sock), positivt gips eller efter mått. Vid beställning kan en rad olika tilläggsval göras beträffande klackhöjd, stabilitet, avlastning m.m. En speciell blankett skall fyllas i vid beställning. Blanketten finns att ladda ner under produkten.

**Övrigt:** Kontakta kundsupport för mer information om blanketten och tillvägagångssätt för beställning av en individuellt tillverkad Custom BlueROCKER® AFO.

| Art. nr. | Modell             |
|----------|--------------------|
| 28480    | Custom BlueROCKER® |



# COMBO



## Smidig och unik ortoslösning vid hyperextension i kombination med droppfot.

ToeOFF® har under många år bevisat sin plats både i rehabiliteringsprocessen men också i det dagliga livet och hjälpt många brukare med droppfot till ett bättre gående och ökad livskvalitet. ToeOFF® har ibland kombinerats med knäortoser för att motverka översträckning av knäleden. Nu finns en ortoslösning för detta som direkt kombi-neras med ToeOFF® eller BlueROCKER®.

Comboortosen anpassas individuellt till varje patient. De olika komponenterna kan kombineras beroende på patientens storlek och längd.

- Val av storlek på lårdelen är beroende av hur högt upp på låret denna placeras. Den kan dock inte placeras lägre än ca 10 cm ovan tibiaplatån.
- Val av storlek för kopplingsdelen är beroende av vilken storlek som används av ToeOFF® eller BlueROCKER®.
- Val av storlek på Hyperextensionskrysset bestäms av knävidden.
- Samtliga 5 artiklar behöver beställas för att erhålla en komplett ortos.
- Combo är ej avsedd för patienter med vikt > 150 kg, längd > 2 m.



## ToeOFF®Combo

Combo är en ortos-del speciellt framtagen för behandling av hyperextension i kombination med droppfot. Combo är en förlängning som monteras på en ToeOFF® eller BlueROCKER®. Den unika konstruktionen gör att droppfotsskenan och Combo-delen enkelt kan kopplas isär.

**Användningsområden:** Knäledsinstabilitet, översträckning i kombination med droppfot med ursprung från stroke, post-polio, MS, neuropati etc. Patientvikt max 150 kg. Patients längd max. 2 m.

**Kontraindikationer:** Total avsaknad av ligament i knäet. Totalt Quadricepsbortfall. Patientlängd över 2 meter. Patientvikt över 150 kg. Kraftigt försämrad kognitiv förmåga. OBS: När utprovningen är slutförd får det inte finnas mer än 10° hyperextension kvar i ortosen.



**Knämått 1:** M-L mid-patella

**Knämått 2:** Omkrets 20 cm ovan mid-patella

**Knämått 3:** M-L 20 cm ovan mid-patella

| Art. nr. | Modell                   | Storlek    | Vä/Hö  | Knämått 2  | Knämått 3 | Knämått 1 |
|----------|--------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 28780    | Knäled med skenor (par)  | En storlek |        |            |           |           |
| 28781    | Lårdel                   | Small      | Vä/Hö  |            | 30-40 cm  | 11-15 cm  |
| 28781    | Lårdel                   | Medium     | Vä/Hö  |            | 38-50 cm  | 13-17 cm  |
| 28781    | Lårdel                   | Large      | Vä/Hö  |            | 48-60 cm  | 15-19 cm  |
| 28781    | Lårdel                   | X-Large    | Vä/Hö  |            | 58-70 cm  | 17-21 cm  |
| 28782    | Band, textil och spännen | Small      | Bilat. | 7-10,5 cm  |           |           |
| 28782    | Band, textil och spännen | Medium     | Bilat. | 9,5-13 cm  |           |           |
| 28782    | Band, textil och spännen | Large      | Bilat. | 12,5-16 cm |           |           |
| 28783    | Softkit (2 st)           | Small      |        |            |           |           |
| 28783    | Softkit (2 st)           | Medium     |        |            |           |           |
| 28783    | Softkit (2 st)           | Large      |        |            |           |           |
| 28783    | Softkit (2 st)           | X-Large    |        |            |           |           |
| 28784    | Tibiakoppling            | Small      |        |            |           |           |
| 28784    | Tibiakoppling            | Medium     |        |            |           |           |
| 28784    | Tibiakoppling            | L-XL       |        |            |           |           |



## Prim droppfotsortos

En något mjukare droppfotsortos tillverkad av polypropylen avsedd att användas vid lindriga besvär av droppfot i samband med olika neurologiska diagnoser. Skenan har en "kryss" konstruktion i bakdelen med ett öppet hälparti och öppning över vaden. Ortosen har en bred polstring i överkant som stängs med kardborrband. Det medföljer även ett extra kardborrband som hjälper till att hålla foten på plats i ortosen.

Fotbladet på ortosen kan enkelt klippas till rätt passform efter brukaren fotstorlek.

**Användningsområden:** Lindrig droppfot.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Längd   | Höjd  | Vä/Hö |
|----------|------|---------|---------|-------|-------|
| 71296    | Vit  | Small   | 23 cm   | 29 cm | Vä/Hö |
| 71296    | Vit  | Medium  | 24,5 cm | 31 cm | Vä/Hö |
| 71296    | Vit  | Large   | 26 cm   | 33 cm | Vä/Hö |
| 71296    | Vit  | X-Large | 27,5 cm | 35 cm | Vä/Hö |



## Swedish droppfotsortos

En något stabilare droppfotsortos tillverkad av polypropylen avsedd att användas vid lindriga besvär av droppfot i samband med olika neurologiska diagnoser. Skenan har en "kryss" konstruktion i bakdelen med ett öppet hälparti och öppning över vaden.

Ortosen har en bred polstring i överkant som stängs med kardborrband. Det medföljer även ett extra kardborrband som hjälper till att hålla foten på plats i ortosen.

Fotbladet på ortosen kan enkelt klippas till rätt passform efter brukaren fotstorlek.

**Användningsområden:** Lindrig droppfot.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Längd | Höjd  | Vä/Hö |
|----------|------|---------|-------|-------|-------|
| 71298    | Vit  | Small   | 24 cm | 26 cm | Vä/Hö |
| 71298    | Vit  | Medium  | 27 cm | 29 cm | Vä/Hö |
| 71298    | Vit  | Large   | 28 cm | 34 cm | Vä/Hö |
| 71298    | Vit  | X-Large | 30 cm | 38 cm | Vä/Hö |

## Extra band Allard AFO 2.0, 2½ & Addition

Separata band med eller utan D-ring för Allard AFO modellerna 2.0 och 2½.

Banden kan monteras med öppning medialt eller lateralt.

| Art. nr. | Modell                   | Färg  | Storlek | Förp. |
|----------|--------------------------|-------|---------|-------|
| 28760    | Enkla band               | Svart | X-Small | 1 set |
| 28760    | Enkla band               | Svart | Small   | 1 set |
| 28760    | Enkla band               | Svart | Medium  | 1 set |
| 28760    | Enkla band               | Svart | Large   | 1 set |
| 28760    | Enkla band               | Svart | X-Large | 1 set |
| 28761    | Band med D-Ring          | Svart | X-Small | 1 set |
| 28761    | Band med D-Ring          | Svart | Small   | 1 set |
| 2876     | Band med D-Ring          | Svart | Medium  | 1 set |
| 28761    | Band med D-Ring          | Svart | Large   | 1 set |
| 28761    | Band med D-Ring          | Svart | X-Large | 1 set |
| 28763    | Band med D-Ring          | Beige | X-Small | 1 set |
| 28763    | Band med D-Ring          | Beige | Small   | 1 set |
| 28763    | Band med D-Ring          | Beige | Medium  | 1 set |
| 28763    | Band med D-Ring          | Beige | Large   | 1 set |
| 28763    | Band med D-Ring          | Beige | X-Large | 1 set |
| 28768    | Enkla band, ToeOFF®Short | Svart | Small   | 1 set |
| 28768    | Enkla band, ToeOFF®Short | Svart | Medium  | 1 set |
| 28768    | Enkla band, ToeOFF®Short | Svart | Large   | 1 set |



## ComfortPAD™ Ypsilon® Flow

ComfortPAD är en polstring avsedd för Ypsilon® Flow. Den huvudsakliga egenskapen hos ComfortPAD är att minska friktionen mellan ortosen och benet, framför allt i samband med olika aktiviteter, som t.ex. löpning, cykling eller promenader. Ett extra lager av textilt material mellan ortosen och benet gör att rörelsen sker lättare mellan de textila materialen. Tester som gjorts har visat att när de två materialen glider mot varandra minskas friktionen mot huden med ca 25%. ComfortPAD är bara en storlek. ComfortPAD kan tas på och av med endast en hand. Det breda bandet är bekvämt och orsakar mindre tryck på baksidan av benet. En bekväm lösning för den som har känsligt underben eller hud och vill kunna vara aktiv.

**Användningsområden:** Passar endast till Ypsilon® Flow 1/2.

| Art. nr. | Beskrivning              | Storlek    |
|----------|--------------------------|------------|
| 28886    | Ypsilon® Flow ComfortPAD | En storlek |





## CoverKIT™ 2.0

CoverKIT™2.0 är en helt ny smart polstring för Allard AFO. CoverKIT passar till ToeOFF®2.0, Flow och BlueROCKER®2.0. Enkel att ta på och av. Ger en smidig yta som går hela vägen ner till slutet av skenan. Insidan är som en SoftKIT™ och om extra avlastning behövs så ingår även två vertikala neoprenstavar för att skapa en avlastningskanal för tibia. Ortosens vanliga band kan användas tillsammans med CoverKIT™.

| Art. nr. | Modell        | Färg  | Storlek | Omkrets vad |
|----------|---------------|-------|---------|-------------|
| 28765    | coverKIT™ 2.0 | Svart | X-Small | 31 - 34 cm  |
| 28765    | coverKIT™ 2.0 | Svart | Small   | 34 - 37 cm  |
| 28765    | coverKIT™ 2.0 | Svart | Medium  | 37 - 41 cm  |
| 28765    | coverKIT™ 2.0 | Svart | Large   | 41 - 46 cm  |
| 28765    | coverKIT™ 2.0 | Svart | X-Large | 46 - 51 cm  |

## SoftKIT™ 2.0

SoftKIT™ 2.0 är en bekväm och smidig polstring avsedd för ToeOFF® 2.0, Flow och BlueROCKER® 2.0. Tibiakammen kan enkelt avlastas genom att använda neoprenestavarna mellan ortos och polstring. Varje förpackning innehåller två polstringar och två neoprenestavar.

| Art. nr. | Modell               | Färg  | Storlek              |
|----------|----------------------|-------|----------------------|
| 28750    | SoftKIT 2.0          | Svart | X-Small              |
| 28750    | SoftKIT 2.0          | Svart | Small                |
| 28750    | SoftKIT 2.0          | Svart | Medium               |
| 28750    | SoftKIT 2.0          | Svart | Large                |
| 28750    | SoftKIT 2.0          | Svart | X-Large              |
| 28749    | SoftKIT 2.0          | Beige | X-Small              |
| 28749    | SoftKIT 2.0          | Beige | Small                |
| 28749    | SoftKIT 2.0          | Beige | Medium               |
| 28749    | SoftKIT 2.0          | Beige | Large                |
| 28749    | SoftKIT 2.0          | Beige | X-Large              |
| 28752    | Mikrofix droppar 2.0 | Svart | X-Small              |
| 28752    | Mikrofix droppar 2.0 | Svart | Small                |
| 28752    | Mikrofix droppar 2.0 | Svart | Medium/Large/X-Large |
| 28753    | Neoprenestavar 2.0   | Svart | Small                |
| 28753    | Neoprenestavar 2.0   | Svart | Large                |
| 28754    | Mikrofix vingar 2.0  | Svart |                      |



## SoftKIT™ Short

SoftKIT™ är en bekväm och smidig polstring avsedd för ToeOFF®. Tibiakammen kan enkelt avlastas genom att använda neoprenestavarna mellan ortos och polstring. Varje förpackning innehåller två polstringar, två neoprenestavar och självhäftande Mikrofix.

| Art. nr. | Modell           | Färg  | Storlek    |
|----------|------------------|-------|------------|
| 28391    | SoftKIT™ Short   | Svart | Small      |
| 28391    | SoftKIT™ Short   | Svart | Medium     |
| 28391    | SoftKIT™ Short   | Svart | Large      |
| 28356    | Mikrofix droppar | Svart | Small      |
| 28356    | Mikrofix droppar | Svart | Medium     |
| 28356    | Mikrofix droppar | Svart | Large      |
| 28357    | Mikrofix vingar  | Svart | En storlek |







## ComfortKIT™ 2.0

En mjuk polstring för ToeOFF® 2.0, Flow och BlueROCKER® 2.0 som är speciellt lämplig för känslig hud men även för dem med hög aktivitetsnivå. ComfortKIT™ 2.0 har en inre kärna av så kallat "memory foam" som gör att den naturligt anpassar sig efter benets form vid användning. När materialet vilar återgår det till sin ursprungliga form.

| Art. nr. | Modell                    | Färg  | Storlek      |
|----------|---------------------------|-------|--------------|
| 28751    | comfortKIT 2.0            | Svart | X-Small      |
| 28751    | comfortKIT 2.0            | Svart | Small        |
| 28751    | comfortKIT 2.0            | Svart | Medium       |
| 28751    | comfortKIT 2.0            | Svart | Large        |
| 28751    | comfortKIT 2.0            | Svart | X-Large      |
| 28752    | Microfix droppar till 2.0 | Svart | X-Small      |
| 28752    | Microfix droppar till 2.0 | Svart | Small        |
| 28752    | Microfix droppar till 2.0 | Svart | Medium/Large |



## T-Strap

T-Strap drar övre språngbensleden och subtalarlederna lateralt så att de positioneras tillbaka under tibia. Den distala delen av T-Strap fästes på undersidan av ortosens fotplatta och den proximala delen runt ankeln och mot ortosens laterala skena. Produkten är lätt att justera i längd och innerkärnan av plastazote kan enkelt värmas upp med värmepestol vid behov av att justera passformen. Ytermaterialet är mjukt, ventilerande men samtidigt stödjande.

**Användningsområden:** Pes valgus kontroll.

**Kontraindikationer:** Ödem, försämrad blodcirkulation, hud maceration eller andra tillstånd som ytterligare kan försämrats av kompression.

**Övrigt:** T-Strap är endast avsedd att användas tillsammans med produkter inom Allard AFO och alltid tillsammans med ett individuellt tillverkat inlägg/fotbädd för korrekt positionering av foten. Om T-Strap används utan inlägg/fotbädd ökar stressen på ortosens laterala skena och därmed ökar risken för delaminering.

| Art. nr. | Färg  | Storlek    | Vä/Hö |
|----------|-------|------------|-------|
| 28777    | Svart | En storlek | Vä/Hö |




Nyhet!

kiddieflow™

Vi har utökat vårt Allard AFO sortiment med en ny pediatrik modell: KiddieFLOW™. Detta efter förfrågningar från kliniker om en ortos som har mer flexibilitet i fotplattan och som ger ytterligare ett alternativ till vår nuvarande serie med barnmodeller. KiddieFLOW™ kommer att överbrygga klyftan mellan inlägg/SMO och våra nuvarande AFO för barn. Den stödjer fotens dorsalflexion i svängfasen, ger en bättre kontroll av fotpositionering i sen svängfas, vilket i sin tur förbättrar stabilitet i stödfasen. Samtidigt ger det mjukare fotbladet lättare avveckling i slutet av stödfasen.

För en kombination av ökad A/P and M/L kontroll kan KiddieFLOW™, som tillägg till våra andra barnmodeller, också kombineras med inlägg eller SMO.

Att välja rätt ortoskombination för din patient ska alltid baseras på etablerade utvärderingsverktyg, såsom; gånganalys och/eller leders rörelseomfång, manuellt muskeltest eller andra erkända mätmetoder. Våra diagram och teorier som beskrivs nedan kan också hjälpa dig att välja den mest lämpliga lösningen för din patient.

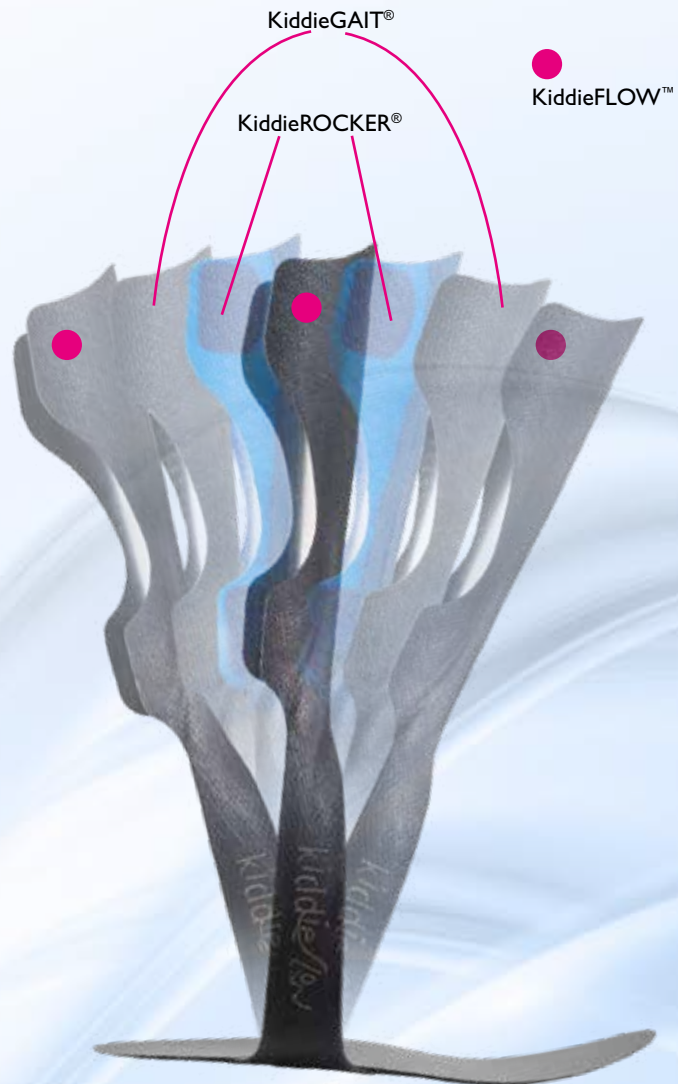

- ✓ Genom att analysera vilka gångavvikelser som kan finnas, kommer du att få en mer omfattande information för lämpligt val av ortoskombination. Detta kommer att ge de bästa kliniska resultaten för din patient.
- ✓ M/L kontroll; som är nödvändig vid överdriven pronation eller supination. Det kan uppnås med inlägg eller SMO/DAFO.
- ✓ När behovet av A/P-kontroll ökar, behövs vanligtvis också en gradvis styvare AFO. Våra ortoser KiddieFLOW™, KiddieGAIT® och KiddieROCKER®, i kombination med individuella inlägg eller SMO/DAFO, ger kompensation för många patienter.
- ✓ Det är nödvändigt att göra upprepade utvärderingar, som inkluderar en gånganalys medan patienten bär vald ortoskombination för att fastställa förbättringen av funktionen.
- ✓ För de mer omfattande funktionshindren, som inkluderar en ökande grad av spasticitet och mer komplexa gångavvikelser, bör en styvare AFO övervägas.



# kiddieflow™ kiddieGAIT® kiddieROCKER®



Barn som drabbats av neurologiska handikapp och milda former av utvecklingsskador är i många fall beroende av ortoslösningar för de nedre extremiteterna.

Börja på rätt fot - låt barnen prova en ortos som hjälper deras små fötter till ett jämnare och mer naturligt gångmönster

- Alla våra AFO modeller är gjorda i kolfiberkomposit. Fotbladet ger stöd och dynamik till foten och blir med sin öppna häl lätt att få ned i skon.
- Skenan stödjer på framsidan av underbenet och hjälper till att sträcka i knä och höft vid t.ex. crouch-gång.
- Tre modeller - tre olika nivåer av stabilitet- för att kunna erbjuda barnet en individuell lösning.

## INDIKATIONER

Droppfot, KiddieFLOW™, KiddieGAIT® och KiddieROCKER® (alla modeller) är avsedda som stöd vid droppfot, gångavvikelse efter proprioceptiv störning, instabil gång eller gång med låg tonus, tågång utan mellanfotskollaps, spina bifida, cerebral pares och muskeldystrofi.


## KONTRAINDIKATIONER

Begränsad dorsalflexionförmåga (behöver minst +5 grader dorsalflexion förbi neutralläget). Mycket rigida strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Överdriven genu valgum eller genu varum-felställning. Fixerad/ej korrigierbar pes valgus eller pes varus-felställning.

## BEGRÄNSNINGAR

Hyperextension i knät som kvarstår trots behandling.  
KiddieFLOW ska inte användas vid Crouch gång

KiddieGAIT®, KiddieROCKER® och KiddieFLOW™ skall alltid kombineras med någon typ av individuell fotanpassning, för att kontrollera fotens position (Se även info på andra sidan). Det är viktigt att foten har en så funktionell position som möjligt vid belastning. De vanligaste fotfelställningarna som pronation, supination, pes varus, pes valgus skall korrigeras med ett inlägg. Vanligen skall ett sådant inlägg ha en djup hälkopp för att stimulera häl-till-tågång.

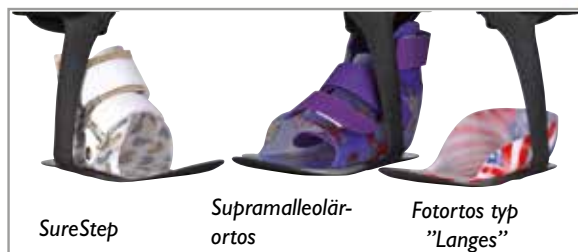

## KiddieFLOW™

KiddieFLOW™ är till skillnad från KiddieGAIT® mer flexibel i fotplattans häl- och tåparti och medger ett större rörelseomfång. KiddieFLOW™ bygger på samma principer som våra vuxna FLOW-modeller och har kvar samma geometri som KiddieGAIT® och KiddieROCKER®. Ortosen stödjer fotens dorsalflexion i svängfasen, ger en bättre kontroll av fotpositionering i sen svängfas, vilket i sin tur förbättrar stabilitet i stödfasen. Samtidigt ger det mjukare fotbladet en lättare avveckling i slutet av stödfasen. För en kombination av ökad A/P and M/L kontroll kan KiddieFLOW™, som tillägg till våra andra barnmodeller, också kombineras med individuella inlägg eller SMO.

**Användningsområden:** Droppfot. KiddieFLOW™ är avsedd som stöd vid droppfot, gångavvikelse efter proprioceptiv störning, instabil gång eller gång med låg tonus, tågång utan mellanfotskollaps, spina bifida, cerebral pares och muskeldystrofi.

**Kontraindikationer:** Begränsad dorsalflexionförmåga (behöver minst +5 grader dorsalflexion förbi neutralläget). Mycket rigida strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Överdriven genu valgum eller genu varum-felställning. Fixerad/ej korrigierbar pes valgus eller pes varus-felställning. KiddieFLOW™ ska inte användas på barn med crouch-gång.

**Övrigt:** Denna modell finns även i ett flertal andra varianter där SoftKIT/ ComfortKIT och band är monterade vid leverans – kontakta kundsupport för mer information om dessa modeller.

| Art. nr. | Modell               | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö |
|----------|----------------------|---------|------------------|---------|-------|
| 28891    | KiddieFLOW™          | Small   | 16 cm            | 22 cm   | Vä/Hö |
| 28891    | KiddieFLOW™          | Medium  | 18 cm            | 25,7 cm | Vä/Hö |
| 28891    | KiddieFLOW™          | Large   | 20 cm            | 29,5 cm | Vä/Hö |
| 28891    | KiddieFLOW™          | X-Large | 21 cm            | 31,5 cm | Vä/Hö |
| 28892    | KiddieFLOW™ m D-ring | Small   | 16 cm            | 22 cm   | Vä/Hö |
| 28892    | KiddieFLOW™ m D-ring | Medium  | 18 cm            | 25,7 cm | Vä/Hö |
| 28892    | KiddieFLOW™ m D-ring | Large   | 20 cm            | 29,5 cm | Vä/Hö |
| 28892    | KiddieFLOW™ m D-ring | X-Large | 21 cm            | 31,5 cm | Vä/Hö |



## KiddieGAIT® Baby

KiddieGAIT® Baby erbjuder en tidig dynamisk ortosbehandling som kan bidra till att barnet får ett jämnare och mer naturligt biomekaniskt korrekt gångmönster. Ortosen hjälper barnet genom svängfasen och kontrollerar fotens rörlighet i flera plan genom stödfasen. Skenans placering på framsidan av tibia hjälper även till vid andra proximala problem, som t.ex. hyperextension i knäet eller "Crouch"-gång. KiddieGAIT® är avsedd att användas i kombination med en individuell fotanpassning för att kontrollera fotens position. KiddieGAIT® Baby finns i tre storlekar och är avsedd för barn från ca 9 månaders ålder.

**Användningsområden:** Droppfot. Förändringar i gångmönster till följd av proprioceptionsstörning. Tågångare med intakt mellanfot. "Crouch"-gång till följd av låg tonus (flexion i höft/knä/ankel). Spina Bifida. Cerebral Pares. Muskeldystrofi och MMC.

**Kontraindikationer:** Begränsad rörlighet i ankelleden (minst 5 grader dorsalflexion vid passiv rörelse). Allt för rigid fotstruktur. Spastisk Quadricepsmuskel. Strukturella felställningar i knä och/eller fotled.

| Art. nr. | Modell          | Storlek     | Fotbladets längd | Höjd  | Vä/Hö |
|----------|-----------------|-------------|------------------|-------|-------|
| 28372    | KiddieGAIT Baby | Baby Small  | 11 cm            | 15 cm | Vä/Hö |
| 28372    | KiddieGAIT Baby | Baby Medium | 12,5 cm          | 18 cm | Vä/Hö |
| 28372    | KiddieGAIT Baby | Baby Large  | 14 cm            | 20 cm | Vä/Hö |





## KiddieGAIT®

KiddieGAIT® erbjuder en tidig ortosbehandling i och med att de finns i Baby modeller från ca 1 års ålder. Ankel Fot Ortosen (AFO) bidrar till att barnet får ett jämnare och mer naturligt gångmönster. Ortosen hjälper barnet genom svängfasen och kontrollerar fotens rörlighet i flera plan genom stödfasen. Skenans placering på framsidan av tibia hjälper även till vid andra proximala problem, som till exempel hyperextension i knäet eller "Crouch"-gång. KiddieGAIT® är avsedd att användas i kombination med en individuell fotanpassning för att kontrollera fotens position.

**Användningsområden:** Droppfot. KiddieGAIT® är avsedd som stöd vid droppfot, gångavvikelse efter proprioceptiv störning, instabil gång eller gång med låg tonus, tågång utan mellanfotskollaps, crouch gait med låg tonus vid tillstånd som spina bifida, cerebral pares och muskeldystrofi.

**Kontraindikationer:** Begränsad dorsalflexion (behöver minst +5 grader dorsalflexion förbi neutralläget). Mycket rigida strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Överdriven genu valgum eller genu varum-felställning. Fixerad/ ej korrigierbar pes valgus eller pes varus-felposition.

**Övrigt:** Denna modell finns även i ett flertal andra varianter där SoftKIT/ ComfortKIT och band är monterade vid leverans – kontakta kundsupport för mer information om dessa modeller.

| Art. nr. | Modell                    | Storlek | Fotbladets längd | Höjd   | Vä/Hö |
|----------|---------------------------|---------|------------------|--------|-------|
| 28900    | KiddieGAIT Svart          | Small   | 160 mm           | 220 mm | Vä/Hö |
| 28900    | KiddieGAIT Svart          | Medium  | 180 mm           | 257 mm | Vä/Hö |
| 28900    | KiddieGAIT Svart          | Large   | 200 mm           | 295 mm | Vä/Hö |
| 28900    | KiddieGAIT Svart          | X-Large | 210 mm           | 315 mm | Vä/Hö |
| 28901    | KiddieGAIT Svart m D-ring | Small   | 160 mm           | 220 mm | Vä/hö |
| 28901    | KiddieGAIT Svart m D-ring | Medium  | 180 mm           | 257 mm | Vä/hö |
| 28901    | KiddieGAIT Svart m D-ring | Large   | 200 mm           | 295 mm | Vä/hö |
| 28901    | KiddieGAIT Svart m D-ring | X-Large | 210 mm           | 315 mm | Vä/hö |



## KiddieROCKER®

KiddieROCKER® är utvecklad för att möta behovet hos barn med mer omfattande problem än enbart droppfot. Här kan barnet ha bilateral svaghet och behöver mer stabilitet i stödfasen. Precis som de andra barnmodellerna är KiddieROCKER® dynamiskt graderad mellan storlekarna. Modellen ger också ökad stabilitet i M/L-plan och A/P-plan.

**Användningsområden:** Droppfot. KiddieROCKER® är avsedd som stöd vid droppfot, gångavvikelse efter proprioceptiv störning, instabil gång eller gång med låg tonus, tågång utan mellanDroppfot. KiddieROCKER® är avsedd som stöd vid droppfot, gångavvikelse efter proprioceptiv störning instabil gång eller gång med låg tonus, tågång utan mellanfotskollaps, crouch gait med låg tonus vid tillstånd som spina bifida, cerebral pares och muskeldystrofi.

**Kontraindikationer:** Begränsad dorsalflexion (behöver minst +5 grader dorsalflexion förbi neutralläget). Mycket rigida strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Överdriven genu valgum eller genu varum-felställning. Fixerad/ej korrigierbar pes valgus eller pes varus-felställning.

**Övrigt:** Denna modell finns även i ett flertal andra varianter där SoftKIT/ ComfortKIT och band är monterade vid leverans – kontakta kundsupport för mer information om dessa modell.

| Art. nr. | Modell                | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö |
|----------|-----------------------|---------|------------------|---------|-------|
| 28902    | KiddieROCKER          | Small   | 16 cm            | 22 cm   | Vä/Hö |
| 28902    | KiddieROCKER          | Medium  | 18 cm            | 25,7 cm | Vä/Hö |
| 28902    | KiddieROCKER          | Large   | 20 cm            | 29,5 cm | Vä/Hö |
| 28902    | KiddieROCKER          | X-Large | 21 cm            | 31,5 cm | Vä/Hö |
| 28903    | KiddieROCKER m D-ring | Small   | 16 mm            | 22 mm   | Vä/Hö |
| 28903    | KiddieROCKER m D-ring | Medium  | 18 mm            | 25,7 cm | Vä/Hö |
| 28903    | KiddieROCKER m D-ring | Large   | 20 cm            | 29,5 cm | Vä/Hö |
| 28903    | KiddieROCKER m D-ring | X-Large | 21 cm            | 31,5 cm | Vä/Hö |



## Extra band KiddieFLOW™, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®

Separata band med eller utan D-ring för KiddieFLOW™, KiddieGAIT®, KiddieROCKER®.

Banden kan monteras med öppning medialt eller lateralt.

| Art. nr. | Modell                                           | Färg  | Storlek       | Förp. |
|----------|--------------------------------------------------|-------|---------------|-------|
| 28373    | Band KiddieGAIT Baby                             | Svart | Baby Small    | 1 set |
| 28373    | Band KiddieGAIT Baby                             | Svart | Baby Medium   | 1 set |
| 28373    | Band KiddieGAIT Baby                             | Svart | Baby Large    | 1 set |
| 28368    | Enkla band KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER  | Svart | Small         | 1 set |
| 28368    | Enkla band KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER  | Svart | Medium        | 1 set |
| 28368    | Enkla band KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER  | Svart | Large/X-Large | 1 set |
| 28369    | D-Ring band KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER | Svart | Small         | 1 set |
| 28369    | D-Ring band KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER | Svart | Medium        | 1 set |
| 28369    | D-Ring band KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER | Svart | Large/X-Large | 1 set |





### KiddieGAIT® softKIT™

KiddieGAIT® softKIT™ är en bekväm och smidig polstring avsedd att användas tillsammans med KiddieGAIT®. Varje förpackning innehåller två polstringar och självhäftande MikroFix.

| Art. nr. | Modell                                   | Storlek       |
|----------|------------------------------------------|---------------|
| 28397    | För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER | Baby Small    |
| 28397    | För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER | Baby Medium   |
| 28397    | För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER | Baby Large    |
| 28378    | För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER | Small         |
| 28378    | För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER | Medium        |
| 28378    | För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER | Large         |
| 28378    | För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER | X-Large       |
| 28379    | Microfix Drop                            | Small         |
| 28379    | Microfix Drop                            | Medium        |
| 28379    | Microfix Drop                            | Large/X-Large |



### KiddieGAIT® comfortKIT™

En ny mjuk polstring för KiddieGAIT® och KiddieROCKER® som är speciellt lämpligt för patienter med prominent tibia, känslig hud men även för dem med hög aktivitetsnivå. ComfortKIT™ har en inre kärna av så kallat "memory foam" som gör att den naturligt anpassar sig efter benets form vid användning. När materialet vilar återgår det till sin ursprungliga form.

| Art. nr. | Modell                       | Färg  | Storlek |
|----------|------------------------------|-------|---------|
| 28418    | För KiddieGAIT, KiddieROCKER | Svart | Small   |
| 28418    | För KiddieGAIT, KiddieROCKER | Svart | Medium  |
| 28418    | För KiddieGAIT, KiddieROCKER | Svart | Large   |
| 28418    | För KiddieGAIT, KiddieROCKER | Svart | X-Large |

## KiddieGAIT® SoftSHELL™ Baby

KiddieGAIT® SoftSHELL™ Baby är en polstring avsedd för KiddieGAIT® Baby. Dessa storlekar av KiddieGAIT® SoftSHELL måste kompletteras med ett standard SoftKIT (28397) av samma storlek. SoftSHELL har en yta av glansigt mönstrat lycra-material som förändrar utseende och även gör att kläder glider lättare mot ortoser. Denna modellen har bandet integrerat i själva produkten.

**Övrigt:** Mönster kan ändras över tiden.

| Art. nr. | Modell   | Färg | Storlek     |
|----------|----------|------|-------------|
| 28388    | Djur     | Blå  | Baby Small  |
| 28388    | Djur     | Blå  | Baby Medium |
| 28388    | Djur     | Blå  | Baby Large  |
| 28389    | Stjärnor | Rosa | Baby Small  |
| 28389    | Stjärnor | Rosa | Baby Medium |
| 28389    | Stjärnor | Rosa | Baby Large  |



## KiddieGAIT® SoftSHELL™

KiddieGAIT® SoftSHELL™ är en kombinerad polstring för KiddieGAIT® och KiddiROCKER® som är enkel att montera. Insidan är tillverkad av samma material som SoftKIT™. Utsidan är av ett glansigt mönstrat lycra-material som förändrar utseende och även gör att kläder glider lättare mot ortosen.

**Övrigt:** Mönster kan ändras över tiden.

| Art. nr. | Modell       | Färg | Storlek |
|----------|--------------|------|---------|
| 28358    | Hjärtan      | Rosa | Small   |
| 28358    | Hjärtan      | Rosa | Medium  |
| 28358    | Hjärtan      | Rosa | Large   |
| 28358    | Hjärtan      | Rosa | X-Large |
| 28359    | Piratmönster | Grå  | Small   |
| 28359    | Piratmönster | Grå  | Medium  |
| 28359    | Piratmönster | Grå  | Large   |
| 28359    | Piratmönster | Grå  | X-Large |



## Non Slip material

Ett anti-glid material som genom sin friktion är perfekt för ytor där man önskar förhindra nötning. Materialet är speciellt framtaget för att användas på KiddieGAIT® fotblad, för att hindra att t.ex. en SureStep-ortos glider mot det blanka fotbladet. OBS! Detta material skall inte användas direkt mot huden.

| Art. nr. | Färg  | Bredd | Längd |
|----------|-------|-------|-------|
| 28411    | Svart | 14 cm | 1m    |





## Ypsilon® Flow<sup>1/2</sup> utprovningssortos

Ypsilon® Flow utprovningssortos är en Ypsilon® Flow med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell                          | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö |
|----------|---------------------------------|---------|------------------|---------|-------|
| 2888I    | Ypsilon Flow <sup>1/2</sup> NFR | Small   | 23 cm            | 35,5 cm | Vä/Hö |
| 2888I    | Ypsilon Flow <sup>1/2</sup> NFR | Medium  | 24,5 cm          | 36,5 cm | Vä/Hö |
| 2888I    | Ypsilon Flow <sup>1/2</sup> NFR | Large   | 27 cm            | 37,5 cm | Vä/Hö |
| 2888I    | Ypsilon Flow <sup>1/2</sup> NFR | X-Large | 27 cm            | 38,5 cm | Vä/Hö |



## ToeOFF® Flow2½ utprovningssortos

ToeOFF® Flow utprovningssortos är en ToeOFF® Flow med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.



| Art. nr. | Modell                     | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö | Skostorlek |
|----------|----------------------------|---------|------------------|---------|-------|------------|
| 28961    | ToeOFF Flow2½ NFR          | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28961    | ToeOFF Flow2½ NFR          | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28961    | ToeOFF Flow2½ NFR          | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28961    | ToeOFF Flow2½ NFR          | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28961    | ToeOFF Flow2½ NFR          | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |
| 28963    | ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28963    | ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28963    | ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28963    | ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/hö | 42-45      |
| 28963    | ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |



## ToeOFF® 2.0 utprovningssortos

ToeOFF® 2.0 utprovningssortos är en ToeOFF® 2.0 med texten “Not-for-Resale” inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell                  | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Skostorlek |
|----------|-------------------------|---------|------------------|---------|------------|
| 28921    | ToeOFF 2.0 NFR          | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | 32-35      |
| 28921    | ToeOFF 2.0 NFR          | Small   | 23 cm            | 38 cm   | 35-38      |
| 28921    | ToeOFF 2.0 NFR          | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | 38-42      |
| 28921    | ToeOFF 2.0 NFR          | Large   | 27 cm            | 43 cm   | 42-45      |
| 28921    | ToeOFF 2.0 NFR          | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | >45        |
| 28923    | ToeOFF 2.0 NFR m D-ring | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | 32-35      |
| 28923    | ToeOFF 2.0 NFR m D-ring | Small   | 23 cm            | 38 cm   | 35-38      |
| 28923    | ToeOFF 2.0 NFR m D-ring | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | 38-42      |
| 28923    | ToeOFF 2.0 NFR m D-ring | Large   | 27 cm            | 43 cm   | 42-45      |
| 28923    | ToeOFF 2.0 NFR m D-ring | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | >45        |

## ToeOFF® 2½ utprovningssortos

ToeOFF® 2½ utprovningssortos är en ToeOFF® 2½ med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.



| Art. nr. | Modell                 | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö | Skostorlek |
|----------|------------------------|---------|------------------|---------|-------|------------|
| 2898 I   | ToeOFF® 2½ NFR         | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 2898 I   | ToeOFF® 2½ NFR         | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 2898 I   | ToeOFF® 2½ NFR         | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 2898 I   | ToeOFF® 2½ NFR         | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28983    | ToeOFF 2½ NFR m D-ring | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28983    | ToeOFF 2½ NFR m D-ring | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28983    | ToeOFF 2½ NFR m D-ring | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28983    | ToeOFF 2½ NFR m D-ring | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28983    | ToeOFF 2½ NFR m D-ring | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |

## ToeOFF® Short utprovningssortos

ToeOFF® Short utprovningssortos är en ToeOFF® Short med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.



| Art. nr. | Modell            | Storlek | Vä/Hö | Fotbladets längd | Höjd    | Skostorlek |
|----------|-------------------|---------|-------|------------------|---------|------------|
| 2899 I   | ToeOFF® Short NFR | Small   | Vä/Hö | 21,5 cm          | 29,5 cm | 32-35      |
| 2899 I   | ToeOFF® Short NFR | Medium  | Vä/Hö | 23,5 cm          | 32 cm   | 35-38      |
| 2899 I   | ToeOFF® Short NFR | Large   | Vä/Hö | 25,5 cm          | 34 cm   | 38-42      |



## BlueROCKER® 2.0 utprovningssortos

BlueROCKER® 2.0 utprovningssortos är en BlueROCKER® 2.0 med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell                      | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö | Skostorlek |
|----------|-----------------------------|---------|------------------|---------|-------|------------|
| 28941    | BlueROCKER 2.0 NFR          | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28941    | BlueROCKER 2.0 NFR          | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28941    | BlueROCKER 2.0 NFR          | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28941    | BlueROCKER 2.0 NFR          | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28941    | BlueROCKER 2.0 NFR          | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |
| 28943    | BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28943    | BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28943    | BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28943    | BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28943    | BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |



## BlueROCKER® 2½ utprovningssortos

BlueROCKER® 2½ utprovningssortos är en BlueROCKER® 2½ med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell                      | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö | Skostorlek |
|----------|-----------------------------|---------|------------------|---------|-------|------------|
| 28971    | BlueROCKER® 2½ NFR          | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28971    | BlueROCKER® 2½ NFR          | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28971    | BlueROCKER® 2½ NFR          | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28971    | BlueROCKER® 2½ NFR          | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28971    | BlueROCKER® 2½ NFR          | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | >45        |
| 28973    | BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring | X-Small | 21 cm            | 36 cm   | Vä/Hö | 32-35      |
| 28973    | BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring | Small   | 23 cm            | 38 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28973    | BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring | Medium  | 24,5 cm          | 40,5 cm | Vä/Hö | 38-42      |
| 28973    | BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring | Large   | 27 cm            | 43 cm   | Vä/Hö | 42-45      |
| 28973    | BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring | X-Large | 28,5 cm          | 45 cm   | Vä/Hö | <45        |

## BlueROCKER® Short utprovningssortos

BlueROCKER® Short utprovningssortos är en BlueROCKER® Short med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell                | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö | Skostorlek |
|----------|-----------------------|---------|------------------|---------|-------|------------|
| 28997    | BlueROCKER® Short NFR | Small   | 21,5 cm          | 29,5 cm | Vä/Hö | 32-35      |
| 28997    | BlueROCKER® Short NFR | Medium  | 23,5 cm          | 32 cm   | Vä/Hö | 35-38      |
| 28997    | BlueROCKER® Short NFR | Large   | 25,5 cm          | 34 cm   | Vä/Hö | 38-42      |



## Ypsilon® Flow½ utprovningsset

I Ypsilon® Flow utprovningsset ingår 6 polstrade Ypsilon® Flow utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna small, medium och large.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell        | Förp. |
|----------|---------------|-------|
| 28882    | Ypsilon Flow½ | 6 st  |



## ToeOFF® Flow2½ utprovningsset

I ToeOFF® Flow utprovningsset ingår 6 polstrade ToeOFF® Flow utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna small, medium och large.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell                  | Förp. |
|----------|-------------------------|-------|
| 28964    | ToeOFF Flow 2½          | 6 st  |
| 28965    | ToeOFF Flow 2½ m D-ring | 6 st  |





### ToeOFF® 2.0 utprovningssset

I ToeOFF® 2.0 utprovningssset ingår 6 polstrade ToeOFF® 2.0 utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna small, medium och large.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell              | Förp. |
|----------|---------------------|-------|
| 28930    | ToeOFF 2.0          | 6 st  |
| 28931    | ToeOFF 2.0 m D-ring | 6 st  |



### ToeOFF® 2½ utprovningssset

I ToeOFF® 2½ utprovningssset ingår 6 polstrade ToeOFF® 2½ utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna small, medium och large.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell             | Förp. |
|----------|--------------------|-------|
| 28984    | ToeOFF 2½          | 6 st  |
| 28985    | ToeOFF 2½ m D-ring | 6 st  |



### ToeOFF® Short utprovningssset

I ToeOFF® Short utprovningssset ingår 6 polstrade ToeOFF® Short utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna small, medium och large.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell       | Förp. |
|----------|--------------|-------|
| 28992    | ToeOFF Short | 6 st  |

## BlueROCKER® 2.0 utprovningssset

I BlueROCKER® 2.0 utprovningssset ingår 6 polstrade BlueROCKER® 2.0 utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna small, medium och large

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell                  | Förp. |
|----------|-------------------------|-------|
| 28944    | BlueROCKER 2.0          | 6 st  |
| 28945    | BlueROCKER 2.0 m D-ring | 6 st  |



## BlueROCKER® 2½ utprovningssset

I BlueROCKER® 2½ utprovningssset ingår 6 polstrade BlueROCKER® 2½ utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna small, medium och large

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell                 | Förp. |
|----------|------------------------|-------|
| 28974    | BlueROCKER 2½          | 6 st  |
| 28975    | BlueROCKER 2½ m D-ring | 6 st  |



## BlueROCKER® Short utprovningssset

I BlueROCKER® Short utprovningssset ingår 6 polstrade BlueROCKER® Short utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna small, medium och large.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell            | Förp. |
|----------|-------------------|-------|
| 28998    | BlueROCKER® Short | 6 st  |







## KiddieFLOW™ utprovningssortos

KiddieFLOW™ utprovningssortos är en ortos med etiketten "Not-for-resale" monterad på framsidan. Denna är avsedd att vara ett utprovningshjälpmedel inför val av ortoslösning. Ortosen skall vara polstrad vid användning.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell                                | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö |
|----------|---------------------------------------|---------|------------------|---------|-------|
| 28894    | KiddieFLOW utprovningssortos          | Small   | 16 cm            | 22 cm   | Vä/Hö |
| 28894    | KiddieFLOW utprovningssortos          | Medium  | 18 cm            | 25,7 cm | Vä/Hö |
| 28894    | KiddieFLOW utprovningssortos          | Large   | 20 cm            | 29,5 cm | Vä/Hö |
| 28894    | KiddieFLOW utprovningssortos          | X-Large | 21 cm            | 31,5 cm | Vä/Hö |
| 28895    | KiddieFLOW m D-ring utprovningssortos | Small   | 16 cm            | 22 cm   | Vä/Hö |
| 28895    | KiddieFLOW m D-ring utprovningssortos | Medium  | 18 cm            | 25,7 cm | Vä/Hö |
| 28895    | KiddieFLOW m D-ring utprovningssortos | Large   | 20 cm            | 29,5 cm | Vä/Hö |
| 28895    | KiddieFLOW m D-ring utprovningssortos | X-Large | 21 cm            | 31,5 cm | Vä/hö |



## KiddieGAIT® utprovningssortos

KiddieGAIT® utprovningssortos är en ortos med etiketten "Not-for-resale" monterad på framsidan. Denna är avsedd att vara ett utprovningshjälpmedel inför val av ortoslösning. Ortosen skall vara polstrad vid användning.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell                                | Storlek     | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö |
|----------|---------------------------------------|-------------|------------------|---------|-------|
| 28382    | KiddieGAIT utprovningssortos          | Baby Small  | 11 cm            | 15 cm   | Vä/Hö |
| 28382    | KiddieGAIT utprovningssortos          | Baby Medium | 12,5 cm          | 18 cm   | Vä/Hö |
| 28382    | KiddieGAIT utprovningssortos          | Baby Large  | 14 cm            | 20 cm   | Vä/Hö |
| 28904    | KiddieGAIT utprovningssortos          | Small       | 16 cm            | 22 cm   | Vä/Hö |
| 28904    | KiddieGAIT utprovningssortos          | Medium      | 18 cm            | 25,7 cm | Vä/Hö |
| 28904    | KiddieGAIT utprovningssortos          | Large       | 20 cm            | 29,5 cm | Vä/Hö |
| 28904    | KiddieGAIT utprovningssortos          | X-Large     | 21 cm            | 31,5 cm | Vä/Hö |
| 28906    | KiddieGAIT m D-ring utprovningssortos | Small       | 16 cm            | 22 cm   | Vä/Hö |
| 28906    | KiddieGAIT m D-ring utprovningssortos | Medium      | 18 cm            | 25,7 cm | Vä/Hö |
| 28906    | KiddieGAIT m D-ring utprovningssortos | Large       | 20 cm            | 29,5 cm | Vä/Hö |
| 28906    | KiddieGAIT m D-ring utprovningssortos | X-Large     | 21 cm            | 31,5 cm | Vä/Hö |

## KiddieROCKER® utprovningssortos

KiddieROCKER® utprovningssortos är en ortos med etiketten "Not-for-resale" monterad på framsidan. Denna är avsedd att vara ett utprovningshjälpmedel inför val av ortoslösning. Ortosen skall vara polstrad vid användning.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.



| Art. nr. | Modell                                  | Storlek | Fotbladets längd | Höjd    | Vä/Hö |
|----------|-----------------------------------------|---------|------------------|---------|-------|
| 28908    | KiddieROCKER utprovningssortos          | Small   | 16 cm            | 22 cm   | Vä/Hö |
| 28908    | KiddieROCKER utprovningssortos          | Medium  | 18 cm            | 25,7 cm | Vä/Hö |
| 28908    | KiddieROCKER utprovningssortos          | Large   | 20 cm            | 29,5 cm | Vä/Hö |
| 28908    | KiddieROCKER utprovningssortos          | X-Large | 21 cm            | 31,5 cm | Vä/Hö |
| 28910    | KiddieROCKER m D-ring utprovningssortos | Small   | 16 cm            | 22 cm   | Vä/Hö |
| 28910    | KiddieROCKER m D-ring utprovningssortos | Medium  | 18 cm            | 25,7 cm | Hö/Vä |
| 28910    | KiddieROCKER m D-ring utprovningssortos | Large   | 20 cm            | 29,5 cm | Vä/Hö |
| 28910    | KiddieROCKER m D-ring utprovningssortos | X-Large | 21 cm            | 31,5 cm | Vä/Hö |

## KiddieFLOW™ utprovningssset

I KiddieFLOW™ utprovningssset ingår 6 polstrade KiddieFLOW utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen.

Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna Small, Medium och Large.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell                               | Storlek                    | Förp. |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------|
| 28896    | KiddieFLOW™ utprovningssset          | Hö+Vä Small, Medium, Large | 6 st  |
| 28897    | KiddieFLOW™ m D-ring utprovningssset | Hö+Vä Small, Medium, Large | 6 kpl |





## I KiddieGAIT® utprovningssset

I KiddieGAIT® utprovningssset ingår 6 polstrade KiddieGAIT® utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna Small, Medium och Large.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att pröva inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell                              | Storlek                    | Förp. |
|----------|-------------------------------------|----------------------------|-------|
| 28381    | KiddieGAIT Baby utprovningssset     | Hö+Vä Small, Medium, Large | 6 st  |
| 28907    | KiddieGAIT m D-ring utprovningssset | Hö+Vä Small, Medium, Large | 6 st  |
| 28905    | KiddieGAIT utprovningssset          | Hö+Vä Small, Medium, Large | 6 st  |



## KiddieROCKER® utprovningssset

I KiddieROCKER® utprovningssset ingår 6 polstrade KiddieROCKER® utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna Small, Medium och Large.

**Användningsområden:** Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att pröva inför val av individuell ortos.

| Art. nr. | Modell                                | Storlek                    | Förp. |
|----------|---------------------------------------|----------------------------|-------|
| 28909    | KiddieROCKER utprovningssset          | Hö+Vä Small, Medium, Large | 6 st  |
| 28911    | KiddieROCKER m D-ring utprovningssset | Hö+Vä Small, Medium, Large | 6 st  |

# LÅT OSS **PRESENTERA** kiddieflow™

En mer **FLEXIBEL MODELL**  
med samma unika egenskaper som  
KiddieGAIT® & KiddieROCKER®!

Vi har utökat vårt Allard AFO sortiment med en ny pediatriisk modell: KiddieFLOW™. Detta efter förfrågningar från kliniker om en ortos som har mer flexibilitet i fotplattan och som ger ytterligare ett alternativ till vår nuvarande serie med barnmodeller. KiddieFLOW™ kommer att överbrygga klyftan mellan inlägg/SMO och våra nuvarande AFO för barn. Den stödjer fotens dorsalflexion i svängfasen, ger en bättre kontroll av fotpositionering i sen svängfas, vilket i sin tur förbättrar stabilitet i stödfasen. Samtidigt ger det mjukare fotbladet lättare avveckling i slutet av stödfasen.





NYHET!

## Walker Protect Fixed, låg

Immobiliserande walker i låg modell, tillverkad av formsprutad polypropene, i en lågvikt-, hållbar- och stabil design. Walkern har två fasta sidostöd som ger utmärkt stabilitet för fot och fotled, två rigida valv, ett fram och ett bak, samt en vaddering över vristen för att stärka immobiliseringen. Walkerns inre vadderade textil är fodrad med ett mjukt, luftgenomsläppligt- och tvättbart velourtyg som skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latex fri. Levereras med två extra kondylkuddar för att avlasta vid tryck och för att ge extra komfort. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro-band garanterar komplett immobilisering. Anpassad för kilsystem. Röntgengenomsläpplig. Lätt att prova ut.

**Användningsområden:** Stabila fot- och fotledsfrakturer; akut fotledsdistorsion, hälseneruptur; mjukdelsskador och postoperativ immobilisering.

**Övrigt:** Höjd 27 cm.

| Art. nr. | Modell            | Storlek    | Längd innersula |
|----------|-------------------|------------|-----------------|
| 47609    | Protect Fixed låg | Small      | 25 cm           |
| 47609    | Protect Fixed låg | Medium     | 29 cm           |
| 47609    | Protect Fixed låg | Large      | 32 cm           |
| 47612    | Extra bandset     | En storlek |                 |
| 47616    | Extra liner       | Small      |                 |
| 47616    | Extra liner       | Medium     |                 |
| 47616    | Extra liner       | Large      |                 |
| 47617    | Kilar set         | Small      |                 |
| 47617    | Kilar set         | Medium     |                 |
| 47617    | Kilar set         | Large      |                 |
| 47618    | Täskydd           | En storlek |                 |

## Walker Protect Fixed, hög

Immobiliserande walker i hög modell, tillverkad av formsprutad polypropene, i en lågvikt-, hållbar- och stabil design. Walkern har två fasta sidostöd som ger utmärkt stabilitet för fot och fotled, två rigida valv, ett fram och ett bak, samt en vaddering över vristen för att stärka immobiliseringen. Walkerns inre vadderade textil är fodrad med ett mjukt, luftgenomsläppligt- och tvättbart velourtyg som skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latex fri. Levereras med två extra kondylkuddar för att avlasta vid tryck och för att ge extra komfort. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro-band garanterar komplett immobilisering. Anpassad för kilsystem. Röntgengenomsläpplig. Lätt att prova ut.

**Användningsområden:** Stabila fot- och fotledsfrakturer; akut fotledsdistorsion, hälseneruptur, mjukdelsskador och postoperativ immobilisering.

**Övrigt:** Höjd 42 cm.

| Art. nr. | Modell            | Storlek    | Längd innersula |
|----------|-------------------|------------|-----------------|
| 47608    | Protect fixed hög | Small      | 25 cm           |
| 47608    | Protect fixed hög | Medium     | 29 cm           |
| 47608    | Protect fixed hög | Large      | 32 cm           |
| 47611    | Extra bandset     | En storlek |                 |
| 47615    | Extra liner       | Small      |                 |
| 47615    | Extra liner       | Medium     |                 |
| 47615    | Extra liner       | Large      |                 |
| 47617    | Kilar set         | Small      | Kilar, set      |
| 47617    | Kilar set         | Medium     |                 |
| 47617    | Kilar set         | Large      |                 |
| 47618    | Täskydd           | En storlek |                 |



NYHET!



## Static Walker

Oledad walker för immobilisering av fotleden. Walkern är ställd i neutral vinkel (90°), har sidoskenor i plast, täckt hälparti och rullsula för en mer naturlig gång. Extra hälbredd för ökad stabilitet. En polstring som andas och transporterar fukt ifrån huden, samt en sömlös fotpolstring som går att klippas av. Alla band har vändsölja och banden på tibiadelen kan placeras valfritt för optimal dragriktning.

**Användningsområden:** Stabila fot- och fotledsfrakturer; akut fotledsdistorsion, hälseneruptur; mjukdelsskador och postoperativ immobilisering.

**Övrigt:** Viktbegränsning: X-Small, Small - 90 kg, Medium, Large, X-Large - 110 kg

| Art. nr. | Modell                        | Storlek | Vä/Hö  | Längd innersula |
|----------|-------------------------------|---------|--------|-----------------|
| 47601    | Walker, Svart                 | Small   | Bilat. | 25,1 cm         |
| 47601    | Walker, Svart                 | Medium  | Bilat. | 27,9 cm         |
| 47601    | Walker, Svart                 | Large   | Bilat. | 29,7 cm         |
| 47601    | Walker, Svart                 | X-Large | Bilat. | 31,6 cm         |
| 47602    | Extra polstring inkl. bandset | Small   |        |                 |
| 47602    | Extra polstring inkl. bandset | Medium  |        |                 |
| 47602    | Extra polstring inkl. bandset | Large   |        |                 |
| 47602    | Extra polstring inkl. bandset | X-Large |        |                 |



## ROM Walker

ROM walker med ställbar fotledsvinkel. Leden kan låsas i fixerat läge, ställas för rörelse i ett begränsat intervall eller ställas för helt fri rörelse. Rörelseomfång kan ställas in mellan 45° plantarflexion och 45° dorsalflexion med 7,5° intervaller. Walkern har täckt hälparti, aluminiumskenor, utbytbar polstring och en rullsula med antihalkbeläggning för säker och mjuk gång. Polstringen kan även användas som tåkappa.

**Användningsområden:** Stabila fot-och fotledsfrakturer; akut fotledsdorsion, hälseneruptur, mjukdelsskador.

**Övrigt:** För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia.



| Art. nr. | Modell                        | Storlek | Vä/Hö  | Fotplattans längd |
|----------|-------------------------------|---------|--------|-------------------|
| 47630    | ROM Walker, Svart             | Small   | Bilat. | 25,1 cm           |
| 47630    | ROM Walker, Svart             | Medium  | Bilat. | 27,9 cm           |
| 47630    | ROM Walker, Svart             | Large   | Bilat. | 29,7 cm           |
| 47630    | ROM Walker, Svart             | X-Large | Bilat. | 31,6 cm           |
| 47631    | Extra polstring inkl. bandset | Small   |        |                   |
| 47631    | Extra polstring inkl. bandset | Medium  |        |                   |
| 47631    | Extra polstring inkl. bandset | Large   |        |                   |
| 47631    | Extra polstring inkl. bandset | X-Large |        |                   |



## Walker AIR hög

Immobiliserande walker, tillverkad av formsprutad polypropene, i en lågvikt-, hållbar- och stabil design. Med ett integrerat luft-system kan du gradvis öka/minska immobilisering efter behov. Ortosen har två fasta metallstöd som stabiliserar foten och ankeln. Den vadderade polstringen är fodrad med ett mjukt, luftgenomsläppligt och tvättbart tyg som skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latexfritt. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro-band garanterar komplett immobilisering. Extra polstring, band-set, tåskydd finns att beställa. Anpassad för kilsystem. Lätt att prova ut.

**Användningsområden:** Stabila fot- och fotledsfrakturer; akut fotledsdorsion, hälseneruptur; mjukdelsskador och postoperativ immobilisering.

**Övrigt:** Höjd Small 35 cm. Höjd Medium, Large 42 cm.

| Art. nr. | Modell         | Storlek      | Längd innersula |
|----------|----------------|--------------|-----------------|
| 47607    | Walker Air hög | Small        | 23 cm           |
| 47607    | Walker Air hög | Medium       | 27 cm           |
| 47607    | Walker Air hög | Large        | 30 cm           |
| 47610    | Extra bandset  | Small        |                 |
| 47610    | Extra bandset  | Medium/Large |                 |
| 47614    | Extra liner    | Small        |                 |
| 47614    | Extra liner    | Medium       |                 |
| 47614    | Extra liner    | Large        |                 |
| 47617    | Kilar set      | Small        |                 |
| 47617    | Kilar set      | Medium       |                 |
| 47617    | Kilar set      | Large        |                 |
| 47618    | Tåskydd        | En storlek   |                 |



## Walker hälkil

Kilsystem set om 6 st som vardera ger en vinkel från ca 4°. Totalt upp till 20°. Finns i tre storlekar.

| Art. nr. | Modell      | Storlek | Förp. |
|----------|-------------|---------|-------|
| 47617    | Häilkil set | Small   | 6 st  |
| 47617    | Häilkil set | Medium  | 6 st  |
| 47617    | Häilkil set | Large   | 6 st  |

## Optima Diab

Optima Diab är en knähög stövel avsedd främst för diabetesfotsår på framfot och mellanfot. Stöveln har en hög stabil bakkappa som kan omformas med värmepistol och ett foder som andas och kan tvättas. Rullsula i plast och ett modulärt inläggsset, "Optima inlägg 3x3 set", för målinriktad avlastning av det plantara fotsåret. Inläggssetet ger en viktavlastning med 3-lager och 3 fasthetsnivåer (rigid, medium, mjuk). Velcro förslutningsband och ett plomberat plastband som säkrar att produkten inte tas av. "Optima inlägg vid amputation" passar i Optima Diab och kan beställas separat.



**Användningsområden:** Diabetesfotsår och fotsår på framfot och mellanfot, Rehabilitering efter mindre amputationer (undantag - Chopart amputation), Rehabilitering efter kirurgi av foten, Behandling av Charcot foten i övergångsfasen från akut- till kronisk.

**Övrigt:** Instruktionsfilm finns på Youtube /Camp Scandinavia/Molliter Optima/optima diab.

| Art. nr. | Modell                | Storlek  | Vä/Hö  | Skostorlek |
|----------|-----------------------|----------|--------|------------|
| 79000    | Optima Diab           | Small    | Bilat. | 34 - 36    |
| 79000    | Optima Diab           | Medium   | Bilat. | 37 - 39    |
| 79000    | Optima Diab           | Large    | Bilat. | 40 - 42    |
| 79000    | Optima Diab           | X-Large  | Bilat. | 43 - 45    |
| 79000    | Optima Diab           | XX-Large | Bilat. | 46 - 48    |
| 79005    | Optima inlägg 3x3 set | Small    | Bilat. | 34 - 36    |
| 79005    | Optima inlägg 3x3 set | Medium   | Bilat. | 37 - 39    |
| 79005    | Optima inlägg 3x3 set | Large    | Bilat. | 40 - 42    |
| 79005    | Optima inlägg 3x3 set | X-Large  | Bilat. | 43 - 45    |
| 79005    | Optima inlägg 3x3 set | XX-Large | Bilat. | 46 - 48    |



## Optima Clheel

Optima Clheel är en knähög avlastande stövel avsedd främst för diabetesfotsår- och skador på hälen. Stöveln är öppen i hälen med en hög stabil bakkappa som kan omformas med värmepistol. Foder som andas och kan tvättas. Rullsula i plast och ett modulärt inläggs-set, "Optima Clheel inlägg 3x3 set", för målinriktad avlastning av det plantara fotsåret. Inläggssetet ger en viktavlastning med 3-lager och 3 fasthetsnivåer (rigid, medium, mjuk). Velcro förslutningsband och ett plomberat plastband som säkrar att produkten inte tas av.

**Användningsområden:** Diabetes-plantarsår på hälen eller skador på hälen, ledbandsskador, trycksår.

| Art. nr. | Modell                       | Storlek  | Vä/Hö  | Skostorlek |
|----------|------------------------------|----------|--------|------------|
| 79002    | Optima Clheel                | Small    | Bilat. | 34 - 36    |
| 79002    | Optima Clheel                | Medium   | Bilat. | 37 - 39    |
| 79002    | Optima Clheel                | Large    | Bilat. | 40 - 42    |
| 79002    | Optima Clheel                | X-Large  | Bilat. | 43 - 45    |
| 79002    | Optima Clheel                | XX-Large | Bilat. | 46 - 48    |
| 79006    | Optima Clheel inlägg 3x3 set | Small    | Bilat. | 34 - 36    |
| 79006    | Optima Clheel inlägg 3x3 set | Medium   | Bilat. | 37 - 39    |
| 79006    | Optima Clheel inlägg 3x3 set | Large    | Bilat. | 40 - 42    |
| 79006    | Optima Clheel inlägg 3x3 set | X-Large  | Bilat. | 43 - 45    |
| 79006    | Optima Clheel inlägg 3x3 set | XX-Large | Bilat. | 46 - 48    |



## Optima Postop

Optima Postop är en låg, avlastande stövel avsedd främst för behandling av ischemiska sår. Stöveln har en rigid bakkappa som kan omformas med värmepistol, ett foder som andas och kan tvättas. Rullsula i plast, plantarinläggssula i mjuk densitet och velcro förslutningsband. Både "Optima inlägg 3x3 set" och "Optima inlägg vid amputation" passar i Optima Postop stöveln.

**Användningsområden:** Vid behandling av ischemiska sår (före och efter revaskularisering), Metatarsalfrakturer, rehabilitering efter tåamputation, stabilisering före operationer, tåfrakturer.

| Art. nr. | Modell        | Storlek | Vä/Hö  | Skostorlek |
|----------|---------------|---------|--------|------------|
| 79001    | Optima Postop | Small   | Bilat. | 34 - 36    |
| 79001    | Optima Postop | Medium  | Bilat. | 37 - 39    |
| 79001    | Optima Postop | Large   | Bilat. | 40 - 42    |
| 79001    | Optima Postop | X-Large | Bilat. | 43 - 45    |

## Optima Europa

Optima Europa är en sko avsedd att användas vid fotrehabilitering. Skon har en rigid bakkappa som kan omformas med värmepistol, ett foder som andas och kan tvättas. Rullsula i plast, plantarinläggssula i mjuk densitet och velcro förslutningsband. Både "Optima inlägg 3x3 set" och "Optima inlägg vid amputation" passar i Optima Europa.

**Användningsområden:** Behandling av sår mellan tårna, rehabilitering efter hallux valgus operation, rehabilitering efter hammartå operation, rehabilitering efter operation av Morton's neurom, rehabilitering efter nagelborttagning.

| Art. nr. | Modell        | Storlek  | Vä/Hö  | Skostorlek |
|----------|---------------|----------|--------|------------|
| 79003    | Optima Europa | Small    | Bilat. | 34 - 36    |
| 79003    | Optima Europa | Medium   | Bilat. | 37 - 39    |
| 79003    | Optima Europa | Large    | Bilat. | 40 - 42    |
| 79003    | Optima Europa | X-Large  | Bilat. | 43 - 45    |
| 79003    | Optima Europa | XX-Large | Bilat. | 46 - 48    |




## Optima Free

Optima Free är en känga avsedd för fotrehabilitering. Kängan har en rigid bakkappa som kan omformas med värmepistol, ett foder som andas och kan tvättas. Rullsula i plast, plantarinläggssula i mjuk densitet och velcro förslutningsband. "Optima inlägg 3x3 set" passar i Optima Free.

**Användningsområden:** Dorsala skador av foten, rehabilitering efter hallux valgus operation.

| Art. nr. | Modell      | Storlek  | Vä/Hö  | Skostorlek |
|----------|-------------|----------|--------|------------|
| 79004    | Optima Free | Small    | Bilat. | 34 - 36    |
| 79004    | Optima Free | Medium   | Bilat. | 37 - 39    |
| 79004    | Optima Free | Large    | Bilat. | 40 - 42    |
| 79004    | Optima Free | X-Large  | Bilat. | 43 - 45    |
| 79004    | Optima Free | XX-Large | Bilat. | 46 - 48    |



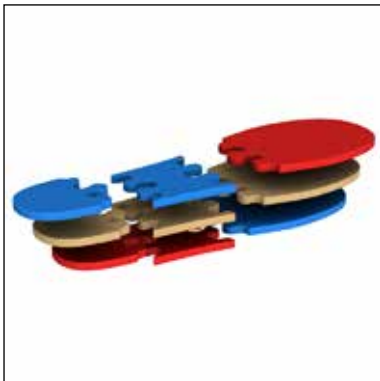

## Optima inlägg 3 x 3 set

Optima inlägg 3 x 3 set är avsett för målinriktad avlastning av plantara fotsår. Inlägget har tre lager och tre fasthetsnivåer; Rigid (Blå, 40 Sh), Medium (Gul, 25 Sh) och Mjuk (Röd, 20 Sh) som kan kombineras och anpassas till fotsåret. Optima inlägg 3 x 3 set ingår som standard i Optima Diab men passar även till Optima Postop, Europa och Free och kan beställas separat.

**Övrigt:** OBS! Optima Inlägg 3x3 Set får användaranpassas uteslutande av behörig medicinsk personal. Använd aldrig inläggen i vanliga skor eller andra ortopediska skor. Setet ska alltid användas i sin helhet med alla komponenterna ordentligt kopplade till varandra inne i Optima ortosen. Använd Optima Användarinstruktion för användar-proceduren. Instruktionsfilm finns på Youtube /Camp Scandinavia/ Molliter Optima/optima diab.

| Art. nr. | Modell                  | Storlek  | Vä/Hö  | Skostorlek |
|----------|-------------------------|----------|--------|------------|
| 79005    | Optima inlägg 3 x 3 set | Small    | Bilat. | 34 - 36    |
| 79005    | Optima inlägg 3 x 3 set | Medium   | Bilat. | 37-39      |
| 79005    | Optima inlägg 3 x 3 set | Large    | Bilat. | 40-42      |
| 79005    | Optima inlägg 3 x 3 set | X-Large  | Bilat. | 43-45      |
| 79005    | Optima inlägg 3 x 3 set | XX-Large | Bilat. | 46-48      |



## Optima inlägg vid amputation

Optima inlägg vid amputation är en innersula av EVA-material avsett att användas i OptimaDiab, Postop och Europa efter transmetatarsal amputation.

| Art. nr. | Modell                       | Storlek  | Vä/Hö  | Skostorlek |
|----------|------------------------------|----------|--------|------------|
| 79007    | Optima inlägg vid amputation | Small    | Bilat. | 34-36      |
| 79007    | Optima inlägg vid amputation | Medium   | Bilat. | 37-39      |
| 79007    | Optima inlägg vid amputation | Large    | Bilat. | 40-42      |
| 79007    | Optima inlägg vid amputation | X-Large  | Bilat. | 43-45      |
| 79007    | Optima inlägg vid amputation | XX-Large | Bilat. | 46-48      |

## Body Armor Pro Term

En amputationsortos för tillfällig behandling efter Chopart eller Lisfranc amputationer. Ett alternativ under den första läkningsperioden. Sulans utformning både på insidan och utsidan håller hälen i dorsalextension och säkrar att belastningen ligger på hälen. Den stabila konstruktionen håller stumpan väl på plats och hjälper till att bibehålla formen. Innerstrumpan har en inbyggd pumpfunktion som hjälper till att hålla formen genom lätt kompression. Kommer i två storlekar beroende av stumpens längd. 16 respektive 19 cm.

| Art. nr. | Modell              | Storlek | Mått  | Vä/Hö  |
|----------|---------------------|---------|-------|--------|
| 79008    | Body Armor Pro Term | Medium  | 16 cm | Bilat. |
| 79008    | Body Armor Pro Term | Large   | 19 cm | Bilat. |



**Mått:** Stumpens längd.





## SBI Motus Diabetes Walker

SBI Motus Diabetes Walker är avsedd för avlastning av diabetesfotsår på framfot och mellanfot. Ortosen har en stabil plastram som skyddar tibia och en avtagbar innerdel som kan formas med värmepistol. Den avtagbara yttersulan; Total rullsula är avsedd för behandling av plantarskada vid fotsår. Som tillbehör finns också den avtagbara "Stabila rullsula" som underlättar att gå från akut till kronisk behandling. Ortosen har flyttbar placering av bandfästen som också kan säkras till ett "Icke avtagbart" system. Anpassningsbart SBI inlägg 3x3 set är en inläggssula avsedd för målinriktad avlastning av plantara fotsår. Inlägget har tre lager och tre fasthetsnivåer (rigid, medium och mjuk) som kan kombineras och anpassas till fotsåret. SBI inlägg 3 x 3 set ingår som standard i SBI Motus Diabetes Walker.

**Användningsområden:** Sårvård och behandling av framfots- och mellanfotssår vid diabetes. Som stabilisering för Charcot fot. Vid rehabilitering efter operation.

**Övrigt:** Tubstrumpa utan sömmar ska alltid användas under SBI ortoserna. Tubstrumpan, med en insida av mjuk frotté, medföljer vid leverans.

| Art. nr. | Modell                    | Storlek  | Vä/Hö  | Skostorlek |
|----------|---------------------------|----------|--------|------------|
| 79015    | SBI Motus Diabetes Walker | Small    | Bilat. | 34 - 36    |
| 79015    | SBI Motus Diabetes Walker | Medium   | Bilat. | 37 - 39    |
| 79015    | SBI Motus Diabetes Walker | Large    | Bilat. | 40 - 42    |
| 79015    | SBI Motus Diabetes Walker | X-Large  | Bilat. | 43 - 45    |
| 79015    | SBI Motus Diabetes Walker | XX-Large | Bilat. | 46 - 48    |

## SBI Frame Post-op Walker

Prefabricerad och anpassningsbar trauma-Walker, med låg vikt och hög komfort, för funktionell rehabilitering. Stabil plastram som skyddar tibia och en innerdelen som är avtagbar och kan formas med värmepistol. Flyttbar placering av bandfästen. Avtagbar Stabil Rullsula och SBI inlägg enkel ingår.

**Användningsområden:** Stabila fot- och ankelfrakturer, svåra ankelvrickningar, post-operativ behandling.

**Övrigt:** Tubstrumpa utan sömmar ska alltid användas under SBI ortoserna. Tubstrumpan, med en insida av mjuk frotté, medföljer vid leverans.



| Art. nr. | Modell                   | Storlek  | Vä/Hö  | Skostorlek |
|----------|--------------------------|----------|--------|------------|
| 79016    | SBI Frame Post-op Walker | Small    | Bilat. | 34-36      |
| 79016    | SBI Frame Post-op Walker | Medium   | Bilat. | 37-39      |
| 79016    | SBI Frame Post-op Walker | Large    | Bilat. | 40-42      |
| 79016    | SBI Frame Post-op Walker | X-Large  | Bilat. | 43-45      |
| 79016    | SBI Frame Post-op Walker | XX-Large | Bilat. | 46-48      |



## SBI Wheel Walker öppen häl

En Walker utvecklad för funktionell rehabilitering och härlavlastning vid behandling av sår på hälen. Ortosen som har låg vikt och hög komfort är öppen i hälen för avlastning av sår. Den öppna hälen bidrar också till luftning av sår och att hälsår vid behov kan inspekteras. Den är anpassningsbar med en stabil plastram som skyddar tibia och en innerdelen som är avtagbar och kan formas med värmepistol. Avtagbar Total rullsula, för behandling plantarskada vid fotsår; och anpassningsbar inläggssula 3x3 ingår. Flyttbar placering av bandfästen.

**Användningsområden:** Behandling av sår på hälen.

**Övrigt:** Tubstrumpa utan sömmar ska alltid användas under SBI ortoserna. Tubstrumpan, med en insida av mjuk frotté, medföljer vid leverans.

| Art. nr. | Modell                     | Storlek  | Vä/Hö  | Skostorlek |
|----------|----------------------------|----------|--------|------------|
| 79017    | SBI Wheel Walker öppen häl | Small    | Bilat. | 34-36      |
| 79017    | SBI Wheel Walker öppen häl | Medium   | Bilat. | 37-39      |
| 79017    | SBI Wheel Walker öppen häl | Large    | Bilat. | 40-42      |
| 79017    | SBI Wheel Walker öppen häl | X-Large  | Bilat. | 43-45      |
| 79017    | SBI Wheel Walker öppen häl | XX-Large | Bilat. | 46-48      |

## SBI Skyddsöverdrag

SBI Skyddsöverdrag som är vattenavstötande skyddar och håller SBI Walkern ren. Det är designad för SBI Motus, SBI Frame and SBI Wheel. Materialet är semi-elastiskt med en dragkedja bak. En gummisula ger bättre stabilitet under gång. Skyddsöverdraget är tvättbart.

| Art. nr. | Modell             | Storlek  | Vä/Hö     |
|----------|--------------------|----------|-----------|
| 79029    | SBI Skyddsöverdrag | Small    | Bilateral |
| 79029    | SBI Skyddsöverdrag | Medium   | Bilateral |
| 79029    | SBI Skyddsöverdrag | Large    | Bilateral |
| 79029    | SBI Skyddsöverdrag | X-Large  | Bilateral |
| 79029    | SBI Skyddsöverdrag | XX-Large | Bilateral |



## SBI Walker-ram stängd häl

Utbytbar ram med stängd häl för SBI Motus Diabetes Walker och SBI Frame Post-op Walker.

| Art. nr. | Modell                    | Storlek  | Vä/Hö  | Skostorlek |
|----------|---------------------------|----------|--------|------------|
| 79018    | SBI Walker-ram stängd häl | Small    | Bilat. | 34 - 36    |
| 79018    | SBI Walker-ram stängd häl | Medium   | Bilat. | 37 - 39    |
| 79018    | SBI Walker-ram stängd häl | Large    | Bilat. | 40 - 42    |
| 79018    | SBI Walker-ram stängd häl | X-Large  | Bilat. | 43 - 45    |
| 79018    | SBI Walker-ram stängd häl | XX-Large | Bilat. | 46 - 48    |





## SBI Walker-ram öppen häl

Utbytbar ram med öppen häl för SBI Wheel Walker öppen häl.

| Art. nr. | Modell                   | Storlek  | Vä/Hö  | Skostorlek |
|----------|--------------------------|----------|--------|------------|
| 79019    | SBI Walker-ram öppen häl | Small    | Bilat. | 34 - 36    |
| 79019    | SBI Walker-ram öppen häl | Medium   | Bilat. | 37 - 39    |
| 79019    | SBI Walker-ram öppen häl | Large    | Bilat. | 40 - 42    |
| 79019    | SBI Walker-ram öppen häl | X-Large  | Bilat. | 43 - 45    |
| 79019    | SBI Walker-ram öppen häl | XX-Large | Bilat. | 46 - 48    |



## SBI komplett innerdel för SBI Walkers

Utbytbar komplett innerdel för SBI Walkers i Multidensity mjuk EVA som är omformningsbar. Innerdelen är formad efter fotens och benets anatomi. Tibiaskydd med en avtagbart extra skenbensförstärkning.

| Art. nr. | Modell                                | Storlek  | Vä/Hö  |
|----------|---------------------------------------|----------|--------|
| 79020    | SBI komplett innerdel för SBI Walkers | Small    | Bilat. |
| 79020    | SBI komplett innerdel för SBI Walkers | Medium   | Bilat. |
| 79020    | SBI komplett innerdel för SBI Walkers | Large    | Bilat. |
| 79020    | SBI komplett innerdel för SBI Walkers | X-Large  | Bilat. |
| 79020    | SBI komplett innerdel för SBI Walkers | XX-Large | Bilat. |

## SBI Spännen och Band för Walker

Utbytbar komplett set för SBI ortoser med 8 spännen och 4 band.

| Art. nr. | Modell                          | Storlek                    | Förp.             |
|----------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 79021    | SBI Spännen och Band för Walker | Small/Medium               | 8 spännen, 4 band |
| 79021    | SBI Spännen och Band för Walker | Large/X-Large/<br>XX-Large | 8 spännen, 4 band |



## SBI Stabil Rullsula

Sulorna på SBI ortoserna kan enkelt och snabbt sättas på, tas loss från och bytas ut på huvudenheten. Stabil Rullsula har mindre avrullning än Total Rullsula och används när behandlingen övergår från den akuta fasen till den kroniska fasen. Stabil Rullsula ingår inte med produkten utan köpes endast separat.

**Övrigt:** OBS! Använd aldrig SBI ortosen utan sula. Läs noga i SBI användarinstruktion angående byte av sula.

| Art. nr. | Modell              | Färg | Storlek  | Vä/Hö  |
|----------|---------------------|------|----------|--------|
| 79022    | SBI Stabil Rullsula | Grå  | Small    | Bilat. |
| 79022    | SBI Stabil Rullsula | Grå  | Medium   | Bilat. |
| 79022    | SBI Stabil Rullsula | Grå  | Large    | Bilat. |
| 79022    | SBI Stabil Rullsula | Grå  | X-Large  | Bilat. |
| 79022    | SBI Stabil Rullsula | Grå  | XX-Large | Bilat. |





## SBI Total Rullsula

Sulorna på SBI ortoserna kan enkelt och snabbt sättas på, tas loss från och bytas ut på huvudenheten. SBI Total Rullsula ingår i SBI ortoserna vid leverans. Den är avsedd att användas under den akuta fasen vid behandling av plantara fotsår. Den har mer avrullning än SBI Stabil Rullsula.

**Övrigt:** OBS! Använd aldrig SBI ortosen utan sula. Läs noga i SBI användarinstruktion angående byte av sula.

| Art. nr. | Modell             | Färg  | Storlek  | Vä/Hö  |
|----------|--------------------|-------|----------|--------|
| 79023    | SBI Total Rullsula | Svart | Small    | Bilat. |
| 79023    | SBI Total Rullsula | Svart | Medium   | Bilat. |
| 79023    | SBI Total Rullsula | Svart | Large    | Bilat. |
| 79023    | SBI Total Rullsula | Svart | X-Large  | Bilat. |
| 79023    | SBI Total Rullsula | Svart | XX-Large | Bilat. |



## SBI Inlägg 3x3 Set

Modulsystemet SBI Inlägg 3x3 Set har tagits fram för att omfördela trycket på fotsulan och hantera sår på framfot, mittfot och häl. Setet består av nio delar som är kopplade till varandra genom ett pusselsystem som bildar tre olika plantarsulor. De tre plantarsulorna har tre olika densitet; Rigid (Blå, 40 Sh), Medium (Gul, 25 Sh) och Mjuk (Röd, 20 Sh) som kan kombineras vertikalt och horisontellt. Trycket på fotsulan kan enkelt omfördelas genom att man kombinerar de olika delarna. Inläggen är avsedda att användas i SBI Motus (medföljer), SBI Wheel (ingår), SBI Frame (tillval).

**Övrigt:** OBS! SBI Inlägg 3x3 Set får användaranpassas uteslutande av behörig medicinsk personal. Använd aldrig inläggen i vanliga skor eller andra ortopediska skor. Setet ska alltid användas i sin helhet med alla komponenterna ordentligt kopplade till varandra inne i SBI ortosen. Använd SBI Användarinstruktion för användar-proceduren. Instruktionsfilm finns på Youtube /Camp Scandinavia/Molliter Optima/optima diab.

| Art. nr. | Modell             | Storlek  | Vä/Hö  |
|----------|--------------------|----------|--------|
| 79024    | SBI Inlägg 3x3 Set | Small    | Bilat. |
| 79024    | SBI Inlägg 3x3 Set | Medium   | Bilat. |
| 79024    | SBI Inlägg 3x3 Set | Large    | Bilat. |
| 79024    | SBI Inlägg 3x3 Set | X-Large  | Bilat. |
| 79024    | SBI Inlägg 3x3 Set | XX-Large | Bilat. |



## SBI Inlägg vid amputation

SBI Inlägg vid amputation är framtaget för användning postoperativt efter amputation av tår eller transmetatarsal amputation. Inläggen är avsedda att användas i SBI Motus (tillval), SBI Wheel (tillval), SBI Frame (tillval).

**Övrigt:** SBI Inlägg vid amputation får endast ordinerar av medicinsk behörig personal. Använd aldrig inläggen i vanliga skor eller andra ortopediska skor. Använd SBI Användarinstruktion för användar-proceduren.

| Art. nr. | Modell                    | Storlek  | Vä/Hö  |
|----------|---------------------------|----------|--------|
| 79025    | SBI Inlägg vid amputation | Small    | Bilat. |
| 79025    | SBI Inlägg vid amputation | Medium   | Bilat. |
| 79025    | SBI Inlägg vid amputation | Large    | Bilat. |
| 79025    | SBI Inlägg vid amputation | X-Large  | Bilat. |
| 79025    | SBI Inlägg vid amputation | XX-Large | Bilat. |



## SBI Inlägg enkel

En kraftig enlagers inläggssula som ingår i SBI Frame Post-op Walker Art.nr. 79016 men som även kan köpas separat.

| Art. nr. | Modell           | Storlek  | Vä/Hö  |
|----------|------------------|----------|--------|
| 79026    | SBI Inlägg enkel | Small    | Bilat. |
| 79026    | SBI Inlägg enkel | Medium   | Bilat. |
| 79026    | SBI Inlägg enkel | Large    | Bilat. |
| 79026    | SBI Inlägg enkel | X-Large  | Bilat. |
| 79026    | SBI Inlägg enkel | XX-Large | Bilat. |




## SBI Tubstrumpa utan sömmar

Tubstrumpa utan sömmar ska alltid användas under SBI ortoserna. Tubstrumpan, med en insida av mjuk frotté, medföljer alla SBI ortoser vid leverans.

| Art. nr. | Modell                     | Färg | Storlek    | Vä/Hö  |
|----------|----------------------------|------|------------|--------|
| 79027    | SBI Tubstrumpa utan sömmar | Blå  | En storlek | Bilat. |



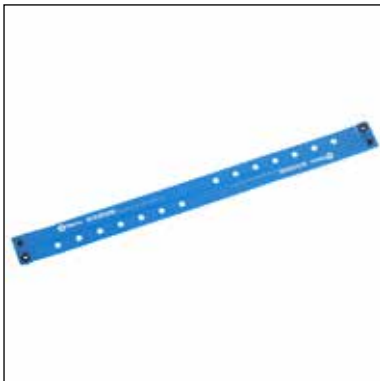

## SBI Låsband för Walker

Låsbandet är avsett att säkra ortosen till ett "icke avtagbart" system.

| Art. nr. | Modell                 | Storlek    | Förp. |
|----------|------------------------|------------|-------|
| 79028    | SBI Låsband för Walker | En storlek | 2     |

---



# Knäortoser

[www.camp.se](http://www.camp.se)



**Mått:** Mät runt knäet under patella.



**Mått:** Mått tas över knäet.

## Patellavator

Patellavator knäortos ger genom kompression mot patellaseanan lindring av smärta i knäet vid patella tendinitis. Ortosen är tillverkad av ett CoolFlex material som andas för optimal komfort vid daglig användning och träning. Den vadderade kärnan ger ett jämt fokuserat tryck över patellaseanan för att reducera smärta och ömhet. För effektivare kompression har Patellavator en unik snörningsdesign som ökar spänningen från bandet. Dessutom en interlock förslutning som är designad att tåla aggressiv användning utan att öppna sig och att inte påverka motsatta benet under löpning etc. Knäbandet är också designat så att det inte skall stasa runt benet eller irritera popliteaområdet på baksidan av knäet

**Användningsområden:** Användningsområden: Patella tendonitis, Osgood Schlatters sjukdom och Chondromalacia patella.

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Mått     | Vä/Hö  |
|----------|-------|---------|----------|--------|
| 28674    | Svart | Small   | 28-33 cm | Bilat. |
| 28674    | Svart | Medium  | 33-39 cm | Bilat. |
| 28674    | Svart | Large   | 39-44 cm | Bilat. |
| 28674    | Svart | X-Large | > 44 cm  | Bilat. |

## ELEMENTS knä

ELEMENTS knä är avsedd för behandling av lindriga och tillfälliga besvär som t.ex. smärta och infamnation. Bandaget ger en lätt kompression och håller leden varm.

**Användningsområden:** Lindriga och tillfälliga besvär som t.ex. smärta och infamnation.

**Kontraindikationer:** Ödem, ledbandsskador, bensår, kraftig svullnad.

| Art. nr. | Färg        | Storlek | Mått       | Vä/Hö  |
|----------|-------------|---------|------------|--------|
| 34106    | Beige/Svart | X-Small | 30 - 33 cm | Bilat. |
| 34106    | Beige/Svart | Small   | 33 - 36 cm | Bilat. |
| 34106    | Beige/Svart | Medium  | 36 - 39 cm | Bilat. |
| 34106    | Beige/Svart | Large   | 39 - 42 cm | Bilat. |
| 34106    | Beige/Svart | X-Large | 42 - 47 cm | Bilat. |

## PatellaCamp

Patella Camp är en knäortos avsedd att ge stabilitet för patella. Ortosen är av dragruntmodell och är öppen i knävecket. En pelott placeras mot den sida av patella som är instabil och de två elastiska banden dras åt till önskat mothåll.

**Användningsområden:** Patella luxation, Patella subluxation, Patellofemoral pain syndrome (PFPS).

**Kontraindikationer:** Kraftiga ödem när kompression kan påverka cirkulationen.

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Mått   | Vä/Hö  |
|----------|-------|---------|--------|--------|
| 28679    | Svart | Medium  | <40 cm | Bilat. |
| 28679    | Svart | Large   | >40 cm | Bilat. |



**Mått:** Knämått mid-patella

## Dynatrack™ patella PLUS stabilizer

Dragruntmodell med kraftig pelott för stabilisering av patella. Patellastödet kan appliceras lateralt eller medialt. Pelottdraget justeras lätt med de två mindre banden. Ortosen har integrerade stödband och är öppen i knävecket. Tillverkad i ett material som andas.

**Användningsområden:** Chondromalacia patella, efter luxerad patella och subluxerad patella.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Mått     | Vä/Hö  |
|----------|-------|----------|----------|--------|
| 28677    | Svart | X-Small  | 25-30 cm | Bilat. |
| 28677    | Svart | Small    | 30-35 cm | Bilat. |
| 28677    | Svart | Medium   | 35-40 cm | Bilat. |
| 28677    | Svart | Large    | 40-45 cm | Bilat. |
| 28677    | Svart | X-Large  | 45-50 cm | Bilat. |
| 28677    | Svart | XX-Large | 50-55 cm | Bilat. |



**Mått:** Knämått mid-patella



**Mått:** Knä-mått mid-patella cirkulärt

## Active X™ Patella

Denna öppna modell är avsedd att stabilisera patella, framför allt i sidled. Ortosen har en inbyggd specialtillverkad pelott som genom sin konstruktion lägger sig stadigt på sidan av patella och "greppar" tag och håller patella på plats. För ett extra stöd har ortosen en urtagbar halvmåneformad plastskena. Materialet är det innovativa ventilerande ActiveX-materialet som är bekvämt och följsamt.

**Användningsområden:** PFSS (Patellofemoralt Smärt Syndrom), Patella luxation, Patella subluxation.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Mått     | Vä/Hö  |
|----------|-------|----------|----------|--------|
| 28055    | Svart | XX-Small | 24-29 cm | Bilat. |
| 28055    | Svart | X-Small  | 28-33 cm | Bilat. |
| 28055    | Svart | Small    | 32-37 cm | Bilat. |
| 28055    | Svart | Medium   | 36-41 cm | Bilat. |
| 28055    | Svart | Large    | 40-45 cm | Bilat. |



**Mått 1:** Knä-mått 15 cm under mid-patella

**Mått 2:** Knä-mått mid-patella

**Mått 3:** Knä-mått 15 cm ovan mid-patella

## SELECTION® Patella

SELECTION® Patella är en knäortos vars avsedda användning är helt inriktad mot patella problem. Den hästskoformade kudden kan enkelt tas ut och placeras på den sida av patella där stödet behövs. Kudden har elastiska dragband som fäster i det mjuka velourmaterialet runt knäskålen. Den delade förslutningen på lår och vad gör det enkelt att efterjustera. Materialet i knävecket är extra smidigt för ökad komfort.

**Användningsområden:** Patella luxation, patellofemoralt smärtsyndrom, Schlatter, Jumpers Knee, främre knäsmärta.

**Övrigt:** Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Mått 1   | Mått 2   | Mått 3   | Vä/Hö  |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|--------|
| 35704    | Svart | X-Small | 28-31 cm | 30-33 cm | 34-39 cm | Bilat. |
| 35704    | Svart | Small   | 31-34 cm | 33-36 cm | 39-43 cm | Bilat. |
| 35704    | Svart | Medium  | 34-37 cm | 36-39 cm | 43-47 cm | Bilat. |
| 35704    | Svart | Large   | 37-40 cm | 39-42 cm | 47-51 cm | Bilat. |
| 35704    | Svart | X-Large | 40-43 cm | 42-46 cm | 51-56 cm | Bilat. |

## SELECTION® Knee Minor

SELECTION® Minor är avsedd att användas vid lindrigare smärttillstånd i knäet. Minor ger lätt kompression och har en värmande funktion. De stabiliserande spiralfjädrarna på sidorna ger ett lätt och bekvämt stöd. Den här modellen är tillverkad som en tub och ger därmed ökad kompression och förbättrad proprioception. Patellaöppningen är anatomiskt formad för optimal passform. Förslutningen på lår och vad kan enkelt efterjusteras för optimal komfort. Materialet i knävecket är extra smidigt för ökad komfort.

**Användningsområden:** Knäsmärta vid belastning, lättare ligamentskador, överansträngning.

**Kontraindikationer:** Svåra knäskador såsom ACL/PCL-rupturer. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

**Övrigt:** För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia.



**Mått 1:** Knämått 15 cm under mid-patella

**Mått 2:** Knämått mid-patella

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Mått 1   | Mått 2   | Mått 3   | Vä/Hö  |
|----------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 35700    | Svart | X-Small  | 28-31 cm | 30-33 cm | 34-39 cm | Bilat. |
| 35700    | Svart | Small    | 31-34 cm | 33-36 cm | 39-43 cm | Bilat. |
| 35700    | Svart | Medium   | 34-37 cm | 36-39 cm | 43-47 cm | Bilat. |
| 35700    | Svart | Large    | 37-40 cm | 39-42 cm | 47-51 cm | Bilat. |
| 35700    | Svart | X-Large  | 40-43 cm | 42-46 cm | 51-56 cm | Bilat. |
| 35700    | Svart | XX-Large | 43-47 cm | 46-50 cm | 56-60 cm | Bilat. |



**Mått 1:** Knämått 15 cm under mid-patella

**Mått 2:** Knämått mid-patella

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella

## SELECTION® Knee Minor Wrap

SELECTION® Minor är avsedd att användas vid lindrigare smärttillstånd i knäet. Minor ger lätt kompression och har en värmande funktion. De stabiliserande spiralfjädrarna på sidorna ger ett lätt och bekvämt stöd. Den öppna designen gör ortosen enkel att ta på och av. Patellaöppningen är anatomiskt formad för optimal passform. Den delade förslutningen gör det enkelt att efterjustera över vad och lår. Materialet i knävecket är extra smidigt för ökad komfort.

**Användningsområden:** Knäsmärta vid belastning, lättare ligamentskador, överansträngning.

**Kontraindikationer:** Svåra knäskador såsom ACL/PCL-rupturer. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

**Övrigt:** Den här produkten finns i två lårvidder, se produktinformationen i tabellen. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia.

| Art. nr. | Färg  | Storlek       | Mått 1   | Mått 2   | Mått 3   | Vä/Hö  |
|----------|-------|---------------|----------|----------|----------|--------|
| 35701    | Svart | X-Small       | 25-28 cm | 27-30 cm | 31-36 cm | Bilat. |
| 35701    | Svart | Small         | 28-31 cm | 30-33 cm | 36-40 cm | Bilat. |
| 35701    | Svart | Small Plus    | 28-31 cm | 30-33 cm | 40-44 cm | Bilat. |
| 35701    | Svart | Medium        | 31-34 cm | 33-36 cm | 40-44 cm | Bilat. |
| 35701    | Svart | Medium Plus   | 31-34 cm | 33-36 cm | 44-48 cm | Bilat. |
| 35701    | Svart | Large         | 34-37 cm | 36-39 cm | 44-48 cm | Bilat. |
| 35701    | Svart | Large Plus    | 34-37 cm | 36-39 cm | 48-53 cm | Bilat. |
| 35701    | Svart | X-Large       | 37-40 cm | 39-43 cm | 48-53 cm | Bilat. |
| 35701    | Svart | X-Large Plus  | 37-40 cm | 39-43 cm | 53-60 cm | Bilat. |
| 35701    | Svart | XX-Large      | 40-46 cm | 43-50 cm | 53-60 cm | Bilat. |
| 35701    | Svart | XX-Large Plus | 40-46 cm | 43-50 cm | 60-67 cm | Bilat. |



## SELECTION® Knee Optima

SELECTION® Optima är avsedd att användas vid en rad olika smärttillstånd i knäleden. Ortosens multi-funktioner gör att den enkelt kan anpassas vid utprovning. Optima levereras komplett med inställbara dubbelledade skenor. Hyperextensionskryss på baksidan som enkelt kan monteras på och av. Extra band för att minska att tibia faller framåt i samband med ACL-problem. Den här modellen är tillverkad som en tub och ger därmed ökad kompression och förbättrad proprioception. Ortosen har en anatomiskt formad patellaöppning för optimal passform. Den delade förslutningen på lår och vad gör det enkelt att efterjustera. Materialet i knävecket är extra smidigt för ökad komfort. Optima har rigida band uppe och nere vilket ger ökad stabilitet.

**Användningsområden:** Måttlig hyperextension i knäleden, måttlig/moderat M-L instabilitet, begynnande Artros, patellofemoralt smärtsyndrom, Reumatoid artrit, kollateralligamentskador (MCL, LCL) och ACL-skador.

**Kontraindikationer:** Kontaktsport eller andra aktiviteter där knäleden utsätts för våld och där det finns stor risk för ACL/PCL skador. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

**Övrigt:** Rörelseintervall i ROM leden. Flexion: 45, 60, 75, 90 grader. Extension: 0, 10, 20, 30, 40 grader. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia.



**Mått 1:** Knämått 15 cm under mid-patella

**Mått 2:** Knämått mid-patella

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Mått 1   | Mått 2   | Mått 3   | Vä/Hö  |
|----------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 35702    | Svart | X-Small  | 28-31 cm | 30-33 cm | 34-39 cm | Bilat. |
| 35702    | Svart | Small    | 31-34 cm | 33-36 cm | 39-43 cm | Bilat. |
| 35702    | Svart | Medium   | 34-37 cm | 36-39 cm | 43-47 cm | Bilat. |
| 35702    | Svart | Large    | 37-40 cm | 39-42 cm | 47-51 cm | Bilat. |
| 35702    | Svart | X-Large  | 40-43 cm | 42-46 cm | 51-56 cm | Bilat. |
| 35702    | Svart | XX-Large | 43-47 cm | 46-50 cm | 56-60 cm | Bilat. |



**Mått 1:** Knämått 15 cm under mid-patella

**Mått 2:** Knämått mid-patella

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella

## SELECTION® Knee Optima Wrap

SELECTION® Optima Wrap är avsedd att användas vid en rad olika smärttillstånd i knäleden. Ortosens multi-funktioner gör att den enkelt kan anpassas vid utprovning. Optima levereras komplett med inställbara dubbelledade skenor. Hyperextensionskryss på baksidan som enkelt kan monteras på och av. Extra band för att minska att tibia faller framåt i samband med ACL-problem. Ortosen har en anatomiskt formad patellaöppning för optimal passform. Den delade förslutningen på lår och vad gör det enkelt att efterjustera. Materialet i knävecket är extra smidigt för ökad komfort. Optima har rigida band uppe och nere vilket ger ökad stabilitet.

**Användningsområden:** Måttlig hyperextension i knäleden, måttlig/moderat M-L instabilitet, begynnande Artros, patellofemorala smärtsyndrom, Reumatoid artrit, kollateralligamentskador (MCL, LCL) och ACL-skador.

**Kontraindikationer:** Kontaktsport eller andra aktiviteter där knäleden är utsatt för våld och där det finns stor risk för ACL/PCL skador. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

**Övrigt:** Rörelseintervall i ROM leden. Flexion: 45, 60, 75, 90 grader. Extension: 0, 10, 20, 30, 40 grader. Den här produkten finns i två lårvidder, se produktinformation i tabellen. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia.

| Art. nr. | Färg  | Storlek       | Mått 1   | Mått 2   | Mått 3   | Vä/Hö  |
|----------|-------|---------------|----------|----------|----------|--------|
| 35703    | Svart | X-Small       | 25-28 cm | 27-30 cm | 31-36 cm | Bilat. |
| 35703    | Svart | Small         | 28-31 cm | 30-33 cm | 36-40 cm | Bilat. |
| 35703    | Svart | Small Plus    | 28-31 cm | 33-33 cm | 40-44 cm | Bilat. |
| 35703    | Svart | Medium        | 31-34 cm | 33-36 cm | 40-44 cm | Bilat. |
| 35703    | Svart | Medium Plus   | 31-34 cm | 33-36 cm | 44-48 cm | Bilat. |
| 35703    | Svart | Large         | 34-37 cm | 36-39 cm | 44-48 cm | Bilat. |
| 35703    | Svart | Large Plus    | 34-37 cm | 36-39 cm | 48-53 cm | Bilat. |
| 35703    | Svart | X-Large       | 37-40 cm | 39-43 cm | 48-53 cm | Bilat. |
| 35703    | Svart | X-Large Plus  | 37-40 cm | 39-43 cm | 53-60 cm | Bilat. |
| 35703    | Svart | XX-Large      | 40-46 cm | 43-50 cm | 53-60 cm | Bilat. |
| 35703    | Svart | XX-Large Plus | 40-46 cm | 43-50 cm | 60-67 cm | Bilat. |

## CROSS™ Semi-rigid Hyperextensionknäortos

CROSS™ är en semi-rigid knäortos avsedd att användas vid översträckning i knäleden. CROSS har utvecklats speciellt för att passa tillsammans med en ALLARD AFO (Ankel-Fot-Ortos/Droppfotsortos). Inga band eller spännen som hamnar i konflikt med kompositskenan. Bandkrysset på baksidan stabiliserar översträckningen.

Den unika konstruktionen gör den enkel att ta på och av med enbart en hand. Ortosen har en ultramjuk insida utan sömmar som skaver. Den mjuka insidan gör att ortosen glider lätt mot huden och är därför enkel att dra upp på benet. För att hindra migration har ortosen strategiskt placerade silikonband på insidan.

Den unika förstärkningen i ovankanten gör att CROSS™ alltid håller sig öppen och inte kollapsar vilket är en förutsättning för att enkelt kunna ta på ortosen med enbart en hand. Ta-på-hornet hjälper personer med nedsatt balans och räckvidd, att styra ortosen över foten och dra upp den på benet. CROSS™ -ortosen har leder med inställning för flexion och extension. Rörelseintervall i ROM leden är flexion: 45, 60, 75, 90 grader och extension: 0, 10, 20, 30, 40 grader.

**Användningsområden:** CROSS™ är avsedd för mild till måttlig hyperextension i knäleden till följd av neuromuskulära sjukdomar eller andra skador. Ortosen kan användas tillsammans med Allard AFOs när hyperextension i knäleden förekommer i kombination med droppfot.

**Övrigt:** CROSS™ kan tvättas i 40 grader. För mer information om användning och på och avtagning av CROSS™ hänvisar vi till YouTube där det finns en utprovningssvideo. Med i förpackningen finns även en tydlig grafisk instruktion om hur man enklast tar på och av ortosen.

| Art. nr. | Modell              | Storlek    | Mått 1   | Mått 2   | Mått 3   |
|----------|---------------------|------------|----------|----------|----------|
| 28715    | CROSS™ Knäortos     | Small      | 32-37 cm | 32-37 cm | 39-44 cm |
| 28715    | CROSS™ Knäortos     | Medium     | 36-41 cm | 36-41 cm | 43-48 cm |
| 28715    | CROSS™ Knäortos     | Large      | 40-45 cm | 40-45 cm | 47-52 cm |
| 28715    | CROSS™ Knäortos     | X-Large    | 44-49 cm | 44-49 cm | 51-57 cm |
| 28716    | CROSS™ Ta-på-hornet | En storlek |          |          |          |



**Mått 1:** Knämått 15 cm under mid-patella

**Mått 2:** Knämått mid-patella

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella



## Active X™ Short

En knäortos avsedd för olika typer av knäsmärtor som t.ex. mild till moderat sidostabilitet. Ortosen har skenor med inställbar flexion/extensionstopp.

Materialet i ortosen ger en mild kompression och värme. Ortosen finns i både pådragsmodell och dragruntmodell. Löstarbara cirkulära band med D-ring (ett uppe och ett nere). Levereras med leden inställd i 10 graders flexion. Karta med stoppar medföljer vid leverans. Pådragsmodellen har en mjuk polstring runt patella för ökad stabilisering.

**Användningsområden:** Mild/Moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediala eller laterala menisksador.

**Kontraindikationer:** MCL/LCL rupturer. ACL/PCL skador. Var uppmärksam vid svullnad och cirkulationsproblem.

**Övrigt:** Längden på ortosen är 32 cm.

**Mått 1:** Knämått 15 cm under mid-patella

**Mått 2:** Knämått mid-patella

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella

| Art. nr. | Modell         | Färg                           | Storlek   | Mått 1     | Mått 2     | Mått 3     |
|----------|----------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 28050    | Pådragsmodell  | Svart                          | X-Small   | 28 - 33 cm | 28 - 33 cm | 35 - 40 cm |
| 28050    | Pådragsmodell  | Svart                          | Small     | 32 - 37 cm | 32 - 37 cm | 39 - 44 cm |
| 28050    | Pådragsmodell  | Svart                          | Medium    | 36 - 41 cm | 36 - 41 cm | 43 - 48 cm |
| 28050    | Pådragsmodell  | Svart                          | Large     | 40 - 45 cm | 40 - 45 cm | 47 - 52 cm |
| 28050    | Pådragsmodell  | Svart                          | X-Large   | 44 - 49 cm | 44 - 49 cm | 51 - 57 cm |
| 28050    | Pådragsmodell  | Svart                          | XX-Large  | 48 - 54 cm | 48 - 54 cm | 56 - 62 cm |
| 28050    | Pådragsmodell  | Svart                          | XXX-Large | 53 - 60 cm | 53 - 60 cm | 61 - 68 cm |
| 28051    | Dragruntmodell | Svart                          | X-Small   | 28 - 33 cm | 28 - 33 cm | 35 - 40 cm |
| 28051    | Dragruntmodell | Svart                          | Small     | 32 - 38 cm | 32 - 38 cm | 39 - 46 cm |
| 28051    | Dragruntmodell | Svart                          | Medium    | 36 - 42 cm | 36 - 42 cm | 43 - 51 cm |
| 28051    | Dragruntmodell | Svart                          | Large     | 40 - 46 cm | 40 - 46 cm | 47 - 55 cm |
| 28051    | Dragruntmodell | Svart                          | X-Large   | 44 - 50 cm | 44 - 50 cm | 51 - 60 cm |
| 28051    | Dragruntmodell | Svart                          | XX-Large  | 48 - 55 cm | 48 - 55 cm | 56 - 65 cm |
| 28051    | Dragruntmodell | Svart                          | XXX-Large | 54 - 61 cm | 54 - 61 cm | 61 - 71 cm |
| 35710    |                | Flexion/<br>Extension<br>stopp |           |            |            |            |

## Active X™ Long

En knäortos i ett långt utförande avsedd för olika typer av knäsmärtor som t.ex. mild till moderat sidoinstabilitet. Ortosen har skenor med inställbar flexion/extensionstopp. Materialet i ortosen ger en mild kompression och värme. Ortosen finns i både pådragsmodell och dragruntmodell. Löstagbara cirkulära band med D-ring (två uppe och två nere). Levereras med leden inställd i 10 graders flexion. Karta med stoppar medföljer vid leverans. Pådragsmodellen har en mjuk polstring runt patella för ökad stabilisering.

**Användningsområden:** MCL/LCL instabilitet, mindre mediala eller laterala meniskskador, mild gonarthros, bursit, ledbesvär

**Kontraindikationer:** Svåra skador såsom ACL/PCL rupturer. Var uppmärksam vid svullnad och cirkulationsproblem.

**Övrigt:** Längden på ortosen är 40 cm.



**Mått 1:** Knämått 15 cm under mid-patella

**Mått 2:** Knämått mid-patella

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella

| Art. nr. | Modell                         | Färg  | Storlek   | Mått 1     | Mått 2     | Mått 3     |
|----------|--------------------------------|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 28052    | Pådragsmodell                  | Svart | X-Small   | 28 - 33 cm | 28 - 33 cm | 35 - 40 cm |
| 28052    | Pådragsmodell                  | Svart | Small     | 32 - 37 cm | 32 - 37 cm | 39 - 44 cm |
| 28052    | Pådragsmodell                  | Svart | Medium    | 36 - 41 cm | 36 - 41 cm | 43 - 48 cm |
| 28052    | Pådragsmodell                  | Svart | Large     | 40 - 45 cm | 40 - 45 cm | 47 - 52 cm |
| 28052    | Pådragsmodell                  | Svart | X-Large   | 44 - 49 cm | 44 - 49 cm | 51 - 57 cm |
| 28052    | Pådragsmodell                  | Svart | XX-Large  | 48 - 54 cm | 48 - 54 cm | 56 - 62 cm |
| 28052    | Pådragsmodell                  | Svart | XXX-Large | 53 - 60 cm | 53 - 60 cm | 61 - 68 cm |
| 28053    | Dragruntmodell                 | Svart | Small     | 32 - 38 cm | 32 - 38 cm | 39 - 46 cm |
| 28053    | Dragruntmodell                 | Svart | Medium    | 36 - 42 cm | 36 - 42 cm | 43 - 51 cm |
| 28053    | Dragruntmodell                 | Svart | Large     | 40 - 46 cm | 40 - 46 cm | 47 - 55 cm |
| 28053    | Dragruntmodell                 | Svart | X-Large   | 44 - 50 cm | 44 - 50 cm | 51 - 60 cm |
| 28053    | Dragruntmodell                 | Svart | XX-Large  | 48 - 55 cm | 48 - 55 cm | 56 - 65 cm |
| 28053    | Dragruntmodell                 | Svart | XXX-Large | 54 - 61 cm | 54 - 61 cm | 61 - 71 cm |
| 35710    | Flexion/<br>Extension<br>stopp |       |           |            |            |            |



**Mått 1:** Knämått 15 cm under mid-patella

**Mått 2:** Knämått mid-patella

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella

## Active X Sleeve

Denna pådragsmodell är avsedd att användas vid lindrigare smärttillstånd i knäet. Materialet i ortosen ger en mild kompression och värme. Patella öppningen är anatomiskt formad för optimal passform. Runt patella öppningen ligger en mjuk polstring för ökad patellastabilisering. Ortosen har kardborrjustering på lårets framsida och på vadens baksida. Active X Sleeve har en spiralskena på varje sida.

**Användningsområden:** Knäsmärta vid belastning, lättare ligamentskador, överansträngning, lindrig knäinstabilitet.

**Kontraindikationer:** Svårare knäskador såsom ACL/PCL rupturer, svårare MCL/LCL skador. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

**Övrigt:** Ortosens längd är 32 cm

| Art. nr. | Modell          | Storlek   | Mått 1     | Mått 2     | Mått 3     |
|----------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 28056    | Active X Sleeve | X-Small   | 28 - 33 cm | 28 - 33 cm | 35 - 40 cm |
| 28056    | Active X Sleeve | Small     | 32 - 37 cm | 32 - 37 cm | 39 - 44 cm |
| 28056    | Active X Sleeve | Medium    | 36 - 41 cm | 36 - 41 cm | 43 - 48 cm |
| 28056    | Active X Sleeve | Large     | 40 - 45 cm | 40 - 45 cm | 47 - 52 cm |
| 28056    | Active X Sleeve | X-Large   | 44 - 49 cm | 44 - 49 cm | 51 - 57 cm |
| 28056    | Active X Sleeve | XX-Large  | 48 - 54 cm | 48 - 54 cm | 56 - 62 cm |
| 28056    | Active X Sleeve | XXX-Large | 53 - 60 cm | 53 - 60 cm | 61 - 68 cm |

## Active X Sleeve PLUS

Denna pådragsmodell är avsedd att användas vid lindrigare smärttillstånd i knäet. Materialet i ortosen ger en mild kompression och värme. Patella öppningen är anatomiskt formad för optimal passform. Runt patella öppningen ligger en mjuk polstring för ökad patellastabilisering. Ortosen har kardborrjustering på lårets framsida och på vadens baksida. Active X Sleeve PLUS har två spiralskenor på varje sida samt två stabiliserande cirkulära band. PLUS är därför något stabilare än Active X Sleeve. För övrigt har ortoserna samma design och egenskaper.

**Användningsområden:** Knäsmärta vid belastning, lättare ligamentskador, överansträngning, lindrig knäinstabilitet.

**Kontraindikationer:** Svårare knäskador såsom ACL/PCL rupturer, svårare MCL/LCL skador. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

**Övrigt:** Ortosens längd är 32 cm

| Art. nr. | Modell               | Storlek   | Mått 1     | Mått 2     | Mått 3     |
|----------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 28057    | Active X Sleeve PLUS | X-Small   | 28 - 33 cm | 28 - 33 cm | 35 - 40 cm |
| 28057    | Active X Sleeve PLUS | Small     | 32 - 37 cm | 32 - 37 cm | 39 - 44 cm |
| 28057    | Active X Sleeve PLUS | Medium    | 36 - 41 cm | 36 - 41 cm | 43 - 48 cm |
| 28057    | Active X Sleeve PLUS | Large     | 40 - 45 cm | 40 - 45 cm | 47 - 52 cm |
| 28057    | Active X Sleeve PLUS | X-Large   | 44 - 49 cm | 44 - 49 cm | 51 - 57 cm |
| 28057    | Active X Sleeve PLUS | XX-Large  | 48 - 54 cm | 48 - 54 cm | 56 - 62 cm |
| 28057    | Active X Sleeve PLUS | XXX-Large | 53 - 60 cm | 53 - 60 cm | 61 - 68 cm |



**Mått:** Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

**Mått 2:** Knämått mid-patella

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella



**Mått 1:** Knämått 15 cm under mid-patella

**Mått 2:** Knämått mid-patella

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella

## Active X™ Double Axis

En knäortos avsedd för olika typer av knäsmärtor som t.ex. mild till moderat sidostabilitet. Ortosen har dubbelledade skenor och är inställd i 10 graders flexion. Materialet ger en mild kompression och värme. Löstagbara cirkulära band med D-ring (ett uppe och ett nere). Ortosen finns i både pådragsmodell och dragruntomodell. Pådragsmodellen har en mjuk polstring runt patella för ökad stabilisering.

**Användningsområden:** Mild/Moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediala eller laterala meniskskador.

**Kontraindikationer:** MCL/LCL rupturer. ACL/PCL skador. Var uppmärksam vid svullnad och cirkulationsproblem.

**Övrigt:** Längden på ortosen är 32 cm.

| Art. nr. | Modell          | Färg  | Storlek   | Mått 1     | Mått 2     | Mått 3     |
|----------|-----------------|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 28058    | Pådragsmodell   | Svart | X-Small   | 28 - 33 cm | 28 - 33 cm | 35 - 40 cm |
| 28058    | Pådragsmodell   | Svart | Small     | 32 - 37 cm | 32 - 37 cm | 39 - 44 cm |
| 28058    | Pådragsmodell   | Svart | Medium    | 36 - 41 cm | 36 - 41 cm | 43 - 48 cm |
| 28058    | Pådragsmodell   | Svart | Large     | 40 - 45 cm | 40 - 45 cm | 47 - 52 cm |
| 28058    | Pådragsmodell   | Svart | X-Large   | 44 - 49 cm | 44 - 49 cm | 51 - 57 cm |
| 28058    | Pådragsmodell   | Svart | XX-Large  | 48 - 54 cm | 48 - 54 cm | 56 - 62 cm |
| 28058    | Pådragsmodell   | Svart | XXX-Large | 53 - 60 cm | 53 - 60 cm | 61 - 68 cm |
| 28059    | Dragruntomodell | Svart | Small     | 32 - 38 cm | 32 - 38 cm | 39 - 46 cm |
| 28059    | Dragruntomodell | Svart | Medium    | 36 - 42 cm | 36 - 42 cm | 43 - 51 cm |
| 28059    | Dragruntomodell | Svart | Large     | 40 - 46 cm | 40 - 46 cm | 47 - 55 cm |
| 28059    | Dragruntomodell | Svart | X-Large   | 44 - 50 cm | 44 - 50 cm | 51 - 60 cm |
| 28059    | Dragruntomodell | Svart | XX-Large  | 48 - 55 cm | 48 - 55 cm | 56 - 65 cm |
| 28059    | Dragruntomodell | Svart | XXX-Large | 54 - 61 cm | 54 - 61 cm | 61 - 71 cm |



## Elcross knä dragrunt

Dragruntmodell med patellaöppning och öppet knäveck. Modellen har integrerade, cirkulära stödband med kardborrlåsning vilket gör den enkel att ta på. Ortosen har enkelledade skenor. Elcrossmaterialet har mjuk bomull på insidan och polyester på utsidan.

**Användningsområden:** Lindrig knäledsinstabilitet och smärta i knäleden.

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Mått     | Vä/Hö  |
|----------|-------|---------|----------|--------|
| 28124    | Beige | Small   | 31-37 cm | Bilat. |
| 28124    | Beige | Medium  | 37-43 cm | Bilat. |
| 28124    | Beige | Large   | 43-49 cm | Bilat. |
| 28124    | Beige | X-Large | 49-55 cm | Bilat. |



**Mått:** Knämått mid-patella

## Gripper™ hinged knee

Dragruntmodell med patellaöppning och öppning i knävecket. Modellen har integrerade cirkulära stödband med kardborrlåsning samt metallskenor i förstärkta fickor. Enkel att ta på. Ortosen är tillverkad av ett material som andas. För att förhindra att ortosen glider ner, har ett antiglidmaterial monterats på ortosens insida.

**Användningsområden:** Lindrig knäledsinstabilitet.

| Art. nr. | Färg  | Storlek   | Mått     | Vä/Hö  |
|----------|-------|-----------|----------|--------|
| 28128    | Svart | X-Small   | 25-30 cm | Bilat. |
| 28128    | Svart | Small     | 30-35 cm | Bilat. |
| 28128    | Svart | Medium    | 35-40 cm | Bilat. |
| 28128    | Svart | Large     | 40-45 cm | Bilat. |
| 28128    | Svart | X-Large   | 45-50 cm | Bilat. |
| 28128    | Svart | XX-Large  | 50-55 cm | Bilat. |
| 28128    | Svart | XXX-Large | >55 cm   | Bilat. |



**Mått:** Knämått mid-patella

## KNÄ immobilizer

Immobiliseringsortos av polyesterelour med inbyggda skenor för stabilisering. Ortosen är uppbyggd av olika paneler för att göra det enkelt att justera omfånget. Kardborrlåsning genom D-ringar. Öppen för patella. Finns i vuxen- och barnstorlek.

**Användningsområden:** Postoperativ behandling, muskel- och ligamentskador, efter gipsning och enklare ståtränning.

| Art. nr. | Storlek | Mått 1   | Mått 2   | Längd | Vä/Hö  |
|----------|---------|----------|----------|-------|--------|
| 28655    | Barn    | 43-46 cm | 28-34 cm | 45 cm | Bilat. |
| 28655    | Vuxen   | 46-51 cm | 34-41 cm | 50 cm | Bilat. |



**Mått 1:** Knämått 15 cm ovan mid-patella.

**Mått 2:** Knämått mid-patella.



**Mått 1:** Längd ortos

**Mått 2:** Omkrets lår

**Mått 3:** Omkrets vad

## Knäimmobiliseringsskena

Immobiliseringsskena avsedd för tillfällig immobilisering av knäleden. Kan också användas som stöd vid enklare ståträning. Skenan finns i två olika längder. För att justera omkretsen kan de två sidostyckena flyttas framåt/bakåt i syfte att anpassa storleken optimalt. De dorsala skenorna kan böjas försiktigt till önskad grad av flexion.

**Användningsområden:** Vid tillfällig immobilisering av knäleden och vid enklare ståträning. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

| Art. nr. | Färg    | Storlek       | Mått 1 | Mått 2   | Mått 3   |
|----------|---------|---------------|--------|----------|----------|
| 47500    | Ljusgrå | Small/Medium  | 51 cm  | 39-60 cm | 30-45 cm |
| 47500    | Ljusgrå | Large/X-Large | 60 cm  | 47-73 cm | 34-47 cm |



## OACTIVE®2

Unilateral knäortos för behandling av enkelsidig knäartros. Smidig och enkel konstruktion med låg vikt. Tillverkad av aluminium. Ortosen har smarta innovativa spännen för att underlätta att ta på och av ortosen.

Den unika Q-leden justeras med eller motsols för att uppnå önskad avlastning. Börja med ortosen i neutralläge, med knäet böjt i 90°, och vrid 1/8 dels varv i taget för att justera avlastningen. OACTIVE® 2 kan även ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat. Ortosen levereras med en karta med olika stopp för flexion och extension.

OACTIVE® 2 finns i en storlek, vänster eller höger.

**Användningsområden:** Mild till svår enkelsidig knäartros. Medialt eller lateralt.

**Kontraindikationer:** Se bruksanvisningen.

**Övrigt:** OACTIVE® 2 har en viktbegränsning på max 135 kg.

| Art. nr. | Modell                       | Storlek    | Vä/Hö |
|----------|------------------------------|------------|-------|
| 55000    | OACTIVE 2                    | En storlek | Vä/Hö |
| 55012    | Extra Bandset (utan spännen) | One Size   | Vä/Hö |
| 55013    | Extra polstring              | One Size   | Vä/Hö |
| 55014    | Suspension Wrap              | 61 cm      |       |
| 55014    | Suspension Wrap              | 81 cm      |       |

## Catalyst Propel™ OA

Denna fyrapunkts-knäortos är avsedd för behandling av mild till svår enkelsidig knäartros i kombination med knäinstabilitet eller efter skada för att reducera belastningen mot leden. Ortosen har den unika Active Thigh Cuff™ (ATC) lösningen på lårets framsida. Detta är en flexibel och stark dubbel lårmanchett som möjliggör den ultimata upphängningen. Ger skydd och komfort genom att röra sig med musklerna igenom hela rörelsen. Stark men lågprofil aluminiumram av högsta kvalitet ger ett överlägset skydd.

Ortosens Q-led justeras med eller motsols för att uppnå önskad avlastning. Börja med ortosen i neutralläge, med knäet böjt i 90°, och vrid 1/8 dels varv i taget för att justera avlastningen. Ortosen levereras med en karta med olika stopp för flexion och extension. Catalyst Propel™ OA kan även ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.

**Användningsområden:** Mild till svår enkelsidig knäartros i kombination med knäinstabilitet. Efter skada för att reducera belastningen mot leden.

**Kontraindikationer:** Se bruksanvisningen.



**Mått 1:** Knämått 15 cm under mid-patella.

**Mått 2:** Knämått mid-patella.

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella.

| Art. nr. | Modell              | Storlek  | Mått 1    | Mått 2   | Mått 3   | Vä/Hö |
|----------|---------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 5500I    | Catalyst Propel™ OA | Small    | 29-33 cm  | 29-33 cm | 37-43 cm | Vä/Hö |
| 5500I    | Catalyst Propel™ OA | Medium   | 33- 37 cm | 33-38 cm | 43-49 cm | Vä/Hö |
| 5500I    | Catalyst Propel™ OA | Large    | 37-42 cm  | 38-43 cm | 49-57 cm | Vä/Hö |
| 5500I    | Catalyst Propel™ OA | X-Large  | 42-47 cm  | 43-48 cm | 57-65 cm | Vä/Hö |
| 5500I    | Catalyst Propel™ OA | XX-Large | 47-56 cm  | 48-56 cm | 65-76 cm | Vä/Hö |
| 55009    | Extra Polstring     | Small    |           |          |          | Vä/Hö |
| 55009    | Extra Polstring     | Medium   |           |          |          | Vä/Hö |
| 55009    | Extra Polstring     | Large    |           |          |          | Vä/Hö |
| 55009    | Extra Polstring     | X-Large  |           |          |          | Vä/Hö |
| 55009    | Extra Polstring     | XX-Large |           |          |          | Vä/Hö |
| 55010    | Extra bandset       | Small    |           |          |          |       |
| 55010    | Extra bandset       | Medium   |           |          |          |       |
| 55010    | Extra bandset       | Large    |           |          |          |       |
| 55010    | Extra bandset       | X-Large  |           |          |          |       |
| 55010    | Extra bandset       | XX-Large |           |          |          |       |
| 5501I    | PCL Band            | 35 cm    |           |          |          |       |
| 5501I    | PCL Band            | 43 cm    |           |          |          |       |
| 5501I    | PCL Band            | 50 cm    |           |          |          |       |



**Mått 1:** Knämått 15 cm under mid-patella.

**Mått 2:** Knämått mid-patella.

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella.

## FreeFlex™ OA

Denna textila OA-ortos är avsedd för mild till moderat enkelsidig knäartros. Det är en helt öppen draggrundmodell med led på en sida. Samma ortos fungerar för medial eller lateral sida. Medial höger blir en lateral vänster. Den unika Q-leden justeras med eller motsols för att uppnå önskad avlastning. Börja med ortosen i neutralläge, med knäet böjt i 90°, och vrid 1/8 dels varv i taget för att justera avlastningen. Ortosen levereras med en karta med olika stopp för flexion och extension.

FreeFlex™ OA kan även ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.

**Användningsområden:** Mild till moderat enkelsidig knäartros i kombination med knäinstabilitet. Efter skada för att reducera belastningen mot leden.

**Kontraindikationer:** Se bruksanvisningen

**Övrigt:** Ortos för vänster = Vänster medial/höger lateral. Ortos för höger = Höger medial/vänster lateral.

| Art. nr. | Modell       | Storlek | Mått 1    | Mått 2    | Mått 3    | Vä/Hö |
|----------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 55002    | FreeFlex™ OA | XS/S    | >29-33 cm | >29-33 cm | >37-43 cm | Vä/Hö |
| 55002    | FreeFlex™ OA | M/L     | 33-42 cm  | 33-43 cm  | 43-57 cm  | Vä/Hö |
| 55002    | FreeFlex™ OA | XL/XXL  | 42-56 cm  | 43-56 cm  | 57-76 cm  | Vä/Hö |

## Catalyst Propel™ ATC

Denna fyrrpunkts ligamentortos har alla önskade funktioner för den aktiva brukaren. Den patenterade Active Thigh Cuff (ATC) är en flexibel och stark dubbel lårmanschett som ger den ultimata upphängningen. Stark och bekväm som låter musklerna följa med i hela rörelsen. Ortosen är tillverkad av lågprofil aluminium av högsta kvalitet. Skenorna kan skränkas för optimal passform.

Catalyst Propel™ ATC har bygel på underbenets framsida.

Catalyst Propel™ ATC kan ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.

**Användningsområden:** Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling vid kombinerad ligamentinstabilitet. Som säkerhet efter operation. Konservativ behandling av ligamentskador. I förebyggande syfte i samband med hög aktivitet.

**Kontraindikationer:** Se bruksanvisningen.



**Mått 1:** Knämått 15 cm under mid-patella.

**Mått 2:** Knämått mid-patella.

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella.

| Art. nr. | Modell               | Storlek  | Mått 1   | Mått 2   | Mått 3   | Vä/Hö |
|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 55003    | Catalyst Propel™ ATC | Small    | 29-33 cm | 29-33 cm | 37-43 cm | Vä/Hö |
| 55003    | Catalyst Propel™ ATC | Medium   | 33-37 cm | 33-38 cm | 43-49 cm | Vä/Hö |
| 55003    | Catalyst Propel™ ATC | Large    | 37-42 cm | 38-43 cm | 49-57 cm | Vä/Hö |
| 55003    | Catalyst Propel™ ATC | X-Large  | 42-47 cm | 43-48 cm | 57-65 cm | Vä/Hö |
| 55003    | Catalyst Propel™ ATC | XX-Large | 47-56 cm | 48-56 cm | 65-76 cm | Vä/Hö |
| 55008    | Extra polstring      | Small    |          |          |          | Vä/Hö |
| 55008    | Extra polstring      | Medium   |          |          |          | Vä/Hö |
| 55008    | Extra polstring      | Large    |          |          |          | Vä/Hö |
| 55008    | Extra polstring      | X-Large  |          |          |          | Vä/Hö |
| 55008    | Extra polstring      | XX-Large |          |          |          | Vä/Hö |
| 55010    | Extra Bandset        | Small    |          |          |          |       |
| 55010    | Extra Bandset        | Medium   |          |          |          |       |
| 55010    | Extra Bandset        | Large    |          |          |          |       |
| 55010    | Extra Bandset        | X-Large  |          |          |          |       |
| 55010    | Extra Bandset        | XX-Large |          |          |          |       |
| 55011    | PCL Band             | 35 cm    |          |          |          |       |
| 55011    | PCL Band             | 43 cm    |          |          |          |       |
| 55011    | PCL Band             | 50 cm    |          |          |          |       |



**Mått 1:** Knämått 15 cm under mid-patella.

**Mått 2:** Knämått mid-patella.

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella.

## Catalyst Propel™ Rigid Top

Denna fyrapunkts ligamentortos har alla önskade funktioner för den aktiva brukaren. Ortosen är tillverkad av lågprofil aluminium av högsta kvalitet. Skenorna kan skränkas för optimal passform. Catalyst Propel™ Rigid Top har bygel på lårets framsida och underbenets framsida.

Catalyst Propel™ Rigid Top kan ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.

**Användningsområden:** Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling vid kombinerad ligamentinstabilitet. Som säkerhet efter operation. Konservativ behandling av ligamentskador. I förebyggande syfte i samband med hög aktivitet.

**Kontraindikationer:** Se bruksanvisningen.

| Art. nr. | Modell                     | Storlek  | Mått 1   | Mått 2   | Mått 3   | Vä/Hö |
|----------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 55004    | Catalyst Propel™ Rigid Top | Small    | 29-33 cm | 29-33 cm | 37-43 cm | Vä/Hö |
| 55004    | Catalyst Propel™ Rigid Top | Medium   | 33-37 cm | 33-38 cm | 43-49 cm | Vä/Hö |
| 55004    | Catalyst Propel™ Rigid Top | Large    | 37-42 cm | 38-43 cm | 49-57 cm | Vä/Hö |
| 55004    | Catalyst Propel™ Rigid Top | X-Large  | 42-47 cm | 43-48 cm | 57-65 cm | Vä/Hö |
| 55004    | Catalyst Propel™ Rigid Top | XX-Large | 47-56 cm | 48-56 cm | 65-76 cm | Vä/Hö |
| 55009    | Extra Polstring            | Small    |          |          |          | Vä/Hö |
| 55009    | Extra Polstring            | Medium   |          |          |          | Vä/Hö |
| 55009    | Extra Polstring            | Large    |          |          |          | Vä/Hö |
| 55009    | Extra Polstring            | X-Large  |          |          |          | Vä/Hö |
| 55009    | Extra Polstring            | XX-Large |          |          |          | Vä/Hö |
| 55010    | Extra Bandset              | Small    |          |          |          |       |
| 55010    | Extra Bandset              | Medium   |          |          |          |       |
| 55010    | Extra Bandset              | Large    |          |          |          |       |
| 55010    | Extra Bandset              | X-Large  |          |          |          |       |
| 55010    | Extra Bandset              | XX-Large |          |          |          |       |
| 55011    | PCL Band                   | 35 cm    |          |          |          |       |
| 55011    | PCL Band                   | 43 cm    |          |          |          |       |
| 55011    | PCL Band                   | 50 cm    |          |          |          |       |

## Catalyst Elite™ ATC

Denna fyrrpunkts ligamentortos har alla önskade funktioner för den aktiva brukaren. Den patenterade Active Thigh Cuff (ATC) är en flexibel och stark dubbel lårmanschett som ger den ultimata upphängningen. Stark och bekväm som låter musklerna följa med i hela rörelsen. Ortosen är tillverkad av lågprofil aluminium av högsta kvalitet. Skenorna kan skränkas för optimal passform. Catalyst Elite™ ATC har bygel på underbenets baksida.

Catalyst Elite™ ATC kan ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.

**Användningsområden:** Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling vid kombinerad ligamentinstabilitet. Som säkerhet efter operation. Konservativ behandling av ligamentskador. I förebyggande syfte i samband med hög aktivitet.

**Kontraindikationer:** Se bruksanvisningen.

| Art. nr. | Modell              | Storlek  | Mått 1   | Mått 2   | Mått 3   | Vä/Hö |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 55005    | Catalyst Elite™ ATC | Small    | 29-33 cm | 29-33 cm | 37-43 cm | Vä/Hö |
| 55005    | Catalyst Elite™ ATC | Medium   | 33-37 cm | 33-38 cm | 43-49 cm | Vä/Hö |
| 55005    | Catalyst Elite™ ATC | Large    | 37-42 cm | 38-43 cm | 49-57 cm | Vä/Hö |
| 55005    | Catalyst Elite™ ATC | X-Large  | 42-47 cm | 43-48 cm | 57-65 cm | Vä/Hö |
| 55005    | Catalyst Elite™ ATC | XX-Large | 47-56 cm | 48-56 cm | 65-76 cm | Vä/Hö |
| 55008    | Extra Polstring     | Small    |          |          |          | Vä/Hö |
| 55008    | Extra Polstring     | Medium   |          |          |          | Vä/Hö |
| 55008    | Extra Polstring     | Large    |          |          |          | Vä/Hö |
| 55008    | Extra Polstring     | X-Large  |          |          |          | Vä/Hö |
| 55008    | Extra Polstring     | XX-Large |          |          |          | Vä/Hö |
| 55010    | Extra Bandset       | Small    |          |          |          |       |
| 55010    | Extra Bandset       | Medium   |          |          |          |       |
| 55010    | Extra Bandset       | Large    |          |          |          |       |
| 55010    | Extra Bandset       | X-Large  |          |          |          |       |
| 55010    | Extra Bandset       | XX-Large |          |          |          |       |
| 55011    | PCL Band            | 35 cm    |          |          |          |       |
| 55011    | PCL Band            | 43 cm    |          |          |          |       |
| 55011    | PCL Band            | 50 cm    |          |          |          |       |



**Mått 1:** Knämått 15 cm under mid-patella.

**Mått 2:** Knämått mid-patella.

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella.



**Mått 1:** Knämått 15 cm under mid-patella.

**Mått 2:** Knämått mid-patella.

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella.

## Catalyst Elite™ Rigid Top

Denna fyrapunkts ligamentortos har alla önskade funktioner för den aktiva brukaren. Ortosen är tillverkad av lågprofil aluminium av högsta kvalitet. Skenorna kan skränkas för optimal passform. Catalyst Elite™ Rigid Top har bygel på lårets framsida och underbenets baksida.

Catalyst Elite™ Rigid Top kan ställas in för att begränsa rörelseområdet för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.

**Användningsområden:** Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling vid kombinerad ligamentinstabilitet. Som säkerhet efter operation. Konservativ behandling av ligamentskador. I förebyggande syfte i samband med hög aktivitet.

**Kontraindikationer:** Se bruksanvisningen.

| Art. nr. | Modell                    | Storlek  | Mått 1   | Mått 2   | Mått 3   | Vä/Hö |
|----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 55006    | Catalyst Elite™ Rigid Top | Small    | 29-33 cm | 29-33    | 37-43 cm | Vä/Hö |
| 55006    | Catalyst Elite™ Rigid Top | Medium   | 33-37 cm | 33-38 cm | 43-49 cm | Vä/Hö |
| 55006    | Catalyst Elite™ Rigid Top | Large    | 37-42 cm | 38-43 cm | 49-57 cm | Vä/Hö |
| 55006    | Catalyst Elite™ Rigid Top | X-Large  | 42-47 cm | 43-48 cm | 57-65 cm | Vä/Hö |
| 55006    | Catalyst Elite™ Rigid Top | XX-Large | 47-56 cm | 48-56 cm | 65-76 cm | Vä/Hö |
| 55009    | Extra Polstring           | Small    |          |          |          | Vä/Hö |
| 55009    | Extra Polstring           | Medium   |          |          |          | Vä/Hö |
| 55009    | Extra Polstring           | Large    |          |          |          | Vä/Hö |
| 55009    | Extra Polstring           | X-Large  |          |          |          | Vä/Hö |
| 55009    | Extra Polstring           | XX-Large |          |          |          | Vä/Hö |
| 55010    | Extra Bandset             | Small    |          |          |          |       |
| 55010    | Extra Bandset             | Medium   |          |          |          |       |
| 55010    | Extra Bandset             | Large    |          |          |          |       |
| 55010    | Extra Bandset             | X-Large  |          |          |          |       |
| 55010    | Extra Bandset             | XX-Large |          |          |          |       |
| 55011    | PCL Band                  | 35 cm    |          |          |          |       |
| 55011    | PCL Band                  | 43 cm    |          |          |          |       |
| 55011    | PCL Band                  | 50 cm    |          |          |          |       |



## Catalyst Propel™ R.O.M.ATC

Catalyst Propel R.O.M.ATC är utvecklad för att även fungera som en postoperativ ortos. Förutom ledens inställningsmöjligheter har denna i övrigt samma egenskaper och funktioner som ligamentortosen Catalyst Propel. R.O.M-ortosen finns endast med den patenterade Active Thigh Cuff (ATC), som är en flexibel och stark dubbel lårmanschett som ger den ultimata upphängningen. Stark och bekväm och låter musklerna följa med i hela rörelsen. Ortosen är tillverkad av lågprofil aluminium av högsta kvalitet. Skenorna kan skränkas för optimal passform. Catalyst Propel™ R.O.M.ATC har bygel på underbenets framsida.

Catalyst Propel™ ROMATC kan låsas i en fast position vid 0°, 15°, 30°, 60°, eller 90° eller ställas in i rörelseomfång mellan 0°, 15°, 30°, 60° och 90°.

**Användningsområden:** Postoperativ behandling. Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling vid kombinerad ligamentinstabilitet. Konservativ behandling av ligamentskador.



**Mått 1:** Knämått 15 cm under mid-patella.

**Mått 2:** Knämått mid-patella.

**Mått 3:** Knämått 15 cm ovan mid-patella.

| Art. nr. | Modell                     | Storlek  | Mått 1   | Mått 2   | Mått 3   | Vä/Hö |
|----------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 55007    | Catalyst Propel™ R.O.M.ATC | Small    | 29-33 cm | 29-33 cm | 37-43 cm | Vä/Hö |
| 55007    | Catalyst Propel™ R.O.M.ATC | Medium   | 33-37 cm | 33-38 cm | 43-49 cm | Vä/Hö |
| 55007    | Catalyst Propel™ R.O.M.ATC | Large    | 37-42 cm | 38-43 cm | 49-57 cm | Vä/Hö |
| 55007    | Catalyst Propel™ R.O.M.ATC | X-Large  | 42-47 cm | 43-48 cm | 57-65 cm | Vä/Hö |
| 55007    | Catalyst Propel™ R.O.M.ATC | XX-Large | 47-56 cm | 48-56 cm | 65-76 cm | Vä/Hö |
| 55008    | Extra polstring            | Small    |          |          |          | Vä/Hö |
| 55008    | Extra polstring            | Medium   |          |          |          | Vä/Hö |
| 55008    | Extra polstring            | Large    |          |          |          | Vä/Hö |
| 55008    | Extra polstring            | X-Large  |          |          |          | Vä/Hö |
| 55008    | Extra polstring            | XX-Large |          |          |          | Vä/Hö |
| 55010    | Extra bandset              | Small    |          |          |          |       |
| 55010    | Extra bandset              | Medium   |          |          |          |       |
| 55010    | Extra bandset              | Large    |          |          |          |       |
| 55010    | Extra bandset              | X-Large  |          |          |          |       |
| 55010    | Extra bandset              | XX-Large |          |          |          |       |



**Mått:** Knämått mid-patella



**Mått:** Knämått M-L mid-patella

## Swedish Knee

Ortos för hyperextension eller instabilitet i knäleden. Tillverkad av aluminium med band i bomullscanvas. Enkel konstruktion med justerbar tryckkudde samt böjbara skänklar. Ingen mekanisk knäled vilket hindrar hyperextension.

**Användningsområden:** Hyperextension i knäleden.

| Art. nr. | Färg                    | Storlek      | Mått       | Vä/Hö  |
|----------|-------------------------|--------------|------------|--------|
| 28668    | Vit                     | Small/Medium | 28 - 38 cm | Bilat. |
| 28668    | Vit                     | Medium/Large | 38 - 53 cm | Bilat. |
| 28669    | Extra band och skruvset | Small/Medium |            | Bilat. |
| 28669    | Extra band och skruvset | Medium/Large |            | Bilat. |

## CHECK™ stainless steel

Bekväm knäortos tillverkad av rostfritt stål avsedd att motverka hyperextension och att stödja vid instabilitet i knäleden. Ortosens längd gör att trycket mot femur och tibia blir mindre och ortosen blir mer bekväm. Den smidiga konstruktionen gör att ortosen kan bäras under kläder. Polstringen är tillverkad av konstläder. D-ringarna som medföljer kan sättas på den sida av ortosen som passar patienten bäst. Ortosen har kondylkuddar.

**Användningsområden:** Check Stainless syfte är att motverka hyperextension i knäleden och att stödja knäledsinstabilitet. Indikationer för användning av Check Stainless är: Genu recurvatum, ligamentinstabilitet, valgus/varus instabilitet, neurologiska skador/sjukdomar som medför svaghet i m Quadriceps

**Kontraindikationer:** Ej avsedd för idrottsaktiviteter.

| Art. nr. | Färg                | Mått    | Längd | Vä/Hö  |
|----------|---------------------|---------|-------|--------|
| 28652    | Svart               | 9-13 cm | 45 cm | Bilat. |
| 28651    | Extra bandset       |         |       |        |
| 28653    | Extra D-ringar 4 st |         |       |        |

## ToeOFF® Combo

Combo är en ortos-del speciellt framtagen för behandling av hyperextension i kombination med droppfot. Combo är en förlängning som monteras på en ToeOFF® eller BlueROCKER®. Den unika konstruktionen gör att droppfotsskenan och Combo-delen enkelt kan kopplas isär.

**Användningsområden:** Knäledsinstabilitet, översträckning i kombination med droppfot med ursprung från stroke, post-polio, MS, neuropati etc. Patientvikt max 150 kg. Patients längd max. 2 m.

**Kontraindikationer:** Total avsaknad av ligament i knäet. Totalt Quadricepsbortfall. Patientlängd över 2 meter. Patientvikt över 150 kg. Kraftigt försämrad kognitiv förmåga. OBS: När utprovningen är slutförd får det inte finnas mer än 10° hyperextension kvar i ortosen.



**Mått:** Knämått 1: M-L mid-patella  
Knämått 2: Omkrets 20 cm ovan mid-patella  
Knämått 3: M-L 20 cm ovan mid-patella

| Art. nr. | Modell                   | Storlek    | Vä/Hö  | Knämått 2  | Knämått 3 | Knämått 1 |
|----------|--------------------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 28780    | Knäled med skenor (par)  | En storlek |        |            |           |           |
| 28781    | Lårdel                   | Small      | Vä/Hö  |            | 30-40 cm  | 11-15 cm  |
| 28781    | Lårdel                   | Medium     | Vä/Hö  |            | 38-50 cm  | 13-17 cm  |
| 28781    | Lårdel                   | Large      | Vä/Hö  |            | 48-60 cm  | 15-19 cm  |
| 28781    | Lårdel                   | X-Large    | Vä/Hö  |            | 58-70 cm  | 17-21 cm  |
| 28782    | Band, textil och spännen | Small      | Bilat. | 7-10,5 cm  |           |           |
| 28782    | Band, textil och spännen | Medium     | Bilat. | 9,5-13 cm  |           |           |
| 28782    | Band, textil och spännen | Large      | Bilat. | 12,5-16 cm |           |           |
| 28783    | Softkit (2 st)           | Small      |        |            |           |           |
| 28783    | Softkit (2 st)           | Medium     |        |            |           |           |
| 28783    | Softkit (2 st)           | Large      |        |            |           |           |
| 28783    | Softkit (2 st)           | X-Large    |        |            |           |           |
| 28784    | Tibiakoppling            | Small      |        |            |           |           |
| 28784    | Tibiakoppling            | Medium     |        |            |           |           |
| 28784    | Tibiakoppling            | L-XL       |        |            |           |           |



## Ascender® post-op knäortos

Ascender® är en teleskopisk postoperativ knäortos med extensions begränsning som kan ställas in mellan  $-10^\circ$  (hyperextension) och  $70^\circ$ . Flexions begränsning kan ställas mellan  $-10^\circ$  och  $120^\circ$ . Inställningen justeras enkelt genom att lyfta och flytta stopparna i leden. Leden kan även låsas i fem olika lägen;  $-10^\circ$  (hyperextension),  $0^\circ$  (neutral),  $10^\circ$ ,  $20^\circ$ ,  $30^\circ$  flexion. Leden kan säkras extra genom att sätta in en "Anti-tamper låsning" ovanför själva stoppet. Detta måste sen klippas bort med sax för att öppna inställningen.

Varje skena kan justeras till önskad längd individuellt. På varje skena finns en hake som öppnas. Skenan har tydliga markeringar för att säkerställa att det är samma längd på den laterala och mediala skenan.

Den mjuka och följsamma polstringen har anti-glid material på insidan. Banden låses med extra låsklips för att hållas på plats under utprovningen. Ortosen stängs med kraftiga spännen som hakas fast. Bandens längd kan enkelt justeras genom att lossa Y-tabben och klippa bandet till önskad längd. Polstringen och banden kan tvättas för hand i ljummet vatten med en mild tvålösning. Universalmodell som passar både vänster och höger. En storlek.

**Användningsområden:** Postoperativ behandling.

| Art. nr. | Modell                           | Storlek    | Längd      | Vä/Hö  |
|----------|----------------------------------|------------|------------|--------|
| 47540    | Ascender post-op knäortos        | En storlek | 44 – 70 cm | Bilat. |
| 47541    | Komplett polstrings- och bandset | En storlek |            | Bilat. |
| 47542    | Extra polstringsset              | En storlek |            | Bilat. |
| 47543    | Extra bandset                    | En storlek |            | Bilat. |



## E-SENSE ROM post-op knäortos

Denna helt unika postoperativa knäortos har teleskopiska skenor som kan justeras uppe eller nere till önskad längd mellan 46 till 69 cm. Leden är inställbar i önskar rörelseomfång. Flexion från  $0^\circ$  -  $120^\circ$  med  $10^\circ$  intervall och extension från  $0^\circ$  -  $90^\circ$  med  $10^\circ$  intervall. Leden kan även låsas i  $0^\circ$ ,  $15^\circ$  och  $30^\circ$  med en enkel knapptryckning. Polstringen är tillverkad i ett "non-slip" material som andas. Materialets konstruktion gör att polstringen inte glider på benet. Endast en storlek som passar både vänster och höger. Det behövs inte några verktyg för att genomföra inställningarna. Banden har dubbellåsning - både med plastkrok och med kardborrlåsning.

**Användningsområden:** Postoperativ behandling.

| Art. nr. | Modell                       | Storlek    | Mått       | Vä/Hö  |
|----------|------------------------------|------------|------------|--------|
| 47522    | E-SENSE ROM post-op knäortos | En storlek | 46 - 69 cm | Bilat. |
| 47523    | Extra polstring              | En storlek |            | Bilat. |

## ROM Postoperativknäortos

Postoperativ knäortos i universalstorlek med polstring som kan klippas till önskad storlek utan att fransa sig. Skenor av metall som kan formas för bästa passform. Den bekväma och luftiga polstring hålls på plats av de cirkulära banden. Den inkapslade polycentriska leden är enkel att justera med pinnar som hålls fast i leden med små plast band för att förhindra att pinnarna faller bort. Leden låses fast med en skruv för att hindra att den ändras. Leden kan ställas i önskad grad av flexion (10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°) och extension (5°, 10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°). Modellen finns i en kort och en lång version.

**Användningsområden:** Postoperativ behandling och posttraumatisk behandling för immobilisering av knäleden för kontroll av flexion/extension.

| Art. nr. | Modell                       | Färg    | Storlek    | Längd |
|----------|------------------------------|---------|------------|-------|
| 28308    | Knäortos, kort               | Mörkblå | En storlek | 40 cm |
| 28309    | Knäortos, lång               | Mörkblå | En storlek | 60 cm |
| 28311    | Extra bandset för 28308 kort | Mörkblå | En storlek |       |
| 28312    | Extra bandset 28309 lång     | Mörkblå | En storlek |       |
| 28313    | Extra polstring 28308 kort   | Mörkblå | En storlek |       |
| 28314    | Extra polstring 28309 lång   | Mörkblå | En storlek |       |



NYHET!

## Egna anteckningar

[illegible]



# Höftortoser

[www.camp.se](http://www.camp.se)



## NewCamp höftortos

Rigid höftortos med aluminiumskenor. Höftdel och lårdel som sammankopplas med en ställbar led i flexion/extension och i abduktion. Ortosens flexibla höftdel gör det möjligt att använda samma ortos till både dam och herr. Utbytbar polstring som fästes med kardborrband.

**Användningsområden:** Pre- och postoperativt. För att undvika dislokation i höftleden efter primär eller reviderad höftartroplastik.

**Övrigt:** För komplett ortos måste både höftdel och lårdel beställas.

| Art. nr. | Modell                              | Storlek | Midjemått | Vä/Hö            | Lårmått  |
|----------|-------------------------------------|---------|-----------|------------------|----------|
| 28686    | Höftdel med led                     | Small   | 60-90 cm  | Bilat.           |          |
| 28686    | Höftdel med led                     | Large   | 80-110 cm | Bilat.           |          |
| 28684    | Lårdel                              | Small   |           | Bilat.           | 40-50 cm |
| 28684    | Lårdel                              | Large   |           | Bilat.           | 50-60 cm |
| 28687    | Extra polstring höft                | Small   |           | Bilat.           |          |
| 28687    | Extra polstring höft                | Large   |           | Bilat.           |          |
| 28688    | Extra polstring lår                 | Small   |           | Bilat.           |          |
| 28688    | Extra polstring lår                 | Large   |           | Bilat.           |          |
| 28685    | Reservdelskit till höft- och lårdel | Small   |           | Band och skruvar |          |
| 28685    | Reservdelskit till höft- och lårdel | Large   |           | Band och skruvar |          |



## Lerman Haro höftortos

Höftortos med flera olika inställningsmöjligheter: Rotationsinställning i transversalplanet, kontroll och inställning i både flexion/extension och abduktion/adduktion. Plastkonstruktion med stål/aluminiumled. Passar både dam och herr.

**Användningsområden:** Postoperativt.

**Övrigt:** Extra polstring kan köpas separat.

| Art. nr. | Modell               | Storlek       | Midjemått  | Vä/Hö |
|----------|----------------------|---------------|------------|-------|
| 62790    | Lerman Haro          | Small         | 70-80 cm   | Vä/Hö |
| 62790    | Lerman Haro          | Medium        | 85-90 cm   | Vä/Hö |
| 62790    | Lerman Haro          | Large         | 100-110 cm | Vä/Hö |
| 62790    | Lerman Haro          | X-Large       | 115-125 cm | Vä/Hö |
| 62791    | Extra polstring Höft | Small         |            | Vä/Hö |
| 62791    | Extra polstring Höft | Medium        |            | Vä/Hö |
| 62791    | Extra polstring Höft | Large         |            | Vä/Hö |
| 62791    | Extra polstring Höft | X-Large       |            | Vä/Hö |
| 62792    | Extra polstring Lår  | Small         |            | Vä/Hö |
| 62792    | Extra polstring Lår  | Medium        |            | Vä/Hö |
| 62792    | Extra polstring Lår  | Large/X-Large |            | Vä/Hö |
| 62792    | Extra polstring Lår  | X-Large       |            | Vä/Hö |





## Hip Flexion Assist Device - HFAD

HFAD är avsedd för personer med Multiple Skleros (MS) som har generell svaghet i benet/benen. HFAD är avsedd att öka styrkan i det ben där HFAD används, förbättra gångprestationen och öka den dagliga aktivitetsnivån. Ortosen består av ett bekvämt höftband och två elastiska gummiband som fästs i skon. Banden assisterar vid höft-, knä- och dorsalflexion i ankeln. Nivån på assistansen kan lätt ställas in efter användarens behov. HFAD kan användas över vanliga kläder eller under löst sittande kläder. Finns i utförande för ett ben eller för båda benen.

**Användningsområden:** HFAD kan vara fördelaktig för patienter med MS

som har; svaghet i höft-, knä- och fotledsböjaren, begränsad uthållighet och ev. utmattning vid gång, svårt att lyfta ben och fot. Använder kompensatoriska rörelser såsom bäckentippning, circumduktion och/eller tyngdöverföring till motsatt sida, har försökt att använda en AFO för att kompensera för droppfot men har fortfarande svårighet att gå på grund av svaghet i höft och knäflexorerna, förhöjd tonus och får genom ortosen lättare att slappna av och därmed bättre gång.

| Art. nr. | Modell      | Storlek | Midjemått  | Vä/Hö  |
|----------|-------------|---------|------------|--------|
| 62784    | Singel HFAD | Small   | 61-82 cm   | Vä/Hö  |
| 62784    | Singel HFAD | Medium  | 83-102 cm  | Vä/Hö  |
| 62784    | Singel HFAD | Large   | 103-122 cm | Vä/Hö  |
| 62783    | Dubbel HFAD | Small   | 61-82 cm   | Bilat. |
| 62783    | Dubbel HFAD | Medium  | 83-102 cm  | Bilat. |
| 62783    | Dubbel HFAD | Large   | 103-122 cm | Bilat. |



## Slinga för rotationskontroll

Bäckenbälte med slinga som används för att korrigera och motverka kraftig rotation i nedre extremiteterna. Ortosen hjälper till att normalisera gångmönstret genom en långsam stretch från ankel till höft. Slingan följer benet och fästs runt foten.


**Användningsområden:** Neurologiska skador och svaghet i nedre extremiteterna.

| Art. nr. | Modell | Storlek | Bredd  | Funktion                                         |
|----------|--------|---------|--------|--------------------------------------------------|
| 53305    | B      | Barn B  | 5,1 cm | Utåtrotation vänster ben/inåtrotation höger ben  |
| 53305    | A      | Barn A  | 5,1 cm | Utåtrotation höger ben/inåtrotation vänster ben  |
| 53305    | D      | Vuxen D | 7,6 cm | Utåtrotation vänster ben/inåtrotation höger ben  |
| 53305    | C      | Vuxen C | 7,6 cm | Utåtrotation höger ben/ inåtrotation vänster ben |


# S.W.A.S.H.®

rätt positionering vid  
stående, gående och sittande.

När höftleden flekteras för sittande skapas en triangulär sittbas som ökar stabiliteten och ger barnet en mer upprätt hållning. Detta ökar förutsättningarna för en bättre hållning och ett mer funktionellt sittande som gör att barnet i större utsträckning kan använda händerna aktivt.

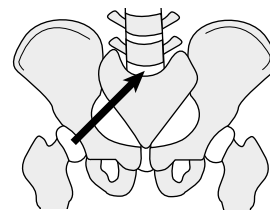

Med SWASH

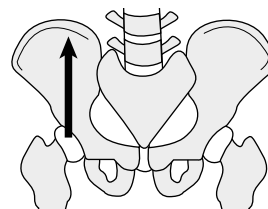

Utan SWASH



Primära funktionsmål vid användning av SWASH-ortosen:

1. Ökad abduktion och stretchning av höftadduktorena för att förbättra höftledsplaceringen.
2. Att förhindra överdriven adduktion vid sittande, stående och gående.
3. Att förbättra hållningen i sittande och stående.
4. Att med samma ortos möjliggöra förflyttning från neutral (gå och stå) till abduktion (sittande) med punkt 1, 2 och 3 bibehållna.

SWASH-ortosen är en "team"-insats. Det är viktigt att hela teamet är involverade i utprovningen och att det sätts rimliga mål för behandlingen.

SWASH-ortosens unika konstruktion medverkar till en bättre höftledsplacering. Ortosen ger tillräckligt med abduktion för att hindra saxning och medial femurrotation, både vid stående och vid gång.

rätt positionering vid  
stående, gående och sittande.




### Välj abduktionsvinkel

Till SWASH-ortosen är det möjligt att välja två olika abduktionsvinklar - en som ger en bredare sittbas och en som ger en något smalare sittbas.



### Minskad abduktion – benstag 115°

- Om barnet använder en smal rullstol
- Vid mycket strama adduktorer

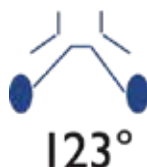

### Ökad abduktion – benstag 123°

- Ger större möjlighet till töjning av musklerna vid sittande
- Ger en mer upprätt hållning

### Användningsområden

- Spastisk Hemiplegi
- Spastisk Diplegi
- Spastisk Quadriplegi
- Risk för höftledsförskjutning
- I samband med Botox-behandling
- Postoperativt
- Nattskena

### Kontraindikationer

- Om höften är ur led
- Höftflexionskontrakturer > 20°

Mer om utprovning och anpassning finns att läsa i  
SWASH Steady & Go Fitting Manual.

Kontakta kundsupport för mer information.

## SWASH® STEADY Midjedel

SWASH® STEADY, som ersätter SWASH® Classic, är en vidareutveckling med utförda förbättringar och ett nytt fräscht utseende. Målet med SWASH är att förhindra överdriven höftadduktion vid sittande, stående och gång som är vanligt vid Cerebral pares. Ortosen är ett bra alternativ vid saxande gång. Den tillåter rörelse i alla tre rörelseplan. I sittande breddas basen för stöd vilket hjälper barnet att få en upprätt balanserad hållning och samtidigt stäcka på adduktorena.

Höftsektionen bestående av polyethylene sträcker sig från L2/L3 till den distala marginalen av svanskotan, vilket ger maximal support av höft och bål. Patienter med svag bålmuskulatur och/eller mycket begränsad bålstabilitet kan dra nytta av det ökade posteriora och laterala stödet modellen erbjuder. STEADY har ett mjukt attraktivt och slitstarkt överdragsmaterial och klickspännen för lättare och snabbare av- och påtagning. Storlekarna 2-4 har ledhus med låg profilform. Benstagen är 6 mm i diameter för storlek 1. För storlekarna 2,3 och 4 är benstagen 8 mm i diameter. Benstagen finns i vinklarna 115° och 123°. För att få en komplett produkt krävs också lårdel och benstag.

**Användningsområden:** Cerebral pares med saxande gång eller instabilitet vid sittande på grund av överdriven abduktion, höft subluxation. När maximal bålkontroll är nödvändig, t.ex. patienter som saknar muskelstyrka eller tillräckligt med bålkontroll för att kunna sitta upprätt. När patienten primärt är orörlig.

**Kontraindikationer:** Dislokerade höfter. Höftflexionskontrakturer större än 20 grader (dynamiska eller fixerade). När adduktorena är för starka för ortosen. När adduktorena är för korta för att använda SWASH® vid sittande.



**Mått:** För mer detaljerad information om mått hänvisas till SWASH® Fitting Manual.

| Art. nr. | Modell          | Storlek | Omkrets    |
|----------|-----------------|---------|------------|
| 28852    | STEADY Midjedel | 1       | 40-46,5 cm |
| 28852    | STEADY Midjedel | 2       | 46-55 cm   |
| 28852    | STEADY Midjedel | 3       | 54-63 cm   |
| 28852    | STEADY Midjedel | 4       | 62-72 cm   |



**Mått:** För mer detaljerad information om mått hänvisas till SWASH® Fitting Manual.

## SWASH® GO Midjedel

SWASH® GO, som ersätter SWASH® Low Profile, är en vidareutveckling med utförda förbättringar och ett nytt fräscht utseende. Målet med SWASH är att förhindra överdriven höftadduktion vid sittande, stående och gång, som är vanligt vid Cerebral pares. Ortosen är ett bra alternativ vid saxande gång. Den tillåter rörelse i alla tre rörelseplan. I sittande breddas basen för stöd vilket hjälper barnet att få en upprätt balanserad hållning och samtidigt sträcka på adduktorerna.

SWASH® GO har en lägre stödjande höftprofil med böjbara iliastag. Den rekommenderas för patienter med bättre bålstabilitet och mer aktiva, som t.ex. gångare. Ortosen har ett mjukt attraktivt och slitstarkt överdragsmaterial och klickspännen för lättare och snabbare av- och påtagning. Benstagen är 8 mm i diameter i alla sex storlekarna. Benstagen finns i vinklarna 115° och 123°. För att få en komplett produkt krävs också lårdel och benstag.

**Användningsområden:** Cerebral pares med saxande gång eller instabilitet vid sittande på grund av överdriven abduktion, höft sublaxation. SWASH® GO är avsedd för patienter med större ryggkontroll och som är mer aktiva.

**Kontraindikationer:** Dislokerade höfter. Höftflexionskontrakturer större än 20 grader (dynamiska eller fixerade). När adduktorerna är för starka för ortosen. När adduktorerna är för korta för att använda SWASH® vid sittande.

| Art. nr. | Modell      | Storlek | Omkrets    |
|----------|-------------|---------|------------|
| 28853    | GO Midjedel | 1       | 40-46,5 cm |
| 28853    | GO Midjedel | 2       | 46-55 cm   |
| 28853    | GO Midjedel | 3       | 54-63 cm   |
| 28853    | GO Midjedel | 4       | 62-72 cm   |
| 28853    | GO Midjedel | 5       | 71-81 cm   |
| 28853    | GO Midjedel | 6       | 80-90 cm   |

## SWASH® STEADY och GO Lårdel

För att få en komplett SWASH® STEADY eller GO produkt krävs midjedel, lårdel och benstag. Midjedelen och lårdelarna har ett mjukt attraktivt och slitstarkt överdragsmaterial samt klickspännen för lättare och snabbare av- och påtagning.

Eftersom benstagen har samma diameter i alla storlekar (undantag storlek I) går det enkelt att kombinera olika storlekar på midjedelen med annan storlek på lårdelarna. Benstagen är 6 mm i diameter för storlek I. För storlekarna 2,3 och 4 är benstagen 8 mm i diameter. Benstagen finns i vinklarna 115° och 123°.



| Art. nr. | Modell             | Storlek | Omkrets  |
|----------|--------------------|---------|----------|
| 28854    | STEADY lårdel      | I       | 21-25 cm |
| 28854    | GO lårdel          | I       | 21-25 cm |
| 28854    | STEADY & GO lårdel | 2       | 25-29 cm |
| 28854    | STEADY & GO lårdel | 3       | 29-33 cm |
| 28854    | STEADY & GO lårdel | 4       | 33-38 cm |
| 28854    | STEADY & GO lårdel | 5       | 38-44 cm |
| 28854    | STEADY & GO lårdel | 6       | 44-50 cm |



## SWASH® STEADY och GO Benstag

För att få en komplett SWASH® STEADY eller GO produkt krävs midjedel, lårdel och benstag.

Eftersom benstagen har samma diameter i alla storlekar (undantag storlek 1) går det enkelt att kombinera olika storlekar på midjedelen med annan storlek på lårdelarna. Benstagen är 6 mm i diameter för storlek 1. För storlekarna 2,3 och 4 är benstagen 8 mm i diameter. Benstagen finns i vinklarna 115° och 123°.

| Art. nr. | Modell                       | Storlek | Längd   | Diameter |
|----------|------------------------------|---------|---------|----------|
| 28855    | STEADY benstag set 115°      | 1       | 31 cm   | 6 mm     |
| 28855    | GO benstag set 115°          | 1       | 31 cm   | 8 mm     |
| 28855    | STEADY & GO benstag set 115° | 2       | 37,5 cm | 8 mm     |
| 28855    | STEADY & GO benstag set 115° | 3       | 44 cm   | 8 mm     |
| 28855    | STEADY & GO benstag set 115° | 4       | 48 cm   | 8 mm     |
| 28855    | STEADY & GO benstag set 115° | 5       | 54 cm   | 8 mm     |
| 28855    | STEADY & GO benstag set 115° | 6       | 60 cm   | 8 mm     |
| 28856    | STEADY benstag set 123°      | 1       | 31 cm   | 6 mm     |
| 28856    | GO benstag set 123°          | 1       | 31 cm   | 8 mm     |
| 28856    | STEADY & GO benstag set 123° | 2       | 37,5 cm | 8 mm     |
| 28856    | STEADY & GO benstag set 123° | 3       | 44 cm   | 8 mm     |
| 28856    | STEADY & GO benstag set 123° | 4       | 48 cm   | 8 mm     |
| 28856    | STEADY & GO benstag set 123° | 5       | 54 cm   | 8 mm     |
| 28856    | STEADY & GO benstag set 123° | 6       | 60 cm   | 8 mm     |



## SWASH® STEADY och GO Tillbehör


Till SWASH® STEADY och GO finns olika tillbehör och varianter; t.ex. textila midjedelar som finns i utförande till STEADY och GO. Textil lårdel är gemensam för STEADY och GO. Magplatta finns i också i gemensamt utförande till STEADY och GO. Därutöver kan diverse tillbehör beställas.

**Övrigt:** För mer detaljer om SWASH® tillbehör; vänligen se komponentlista i SWASH Fitting Manual.



| Art. nr. | Modell                                  | Storlek | Förp.    |
|----------|-----------------------------------------|---------|----------|
| 28857    | STEADY textil midjedel                  | 1       | 1 set    |
| 28857    | STEADY textil midjedel                  | 2       | 1 set    |
| 28857    | STEADY textil midjedel                  | 3       | 1 set    |
| 28857    | STEADY textil midjedel                  | 4       | 1 set    |
| 28858    | GO textil midjedel                      | 1       | 1 set    |
| 28858    | GO textil midjedel                      | 2       | 1 set    |
| 28858    | GO textil midjedel                      | 3       | 1 set    |
| 28858    | GO textil midjedel                      | 4       | 1 set    |
| 28858    | GO textil midjedel                      | 5       | 1 set    |
| 28858    | GO textil midjedel                      | 6       | 1 set    |
| 28859    | STEADY & GO textil lårdel               | 1       | 1 par    |
| 28859    | STEADY & GO textil lårdel               | 2       | 1 par    |
| 28859    | STEADY & GO textil lårdel               | 3       | 1 par    |
| 28859    | STEADY & GO textil lårdel               | 4       | 1 par    |
| 28859    | STEADY & GO textil lårdel               | 5       | 1 par    |
| 28859    | STEADY & GO textil lårdel               | 6       | 1 par    |
| 28860    | STEADY & GO magplatta                   | 1       | 1 st     |
| 28860    | STEADY & GO magplatta                   | 2       | 1 st     |
| 28860    | STEADY & GO magplatta                   | 3       | 1 st     |
| 28860    | STEADY & GO magplatta                   | 4       | 1 st     |
| 28860    | STEADY & GO magplatta                   | 5       | 1 st     |
| 28860    | STEADY & GO magplatta                   | 6       | 1 st     |
| 28861    | STEADY skruvset 6 mm                    | 1       | 1 set    |
| 28861    | STEADY & GO skruvset 8 mm               | 1-6     | 1 set    |
| 28862    | STEADY låsring set 6 mm                 | 1       | 1 set    |
| 28862    | STEADY & GO låsring set 8 mm            | 1-6     | 2 st     |
| 28863    | STEADY Plasthölje för led               | 1       | 2 st     |
| 28864    | STEADY Gummiplugg för benstag 6 mm      | 1       | 2 st     |
| 28864    | STEADY & GO Gummiplugg för benstag 8 mm | 1-6     | 10 st    |
| 28865    | STEADY mässingsbussning                 | 1       | 10 st    |
| 28866    | STEADY höftledsset 6 mm                 | 1       | 2 st     |
| 28866    | STEADY höftledsset 8 mm                 | 2-4     | 2 st     |
| 28867    | GO höftledsset 8 mm                     | 1-6     | 2 st     |
| 28868    | STEADY & GO insexnycklar                | 1-6     | Set om 4 |
| 28869    | STEADY & GO spännen 25 mm               | 1-3     | 2 st     |
| 28869    | STEADY & GO spännen 38 mm               | 4-6     | 2 st     |

# STEADY & GO komponenter

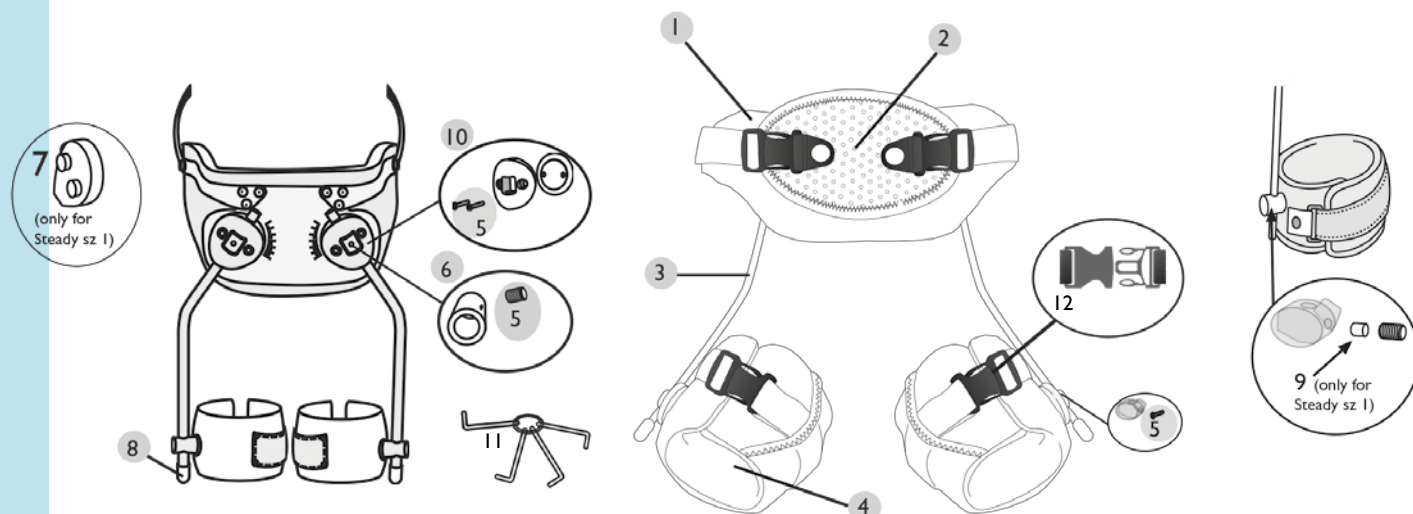

| Nr. | Beskrivning                           | Enhet | STEADY   | GO       |
|-----|---------------------------------------|-------|----------|----------|
| 1   | Textil midjedel inkl. magplatta       | 1 set | 28857    | 28858    |
| 2   | Magplatta                             | 1 st  | 28860    | 28860    |
| 3   | Benstag 6 mm   15°, storlek I         | Par   | 28855-06 |          |
| 3   | Benstag 8 mm   15°                    | Par   | 28855-08 | 28855-08 |
| 3   | Benstag 6 mm   23°, storlek I         | Par   | 28856-06 |          |
| 3   | Benstag 8 mm   23°                    | Par   | 28856-08 | 28856-08 |
| 4   | Textil för lårdel                     | Par   | 28859    | 28859    |
| 5   | Skruvset, storlek I                   |       | 28861-06 |          |
| 5   | Skruvset, storlek 2 - 6               |       | 28861-08 | 28861-08 |
| 6   | Låsring, storlek I                    | 2 st  | 28862-06 |          |
| 6   | Låsring, storlek 2 - 6                | 2 st  | 28862-08 | 28862-08 |
| 7   | Plasthölje för led, storlek I         | 2 st  | 28863-06 |          |
| 8   | Gummiplugg för benstag, storlek I     | 2 st  | 28864-06 |          |
| 8   | Gummiplugg för benstag, storlek 2 - 6 | 10 st | 28864-08 | 28864-08 |
| 9   | Mässingsbussning, storlek I           | 10 st | 28865    |          |
| 10  | Höftledsset, storlek I                | 2 st  | 28866-06 |          |
| 10  | Höftledsset, storlek 2 - 6            | 2 st  | 28866-08 | 28867-08 |
| 11  | Insexnyckelset                        | 1 set | 28868    | 28868    |
| 12  | Plastspänne 25 mm, storlek I - 3      | 2 st  | 28869-25 | 28869-25 |
| 12  | Plastspänne 38 mm, storlek 4 - 6      | 2 st  | 28869-38 | 28869-38 |

## Abduktionsskena C29

Abduktionsskena av plast med mjukfodrade kanter. Rostfria stålskenor mellan benhylsorna fram och bak. Ryggplatta med band om bröstskorgen ger sidostabilitet. Luftig och hygienisk. Kan användas med blöja.

**Användningsområden:** Kongenitala höftledsluxationer

| Art. nr. | Storlek | Mått     |
|----------|---------|----------|
| 20290    | X-Small | 14-17 cm |
| 20290    | Small   | 18-23 cm |
| 20290    | Medium  | 25-30 cm |
| 20290    | Large   | 33-38 cm |



**Mått:** Avstånd mellan knälederna i abduktion

## Abduktionsskena ställbar

Stöder höften under höftens utveckling vid höftdysplasi samt används efter reposition vid höftluxation hos spädbarn. Lårbenen är placerade på ett sätt som säkrar lårbenshuvudet i Acetabulum för att förhindra oönskade rörelser och därmed höft (Sub) Luxation. Ortosen fixerar höftleden i en 90° flexion och 60° abduktionsposition.

**Användningsområden:** Höftdysplasi, höftleds luxation eller sublaxation.

| Art. nr. | Storlek    |
|----------|------------|
| 20291    | En storlek |



## Höftabduktionsortos

Prefabricerad ortos för barn som används vid behandling av Perthes sjukdom samt vid andra höftrelaterade sjukdomar. Extension och flexion kan ställas in med 20° intervall. Formgjuten plast med stålskenor för låg vikt. Löstagbar polstring.

**Användningsområden:** Perthes sjukdom och andra höftrelaterade sjukdomar.

**Övrigt:** Extra polstring kan köpas separat.

| Art. nr. | Modell              | Storlek | Bäckenvidd M-L |
|----------|---------------------|---------|----------------|
| 28600    | Höftabduktionsortos | Small   | <21 cm         |
| 28600    | Höftabduktionsortos | Large   | >21 cm         |
| 28601    | Extra polstring     | Small   |                |
| 28601    | Extra polstring     | Large   |                |





## Maple Leaf höftortos

Ortos som bibehåller musklernas längd för att förhindra återuppkomst av deformiteter efter mjukdelsooperationer relaterade till höften. Leden gör det möjligt att positionera höftleden nära den anatomiska linjen. Justerbar i bredd och längd. Möjlighet att ställa in i intervaller med 20° flexion/extension, 9° abduction/adduktion samt rotation i transversalplanet. Storlek X-Small är förinställd med en abduktionsvinkel på 15°, vilken går att öka eller minska genom justering. X-Small går ej att rotera i transversalplanet. Formgjuten plast med stålskenor. Löstagbar polstring.

**Användningsområden:** CP och postoperativt.

**Övrigt:** Extra polstring kan köpas separat.

| Art. nr. | Storlek | Bäckenvidd M-L |
|----------|---------|----------------|
| 62786    | X-Small | 15 - 19 cm     |
| 62786    | Small   | 20 - 24 cm     |
| 62786    | Medium  | 25 - 29,5 cm   |
| 62786    | Large   | 30 - 34,5 cm   |

## Maple Leaf DE

Maple Leaf finns också med en distal förlängning för underbenet för patienter som är i behov av ytterligare rotationskontroll av höften. Knäleden kan låsas samt ställas in i intervaller med 20° flexion/extension och 9° abduction/adduktion. För övrigt har ortosen samma egenskaper och inställningar som Maple Leaf art. nr. 62786. Formgjuten plast med stålskenor. Höft-, lår- och vaddel har utbytbar polstring och band.

**Användningsområden:** CP och postoperativt. Vid behov av ytterligare rotationskontroll av höften.

**Övrigt:** Extra polstring kan köpas separat.

| Art. nr. | Modell                       | Storlek | Bäckenvidd M-L |
|----------|------------------------------|---------|----------------|
| 62787    | Komplett Maple Leaf DE       | Small   | 20 - 24 cm     |
| 62787    | Komplett Maple Leaf DE       | Large   | 30 - 34,5 cm   |
| 62793    | Extra polstring till vaddel  | Small   |                |
| 62793    | Extra polstring till vaddel  | Large   |                |
| 62794    | Extra band till vaddel       | Small   |                |
| 62794    | Extra band till vaddel       | Large   |                |
| 62796    | Extra polstring till höftdel | Small   |                |
| 62796    | Extra polstring till höftdel | Large   |                |
| 62797    | Extra polstring till lårdel  | Small   |                |
| 62797    | Extra polstring till lårdel  | Large   |                |
| 62798    | Extra band till höftdel      | Small   |                |
| 62798    | Extra band till höftdel      | Large   |                |
| 62799    | Extra band till lårdel       | Small   |                |
| 62799    | Extra band till lårdel       | Large   |                |



## Egna anteckningar

[illegible]



# Bröstproteser

[www.camp.se](http://www.camp.se)





*Diamond Classic*



*MassageForm Air*



*Massage BH*



*Embrace BH*

## Bröstproteser

Camps bröstproteser är väl anpassade för rådande operationsmetoder och till den moderna kvinnans förväntningar. Välj mellan modeller av traditionell silikon eller lätt-viktssilikon. Gemensamt för dessa modeller är en matt ytfilm och en varm naturlig färgton. Oavsett om du väljer traditionell silikon eller lättviktssilikon så är proteserna av högsta kvalitet, mjuka och naturliga, samtidigt som de följer kroppens rörelse.

I sortimentet finns bland annat Camps unika Massageprotes som har blivit en enorm succé. Massageprotesen har kanaler på baksidan som ger en mjuk massage mot bröstkorgen och tillåter samtidigt luft att cirkulera så huden känns sval och kan andas. Massageprotesen är speciellt fördelaktig för kvinnor med lymfödem. Massageform Attach är en massageprotes med självhäftande baksida.

Samtliga ABC-bröstproteser av silikon levereras i en praktisk väska. Här förvaras protesen säkert och formen bibehålls. Fodral till protesen ingår ej men kan beställas separat.

Kontakta kundsupport för mer information.





# Nackortoser

[www.camp.se](http://www.camp.se)



## Halskrage rak modell

Mjuk halskrage i rak modell som ger avlastning och stöd för nackens strukturer. Kan knäppas fram eller bak. Textilen är huvudsakligen av bomull. Materialet är helt fritt från Latex.

**Användningsområden:** Avsedd för tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. nackspärr, stelhet, överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Höjd  | Omkrets    |
|----------|------|---------|-------|------------|
| 47010    | Grå  | X-Small | 6 cm  | 32 – 48 cm |
| 47010    | Grå  | Small   | 8 cm  | 32 – 48 cm |
| 47010    | Grå  | Medium  | 10 cm | 32 – 48 cm |
| 47010    | Grå  | Large   | 12 cm | 32 – 48 cm |
| 47011    | Blå  | X-Small | 6 cm  | 32 – 48 cm |
| 47011    | Blå  | Small   | 8 cm  | 32 – 48 cm |
| 47011    | Blå  | Medium  | 10 cm | 32 – 48 cm |
| 47011    | Blå  | Large   | 12 cm | 32 – 48 cm |



## Halskrage formad modell

Mjuk halskrage i anatomiskt formad modell som ger avlastning och stöd för nackens strukturer. Följer hakans och bröstets konturer för en bekväm passform. Textilen är huvudsakligen av bomull. Materialet är helt fritt från Latex.

**Användningsområden:** Avsedd för tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. nackspärr, stelhet, överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Höjd  | Omkrets    |
|----------|------|---------|-------|------------|
| 47012    | Grå  | X-Small | 6 cm  | 32 – 48 cm |
| 47012    | Grå  | Small   | 8 cm  | 32 – 48 cm |
| 47012    | Grå  | Medium  | 10 cm | 32 – 48 cm |
| 47012    | Grå  | Large   | 12 cm | 32 – 48 cm |
| 47013    | Blå  | X-Small | 6 cm  | 32 – 48 cm |
| 47013    | Blå  | Small   | 8 cm  | 32 – 48 cm |
| 47013    | Blå  | Medium  | 10 cm | 32 – 48 cm |
| 47013    | Blå  | Large   | 12 cm | 32 – 48 cm |

## Vission halskrage

Halskrage i mjuk och sval Lycra material som ger ett modernt utseende och en behaglig känsla mot huden. Halskragen som är anatomiskt formad ger avlastning och stöd för nackens strukturer. Den följer hakans och bröstets konturer för en bekväm passform. Vission halskrage finns i fyra höjder. Materialet är helt fritt från Latex.

**Användningsområden:** Tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.



| Art. nr. | Färg  | Storlek | Höjd  | Omkrets  |
|----------|-------|---------|-------|----------|
| 47014    | Svart | X-Small | 6 cm  | 32-48 cm |
| 47014    | Svart | Small   | 8 cm  | 32-48 cm |
| 47014    | Svart | Medium  | 10 cm | 32-48 cm |
| 47014    | Svart | Large   | 12 cm | 32-48 cm |

## Ortho Prim halskrage

Delbar halskrage av polyeten för stabilisering av nacken. Utskuren under hakan för bra passform och med mjukt polstrade kanter. Justerbar i höjd och vidd genom enkel kardborrlåsning. Plasten är perforerad för ökad ventilation.

**Användningsområden:** Avlastning av nacke, överbelastad muskulatur och reumatiska sjukdomar.

| Art. nr. | Färg | Storlek | Höjd      | Omkrets  |
|----------|------|---------|-----------|----------|
| 20560    | Vit  | X-Small | 7,5-9 cm  | 32-37 cm |
| 20560    | Vit  | Small   | 8-9,5 cm  | 36-41 cm |
| 20560    | Vit  | Medium  | 8,5-10 cm | 40-45 cm |
| 20560    | Vit  | Large   | 9-10,5 cm | 44-49 cm |
| 20560    | Vit  | X-Large | 9-10,5 cm | 48-53 cm |



## Eclipse® Halskrage

Eclipse halskrage är en modernt designad halskrage med hög passform och funktion. Eclipse är enkel att justera och har en semirigid ramstruktur med "quick-fit" funktioner för enkel utprovning och storleksanpassning. Eclipse är avsedd att begränsa flexion, extension och rotation för att främja patientens återhämtning. Den öppna ramkonstruktionen gör den luftig och bekväm samt att den får en generös trachea-öppning. Endast en storlek som täcker in det mesta i omfång och höjd. Polstringen är utbytbar och kan köpas separat. Höjden kan ställas in mellan 7,5 cm upp till 18,75 cm.

**Användningsområden:** Stabilisera ryggraden för att förhindra flexion, extension och rotation efter en skada på eller sjukdom i halsryggen.

| Art. nr. | Modell            | Färg    | Storlek    |
|----------|-------------------|---------|------------|
| 20628    | Eclipse Halskrage | Ljusgrå | En storlek |
| 20629    | Extra polstring   | Grå     | En storlek |





## Trachea halskrage

Tvådelad halskrage i plastazote med tracheotomiöppning. Halskragen är anatomiskt utskuren för god passform och plastförstärkt i nacken och under hakan. Fixeras med kardborrband på båda sidor.

**Användningsområden:** Instabilitet, smärta och postoperativt.

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Höjd   | Omkrets  |
|----------|-------|---------|--------|----------|
| 20619    | Beige | Small   | 5,5 cm | 25- 3 cm |
| 20619    | Beige | Medium  | 5,5 cm | 33-41 cm |
| 20619    | Beige | Large   | 5,5 cm | 41-48 cm |
| 20620    | Beige | Small   | 8 cm   | 25-33 cm |
| 20620    | Beige | Medium  | 8 cm   | 33-41 cm |
| 20620    | Beige | Large   | 8 cm   | 41-48 cm |
| 20621    | Beige | Small   | 11 cm  | 25-33 cm |
| 20621    | Beige | Medium  | 11 cm  | 33-41 cm |
| 20621    | Beige | Large   | 11 cm  | 41-48 cm |
| 20622    | Beige | Small   | 13 cm  | 25-33 cm |
| 20622    | Beige | Medium  | 13 cm  | 33-41 cm |
| 20622    | Beige | Large   | 13 cm  | 41-48 cm |



## Pacific halskrage

Tvådelad halskrage av polyeten som fixeras med kardborrband på båda sidor. Det stabila skalet följer hakans form och vilar bekvämt mot bröstbenet. Kragen är lägre på sidorna för att inte ge skav mot axlar eller öron. Höjden på kragen justeras med hjälp av två plastskruvar. Ett mjukt och luftigt polster utan sömmar medföljer. Polstringen kan tvättas eller bytas ut.

**Användningsområden:** Instabilitet, smärta och postoperativt.

| Art. nr. | Färg            | Storlek      | Höjd       |
|----------|-----------------|--------------|------------|
| 20625    | Vit             | Small/Medium | 5,5-9,5 cm |
| 20625    | Vit             | Medium/Large | 8-13 cm    |
| 20626    | Extra polstring | Small/Medium |            |
| 20626    | Extra polstring | Medium/Large |            |



# Stomiprodukter

[www.camp.se](http://www.camp.se)


# StomaCare™

StomaCare är en elastisk stomigördel som ger stöd och fixation av stomipåsen, kompression av bålen vid försvagad bukmuskulatur samt förebygger och lindrar prolaps/bråck i ärr- och stomiområdet.

Gördeln passar både rak och midjesvägd figur. Den är tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med en elastisk söm för optimal passform. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Gördeln är försedd med skyddsband över öppningen.

En nyhet i sortimentet är modellen StomaCare EasyOpener som har en integrerad förslutning under stomiöppningen för att förenkla byte av stomipåse.

StomaCare finns i tre höjder; 10 cm, 15 cm och 22,5 cm samt med två olika diametrar för stomiöppningen; 60 mm och 72 mm vilket underlättar för anpassningen till olika storlekar på stomipåse.

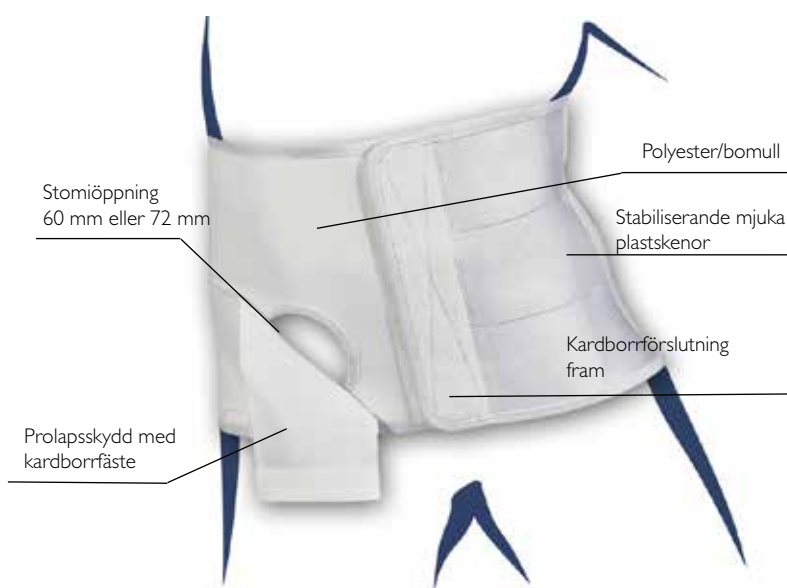

## Storlekstabell

| Storlek | Midjemått    |
|---------|--------------|
| S       | 70 - 79 cm   |
| M       | 80 - 90 cm   |
| L       | 90 - 100 cm  |
| XL      | 100 - 110 cm |
| XXL     | 110 - 120 cm |
| XXXL    | 120 - 130 cm |
| XXXXL   | 130 - 140 cm |

Måttet skall tas då patienten ligger ner:



## Stomacare EasyCut PLUS

EasyCut Plus är tillverkat av andningsbart Coolmax-material som säkerställer maximal borttagning av fukt. Fukten sprider sig och förångas 4 gånger snabbare än bomull. Detta håller kroppen bekvämt torr - även under fysisk aktivitet. Den s vala grå färgen är knappt synlig, även under ljusa kläder. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Med EasyCut gördeln är det lätt att applicera och justera stomi-öppningen på bältet på patienten. Detta är speciellt snabbt och bekvämt för patienter som vårdas i hemmet. Anpassat efter individuellt behov kan stomi-öppningens position, form och diameter appliceras med en sax. En mall för olika former och storlekar följer med gördeln. Materialet fransar sig inte och det är stabilt för optimal support. EasyCut Plus finns i storlekar från 70 – 140 cm och i höjderna 10cm, 15cm, 19cm och 23 cm.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av påsen. Vid försvagad buk-muskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.



**Mått:** Omkrets mått över naveln då patienten ligger ner.

| Art. nr. | Färg    | Storlek    | Midjemått    | Höjd  | Vä/Hö     |
|----------|---------|------------|--------------|-------|-----------|
| 23322    | Ljusgrå | Small      | 70 - 79 cm   | 10 cm | Bilateral |
| 23322    | Ljusgrå | Medium     | 80 - 89 cm   | 10 cm | Bilateral |
| 23322    | Ljusgrå | Large      | 90 - 99 cm   | 10 cm | Bilateral |
| 23322    | Ljusgrå | X-Large    | 100 - 109 cm | 10 cm | Bilateral |
| 23322    | Ljusgrå | XX-Large   | 110 - 120 cm | 10 cm | Bilateral |
| 23322    | Ljusgrå | XXX-Large  | 121 - 130 cm | 10 cm | Bilateral |
| 23322    | Ljusgrå | XXXX-Large | 131 - 140 cm | 10 cm | Bilateral |
| 23323    | Ljusgrå | Small      | 70 - 79 cm   | 15 cm | Bilateral |
| 23323    | Ljusgrå | Medium     | 80 - 89 cm   | 15 cm | Bilateral |
| 23323    | Ljusgrå | Large      | 90 - 99 cm   | 15 cm | Bilateral |
| 23323    | Ljusgrå | X-Large    | 100 - 109 cm | 15 cm | Bilateral |
| 23323    | Ljusgrå | XX-Large   | 110 - 120 cm | 15 cm | Bilateral |
| 23323    | Ljusgrå | XXX-Large  | 121 - 130 cm | 15 cm | Bilateral |
| 23323    | Ljusgrå | XXXX-Large | 131 - 140 cm | 15 cm | Bilateral |
| 23324    | Ljusgrå | Small      | 70 - 79 cm   | 19 cm | Bilateral |
| 23324    | Ljusgrå | Medium     | 80 - 89 cm   | 19 cm | Bilateral |
| 23324    | Ljusgrå | Large      | 90 - 99 cm   | 19 cm | Bilateral |
| 23324    | Ljusgrå | X-Large    | 100 - 109 cm | 19 cm | Bilateral |
| 23324    | Ljusgrå | XX-Large   | 110 - 120 cm | 19 cm | Bilateral |
| 23324    | Ljusgrå | XXX-Large  | 121 - 130 cm | 19 cm | Bilateral |
| 23324    | Ljusgrå | XXXX-Large | 131 - 140 cm | 19 cm | Bilateral |
| 23325    | Ljusgrå | Small      | 70 - 79 cm   | 23 cm | Bilateral |
| 23325    | Ljusgrå | Medium     | 80 - 89 cm   | 23 cm | Bilateral |
| 23325    | Ljusgrå | Large      | 90 - 99 cm   | 23 cm | Bilateral |
| 23325    | Ljusgrå | X-Large    | 100 - 109 cm | 23 cm | Bilateral |
| 23325    | Ljusgrå | XX-Large   | 110 - 120 cm | 23 cm | Bilateral |
| 23325    | Ljusgrå | XXX-Large  | 121 - 130 cm | 23 cm | Bilateral |
| 23325    | Ljusgrå | XXXX-Large | 131 - 140 cm | 23 cm | Bilateral |





## StomaCare EasyOpener beige

StomaCare EasyOpener har en integrerad förslutning under stoma-öppningen vilket ger extra komfort vid byte av stomipåsen. Gördeln behöver därmed inte tas av. Denna modell lämpar sig inte för patienter med ett mycket högt abdominalt tryck, baserat på en möjligt hög belastning på stoma-öppningens förslutning.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

**Övrigt:** Tag mått runt buken över stomin eller där bukmfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Ange på vilken sida stomi-öppningen finns. Gördelns höjd fram och bak är 15 cm.

| Art. nr. | Färg  | Storlek    | Midjemått    | Diameter stomiöppning | Vä/Hö |
|----------|-------|------------|--------------|-----------------------|-------|
| 23316    | Beige | Small      | 70 - 79 cm   | 60 mm                 | Vä/Hö |
| 23316    | Beige | Medium     | 80 - 90 cm   | 60 mm                 | Vä/Hö |
| 23316    | Beige | Large      | 90 - 100 cm  | 60 mm                 | Vä/Hö |
| 23316    | Beige | X-Large    | 100 - 110 cm | 60 mm                 | Vä/Hö |
| 23316    | Beige | XX-Large   | 110 - 120 cm | 60 mm                 | Vä/Hö |
| 23316    | Beige | XXX-Large  | 120 - 130 cm | 60 mm                 | Vä/Hö |
| 23316    | Beige | XXXX-Large | 130 - 140 cm | 60 mm                 | Vä/Hö |
| 23318    | Beige | Small      | 70 - 79 cm   | 72 mm                 | Vä/Hö |
| 23318    | Beige | Medium     | 80 - 90 cm   | 72 mm                 | Vä/Hö |
| 23318    | Beige | Large      | 90 - 100 cm  | 72 mm                 | Vä/Hö |
| 23318    | Beige | X-Large    | 100 - 110 cm | 72 mm                 | Vä/Hö |
| 23318    | Beige | XX-Large   | 110 - 120 cm | 72 mm                 | Vä/Hö |
| 23318    | Beige | XXX-Large  | 120 - 130 cm | 72 mm                 | Vä/Hö |
| 23318    | Beige | XXXX-Large | 130 - 140 cm | 72 mm                 | Vä/Hö |




## StomaCare låg

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av påsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

**Övrigt:** Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Gördelns höjd fram och bak är 10 cm.

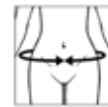

| Art. nr. | Färg | Storlek    | Midjemått    | Diameter stomiöppning | Vä/Hö  |
|----------|------|------------|--------------|-----------------------|--------|
| 23308    | Vit  | Small      | 70 - 79 cm   | 60 mm                 | Bilat. |
| 23308    | Vit  | Medium     | 80 - 90 cm   | 60 mm                 | Bilat. |
| 23308    | Vit  | Large      | 90 - 100 cm  | 60 mm                 | Bilat. |
| 23308    | Vit  | X-Large    | 100 - 110 cm | 60 mm                 | Bilat. |
| 23308    | Vit  | XX-Large   | 110 - 120 cm | 60 mm                 | Bilat. |
| 23308    | Vit  | XXX-Large  | 120 - 130 cm | 60 mm                 | Bilat. |
| 23308    | Vit  | XXXX-Large | 130 - 140 cm | 60 mm                 | Bilat. |
| 23309    | Vit  | Medium     | 80 - 90 cm   | 72 mm                 | Bilat. |
| 23309    | Vit  | Large      | 90 - 100 cm  | 72 mm                 | Bilat. |
| 23309    | Vit  | X-Large    | 100 - 110 cm | 72 mm                 | Bilat. |
| 23309    | Vit  | XX-Large   | 110 - 120 cm | 72 mm                 | Bilat. |
| 23309    | Vit  | XXX-Large  | 120 - 130 cm | 72 mm                 | Bilat. |
| 23309    | Vit  | XXXX-Large | 130 - 140 cm | 72 mm                 | Bilat. |



## StomaCare mellan svart

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

**Övrigt:** Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Gördelns höjd fram och bak är 15 cm.


| Art. nr. | Färg  | Storlek    | Midjemått    | Diameter stomiöppning | Vä/Hö  |
|----------|-------|------------|--------------|-----------------------|--------|
| 23306    | Svart | Small      | 70 - 79 cm   | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Svart | Medium     | 80 - 90 cm   | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Svart | Large      | 90 - 100 cm  | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Svart | X-Large    | 100 - 110 cm | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Svart | XX-Large   | 110 - 120 cm | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Svart | XXX-Large  | 120 - 130 cm | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Svart | XXXX-Large | 130 - 140 cm | 60 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Svart | Small      | 70 - 79 cm   | 72 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Svart | Medium     | 80 - 90 cm   | 72 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Svart | Large      | 90 - 100 cm  | 72 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Svart | X-Large    | 100 - 110 cm | 72 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Svart | XX-Large   | 110 - 120 cm | 72 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Svart | XXX-Large  | 120 - 130 cm | 72 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Svart | XXXX-Large | 130 - 140 cm | 72 mm                 | Bilat. |

## StomaCare mellan vit

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

**Övrigt:** Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Gördelns höjd fram och bak är 15 cm.

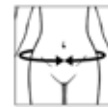

| Art. nr. | Färg | Storlek    | Midjemått    | Diameter stomiöppning | Vä/Hö  |
|----------|------|------------|--------------|-----------------------|--------|
| 23306    | Vit  | Medium     | 80 - 90 cm   | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Vit  | Large      | 90 - 100 cm  | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Vit  | X-Large    | 100 - 110 cm | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Vit  | XX-Large   | 110 - 120 cm | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Vit  | XXX-Large  | 120 - 130 cm | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Vit  | XXXX-Large | 130 - 140 cm | 60 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Vit  | Medium     | 80 - 90 cm   | 72 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Vit  | Large      | 90 - 100 cm  | 72 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Vit  | X-Large    | 100 - 110 cm | 72 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Vit  | XX-Large   | 110 - 120 cm | 72 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Vit  | XXX-Large  | 120 - 130 cm | 72 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Vit  | XXXX-Large | 130 - 140 cm | 72 mm                 | Bilat. |



## StomaCare mellan beige

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

**Övrigt:** Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Gördelns höjd fram och bak är 15 cm.

| Art. nr. | Färg  | Storlek    | Midjemått    | Diameter stomiöppning | Vä/Hö  |
|----------|-------|------------|--------------|-----------------------|--------|
| 23306    | Beige | Small      | 70 - 79 cm   | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Beige | Medium     | 80 - 90 cm   | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Beige | Large      | 90 - 100 cm  | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Beige | X-Large    | 100 - 110 cm | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Beige | XX-Large   | 110 - 120 cm | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Beige | XXX-Large  | 120 - 130 cm | 60 mm                 | Bilat. |
| 23306    | Beige | XXXX-Large | 130 - 140 cm | 60 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Beige | Small      | 70 - 79 cm   | 70 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Beige | Medium     | 80 - 90 cm   | 72 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Beige | Large      | 90 - 100 cm  | 72 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Beige | X-Large    | 100 - 110 cm | 72 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Beige | XX-Large   | 110 - 120 cm | 72 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Beige | XXX-Large  | 120 - 130 cm | 72 mm                 | Bilat. |
| 23307    | Beige | XXXX-Large | 130 - 140 cm | 72 mm                 | Bilat. |

## StomaCare hög

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

**Övrigt:** Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Ange på vilken sida stomi-öppningen finns. Gördelns höjd fram och bak är 22,5 cm.

| Art. nr. | Färg | Storlek    | Midjemått    | Diameter stomiöppning | Vä/Hö |
|----------|------|------------|--------------|-----------------------|-------|
| 23302    | Vit  | Medium     | 80 - 90 cm   | 60 mm                 | Vä/Hö |
| 23302    | Vit  | Large      | 90 - 100 cm  | 60 mm                 | Vä/Hö |
| 23302    | Vit  | X-Large    | 100 - 110 cm | 60 mm                 | Vä/Hö |
| 23302    | Vit  | XX-Large   | 110 - 120 cm | 60 mm                 | Vä/Hö |
| 23302    | Vit  | XXX-Large  | 120 - 130 cm | 60 mm                 | Vä/Hö |
| 23302    | Vit  | XXXX-Large | 130 - 140 cm | 60 mm                 | Vä/Hö |
| 23303    | Vit  | Medium     | 80 - 90 cm   | 72 mm                 | Vä/Hö |
| 23303    | Vit  | Large      | 90 - 100 cm  | 72 mm                 | Vä/Hö |
| 23303    | Vit  | X-Large    | 100 - 110 cm | 72 mm                 | Vä/Hö |
| 23303    | Vit  | XX-Large   | 110 - 120 cm | 72 mm                 | Vä/Hö |
| 23303    | Vit  | XXX-Large  | 120 - 130 cm | 72 mm                 | Vä/Hö |
| 23303    | Vit  | XXXX-Large | 130 - 140 cm | 72 mm                 | Vä/Hö |





## StomaCare halvfabrikat

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Levereras komplett med resårkantband och skyddsband för färdigställande. Kardborrlåsning.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bräck i ärr- och stomiområdet.

**Övrigt:** Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Ange på vilken sida stomiöppningen finns.

| Art. nr. | Färg  | Storlek    | Midjemått    | Vä/Hö  | Höjd bak och fram |
|----------|-------|------------|--------------|--------|-------------------|
| 23305    | Vit   | Medium     | 80 - 89 cm   | Bilat. | 15 cm             |
| 23305    | Vit   | Large      | 90 - 99 cm   | Bilat. | 15 cm             |
| 23305    | Vit   | X-Large    | 100 - 109 cm | Bilat. | 15 cm             |
| 23305    | Vit   | XX-Large   | 110 - 120 cm | Bilat. | 15 cm             |
| 23305    | Vit   | XXX-Large  | 121 - 130 cm | Bilat. | 15 cm             |
| 23305    | Vit   | XXXX-Large | 131 - 140 cm | Bilat. | 15 cm             |
| 23301    | Vit   | Medium     | 80 - 89 cm   | Vä/Hö  | 22,5 cm           |
| 23301    | Vit   | Large      | 90 - 99 cm   | Vä/Hö  | 22,5 cm           |
| 23301    | Vit   | X-Large    | 100 - 109 cm | Vä/Hö  | 22,5 cm           |
| 23301    | Vit   | XX-Large   | 110 - 120 cm | Vä/Hö  | 22,5 cm           |
| 23301    | Vit   | XXX-Large  | 121 - 130 cm | Vä/Hö  | 22,5 cm           |
| 23301    | Vit   | XXXX-Large | 131 - 140 cm | Vä/Hö  | 22,5 cm           |
| 23321    | Svart | Small      | 70 - 79 cm   | Bilat. | 15 cm             |
| 23321    | Svart | Medium     | 80 - 89 cm   | Bilat. | 15 cm             |
| 23321    | Svart | Large      | 90 - 99 cm   | Bilat. | 15 cm             |
| 23321    | Svart | X-Large    | 100 - 109 cm | Bilat. | 15 cm             |
| 23321    | Svart | XX-Large   | 110 - 120 cm | Bilat. | 15 cm             |
| 23321    | Svart | XXX-Large  | 121 - 130 cm | Bilat. | 15 cm             |
| 23321    | Svart | XXXX-Large | 131 - 140 cm | Bilat. | 15 cm             |
| 23319    | Svart | Small      | 70 - 79 cm   | Vä/Hö  | 22,5 cm           |
| 23319    | Svart | Medium     | 80 - 89 cm   | Vä/Hö  | 22,5 cm           |
| 23319    | Svart | Large      | 90 - 99 cm   | Vä/Hö  | 22,5 cm           |
| 23319    | Svart | X-Large    | 100 - 109 cm | Vä/Hö  | 22,5 cm           |
| 23319    | Svart | XX-Large   | 110 - 120 cm | Vä/Hö  | 22,5 cm           |
| 23319    | Svart | XXX-Large  | 121 - 130 cm | Vä/Hö  | 22,5 cm           |
| 23319    | Svart | XXXX-Large | 131 - 140 cm | Vä/Hö  | 22,5 cm           |

## StomaCare Protector

Skyddet är tillverkat av högtemperaturplast och används för att skydda stomin mot tryck och trauma, framför allt under aktivitet. Passar till StomaCares alla modeller. Fästs enkelt mot gördeln genom karborrband på skyddets baksida.

| Art. nr. | Färg    | Storlek    |
|----------|---------|------------|
| 23300    | Ljusgrå | En storlek |
| 23299    | Svart   | En storlek |



## Stomacare ProtectorMax

ProtectorMax är ett hårt skydd designat för att stå emot tryck och trauma i dagliga situationer samt vid aktivitet. Den minskar risken för att stomipåsen kommer i kläm eller fastnar i t.ex. byxor och bälten. Den beskyddar helt enkelt stomin i de flesta situationer. Den är anatomiskt utformad och tillverkad i ett mjukt formpresat gummiliknande material med mjuka kanter. Insidan har en mjuk polstring som ger en bekväm känsla mot huden. ProtectorMax är helt fri från latex och andra skadliga ämnen. Det elastiska midjebandet är följsamt och formar sig efter kroppens rörelser.

ProtectorMax levereras i ett beskyddande etui som kan användas vid förvaring och som reseatui.



| Art. nr. | Modell          | Färg    | Storlek    | Midjemått   |
|----------|-----------------|---------|------------|-------------|
| 23296    | ProtectorMax    | Ljusgrå | En storlek | 70 - 140 cm |
| 23297    | Extra midjeband | Ljusgrå | En storlek |             |

## Egna anteckningar

[illegible]





# Ryggortoser

[www.camp.se](http://www.camp.se)

# Camps Korsettsortiment

Camp Scandinavia har sedan 1908 designat, producerat och marknadsfört korsetter för olika behov. Lika länge har vi lyssnat på patienter och utprovare för att tillhandahålla de produkter som fyller deras behov. Vi kan med rätta säga att vi har god erfarenhet inom korsettförsörjning och är stolta över att idag kunna presentera vårt breda sortiment på de följande sidorna.


Vid val av korsett är det viktigt att överväga indikation och anatomi men också att ta hänsyn till patientens figurtyp, livsstil och acceptansnivå. För att underlätta valet har vi delat in våra gördlar och korsetter i katalogen efter nedanstående system. Önskar du ytterligare information är du välkommen att ringa vår Kundsupport.

## Stabilitet

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Gördlar   | Elastiskt material        |
| Korsetter | Tyg, förstärkt med skenor |
| Rigida    | Plast, metall             |

## Höjd

|      |                      |
|------|----------------------|
| SIO  | Sacro-iliacal        |
| LSO  | Lumbo-sacral         |
| TO   | Thoracal             |
| TLSO | Thoraco-lumbo-sacral |
| ABDO | Abdominal            |

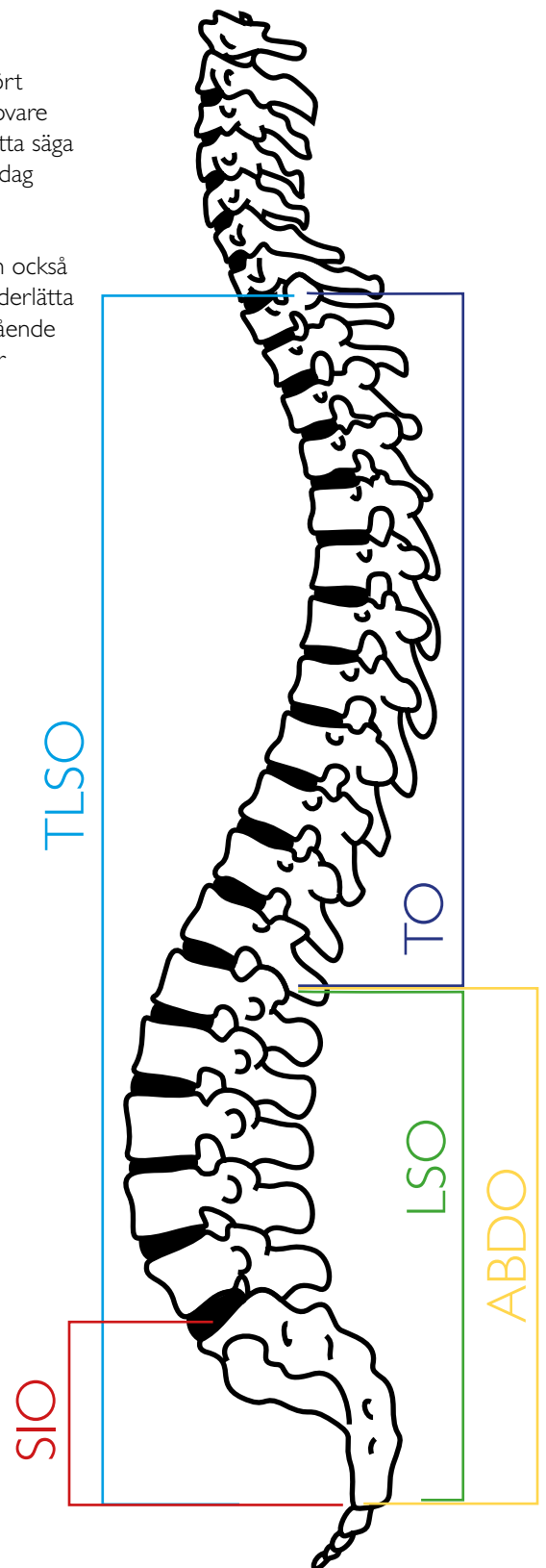

## Trokanterbälte Tro-Camp

SIO - Stabilt bälte för sacro-iliacaleden som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Dubbel knäppslå tillåter storleksutvidgning under graviditet. Snörningen mitt bak dras samman för att minska belastningen på sacro-iliacaleden. Grenband medföljer. Bältet försluts med hakar och hyskor mitt fram.

**Användningsområden:** Bäckensinsufficiens och symfysiolyksbesvär.

**Övrigt:** Storlek = Höftmått

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|-------|---------|----------|-----------|
| 21021    | Beige | 75 cm   | 8 cm     | 10 cm     |
| 21021    | Beige | 80 cm   | 8 cm     | 10 cm     |
| 21021    | Beige | 85 cm   | 8 cm     | 10 cm     |
| 21021    | Beige | 90 cm   | 8 cm     | 10 cm     |
| 21021    | Beige | 95 cm   | 8 cm     | 10 cm     |
| 21021    | Beige | 100 cm  | 8 cm     | 10 cm     |
| 21021    | Beige | 105 cm  | 8 cm     | 10 cm     |
| 21021    | Beige | 110 cm  | 8 cm     | 10 cm     |



## Sacrobälte

SIO - Bälte för sacro-iliacaleden med en elastisk inre del mot huden och en yttre rigid del för avlastning och stabilisering. Bältet passar både rak och midjesvängd figurtyp. Försett med antiglidstopp som förhindrar bältet att glida mot hud eller kläder. Avtagbar pelott.

**Användningsområden:** Bäckensinsufficiens och symfysiolyksbesvär.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Höftmått   | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|-------|----------|------------|----------|-----------|
| 21030    | Svart | Small    | 67-80 cm   | 7,5 cm   | 7,5 cm    |
| 21030    | Svart | Medium   | 80-98 cm   | 7,5 cm   | 7,5 cm    |
| 21030    | Svart | Large    | 98-116 cm  | 7,5 cm   | 7,5 cm    |
| 21030    | Svart | X-Large  | 116-133 cm | 7,5 cm   | 7,5 cm    |
| 21030    | Svart | XX-Large | 133-150 cm | 7,5 cm   | 7,5 cm    |





## Graviditetsbälte MAMMY

Anatomiskt graviditetsbälte som kan anpassas till de olika stadierna under graviditeten. Bältet lyfter upp magen för att minska känslan av tyngd i bäckenområdet. Skenor i ryggen stödjer och förbättrar hållning, vilket minskar ryggsmärta. I sidorna finns extra dragband för att justera stödet vid behov. Tillverkad i ett modernt och extra mjukt material för komfort och låg vikt.

**Användningsområden:** Graviditetsrelaterad ryggsmärta och/eller bäckensmärta.

| Art. nr. | Färg | Storlek    | Höftmått | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|------|------------|----------|----------|-----------|
| 22149    | Grå  | En storlek | 90-130cm | 13 cm    | 7 cm      |

## Elcross® LUX låg

SIO - Denna låga modell är avsedd att ge ett sacroiliacalt stöd men kan också placeras för ett mer lumbosacralt stöd. ELCROSS®LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i ELCROSS®LUX är fritt från latex.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Höftmått     | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|-------|----------|--------------|----------|-----------|
| 22171    | Beige | Small    | 85 - 95 cm   | 19 cm    | 15 cm     |
| 22171    | Beige | Medium   | 95 - 105 cm  | 19 cm    | 15 cm     |
| 22171    | Beige | Large    | 105 - 115 cm | 19 cm    | 15 cm     |
| 22171    | Beige | X-Large  | 115 - 125 cm | 19 cm    | 15 cm     |
| 22171    | Beige | XX-Large | 125 - 135 cm | 19 cm    | 15 cm     |

NYHET!

## ELEMENTS rygg

ELEMENTS Rygg är avsedd för behandling av lindriga och tillfälliga besvär som t.ex. smärta, allmän svaghetskänsla i ryggen. Korsetten ger viss stabilisering av ländryggen genom den kompression som uppstår då man tar den på. Den håller också ländryggen varm.

**Användningsområden:** Lindriga och tillfälliga besvär som t.ex. smärta, allmän svaghetskänsla i ryggen.

**Kontraindikationer:** Ryggproblem med neurologiskt ursprung.

| Art. nr. | Färg        | Storlek  | Höftmått     |
|----------|-------------|----------|--------------|
| 34102    | Beige/Svart | Small    | 82 - 95 cm   |
| 34102    | Beige/Svart | Medium   | 92 - 105 cm  |
| 34102    | Beige/Svart | Large    | 102 - 115 cm |
| 34102    | Beige/Svart | X-Large  | 112 - 125 cm |
| 34102    | Beige/Svart | XX-Large | 122 - 135 cm |



## SELECTION® rygg låg

SIO - Elastisk smidig gördel tillverkad av det sköna SELECTION® materialet som kännetecknas av sin ventilerande förmåga, låga vikt och optimala passform. Modellen passar för såväl rak som kurvig figur och har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen. Dragbanden glider extra smidigt i de specialdesignade D-ringarna. Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri. På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen, med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband. Materialen i Selection Rygg är av högsta kvalitet och funktion har stått i fokus under utvecklingsfasen.



**Användningsområden:** Ryggsmärta och Rygginsufficiens.

**Övrigt:** För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Höftmått   | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|-------|----------|------------|----------|-----------|
| 35400    | Svart | X-Small  | 75-85 cm   | 19 cm    | 12 cm     |
| 35400    | Svart | Small    | 85-95 cm   | 19 cm    | 12 cm     |
| 35400    | Svart | Medium   | 95-105 cm  | 19 cm    | 12 cm     |
| 35400    | Svart | Large    | 105-115 cm | 19 cm    | 12 cm     |
| 35400    | Svart | X-Large  | 115-125 cm | 19 cm    | 12 cm     |
| 35400    | Svart | XX-Large | 125-140 cm | 19 cm    | 12 cm     |



## SELECTION® rygg regular

LSO - Elastisk smidig gördel tillverkad av det sköna SELECTION® materialet som kännetecknas av sin ventilerande förmåga, låga vikt och optimala passform. Modellen passar för såväl rak som kurvig figur och har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen. Dragbanden glider extra smidigt i de specialdesignade D-ringarna. Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri. På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen, med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband. Materialen i Selection Rygg är av högsta kvalitet och funktion har stått i fokus under utvecklingsfasen.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och Ryggsufficiens.

**Övrigt:** För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia.

| Art. nr. | Färg  | Storlek   | Höftmått     | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|-------|-----------|--------------|----------|-----------|
| 3540I    | Svart | X-Small   | 75-85 cm     | 23 cm    | 16 cm     |
| 3540I    | Svart | Small     | 85-95 cm     | 23 cm    | 16 cm     |
| 3540I    | Svart | Medium    | 95-105 cm    | 23 cm    | 16 cm     |
| 3540I    | Svart | Large     | 105-115 cm   | 23 cm    | 16 cm     |
| 3540I    | Svart | X-Large   | 115-125 cm   | 23 cm    | 16 cm     |
| 3540I    | Svart | XX-Large  | 125-140 cm   | 23 cm    | 16 cm     |
| 3540I    | Svart | XXX-Large | 140 - 160 cm | 23 cm    | 16 cm     |

## SELECTION® rygg wide

ABDO - Elastisk smidig gördel tillverkad av det sköna SELECTION® -materialet som kännetecknas av sin ventilerande förmåga, låga vikt och optimala passform. Denna modell är speciellt framtagen för personer med ett kraftigt magparti som behöver lyft och stöd. Förslutningen framtill är delad i två för att underlätta vid påtagning och för att kunna justera höjd fram. Ortosen har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen. Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri. På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband. Materialen i Selection Rygg är av högsta kvalitet och funktion har stått i fokus under utvecklingsfasen.



**Användningsområden:** Ryggsmärta och Rygginsufficiens hos personer med kraftigt magparti.

| Art. nr. | Färg  | Storlek   | Höftmått   | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|-------|-----------|------------|----------|-----------|
| 35402    | Svart | Small     | 85-95 cm   | 31,5 cm  | 25 cm     |
| 35402    | Svart | Medium    | 95-105 cm  | 31,5 cm  | 25 cm     |
| 35402    | Svart | Large     | 105-115 cm | 31,5 cm  | 25 cm     |
| 35402    | Svart | X-Large   | 115-125 cm | 31,5 cm  | 25 cm     |
| 35402    | Svart | XX-Large  | 125-140 cm | 31,5 cm  | 25 cm     |
| 35402    | Svart | XXX-Large | 140-160 cm | 31,5 cm  | 25 cm     |

# NAVY X™



**Navy-X finns i 3 olika höjder - låg, mellan och hög.**

**Mellan-modellen finns dessutom i 3 olika färger - marinblå, beige och grå.**

Gemensamt för alla modellerna är:

- det slitstarka och luftiga materialet
- de extra stabiliserande dragbanden
- den förlåtande passformen



Den höga modellen har delad förslutning framtill och öppna kanaler i ryggen för komplettering av mer stabila skenor när så önskas.

Samtliga modeller finns i storlekarna X-Small upp till XX-Large, vilket täcker in ett höftmått från 75 cm upp till 135 cm.



## Höjder i cm:

|       |       | <b>Fram</b> | <b>Bak</b> |
|-------|-------|-------------|------------|
| 23549 | Blå   | 12          | 18,5       |
| 23554 | Grå   | 12          | 18,5       |
| 23550 | Blå   | 16          | 22         |
| 23555 | Grå   | 16          | 22         |
| 23560 | Beige | 16          | 22         |
| 23552 | Blå   | 25          | 31         |



## Navy X<sup>TM</sup> låg

SIO - Elastisk luftig gördel i extra stadigt och slitstarkt material som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Starka dragband ger extra stabilitet tillsammans med skenorna i plast baktill och i sidorna. Kardborrlåsning mitt fram. Gördeln är lämplig för tuffa miljöer. Gördeln är avsedd som sacroiliacalt stöd men kan också passa som lumbosacralt stöd till en kort patient.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

| Art. nr. | Färg    | Storlek  | Höftmått   | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|---------|----------|------------|----------|-----------|
| 23549    | Mörkblå | X-Small  | 75-85 cm   | 18,5 cm  | 12 cm     |
| 23549    | Mörkblå | Small    | 85-95 cm   | 18,5 cm  | 12 cm     |
| 23549    | Mörkblå | Medium   | 95-105 cm  | 18,5 cm  | 12 cm     |
| 23549    | Mörkblå | Large    | 105-115 cm | 18,5 cm  | 12 cm     |
| 23549    | Mörkblå | X-Large  | 115-125 cm | 18,5 cm  | 12 cm     |
| 23549    | Mörkblå | XX-Large | 125-135 cm | 18,5 cm  | 12 cm     |
| 23554    | Grå     | X-Small  | 75-85 cm   | 18,5 cm  | 12 cm     |
| 23554    | Grå     | Small    | 85-95 cm   | 18,5 cm  | 12 cm     |
| 23554    | Grå     | Medium   | 95-105 cm  | 18,5 cm  | 12 cm     |
| 23554    | Grå     | Large    | 105-115 cm | 18,5 cm  | 12 cm     |
| 23554    | Grå     | X-Large  | 115-125 cm | 18,5 cm  | 12 cm     |
| 23554    | Grå     | XX-Large | 125-135 cm | 18,5 cm  | 12 cm     |





## Navy X™

LSO - Elastisk luftig gördel i extra stadigt och slitstarkt material som passar både rak och midjesvägd figurtyp. Starka dragband ger extra stabilitet tillsammans med skenorna i plast baktill och i sidorna. Kardborrlåsning mitt fram. Gördeln är lämplig för tuffa miljöer.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

| Art. nr. | Färg    | Storlek  | Höftmått   | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|---------|----------|------------|----------|-----------|
| 23550    | Mörkblå | X-Small  | 75-85 cm   | 22 cm    | 16 cm     |
| 23550    | Mörkblå | Small    | 85-95 cm   | 22 cm    | 16 cm     |
| 23550    | Mörkblå | Medium   | 95-105 cm  | 22 cm    | 16 cm     |
| 23550    | Mörkblå | Large    | 105-115 cm | 22 cm    | 16 cm     |
| 23550    | Mörkblå | X-Large  | 115-125 cm | 22 cm    | 16 cm     |
| 23550    | Mörkblå | XX-Large | 125-135 cm | 22 cm    | 16 cm     |
| 23560    | Beige   | Small    | 85-95 cm   | 22 cm    | 16 cm     |
| 23560    | Beige   | Medium   | 95-105 cm  | 22 cm    | 16 cm     |
| 23560    | Beige   | Large    | 105-115 cm | 22 cm    | 16 cm     |
| 23560    | Beige   | X-Large  | 115-125 cm | 22 cm    | 16 cm     |
| 23560    | Beige   | XX-Large | 125-135 cm | 22 cm    | 16 cm     |
| 23555    | Grå     | X-Small  | 75-85 cm   | 22 cm    | 16 cm     |
| 23555    | Grå     | Small    | 85-95 cm   | 22 cm    | 16 cm     |
| 23555    | Grå     | Medium   | 95-105 cm  | 22 cm    | 16 cm     |
| 23555    | Grå     | Large    | 105-115 cm | 22 cm    | 16 cm     |
| 23555    | Grå     | X-Large  | 115-125 cm | 22 cm    | 16 cm     |
| 23555    | Grå     | XX-Large | 125-135 cm | 22 cm    | 16 cm     |

## Navy X™ hög

LSO - Elastisk luftig gördel i extra stadigt och slitstarkt material. Modellen är extra hög och har delad förslutning framtill samt extra dragband för ökad stabilisering. Den har öppna kanaler bak för komplettering av mer stabila skenor när så önskas.

**Användningsområden:** Ryggsmerta och rygginsufficiens

| Art. nr. | Färg                 | Storlek      | Höftmått   | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|----------------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 23552    | Mörkblå              | X-Small      | 75-85 cm   | 31 cm    | 25 cm     |
| 23552    | Mörkblå              | Small        | 85-95 cm   | 31 cm    | 25 cm     |
| 23552    | Mörkblå              | Medium       | 95-105 cm  | 31 cm    | 25 cm     |
| 23552    | Mörkblå              | Large        | 105-115 cm | 31 cm    | 25 cm     |
| 23552    | Mörkblå              | X-Large      | 115-125 cm | 31 cm    | 25 cm     |
| 23552    | Mörkblå              | XX-Large     | 125-135 cm | 31 cm    | 25 cm     |
| 23553    | Aluminiumskenor 2 st | 2 cm x 26 cm |            |          |           |





## Elcross® LUX mellan

LSO - En mellanhög modell som ger ett stabilt lumbosacralt stöd. ELCROSS® LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i ELCROSS® LUX är fritt från latex. Finns i beige eller grå modell.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Höftmått     | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|-------|----------|--------------|----------|-----------|
| 22172    | Beige | Small    | 85 - 95 cm   | 28 cm    | 19 cm     |
| 22172    | Beige | Medium   | 95 - 105 cm  | 28 cm    | 19 cm     |
| 22172    | Beige | Large    | 105 - 115 cm | 28 cm    | 19 cm     |
| 22172    | Beige | X-Large  | 115 - 125 cm | 28 cm    | 19 cm     |
| 22172    | Beige | XX-Large | 125 - 135 cm | 28 cm    | 19 cm     |
| 22176    | Grå   | Small    | 85 - 95 cm   | 28 cm    | 19 cm     |
| 22176    | Grå   | Medium   | 95 - 105 cm  | 28 cm    | 19 cm     |
| 22176    | Grå   | Large    | 105 - 115 cm | 28 cm    | 19 cm     |
| 22176    | Grå   | X-Large  | 115 - 125 cm | 28 cm    | 19 cm     |
| 22176    | Grå   | XX-Large | 125 - 135 cm | 28 cm    | 19 cm     |

## Elcross® Light mellan

LSO - Gördel tillverkad i ett mycket elastiskt material som ger 50 % mer kompression än konventionella gördlar. Ortosens två lycra-lager är tunnare och luftigare än det traditionella Elcross-materialet. Gördeln passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar och skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de extra stabiliserande dragbanden på vardera sida.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

**Övrigt:** Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.



| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Höftmått   | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|-------|----------|------------|----------|-----------|
| 22159    | Svart | Small    | 85-95 cm   | 28 cm    | 20 cm     |
| 22159    | Svart | Medium   | 95-105 cm  | 28 cm    | 20 cm     |
| 22159    | Svart | Large    | 105-115 cm | 28 cm    | 20 cm     |
| 22159    | Svart | X-Large  | 115-125 cm | 28 cm    | 20 cm     |
| 22159    | Svart | XX-Large | 125-135 cm | 28 cm    | 20 cm     |



## Elcross® LUX hög

LSO - Denna något högre modell lämpar sig väl för den lite längre personen och ger stöd lumbosacralt men även i nedre delen av bröstryggen. ELCROSS®LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i ELCROSS®LUX är fritt från latex. Finns i beige eller grå modell.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Höftmått     | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|-------|----------|--------------|----------|-----------|
| 22173    | Beige | Small    | 85 - 95 cm   | 33 cm    | 23 cm     |
| 22173    | Beige | Medium   | 95 - 105 cm  | 33 cm    | 23 cm     |
| 22173    | Beige | Large    | 105 - 115 cm | 33 cm    | 23 cm     |
| 22173    | Beige | X-Large  | 115 - 125 cm | 33 cm    | 23 cm     |
| 22173    | Beige | XX-Large | 125 - 135 cm | 33 cm    | 23 cm     |
| 22177    | Grå   | Small    | 85 - 95 cm   | 33 cm    | 23 cm     |
| 22177    | Grå   | Medium   | 95 - 105 cm  | 33 cm    | 23 cm     |
| 22177    | Grå   | Large    | 105 - 115 cm | 33 cm    | 23 cm     |
| 22177    | Grå   | X-Large  | 115 - 125 cm | 33 cm    | 23 cm     |
| 22177    | Grå   | XX-Large | 125 - 135 cm | 33 cm    | 23 cm     |

## Elcross® Light hög

LSO - Gördel tillverkad i ett mycket elastiskt material som ger 50 % mer kompression än konventionella gördlar. Ortosens två lycra-lager är tunnare och luftigare än det traditionella Elcross-materialet. Gördeln passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar och skenor bak och sidorna ger stabilitet tillsammans med de extra stabiliserande dragbanden på vardera sida.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

**Övrigt:** Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Höftmått   | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|-------|----------|------------|----------|-----------|
| 22160    | Svart | Small    | 85-95 cm   | 33 cm    | 23 cm     |
| 22160    | Svart | Medium   | 95-105 cm  | 33 cm    | 23 cm     |
| 22160    | Svart | Large    | 105-115 cm | 33 cm    | 23 cm     |
| 22160    | Svart | X-Large  | 115-125 cm | 33 cm    | 23 cm     |
| 22160    | Svart | XX-Large | 125-135 cm | 33 cm    | 23 cm     |



## Camp MAX korsett mellan

LSO – Elastisk tygkorsett som är extra smidig och följsam. Den är semi-rigid och ger ett lumbosacralt stöd. Tillverkat av ett mjukt ventilerande material. De patenterade extra stabiliserande banden formar sig väl runt kroppen och ger ett stadigt stöd. Öppna skenfickor bak med följsamma skenor och en frontpanel med en mjuk kardborrlåsning fram. Camp Max har låg vikt och är en mycket bekväm och behaglig korsett att bära.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

**Övrigt:** Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

| Art. nr. | Färg | Storlek  | Höftmått   | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|------|----------|------------|----------|-----------|
| 22140    | Grå  | Small    | 80-95 cm   | 28 cm    | 20 cm     |
| 22140    | Grå  | Medium   | 90-105 cm  | 28 cm    | 20 cm     |
| 22140    | Grå  | Large    | 100-115 cm | 28 cm    | 20 cm     |
| 22140    | Grå  | X-Large  | 110-125 cm | 28 cm    | 20 cm     |
| 22140    | Grå  | XX-Large | 120-135 cm | 28 cm    | 20 cm     |





## Camp MAX korsett hög

LSO – Elastisk tygkorsett som är extra smidig och följsam. Den är semi-rigid och ger ett lumbosacralt stöd. Tillverkat av ett mjukt ventilerande material. De patenterade extra stabiliserande banden formar sig väl runt kroppen och ger ett stadigt stöd. Öppna skenfickor bak med följsamma skenor och en frontpanel med en mjuk kardborrlåsning fram. Camp Max har låg vikt och är en mycket bekväm och behaglig korsett att bära.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

**Övrigt:** Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

| Art. nr. | Färg | Storlek  | Höftmått   | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|------|----------|------------|----------|-----------|
| 22141    | Grå  | Small    | 80-95 cm   | 33 cm    | 20 cm     |
| 22141    | Grå  | Medium   | 90-105 cm  | 33 cm    | 20 cm     |
| 22141    | Grå  | Large    | 100-115 cm | 33 cm    | 20 cm     |
| 22141    | Grå  | X-Large  | 110-125 cm | 33 cm    | 20 cm     |
| 22141    | Grå  | XX-Large | 120-135 cm | 33 cm    | 20 cm     |



## Camp MAX korsett extra hög

LSO – Elastisk tygkorsett som är extra smidig och följsam. Den är semi-rigid och ger ett lumbosacralt stöd. Tillverkat av ett mjukt ventilerande material. De patenterade extra stabiliserande banden formar sig väl runt kroppen och ger ett stadigt stöd. Öppna skenfickor bak med följsamma skenor och en frontpanel med en mjuk kardborrlåsning fram. Camp Max har låg vikt och är en mycket bekväm och behaglig korsett att bära.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

**Övrigt:** Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

| Art. nr. | Färg | Storlek  | Höftmått   | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|------|----------|------------|----------|-----------|
| 22142    | Grå  | Small    | 80-95 cm   | 35 cm    | 23 cm     |
| 22142    | Grå  | Medium   | 90-105 cm  | 35 cm    | 23 cm     |
| 22142    | Grå  | Large    | 100-115 cm | 35 cm    | 23 cm     |
| 22142    | Grå  | X-Large  | 110-125 cm | 35 cm    | 23 cm     |
| 22142    | Grå  | XX-Large | 120-135 cm | 35 cm    | 23 cm     |



## SpinAir Ryggortos

SpinAir är avsedd för patienter med osteoporos och patienter med kyfos. Ortosen erbjuder en effektiv och behaglig behandling vid dessa tillstånd. Ortosen främjar och förbättrar tillbakaskjutning av axlarna utan revbenssupport, för ökad bekvämlighet. Lumbala förstärkningar ger ökad stabilitet och en bättre lumbal passform. SpinAir är diskret med låg vikt och lätt att prova ut på patienten. Flexibla axelband ger en anatomisk passform av ortosen över axlarna. En mjuk vaddering ger ytterligare komfort för patienten. Axelbanden kan justeras efter behov och gradvis förbättring. De kan även klippas till önskad längd.

**Användningsområden:** Osteoporos, kyfos, spinal artros

| Art. nr. | Modell                      | Storlek    | Höftmått   | Höjd bak |
|----------|-----------------------------|------------|------------|----------|
| 22146    | SpinAir                     | Small1     | 78-93 cm   | 51-59 cm |
| 22146    | SpinAir                     | Medium1    | 90-105 cm  | 51-59 cm |
| 22146    | SpinAir                     | Medium2    | 90-105 cm  | 59-68 cm |
| 22146    | SpinAir                     | Large2     | 103-120 cm | 59-68 cm |
| 22146    | SpinAir                     | Large3     | 103-120 cm | 68-75 cm |
| 22147    | SpinAir<br>Förlängningsband | En storlek |            |          |



**Mått:** Måttet "Höjd bak" mäts från Th2 till SI.

## Elcross® LUX skuldra

TO - Elastiskt mjukt hållningsbandage tillverkat av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. med bomull mot huden för patienter som behöver stöd över bröstryggen vid t.ex. hållningsträning. Polstrade axelband gör att bandaget inte skaver. Kardborrlåsning mitt fram. Materialet i ELCROSS®LUX är fritt från latex.

**Användningsområden:** Rygginsufficiens, kyfos och hållningsproblem.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Mått         |
|----------|-------|----------|--------------|
| 22175    | Beige | Small    | 70 - 80 cm   |
| 22175    | Beige | Medium   | 80 - 90 cm   |
| 22175    | Beige | Large    | 90 - 100 cm  |
| 22175    | Beige | X-Large  | 100 - 110 cm |
| 22175    | Beige | XX-Large | 110 - 120 cm |



**Mått:** Runt bröstkorgen under bysten.



## Elcross® LUX mage

ABDO - Den här modellen är speciellt framtagen för patienter med kraftigt magparti. Den ger ett stabilt stöd över ländryggen samtidigt som den lyfter och stödjer buken. Framstycket har en bred karborreöppning på en sida som gör det möjligt att variera bredden och få ett optimalt lyft och stöd. Kan även med fördel användas av gravida allt eftersom magen växer. Banden kan placeras fram eller under magen. ELCROSS®LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i ELCROSS®LUX är fritt från latex.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens. Som stöd vid slapp bukmuskulatur, vid mindre bråck.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Höftmått     | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|-------|----------|--------------|----------|-----------|
| 22174    | Beige | Medium   | 95 - 105 cm  | 28 cm    | 26 cm     |
| 22174    | Beige | Large    | 105 - 115 cm | 28 cm    | 26 cm     |
| 22174    | Beige | X-Large  | 115 - 125 cm | 28 cm    | 26 cm     |
| 22174    | Beige | XX-Large | 125 - 135 cm | 28 cm    | 26 cm     |



## Ryggplatta

Hjärtformad ryggplatta i Campolite, klädd med frotté. Plattan fästs med kardborrband på korsetten eller gördeln. Utskuren för ryggraden i syfte att undvika tryck.

| Art. nr. | Storlek    | Bredd | Tjocklek | Höjd  |
|----------|------------|-------|----------|-------|
| 22135    | En storlek | 18 cm | 1 cm     | 16 cm |

## Camp® ONE Låg

LSO - Camp® ONE är en serie stabila tygkorsetter i olika höjder tillverkad i ett stadigt tyg med bomull som bas (60% bomull och därutöver polyamid, elastan och polyester). Dessa material tillsammans ger en stabil och slitstark kombination. Denna låga modell ger stöd för lägre delen av ländryggen och över sacrum. Enkel att ta på och anpassa till önskad kompression och stabilitet. Kardborrelåsning mitt fram. Modellerna har öglor på sidorna där dragbanden smidigt löper. Modellerna har dubbla dragband som ger en stabil passform och följsamhet. Dom har insydda plastfjädrar runt om i korsetten och dessutom öppna kanaler för 2 extra stabila formbara skenor i ryggen (medföljer i förpackningen). Materialets flexibilitet ger stor följsamhet vilket gör att modellerna passar för både rak och midjesvängd figurtyp. Materialet i Camp®ONE är fritt från latex.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

| Art. nr. | Färg | Storlek  | Höftmått     | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|------|----------|--------------|----------|-----------|
| 22178    | Grå  | Small    | 80 - 90 cm   | 28 cm    | 18 cm     |
| 22178    | Grå  | Medium   | 90 - 100 cm  | 28 cm    | 18 cm     |
| 22178    | Grå  | Large    | 100 - 110 cm | 28 cm    | 18 cm     |
| 22178    | Grå  | XX-Large | 120 - 130 cm | 28 cm    | 18 cm     |



## Camp® ONE Mellan

LSO - Camp® ONE är en serie stabila tygkorsetter i olika höjder tillverkad i ett stadigt tyg med bomull som bas (60% bomull och därutöver polyamid, elastan och polyester). Dessa material tillsammans ger en stabil och slitstark kombination. Denna mellan höga modell ger ett stadigt stöd för ländryggen. Enkel att ta på och anpassa till önskad kompression och stabilitet. Kardborrelåsning mitt fram. Modellerna har öglor på sidorna där dragbanden smidigt löper. Modellerna har dubbla dragband som ger en stabil passform och följsamhet. Dom har insydda plastfjädrar runt om i korsetten och dessutom öppna kanaler för 2 extra stabila formbara skenor i ryggen (medföljer i förpackningen). Materialets flexibilitet ger stor följsamhet vilket gör att modellerna passar för både rak och midjesvängd figurtyp. Materialet i Camp®ONE är fritt från latex.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

| Art. nr. | Färg | Storlek  | Höftmått     | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|------|----------|--------------|----------|-----------|
| 22179    | Grå  | X-Small  | 70 - 80 cm   | 33 cm    | 20 cm     |
| 22179    | Grå  | Small    | 80 - 90 cm   | 33 cm    | 20 cm     |
| 22179    | Grå  | Medium   | 90 - 100 cm  | 33 cm    | 20 cm     |
| 22179    | Grå  | Large    | 100 - 110 cm | 33 cm    | 20 cm     |
| 22179    | Grå  | X-Large  | 110 - 120 cm | 33 cm    | 20 cm     |
| 22179    | Grå  | XX-Large | 120 - 130 cm | 33 cm    | 20 cm     |





## Camp® ONE hög

LSO - Camp® ONE är en serie stabila tygkorsetter i olika höjder tillverkad i ett stadigt tyg med bomull som bas (60% bomull och därutöver polyamid, elastan och polyester). Dessa material tillsammans ger en stabil och slitstark kombination. Denna något högre modell ger ett stabilt stöd för ländryggen och nedre delen av bröstryggen. Lämpar sig väl även för personer med längre rygg. Enkel att ta på och anpassa till önskad kompression och stabilitet. Kardborrelåsning mitt fram. Modellerna har öglor på sidorna där dragbanden smidigt löper. Modellerna har dubbla dragband som ger en stabil passform och följsamhet. Dom har insydda plastfjädrar runt om i korsetten och dessutom öppna kanaler för 2 extra stabila formbara skenor i ryggen (medföljer i förpackningen). Materialets flexibilitet ger stor följsamhet vilket gör att modellerna passar för både rak och midjesvägd figurtyp. Materialet i Camp®ONE är fritt från latex.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

| Art. nr. | Färg | Storlek  | Höftmått     | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|------|----------|--------------|----------|-----------|
| 22180    | Grå  | XX-Small | 60 - 70 cm   | 38 cm    | 23 cm     |
| 22180    | Grå  | X-Small  | 70 - 80 cm   | 38 cm    | 23 cm     |
| 22180    | Grå  | Small    | 80 - 90 cm   | 38 cm    | 23 cm     |
| 22180    | Grå  | Medium   | 90 - 100 cm  | 38 cm    | 23 cm     |
| 22180    | Grå  | Large    | 100 - 110 cm | 38 cm    | 23 cm     |
| 22180    | Grå  | X-Large  | 110 - 120 cm | 38 cm    | 23 cm     |
| 22180    | Grå  | XX-Large | 120 - 130 cm | 38 cm    | 23 cm     |



## Camp® ONE tillbehör

För komplettering med extra skenficka, när extra stabilitet önskas, finns det två bredder av skenficka samt tillhörande kantband att beställa.

| Art. nr. | Modell                      | Bredd | Längd |
|----------|-----------------------------|-------|-------|
| 22183    | Kantband grå                |       | 125 m |
| 22184    | Material till skenficka grå | 25 mm | 30 m  |
| 22184    | Material till skenficka grå | 34 mm | 30 m  |

## Camp® XXI mellan

LSO - Tygkorsett i bomull med invävd polymertråd för lätt elasticitet som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Dubbel Camp-snörning i vardera sida med kardborrlåsning. Korsetten kan med fördel användas av patienter med svag handfunktion då all kraft kan justeras med snörningen i kombination med de stabila banden. Korsetten har öppna fjäderremсор i ryggen och två medföljande skenor. Kardborrlåsning mitt fram.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

**Övrigt:** Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Höftmått   | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|-------|----------|------------|----------|-----------|
| 29432    | Beige | Small    | 80-95 cm   | 27 cm    | 20 cm     |
| 29432    | Beige | Medium   | 90-105 cm  | 27 cm    | 20 cm     |
| 29432    | Beige | Large    | 100-115 cm | 27 cm    | 20 cm     |
| 29432    | Beige | X-Large  | 110-125 cm | 27 cm    | 20 cm     |
| 29432    | Beige | XX-Large | 120-135 cm | 27 cm    | 20 cm     |



## Camp® XXI hög

LSO - Tygkorsett i bomull med invävd polymertråd för lätt elasticitet som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Dubbel Camp-snörning i vardera sida med kardborrlåsning. Korsetten kan med fördel användas av patienter med svag handfunktion då all kraft kan justeras med snörningen i kombination med de stabila banden. Korsetten har öppna fjäderremсор i ryggen och två medföljande skenor. Kardborrlåsning mitt fram.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

**Övrigt:** Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Höftmått   | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|-------|----------|------------|----------|-----------|
| 29433    | Beige | Small    | 80-95 cm   | 32 cm    | 25 cm     |
| 29433    | Beige | Medium   | 90-105 cm  | 32 cm    | 25 cm     |
| 29433    | Beige | Large    | 100-115 cm | 32 cm    | 25 cm     |
| 29433    | Beige | X-Large  | 110-125 cm | 32 cm    | 25 cm     |
| 29433    | Beige | XX-Large | 120-135 cm | 32 cm    | 25 cm     |





## Camp® XXITLSO

TLSO - Thoraco-lumbo-sacral tygkorsett i bomull med invävd polymertråd för lätt elasticitet. Passar både rak och midjesvägd figurtyp. Dubbel Camp-snörning i vardera sida med kardborrlåsning. Korsetten kan med fördel användas för patienter med svag handfunktion då all kraft kan justeras med snörningen i kombination med de stabila banden. Polstrade axelband på skulderdelen gör att ortosen inte skaver. Axelbanden kryssas bak på bröstryggen och fästs på framsidan. Kardborrlåsning mitt fram.

**Användningsområden:** Osteoporos och kyfos.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Höftmått   | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|-------|----------|------------|----------|-----------|
| 29437    | Beige | Small    | 85-95 cm   | 51 cm    | 21 cm     |
| 29437    | Beige | Medium   | 95-105 cm  | 51 cm    | 21 cm     |
| 29437    | Beige | Large    | 105-115 cm | 51 cm    | 21 cm     |
| 29437    | Beige | X-Large  | 115-125 cm | 51 cm    | 21 cm     |
| 29437    | Beige | XX-Large | 125-135 cm | 51 cm    | 21 cm     |



## Camp® XXI mage

ABDO - Lumbo-sacral tygkorsett i bomull med invävd polymertråd för lätt elasticitet. Denna modell är speciellt lämplig för patienter med kraftigt magparti. Dubbel Camp-snörning i vardera sida med kardborrlåsning. Korsetten kan med fördel användas av patienter med svag handfunktion då snörningen är mycket enkel att reglera. Tvådelad kardborrlåsning i sidan ger god justeringsmöjlighet och underlättar vid påtagning.

**Användningsområden:** Ryggsmärta eller rygginsufficiens hos personer med kraftigt magparti.

| Art. nr. | Färg  | Storlek  | Höftmått   | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|-------|----------|------------|----------|-----------|
| 29434    | Beige | Small    | 80-95 cm   | 32 cm    | 31 cm     |
| 29434    | Beige | Medium   | 90-105 cm  | 32 cm    | 31 cm     |
| 29434    | Beige | Large    | 100-115 cm | 32 cm    | 31 cm     |
| 29434    | Beige | X-Large  | 110-125 cm | 32 cm    | 31 cm     |
| 29434    | Beige | XX-Large | 120-135 cm | 32 cm    | 31 cm     |

## Lumbo 267

LSO - Tygkorsett i bomull som passar en medelstor, rak figurtyp. Korsetten har tredubbel Camp-snörning i vardera sida och resårinfällningar upp- och nertill i sidan fram. Försedd med öppna fjäderremсор i ryggen. Försluts med dragkedja mitt fram.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

**Övrigt:** Detta helfabrikat har 4 öppna kanaler i ryggen för extra skenor. Dessa skenor ingår ej.

| Art. nr. | Storlek | Höftmått | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|---------|----------|----------|-----------|
| 22672    | 74      | 74 cm    | 39 cm    | 26 cm     |
| 22672    | 78      | 78 cm    | 39 cm    | 26 cm     |
| 22672    | 82      | 82 cm    | 39 cm    | 26 cm     |
| 22672    | 86      | 86 cm    | 39 cm    | 26 cm     |
| 22672    | 90      | 90 cm    | 39 cm    | 26 cm     |
| 22672    | 94      | 94 cm    | 39 cm    | 26 cm     |
| 22672    | 98      | 98 cm    | 39 cm    | 26 cm     |
| 22672    | 102     | 102 cm   | 39 cm    | 26 cm     |
| 22672    | 106     | 106 cm   | 39 cm    | 26 cm     |
| 22672    | 110     | 110 cm   | 39 cm    | 26 cm     |



## Lumbo 439

LSO - Tygkorsett i bomull som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Korsetten har genomgående resårinfällningar i vardera sida fram och öppna fjäderremсор bak. Fyra öppna sömmar i sidorna och öppen söm i ryggen ger stora anpassningsmöjligheter. Korsetten kan med fördel användas för patienter med svag handfunktion då den försluts med kardborrband genom vändsölja växelvis från höger/vänster.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

**Övrigt:** Detta helfabrikat har fyra öppna kanaler i ryggen för extra skenor. Dessa skenor ingår ej.

| Art. nr. | Storlek | Midjemått | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|---------|-----------|----------|-----------|
| 26439    | 76      | 76 cm     | 68 cm    | 55 cm     |
| 26439    | 84      | 84 cm     | 68 cm    | 55 cm     |
| 26439    | 92      | 92 cm     | 68 cm    | 55 cm     |
| 26439    | 100     | 100 cm    | 68 cm    | 55 cm     |







## Lumbo 591

LSO - Tygkorsett som passar för en rak figurtyp. Korsetten har resårinfällningar i vardera sida nertill fram och öppna fjäderremсор i ryggen. Fyra öppna sömmar i sidorna och öppen söm i ryggen ger stora anpassningsmöjligheter. Försluts med reglerbara dragband växelvis från höger/vänster.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

**Övrigt:** Detta halvfabrikat har fyra öppna kanaler i ryggen för extra skenor. Dessa skenor ingår ej.

| Art. nr. | Storlek | Höftmått | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|---------|----------|----------|-----------|
| 27591    | 82      | 82 cm    | 42 cm    | 30 cm     |
| 27591    | 86      | 86 cm    | 42 cm    | 30 cm     |
| 27591    | 90      | 90 cm    | 42 cm    | 30 cm     |
| 27591    | 94      | 94 cm    | 42 cm    | 30 cm     |
| 27591    | 98      | 98 cm    | 42 cm    | 30 cm     |
| 27591    | 102     | 102 cm   | 42 cm    | 30 cm     |
| 27591    | 106     | 106 cm   | 42 cm    | 30 cm     |



## Lumbo 073

LSO KorsettTygkorsett som passar för en midjesvängd figurtyp. Korsetten är försedd med dubbel Camp-snorring i vardera sidan, resårinfällningar upp- och nertill i sida fram samt öppna fjäderremсор i ryggen. Försluts med hakar och hyskor i främre sidsömmen.

**Användningsområden:** Ryggsmärta och rygginsufficiens.

**Övrigt:** Detta helfabrikat har 2 öppna kanaler i ryggen för extra skenor. Dessa skenor ingår ej. Storlek = Höftmått

| Art. nr. | Färg  | Storlek | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|-------|---------|----------|-----------|
| 29073    | Beige | 85 cm   | 30 cm    | 20,5 cm   |
| 29073    | Beige | 90 cm   | 30 cm    | 20,5 cm   |
| 29073    | Beige | 95 cm   | 30 cm    | 20,5 cm   |
| 29073    | Beige | 100 cm  | 30 cm    | 20,5 cm   |
| 29073    | Beige | 105 cm  | 30 cm    | 20,5 cm   |
| 29073    | Beige | 110 cm  | 30 cm    | 20,5 cm   |



## Kantband elastiskt

Ett elastiskt kantband för kantring av textila korsetter.

| Art. nr. | Färg  | Bredd | Längd | Förp. |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 25010    | Vit   | 20 mm | 175 m | Rulle |
| 25010    | Beige | 20 mm | 175 m | Rulle |



## Dragband

Stadigt dragband i nylongjord. Materialet är stabilt och ytan tillåter en vandsölja att glida utan motstånd. Den avklippta kanten försluts genom bränning.

| Art. nr. | Färg  | Bredd | Längd |
|----------|-------|-------|-------|
| 29715    | Vit   | 25 mm | 50 m  |
| 29715    | Beige | 25 mm | 50 m  |



## Trevikt list

Trevikt list i bomull för färdigställande av korsett. Används som skenficka.

| Art. nr. | Färg  | Bredd | Förp. |
|----------|-------|-------|-------|
| 25006    | Beige | 21 mm | 50 mm |





## Navy™ Xtra

Navy™ Xtra är en gördel som kan anpassas efter behandlingsmålet. Ortosen kan användas vid stabilisering efter operation men även som lätt stöd under rehabilitering. Genom den individuellt formade ryggplattan och korsettens förstärkta främre del stabiliseras ryggen och bidra till smärtlindring. Ryggplattan är tillverkad av 3D-LITE™ material. Denna lågtemperaturplast andas, har låg vikt och är enkel att bearbeta även till de mest krävande patienter. Förstärkningarna på ortosens framsida kan enkelt tas ut. Den svarta textilen är av samma stabila och ventilerande material som används i vår serie med ryggortoser under varumärket NavyX™.

**Användningsområden:** Frakturer, Post-OP-Stabilisering, Post-OP disk-kirurgi, Degenerativa tillstånd i ryggraden, Diskbråck, Bukande disk, Spondylolistes, Spondylolys, Facettsyndrom, spinal stenosis.

**Kontraindikationer:** Instabil ryggrad.

**Övrigt:** Denna produkt skall enbart anpassas av en medicinskt utbildad person. Ryggdelen av 3D-LITE material kan värmas i ugn eller med värmepistol vid ca 80°C.

| Art. nr. | Storlek  | Höftmått     | Höjd bak | Höjd fram |
|----------|----------|--------------|----------|-----------|
| 23563    | X-Small  | 75 - 85 cm   | 28 cm    | 16 cm     |
| 23563    | Small    | 85 - 95 cm   | 28 cm    | 16 cm     |
|          | Medium   | 95 - 105 cm  | 31 cm    | 16 cm     |
| 23563    | Large    | 105 - 115 cm | 31 cm    | 16 cm     |
| 23563    | X-Large  | 115 - 125 cm | 31 cm    | 16 cm     |
| 23563    | XX-Large | 125 - 135 cm | 31 cm    | 16 cm     |

## Hyperextensionsstöd C35+

Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder för postoperativ behandling som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och bröstvidd, har en vridbar bröstplatta med gradering som gör det enkelt att ställa in vinkeln. Den nedre bygeln kan ställas i rörligt eller fast läge. Justerbar ryggplatta.

**Användningsområden:** Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit

**Övrigt:** För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på [www.youtube.com](http://www.youtube.com) och sök efter Camp Scandinavia.

| Art. nr. | Modell                          | Storlek       | Höjd     | Höftmått   |
|----------|---------------------------------|---------------|----------|------------|
| 20355    | C35+                            | Small         | 39-48 cm | 74-86 cm   |
| 20355    | C35+                            | Medium        | 42-51 cm | 84-98 cm   |
| 20355    | C35+                            | Large         | 44-52 cm | 96-110 cm  |
| 20355    | C35+                            | X-Large       | 48-57 cm | 106-120 cm |
| 20351    | Extra bröstplatta               | En storlek    |          |            |
| 20352    | Extra ryggplatta                | Small/Medium  |          |            |
| 20352    | Extra ryggplatta                | Large/X-Large |          |            |
| 20354    | Extra band med spänne           | Small/Medium  |          |            |
| 20354    | Extra band med spänne           | Large/X-Large |          |            |
| 20356    | Polstring till övre bygeln fram |               |          |            |





## Hyperextensionsstöd C37

Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och vidd, har en vridbar höftplatta och justerbar ryggplatta. Den nedre bygeln är justerbar i vinkeln.

**Användningsområden:** Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit.

| Art. nr. | Modell                          | Storlek       | Höjd     | Höftmått  |
|----------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 20370    | C37                             | Small         | 43-50 cm | 76-94 cm  |
| 20370    | C37                             | Large         | 48-59 cm | 94-114 cm |
| 20351    | Extra bröstplatta               |               |          |           |
| 20352    | Extra ryggplatta                | Small/Medium  |          |           |
| 20352    | Extra ryggplatta                | Large/X-Large |          |           |
| 20354    | Extra band med spänne           | Small/Medium  |          |           |
| 20354    | Extra band med spänne           | Large/X-Large |          |           |
| 20356    | Polstring till övre bygeln fram |               |          |           |



## C35 Hydro

En hyperextensionskorsett som är tillverkad i ett vattentåligt material, och som därmed är passande för badterapi. Korsetten är justerbar i höjd och bröstvidd och har en vridbar bröstplatta. Bäckensbågen kan låsas i valfri position. Stängs med snabbspännen. Polstringen är utbyttbar.

**Användningsområden:** Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit. Avsedd för tillfällig användning vid badterapi.

| Art. nr. | Modell                 | Storlek    | Höjd       | Höftmått     |
|----------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 20358    | Hydro                  | Small      | 39 - 50 cm | 60 - 75 cm   |
| 20358    | Hydro                  | Medium     | 42 - 52 cm | 75 - 90 cm   |
| 20358    | Hydro                  | Large      | 45 - 59 cm | 90 - 105 cm  |
| 20358    | Hydro                  | X-Large    | 49 - 61 cm | 105 - 115 cm |
| 20359    | Extra polstring        | Small      |            |              |
| 20359    | Extra polstring        | Medium     |            |              |
| 20359    | Extra polstring        | Large      |            |              |
| 20359    | Extra polstring        | X-Large    |            |              |
| 20360    | Extra band med spännen | En storlek |            |              |

**Mått:** Höjd: Mät från bröstben till pubis.

## Cut-4-Custom LSO

Cut-4-Custom är en korsett i 3D-LITE™ material som består av en fram- och en baksektion (pre-cut) med förmonterade band. De formas enkelt direkt på patienten för att få en individuellt anpassad stabil korsett. Korsettarna finns i LSO och TLSO för att möta ordinationer och olika patient-anatomier. Hitta rätt storlek genom att ta mått på patienten och jämför med storleksschemat. Välj en framsektion och en baksektion.

**Användningsområden:** Post-operativt, kompressionsfrakturer och immobilisering av ryggraden.

| Art. nr. | Modell | Storlek  | Tjocklek | Höjd    | Omkrets      |
|----------|--------|----------|----------|---------|--------------|
| 64919    | Fram   | XS / S   | 5 mm     | 19,5 cm | 60 - 75 cm   |
| 64919    | Fram   | S / M    | 5 mm     | 19,5 cm | 70 - 90 cm   |
| 64919    | Fram   | M / L    | 7 mm     | 21,5 cm | 85 - 105 cm  |
| 64919    | Fram   | L / XL   | 7 mm     | 24,5 cm | 95 - 120 cm  |
| 64919    | Fram   | XL / XXL | 7 mm     | 27 cm   | 115 - 140 cm |
| 64921    | Bak    | XS / S   | 5 mm     | 30 cm   | 60 - 75 cm   |
| 64921    | Bak    | S / M    | 5 mm     | 31,5 cm | 70 - 90 cm   |
| 64921    | Bak    | M / L    | 7 mm     | 33,5 cm | 85 - 105 cm  |
| 64921    | Bak    | L / XL   | 7 mm     | 35 cm   | 95 - 120 cm  |
| 64921    | Bak    | XL / XXL | 7 mm     | 36,5 cm | 115 - 140 cm |



**Mått:** Storleken bestäms av midjemått. Tag måttet något åtdraget. Mät även avsedd höjd fram och bak enligt anvisningarna. Välj storlek från tabellen.

## Cut-4-Custom TLSO

Cut-4-Custom är en korsett i 3D-LITE™ material som består av en fram- och en baksektion (pre-cut) med förmonterade band. De formas enkelt direkt på patienten för att få en individuellt anpassad stabil korsett. Korsettarna finns i LSO och TLSO för att möta ordinationer och olika patient-anatomier. Hitta rätt storlek genom att ta mått på patienten och jämför med storleksschemat. Välj en framsektion och en baksektion.

**Användningsområden:** Post-operativt, kompressionsfrakturer och immobilisering av ryggraden.


| Art. nr. | Modell | Storlek  | Tjocklek | Höjd  | Omkrets      |
|----------|--------|----------|----------|-------|--------------|
| 64922    | Fram   | S / M    | 5 mm     | 42 cm | 70 - 90 cm   |
| 64922    | Fram   | M / L    | 5 mm     | 48 cm | 85 - 110 cm  |
| 64922    | Fram   | L / XL   | 7 mm     | 48 cm | 105 - 135 cm |
| 64922    | Fram   | XL / XXL | 7 mm     | 54 cm | 105 - 135 cm |
| 64923    | Bak    | S / M    | 5 mm     | 42 cm | 70 - 90 cm   |
| 64923    | Bak    | M / L    | 5 mm     | 48 cm | 85 - 110 cm  |
| 64923    | Bak    | L / XL   | 7 mm     | 48 cm | 105 - 135 cm |
| 64923    | Bak    | XL / XXL | 7 mm     | 54 cm | 105 - 135 cm |



**Mått:** Storleken bestäms av midjemått. Tag måttet något åtdraget. Mät även avsedd höjd fram och bak enligt anvisningarna. Välj storlek från tabellen.

# MÅTTINSTRUKTIONER

## 3D-LITE™ Cut-4-Custom LSO & TLSO

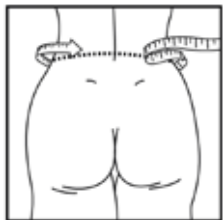

### Storlek

Storleken bestäms av midjemått. Tag måttet något åtdraget. Mät även avsedd höjd fram och bak enligt anvisningarna. Välj storlek från tabellen.

|      | Beskrivning  | Omkrets i cm |     | Total höjd fram i cm | Total höjd bak i cm |
|------|--------------|--------------|-----|----------------------|---------------------|
|      |              | min          | max |                      |                     |
| LSO  | LSO, XS/S    | 60           | 75  | 19,5                 | 30                  |
|      | LSO, S/M     | 70           | 90  | 19,5                 | 31,5                |
|      | LSO, M/L     | 85           | 105 | 21,5                 | 33,5                |
|      | LSO, L/XL    | 95           | 120 | 24,5                 | 35                  |
|      | LSO, XL/XXL  | 115          | 140 | 27                   | 36,5                |
| TLSO | TLSO, S/M    | 70           | 90  | 42                   | 42                  |
|      | TLSO, M/L    | 85           | 110 | 48                   | 48                  |
|      | TLSO, L/XL   | 105          | 135 | 48                   | 48                  |
|      | TLSO, XL/XXL | 105          | 135 | 54                   | 54                  |



LSO fram



LSO bak





TLSO fram



TLSO bak

Dessa illustrationer visar den ungefärliga höjden för de två modellerna, LSO och TLSO.

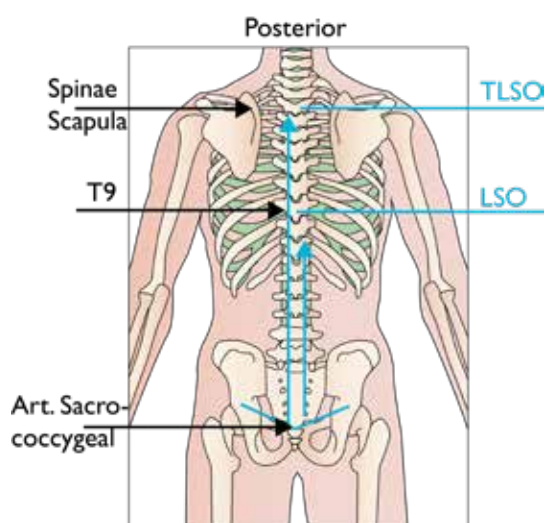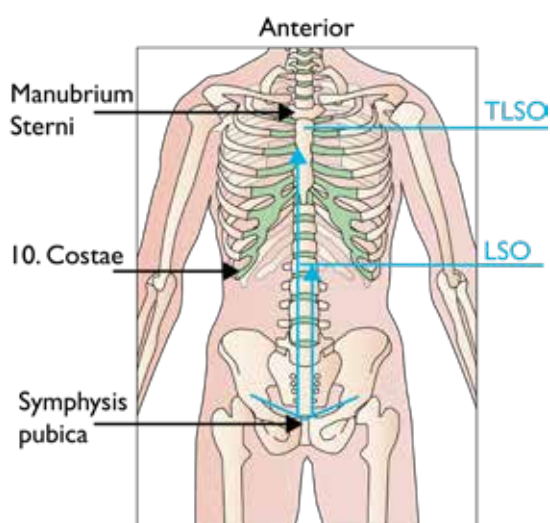

## BOSTON Overlap Brace

Prefabricerad korsett speciellt framtagen för behandling av kronisk eller tillfällig ländryggssmärta. Korsetten finns i 20 standardstorlekar och i flera olika tjocklekar och olika lordosgrader. Kan även beställas efter mått eller gipsavgjutning. Välj mellan polstrad och opolstrad. Modulen är tillverkad av polyeten. Skall användas tillsammans med linne. Band och D-ring ingår till varje korsett.

**Användningsområden:** Ländryggssmärta, spondylolistes, spondylit, osteoporos, pre- och postoperativt, spinal stenos och frakturer.

**Övrigt:** Korsetten kan endast beställas i vit polyeten. Använd storlekstabellen för standardstorlekar. För måttbeställda korsetter fyll i Beställningsformulär. Tillverkningsmanualer och studier finns att beställa från Kundsupport.

| Art. nr. | Modell                     | Tjocklek |
|----------|----------------------------|----------|
| 29690    | Standardmodul 15°          | 1,5 mm   |
| 29694    | Standardmodul 30°          | 3 mm     |
| 29695    | Standardmodul 15°          | 3 mm     |
| 29697    | Måttbeställd polstrad      | 3 mm     |
| 29698    | Standardmodul polstrad 15° | 3 mm     |
| 29696    | Ryggfjädrar 20 cm          |          |
| 29696-1  | Ryggfjädrar 25,5 cm        |          |
| 29696-2  | Ryggfjädrar 30,5 cm        |          |
| 29696-3  | Ryggfjädrar 35,5 cm        |          |





## BOSTON LITE™

Boston LITE™ är en vidareutveckling av "Soft Brace", som funnits på marknaden under många år. Nya tekniker har gjort det möjligt att skapa en korsett som är både tunnare och mer ventilerad men med samma stabilitet. Boston LITE har fått en del nya funktioner. Genom att förstärkningsmaterialet "bakas" in i plasten är det möjligt att göra hål i den mjukare plasten som finns mellan de olika förstärkningssegmenten. Korsetten levereras med en separat innerdel som tillverkas av en "3D-Spacer"-väv. Denna tillåter fukt och värme att absorberas så att huden hålls svalare och torrare, samtidigt som den fungerar som en polstring och fördelar trycket mot kroppen. Innerdelen används istället för ett vanligt linne. För en mer kosmetisk design har nya spännen utvecklats med en låg-profil och ett smidigare utseende.

**Användningsområden:** Neuromuskulära Skolioser, hållningskontroll och postoperativt stöd.

**Övrigt:** Denna korsett kan beställas i samma färger som Boston Soft Body Jacket. Kontakta Kundsupport för färgprover. Boston LITE finns enbart med öppning bak. Storlekarna för Boston LITE Liner täcker in 2 storlekar av modulen (J1 / J2 = storlek 1, J3 / J4 = storlek 2) "Boston LITE Måttbeställd (29726 och 29728) kan enbart fås i samma storleksomfång som standardstorlekarna J1 – Y4F, med 15 graders lordos och öppning bak." Till varje korsett ingår 1 st liner. Ytterligare liners kan beställas separat. En speciell bandlösning med spännen ingår.

| Art. nr. | Modell              | Beskrivning            | Storlek      | Lordosgrad |
|----------|---------------------|------------------------|--------------|------------|
| 29725    | Boston LITE Korsett | Modul, ej färdigställd | J1 - Y4F     | 15°        |
| 29726    | Boston LITE Korsett | Modul, ej färdigställd | Måttbeställd | 15°        |
| 29728    | Boston LITE Korsett | Färdigställd           | Måttbeställd | 15°        |
| 29729    | Boston LITE Korsett | Färdigställd           | J1 - Y4F     | 15°        |
| 29730    | Separat liner       | (se under Mått)        | 1 - 6        |            |
| 29731    | Extra band          | Set av 3 band/spännen  | En storlek   |            |
| 29732    | Plastspänne         |                        |              |            |



## BOSTON Soft Body Jacket

Prefabricerad korsett avsedd för patienter med nedsatt muskelstyrka, svag bålkontroll eller som av andra anledningar inte klarar en rigid ortos. Modulen är tillverkad av hårdare polyetenfoam på utsidan samt mjukare polyetenfoam på insidan. Standardmodulen, finns i 30 storlekar, är vit, har 15° lordos, öppning bak samt öppna kanaler. Kan beställas i olika färger, lordoser, öppna eller slutna kanaler samt efter mått. Skall användas tillsammans med linne. Band och D-ring ingår till varje korsett.

**Användningsområden:** Neuromuskulära scolioser, hållningskontroll och postoperativt stöd.

**Övrigt:** Denna korsett kan beställas i flera olika färger som framgår av Beställningsformuläret. Kontakta Kundsupport för färgprover. Den kan även beställas med en extern ram som har heltäckande mönster från "Mönsterlistan". Vid beställning av BSBJ med extern ram är grundmaterialet alltid vitt. Den kan även beställas med små transfermönster från "Boston Transfer listan". Kontakta Kundsupport för mer information och prover. Använd storlekstabellen för standardstorlekar. För måttbeställda korsetter fyll i Beställningsformulär. Tillverkningsmanualer och studier finns att beställa från Kundsupport.

| Art. nr. | Modell          | Typ            | Lordosgrad |
|----------|-----------------|----------------|------------|
| 29707    | Standardmodul   | Öppna kanaler  | 15°        |
| 29708    | Måttbeställd    | Öppna kanaler  |            |
| 29709    | Standardmodul   | Slutna kanaler | 15°        |
| 29710    | Måttbeställd    | Slutna kanaler |            |
| 29700    | Med ram         |                |            |
| 29719    | Band med spänne | 5 cm x 30,5 cm |            |



## BOSTON Body Jacket

Body Jacket tillverkad av LDPE (low density polyeten) är avsedd för immobilisering av ryggraden. Kan beställas efter mått eller gipsavgjutning. Skall användas tillsammans med linne. Band ingår ej.

**Användningsområden:** Postoperativt, kompressionsfrakturer och immobilisering av ryggraden.

**Övrigt:** Korsetten kan endast beställas i vit Polyeten (LDPE). Den kan beställas med heltäckande mönster från "Mönsterlistan". Den kan även beställas med små transfermönster från "Boston Transfer listan". Kontakta Kundsupport för mer information och prover. Använd storlekstabellen för standardstorlekar. För måttbeställda korsetter fyll i Beställningsformulär.

| Art. nr. | Modell                       |
|----------|------------------------------|
| 29701    | Måttbeställd                 |
| 29699    | Tillägg Färdigställd korsett |





## BOSTON Skolioskorsett

Väldokumenterad prefabricerad korsett för scoliosbehandling. Finns i 30 standardstorlekar i 0° eller 15° lordos, men kan även beställas efter mått eller gipsavgjutning. Modulen är tillverkad av polypropen som polstrats med polyetenfoam. Korsetten skall användas tillsammans med linne. Band och spännen ingår ej.

**Användningsområden:** Idiopatiska skolioser.

**Övrigt:** Korsetten kan endast beställas i vit Polypropen. Den kan beställas med heltäckande mönster från "Mönsterlistan". Den kan även beställas med små transfermönster från "Boston Transfer listan". Kontakta Kundsupport för mer information och prover. Använd storlekstabellen för standardstorlekar. För måttbeställda korsetter fyll i Beställningsformulär. Tillverkningsmanualer och studier finns att beställa från Kundsupport.

| Art. nr. | Modell        | Tjocklek | Lordosgrad |
|----------|---------------|----------|------------|
| 29705    | Standardmodul | 4,5 mm   | 15°        |
| 29706    | Standardmodul | 4,5 mm   | 0°         |
| 29704    | Måttbeställd  | 4 mm     |            |



## BOSTON Skoliosis Night Brace

Skolioskorsett avsedd att användas på natten. Korsetten ska användas minst 7 timmar/natt. Modulen är tillverkad av 3 mm copolymer och finns i två olika utföranden. En med avtagbar polstring och en med permanent polstring. Korsetten skall användas tillsammans med linne. Band och spännen ingår.

**Användningsområden:** Denna produkt är avsedd för behandling av idiopatisk skolios enligt följande riktlinjer; Mindre kurvstorlek: Cirka 25° - 45° Cobb-vinkel; Skelett omogna (Riser 0-3); Apex upp till maximalt Th9; Dubbla kurvaturer kan behandlas men kräver högre kompetensnivå. Det viktiga elementet i behandlingen av dubbla kurvaturer är förmågan att identifiera de primära och sekundära krökarna. Vid behandling av en dubbel-kurvatur bör den primära vara den Thorakala. Om det är den Lumbala kröken som är den primära kontakta oss för vidare rådgivning.

**Övrigt:** Korsetten kan endast beställas i vit Copolymer. Den kan beställas med heltäckande mönster från "Mönsterlistan". Vid beställning av heltäckande mönster är alltid innermaterialet vitt. Den kan även beställas med små transfermönster från "Boston Transfer listan". Kontakta Kundsupport för mer information och prover. Använd Beställningsformuläret vid måttbeställningen. Tillverkningsmanual finns att beställa från Kundsupport.

| Art. nr. | Modell                                   | Typ          |
|----------|------------------------------------------|--------------|
| 29720    | Färdigställd - med avtagbar polstring    | Måttbeställd |
| 29721    | Ej färdigställd - med avtagbar polstring | Måttbeställd |
| 29722    | Färdigställd - permanent polstring       | Måttbeställd |
| 29723    | Ej färdigställd - permanent polstring    | Måttbeställd |

## BOSTON korsett tillbehör

Här finner du olika tillbehör för färdigställande av Boston Skoliosmoduler. Det är förstärkningsset främre och bakre, svetstråd och pelotter.


| Art. nr. | Modell                     | Storlek    | Bredd | Längd | Vä/Hö |
|----------|----------------------------|------------|-------|-------|-------|
| 29711    | Förstärkningsset Anterior  | En storlek |       |       |       |
| 29711    | Förstärkningsset Posterior | En storlek |       |       |       |
| 29713    | Svetstråd plast            |            | 3 mm  | 1,2 m |       |
| 29713    | Svetstråd plast            |            | 5 mm  | 1,2 m |       |
| 29715    | Dragband vit               |            | 25 mm | 50 m  |       |
| 29715    | Dragband beige             |            | 25 mm | 50 m  |       |
| 29750    | Elastiskt material, vit    |            | 20 cm | 1 m   |       |
| 29753    | Lumbar pad                 | Small      |       |       | Vä/Hö |
| 29573    | Lumbar pad                 | Large      |       |       | Vä/Hö |
| 29573    | Lumbar pad                 | Small      |       |       |       |
| 29573    | Lumbar pad                 | Large      |       |       |       |
| 29757    | Abdominal pad              | Medium     |       |       |       |
| 29757    | Abdominal pad              | Large      |       |       |       |



## Boston Brace Mönster och Transfers

För olika Boston korsetter finns det mönster och transfers att välja. Dessa kan enbart väljas för måttbeställda korsetter. Inte för standardmoduler som lagerhålls. Dessa gäller för Boston Soft Body Jacket, Boston Body Jacket, Boston Scolioskorsett och Boston Night Brace.

| Art. nr. | Modell                           |
|----------|----------------------------------|
| 29716    | Transfer lösa                    |
| 29717    | Transfer monterade på korsett    |
| 29718    | Helt mönster monterat på korsett |

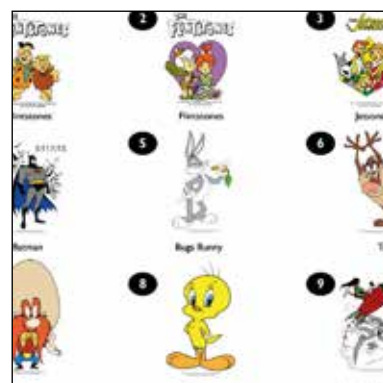

## Boston T-Linne Vit

Detta 2-ply Boston T-linne har rund hals och är helt sömlöst vilket gör det perfekt under en rigid ryggortos. Elasticiteten ger en skrynelfri och tight passform under korsetten. Den är tillverkad av CoolMAX® och Elastan vilket gör att den är sval på sommaren och varm på vintern. Den här modellen har dubbla vingar under armarna för att skydda armhålan. Materialet är fritt från Silver och latex samt är antistatiskt. Tillverkat i enlighet med Öko-Tex Standard 100, Class II.

| Art. nr. | Storlek | Längd | Omkrets    | Vidd    | Axillastöd |
|----------|---------|-------|------------|---------|------------|
| 29764    | Small   | 46 cm | 40-61 cm   | 14 cm   | Två sidor  |
| 29764    | Medium  | 52 cm | 61-81 cm   | 20 cm   | Två sidor  |
| 29764    | Large   | 65 cm | 81-102 cm  | 25 cm   | Två sidor  |
| 29764    | X-Large | 65 cm | 102-122 cm | 30,5 cm | Två sidor  |



NYHET!



# Storleksschema för Bostonkorsetter

**Storlekstabell B.O.B**

| Storlek | Höft i cm | Midja i cm | Bröst i cm |
|---------|-----------|------------|------------|
| 1       | 71        | 51         | 66         |
| 1D      | 71        | 45         | 58,5       |
| 2       | 76        | 45         | 58,5       |
| 2D      | 76        | 51         | 63,5       |
| 3       | 81        | 71         | 76         |
| 3D      | 81        | 66         | 74         |
| 4       | 86,5      | 76         | 84         |
| 4D      | 86,5      | 58,5       | 69         |
| 5       | 91,5      | 81         | 89         |
| 5D      | 91,5      | 66         | 76         |
| 6       | 96,5      | 86,5       | 94         |
| 6D      | 96,5      | 74         | 84         |
| 7       | 101,5     | 91,5       | 99         |
| 7D      | 101,5     | 81         | 91,5       |
| 8       | 109       | 96,5       | 109        |
| 8D      | 109       | 84         | 91,5       |
| 9       | 114       | 100        | 114        |
| 9D      | 114       | 87         | 94         |
| 10      | 117       | 104        | 117        |
| 10D     | 117       | 96         | 101        |

**Storlekstabell Flexaform**

| Storlek | Höft i cm | Midja i cm | Bröst i cm |
|---------|-----------|------------|------------|
| LS1     | 79        | 60         | 71         |
| LS2     | 82        | 65         | 76         |
| LS3     | 85        | 63         | 75         |
| LS4     | 87        | 69         | 82         |
| LS5     | 90        | 68         | 80         |
| LS6     | 92        | 75         | 88         |
| LS7     | 95        | 74         | 85         |
| LS8     | 97        | 83         | 94         |
| LS9     | 100       | 80         | 90         |
| LS10    | 102       | 87         | 99         |
| LS11    | 105       | 87         | 95         |
| LS12    | 107       | 93         | 104        |

**Storlekstabell Scolios och Soft Body Jacket**

| Storlek | Höft i cm | Midja i cm | Bröst i cm |
|---------|-----------|------------|------------|
| J1      | 54        | 40         | 49         |
| J2      | 58        | 42         | 51         |
| J3      | 62        | 45         | 54         |
| J4      | 64        | 47         | 56         |
| Y1A     | 66        | 51         | 55         |
| Y1      | 67        | 46         | 56         |
| Y2      | 71        | 47         | 60         |
| Y2A     | 72        | 55         | 62         |
| Y3      | 75        | 48         | 63         |
| Y3A     | 78        | 57         | 69         |
| Y4      | 79        | 51         | 64         |
| Y4F     | 80        | 57         | 66         |
| Y5      | 82        | 52         | 68         |
| Y5F     | 82        | 58         | 68         |
| Y6      | 84        | 56         | 73         |
| Y6A     | 84        | 63         | 78         |
| Y7      | 86        | 54         | 69         |
| Y7F     | 86        | 60         | 69         |
| Y7A     | 86        | 69         | 73         |
| Y8      | 88        | 58         | 75         |
| Y8F     | 88        | 64         | 75         |
| Y8A     | 90        | 72         | 83         |
| Y9      | 92        | 60         | 72         |
| Y9A     | 92        | 63         | 69         |
| Y9F     | 92        | 68         | 78         |
| A1      | 94        | 62         | 76         |
| A2      | 94        | 70         | 84         |
| A2A     | 96        | 66         | 75         |
| A3      | 97        | 68         | 80         |
| A4      | 97        | 76         | 88         |

**Storleksschema Boston LITE**

| Storlek | Höft i cm | Midja i cm | Bröst i cm |
|---------|-----------|------------|------------|
| 15J1    | 54        | 40         | 49         |
| 15J2    | 58        | 42         | 51         |
| 15J3    | 62        | 45         | 54         |
| 15J4    | 64        | 47         | 56         |
| 15Y1    | 67        | 46         | 56         |
| 15Y1A   | 66        | 51         | 55         |
| 15Y2    | 71        | 47         | 60         |
| 15Y2A   | 72        | 55         | 62         |
| 15Y3    | 75        | 48         | 63         |
| 15Y3A   | 78        | 57         | 69         |
| 15Y4    | 79        | 51         | 64         |
| 15Y4F   | 80        | 57         | 66         |



# Ortoskomponenter

[www.camp.se](http://www.camp.se)



## ShearBan®

ShearBan® är ett självhäftande PTFE-material utvecklat för att reducera friktionskrafterna i ortos och proteskonstruktioner. ShearBan gör att friktionskoefficienten kan minskas på områden där risken för hudirritation, sårbildning o.s.v. är stor. ShearBan materialet är konstruerat för anpassad trimning och placering på skor, innersulor, ortoser och proteshylsor. Materialet appliceras på produkten och inte mot huden. ShearBan täcklappar är användbart som täckmaterial över skruvar, nitar eller andra områden där material sammanfogats eller har ojämnheter. Täcklapparna finns i två storlekar och i Beige eller Svart. Plattorna finns enbart i klarblå färg. Produkten är testad för de specifika användningsområdena.

**Användningsområden:** ShearBan materialet är konstruerat för anpassad trimning och placering på skor, innersulor, ortoser och proteshylsor.

| Art. nr. | Färg  | Storlek         | Förp.   |
|----------|-------|-----------------|---------|
| 38498    | Beige | 24 mm           | 84/fp   |
| 38499    | Svart | 24 mm           | 84/fp   |
| 38502    | Beige | 19 mm           | 138/fp  |
| 38503    | Svart | 19 mm           | 138/fp  |
| 38500    | Blå   | 225 mm x 300 mm | 5 ark   |
| 38501    | Blå   | 225 mm x 300 mm | 1 styck |



## Kid-Dee-Lite™

Marknadens minsta, inställbara ankelled för barn. Leden väger 20 gram och är tillverkad av aluminium. Den möjliggör tidig mobilisering speciellt för barn med neuromuskulära skador. Inställbart rörelseomfång i 20° plantarflexion till 20° dorsalflexion. Kan användas både med raka eller böjda skenor. Levereras komplett med ledpinne och övriga tillbehör som behövs vid tillverkning och montering. Leden är avsedd för barn under 5 år. Patientvikt max. 25 kg, patientlängd max. 120 cm. Max belastning är 15 Nm.

**Användningsområden:** Vid dynamiska behandlingar där ett begränsat rörelseomfång krävs för att förhindra kontrakturer.

**Kontraindikationer:** Totalt känselbortfall.

**Övrigt:** Tillverkningsinstruktion finns i förpackningen.

| Art. nr. | Material          | Storlek    | Förp. |
|----------|-------------------|------------|-------|
| 62200    | Polerad aluminium | En storlek | 1 par |

## Binky universalled

En universalled, utan flexion-/extensionstopp, avsedd att användas parvis vid tillverkning av ortoser i termoplast eller separat som frirörlig led. Binky-lederna är lämpliga för både barn och vuxna i ortoser för handled, armbåge och fotled. Binky finns i två storlekar. Storlek Small skall användas till mindre leder och storlek Large skall användas till större leder. Ansvarig läkare ordinerar ortosen och avgör behandlingslängden.

**Användningsområden:** Paralytiskt syndrom.

**Övrigt:** Binky finns i två storlekar. Storlek Small skall användas till mindre leder (viktbelastning 35 kg).

| Art. nr. | Bredd | Längd | Tjocklek | Förp. |
|----------|-------|-------|----------|-------|
| 69688    | 12 mm | 62 mm | 2,5 mm   | 1 par |
| 69688    | 18 mm | 76 mm | 2,5 mm   | 1 par |



## Ankelled i Polyuretan

Polyuretanled för tillverkning av termoplastortoser. Ankelleder finns i två olika utföranden. Den dorsalflekterade modellen finns i ett flertal olika storlekar och hårdheter. Högre hårdhet ger starkare dorsalflexion.

| Art. nr. | Modell             | Hårdhet | Storlek           | Förp. |
|----------|--------------------|---------|-------------------|-------|
| 62775    | Flexibel ankelled  |         | Barn              | 1 par |
| 62775    | Flexibel ankelled  |         | Vuxen             | 1 par |
| 62776    | Dorsiflex ankelled | 0,5 kg  | Barn Silver       | 1 par |
| 62776    | Dorsiflex ankelled | 1 kg    | Barn Transparent  | 1 par |
| 62776    | Dorsiflex ankelled | 1,5 kg  | Barn Guld         | 1 par |
| 62776    | Dorsiflex ankelled | 0,5 kg  | Vuxen Silver      | 1 par |
| 62776    | Dorsiflex ankelled | 1 kg    | Vuxen Transparent | 1 par |
| 62776    | Dorsiflex ankelled | 1,5 kg  | Vuxen Guld        | 1 par |







## Tamarack

Självriktande led i två olika utföranden; Flexure - rak och Flexure med Dorsiflexion Assist - böjd. Tillverkad av polyuretan med en förstärkt kärna som minskar töjning av materialet. Tamarackleden finns i tre hårdheter, 75, 85 och 95, varav 95 ger mer lyft.

**Användningsområden:** Ortosapplikationer som armbåge, handled, barnknäortoser samt ankel-fotortoser.

**Övrigt:** Tillverkningsinstruktion finns i förpackningen.

| Art. nr. | Modell                                      | Hårdhet | Storlek | Förp. |
|----------|---------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 62730    | Flexure rak svart                           |         | Barn    | 1 par |
| 62730    | Flexure rak svart                           |         | Medium  | 1 par |
| 62730    | Flexure rak svart                           |         | Large   | 1 par |
| 62732    | Flexure med Dorsiflexion assist svart       | 75      | Barn    | 1 par |
| 62732    | Flexure med Dorsiflexion assist svart       | 75      | Medium  | 1 par |
| 62732    | Flexure med Dorsiflexion assist svart       | 75      | Large   | 1 par |
| 62732    | Flexure med Dorsiflexion assist svart       | 85      | Barn    | 1 par |
| 62732    | Flexure med Dorsiflexion assist svart       | 85      | Medium  | 1 par |
| 62732    | Flexure med Dorsiflexion assist svart       | 85      | Large   | 1 par |
| 62732    | Flexure med Dorsiflexion assist svart       | 95      | Barn    | 1 par |
| 62732    | Flexure med Dorsiflexion assist svart       | 95      | Medium  | 1 par |
| 62732    | Flexure med Dorsiflexion assist svart       | 95      | Large   | 1 par |
| 62740    | Flexure rak transparent                     |         | Barn    | 1 par |
| 62740    | Flexure rak transparent                     |         | Medium  | 1 par |
| 62740    | Flexure rak transparent                     |         | Large   | 1 par |
| 62742    | Flexure med Dorsiflexion assist transparent | 75      | Barn    | 1 par |
| 62742    | Flexure med Dorsiflexion assist transparent | 75      | Medium  | 1 par |
| 62742    | Flexure med Dorsiflexion assist transparent | 75      | Large   | 1 par |
| 62742    | Flexure med Dorsiflexion assist transparent | 85      | Barn    | 1 par |
| 62742    | Flexure med Dorsiflexion assist transparent | 85      | Medium  | 1 par |
| 62742    | Flexure med Dorsiflexion assist transparent | 85      | Large   | 1 par |
| 62742    | Flexure med Dorsiflexion assist transparent | 95      | Barn    | 1 par |
| 62742    | Flexure med Dorsiflexion assist transparent | 95      | Medium  | 1 par |
| 62742    | Flexure med Dorsiflexion assist transparent | 95      | Large   | 1 par |
| 62741    | Dummy                                       |         | Barn    | 1 par |
| 62741    | Dummy                                       |         | Medium  | 1 par |
| 62741    | Dummy                                       |         | Large   | 1 par |
| 62748    | Hållare för extern montering                |         | Barn    | 1 par |
| 62748    | Hållare för extern montering                |         | Medium  | 1 par |
| 62748    | Hållare för extern montering                |         | Large   | 1 par |



## Tamarack verktyg

Tamarack Hand Punch: Används för att göra hål i plasten. Tamarack Spanner Wrench: Parallellverktyg. Tamarackleder i en redan befintlig ortos.

**Övrigt:** Tillverkningsinstruktion finns i förpackningen.

| Art. nr. | Modell         | Storlek      |
|----------|----------------|--------------|
| 62744    | Hand Punch     | Barn         |
| 62744    | Hand Punch     | Medium       |
| 62744    | Hand Punch     | Large        |
| 62745    | Spanner Wrench | Barn         |
| 62745    | Spanner Wrench | Medium/Large |



## Camber Axis

Extra stark ankelled av rostfritt stål för krävande applikationer. Rörelseområdet ställs enkelt in i plantar- eller dorsalflexion med hjälp av justeringsplattor. Dessa finns i olika färger för olika omfång.

Silver= 0°. Låst.

Röd= 5°. Låst i plantar- eller dorsalflexion.

Blå= 10°. Låst i plantar- eller dorsalflexion.

Lila= 15°. Låst i plantar- eller dorsalflexion.

Grön= 0°-30°. Begränsat rörelseomfång i plantar- eller dorsalflexion.

Svart= 5°-10°. Begränsat rörelseomfång i plantar- eller dorsalflexion.

Gul= 7,5°-10°. Begränsat rörelseomfång i plantar- eller dorsalflexion.



**Övrigt:** Tillverkningsinstruktion finns i förpackningen. Samtliga justeringsplattor ingår i förpackningen.

| Art. nr. | Storlek | Förp. | Vikt           |
|----------|---------|-------|----------------|
| 62750    | Small   | 1 par | 36-45 kg       |
| 62750    | Medium  | 1 par | upp till 72 kg |
| 62750    | Large   | 1 par | upp till 99 kg |



## Oklahoma

Ankelleder i nylon eller polypropen för rörelsekontroll. Nylon-leden är lämplig för högaktiva patienter.

**Övrigt:** Tillverkningsinstruktion finns i förpackningen.

| Art. nr. | Modell     | Storlek | Förp. |
|----------|------------|---------|-------|
| 62760    | Polypropen | Barn    | I     |
| 62760    | Polypropen | Small   | I     |
| 62760    | Polypropen | Medium  | I     |
| 62760    | Polypropen | Large   | I     |
| 62760    | Polypropen | X-Large | I     |



## Ankelled Dubbel Kompakt

En ankelled som levereras med en sprint i den främre kanalen och en fjäder i den bakre kanalen för att tillåta normal gång och initial kontakt såväl som att ge maximal kontroll och stabilitet av knä och höft. Ankelled Dubbel Kompakt är avsedd för både lättare vuxna- och barnpatienter. Extra sprintar och fjädrar ingår.

**Övrigt:** Maxvikt 72 kg. 62726/27 passar till skenor 5 x 13 mm.

| Art. nr. | Modell                       | Material       | Storlek    |
|----------|------------------------------|----------------|------------|
| 62724    | Ankelled MED proximal skena  | Rostfritt stål | En storlek |
| 62725    | Ankelled MED proximal skena  | Aluminium      | En storlek |
| 62726    | Ankelled UTAN proximal skena | Rostfritt stål | En storlek |
| 62727    | Ankelled UTAN proximal skena | Aluminium      | En storlek |



## Slim Line Double Action ankelled

Ankelled som enkelt kan ställas i önskad plantar-dorsal flexion. Leden har ett rakt infäste för skenan. Används med fördel tillsammans med "Knäled stegvis låsbar" och "Knäled med bygellås" som ingår i modulsystemet för helbensortoser samt till SafetyStride och FullStride. Leden finns i både rostfritt stål och aluminiumutförande.

| Art. nr. | Modell                    | Material       | Storlek    | Passar till skenor |
|----------|---------------------------|----------------|------------|--------------------|
| 62778    | Ankelled Double Action AL | Aluminium      | En storlek | 19 mm              |
| 62777    | Ankelled Double Action RS | Rostfritt stål | En storlek | 19 mm              |
| 62778    | Ankelled Double Action AL | Aluminium      | En storlek | 16 mm              |
| 62777    | Ankelled Double Action RS | Rostfritt stål | En storlek | 16 mm              |

## Slim Line Y-bygel

Y-bygel för fotdelen. Används tillsammans med Slim Line Double Actions ankelled för att kontrollera foten i plantar-dorsalflexion.

**Övrigt:** Passa till led/öppning invändigt mått

| Art. nr. | Material       | Storlek | Mått   |
|----------|----------------|---------|--------|
| 62772    | Rostfritt stål | Vuxen   | 3,2 mm |
| 62773    | Rostfritt stål | Barn    | 2,4 mm |



# TRIPLE ACTION®

Inriktning, R.O.M. (rörelseomfång) och motstånd plantart och/eller dorsalt, justeras helt oberoende av varandra, vilket ger en unik möjlighet att tillgodose kravet på finjustering genom gångcyklens olika faser. De kraftiga fjädrarna och den smidiga inställningen gör det enklare att möta patientens behov genom hela rehabiliteringsfasen. Lederna har fjädrar som klarar ett högt vridmoment och tre enkla inställningar säkerställer önskad funktion. Triple Action-lederna underlättar effektiv behandling vid olika biomekaniska funktionsnedsättningar i samband med neurologiska skador.



**Adult 2.0 Ankle Joint**  
(19mm Systems)



**Small Adult Ankle Joint**  
(16mm Systems)



**Pediatric Ankle Joint**  
(13mm Systems)

## Triple Action® komponentselektering

| Patientvikt     | Kg               | 15 | 45 | 55 | 80 | 90 | 100 |
|-----------------|------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Ledtyp          | Leder (Boosters) |    |    |    |    |    |     |
| Barn<br>13 mm   | 1 (0)            |    |    |    |    |    |     |
|                 | 2 (0)            |    |    |    |    |    |     |
| Mellan<br>16 mm | 1 (0)            |    |    |    |    |    |     |
|                 | 1 (1-2)          |    |    |    |    |    |     |
|                 | 2 (0)            |    |    |    |    |    |     |
|                 | 2 (1-4)          |    |    |    |    |    |     |
| Vuxen<br>19 mm  | 1 (0)            |    |    |    |    |    |     |
|                 | 1 (1)            |    |    |    |    |    |     |
|                 | 2 (0)            |    |    |    |    |    |     |
|                 | 2 (1-2)          |    |    |    |    |    |     |

## Triple Action® ankelled för barn

En ankelled utvecklad för barn. Ledens unika fjädringssystem gör den extra hållbar även för de mest aktiva barnen. Enkel anpassning och inriktning direkt på patienten. Justera i gångcykeln där det behövs. Välj mellan olika fjädringsalternativ. Komponenterna som har en hög materialstyvhet ger funktion genom hela gångcykeln och exceptionell prestanda. Triple Action för barn passar till 13 mm skenor.

**Användningsområden:** Vid behandling av olika funktionsnedsättning i samband med neurologiska skador: Crouch Gång, Plantarflexions-kontrakturer, Quadriceps svaghet, Spasticitet och som tillägg vid Botox®-behandling, postoperativ immobilisering vid akillesförlängning eller mobilisering av den spastiska fotleden. n. Unilateral MAX 40 kg, Bilateral MAX 50 kg.

**Kontraindikationer:** Vid led med monolateral konstruktion (led enbart på lateralsidan) skall inte TripleAction Pediatric väljas. Önskas monolateral konstruktion välj TripleAction Ankelled Mellan.



| Art. nr. | Modell                                  | Vä/Hö                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62707    | Ankelled utan booster                   | Bilateral                                                                                         |
| 62670    | Ankelled med en booster                 | Plantar Booster=Vänster medial/Höger lateral eller Dorsal<br>Booster=Vänster lateral/Höger medial |
| 62671    | Ankelled med en booster                 | Dorsal Booster=Vänster medial/Höger lateral eller Plantar<br>Booster=Vänster lateral/Höger medial |
| 62672    | Ankelled med plantar och dorsal booster | Bilateral                                                                                         |
| 62673    | Distal skena lateral                    | Bilateral                                                                                         |
| 62674    | Distal skena medial                     | Vä/Hö                                                                                             |
| 62675    | Distal Y-skena lång                     | Bilateral                                                                                         |
| 62676    | Distal rak skena                        | Bilateral                                                                                         |
| 62709    | Verktyskit för tillverkning             |                                                                                                   |
| 62722    | Kombinationsnyckel Barn                 |                                                                                                   |



## Triple Action® ankelled mellan

Triple Action "Small Adult" är avsedd för 16 mm skenor och designats för att ge mest möjliga aktiva kontroll genom gångcyklens alla faser. De kraftiga fjädrarna och den smidiga inställningen gör det enklare att möta patientens behov genom hela rehabiliteringsfasen. Leden har fjädrar som klarar ett högt vridmoment och tre enkla inställningar säkerställer önskad funktion. Triple Action-leden underlättar effektiv behandling vid olika biomekaniska funktionsnedsättningar i samband med neurologiska skador. Tillverkad av rostfritt stål för god hållbarhet och säkerhet.

**Användningsområden:** Avsedd att användas vid behandling av olika biomekaniska funktionsnedsättningar i samband med neurologiska skador. Unilateral MAX 90 kg, Bilateral MAX 100 kg.

| Art. nr. | Modell                                  | Vä/Hö                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62711    | Ankelled utan booster                   | Bilateral                                                                                       |
| 62713    | Ankelled med en booster                 | Plantar Booster=Vänster medial/Höger lateral eller Dorsal Booster=Vänster lateral/Höger medial  |
| 62714    | Ankelled med en booster                 | Dorsal Booster =Vänster medial/Höger lateral eller Plantar Booster=Vänster lateral/Höger medial |
| 62715    | Ankelled med plantar och dorsal booster | Bilateral                                                                                       |
| 62677    | Distal skena lateral                    | Vä/Hö                                                                                           |
| 62678    | Distal skena medial                     | Vä/Hö                                                                                           |
| 62679    | Distal Y-skena                          | Bilateral                                                                                       |
| 62680    | Distal rak skena                        | Bilateral                                                                                       |
| 62699    | Camber Axis gångjärnsled                | Bilateral                                                                                       |
| 62719    | Verktyskit för tillverkning             |                                                                                                 |
| 62721    | Kombinationsnyckel Mellan               |                                                                                                 |

## Triple Action® ankelled 2.0 vuxen

En led designad för att ge en optimal grad av justering och för att tillgodose de biomekaniska kraven. Inriktning, R.O.M. (rörelseomfång) och motstånd plantart och/eller dorsalt, justeras helt oberoende av varandra, vilket ger en unik möjlighet att tillgodose kravet på finjustering genom gångcyklens olika faser. De kraftiga fjädrarna och den smidiga inställningen gör det enklare att möta patientens behov genom hela rehabiliteringsfasen. Leden har fjädrar som klarar ett högt vridmoment och tre enkla inställningar säkerställer önskad funktion. Triple Action-leden underlättar effektiv behandling vid olika biomekaniska funktionsnedsättningar i samband med neurologiska skador. Tillverkad av rostfritt stål för god hållbarhet och säkerhet. Triple Action 2.0 Vuxen passar till 19 mm skenor.



**Användningsområden:** Avsedd att användas vid behandling av olika biomekaniska funktionsnedsättningar i samband med neurologiska skador. Unilateral MAX 100 kg, Bilateral MAX 110 kg.

| Art. nr. | Modell                       | Vä/Hö                        |
|----------|------------------------------|------------------------------|
| 62690    | Ankelled utan booster        | Vänster lateral/höger medial |
| 62691    | Ankelled utan booster        | Höger lateral/vänster medial |
| 62692    | Ankelled med plantar booster | Vänster lateral/höger medial |
| 62693    | Ankelled med plantar booster | Höger lateral/vänster medial |
| 62695    | Distal skena lateral         | Vä/Hö                        |
| 62696    | Distal skena medial          | Vä/Hö                        |
| 62697    | Distal Y-skena               | Vä/Hö                        |
| 62698    | Distal rak skena             | Bilateral                    |
| 62699    | Camber Axis Gångjärnsled     | Bilateral                    |
| 62694    | Verktyskit för tillverkning  |                              |
| 62720    | Kombinationsnyckel Vuxen     |                              |

## Rörelsebegränsare 655

Rörelsebegränsare av rostfritt stål och nylon för begränsning av plantar-/dorsalflexion i ankelleden.

**Övrigt:** Tillverkningsinstruktion finns i förpackningen.

| Art. nr. | Storlek | Förp. |
|----------|---------|-------|
| 62655    | Small   | 1 set |
| 62655    | Large   | 1 set |
| 62655    | X-Large | 1 set |





## Rörelsebegränsare 755

Rörelsebegränsare av polyuretan för plantarflexionsstopp. Enkel att justera.

**Övrigt:** Tillverkningsinstruktion finns i förpackningen.

| Art. nr. | Storlek    | Förp. |
|----------|------------|-------|
| 62755    | En storlek | 1 set |



## Rörelsedämpare 795

Rörelsedämpare av rostfritt stål och polyuretan, ger en variabel plantarflexion som kan låsas i önskad position.

**Övrigt:** Tillverkningsinstruktion finns i förpackningen.

| Art. nr. | Storlek    | Förp. |
|----------|------------|-------|
| 62795    | En storlek | 1 set |



## SureStep HEKO knäled

Surestep HEKO är en led för tillverkning av en funktionell översträckningsortos för mindre barn. HEKO-leden motverkar hyperextension i knäet genom att begränsa knärörelsen utan att påverka knäets normala funktion. Traditionellt har hyperextension kontrollerats genom att begränsa plantarflexionsrörligheten i ankeln. Detta i sig begränsar den normala gången, minskar barnets möjlighet till normal gångfunktion och aktivitet. HEKO tillåter barnet att gå, springa, sitta på huk och hoppa. Leden har full ROM från 0° till 135°. Den 4-axlade leden ger full ROM då den efterliknar den anatomiska rörelsen i ett knä. Den har en låg vikt samt låg profil och kan med fördel användas under kläder. Den är lätt att ta på och av.

**Användningsområden:** Lokal kontroll av hyperextension, varus och valgus i knäet.

**Övrigt:** Levereras med medial och lateral led som båda har 8 mm offset.

Maximalvikt för Small - 22 kg. Maximalvikt för Large - 45 kg.

| Art. nr. | Material       | Storlek | Mått 1    | Mått 2 | Mått 3 |
|----------|----------------|---------|-----------|--------|--------|
| 62650    | Rostfritt stål | Small   | 10 x 2 mm | 135 mm | 35 mm  |
| 62650    | Rostfritt stål | Large   | 12 x 3 mm | 185 mm | 45 mm  |

**Mått 1:** Bredd x tjocklek skena

**Mått 2:** Skenans längd från centrum av ledhuset

**Mått 3:** Ledhusets längd



## Knäled stegvis låsbar

En stegvis låsbar knäled som hjälper patienten att nå full knästräckning och knästabilitet genom den stegvisa knäflexionen. Dessa komponenter från Becker Orthopedic ingår i ett modulsystem avsedda att tillverka helbensortoser. De modula knälederna finns i rostfritt stål och aluminiumutförande. Skenorna, som ingår, är rundade i överkant och raka i nederkant. Den långa vinklade låsbygeln är lätt att anpassa efter patientens behov då den kan kortas och formas individuellt.

| Art. nr. | Modell                | Material       | Storlek |
|----------|-----------------------|----------------|---------|
| 62852    | Stegvis låsbar knäled | Aluminium      | 19 mm   |
| 62853    | Stegvis låsbar knäled | Rostfritt stål | 19 mm   |



**Mått:** Passar till skenor 19 mm.

## Låsknäled med bygellås

Ett låsknä som automatiskt aktiveras ner leden när full sträckning. Dessa komponenter från Becker Orthopedic ingår i ett modulsystem avsedda att tillverka helbensortoser. Designen ökar tillverkningsmöjligheterna och underlättar underhållet av ortosen. Den långa vinklade låsbygeln är lätt att anpassa efter patientens behov då den kan kortas och formas individuellt. De modula knälederna finns i två storlekar samt i rostfritt stål- och aluminiumutförande. Skenorna, som ingår, är rundade i överkant och raka i nederkant. Även vajrar ingår. Låsknäet levereras även med en främre dragkabel som tillåter patienten att låsa upp leden.



**Övrigt:** Finns i storlekar som passar till 16 mm och 19 mm skenor, både i Aluminium och rostfritt stål.

| Art. nr. | Modell       | Material       | Storlek |
|----------|--------------|----------------|---------|
| 62850    | Låsknäled AL | Aluminium      | 19 mm   |
| 62851    | Låsknäled RS | Rostfritt stål | 19 mm   |
| 62850    | Låsknäled AL | Aluminium      | 16 mm   |
| 62851    | Låsknäled RS | Rostfritt stål | 16 mm   |



## SPL2 -Swing Phase Lock knäled

SPL leden har utvecklats för att hjälpa patienter med partiell eller totalt nedsatt funktion av M.Quadriceps (knäextensorerna). Ingen annan användning är tillåten. Ledens funktion består av en pendelmekanism som låser och låser upp knäleden beroende av ledens vinkel i sagittalplanet. Under gångcykeln låser leden före hälsättning för att ge stöd under ståfasen för att sedan låsa upp igen när hälen lämnar underlaget. Avsikten är att imitera knäextensorernas normala fysiologiska funktion och ge ett mer normalt gångmönster utan cirkumduktion eller s.k. höftgång. SPL2-leden låser vid full knäextension och har ytterligare ett säkerhetsstopp som utlöser vid 15 graders flexion när full extension inte uppnås. Det innebär att ortosen låser även om knäet inte är fullt extenderat. Eftersom SPL2-leden inte är beroende av ankels position och/eller markkontakt kan leden användas för olika typer av ortoser:- Helbensortoser med eller utan ankelled- Helbensortos ev. med höftled- Knäortoser

**Användningsområden:** M.Quadriceps pareser vid MS eller liknande sjukdomar, stroke, polio, perifera nervskador och andra neuromuskulära sjukdomar.

**Kontraindikationer:** Knäflexion-kontrakturer > 10°, moderat till svår spasticitet.

**Övrigt:** Utförlig tillverknings- och utprovningmanual medföljer vid leverans. Reservdelsförteckning finns i manualen. Det finns även en separat manual avsedd för sjukgymnaster. Manualer kan beställas från Kundsupport. I båda produkterna ingår en handkontroll, dummy för ingjutning samt övriga tillbehör för montering. SPL2-leden är avsedd för 20 mm skenor. Skenor ingår inte. Art. 62800 innehåller SPL- samt SPC-led. Art. 62803 innehåller SPL-led. Patientvikt max. 100 kg.

| Art. nr. | Modell                                                   | Vä/Hö  |
|----------|----------------------------------------------------------|--------|
| 62800    | SPL2                                                     | Vä/Hö  |
| 62803    | SPL2 Monolateral                                         | Vä/Hö  |
| 62801    | Parallellverktyg                                         |        |
| 62802    | Dummy                                                    |        |
| 62805    | Renoverings-Kit                                          |        |
| 93101    | Provortos för utlåning. Ortosen går att justera/anpassa. | Bilat. |

## Load Response knäled

Load Response ger stötdämpning och tillåter 18° knäflexion i ståfasen. En belastad spiralfjäder bibehåller knäledens stabilitet genom att stå emot ytterligare knäflexion. Load Response finns att få med skenor av aluminium, rostfritt stål eller titan.

**Användningsområden:** Total M. Quadricepsbortfall isolerat eller i kombination med svaghet i höftmuskulaturen. Patientvikt min. 50 kg. max. 86 kg.

**Övrigt:** Load Response-leden är avsedd för 19 mm skenor.

| Art. nr. | Modell                        | Material       | Vä/Hö |
|----------|-------------------------------|----------------|-------|
| 62820    | Load Response knäled komplett | Aluminium      | Vä/Hö |
| 62820    | Load Response knäled komplett | Aluminium      |       |
| 62821    | Load Response knäled komplett | Rostfritt stål | Vä/Hö |
| 62821    | Load Response knäled komplett | Rostfritt stål |       |
| 62822    | Load Response knäled komplett | Titan          | Vä/Hö |
| 62822    | Load Response knäled komplett | Titan          |       |
| 62823    | Urethane band                 |                |       |
| 62828    | Parallellverktyg              |                |       |
| 62829    | Upplåsningskit                | Vä/Hö          |       |
| 62829    | Upplåsningskit                |                |       |
| 93220    | Demoortos för utlåning        |                |       |





## GX-Knee knäled

GX-Knee är en knäled avsedd att hjälpa till med knäextension under svingfasen. En gasfjäder används för att hjälpa knäet till full extension vid hälsättning. Gasfjädern finns i två olika hårdheter, 125N som standard samt 175N för högaktiva patienter.

**Användningsområden:** Isolerad Quadriceps svaghet, svaghet i Quadriceps i kombination med fot- och ankelproblem, svaghet i Quadriceps med sidostabilitet i knäleden. Patientvikt max 100 kg.

**Kontraindikationer:** Svag höftmuskulatur.

**Övrigt:** GX-knee-leden är avsedd för 19 mm skenor. Levereras komplett med skenor medialt och lateralt.

| Art. nr. | Modell         | Hårdhet | Material       | Vä/Hö |
|----------|----------------|---------|----------------|-------|
| 62830    | GX-Knee ungdom | 125N    | Aluminium      | Vä/Hö |
| 62830    | GX-Knee ungdom | 175N    | Aluminium      | Vä/Hö |
| 62831    | GX-Knee ungdom | 125N    | Rostfritt stål | Vä/Hö |
| 62831    | GX-Knee ungdom | 175N    | Rostfritt stål | Vä/Hö |
| 62832    | GX-Knee vuxen  | 125N    | Aluminium      | Vä/Hö |
| 62832    | GX-Knee vuxen  | 175N    | Aluminium      | Vä/Hö |
| 62833    | GX-Knee vuxen  | 125N    | Rostfritt stål | Vä/Hö |
| 62833    | GX-Knee vuxen  | 175N    | Rostfritt stål | Vä/Hö |

## FullStride™ knäled

Fullstride knäled ger mekanisk knäkontroll genom ett kabelsystem. Leden låser vid full extension, samt låser upp automatiskt vid slutet av ståfasen. Fullstride ger maximal kontroll av varus/valgus instabilitet och hyperextension i knäleden. FullStride är utbytbar mot SafetyStride. Passar tillsammans med de flesta ankelleder. Genom att skifta lederna från medialt till lateralt och vice versa kan man få ett låst knä.

**Användningsområden:** M. Quadriceps svaghet, MS, Stroke, skada på femoralisnerven och/eller inkomplett ryggmärgsskada, inklusionskroppsmysos.

**Kontraindikationer:** Patientvikt > 100kg, spasticitet i höft, knä eller ankelmuskulatur, betydande benlängdsskillnad där den skadade sidan är kortare, extensionskontraktur i knäleden.

**Övrigt:** FullStride-leden är avsedd för 19 mm skenor. Levereras komplett med skenor medialt och lateralt. På bilden är Slim Line Double Action ankelled samt Slim Line Y-bygel monterad. PreSTRIDE provortos kan användas för utvärdering om FullStride är en lämplig ortos för patienten. Demo-ortos är endast avsedd för visning, ej för utprovning.



| Art. nr. | Modell                            | Material                         | Vä/Hö  |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|
| 62837    | FullStride AL                     | Aluminium                        | Bilat. |
| 62838    | FullStride RS                     | Rostfritt stål                   | Bilat. |
| 93240    | FullStride demoortos för utlåning | -                                | Bilat. |
| 93250    | PreSTRIDE provortos för utlåning. | Ortosen går att justera/anpassa. | Vä     |
| 93251    | PreSTRIDE provortos för utlåning. | Ortosen går att justera/anpassa. | Hö     |



## SafetyStride™ knäled

SafetyStride knäled ger knäflexions-kontroll genom ett mekaniskt kabelsystem. Leden behöver inte full knäextension för att låsa under ståfasen, utan låser oavsett vinkel. En låstapp aktiveras inne i knäleden under svingfasen för att säkerställa stabilitet, samt låser upp automatiskt vid slutet av stödfasen. SafetyStride är utbytbar mot FullStride. Passar tillsammans med de flesta ankelleder.

**Användningsområden:** M. Quadriceps svaghet, MS, Stroke, skada på femoralisnerven och/eller inkomplett ryggmärgsskada, inklusionskroppsmysit.

**Kontraindikationer:** Patientvikt > 100kg, spasticitet i höft, knä eller ankelmuskulatur, betydande benlängdsskillnad där den skadade sidan är kortare.

**Övrigt:** SafetyStride-leden är avsedd för 19 mm skenor. Levereras komplett med skenor medialt och lateralt. På bilden är Camber Axis ankelled monterad. PreSTRIDE provortos kan användas för utvärdering om SafetyStride är en lämplig ortos för patienten. Demo-ortos är endast avsedd för visning, ej för utprovning.

| Art. nr. | Modell                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 62835    | SafetyStride, Aluminium                                            |
| 62836    | SafetyStride, Rostfritt stål                                       |
| 93230    | SafetyStride, demoortos för utlåning                               |
| 93231    | SafetyStride, demoortos för utlåning                               |
| 93250    | PreStride provortos för utlåning. Ortosen går att justera/anpassa. |
| 93251    | PreStride provortos för utlåning. Ortosen går att justera/anpassa. |

## MultiMotion korrigerande led

MultiMotion är ett dynamiskt korrigerande leddsystem som kan användas när rörligheten begränsas som t.ex. vid kontrakturer, spasticitet, efter operationer eller i samband med brännskador. Systemet kan användas till många av kroppens leder både i extension och flexion. Ledens dynamiska funktion ger en säker och varaktig behandling helt efter patientens individuella förutsättningar. Ortossystemet tillverkas individuellt av ortopedingenjören. Systemet är enkelt att manövrera och inställningarna är lätta att ändra allt eftersom rörelseomfånget förändras. Genom att använda uppföljningsformuläret kan du enkelt följa utvecklingen och säkerställa vilka justeringar och ändringar som görs. Denna finns som enbart led samt också som kompletta set inklusive övre och nedre skenor. En speciell variant för ankel finns också där den integrerade T-skenan har 12 mm offset.



**Användningsområden:** Exempel på diagnoser: Apoplexy, ligamentskador, brännskador, Cerebral Pares, frakturer, medfödda spastiska pareser, MS, Spina Bifida, underbensamputationer och spastiska pareser.

**Kontraindikationer:** Ankylos, deformiteter av muskler och ben, fibros, ossifikation.

**Övrigt:** Uppföljningsformulär beställs på Kundsupport eller hämtas på Camps hemsida; [www.camp.se](http://www.camp.se), under "Downloadcenter".

| Art. nr. | Modell                                                         | Storlek | Mått                |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 69100    | Korrigerande led                                               | Regular | Skenans bredd 16 mm |
| 69110    | Korrigerande led (69100) + övre och nedre rak skena (69702)    | Regular | 200 x 16 x 4 mm     |
| 69111    | Korrigerande led (69100) + övre och nedre formad skena (69706) | Regular | 450 x 16 x 4 mm     |
| 69112    | Korrigerande led (69100) + T-skena och rak skena (69710)       | Regular | 150 x 16 x 3,2 mm   |
| 69113    | Korrigerande led med integrerad T-skena 12 mm offset           | Regular | Skenans bredd 16 mm |
| 69121    | Korrigerande led med integrerade skenor                        | Regular | Skenans bredd 16 mm |
| 69122    | Korrigerande led med integrerade skenor                        | Small   | Skenans bredd 12 mm |
| 69123    | Korrigerande led med integrerade skenor, T-skena 12 mm offset  | Regular | Skenans bredd 16 mm |
| 69125    | Korrigerande led med integrerade skenor, T-skena 12 mm offset  | Small   | Skenans bredd 12 mm |
| 69200    | Korrigerande led                                               | Small   | Skenans bredd 12 mm |
| 69210    | Korrigerande led (69200) + övre och nedre rak skena (69701)    | Small   | 200 x 12 x 3,2 mm   |
| 69211    | Korrigerande led (69200) + övre och nedre formad skena (69705) | Small   | 350 x 12 x 3,2 mm   |
| 69212    | Korrigerande led (69200) + T-skena och rak skena (69709)       | Small   | 150 x 12 x 3,2 mm   |
| 69213    | Korrigerande led med integrerad T-skena 12 mm offset           | Small   | Skenans bredd 12 mm |
| 69951    | Dummy Korrigerande led                                         | Regular |                     |
| 69952    | Dummy Korrigerande led                                         | Small   |                     |



## MultiMotion gångjärnsled

MultiMotion Gångjärnsled placeras på motsatt sida av den korrigerande leden.

Detta för att uppnå önskad vridstyvhet i ortosen. Denna finns som enbart led samt också som kompletta set inklusive övre och nedre skenor. En speciell variant för ankel finns också där den integrerade T-skenan har 12 mm eller 22mm offset.

**Användningsområden:** Se MultiMotion Korrigerande led.

**Övrigt:** Fri rörlighet (+135° till -135°). Uppföljningsformulär beställs på Kundsupport eller hämtas på Camps hemsida; [www.camp.se](http://www.camp.se), under Downloadcenter.

| Art. nr. | Modell                                                     | Storlek | Mått                |
|----------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 69505    | Gångjärnsled                                               | Small   | Skenans bredd 12 mm |
| 69128    | Gångjärnsled med integrerade skenor                        | Small   | Skenans bredd 12 mm |
| 69500    | Gångjärnsled                                               | Regular | Skenans bredd 16 mm |
| 69127    | Gångjärnsled med integrerade skenor                        | Regular | Skenans bredd 16 mm |
| 69518    | Gångjärnsled med integrerad T-skena 12 mm offset           | Small   | Skenans bredd 12 mm |
| 69131    | Gångjärnsled med integrerade skenor; T-skena 12 mm offset  | Small   | Skenans bredd 12 mm |
| 69513    | Gångjärnsled med integrerad T-skena 12 mm offset           | Regular | Skenans bredd 16 mm |
| 69129    | Gångjärnsled med integrerade skenor; T-skena 12 mm offset  | Regular | Skenans bredd 16 mm |
| 69515    | Gångjärnsled (69505) + övre och nedre rak skena (69701)    | Small   | 200 x 12 x 3,2 mm   |
| 69516    | Gångjärnsled (69505) + övre och nedre formad skena (69705) | Small   | 350 x 12 x 3,2 mm   |
| 69517    | Gångjärnsled (69505) + T-skena och rak skena (69709)       | Small   | 150 x 12 x 3,2 mm   |
| 69510    | Gångjärnsled (69500) + övre och nedre rak skena (69702)    | Regular | 200 x 16 x 4 mm     |
| 69511    | Gångjärnsled (69500) + övre och nedre formad skena (69706) | Regular | 450 x 16 x 4 mm     |
| 69512    | Gångjärnsled (69500) + T-skena och rak skena (69710)       | Regular | 150 x 16 x 3,2 mm   |
| 69953    | Dummy Gångjärnsled                                         | Regular |                     |
| 69954    | Dummy Gångjärnsled                                         | Small   |                     |



## MultiMotion ROM-led

MultiMotion R.O.M.-leden placeras på motsatta sidan av den korrigerande leden. Detta ger den önskade vridstyvheten i ortosen.

**Användningsområden:** Se MultiMotion Korrigerande led.

**Övrigt:** Flexion/extensionsstopp är justerbara: Small i 14° intervall, Regular i 12°.

| Art. nr. | Modell                 | Storlek | Mått                |
|----------|------------------------|---------|---------------------|
| 69555    | ROM Led med skenfästen | Small   | Skenans bredd 12 mm |
| 69550    | ROM Led med skenfästen | Regular | Skenans bredd 16 mm |




## MultiMotion skenor

Till MultiMotion systemet finns flera olika typer av skenor att välja mellan.

Skenorna finns i två bredder 12 och 16 mm. Alla skenor levereras med färdiga hål för enkel montering.

| Art. nr. | Modell                | Storlek | Mått                                     |
|----------|-----------------------|---------|------------------------------------------|
| 69701    | Skena rak             | Small   | 200 x 12 x 3 mm                          |
| 69705    | Skena formad          | Small   | 350 x 12 x 3,2 mm                        |
| 69709    | T-skena rak           | Small   | R/200 x 12 x 3,2 mm, T/150 x 12 x 3,2 mm |
| 69702    | Skena rak             | Regular | 200 x 16 x 4 mm                          |
| 69706    | Skena formad          | Regular | 450 x 16 x 4,0 mm                        |
| 69710    | T-skena rak           | Regular | R/200 x 16 x 4 mm, T/150 x 16 x 3,2 mm   |
| 69722    | Aluminiumskenor I par | Small   | 150 x 12 x 3.2 mm                        |
| 69723    | Aluminiumskenor I par | Regular | 150 x 16 x 4.0 mm                        |

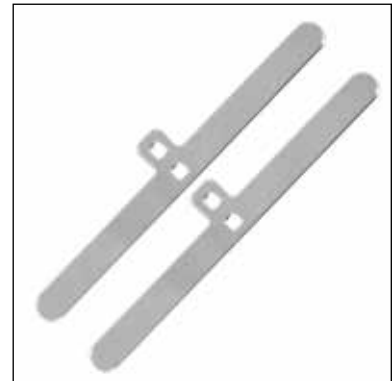



## MultiMotion tillbehör

| Art. nr. | Modell                          | Storlek | Mått    | Antal/Förp |
|----------|---------------------------------|---------|---------|------------|
| 69950    | Parallellverktyg                |         |         |            |
| 69900    | Skruvmejsel                     |         |         |            |
| 69101    | Skruv till ledhus               | Regular |         |            |
| 69102    | Distansbricka                   | Regular |         |            |
| 69103    | Ledhus                          | Regular |         |            |
| 69104    | Kraftindikationsskiva           | Regular |         |            |
| 69105    | Fjäderspänning                  | Regular | 10,2 Nm |            |
| 69106    | Flexion/extension stopp         | Regular |         | 2          |
| 69107    | Skrubar                         | Regular |         | 4          |
| 69108    | Gängade bussningar              | Regular |         | 4          |
| 69201    | Skruv till ledhus               | Small   |         |            |
| 69202    | Distansbricka                   | Small   |         |            |
| 69203    | Ledhus                          | Small   |         |            |
| 69204    | Kraftindikationsskiva           | Small   |         |            |
| 69205    | Fjäderspänning                  | Small   | 3,4 Nm  |            |
| 69206    | Flexion/extension stopp         | Small   |         | 2          |
| 69207    | Skrubar                         | Small   |         | 4          |
| 69208    | Gängade bussningar              | Small   |         | 4          |
| 69501    | Ledskydd                        |         |         |            |
| 69502    | Axelset                         |         |         |            |
| 69503    | Skrubar för skenorna            |         |         | 4          |
| 69504    | Gängade bussningar för skenorna |         |         | 4          |



**Mått 1:** Maximalt rotationsmoment (leden)

**Mått 2:** Husets diameter

**Mått 3:** Ledens vikt

## MultiMotion höftabduktionsortos

Ledsystemet är avsett för behandling av korregerbara kontrakturer i höftleden hos barn. Systemet består av två komponenter; den korregerande leden och abduktionsskenorna. Komponenterna monteras på en individuellt tillverkad ortos. Ortosen positionerar barnets ben i ett korrekt läge samt stabiliserar höftleden. Adduktorena sträcks ut genom långsam töjning. Lederna kan låsas och låsas upp i önskat läge. Justerbart flexion- och extensionsstopp: Small 14° intervall, Regular 12° intervall.

**Användningsområden:** Spastisk diplegi, spastisk tetraplegi, spastisk triplegi, kongenital sublaxation av höftleden.

**Övrigt:** Ledsystemet får endast användas på ortoser avsedda för de nedre extremiteterna och får inte viktbelastas.

| Art. nr. | Modell           | Storlek | Mått 1   | Mått 2 | Mått 3 | Ålder  |
|----------|------------------|---------|----------|--------|--------|--------|
| 69721    | Abduktionsskena  | Small   | < 105 cm |        |        |        |
| 69720    | Abduktionsskena  | Regular | > 105 cm |        |        |        |
| 69200    | Korregerande led | Small   | 3,4 Nm   | 35 mm  | 100g   | < 4 år |
| 69100    | Korregerande led | Regular | 10,2 Nm  | 53 mm  | 245g   | > 4 år |

## MultiStatic behandlingsled

MultiStatic-leden är avsedd att användas för behandling av korrigerbara kontrakturer, både hos vuxna och barn. Leden möjliggör snabb, effektiv och adekvat statisk behandling av kontrakturer. Leden arbetar efter HLBS-principer (High Load Brief Stretch). Vinkeln för leden sätts av en excentrisk axel. MultiStatic-leden är avsedd att användas för ortoser som inte är viktbärande. Vi rekommenderar att kombinera MultiStatic-leden tillsammans med en gångjärnsled på den motsatta sidan för att säkerställa vridstyvhet och rotation av ortosen. Kan användas både till flexion och extension. Fri inställning mellan + 120 ° till -120°. Fungerar Bilateral. Leden är tillverkad i rostfritt stål.



**Användningsområden:** Behandling av korrigerbara kontrakturer, hos vuxna och

| Art. nr. | Storlek | Bredd | Längd  | Höjd    | Diameter | Vikt  |
|----------|---------|-------|--------|---------|----------|-------|
| 69690    | Small   | 12 mm | 400 mm | 8,5 mm  | 19 mm    | 83 g  |
| 69691    | Medium  | 16 mm | 400 mm | 9,5 mm  | 25 mm    | 121 g |
| 69692    | Large   | 19 mm | 400 mm | 10,5 mm | 30 mm    | 151 g |

## MultiStatic gångjärnsled

Denna frirörliga gångjärnsled används tillsammans med MultiStatic-Behandlingsled för att säkerställa vridstyvhet och bästa funktion. Tillverkad av rostfritt stål.

| Art. nr. | Modell       | Bredd | Längd  | Höjd  | Diameter | Vikt     |
|----------|--------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 69695    | Gångjärnsled | 12 mm | 400 mm | 11 mm | 18 mm    | 105 gram |
| 69696    | Gångjärnsled | 16 mm | 400 mm | 11 mm | 22 mm    | 140 gram |



## Monodos

Monodos är en led av rostfritt stål som utvecklats för behandling av dynamiska kontrakturer. Leden medger rörlighet i en riktning och blockerar rörelsen helt i motsatt riktning. Avsedd för övre och nedre extremiteter i flexion och extension. Leden har en enkel öppningsmekanism.

**Användningsområden:** Behandling av dynamiska kontrakturer.

**Övrigt:** Leden får ej användas till viktbärande ortoser. För storlek large ingår Free Motion led samt skenor.

| Art. nr. | Storlek | Förp.   | Vä/Hö     |
|----------|---------|---------|-----------|
| 62780    | Small   | 1 styck | Bilateral |
| 62780    | Medium  | 1 styck | Bilateral |
| 62780    | Large   | 1 par   | Bilateral |



## Egna anteckningar

[illegible]



# Plaster och material

[www.camp.se](http://www.camp.se)

# X-LITE®

## 3D-LITE™

Vid vår fabrik i Belgien tillverkar vi våra plastgipsmaterial, som är idealiska för tillverkning av alla typer av gips och ortoser. Våra produkter är giftfria och därför helt ofarliga för patienter och personal. Dessutom värnar vi om miljön med en helt nedbrytbar produkt - X-LITE® EcoCast.

### Varför X-LITE® eller 3D-LITE™?

- Helt ofarligt material, friger inte några isocyanater och innehåller inga glasfiber
- Miljövänliga
- Inget behov av utsug
- Inget behov av skyddshandskar eller munskydd
- Avger inget damm och kladdar inte
- Mycket låg vikt som är till fördel för patienten
- Luftiga och fördelaktiga för hud och sårhäkning
- Tål väta
- Röntgengenomsläppliga
- Mindre spillmaterial då rester och redan uppvärmt material kan återanvändas.



### X-LITE®

X-LITE® materialet framställs av 100 % bomullsväv, som impregneras med en giftfri termoplast. Detta ger ett starkt, stabilt och mycket hållbart material som samtidigt är luftigt och lätt. X-LITE® värms i vattenbad vid 70°C och kan lätt omformas. X-LITE® kan återvinnas och återuppvärmas ett oändligt antal gånger och avklippta bitar kan därför användas som förstärkningsmaterial eller till mindre applikationer. Mindre korrigeringar på bandagen kan utföras direkt på patienten genom att använda en vanlig hårtork. Stabiliteten kan ökas genom att använda flera lager material. X-LITE® finns i tre olika varianter; CLASSIC, PREMIUM och PLUS. Val av material beror på den kliniska indikationen och preferensen.

### 3D-LITE™

3D-LITE™ är liksom X-LITE® en lågtemperaturplast framställd av en tredimensionell polyesterväv, som impregneras med en resin. Den är lämplig för alla typer av skenor och ortoser. Materialet är starkt, stabilt, lätt, luftigt och enkelt att applicera. 3D-LITE™ finns i tre olika tjocklekar; 3, 5 och 7 mm. Materialet formar sig fint över konturerna, och är inte mottagligt för fingeravtryck. 3D-LITE™ materialet värms upp i 80°C i ugn eller med varmluftspistol. Kan lätt omformas.

### Gipsning

X-LITE® finns i rullar till cirkulärgips och som ark- och i en dispenserbox till skenframställning. Eftersom materialet är helt fritt från gifter behövs inte handskar eller annan skyddsutrustning vid arbete med materialet. Ett cirkulärgips avlägsnas lätt med en gipssåg utan att det dammar. Gipset kan belastas redan efter trettio minuter. Materialen är röntgengenomsläppliga vid upp till tre lager.

### Ortoser och skenor

X-LITE® och 3D-LITE™ kan användas till framställning av alla typer av skenor och ortoser. Val av material är förknippat med befintlig utrustning, kroppsdel och önskad stabilitet och formbarhet.



## X-LITE® Classic rulle

X-LITE® Classic är det mest stabila materialet. Den öppna strukturen gör materialet luftigt och låter huden andas. X-LITE® Classic är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE® material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® Classic rullar har en skyddsfilm mellan lagren som avlägsnas under cirkuleringen.

Välj mellan tre färger; vit, antracit och royal blå.

**Användningsområden:** Cirkulärgips.

| Art. nr. | Färg       | Bredd  | Längd | Förp.     |
|----------|------------|--------|-------|-----------|
| 64103    | Vit        | 50 mm  | 1,8 m | 20 rullar |
| 64133    | Vit        | 75 mm  | 1,8 m | 20 rullar |
| 64136    | Antracit   | 75 mm  | 1,8 m | 5 rullar  |
| 64137    | Royal Blå  | 75 mm  | 1,8 m | 5 rullar  |
| 64143    | Vit        | 100 mm | 1,8 m | 10 rullar |
| 64146    | Antracit   | 100 mm | 1,8 m | 5 rullar  |
| 64147    | Royal Blå  | 100 mm | 1,8 m | 5 rullar  |
| 64153    | Vit        | 125 mm | 1,8 m | 10 rullar |
| 64162    | Vit        | 150 mm | 1,8 m | 5 rullar  |
| 64163    | Vit        | 150 mm | 1,8 m | 10 rullar |
| 64168    | Antracit   | 150 mm | 1,8 m | 2 rullar  |
| 64169    | Royal Blue | 150 mm | 1,8 m | 2 rullar  |







## X-LITE® Classic ark och dispenser

X-LITE® Classic är det mest stabila materialet. Den öppna strukturen gör materialet luftigt och låter huden andas. Classic är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE Classic finns att beställa som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till önskad längd. Materialet finns i tre olika färger – vit, antracit och blå.

**Användningsområden:** Gipsskenor, ortoser och avtagbara skenor

| Art. nr. | Färg       | Bredd  | Längd  | Antal/Förp | Ark/Dispenser |
|----------|------------|--------|--------|------------|---------------|
| 64250    | Vit        | 75 mm  | 10 m   | 1          | Dispenser     |
| 64251    | Vit        | 100 mm | 10 m   | 1          | Dispenser     |
| 64252    | Vit        | 150 mm | 10 m   | 1          | Dispenser     |
| 64253    | Vit        | 200 mm | 10 m   | 1          | Dispenser     |
| 64254    | Vit        | 125 mm | 10 m   | 1          | Dispenser     |
| 64255    | Antracit   | 150 mm | 10 m   | 1          | Dispenser     |
| 64256    | Royal Blue | 150 mm | 10 m   | 1          | Dispenser     |
| 64278    | Vit        | 25 mm  | 500 mm | 50         | Ark           |
| 64290    | Vit        | 200 mm | 375 mm | 15         | Ark           |
| 64291    | Vit        | 200 mm | 1,2 m  | 15         | Ark           |
| 64292    | Vit        | 200 mm | 900 mm | 15         | Ark           |
| 64293    | Vit        | 75 mm  | 375 mm | 15         | Ark           |
| 64294    | Vit        | 100 mm | 375 mm | 15         | Ark           |
| 64295    | Vit        | 125 mm | 375 mm | 15         | Ark           |
| 64296    | Vit        | 150 mm | 375 mm | 15         | Ark           |
| 64297    | Vit        | 150 mm | 900 mm | 15         | Ark           |
| 64298    | Vit        | 450 mm | 500 mm | 10         | Ark           |
| 64299    | Vit        | 500 mm | 500 mm | 10         | Ark           |
| 64302    | Antracit   | 200 mm | 375 mm | 8          | Ark           |
| 64303    | Antracit   | 450 mm | 500 mm | 4          | Ark           |
| 64304    | Royal Blue | 200 mm | 375 mm | 8          | Ark           |
| 64305    | Royal Blue | 450 mm | 500 mm | 4          | Ark           |



## X-LITE® PLUS rulle

X-LITE® PLUS rullar har en mjuk ovansida som ger ett mjukt och bekvämt gips för patienten. X-LITE® PLUS är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® PLUS rullarna har ingen skyddsfilm mellan lagren, så materialet appliceras snabbt och enkelt på patienten. Välj mellan fem färger; vit, röd, blå, svart och hot pink

### Användningsområden: Cirkulär gips

| Art. nr. | Färg     | Bredd  | Längd | Förp./Rulle |
|----------|----------|--------|-------|-------------|
| 64701    | Vit      | 25 mm  | 1,8 m | 5           |
| 64702    | Vit      | 50 mm  | 1,8 m | 20          |
| 64703    | Vit      | 75 mm  | 1,8 m | 20          |
| 64704    | Vit      | 100 mm | 1,8 m | 10          |
| 64706    | Vit      | 125 mm | 1,8 m | 10          |
| 64707    | Vit      | 150 mm | 1,8 m | 10          |
| 64708    | Vit      | 150 mm | 1,8 m | 2           |
| 64711    | Röd      | 25 mm  | 1,8 m | 5           |
| 64712    | Röd      | 50 mm  | 1,8 m | 20          |
| 64713    | Röd      | 75 mm  | 1,8 m | 20          |
| 64714    | Röd      | 100 mm | 1,8 m | 10          |
| 64716    | Röd      | 125 mm | 1,8 m | 10          |
| 64717    | Röd      | 150 mm | 1,8 m | 10          |
| 64718    | Röd      | 150 mm | 1,8 m | 2           |
| 64721    | Blå      | 25 mm  | 1,8 m | 5           |
| 64722    | Blå      | 50 mm  | 1,8 m | 20          |
| 64723    | Blå      | 75 mm  | 1,8 m | 20          |
| 64724    | Blå      | 100 mm | 1,8 m | 10          |
| 64726    | Blå      | 125 mm | 1,8 m | 10          |
| 64727    | Blå      | 150 mm | 1,8 m | 10          |
| 64728    | Blå      | 150 mm | 1,8 m | 2           |
| 64731    | Svart    | 25 mm  | 1,8 m | 5           |
| 64732    | Svart    | 50 mm  | 1,8 m | 20          |
| 64733    | Svart    | 75 mm  | 1,8 m | 20          |
| 64734    | Svart    | 100 mm | 1,8 m | 10          |
| 64736    | Svart    | 125 mm | 1,8 m | 10          |
| 64737    | Svart    | 150 mm | 1,8 m | 10          |
| 64738    | Svart    | 150 mm | 1,8 m | 2           |
| 64741    | Hot Pink | 25 mm  | 1,8 m | 5           |
| 64742    | Hot Pink | 50 mm  | 1,8 m | 20          |
| 64743    | Hot Pink | 75 mm  | 1,8 m | 20          |
| 64744    | Hot Pink | 100 mm | 1,8 m | 10          |
| 64746    | Hot Pink | 125 mm | 1,8 m | 10          |
| 64747    | Hot Pink | 150 mm | 1,8 m | 10          |
| 64748    | Hot Pink | 150 mm | 1,8 m | 2           |





## X-LITE® PLUS ark och dispenser

X-LITE® PLUS har en mjuk ovansida som ger ett mjukt och bekvämt gips för patienten. X-LITE® PLUS är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® PLUS finns att beställa som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till önskad längd.

Välj mellan fem färger; vit, röd, blå, svart och hot pink

**Användningsområden:** Alla skenor och ortoser.

| Art. nr. | Färg     | Bredd  | Längd  | Antal/Förp  |
|----------|----------|--------|--------|-------------|
| 64790    | Röd      | 150 mm | 10 m   | 1 dispenser |
| 64791    | Blå      | 150 mm | 10 m   | 1 dispenser |
| 64792    | Svart    | 150 mm | 10 m   | 1 dispenser |
| 64793    | Hot Pink | 150 mm | 10 m   | 1 dispenser |
| 64753    | Blå      | 200 mm | 375 mm | 8 ark       |
| 64754    | Svart    | 200 mm | 375 mm | 8 ark       |



## X-LITE® Premium rulle

X-LITE® Premium är det mest flexibla materialet. Med sin tunna struktur är det inte lika stabilt som övriga X-LITE material. Däremot är det enklare att forma perfekt över mindre konturer och passar bra till bandage för övre extremiteter och barn. X-LITE® Premium är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® Premium rullar har en skyddsfilm mellan lagren som avlägsnas under cirkuleringen.

**Användningsområden:** Cirkulärgips. För ökad stabilitet kan ett extra lager appliceras.

| Art. nr. | Färg | Bredd  | Längd | Förp.    |
|----------|------|--------|-------|----------|
| 64205    | Vit  | 50 mm  | 1,8 m | 5 rullar |
| 64207    | Vit  | 75 mm  | 1,8 m | 5 rullar |
| 64209    | Vit  | 100 mm | 1,8 m | 5 rullar |
| 64210    | Vit  | 125 mm | 1,8 m | 5 rullar |
| 64211    | Vit  | 150 mm | 1,8 m | 5 rullar |

## X-LITE® Premium ark och dispenser

X-LITE® Premium är det mest flexibla materialet. Med sin tunna struktur är det inte lika stabilt som övriga X-LITE material. Däremot är det enklare att forma perfekt över mindre konturer och passar bra till bandage för övre extremiteter och barn. X-LITE® Premium är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. Materialet finns att beställa som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till önskad längd.

**Användningsområden:** Gipsskenor, ortoser och avtagbara skenor. För ökad stabilitet kan ett extra lager appliceras.

| Art. nr. | Färg  | Bredd  | Längd  | Antal/Förp | Ark/Dispenser |
|----------|-------|--------|--------|------------|---------------|
| 64215    | Beige | 75 mm  | 375 mm | 10         | Ark           |
| 64217    | Beige | 100 mm | 375 mm | 10         | Ark           |
| 64219    | Beige | 150 mm | 375 mm | 10         | Ark           |
| 64220    | Beige | 200 mm | 375 mm | 10         | Ark           |
| 64225    | Beige | 75 mm  | 10 m   | 1          | Dispenser     |
| 64226    | Beige | 100 mm | 10 m   | 1          | Dispenser     |
| 64227    | Beige | 150 mm | 10 m   | 1          | Dispenser     |
| 64228    | Beige | 200 mm | 10 m   | 1          | Dispenser     |



## X-LITE® PLUS Kantband

Kantbandet ger en mjukare och bekvämare kant på skenor. Med en baksida av Premium-material ger det extra stabilitet till skenan. Fungerar väl tillsammans med allt vårt material inkluderat 3D-LITE. Värm i 70°C vattenbad.

| Art. nr. | Färg     | Bredd | Längd | Förp.         |
|----------|----------|-------|-------|---------------|
| 64235    | Vit      | 25 mm | 4 m   | Dispenser box |
| 64236    | Röd      | 25 mm | 4 m   | Dispenser box |
| 64237    | Blå      | 25 mm | 4 m   | Dispenser box |
| 64238    | Svart    | 25 mm | 4 m   | Dispenser box |
| 64239    | Hot Pink | 25 mm | 4 m   | Dispenser box |



## X-LITE® termoplastiskt kantband

X-LITE termoplastiskt kantband är tillverkat av samma material som X-LITE. Bandet värms i vattenbad och fäster direkt mot X-LITE och övriga lågtemperaturplaster. Ortoserna får en jämn och fin kant.

**Övrigt:** Ark om 50 st levereras i plastpåse.

| Art. nr. | Färg | Bredd | Längd  | Antal/Förp | Ark/Dispenser |
|----------|------|-------|--------|------------|---------------|
| 64185    | Vit  | 18 mm | 7,5 m  | 1          | Dispenser     |
| 64180    | Vit  | 25 mm | 7,5 m  | 1          | Dispenser     |
| 64190    | Vit  | 50 mm | 7,5 m  | 1          | Dispenser     |
| 64183    | Vit  | 18 mm | 500 mm | 50         | Ark           |
| 64187    | Vit  | 25 mm | 500 mm | 50         | Ark           |





## X-LITE® termoplastiskt kardborrband

X-LITE kardborrband har en baksida av X-LITE som vid uppvärmning fäster mot X-Lite, 3D-LITE och våra övriga lågtemperaturplaster. Det värms i vattenbad eller med varmluftspistol. Mjukt kardborrband eller fästband appliceras sedan som vanligt.

**Övrigt:** Ark om 5 st levereras i plastpåse.

| Art. nr. | Färg  | Bredd | Längd | Antal/Förp | Ark/Dispenser |
|----------|-------|-------|-------|------------|---------------|
| 64195    | Vit   | 50 mm | 50 cm | 5          | Ark           |
| 64196    | Vit   | 50 mm | 5 m   | 1          | Dispenser     |
| 64197    | Svart | 50 mm | 50 cm | 5          | Ark           |
| 64198    | Svart | 50 mm | 5 m   | 1          | Dispenser     |



## X-LITE® Stockinette

Rundstickad stockinette i 100 % oblekt polypropylen (21 mm är tillverkad i bomull). Mjuk och bekväm med en utmärkt förmåga att transportera fukt bort från huden. Stockinetten är ribbstickad vilket ger en god passform och inga veck mot huden.

| Art. nr. | Färg  | Material   | Bredd  | Längd | Förp.   |
|----------|-------|------------|--------|-------|---------|
| 64400    | Beige | Bomull     | 21 mm  | 23 m  | 1 rulle |
| 64401    | Vit   | Polypropen | 30 mm  | 10 m  | 1 rulle |
| 64411    | Vit   | Polypropen | 50 mm  | 10 m  | 1 rulle |
| 64421    | Vit   | Polypropen | 70 mm  | 10 m  | 1 rulle |
| 64431    | Vit   | Polypropen | 100 mm | 10 m  | 1 rulle |
| 64441    | Vit   | Polypropen | 150 mm | 10 m  | 1 rulle |
| 64442    | Vit   | Polypropen | 200 mm | 10 m  | 1 rulle |



## Stockinette dispenser

Stockinette dispenser är en rundstickad polyester stockinette som är mjuk och följsam. Stockinetten är ribbstickad vilket ger en bra passform och inga rynkor som kan ge skav mot huden. Rullarna kommer i en praktisk dispenser låda.

| Art. nr. | Färg | Bredd  | Längd | Förp.       |
|----------|------|--------|-------|-------------|
| 64394    | Vit  | 30 mm  | 25 m  | 1 dispenser |
| 64395    | Vit  | 50 mm  | 25 m  | 1 dispenser |
| 64396    | Vit  | 70 mm  | 25 m  | 1 dispenser |
| 64397    | Vit  | 100 mm | 25 m  | 1 dispenser |
| 64398    | Vit  | 150 mm | 25 m  | 1 dispenser |

## Foam-binda

Foam-bindan är en skumgummipolstring som andas och inte drar åt sig så mycket vatten. Polstringen ger bra stötdämpning och är inte lika känslig för veck som traditionell gipsolstring.

**Användningsområden:** Som polstring under gips av X-LITE.

| Art. nr. | Färg | Bredd  | Längd  | Förp.     |
|----------|------|--------|--------|-----------|
| 64480    | Vit  | 75 mm  | 2,75 m | 20 rullar |
| 64485    | Vit  | 100 mm | 2,75 m | 16 rullar |
| 64490    | Vit  | 125 mm | 2,75 m | 10 rullar |




## Color elastisk linda

Som en perfekt avslutning på din X-LITE® gipsskena erbjuder vi elastiska lindor i hög kvalitet och i fina färger. Då komforten och kvalitén på lindan är mycket hög är den perfekt för patienter som ska bära gipsen under en längre tid. Color elastisk linda andas och tillsammans med X-LITE® gipset ger det ett mycket luftigt bandage. De har en mjuk yta och vävda kanter som känns behagligt mot huden. Den anpassade elasticiteten gör att den formar sig fint och kan därför användas både till större och mindre applikationer. Den har en "anti-slip" effekt, vilket betyder att lagren inte delar sig och man får ett hållbart resultat. Elastisk linda kan tvättas i 60°C och steriliseras

| Art. nr. | Modell               | Färg       | Bredd | Längd | Förp. |
|----------|----------------------|------------|-------|-------|-------|
| 64106    | Color elastisk linda | Svart      | 6 cm  | 5 m   | 10    |
| 64107    | Color elastisk linda | Röd        | 6 cm  | 5 m   | 10    |
| 64108    | Color elastisk linda | Royal Blue | 6 cm  | 5 m   | 10    |
| 64109    | Color elastisk linda | Grön       | 6 cm  | 5 m   | 10    |
| 64110    | Color elastisk linda | Gul        | 6 cm  | 5 m   | 10    |
| 64112    | Color elastisk linda | Svart      | 10 cm | 5 m   | 10    |
| 64113    | Color elastisk linda | Royal Blue | 10 cm | 5 m   | 10    |



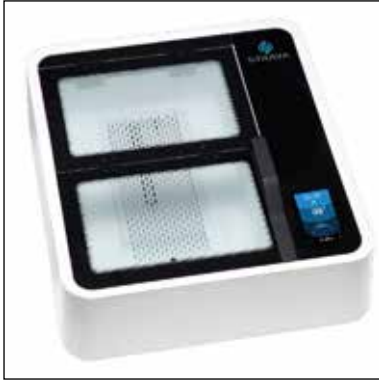

## Strava Vattenbad

STRAVA Vattenbad är det första på marknaden som har inbyggd UV-sterilisering och rengöringsfunktion vid hög vattentemperatur. Detta dubbla rengöringssystem garanterar att vattnet är 99,99% fritt från skadliga bakterier och virus. Strava Vattenbad är tillverkat av kompositmaterial med hög hållbarhet och isolerande-och beskyddande egenskaper samt har ett estetiskt utseende.

Vattenbadet töms enkelt och snabbt med ett inbyggt pumpsystem på ett par minuter. Vattnet cirkulerar i vattenbadet vilket gör att temperaturen är jämn i vattnet och värms snabbt upp till önskad temperatur. Överskådlig "Touch Screen" i färg gör det enkelt att välja mellan olika förprogrammerade termoplastmaterial eller att skapa sina egna favoritprogram. Kan ställas in för att starta och stänga automatiskt.

| Art. nr. | Modell          | Bredd                             | Längd                           | Höjd                              |
|----------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 64507    | Vattenbad       | Ytermått: 51,6 cm<br>Tub: 31,6 cm | Ytermått: 59 cm<br>Tub: 48,6 cm | Ytermått: 22,6 cm<br>Tub: 14,7 cm |
| 64508    | Dräneringsslang |                                   |                                 |                                   |
| 64509    | Värmeelement    |                                   |                                 |                                   |
| 64510    | EU elkabel      |                                   |                                 |                                   |
| 64511    | DK adapter      |                                   |                                 |                                   |
| 64512    | UV lampa        |                                   |                                 |                                   |



## X-LITE® plåt med silikonbeläggning

Används som arbetsyta vid gipsning med X-LITE. Silikonbeläggningen förhindrar att X-LITE fastnar i underlaget. Den perforerade ytan på plåten gör att överflödigt vatten ifrån X-LITE rullarna lätt kan rinna ner under plåten och sugas upp av underliggande handduk.

| Art. nr. | Bredd  | Längd  |
|----------|--------|--------|
| 64811    | 325 mm | 530 mm |

## Postoperativ sko

Behandlingssko tillverkad av slitstark laminerad nylon. Ovandelen är formsydd med ordentlig överlappning för att passa såväl mindre fötter som gips. Polstringen i hälpartiet ger god bekvämlighet och skyddar mot skav. Bakkappan är förstärkt för att hålla foten på plats. Sulan är stel och rak utan avrullning. Vid enklare mellanfotsoperationer kan gips uteslutas och skon användas direkt.

**Användningsområden:** Behandlingssko vid mellanfotsoperationer, tåfrakturer, hallux valgus-operationer och som gipssko.

| Art. nr. | Modell | Storlek | Längd innersula |
|----------|--------|---------|-----------------|
| 43205    | Herr   | Small   | 26 cm           |
| 43205    | Herr   | Medium  | 27,5 cm         |
| 43205    | Herr   | Large   | 30 cm           |
| 43205    | Herr   | X-Large | 31 cm           |
| 43206    | Dam    | Small   | 23,5 cm         |
| 43206    | Dam    | Medium  | 24,5 cm         |
| 43206    | Dam    | Large   | 26 cm           |



## 3D-LITE™

3D-LITE är en lågtemperaturplast tillverkad av en tredimensionell polyesterväv som impregnerats med termoplast. Materialet är stabilt, lätt, luftigt och enkelt att forma. Det har en smidig yta och det blir inte några fingeravtryck i materialet under bearbetningen. Materialet har stretch i en riktning. Värms i vattenbad vid 70°C eller ugn vid 80°C.

**Användningsområden:** Ortostillverkning. 3 mm rekommenderas till små ortoser och mindre kroppsdelar. 5 mm rekommenderas till halvstora ortoser som frakturortoser. 7 mm rekommenderas till större ortoser som exempelvis korsetter.

| Art. nr. | Modell        | Bredd  | Längd   | Tjocklek | Förp. |
|----------|---------------|--------|---------|----------|-------|
| 64896    | 3D-LITE Beige | 600 mm | 600 mm  | 3 mm     | 1 ark |
| 64897    | 3D-LITE Beige | 600 mm | 900 mm  | 3 mm     | 1 ark |
| 64898    | 3D-LITE Beige | 600 mm | 600 mm  | 5 mm     | 1 ark |
| 64899    | 3D-LITE Beige | 600 mm | 900 mm  | 5 mm     | 1 ark |
| 64900    | 3D-LITE Beige | 600 mm | 600 mm  | 7 mm     | 1 ark |
| 64901    | 3D-LITE Beige | 600 mm | 900 mm  | 7 mm     | 1 ark |
| 64905    | 3D-LITE Beige | 650 mm | 1200 mm | 5 mm     | 1 ark |





### 3D-Safe

3D-Safe är ett kantband av polyeteneskumplast. Bandet är självhäftande och något elastiskt. Enkelt och snabbt att applicera. För ökad stretch och vidhäftning bör man värma kantbandet med varmluftspistol före applicering.

**Användningsområden:** Som kantband eller polstring på ortoser.

| Art. nr. | Färg | Bredd | Längd | Tjocklek | Förp.   |
|----------|------|-------|-------|----------|---------|
| 64200    | Vit  | 40 mm | 10 m  | 3 mm     | 1 rulle |



# Lågtemperaturplaster

Olika applikationer som tillverkas i lågtemperaturplast ställer olika krav. Camp erbjuder därför ett brett urval av lågtemperaturplaster som gör det möjligt att hitta rätt egenskaper utifrån patientens behov.


De flesta av våra lågtemperaturplaster kommer från Rolyan som har mer än 30 års erfarenhet inom området. Patterson medical (Rolyan) arbetar hela tiden med att bevara och förbättra sin höga kvalitet och samtidigt prioriteras forskning och utveckling av nya produkter. Samtliga plaster är ofarliga att bearbeta. Inga skadliga ämnen avsöndras vid bearbetning.

## Plasternas och de färdiga ortosernas egenskaper beror på en rad olika faktorer.

- Minne - Förmåga att återgå till ursprungsform.
- Följsamhet - Förmåga att anpassa sig till underlaget i uppvärmt tillstånd.
- Stretchmotstånd - Förmåga att ge efter för sträckning och tryck i uppvärmt tillstånd.
- Fästförmåga - Förmåga att fästa mot sig själv i uppvärmt tillstånd.
- Uppvärmning- och bearbetningstid.


## Olika perforeringar för lägre vikt och ventilation.

- Perforerad 1% - Mycket glest sittande, stora hål (2,5 cm mellan hålen).
- Perforerad 2,5% - Glest sittande, stora hål (1 cm mellan hålen).
- Optiperforerad 19% - Tättsittande, små hål.
- Ultraperforerad 13% - Tätttsittande, mycket små hål.
- Superperforerad 42% - Mycket tättsittande, små hål.

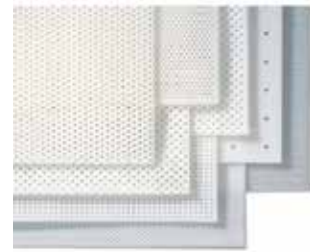

Procenttalet anger hur mycket material som är borttaget. Exempelvis Superperforerat 42% anger att 42% av materialet är borttaget.

VI REKOMMENDERAR FÖRVARING I MÖRKT OCH TORRT UTRYMME.

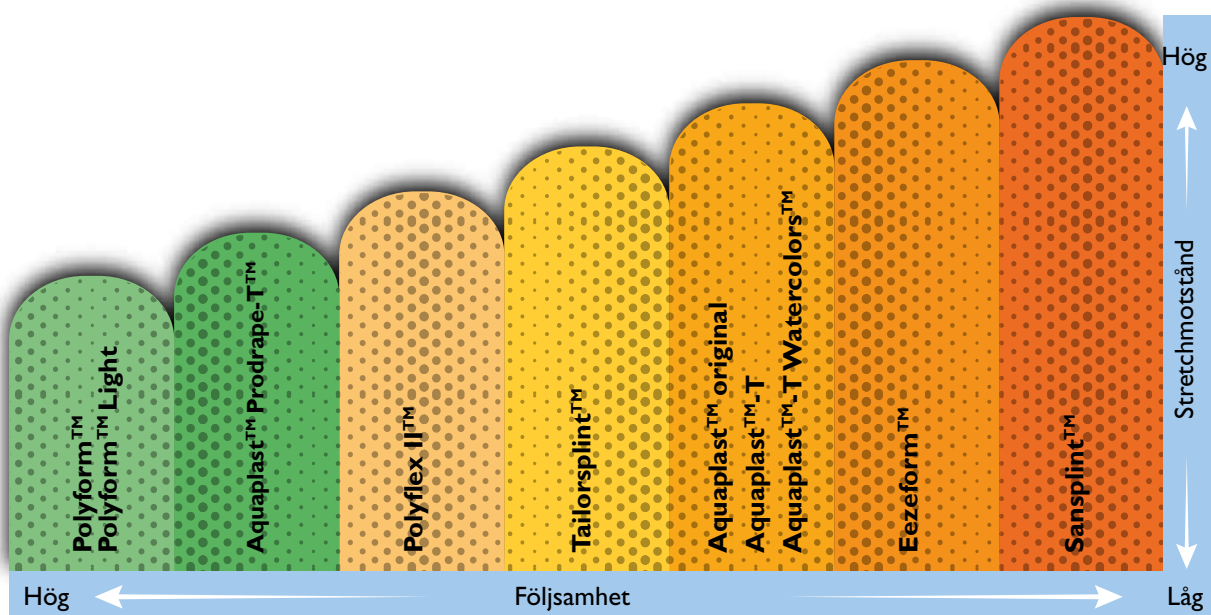

### Minimalt motstånd till stretch


- Utmärkt följsamhet
- Lätt att töja ut
- Lätt att hantera

### Måttligt motstånd till stretch

- Formar sig lätt
- Högre kontroll

### Maximalt motstånd till stretch

- Stadigt material
- Hög hållbarhet
- Rigid slutprodukt

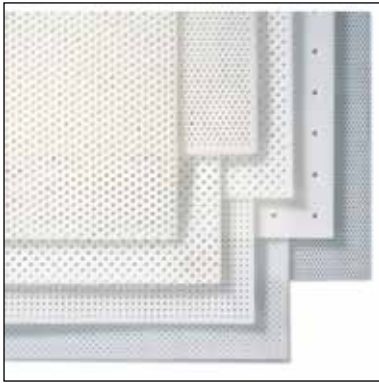

## Om Aquaplast™

Aquaplast™ sortimentet består av ett brett urval av material med flera gemensamma men också unika egenskaper för att möta olika behov. Aquaplast är en lättarbetad plast. Sortimentet består av plaster med följande egenskaper:

Aquaplast™ Original - Fäster mot sig själv

Aquaplast-T™ - Har "Non-sticky" yta (fäster ej mot sig själv)

Aquaplast™ Prodrap™-T - Har "Non-sticky" yta (fäster ej mot sig själv) och mycket hög formbarhetsgrad

Aquaplast-T™ Antimicrobial - Har "Non-sticky" yta (fäster ej mot sig själv) och minskar risken för dålig lukt

Aquatube™ - Fäster permanent mot andra Rolyanplaster

Aquaplast™ Watercolors - Har "Non-sticky" yta (fäster ej mot sig själv) och finns i många färger.



## Aquaplast™ Original

Aquaplast™ Original finns i olika tjocklekar och perforeringar och passar till ett stort urval av ortoser. Materialet är inte ytbehandlat och fäster omedelbart och permanent mot sig själv. Materialet formar sig väl och har självslutande kanter. Plasten har 100 % minne och blir transparent vid uppvärmning. Vid kontakt med ytan lämnas inga bestående fingeravtryck. Kan även värmas i ugn. Observera: Använd bottenkydd i värmekärlet. Egenskaper för den färdiga ortosen: Ger en stödjande ortos med en jämn och mjuk yta.

**Användningsområden:** Bas till dynamiska och statiska ortoser; tum-, finger- och handledsortoser; 3,2 mm även till arm- och benortoser.

| Art. nr. | Färg  | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp. | Massiv/Perf.  |
|----------|-------|--------|--------|----------|-------|---------------|
| 50121    | Beige | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 1 ark | Massiv        |
| 50122    | Beige | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Massiv        |
| 50123    | Beige | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Optiperf. 19% |
| 50124    | Beige | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 1 ark | Optiperf. 19% |
| 50125    | Beige | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Optiperf. 19% |

## Aquaplast-T™

Aquaplast-T™ finns i många tjocklekar och perforeringar och passar till ett stort urval av ortoser. Den formar sig väl och har självslutande kanter. Har 100 % minne och blir transparent vid uppvärmning. Ytbehandlad för att ge en "Non-sticky" yta. Vid kontakt med ytan lämnas inga bestående fingeravtryck. Kan även värmas i ugn. Egenskaper för den färdiga ortosen: Ger en stödjande ortos med en jämn och mjuk yta. Lämpar sig för upprepad ekonomisk omarbetning. Den vita Aquaplasten blir genomskinlig vid uppvärmning vilket gör att man lättare kan se prominenser och eventuella områden som kräver extra avlastning. Kardborrband häftar lättare om man först ruggar upp ytan på plasten.

**Användningsområden:** Bas till dynamiska och statiska ortoser för tum-, finger- och handledsortoser, 3,2 mm även till arm- och benortoser.

| Art. nr. | Färg | Typ            | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp. |
|----------|------|----------------|--------|--------|----------|-------|
| 50126    | Vit  | Massiv         | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark |
| 50127    | Vit  | Massiv         | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 1 ark |
| 50128    | Vit  | Massiv         | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark |
| 50129    | Vit  | Massiv         | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 4 ark |
| 50133    | Vit  | Superperf. 42% | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark |
| 50134    | Vit  | Superperf. 42% | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 1 ark |
| 50135    | Vit  | Superperf. 42% | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark |
| 50136    | Vit  | Optiperf. 19%  | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark |
| 50137    | Vit  | Optiperf. 19%  | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 1 ark |
| 50138    | Vit  | Optiperf. 19%  | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark |
| 50331    | Vit  | Ultraperf. 13% | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark |



## Aquaplast™ Prodrape™ -T

Aquaplast™ Prodrape™ -T är den Aquaplast som har bäst formbarhet och följsamhet. Den anpassar sig mycket väl till konturer. Kanterna är självslutande. Materialet har 100 % minne och blir transparent vid uppvärmning. Ytbehandlad för att ge en "Non-sticky" yta. Vid kontakt med materialytan lämnas inga bestående fingeravtryck. Kan även värmas i ugn. Egenskaper för den färdiga ortosen: Ger en stödjande ortos som nära följer alla konturer. Idealiskt för patienter med ömmande leder. Lämpar sig för upprepad ekonomisk omarbetning. Den vita Aquaplasten blir genomskinlig vid uppvärmning vilket gör att man lättare kan se prominenser och eventuella områden som kräver extra avlastning. Kardborrband häftar lättare om man först ruggar upp ytan på plasten.

**Användningsområden:** Akut trauma, smärta och ledirritationer, tum-, finger- hand- och handledsortoser.

| Art. nr. | Färg | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp. | Massiv/Perf. |
|----------|------|--------|--------|----------|-------|--------------|
| 50165    | Vit  | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 1 ark | Massiv       |
| 50166    | Vit  | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Massiv       |





## Aquaplast™ Watercolors™

Aquaplast™ Watercolors™ har samma egenskaper som Aquaplast-T™. Den finns i många tjocklekar och perforeringar som passar till ett stort urval av ortoser. Detta ger patient och terapeut stor valfrihet. Den formar sig väl och har självslutande kanter. Har 100 % minne. De ljusa färgerna blir något transparenta vid uppvärmning. Ytbehandlad för att ge en "Non-sticky" yta. Vid kontakt med materialytan lämnas inga bestående fingeravtryck. Kan även värmas i ugn.

Egenskaper för den färdiga ortosen: Ger en stödjande ortos med en jämn och följsam yta. Lämpar sig för upprepade ekonomiska omarbetsningar.

**Användningsområden:** Barnortoser, bas till dynamiska och statiska tum-, finger- och handledsortoser. 3,2 mm även till arm- och benortoser.

| Art. nr. | Färg     | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp. | Massiv/Perf.   |
|----------|----------|--------|--------|----------|-------|----------------|
| 50144    | Svart    | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Massiv         |
| 50145    | Svart    | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Optiperf. 19%  |
| 50146    | Svart    | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Massiv         |
| 50147    | Svart    | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Optiperf. 19%  |
| 50334    | Svart    | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Ultraperf. 13% |
| 50140    | Klarblå  | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Massiv         |
| 50143    | Klarblå  | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Optiperf. 19 % |
| 50141    | Klarblå  | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Optiperf. 19%  |
| 50142    | Klarblå  | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Massiv         |
| 50321    | Blå      | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Optiperf. 19%  |
| 50333    | Klarblå  | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Ultraperf. 13% |
| 50308    | Marinblå | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Optiperf. 19%  |
| 50309    | Lavendel | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Optiperf. 19%  |
| 50322    | Lavendel | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Optiperf. 19%  |
| 50343    | Lavendel | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Ultraperf. 13% |
| 50154    | Lila     | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 1 ark | Massiv         |
| 50155    | Lila     | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 1 ark | Optiperf. 19%  |
| 50313    | Lila     | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Massiv         |
| 50336    | Lila     | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Ultraperf. 13% |
| 50152    | Lila     | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Massiv         |
| 50153    | Lila     | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Optiperf. 19%  |
| 50164    | Limegrön | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Massiv         |
| 50307    | Limegrön | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Optiperf. 19%  |
| 50317    | Limegrön | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Massiv         |
| 50340    | Limegrön | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Ultraperf. 13% |
| 50304    | Ljusrosa | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Optiperf. 19%  |
| 50300    | Hot Pink | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Massiv         |
| 50314    | Hot Pink | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Massiv         |
| 50337    | Hot Pink | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Ultraperf. 13% |
| 50149    | Röd      | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Optiperf. 19%  |
| 50150    | Röd      | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 1 ark | Massiv         |
| 50151    | Röd      | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 1 ark | Optiperf. 19%  |
| 50139    | Röd      | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Massiv         |
| 50335    | Röd      | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Ultraperf. 13% |
| 50156    | Beige    | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Massiv         |
| 50157    | Beige    | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Optiperf. 19%  |
| 50158    | Beige    | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 1 ark | Massiv         |

| Art. nr. | Färg         | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp. | Massiv/Perf.    |
|----------|--------------|--------|--------|----------|-------|-----------------|
| 50159    | Beige        | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 1 ark | Optiperf. 19%   |
| 50160    | Beige        | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Massiv          |
| 50161    | Beige        | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Optiperf. 19%   |
| 50341    | Beige        | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Ultraparf. 13%  |
| 50323    | Blå Metallic | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Massiv          |
| 50344    | Blå Metallic | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Optiperf. 19 %  |
| 50359    | Blå Metallic | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 1 ark | Ultraparf. 13%  |
| 50348    | Blå Metallic | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Ultraparf. 13%  |
| 50325    | Silver       | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Massiv          |
| 50346    | Silver       | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Optiperf. 19 %  |
| 50349    | Silver       | 460 mm | 610 mm | 1,6 mm   | 1 ark | Ultraparf. 13 % |
| 50312    | Silver       | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 1 ark | Ultraparf. 13 % |
| 50329    | Klarblå      | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 1 ark | Optiperf. 19 %  |



## Polyform™ och Polyform™ light

Polyform har goda stretchegenskaper vilket gör att materialet passar till komplexa ortoser. Är lätt ytbehandlat och har självslutande kanter. Har inget minne. Var noggrann då kontakt med materialytan lätt kan ge bestående fingeravtryck och märken. Egenskaper för den färdiga ortosen: Ger en rigid och stödjande ortos.

**Användningsområden:** Akut trauma, smärta och ledirritationer; tum-, finger- och handledsortoser.

| Art. nr. | Färg | Bredd  | Längd  | Tjocklek       | Förp. | Massiv/Perf. |
|----------|------|--------|--------|----------------|-------|--------------|
| 50100    | Vit  | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm         | 1 ark | Massiv       |
| 50101    | Vit  | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm         | 4 ark | Massiv       |
| 50102    | Vit  | 610 mm | 910 mm | 3,2 mm         | 1 ark | Massiv       |
| 50103    | Vit  | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm         | 1 ark | Perf. 1%     |
| 50107    | Vit  | 310 mm | 460 mm | 1,6 mm (light) | 4 ark | Massiv       |



## Polyflex II™

Polyflex II har goda stretchegenskaper men inte mer än att kontrollen bibehålls under ortosframställningen. Materialet har ett visst minne vilket underlättar vid mindre justeringar. Lätt ytbehandlad. Kanterna bör trimmas. Var noggrann då kontakt med materialytan lätt kan ge bestående fingeravtryck och märken. Egenskaper för den färdiga ortosen: Ger en rigid och stödjande ortos som är flexibel, vilket underlättar på- och avtagning. Flexibiliteten i den färdiga ortosen kan utnyttjas vid exempelvis patienter med svag handfunktion eller lindrig tonusförhöjning.

**Användningsområden:** Akut trauma, smärta och ledirritationer; tum-, finger- hand- och handledsortoser; bas till dynamiska ortoser och ortoser till patienter med neurologiska sjukdomar.

| Art. nr. | Färg | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp. | Massiv/Perf. |
|----------|------|--------|--------|----------|-------|--------------|
| 50109    | Vit  | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 1 ark | Massiv       |
| 50113    | Vit  | 610 mm | 910 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Perf. 1%     |
| 50114    | Vit  | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 4 ark | Perf. 1%     |

## TailorSplint™

Tailorsplint är en allsidig plast. Täcker ett brett behov och kan användas till många olika ortoser. Medium stretchmotstånd tillåter att platen kan bearbetas lite hårdare samtidigt som god kontroll bibehålls. Ytbehandlad. Kanterna rullas enkelt och är självslutande. Vid kontakt med materialytan lämnas inga bestående fingeravtryck. Egenskaper för den färdiga ortosen: Ytan är puderaktig, vilket ger en fin finish.

**Användningsområden:** Tum-, finger- och handledsortoser, 3,2 mm även till arm- och benortoser, bas till dynamiska ortoser och ortoser till patienter med neurologiska sjukdomar.

| Art. nr. | Färg  | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp. | Massiv/Perf. |
|----------|-------|--------|--------|----------|-------|--------------|
| 50116    | Beige | 310 mm | 460 mm | 1,6 mm   | 4 ark | Massiv       |
| 50117    | Beige | 460 mm | 610 mm | 2,4 mm   | 4 ark | Massiv       |
| 50118    | Beige | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 4 ark | Massiv       |



## Ezeform™ och Ezeform™ light

Ezeform är utvecklad speciellt för att ge ett maximalt motstånd mot sträckning samtidigt som platen formar sig väl till underlaget och även tillåter en aggressivare hantering. Håller formen och passar till större ortoser. Materialet har en lätt klabbig yta, vilket gör att den inte glider under modelleringen. Självslutande kanter. Fäster permanent mot sig själv. Vid kontakt med materialytan lämnas inte några fingeravtryck. Egenskaper för den färdiga ortosen: Ger en mycket rigid ortos med fin finish.

**Användningsområden:** Ortoser till patienter med neurologiska sjukdomar, vilo- och funktionella ortoser till både övre och nedre extremiteter, bas till större dynamiska ortoser, Ezeform light till barnortoser.



| Art. nr. | Färg  | Bredd  | Längd  | Tjocklek       | Förp. | Massiv/Perf. |
|----------|-------|--------|--------|----------------|-------|--------------|
| 50170    | Vit   | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm         | 4 ark | Massiv       |
| 50171    | Vit   | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm         | 1 ark | Massiv       |
| 50173    | Beige | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm         | 1 ark | Massiv       |
| 50174    | Beige | 610 mm | 910 mm | 3,2 mm         | 1 ark | Massiv       |
| 50175    | Blå   | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm         | 1 ark | Massiv       |
| 50176    | Blå   | 610 mm | 910 mm | 3,2 mm         | 1 ark | Massiv       |
| 50178    | Vit   | 610 mm | 910 mm | 3,2 mm         | 1 ark | Perf 1 %     |
| 50179    | Beige | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm         | 1 ark | Perf 1 %     |
| 50180    | Beige | 610 mm | 910 mm | 3,2 mm         | 1 ark | Perf 1 %     |
| 50181    | Blå   | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm         | 1 ark | Perf 1 %     |
| 50182    | Blå   | 610 mm | 910 mm | 3,2 mm         | 1 ark | Perf 1 %     |
| 50183    | Vit   | 310 mm | 460 mm | 1,6 mm (light) | 4 ark | Massiv       |
| 50184    | Beige | 310 mm | 460 mm | 1,6 mm (light) | 4 ark | Massiv       |





## Ezeform™ Antimicrobial

Ezeform™ Antimicrobial har en antimikrobial behandling som hämmar bakterietillväxt och dålig lukt. Ytbehandlingen kan inte "tvättas" bort. När en skena eller ortos skall brukas under lång tid eller användas i utsatta miljöer, lämpar sig detta material väl. Övriga egenskaper enligt Ezeform™.

**Användningsområden:** Ortoser till patienter med neurologiska sjukdomar, vilo- och funktionella ortoser till både övre och nedre extremiteter; bas till större dynamiska ortoser.

| Art. nr. | Färg | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp. | Massiv/Perf. |
|----------|------|--------|--------|----------|-------|--------------|
| 50187    | Vit  | 460 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 1 ark | Massiv       |



## San-Splint™ och San-Splint™ light

San-Splint ger maximalt motstånd mot sträckning vilket gör att den passar väl till större ortoser, då det krävs kontroll under framställningen. San-Splint är en Isoprene-gummibaserad plast som tillåter aggressiv hantering och håller formen. Materialet fäster permanent mot sig själv om kanterna trycks samman. Vid kontakt med materialytan lämnas inga bestående fingeravtryck. Kan värmas i ugn. Egenskaper för den färdiga ortosen: Hög grad av rigiditet utan förstärkningar.

**Användningsområden:** Frakturortoser; body jackets och korsetter.

| Art. nr. | Färg  | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp. | Massiv/Perf. |
|----------|-------|--------|--------|----------|-------|--------------|
| 50200    | Beige | 610 mm | 910 mm | 3 mm     | 1 ark | Massiv       |
| 50204    | Beige | 610 mm | 910 mm | 3 mm     | 1 ark | Perf. 2,5%   |
| 50205    | Beige | 460 mm | 610 mm | 3 mm     | 4 ark | Perf. 2,5%   |



## Plastazote™

Polyeteneskum för tillverkning av ortoser. Lämplig för ortoser där höga krav ställs på komfort. Krymper ej. Värms i ugn i 40°C. Mindre ändringar kan göras med hjälp av värmepistol.

**Användningsområden:** Inlägg, halskragar, ortoser till reumatiker och diabetespatienter; framställning av specialgrepp och polstring av ortoser.

| Art. nr. | Färg  | Bredd  | Längd   | Tjocklek | Förp. | Massiv/Perf. |
|----------|-------|--------|---------|----------|-------|--------------|
| 50521    | Beige | 760 mm | 1000 mm | 12 mm    | 1 ark | Perf.        |




## Aliplast

En copolymerfoam som fäster mot sig själv. Materialet har en slät yta som är lätt att hålla ren. Lämpligt för applikationer som måste ligga direkt mot huden. Vacuumformbart. Värms i ugn 70-120°C. Blir klabbig om så önskas vid hög temperatur och vid lång tid i ugn. Finns i tre hårdhetsgrader.

**Användningsområden:** Polstringsmaterial för ortoser och för tillverkning av t.ex. pelletter.


| Art. nr. | Färg | Hårdhet   | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp.   |
|----------|------|-----------|--------|--------|----------|---------|
| 30400    | Vit  | Mjuk 4E   | 750 mm | 900 mm | 3 mm     | 1 ark   |
| 30401    | Vit  | Mjuk 4E   | 750 mm | 900 mm | 6 mm     | 1 ark   |
| 30405    | Vit  | Mjuk 4E   | 750 mm | 35 m   | 3 mm     | 1 rulle |
| 30406    | Vit  | Mjuk 4E   | 750 mm | 24 m   | 6 mm     | 1 rulle |
| 30410    | Vit  | Medium 6A | 750 mm | 600 mm | 3 mm     | 1 ark   |
| 30411    | Vit  | Medium 6A | 750 mm | 600 mm | 6 mm     | 1 ark   |
| 30415    | Vit  | Hård 10   | 750 mm | 600 mm | 3 mm     | 1 ark   |
| 30416    | Vit  | Hård 10   | 750 mm | 12 m   | 3 mm     | 1 rulle |

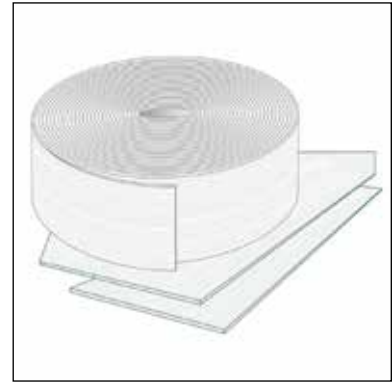

## Thermofoam LD

Polstringsmaterial i Polyetene med medium densitet. Har slutna celler. Går utmärkt att skära och klippa i men kan också stansas. Värms i ugn 155°C. Lätt att efterjustera.

| Art. nr. | Färg | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp. |
|----------|------|--------|--------|----------|-------|
| 30451    | Vit  | 750 mm | 900 mm | 12,5 mm  | 1 ark |

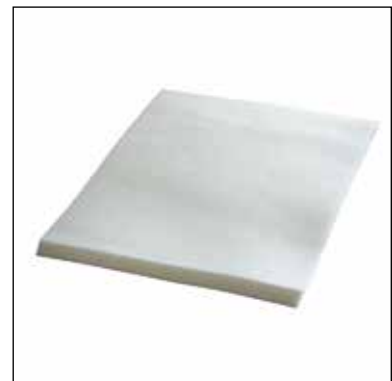

## Durofoam HD

Polstringsmaterial i polyetene med hög densitet och öppna celler som behåller sin tjocklek under lång period. Går utmärkt att skära och klippa i men kan också stansas. Värms i ugn i 150-170°C. Lätt att efterjustera.

| Art. nr. | Färg | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp. |
|----------|------|--------|--------|----------|-------|
| 30450    | Vit  | 610 mm | 610 mm | 12,5 mm  | 1 ark |





## Polypropylene

Copolymerplast som är styv och seg och har god stabilitet. Värms i ugn i 200-210°C eller vacuumformas. Materialet fäster mot sig själv. Mindre ändringar kan göras med hjälp av värmepistol.

**Användningsområden:** Ortostillverkning.

| Art. nr. | Färg | Bredd  | Längd   | Tjocklek | Förp. |
|----------|------|--------|---------|----------|-------|
| 38039    | Vit  | 600 mm | 1200 mm | 2 mm     | 1 ark |
| 38040    | Vit  | 675 mm | 1050 mm | 3 mm     | 1 ark |
| 38041    | Vit  | 675 mm | 1050 mm | 4 mm     | 1 ark |
| 38042    | Vit  | 675 mm | 1050 mm | 5 mm     | 1 ark |



## Non Slip material

Ett anti-glid material som genom sin friktion är perfekt för ytor där man önskar förhindra nötning. Materialet är speciellt framtaget för att användas på KiddieGAITs fotblad, för att hindra att t.ex. en SureStep-ortos glider mot det blanka fotbladet. OBS! Detta material skall inte användas direkt mot huden.

| Art. nr. | Färg  | Bredd | Längd |
|----------|-------|-------|-------|
| 28411    | Svart | 14 cm | 1 m   |



## Ortosstrumpa Komfort

Färdigsydd ortosstrumpa i extra tjockt och mjukt material. Alla kanter är dubbla eller sydda med overlocksöm för ökad hållbarhet. Kan användas istället för polstring.

| Art. nr. | Modell             | Färg  | Storlek    | Förp.    |
|----------|--------------------|-------|------------|----------|
| 51107    | Handled            | Natur | En storlek | 10 styck |
| 51108    | Handled/Tumme lång | Natur | En storlek | 10 styck |



## comfortKIT™ material

ComfortKIT är ett material med en inre kärna av så kallat "memory foam" som gör att det naturligt anpassar sig efter kroppsformen. När materialet vilar återgår det till sin ursprungliga form.


**Användningsområden:** Materialet används i polstringen comfortKIT™, som är avsedd för ToeOFF® och BlueROCKER®. Materialet kan med fördel användas som polstring till olika ortoser.

| Art. nr. | Färg  | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp. |
|----------|-------|--------|--------|----------|-------|
| 30422    | Svart | 300 mm | 400 mm | 10 mm    | 1 ark |

## T-Stick

Tryckavlastande material i polyuretan som andas. Materialet formar sig efter kroppen och har minne så det återgår till ursprungsformen. Används till avlastning av tryckpunkter och som polstring i ortoser och proteser. Arken 51100 och 51102 har självhäftande baksida. Finns i två hårdhetsgrader.

| Art. nr. | Färg | Hårdhetsgrad | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp. |
|----------|------|--------------|--------|--------|----------|-------|
| 51100    | Blå  | Medium       | 410 mm | 610 mm | 9,5 mm   | 2 ark |
| 51101    | Blå  | Medium       | 410 mm | 610 mm | 25 mm    | 1 ark |
| 51102    | Rosa | Mjuk         | 410 mm | 610 mm | 9,5 mm   | 2 ark |

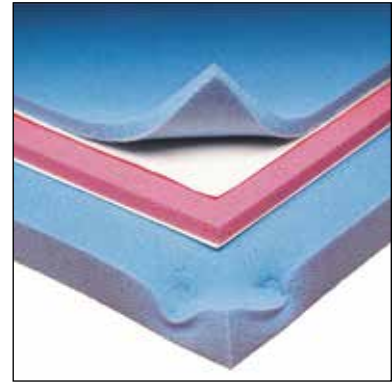

## Polycushion polstring

Skumpolstring med lätt tryckavlastande effekt. Används som polstring av ortoser. Polstringen har stängda celler, är lätt att rengöra och kan fästas på ortosen innan uppvärmning i vattenbad. Materialet är självhäftande. Den lägre vidhäftningsförmågan underlättar vid byte av polstring. Lätt att klippa till önskad form.

| Art. nr. | Modell            | Färg  | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp. |
|----------|-------------------|-------|--------|--------|----------|-------|
| 51120    | Vidhäftning = Hög | Beige | 450 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 4 ark |
| 51115    | Vidhäftning = Låg | Beige | 450 mm | 610 mm | 3,2 mm   | 4 ark |



## Fleecy Web

Extremt mjukt självhäftande material i 100 % bomull med mollskinnskänsla. Används som polstring till ortoser. Mycket töjbart och därför lätt att applicera i en färdig ortos.

| Art. nr. | Färg | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp.   |
|----------|------|--------|--------|----------|---------|
| 51110    | Rosa | 225 mm | 400 mm | 2 mm     | 4 ark   |
| 51104    | Rosa | 50 mm  | 3 m    | 2 mm     | 1 rulle |





## Fleecy Foam

Mjukt självhäftande material laminerat mot en skumkärna som ger lätt tryckavlastande effekt. Används som avlastning av tryckpunkter eller som polstring för hela ortosen.

| Art. nr. | Färg  | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp. |
|----------|-------|--------|--------|----------|-------|
| 51105    | Beige | 230 mm | 460 mm | 4,8 mm   | 4 ark |




## Mollskinn rulle

Mjukt material med självhäftande baksida. Används till polstring av ortoser och som kantpolstring.

**Övrigt:** Innehåller latex.

| Art. nr. | Färg  | Bredd  | Längd | Tjocklek | Förp.   |
|----------|-------|--------|-------|----------|---------|
| 51125    | Beige | 300 mm | 4,6 m | 0,8 mm   | 1 rulle |

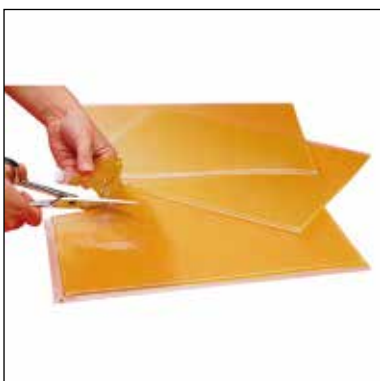

## Gel-polstring

Avlastande gel som inte kan komprimeras fullständigt. Lämplig för ortoser, handskar och skor. Fördelar trycket och minskar friktionen mot huden. Kan klippas till önskad storlek. Det rekommenderas att kanterna förseglas med t.ex. kirurgisk tejp efter tillklippning. Små variationer i färg kan förekomma.

| Art. nr. | Färg | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp. |
|----------|------|--------|--------|----------|-------|
| 51140    | Gul  | 250 mm | 340 mm | 3,2 mm   | 1 ark |
| 51141    | Gul  | 250 mm | 340 mm | 4,8 mm   | 1 ark |
| 51142    | Gul  | 250 mm | 340 mm | 6,4 mm   | 1 ark |

## Neoprene™

Latexfri neoprene med en nylonsida och en sida med mjuk velour mot vilken hårt kardborrband fäster lätt. Används till framställning av mjuka ortoser eller som ortosband. Är lätt elastiskt vilket ger god passform. Materialet bevarar värmen och bidrar till ökad genomblödning. Utmärkt för patienter med reumatologiska sjukdomar.

| Art. nr. | Färg  | Bredd  | Längd  | Tjocklek | Förp.   |
|----------|-------|--------|--------|----------|---------|
| 51179    | Svart | 460 mm | 610 mm | 2,0 mm   | 1 ark   |
| 51180    | Beige | 460 mm | 610 mm | 2,0 mm   | 1 ark   |
| 51181    | Beige | 150 mm | 970 mm | 3,2 mm   | 1 ark   |
| 51183    | Beige | 25 mm  | 3,2 m  | 3,2 mm   | 1 rulle |
| 51184    | Blå   | 460 mm | 610 mm | 3,0 mm   | 1 ark   |
| 51189    | Grön  | 460 mm | 610 mm | 1,0 mm   | 1 ark   |



## Kardborrband mjukt standard

Den mjuka delen av standard-kardborrband är tillverkad av vävt band med sydda kanter. God hållfasthet i både dragriktning och öppningsriktning. Kan användas vid temperaturer mellan -30° till +140°C.

Övrigt: ÖKO-TEX klass 2.

| Art. nr. | Modell                | Bredd | Längd | Förp.   |
|----------|-----------------------|-------|-------|---------|
| 25020    | Mjukdel = Loop, Vit   | 25 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25020    | Mjukdel = Loop, Vit   | 50 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25021    | Mjukdel = Loop, Beige | 25 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25021    | Mjukdel = Loop, Beige | 50 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25027    | Mjukdel = Loop, Svart | 25 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25027    | Mjukdel = Loop, Svart | 50 mm | 25 m  | 1 rulle |



## Kardborrband hårt, standard

Hårt kardborrband med fästyta på en sida mot mjuka kardborrband. Tillverkat av vävt band med sydda kanter. God hållfasthet i både dragriktning och öppningsriktning. Kan användas i temperaturer mellan -30° till +140°C.

Övrigt: ÖKO-TEX klass 2.

| Art. nr. | Modell             | Bredd | Längd | Förp.   |
|----------|--------------------|-------|-------|---------|
| 25020    | Hård = Hook, Vit   | 25 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25020    | Hård = Hook, Vit   | 50 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25021    | Hård = Hook, Beige | 25 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25021    | Hård = Hook, Beige | 50 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25027    | Hård = Hook, Svart | 25 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25027    | Hård = Hook, Svart | 50 mm | 25 m  | 1 rulle |





## Kardborrband mjukt, elastiskt

Elastiskt kardborrband. God hållfasthet i både dragriktning och öppningsriktning. Kan användas vid temperaturer mellan -30° till +140°C.

Övrigt: ÖKO-TEX klass 2.

| Art. nr. | Modell                | Bredd | Längd | Förp.   |
|----------|-----------------------|-------|-------|---------|
| 25022    | Mjukdel = Loop,Vit    | 30 mm | 10 m  | 1 rulle |
| 25022    | Mjukdel = Loop,Vit    | 50 mm | 10 m  | 1 rulle |
| 25023    | Mjukdel = Loop, Beige | 30 mm | 10 m  | 1 rulle |
| 25023    | Mjukdel = Loop, Beige | 50 mm | 10 m  | 1 rulle |



## Kardborrband mjukt, självhäftande

Mjukt självhäftande kardborrband som fäster mot hårda kardborrband. God hållfasthet i både dragriktning och öppningsriktning. Kan bearbetas i temperaturer mellan -10° till +80°C. Vidhäftning vid högre och lägre temperaturer beror på fuktighet och yta.

Övrigt: ÖKO-TEX klass 2.

| Art. nr. | Modell                | Bredd | Längd | Förp.   |
|----------|-----------------------|-------|-------|---------|
| 25024    | Mjukdel = Loop,Vit    | 20 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25024    | Mjukdel = Loop,Vit    | 25 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25024    | Mjukdel = Loop,Vit    | 50 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25025    | Mjukdel = Loop, Beige | 25 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25028    | Mjukdel = Loop, Svart | 25 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25028    | Mjukdel = Loop, Svart | 50 mm | 25 m  | 1 rulle |



## Kardborrband hårt, självhäftande

Hårt självhäftande kardborrband som fäster mot mjuka kardborrband. God hållfasthet i både dragriktning och öppningsriktning. Kan bearbetas i temperaturer mellan -10° till +80°C. Vidhäftning vid högre och lägre temperaturer beror på fuktighet och yta.

Övrigt: ÖKO-TEX klass 2.

| Art. nr. | Modell             | Bredd | Längd | Förp.   |
|----------|--------------------|-------|-------|---------|
| 25024    | Hård = Hook,Vit    | 20 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25024    | Hård = Hook,Vit    | 25 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25024    | Hård = Hook,Vit    | 50 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25025    | Hård = Hook, Beige | 25 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25028    | Hård = Hook, Svart | 25 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25028    | Hård = Hook, Svart | 50 mm | 25 m  | 1 rulle |

## Kardborrband komfort mjukt, elastiskt

Den mjuka delen av ett elastiskt kardborreband. God hållfasthet i både dragriktning och öppningsriktning. Kan användas i vattentemperaturer mellan -30° till +140°C.

| Art. nr. | Färg | Bredd | Längd | Förp.   |
|----------|------|-------|-------|---------|
| 25030    | Vit  | 19 mm | 4,5 m | 1 rulle |
| 25030    | Vit  | 25 mm | 4,5 m | 1 rulle |
| 25030    | Vit  | 50 mm | 4,5 m | 1 rulle |



## Mikrofix hårt, självhäftande

Självhäftande hårt kardborrband (hook). Ultra-tunn, stark och med hög kvalitet. Det hårda kardborrbandet har mycket korta "krokar" som inte sliter onödigt och ger patienten bättre komfort.

| Art. nr. | Färg        | Bredd | Längd | Förp.   |
|----------|-------------|-------|-------|---------|
| 25040    | Transparent | 50 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25041    | Svart       | 50 mm | 25 m  | 1 rulle |



## Mikrofix mjukt

Mjukt självhäftande kardborrband som fäster mot Mikrofix hård och andra vanliga hårda kardborrband. Extra tunt.

| Art. nr. | Färg  | Bredd | Längd | Förp.   |
|----------|-------|-------|-------|---------|
| 25042    | Vit   | 50 mm | 25 m  | 1 rulle |
| 25043    | Svart | 50 mm | 25 m  | 1 rulle |



## Mjukt AFO band

Ett dubbelvävt mjukt band med lätt elasticitet för ökad smidighet. Avsett för olika ortosapplikationer. Fäster mot hårt kardborreband. Kan klippas till önskad längd utan att det fransar sig.

| Art. nr. | Färg  | Bredd | Längd | Förp.   |
|----------|-------|-------|-------|---------|
| 25060    | Svart | 40 mm | 10 m  | 1 rulle |
| 25061    | Svart | 50 mm | 10 m  | 1 rulle |





## D-ring plast

D-ringar i plast. Finns med eller utan fäste.

| Art. nr. | Modell     | Färg | Bredd | Förp.    |
|----------|------------|------|-------|----------|
| 25070    | Utan fäste | Vit  | 25 mm | 25 styck |
| 25070    | Utan fäste | Vit  | 50 mm | 25 styck |
| 25071    | Med fäste  | Vit  | 25 mm | 25 styck |
| 25071    | Med fäste  | Vit  | 50 mm | 25 styck |



## Fästband

Mjukt band med skumkärna. Kan klippas till önskad längd och har självslutande kant. Båda sidorna fäster mot hårda kardborrband.

| Art. nr. | Färg  | Bredd | Längd | Förp.       |
|----------|-------|-------|-------|-------------|
| 51160    | Beige | 25 mm | 9 m   | 1 dispenser |
| 51161    | Beige | 50 mm | 9 m   | 1 dispenser |



## Extra tunt band

Extra tunt, mjukt band för mindre ortoser. Fästyta på en sida mot hårda kardborrband. Förpackat i dispenser.

| Art. nr. | Färg | Bredd | Längd | Förp.       |
|----------|------|-------|-------|-------------|
| 51155    | Vit  | 13 mm | 9 m   | 1 dispenser |



## Fästband robust

Extra slitstarkt, mjukt band med en tunn skumkärna. Klarar att stängas och öppnas mer än 1000 gånger. Oelastiskt. Båda sidorna fäster mot hårda kardborrband.

| Art. nr. | Färg    | Bredd | Längd | Förp.   |
|----------|---------|-------|-------|---------|
| 51165    | Blå/Vit | 25 mm | 9 m   | 1 rulle |
| 51165    | Blå/Vit | 38 mm | 9 m   | 1 rulle |
| 51166    | Blå/Vit | 50 mm | 9 m   | 1 rulle |
| 51167    | Vit     | 25 mm | 9 m   | 1 rulle |
| 51168    | Vit     | 50 mm | 9 m   | 1 rulle |
| 51169    | Beige   | 25 mm | 9 m   | 1 rulle |
| 51170    | Beige   | 50 mm | 9 m   | 1 rulle |



## Foam-band

Extra mjukt band med en skumkärna. Kan klippas till önskad bredd och har självslåsande kant. Båda sidorna fäster mot hårda kardborrband.

| Art. nr. | Färg | Bredd | Längd | Förp.   |
|----------|------|-------|-------|---------|
| 51176    | Blå  | 50 mm | 4,6 m | 1 rulle |
| 51177    | Vit  | 50 mm | 4,6 m | 1 rulle |



## Kardborrband med D-ring

Självhäftande mjukt kardborrband med D-ring av nylon. Hårt kardborrband är monterat till förslutningen av bandet.

| Art. nr. | Färg | Bredd | Längd  | Förp.    |
|----------|------|-------|--------|----------|
| 51185    | Vit  | 25 mm | 300 mm | 10 styck |
| 51186    | Vit  | 25 mm | 460 mm | 10 styck |
| 51187    | Vit  | 50 mm | 300 mm | 10 styck |
| 51188    | Vit  | 50 mm | 460 mm | 10 styck |





## NuStim Wrap by Fabrifoam

NuStim Wrap by Fabrifoam med medium elasticitet. Sträckbar i alla riktningar. Formar sig väl efter kroppens konturer. Fabrifoam kan användas inom många olika områden, som tillverkning av mjuka ortoser, ortosband, stabiliserande förband och kompressionsförband. Materialet utgör ett alternativ till neoprene. Fabrifoam finns i två olika grader av stretch. Materialet är hudvänligt, andas och transporterar fukt. Materialet som är tunt har en antihalksida som inte glider mot huden och en sida mot vilken hårt kardborrband fäster lätt. Innehåller inte gummi.

| Art. nr. | Färg | Storlek         | Förp.    |
|----------|------|-----------------|----------|
| 50505    | Blå  | 100 mm x 0,91 m | 3 rullar |
| 50506    | Blå  | 100 mm x 1,22 m | 3 rullar |
| 50508    | Blå  | 150 mm x 1,22 m | 3 rullar |



## ProWrap by Fabrifoam

ProWrap by Fabrifoam med låg till medium elasticitet. Sträcker primärt i en riktning.

Fabrifoam kan användas inom många olika områden som tillverkning av mjuka ortoser, ortosband, stabiliserande förband och kompressionsförband. Materialet utgör ett alternativ till neoprene. Fabrifoam finns i två olika grader av stretch. Materialet är hudvänligt, andas och transporterar fukt. Materialet som är tunt har en antihalksida som inte glider mot huden och en sida mot vilken hårt kardborrband fäster lätt. Innehåller inte gummi.

| Art. nr. | Färg  | Storlek        | Förp.    |
|----------|-------|----------------|----------|
| 50500    | Beige | 50 mm x 3,6 m  | 2 rullar |
| 50502    | Beige | 150 mm x 4,5 m | 1 rulle  |



## Fingerögla

Mjuka, luftiga fingerögla av skinn som enkelt kan trimmas till önskad bredd och form. Metallöglorna gör det lätt att förbinda tråd och resår.

**Användningsområden:** Till dynamiska ortoser.

| Art. nr. | Färg | Bredd | Längd  | Förp.    |
|----------|------|-------|--------|----------|
| 51232    | Brun | 22 mm | 76 mm  | 10 styck |
| 51233    | Brun | 22 mm | 102 mm | 10 styck |

[illegible]

# Översikt lågtemperaturplaster

|                                                         | Sansplint                                                          | Polyform                             | Polyflex                             | Aquaplast Original               | Aquaplast T                                               | Aquaplast T Antimikrobial    | Aquaplast T Prodrapé                                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Färgförändring</b>                                   | Nej                                                                | Nej                                  | Nej                                  | Blir transparent                 | Blir transparent                                          | Blir transparent             | Blir transparent                                       |
| <b>Fäster mot huden</b>                                 | I liten grad<br>Använd strumpa                                     | Nej                                  | Nej                                  | Ja                               | Nej                                                       | Nej                          | Nej                                                    |
| <b>Fäster mot sig själv</b>                             | I viss omfattning under bearbetning<br>Permanent vid hoptryckning. | I viss omfattning<br>Ej permanent *) | I viss omfattning<br>Ej permanent *) | Permanent                        | I viss omfattning under bearbetning<br>Ej permanent *)    | Nej                          | I viss omfattning under bearbetning<br>Ej permanent *) |
| <b>Tänjbar</b>                                          | Motståndskraftig                                                   | Mycket tänjbar                       | Något begränsad                      | Begränsad                        | Begränsad                                                 | Begränsad                    | Mycket tänjbar                                         |
| <b>Stretch-motstånd</b>                                 | Maximum                                                            | Minimum                              | Medium                               | Medium                           | Medium                                                    | Medium                       | Minimum                                                |
| <b>Följsamhet</b>                                       | Mindre god                                                         | Överlägsen                           | Mycket god                           | God                              | God                                                       | God                          | Överlägsen                                             |
| <b>Minne (Omformningsbar)</b>                           | Något (för efterjustering)                                         | Något (för efterjustering)           | Något (för efterjustering)           | Ja                               | Ja                                                        | Ja                           | Ja                                                     |
| <b>Fingeravtryck</b>                                    | Nej                                                                | Ja                                   | Ja                                   | Nej                              | Nej                                                       | Nej                          | Nej                                                    |
| <b>Kanter</b>                                           | Fina<br>Kan trimmas lätt                                           | Kan trimmas lätt                     | Kan trimmas lätt                     | Fina                             | Fina                                                      | Fina                         | Fina                                                   |
| <b>Perf/Operf</b>                                       | Massiv<br>Perf 2,5 %                                               | Massiv<br>Perf 1 %                   | Massiv<br>Perf 1 %                   | Massiv<br>Perf 13 %<br>Perf 19 % | Massiv<br>Perf 1 %<br>Perf 13 %<br>Perf 19 %<br>Perf 42 % | Massiv<br>Perf 19 %          | Massiv                                                 |
| <b>Färger</b>                                           | Beige                                                              | Vit<br>Beige                         | Vit                                  | Vit<br>Beige                     | Vit                                                       | Vit                          | Vit                                                    |
| <b>Temperatur<br/>Tid i vattenbad</b>                   | 70-80°C<br>30 sek –<br>1 min                                       | 65-70°C<br>30 sek –<br>1 min         | 65-70°C<br>1 min                     | 70-75°C<br>35 sek –<br>1 min     | 70-75°C<br>35 sek –<br>1 min                              | 70-75°C<br>35 sek –<br>1 min | 70-75°C<br>1 min                                       |
| <b>Bearbetningstid<br/>1,6 mm<br/>2,4 mm<br/>3,2 mm</b> | 1-3 min (2 mm)<br>4-5 min (3 mm)                                   | 1 min<br><br>3-5 min                 | 2-3 min<br>4-6 min                   | 1-2 min<br>2-3 min<br>4-6 min    | 1-2 min<br>2-3 min<br>4-6 min                             | 2-3 min<br>4-6 min           | 2-3 min<br>4-6 min                                     |
|                                                         | Sansplint                                                          | Polyform                             | Polyflex                             | Aquaplast Original               | Aquaplast T                                               | Aquaplast T Antimikrobial    | Aquaplast T Prodrapé                                   |

\*) Kan permanent fästas mot sig själv genom att slipa eller skrapa ytan med vasst instrument.

| <b>Aquaplast Water-colors</b>     | <b>Ezeform</b>                                                        | <b>Ezeform Antimikrobial</b>       | <b>X-Lite Classic</b>                 | <b>X-Lite Premium</b>                 | <b>3D-Lite</b>                                    |                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nej                               | Nej                                                                   | Nej                                | Nej                                   | Nej                                   | Nej                                               | <b>Färgförändring</b>                                   |
| Nej                               | I liten grad<br>Drar i håren                                          | Nej                                | Nej                                   | Nej                                   | Nej                                               | <b>Fäster mot huden</b>                                 |
| Ej permanent<br>*)                | I viss omfattning<br>under bearbetning<br>Permanent<br>vid hoptryckn. | Nej                                | Ja<br>Kan tas isär vid<br>uppvärmning | Ja<br>Kan tas isär vid<br>uppvärmning | Nej                                               | <b>Fäster mot sig själv</b>                             |
| Begränsad                         | Motståndskraftig                                                      | Motståndskraftig                   | Begränsad<br>Endast i en<br>riktning  | Begränsad<br>Endast i en<br>riktning  | Begränsad<br>Endast i en<br>riktning              | <b>Tänjbar</b>                                          |
| Medium                            | Maximum                                                               | Maximum                            | Maximum                               | Maximum                               | Maximum                                           | <b>Stretch-<br/>motstånd</b>                            |
| God                               | Mindre god                                                            | Mindre god                         | God                                   | God                                   | Mindre god                                        | <b>Följsamhet</b>                                       |
| Ja                                | Något<br>(för efter-<br>justering)                                    | Något<br>(för efter-<br>justering) | Ja                                    | Ja                                    | Ja                                                | <b>Minne<br/>(Omformningsbar)</b>                       |
| Nej                               | Nej                                                                   | Nej                                | Nej                                   | Nej                                   | Nej                                               | <b>Fingeravtryck</b>                                    |
| Fina                              | Fina                                                                  | Bör<br>trimmas                     | Bör<br>trimmas                        | Bör<br>trimmas                        | Bör<br>trimmas                                    | <b>Kanter</b>                                           |
| Massiv<br>Perf 13 %<br>Perf 19 %  | Massiv                                                                | Massiv<br>Perf 1 %                 | Nätstruktur                           | Nätstruktur                           | Tredimen-<br>sionell<br>nätstruktur               | <b>Perf/Operf</b>                                       |
| Många.<br>Se urval i<br>katalogen | Vit<br>Beige<br>Blå                                                   | Vit                                | Vit<br>Ljusblå<br>Ljusgrön            | Dispens/ark:<br>Beige<br>Rulle: Vita  | Beige                                             | <b>Färger</b>                                           |
| 70-75°C<br>35 sek –<br>1 min      | 70-75°C<br>35 sek –<br>1 min                                          | 70-75°C<br>35 sek –<br>1 min       | 70°C<br>Ark: 1 min<br>Rulle: 2 min    | 70°C<br>Ark: 1 min<br>Rulle: 2 min    | 70°C<br>3 mm: 2 min<br>5 mm: 2 min<br>7 mm: 2 min | <b>Temperatur<br/>Tid i<br/>vattenbad</b>               |
| 1-2 min<br>2-3 min<br>4-6 min     | 1-2 min<br><br>4-6 min                                                | 4-6 min                            | Ark: 45 s - 1 min<br>Rulle: 2 - 3 min | Ark: 30 - 45 s<br>Rulle: 60 - 90 s    |                                                   | <b>Bearbetningstid<br/>1,6 mm<br/>2,4 mm<br/>3,2 mm</b> |
| <b>Aquaplast Water-colors</b>     | <b>Ezeform</b>                                                        | <b>Ezeform Antimikrobial</b>       | <b>X-Lite Classic</b>                 | <b>X-Lite Premium</b>                 | <b>3D-Lite</b>                                    |                                                         |

Många av våra plaster tillverkas även i andra färger, tjocklekar och perforeringar än vad som angetts i tabellen. Kontakta kundsupport 042-25 27 01 för ytterligare information.

## Egna anteckningar

[illegible]



# Verktyg och tillbehör

[www.camp.se](http://www.camp.se)



## Bandagesax med plasthandtag

Praktisk sax med stort plastgrepp, avsedd för olika plastmaterial. Saxen är tillverkad av rostfritt stål AISI 420 och är autoklaverbar. Ett prisvärt alternativ.

| Art. nr. | Färg  | Material | Längd |
|----------|-------|----------|-------|
| 51211    | Svart | AISI 420 | 18 cm |
| 51212    | Grön  | AISI 420 | 18 cm |
| 51213    | Gul   | AISI 420 | 18 cm |



## Supersax

En extremt vass sax med stort handtag. Passar utmärkt till att klippa i plastmaterial, även när plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras.

| Art. nr. | Material | Längd |
|----------|----------|-------|
| 51217    | AISI 420 | 20 cm |



## Böjd MAYO sax

Böjd sax med små handtag. Lämplig att trimma kanter på ortoser där plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras. Kan användas till höger och vänster hand.

| Art. nr. | Material | Längd |
|----------|----------|-------|
| 51214    | AISI 420 | 14 cm |



## Smith Sax

En mycket vass sax med stort handtag. Är lätt att hantera och att klippa i mjuka plastmaterial. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras.

| Art. nr. | Material | Längd |
|----------|----------|-------|
| 51216    | AISI 420 | 18 cm |



## Gipssax rostfri

En sax i hög kvalitet som klipper lätt i alla material. Nedre blad med fin sågtandning och skarpt vinklat övre blad. Saxen är tillverkad av rostfritt stål och är autoklaverbar.

| Art. nr. | Modell          | Längd |
|----------|-----------------|-------|
| 51208    | Gipssax rostfri | 14 cm |
| 51207    | Gipssax rostfri | 18 cm |



## Gipssax vinklad Nibbler

Liten precisionssax av högsta kvalitet som kan användas till att klippa i kalla och varma plastmaterial. Idealisk till små justeringar runt om ortosen och för att trimma kanter på en färdig ortos eller cirkulär gips. Den nedre skäreggen är tandad. Tillverkad av rostfritt stål och kan autoklaveras.

| Art. nr. | Modell                  | Längd |
|----------|-------------------------|-------|
| 51209    | Gipssax vinklad nibbler | 12 cm |





## Strava Vattenbad

STRAVA Vattenbad är det första på marknaden som har inbyggd UV-sterilisering och rengöringsfunktion vid hög vattentemperatur. Detta dubbla rengöringssystem garanterar att vattnet är 99,99% fritt från skadliga bakterier och virus. Strava Vattenbad är tillverkat av kompositmaterial med hög hållbarhet och isolerande-och beskyddande egenskaper samt har ett estetiskt utseende.

Vattenbadet töms enkelt och snabbt med ett inbyggt pumpsystem på ett par minuter. Vattnet cirkulerar i vattenbadet vilket gör att temperaturen är jämn i vattnet och värms snabbt upp till önskad temperatur. Överskådlig "Touch Screen" i färg gör det enkelt att välja mellan olika förprogrammerade termoplastmaterial eller att skapa sina egna favoritprogram. Kan ställas in för att starta och stänga automatiskt.

Skydda vattenbadet med en "non-stick" återanvändningsbar duk för att undvika att material fäster i botten. Denna kan klippas till önskad storlek.

| Art. nr. | Modell          | Bredd                           | Längd                         | Höjd                            |
|----------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 64507    | Vattenbad       | Ytermått:51,6 cm<br>Tub:31,6 cm | Ytermått:59 cm<br>Tub:48,6 cm | Ytermått:22,6 cm<br>Tub:14,7 cm |
| 64508    | Dräneringsslang |                                 |                               |                                 |
| 64509    | Värmeelement    |                                 |                               |                                 |
| 64510    | EU elkabel      |                                 |                               |                                 |
| 64511    | DK adapter      |                                 |                               |                                 |
| 64512    | UV lampa        |                                 |                               |                                 |



## X-LITE® plåt med silikonbeläggning

Används som arbetsyta vid gipsning med X- LITE. Silikonbeläggningen förhindrar att X-LITE fastnar i underlaget. Den perforerade ytan på plåten gör att överflödigt vatten ifrån X- LITE rullarna lätt kan rinna ner under plåten och sugas upp av underliggande handduk.

| Art. nr. | Bredd  | Längd  |
|----------|--------|--------|
| 64811    | 325 mm | 530 mm |



# Test, träning och behandling

[www.camp.se](http://www.camp.se)



## ProWrap by Fabrifoam

ProWrap by Fabrifoam med låg till medium elasticitet. Sträcker primärt i en riktning.

Fabrifoam kan användas inom många olika områden som tillverkning av mjuka ortoser, ortosband, stabiliserande förband och kompressionsförband. Materialet utgör ett alternativ till neoprene. Fabrifoam finns i två olika grader av stretch. Materialet är hudvänligt, andas och transporterar fukt. Materialet som är tunt har en antihalksida som inte glider mot huden och en sida mot vilken hårt kardborrband fäster lätt. Innehåller inte gummi.

| Art. nr. | Färg  | Storlek        | Förp.    |
|----------|-------|----------------|----------|
| 50500    | Beige | 50 mm x 3,6 m  | 2 rullar |
| 50502    | Beige | 150 mm x 4,5 m | 1 rulle  |



## NuStim Wrap by Fabrifoam

NuStim Wrap by Fabrifoam med medium elasticitet. Sträckbar i alla riktningar.

Formar sig väl efter kroppens konturer. Fabrifoam kan användas inom många olika områden, som tillverkning av mjuka ortoser, ortosband, stabiliserande förband och kompressionsförband. Materialet utgör ett alternativ till neoprene. Fabrifoam finns i två olika grader av stretch. Materialet är hudvänligt, andas och transporterar fukt. Materialet som är tunt har en antihalksida som inte glider mot huden och en sida mot vilken hårt kardborrband fäster lätt. Innehåller inte gummi.

| Art. nr. | Färg | Storlek         | Förp.    |
|----------|------|-----------------|----------|
| 50505    | Blå  | 100 mm x 0,91 m | 3 rullar |
| 50506    | Blå  | 100 mm x 1,22 m | 3 rullar |
| 50508    | Blå  | 150 mm x 1,22 m | 3 rullar |



## Cica Care silicongel

Cica Care används för att reducera ärrvävnadsbildning och får endast användas på läkta sår. Ökar rörlighet och funktion i ärrvävnadsområdet och minskar uppkomst av hypotrofi och keloider. Den goda vidhäftningsförmågan gör att tejp och bandage inte behövs. Kan tas av smärtfritt och enkelt återappliceras. Cica Care kan också användas på områden där tryck inte får uppstå. Materialet kan tvättas och sättas tillbaka.

| Art. nr. | Bredd  | Längd  | Förp.  |
|----------|--------|--------|--------|
| 54600    | 120 mm | 150 mm | 1 ark  |
| 54601    | 120 mm | 150 mm | 10 ark |

## R-lite foam block

Handträningsblock av T-Foam. Materialet har långsam återgång till sitt ursprung, vilket hjälper patienten att ej överanstränga sig. Finns i fyra olika hårdhetsgrader. Tvättas i varmt vatten med mild tvållösning.

| Art. nr. | Färg               | Hårdhet    | Mått           | Förp.    |
|----------|--------------------|------------|----------------|----------|
| 54130    | Gul                | Extra mjuk | 4,4x4,4x7,6 cm | 32 styck |
| 54130    | Rosa               | Mjuk       | 4,4x4,4x7,6 cm | 32 styck |
| 54130    | Blå                | Medium     | 4,4x4,4x7,6 cm | 32 styck |
| 54130    | Grön               | Hård       | 4,4x4,4x7,6 cm | 32 styck |
| 54131    | 3 st av varje färg |            | 4,4x4,4x7,6 cm | 12 styck |



## Jamar® handdynamometer

Ett enkelt och säkert verktyg för att löpande kontrollera greppstyrka vid olika utvärderingar. Skala mellan 0 - 90 kg. Kalibrering rekommenderas en gång om året för att säkerhetsställa hållbarheten och tillförlitligheten. Levereras i praktisk väska som också fungerar som förvaring.

**Övrigt:** Garantitid 1 år. Garantin omfattar inte kalibrering.

| Art. nr. | Modell                |
|----------|-----------------------|
| 52100    | Jamar Handdynamometer |
| 52101    | Kalibrering           |



## Jamar® Pinch Gauge

Mäter fingerstyrka med mycket hög precision. Den röda indikationsnålen stannar kvar tills mätaren återställts. Fungerar med hydraulik och den isometriska designen säkrar korrekt mätning. Skala mellan 0 - 20 kg. Levereras i praktisk väska som också fungerar som förvaring.

**Övrigt:** Garantitid 1 år. Instruktionsmanual finns enbart på engelska.

| Art. nr. | Modell            |
|----------|-------------------|
| 52110    | Jamar Pinch Gauge |





## Goniometer

Använd denna genomskinliga plastgoniometer för att enkelt och effektivt kunna mäta rörelseomfångets vinklar på stora leder. Mäter rörelseomfång 180° med 2° intervall.

| Art. nr. | Modell       | Färg        | Mått 1 | Mått 2 |
|----------|--------------|-------------|--------|--------|
| 52200    | Större leder | Transparent | 15 cm  | 15 cm  |

**Mått 1:** Längd arm 1

**Mått 2:** Längd arm 2



## Pegtest 9 håls

Ett enkelt test för bedömning av handfunktion. Lätthanterligt storleksformat. Alla bitar kan desinficeras. Stoppur är inkluderat.

| Art. nr. | Modell       | Förp.   |
|----------|--------------|---------|
| 52315    | Pegtest      |         |
| 52316    | Extra peggår | 9 styck |



## Purdue Pegboard test

Mäter två olika aktiviteter:

1. Stora rörelser av fingrar, hand och arm.
2. Känsl i fingertopparna.

Förpackningen inkluderar instruktionsmanual, normalvärde och 25 protokoll. Stoppur ej inkluderat.

| Art. nr. | Modell               |
|----------|----------------------|
| 52320    | Purdue Pegboard test |
| 52321    | Extra delar          |

## Grooved Pegboard

Ett stimulerande test för fingermotorik och visuell förmåga som mäter mer komplett motorik och koordination än de flesta Pegboard. Innehåller 25 hål med slumpvis placerade former vilka kräver rotation vid isättning.

| Art. nr. | Modell           | Förp.    |
|----------|------------------|----------|
| 52325    | Grooved Pegboard |          |
| 52326    | Extra peggar     | 30 styck |



## Ödemhandske

Smidig och bekväm handske som ger lätt kompression för att minska ödem. Tillverkad i lycra och spandex. Finns i två utföranden: Hela och öppna fingrar för att kontrollera funktion och svullnad.

**Övrigt:** Kompressionsklass I.

| Art. nr. | Modell        | Storlek | Mått    | Förp.   | Vä/Hö |
|----------|---------------|---------|---------|---------|-------|
| 53535    | Hela fingrar  | X-Small | 17,8 cm | I styck | Vä/Hö |
| 53535    | Hela fingrar  | Small   | 20,3 cm | I styck | Vä/Hö |
| 53535    | Hela fingrar  | Medium  | 22,9 cm | I styck | Vä/Hö |
| 53535    | Hela fingrar  | Large   | 25,4 cm | I styck | Vä/Hö |
| 53536    | Öppna fingrar | X-Small | 17,8 cm | I styck | Vä/Hö |
| 53536    | Öppna fingrar | Small   | 20,3 cm | I styck | Vä/Hö |
| 53536    | Öppna fingrar | Medium  | 22,9 cm | I styck | Vä/Hö |
| 53536    | Öppna fingrar | Large   | 25,4 cm | I styck | Vä/Hö |



**Mått:** Handens omkrets vid tumvecket.





## Vacuumkuddar

Vacuumkudde fylld med små granulatkulor som formar sig när luften evakueras. Kan omformas genom att ventilen öppnas. Kudden har god vacuumstabilitet och låg vikt. Separata blå kuddvar kan beställas.

**Användningsområden:** Vid operationer och som stöd vid sittande. Kan också användas av tandläkare.

| Art. nr. | Modell                   | Färg | Storlek  |
|----------|--------------------------|------|----------|
| 22393    | Vacuumkudde              | Vit  | 55x30 cm |
| 22394    | Vacuumkudde              | Vit  | 55x65 cm |
| 22395    | Vacuumkudde              | Vit  | 55x85 cm |
| 22396    | Vacuumkudde              | Vit  | 40x50 cm |
| 22275    | Enhandspump              |      |          |
| 26334    | Ventill till vacuumkudde |      |          |




## Urias splint

Urias splintar ger ett jämnt tryck på arm, ben, hand och fot. Splintarna är gjorda i dubbelt lager PVC och försluts med dragkedja. Det transparenta materialet ger kontroll över splintens position. OBS! Trycket får ej överstiga 40 mmHg.

**Användningsområden:** Vid ödembehandling och proprioceptiv stimulering vid neurologisk rehabilitering.

| Art. nr. | Modell                | Längd   |
|----------|-----------------------|---------|
| 53510    | Lång arm              | 80 cm   |
| 53511    | Kort arm              | 70 cm   |
| 53512    | Halv arm              | 53 cm   |
| 53513    | Armbåge               | 40 cm   |
| 53516    | Fot                   | 32 cm   |
| 53517    | Ben stor              | 66 cm   |
| 53519    | Hand                  | 20 cm   |
| 53518    | Ben liten             | 56 cm   |
| 53515    | Munstycke             | 100 st  |
| 53514    | Filter till munstycke | 5 styck |

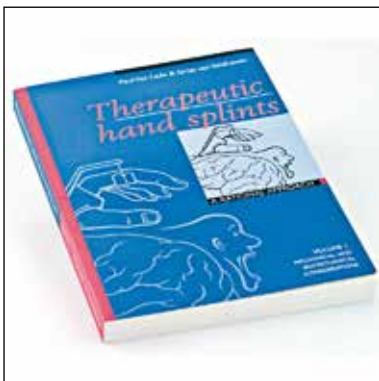

## Bok: Therapeutic hand splints

Paul Van Ledes och Griet van Veldhovens 2 volymer innehåller allt du behöver veta om handen, dess anatomi, biomekanik och patologi som berör ortoser och skenor. Volym 2 ger goda exempel på framställning av ortoser och dess användning. Böckerna är på engelska.

| Art. nr. | Beskrivning                                 | Volym |
|----------|---------------------------------------------|-------|
| 99200    | Mechanical and biomechanical considerations | I     |
| 99201    | Practical applications                      | II    |



## Kinetec™ Spectra Essential Knä

Spectra har en lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll. Endast på- och avstängningsknapparna kan användas när de individuella inställningarna för patienten är gjorda och låsta. Den är justerbar för patientlängd från 145 cm upp till 195 cm och ställbar i rörelseintervall -10° till 120° flexion. Finns bland annat med hygienisk plastpolstring som kan spritas av. Spectra Essential är den enklast modellen av Spectra, denna kan man enkelt uppgradera till Spectra genom att byta handkontrollen och uppgradera till en Kompanion genom att byta både handkontroll samt ett uppgraderingskit med eller utan fotplatta.



| Art. nr. | Modell            | Material       |
|----------|-------------------|----------------|
| 40681    | Spectra Essential | Tygpstring     |
| 40682    | Spectra Essential | Plastpolstring |

## Kinetec™ Performa knä

Performa är justerbar för patientlängd från 112 cm upp till 206 cm. Även denna maskin har lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll där alla inställningar görs. Maskinen tillåter även aktiv rörelse i både flexion och extension. Finns bl. a. med hygienisk plastpolstring, timer, rörelseintervall -3° till 130° flexion, förprogrammerbar för upp till 16 patienter, tillåter aktiv rörelse, justerbar längd.



| Art. nr. | Modell   | Material       |
|----------|----------|----------------|
| 40620    | Performa | Tygpstring     |
| 40624    | Performa | Plastpolstring |

## Kinetec™ Centura 5 Armbåge/Axel

Centura 5 är en maskin med många funktioner och möjligheter som drivs av 2 motorer som enkelt monteras enligt färgkoder beroende på vilken rörelse man vill träna. Funktionerna täcker de viktigaste rörelserna i axel och armbåge vid rehabiliteringen. Centura 5 kan rörelseträna flexion-extension, abduktion-adduktion, rotation, även rotation samtidigt som flexion eller abduktion samt horisontell abduktion och adduktion. De olika funktionerna kan kombineras och ge flexibilitet i behandlingen. Rörelseaxeln centreras vid aktuell led. Justerbar i höjd och längd. Maskinen och stolen kan enkelt rullas vid förflyttningar. Ergonomisk handkontroll.



| Art. nr. | Modell    | Material       |
|----------|-----------|----------------|
| 40630    | Centura 5 | Plastpolstring |



## Kinetec™ Spectra knä

Spectra har en lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll. Endast på- och avstängningsknapparna kan användas när de individuella inställningarna för patienten är gjorda och låsta. Den är justerbar för patientlängd från 145 cm upp till 195 cm och ställbar i rörelseintervall  $-10^{\circ}$  till  $120^{\circ}$  flexion. Finns bland annat med hygienisk plastpolstring som kan spritas av. Spectra och Spectra XL är mellanmodellen, det som skiljer dessa två åt är att XL har en bredare och starkare maskin som även klarar de största och tyngsta patienterna (max 227 kg). Dessa båda har alla funktioner som Essential och även uppvärmningsprogram och timer. Denna kan även lätt uppgraderas till en Kompanion genom att köpa ett uppgraderingskit, med eller utan fotplatta.

| Art. nr. | Modell     | Material       |
|----------|------------|----------------|
| 40660    | Spectra    | Tygpolstring   |
| 40664    | Spectra    | Plastpolstring |
| 40687    | Spectra XL | Tygpolstring   |
| 40688    | Spectra XL | Plastpolstring |



## Kinetec™ Spectra Kompanion Knä

Spectra har en lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll. Endast på- och avstängningsknapparna kan användas när de individuella inställningarna för patienten är gjorda och låsta. Den är justerbar för patientlängd från 145 cm upp till 195 cm och ställbar i rörelseintervall  $-10^{\circ}$  till  $120^{\circ}$  flexion. Finns bland annat med hygienisk plastpolstring som kan spritas av.

Denna är en uppgraderad Spectra med Touch Screen och med Bluetooth där patienten och Fysioterapeut/Sköterska och Läkare kan få ut maximal information under och efter träning. Det går att ställa in uppvärmningsprogram, rörelseomfång, antal repetitioner. Samt få en utvärdering av framsteg. Det går även att välja mellan olika språk, träningsprogram som kan pusha patienten och motståndsovnningar. Det går även att ha videosamtal mellan vårdpersonal och patient direkt i touchenheten, som hanteras som en surfplatta, vilket förenklar uppföljning av patienterna. Även utveckling och framsteg för patienten går att följa och ta ut i protokollform vilket tydliggör effekten av rehabiliteringen för alla inblandade. Samt en rad andra funktioner som förenklar och förbättrar möjligheterna för vårdpersonal och patienter. Funktionen "Kompanion" kan även köpas som en separat uppgradering till både Spectra (40660/40664) och Essential (40681/40682).

| Art. nr. | Modell            | Material       |
|----------|-------------------|----------------|
| 40685    | Spectra Kompanion | Tygpolstring   |
| 40686    | Spectra Kompanion | Plastpolstring |

# Försäljningsvillkor

## LEVERANSER

Det är vår ambition att vi skall ha en god leveransförmåga på de produkter som exponeras i Camps produktkatalog. Vissa ytterstorlekar och tillbehör kan förekomma som beställningsvaror med en något längre leveranstid. Detsamma gäller måttbeställda produkter: Order överstigande 1.000 kr levereras fritt mottagaren. För övriga order debiteras frakt med 99 kr per leverans.

## RETURER

Före eventuella returerna måste vårt medgivande inhämtas. Kontakta kundsupport för erhållande av returrnummer. I de fall returen gäller byte eller felbeställning ska produkterna återsändas komplett i originalförpackning och returneras senast 2 månader efter mottagandet. I de fall ett byte eller felbeställning överstiger 2 månader upp till 4 månader dras 50 % av på faktura beloppet. Returer och felbeställningar som överstiger 4 månader återtages ej. Specialbeställda varor och beställningsvaror återtages ej.

## BETALNINGSVILLKOR

Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt diskonto +8%. Priser är gällande t.o.m. 2022-12-31. Vi förbehåller oss dock rätten till prisändringar under perioden som kan framtvingas av pris- och/eller valutaförändringar. Priser är alltid angivna exklusive moms.

## ARTIKELNUMMER

Camps artikelnummer består av nio siffror. De fem första siffrorna identifierar produkten. Resterande siffror beskriver om produkten är höger eller vänster, vilken storlek eller annat.

|                                              |                   |             |            |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| Exempel: ToeOFF 2.0 vänster medium 289201012 | 28920: ToeOFF 2.0 | 10: Vänster | 12: Medium |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|

|             |              |
|-------------|--------------|
| 10: Vänster | 09: XX-Small |
| 20: Höger   | 10: X-Small  |
|             | 11: Small    |
|             | 12: Medium   |
|             | 13: Large    |
|             | 14: X-Large  |
|             | 15: XX-Large |

## VIKTIGT OM PRODUKTERNAS MATERIAL OCH SKÖTSEL

I de fall det finns viktig information som kräver beaktande före beställning, anges detta under rubriken "Övrigt" i samband med produkttexterna i denna katalog. Camps textila sortiment skall handtvättas och plantorkas om inte annat anges i användarinstruktionen eller på etikettmärkningen i produkten. Rigida ortoser torkas av med fuktig trasa.

## FÖR BÄTTRE MILJÖ

Camp undviker produkter som innehåller miljö- och hälsofarliga material. För Camp Scandinavia är det av högsta vikt att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att minsta möjliga påverkan på miljön sker, under beaktande av sunda affärsmässiga principer. Camp tar sitt producentansvar enligt WEEE-direktivet, Batteriförordningen samt Förpackningsförordningen och är medlem/rapporterar till de olika insamlingssystemen i respektive land där vi har verksamhet.



# Försäljningsorganisation & Kundsupport



**Admir Vrbanjac,**  
Produktspecialist/Leg. Arbetsterapeut  
Telefon: 0722 10 52 81  
E-post: [admir.vrbanjac@camp.se](mailto:admir.vrbanjac@camp.se)  
Ansvarsområden:  
*Arbetsterapiprodukter*



**Eva Peterson**  
Produktspecialist  
Telefon: 0704 50 50 95  
E-post: [eva.peterson@camp.se](mailto:eva.peterson@camp.se)  
Ansvarsområden:  
*Bröstproteser, arbetsterapiprodukter  
samt textila ryggortoser*



**Johan Thunberg**  
Produktspecialist/Leg. Fysioterapeut  
Telefon: 0704 58 22 64  
E-post: [johan.thunberg@camp.se](mailto:johan.thunberg@camp.se)  
Ansvarsområden:  
*Rigida ortoser, ortoskomponenter  
och material.*



**Marcus Nilsson**  
Produktspecialist/Ortopedtekniker  
Telefon: 0704 50 50 87  
E-post: [marcus.nilsson@camp.se](mailto:marcus.nilsson@camp.se)  
Ansvarsområden:  
*Rigida ortoser, ortoskomponenter  
och material.*



**Hana Khedher**  
Produktspecialist/Leg. Arbetsterapeut  
& Bid Manager  
Telefon: 042 25 27 14  
E-post: [hana.khedher@camp.se](mailto:hana.khedher@camp.se)  
Ansvarsområden:  
*Arbetsterapiprodukter*



**Ann Petersson**  
Säljkoordinator  
Telefon: 042 25 27 11  
E-post: [ann.petersson@camp.se](mailto:ann.petersson@camp.se)



**Jenny Mårtensson**  
Kundsupport  
Telefon: 042 25 27 04  
E-post: [jenny.martensson@camp.se](mailto:jenny.martensson@camp.se)



**Annika Lilja**  
Kundsupport  
Telefon: 042 25 27 17  
E-post: [annika.lilja@camp.se](mailto:annika.lilja@camp.se)



**Anders Jemth**  
Försäljningschef  
Telefon: 0704 50 50 85  
E-post: [anders.jemth@camp.se](mailto:anders.jemth@camp.se)