



# Test, träning och behandling

[www.camp.se](http://www.camp.se)



## ProWrap by Fabrifoam

ProWrap by Fabrifoam med låg till medium elasticitet. Sträcker primärt i en riktning.

Fabrifoam kan användas inom många olika områden som tillverkning av mjuka ortoser, ortosband, stabiliserande förband och kompressionsförband. Materialet utgör ett alternativ till neoprene. Fabrifoam finns i två olika grader av stretch. Materialet är hudvänligt, andas och transporterar fukt. Materialet som är tunt har en antihalksida som inte glider mot huden och en sida mot vilken hårt kardborrband fäster lätt. Innehåller inte gummi.

Art. nr.	Färg	Storlek	Förp.
50502	Beige	150 mm x 4,5 m	1 rulle



## R-lite foam block

Handträningsblock av T-Foam. Materialet har långsam återgång till sitt ursprung, vilket hjälper patienten att ej överanstränga sig. Finns i fyra olika hårdhetsgrader. Tvättas i varmt vatten med mild tvållösning.

Art. nr.	Färg	Hårdhet	Mått	Förp.
54130	Gul	Extra mjuk	4,4x4,4x7,6 cm	32 styck
54130	Rosa	Mjuk	4,4x4,4x7,6 cm	32 styck
54130	Blå	Medium	4,4x4,4x7,6 cm	32 styck
54130	Grön	Hård	4,4x4,4x7,6 cm	32 styck
54131	3 st av varje färg		4,4x4,4x7,6 cm	12 styck



## Jamar® handdynamometer

Ett enkelt och säkert verktyg för att löpande kontrollera greppstyrka vid olika utvärderingar. Skala mellan 0 - 90 kg. Kalibrering rekommenderas en gång om året för att säkerhetsställa hållbarheten och tillförlitligheten. Levereras i praktisk väska som också fungerar som förvaring.

**Övrigt:** Garantitid 1 år. Garantin omfattar inte kalibrering.

Art. nr.	Modell
52100	Jamar Handdynamometer
52101	Kalibrering

## Jamar® Pinch Gauge

Mäter fingerstyrka med mycket hög precision. Den röda indikationsnålen stannar kvar tills mätaren återställts. Fungerar med hydraulik och den isometriska designen säkrar korrekt mätning. Skala mellan 0 - 20 kg. Levereras i praktisk väska som också fungerar som förvaring.

**Övrigt:** Garantitid 1 år. Instruktionsmanual finns enbart på engelska.

Art. nr.	Modell
52110	Jamar Pinch Gauge



## Goniometer

Använd denna genomskinliga plastgoniometer för att enkelt och effektivt kunna mäta rörelseomfångets vinklar på stora leder. Mäter rörelseomfång 180° med 2° intervall.

Art. nr.	Modell	Färg	Mått 1	Mått 2
52200	Större leder	Transparent	15 cm	15 cm



**Mått 1:** Längd arm 1

**Mått 2:** Längd arm 2

## Pegtest 9 håls

Ett enkelt test för bedömning av handfunktion. Lätthanterligt storleksformat. Alla bitar kan desinficeras. Stoppur är inkluderat.

Art. nr.	Modell	Förp.
52315	Pegtest	
52316	Extra peggår	9 styck



## Purdue Pegboard test

Mäter två olika aktiviteter: 1. Stora rörelser av fingrar, hand och arm. 2. Känsel i fingertopparna. Förpackningen inkluderar instruktionsmanual, normalvärde och 25 protokoll. Stoppur ej inkluderat.

Art. nr.	Modell
52320	Purdue Pegboard test





## Grooved Pegboard

Ett stimulerande test för fingermotorik och visuell förmåga som mäter mer komplett motorik och koordination än de flesta Pegboard. Innehåller 25 hål med slumpvis placerade former vilka kräver rotation vid isättning.

Art. nr.	Modell	Förp.
52325	Grooved Pegboard	
52326	Extra peggår	30 styck



## Vacuumkuddar

Vacuumkudde fylld med små granulatkulor som formar sig när luften evakueras. Kan omformas genom att ventilen öppnas. Kudden har god vacuumstabilitet och låg vikt. Separata blå kuddvar kan beställas.

**Användningsområden:** Vid operationer och som stöd vid sittande. Kan också användas av tandläkare.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek
22393	Vaccumkudde	Vit	55x30 cm
22394	Vaccumkudde	Vit	55x65 cm
22395	Vaccumkudde	Vit	55x85 cm
22396	Vaccumkudde	Vit	40x50 cm
22275	Enhandspump		
26334	Ventill till vacuumkudde		

## Urias splint

Urias splintar ger ett jämnt tryck på arm, ben, hand och fot. Splintarna är gjorda i dubbelt lager PVC och försluts med dragkedja. Det transparenta materialet ger kontroll över splintens position. OBS! Trycket får ej överstiga 40 mmHg.

**Användningsområden:** Vid ödembehandling och proprioceptiv stimulering vid neurologisk rehabilitering.

Art. nr.	Modell	Längd
53510	Lång arm	80 cm
53511	Kort arm	70 cm
53512	Halv arm	53 cm
53513	Armbåge	40 cm
53516	Fot	32 cm
53517	Ben stor	66 cm
53519	Hand	20 cm
53518	Ben liten	56 cm
53515	Munstycke	100 st
53514	Filter till munstycke	5 styck





**Mått:** Omkrets vid MP-led.

## Isotoner® handskar

Isotoner® terapeutiska handskar lindrar smärta och svullnad i samband med artrit eller smärta och svullnad efter handskador.

Finns i alternativ med öppet finger eller helt finger. Det mjuka stretchmaterialet i nylon och spandex ger en mild, jämn kompression för att lindra smärta och förebygga ödem. Alla sömmar finns på handskens utsida och området runt tummen är helt fritt från sömmar. Ger måttlig kompression vid cirka 23 till 32 mm Hg tryck. Handskarna har unisexstorlek för både män och kvinnor.

**Övrigt:** Kompressionsklass 2

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått	Förp.
53538	Öppna fingrar	XS	11 cm – 14 cm	Par
53538	Öppna fingrar	S	14 cm – 17 cm	Par
53538	Öppna fingrar	M	17 cm - 19 cm	Par
53538	Öppna fingrar	L	19 cm - 22 cm	Par
53539	Hela fingrar	XS	11 cm – 14 cm	Par
53539	Hela fingrar	S	14 cm – 17 cm	Par
53539	Hela fingrar	M	17 cm - 19 cm	Par
53539	Hela fingrar	L	19 cm - 22 cm	Par

## Ödemhandske

Handsken är tillverkad av mjuk, silkeslen nylonlycra och har alla sömmar på utsidan. Handsken finns med hela fingrar eller i  $\frac{3}{4}$  längd. Ger kompression för att lindra ödem i mjuka vävnader och smärta vid artrit. Handsken har en öppen slits i manschetten för enkel påtagning och mjuk passform. Ger 15–25 mmHg skonsam och jämn kompression av ödematös vävnad. Längden proximalt från handleden är 76 mm.

**Övrigt:** Kompressionsklass I.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått	Förp.	Vä/Hö
53535	Hela fingrar	XXS	10-11 cm	1 styck	Vä/Hö
53535	Hela fingrar	XS	11-14 cm	1 styck	Vä/Hö
53535	Hela fingrar	Small	14-17 cm	1 styck	Vä/Hö
53535	Hela fingrar	Medium	17-19 cm	1 styck	Vä/Hö
53535	Hela fingrar	Large	19-22 cm	1 styck	Vä/Hö
53536	Öppna fingrar	XXS	10-11 cm	1 stk.	Vä/Hö
53536	Öppna fingrar	XS	11-14 cm	1 styck	Vä/Hö
53536	Öppna fingrar	Small	14-17 cm	1 styck	Vä/Hö
53536	Öppna fingrar	Medium	17-19 cm	1 styck	Vä/Hö
53536	Öppna fingrar	Large	19-22 cm	1 styck	Vä/Hö



**Mått:** Omkrets MCP-Led.



**Mått:** Handens omkrets runt MCP-leden

## Thermoskin® värmehandskar


Värmehandskar som är formad för komfort. Ger värme och jämn kompression för att tillfälligt lindra artritisk smärta. Den är utformade för daglig användning, och texturen i handflatorna och fingertoppsutskarningarna ger extra bra grepp och en bättre känsla för patienterna.

Det patenterade Trioxon®-materialet stimulerar huden, som då producerar värme. Materialet transporterar bort eventuell fukt från huden och låter den andas. Det har kliniskt bevisats att handsken ökar temperaturen på huden och i underhuden med cirka 2 °C, vilket förbättrar elasticiteten i muskler, senor och ligament.

**Användningsområden:** Smärta, stelhet eller inflammation i fingerlederna, svaghet i lederna, synliga deformiteter i fingrarna.

**Kontraindikationer:** Använd den inte under de första 72 timmarna efter en akut skada.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Förp.
53242	Svart	XS	15-17 cm	I par
53242	Svart	S	18-20 cm	I par
53242	Svart	M	21-23 cm	I par
53242	Svart	L	24-26 cm	I par
53242	Svart	XL	27-29 cm	I par
53242	Svart	XXL	30 cm >	I par

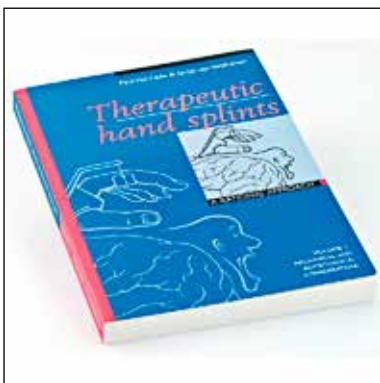

## Bok: Therapeutic hand splints

Paul Van Ledes och Griet van Veldhovens 2 volymer innehåller allt du behöver veta om handen, dess anatomi, biomekanik och patologi som berör ortoser och skenor. Volym 2 ger goda exempel på framställning av ortoser och dess användning. Böckerna är på engelska.

Art. nr.	Beskrivning	Volym
99200	Mechanical and biomechanical considerations	I
99201	Practical applications	II



## Kinetec™ Spectra Essential Knä

Spectra har en lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll. Endast på- och avstängningsknapparna kan användas när de individuella inställningarna för patienten är gjorda och låsta. Den är justerbar för patientlängd från 145 cm upp till 195 cm och ställbar i rörelseintervall  $-10^{\circ}$  till  $120^{\circ}$  flexion. Finns bland annat med hygienisk plastpolstring som kan spritas av. Spectra Essential är den enklast modellen av Spectra, denna kan man enkelt uppgradera till Spectra genom att byta handkontrollen och uppgradera till en Kompanion genom att byta både handkontroll samt ett uppgraderingskit med eller utan fotplatta.



Art. nr.	Modell	Material
40682	Spectra Essential	Plastpolstring

## Kinetec™ Spectra knä

Spectra har en lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll. Endast på- och avstängningsknapparna kan användas när de individuella inställningarna för patienten är gjorda och låsta. Den är justerbar för patientlängd från 145 cm upp till 195 cm och ställbar i rörelseintervall  $-10^{\circ}$  till  $120^{\circ}$  flexion. Finns bland annat med hygienisk plastpolstring som kan spritas av. Spectra och Spectra XL är mellanmodellerna, det som skiljer dessa två åt är att XL har en bredare och starkare maskin som även klarar de största och tyngsta patienterna (max 227 kg). Dessa båda har alla funktioner som Essential och även uppvärmningsprogram och timer. Denna kan även lätt uppgraderas till en Kompanion genom att köpa ett uppgraderingskit, med eller utan fotplatta.



Art. nr.	Modell	Material
40664	Spectra	Plastpolstring
40688	Spectra XL	Plastpolstring



## Kinetec™ Spectra Kompanion Knä

Spectra har en lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll. Endast på- och avstängningsknapparna kan användas när de individuella inställningarna för patienten är gjorda och låsta. Den är justerbar för patientlängd från 145 cm upp till 195 cm och ställbar i rörelseintervall  $-10^{\circ}$  till  $120^{\circ}$  flexion. Finns bland annat med hygienisk plastpolstring som kan spritas av.

Denna är en uppgraderad Spectra med Touch Screen och med Bluetooth där patienten och Fysioterapeut/Sköterska och Läkare kan få ut maximal information under och efter träning. Det går att ställa in uppvärmningsprogram, rörelseomfång, antal repetitioner. Samt få en utvärdering av framsteg. Det går även att välja mellan olika språk, träningsprogram som kan pusha patienten och motståndsövningar. Det går även att ha videosamtal mellan vårdpersonal och patient direkt i touchenheten, som hanteras som en surfplatta, vilket förenklar uppföljning av patienterna. Även utveckling och framsteg för patienten går att följa och ta ut i protokollform vilket tydliggör effekten av rehabiliteringen för alla inblandade. Samt en rad andra funktioner som förenklar och förbättrar möjligheterna för vårdpersonal och patienter. Funktionen "Kompanion" kan även köpas som en separat uppgradering till både Spectra (40660/40664) och Essential (40681/40682).

Art. nr.	Modell	Material
40686	Spectra Kompanion	Plastpolstring



## Kinetec™ Performa knä

Performa är justerbar för patientlängd från 112 cm upp till 206 cm. Även denna maskin har lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll där alla inställningar görs. Maskinen tillåter även aktiv rörelse i både flexion och extension. Finns bl. a. med hygienisk plastpolstring, timer, rörelseintervall  $-3^{\circ}$  till  $130^{\circ}$  flexion, förprogrammerbar för upp till 16 patienter, tillåter aktiv rörelse, justerbar längd.

Art. nr.	Modell	Material
40624	Performa	Plastpolstring

## Kinetec™ Centura 5 Armbåge/Axel

Centura 5 är en maskin med många funktioner och möjligheter som drivs av 2 motorer som enkelt monteras enligt färgkoder beroende på vilken rörelse man vill träna. Funktionerna täcker de viktigaste rörelserna i axel och armbåge vid rehabiliteringen. Centura 5 kan rörelseträna flexion-extension, abduktion-adduktion, rotation, även rotation samtidigt som flexion eller abduktion samt horisontell abduktion och adduktion. De olika funktionerna kan kombineras och ge flexibilitet i behandlingen. Rörelseaxeln centreras vid aktuell led. Justerbar i höjd och längd. Maskinen och stolen kan enkelt rullas vid förflyttningar. Ergonomisk handkontroll.



Art. nr.	Modell	Material
40630	Centura 5	Plastpolstring

