


Aquaplast-T™

Aquaplast-T™ är en variant av det ursprungliga Aquaplast™ och har en polycaprolaktonbas som hjälper till att balansera materialets anpassningsförmåga och motståndskraft mot sträckning. Detta ger mer kontroll över hur mycket materialet sträcker sig under tillverkning av ortoser. Till skillnad från Aquaplast har Aquaplast-T en vattenbaserad beläggning som förhindrar oavsiktlig vidhäftning. Med hjälp av 100 procent minne kan Aquaplast™ värmas upp och omformas upprepade gånger. Detta gör den till ett idealiskt val för statiska progressiva och seriella statiska ortoser, där ortosen måste omformas när patientens tillstånd förändras. Materialet blir transparent när det är mjukt, vilket gör det enklare att identifiera punkter för positionering och tryckpunkter för ökad komfort. Aquaplast-T™ är gift-och latexfri. Produkten är röntgengenomsläpplig.

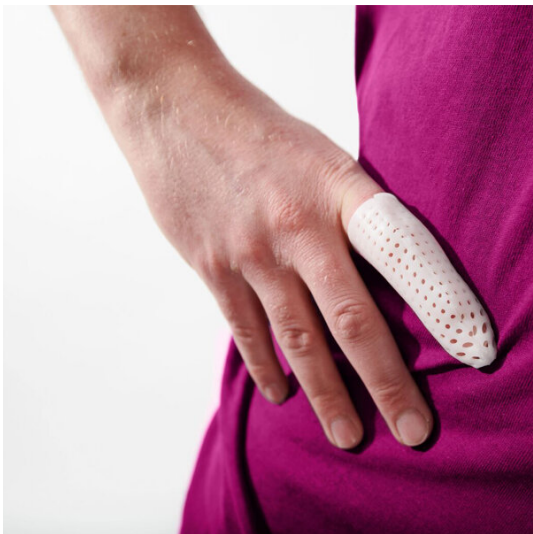

Användningsområde

Bas till dynamiska och statiska ortoser för tum-, finger- och handledsortoser, 3,2 mm även till arm- och benortoser.

Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Typ
501260000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
501270000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
501280000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501290000	Vit	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501340000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Superperf. 42%
501350000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Superperf. 42%
501360000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Optiperf. 19%
501370000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Optiperf. 19%
501380000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
503310000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraperf. 13%
503320000	Vit	460 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraperf. 13%