


Ezeform™ och Ezeform™ light

Ezeform™ agerar som isoprenegummi trots att Ezeform™ är ett polycaprolacton-baserat ortosmaterial. Med sitt stretchmotstånd och måttliga formbarhet behåller materialet sin form vid ortostillverkning, vilket ger klinikern mer kontroll. Eftersom Ezeform™ har ett högt stretchmotstånd töjs inte materialet ut när det avlägsnas från en hydrokolallator, eller vattenbad. Detta gör Ezeform™ till ett optimalt material vid tillverkning av större ortoser.

Materialet saknar skyddande ytbeläggning och har en lätt klibbig yta vilket gör att den inte glider vid modellering. Ezeform™ fäster permanent mot sig själv i uppvärmt tillstånd. Materialet kan även återuppvärmas och omformas upprepade gånger men när materialet är sträckt kommer det inte att återgå till sin ursprungliga form eftersom materialet saknar minne.

Användningsområde

Ortoser till patienter med neurologiska sjukdomar, vilo- och funktionella ortoser till både övre och nedre extremiteter, bas till större dynamiska ortoser, Ezeform light till barnortoser.

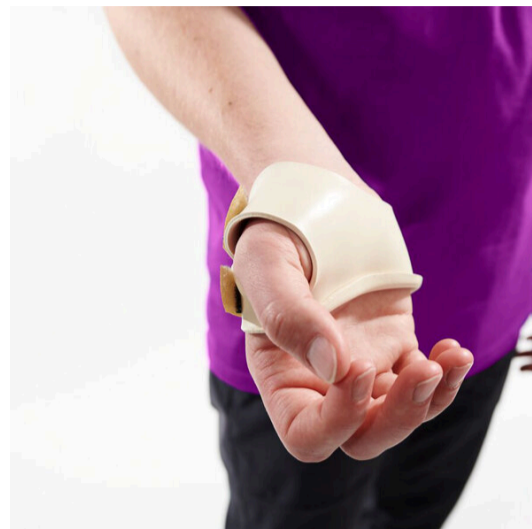

Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
501700000	Vit	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501710000	Vit	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501730000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501740000	Beige	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Massiv
501750000	Blå	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501760000	Blå	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Massiv
501780000	Vit	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Perf 1 %
501790000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Perf 1 %
501800000	Beige	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Perf 1 %
501810000	Blå	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Perf 1 %
501820000	Blå	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Perf 1 %
501830000	Vit	460 mm	4 ark	310 mm	1,6 mm	Massiv
501840000	Beige	460 mm	4 ark	310 mm	1,6 mm	Massiv
501880000	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Perf 1 %
501890000	Svart	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv